

CASSY<sup>®</sup> Lab Handbuch (524 201)



# Copyright

Die freigeschaltete Software darf nur vom Käufer und ausschließlich zum Gebrauch für den von der Schule oder Institution erteilten Unterricht genutzt werden! Das schließt die Nutzung für die häusliche Vorbereitung ein.

Es ist unzulässig, den Freischaltcode an Kollegen anderer Schulen oder Institutionen weiterzugeben.

Die Firma LD Didactic GmbH behält sich gerichtliche Schritte bei Verstößen gegen diese Regelung vor.

CASSY® ist eine eingetragene Marke der Firma LD Didactic GmbH.

Handbuchautoren: Dr. Michael Hund

Dr. Karl-Heinz Wietzke Dr. Timm Hanschke Dr. Werner Bietsch Dr. Antje Krause Frithjof Kempas Christoph Grüner Mark Metzbaur Barbara Neumayr Bernd Seithe

Grafik: Oliver Nießen Stand: 12.08.05

# Inhalt

Wichtige Informationen nach der Installation von CASSY Lab Eigene Software für CASSY-S	7 7 8
CASSY Lab  Messung Messung (VKA-Box) Tabellendarstellung ändern Grafische Auswertungen Addition / Subtraktion von Spektren (VKA-Box) Gaußkurven und Zählraten	9 13 15 16 17 23 23
Einstellungen Einstellungen CASSY Einstellungen Parameter/Formel/FFT Einstellungen Darstellung Modellbildung Einstellungen Kommentar Allgemeine Einstellungen	24 24 25 26 27 28 28
Formelschreibweise Formelbeispiele	<b>30</b> 33
Sensor-CASSY Technische Daten Einstellungen Sensoreingang Messgrößen Sensoreingang Korrigieren Sensoreingang Einstellungen Relais/Spannungsquelle	34 35 36 37 41 42
Power-CASSY Technische Daten Einstellungen Funktionsgenerator	<b>43</b> 44 45
Profi-CASSY Technische Daten Einstellungen Analogeingang Einstellungen Analogausgang X (Funktionsgenerator) Einstellungen Analogausgang Y Einstellungen Digitaleingang/-ausgang	<b>46</b> 47 48 49 50
CASSY-Display Datenlogger	<b>51</b> 51
Pocket-CASSY Technische Daten Einsatz von Pocket-CASSY	<b>52</b> 53 54
Mobile-CASSY Technische Daten Einsatz von Mobile-CASSY	<b>55</b> 56 57
Joule- und Wattmeter Technische Daten	<b>58</b> 60
Universelles Messinstrument Physik Technische Daten	<b>61</b> 62
Andere serielle Geräte ASCII, Waage, VideoCom, IRPD, MFA 2001 MetraHit	<b>63</b> 63 64

4	CASSY Lab	, ID

Temperaturmessgerät	64 65
Digitales Spektralphotometer Handmessgeräte und Data Logger	65
Antennendrehtisch	66
SVN (Schülerversuche Naturwissenschaften)	67
Gleichmäßig beschleunigte Bewegung	68
Gleichförmige Bewegung zwischen zwei Lichtschranken	70
Gleichmäßig beschleunigte Bewegung zwischen Haltemagnet und Lichtschranke Zusammenhang zwischen Beschleunigung und Masse (F=konstant)	72 74
Zusammenhang zwischen Beschleunigung und Kraft (m=konstant)	74 76
Ohmsches Gesetz	78
Reihenschaltung von Widerständen	80
Parallelschaltung von Widerständen	82
Spannungseinstellung mit einem Potentiometer	84
Prinzip der Wheatstoneschen Messbrücke	86
Der Einfluss des Abstands zwischen Strahlenquelle und Zählrohr auf die Zählrate	88
Versuchsbeispiele Physik	90
Gleichförmige Bewegungen zwischen zwei Lichtschranken Beschleunigte Bewegungen zwischen Haltemagnet und Lichtschranke	92 94
Bewegungen mit Speichenrad (Newtondefinition)	96
Bewegungen auf der Luftkissenfahrbahn (Newtonsche Bewegungsgleichung)	98
Impuls- und Energieerhaltung (Stoß)	100
Impulserhaltung durch Messung der Schwerpunktsbewegung (Stoß)	103
Actio = Reactio durch Messung der Beschleunigungen (Stoß)	105
Freier Fall mit g-Leiter	107
Freier Fall mit g-Leiter (mit Modellbildung) Drehbewegungen (Newtonsche Bewegungsgleichung)	109 111
Drehimpuls- und Energieerhaltung (Drehstoß)	113
Zentrifugalkraft (Fliehkraft-Dreharm)	115
Zentrifugalkraft (Fliehkraftgerät)	117
Harmonische Schwingungen eines Federpendels	119
Abhängigkeit der Schwingungsdauer eines Federpendels von der schwingenden Masse	121
Schwingungen eines Federpendels (mit Modellbildung)	123 126
Schwingungen eines Federpendels mit Festkörperreibung (mit Modellbildung) Schwingungen eines Federpendels mit Schmiermittelreibung (mit Modellbildung)	120
Schwingungen eines Federpendels mit laminarer Flüssigkeitsreibung (mit Modellbildung)	132
Schwingungen eines Federpendels mit turbulenter Flüssigkeitsreibung/Luftreibung	135
Gekoppelte Pendel	138
Akustische Schwebungen	140
Saitenschwingungen	142
Schallgeschwindigkeit in Luft	144
Schallgeschwindigkeit in Luft mit 2 Mikrofonen Schallgeschwindigkeit in Gasen	146 148
Schallgeschwindigkeit in Festkörpern	151
Fourier-Analyse von simulierten Signalen	153
Fourier-Analyse von Signalen eines Funktionsgenerators	155
Tonanalyse	157
Tonsynthese	159
Umwandlung von mechanischer Energie in thermische Energie Umwandlung von elektrischer Energie in thermische Energie	161 164
pV-Diagramm eines Heißluftmotors	167
Coulombsches Gesetz	170
Kraft im magnetischen Feld einer Luftspule	173
Kraft im magnetischen Feld eines Elektromagneten	176
Kraft zwischen stromdurchflossenen Leitern (Amperedefinition)	178
Spannungsstoß (Faradaysches Induktionsgesetz)	181
Induktion durch ein veränderliches Magnetfeld	184
Zeitabhängige Aufzeichnung von Spannung und Strom eines Transformators Leistungsübertragung eines Transformators	188 190
Leistung beliebiger mit Netzwechselspannung betriebener Verbraucher	190
G G	

	Auf- und Entladung eines Kondensators	194
	Auf- und Entladung eines Kondensators (mit Modellbildung)	196
	Auf- und Entladung eines kleinen Kondensators (Kabelkapazitäten)	198
	Gedämpfter Schwingkreis	200
	Gedämpfter Schwingkreis (mit Modellbildung)	202
	Gekoppelte Schwingkreise	204
	Erzwungene Schwingungen (Resonanz)	206
	Erzwungene Schwingungen (mit Modellbildung)	208
	RLC-Filter (Tiefpass, Hochpass, Bandpass)	210
	Tiefpass-Filter (mit Modellbildung)	213
	Hochpass-Filter (mit Modellbildung)	216
	Kennlinie einer Glühlampe Kennlinie einer Diode	219 220
	Kennlinie eines Transistors	223
	Leistungskennlinie einer Solarzelle	225
	Temperaturregelung	227
	Helligkeitsregelung	229
	Spannungsregelung	231
	Beugung am Einzelspalt	233
	Beugung an Mehrfachspalten	236
	Quadratisches Abstandsgesetz für Licht	239
	Lichtgeschwindigkeit in Luft	241
	Lichtgeschwindigkeit in verschiedenen Materialen	243
	Millikan-Versuch	245
	Compton-Effekt an Röntgenstrahlung	248
	Poissonverteilung	252
	Halbwertszeit von Radon	254
	Alpha-Spektroskopie an radioaktiven Proben (Am-241)	256
	Bestimmung des Energieverlustes von Alpha-Strahlung in Luft	258
	Bestimmung des Energieverlustes von Alpha-Strahlung in Aluminium und in Gold	26′ 263
	Altersbestimmung an einer Ra-226 Probe Nachweis von Gamma-Strahlung mit einem Szintillationszähler (Cs-137)	265
	Aufnahme und Kalibrierung eines Gamma-Spektrums	267
	Absorption von Gamma-Strahlung	269
	Identifizierung und Aktivitätsbestimmung an schwach radioaktiven Proben	27
	Aufnahme eines Beta-Spektrums mit einem Szintillationszähler	273
	Quantitative Beobachtung des Compton-Effekts	275
	Aufnahme des komplexen Gamma-Spektrums von Ra-226 und seinen Zerfallsprodukten	277
	Aufnahme des komplexen Gamma-Spektrums eines Glühstrumpfes	279
	Koinzidenz und Gamma-Gamma-Winkelkorrelation beim Zerfall von Positronen	28′
	Messungen mit dem Einkanal-Analysator	284
	Elektrische Leitung in Festkörpern	286
	Hysterese von Trafoeisen	288
V	/ersuchsbeispiele Chemie	291
•	Der Bunsenbrenner	292
	pH-Messung an Lebensmitteln	295
	pH-Messung an Reinigungsmitteln	299
	Bestimmung des pKa-Wertes von Essigsäure	303
	Titration von Phosphorsäure	306
	Schmelz- und Erstarrungspunkt von Palmitinsäure	310
	Unterkühlen einer Schmelze von Natriumthiosulfat	313
	Molmassenbestimmung durch Gefrierpunktserniedrigung	316
	Titration von Salzsäure mit Natronlauge (pH und Leitfähigkeit)	320
	Titration von Haushaltsessig	323
	Titration von Essigsäure mit Natronlauge (pH und Leitfähigkeit)	326
	Automatische Titration von NH3 mit NaH2PO4 (Motorbürette)	329
	Automatische Titration (Tropfenzähler)	332
	Gaschromatographie (Trennung von Alkanen aus Feuerzeuggas) Gaschromatographie (Trennung von Alkoholen)	336 338
	Gaschromatographie (Trennung von Aikonolen)	340
	Aufnahme des Spektrums einer Rohchlorophyll-Lösung (mit dem Spektralphotometer 667 3-	
	The state of the s	,

6 CASSY Lab

Reaktion von Marmor mit Salzsäure (Carbonatbestimmung) Harnstoffspaltung durch Urease (Reaktion 0. Ordnung) Hydrolyse von tertiärem Butylchlorid (Bestimmung der Reaktionsordnung) Reaktion von Marmor mit Salzsäure (Bestimmung der Reaktionsordnung) Alkalische Hydrolyse von Essigsäureethylester (Bestimmung der Reaktionsordnung) Alkalische Hydrolyse von Essigsäureethylester (Bestimmung der Aktivierungsparameter) Differenzthermoanalyse von Kupfersulfat Herstellung einer Kältemischung Bestimmung der Schmelzenthalpie von Eis Gasgesetze Leitfähigkeitsbestimmung verschiedener Lösungen Bestimmung der Grenzleitfähigkeit von Natriumchlorid Bestimmung der Dissoziationskonstanten von Essigsäure Auftrennung eines Zweikomponentengemisches in der Rektifikationsapparatur CE2 Absorption von UV-Strahlung Ozonlochsimulation Treibhauswirkung von CO2	344 346 351 354 358 362 367 370 372 376 379 382 386 391 394
Versuchsbeispiele Biologie Puls Hautwiderstand Elektrokardiogramm (EKG) Elektromyogramm (EMG) Blutdruck Reaktionszeit Lungenvolumen (Spirometrie) Langzeitmessung von Klimadaten	402 403 405 407 410 412 414 416 418
Versuchsbeispiele Technik  Kfz - Zündsysteme  Kfz - Gemischaufbereitungssysteme  Kfz - Bordcomputer mit Radio  Kfz - Komfortsystem mit CAN-Bus  Kfz - Untersuchung von CAN-Datenbus-Signalen  Puls-Code-Modulation (Quantisierung)  Physikalische Grundlagen der Mikrowellentechnik (Kennlinien des Gunn-Oszillators)  Zweiplattenleitung (TEM- und TE-Moden)  Mikrowellenleitung in Hohlleitern (Messung der Stehwelligkeit)  Antennentechnik  Antriebstechnik	420 421 424 428 430 432 434 436 438 441 444

# **Einleitung**

Dieses Handbuch soll einen Überblick über die Möglichkeiten der Software CASSY Lab geben. Es ist textidentisch mit den Hilfen, die auch im Programm praktisch jederzeit per Mausklick erreichbar sind.

Die im Programm enthaltenen Hilfen bieten zusätzliche Erleichterungen:

- Verweise können direkt mit der Maus angesprungen werden
- Versuchsbeispiele und Einstellungen werden einfach per Mausklick geladen
- Neben einer Indexsuche ist auch eine Volltextsuche möglich

#### Installation

Die Installation von CASSY Lab erfolgt entweder

- · automatisch nach Einlegen der CD-ROM oder
- manuell durch Start der Datei autorun.exe

und durch Befolgen der Bildschirmmitteilungen.

# Wichtige Informationen nach der Installation von CASSY Lab

Nutzung der Software mit CASSY-S (Sensor-CASSY, Power-CASSY, Profi-CASSY, CASSY-Display, Pocket-CASSY und Mobile-CASSY)

Beim ersten Start von CASSY Lab sollten Sie Ihren Freischaltcode angeben, wie Sie ihn auf Ihrem Lieferschein und Ihrer Rechnung auf einem separaten Blatt unter der Nummer 524 200 finden. Dann unterstützt die Software das CASSY-S uneingeschränkt (sonst nur max. 20 mal).

## Nutzung der Software mit seriellen Messgeräten

CASSY Lab unterstützt andere serielle Messgeräte, das Joule- und Wattmeter und das Universelle Messinstrument Physik ohne Freischaltcode.

## Handbuch

Zu CASSY Lab gibt es ein umfangreiches Handbuch. Zur optimalen Nutzung von CASSY Lab ist es unerlässlich, sich ausgiebig mit diesem Handbuch zu befassen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Handbuch von CD-ROM laden (autorun.exe starten)
- Gedrucktes Handbuch (524 201) bestellen
- Handbuch aus dem Internet laden (im Adobe PDF-Format)
- Hilfe im Programm nutzen (textidentisch mit gedrucktem Handbuch, kontextbezogen und mit vielen Verweisen und erweiterten Suchmöglichkeiten)

#### **Erste Schritte**

- Einführung anzeigen
- Versuchsbeispiele anzeigen

Die mitgelieferten Versuchsbeispiele können auch ohne CASSY gelesen und für weitere Auswertungen genutzt werden. Die bei den Beispielen gewählten Programmeinstellungen können für neue Messungen genutzt bzw. an diese angepasst werden.

#### Support

Sollten trotz der umfangreichen Hilfe mit den vielen Versuchsbeispielen noch Fragen bleiben, wenden Sie sich bitte an cassy@ld-didactic.de.

#### **Updates**

CASSY Lab wird zukünftig erweitert – nicht zuletzt aufgrund von Erfahrungen und Rückmeldungen der Anwender.



# **Eigene Software für CASSY-S**

Sie können CASSY-S auch selbst programmieren. Dazu haben wir im Internet die Beschreibung des Protokolls der Schnittstelle sowie eine Delphi/Lazarus-Komponente (mit Source-Code) zum kostenlosen Download bereitgestellt.

■ Developer Information aus dem Internet laden

## Delphi (Windows) und Lazarus (Linux)

Die Unterstützung von CASSY mit eigenen Delphi- oder Lazarus-Programmen ist einfach, weil dazu lediglich die oben beschriebene Komponente eingebunden werden muss.

#### C/C++/Visual Basic

Andere Programmiersprachen können über die CASSYAPI.DLL (Windows) oder libcassyapi.so (Linux) auf CASSY zugreifen. Dazu muss die CASSYAPI.DLL oder libcassyapi.so eingebunden und aufgerufen werden. Die erforderlichen Deklarationen für C/C++ sind in CASSYAPI.H enthalten. Alle drei Dateien sind ebenfalls Bestandteil unserer kostenlosen Developer Information aus dem Internet.

# LabVIEW (Windows und Linux)

Unser LabVIEW-Treiber für CASSY ist ebenfalls kostenlos im Internet erhältlich. Zusätzlich zu den VIs (Virtual Instruments) zur Ansteuerung von CASSY enthält der Treiber auch Anwendungsbeispiele.

LabVIEW ist eine eingetragene Marke der Firma National Instruments.



#### **CASSY Lab**

#### Einführung

CASSY Lab unterstützt ein oder mehrere CASSY-S-Module (Sensor-CASSY, Power-CASSY, Profi-CASSY, CASSY-Display, Pocket-CASSY und Mobile-CASSY) am USB-Port (ab Windows 98/2000) oder an der seriellen Schnittstelle (ab Windows 95/NT) des Computers. Außerdem werden diverse andere serielle Messgeräte, das Joule- und Wattmeter und das Universelle Messinstrument Physik unterstützt. Bei der ersten Verwendung von CASSY oder eines anderen Geräts fragt CASSY Lab nach der seriellen Schnittstelle (COM1 bis COM4). Sie muss angegeben und sollte als Vorgabe abgespeichert werden. Für CASSYs am USB-Port (ab Windows 98/2000) muss keine serielle Schnittstelle angegeben werden - sie werden automatisch gefunden. Wenn CASSY verwendet wird, wird nach einem Freischaltcode gefragt.

#### Freischaltcode

Soll CASSY Lab zusammen mit CASSY eingesetzt werden, so ist dafür ein 24-stelliger Freischaltcode erforderlich. Dieser Freischaltcode ist auf der Rechnung und dem Lieferschein auf einem separaten Blatt unter der Nummer 524 200 zu finden und muss zusammen mit dem dort angegebenen Namen einmal eingegeben werden. Danach ist die Software für CASSY freigeschaltet. Bitte beachten Sie unser Copyright.

Soll dagegen CASSY Lab nur mit anderen seriellen Geräten, mit dem Joule- und Wattmeter oder mit dem Universellen Messinstrument Physik verwendet werden, ist dazu **kein** Freischaltcode erforderlich.


Sollte Ihnen der Freischaltcode fehlen, faxen Sie bitte die Rechnung über CASSY Lab (524 200) an +49-2233-604607. Es wird Ihnen dann sobald wie möglich Ihr Freischaltcode zurückgefaxt. Für eine Übergangszeit lässt sich CASSY Lab auch noch ohne Freischaltung mit CASSY verwenden (max. 20 Nutzungen).

Auch zukünftige Versionen, die beispielsweise im Internet bereitgestellt werden, nutzen diese Freischaltung. Auch Updates sind damit uneingeschränkt verwendbar.

■ Update aus dem Internet laden


#### **Erste Messwerte**

Wenn ein oder mehrere CASSYs erkannt worden sind, zeigt die CASSY-Seite des Einstellungsfensters (F5) die aktuelle Konfiguration (mit eventuell aufgesteckten Sensorboxen). Um eine Messung durchzuführen, braucht nur der entsprechende Eingang oder Ausgang 1 angeklickt zu werden:

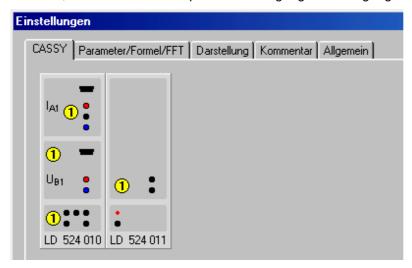

Ein aktiver Ein- oder Ausgang (Kanal) wird danach farbig markiert und als Button rechts oben zu den Speed-Buttons des Hauptfensters einsortiert (hier IA1 und UB1). Diese Buttons stellen die einfachste Möglichkeit dar, ein Anzeigeinstrument des Kanals anzuzeigen oder zu schließen (linke Maustaste) oder seine Einstellungen zu verändern (rechte Maustaste). Außerdem erscheint der Kanal anfangs automatisch in der Tabelle 5 und im Diagramm 6.



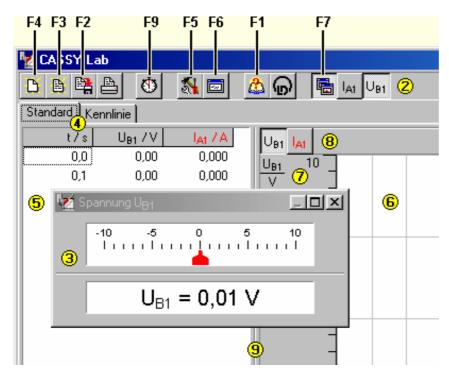

Die grundsätzlichen Funktionen lassen sich gezielt mit den Speed-Buttons (2) in der oberen Zeile ausführen. Die wichtigsten Speed-Buttons lassen sich auch mit den Funktionstasten bedienen.

Darunter lässt sich durch Anklicken einer der Darstellungsseiten die Darstellung der Tabelle und des Diagrams umschalten, wenn unterschiedliche Darstellungsarten definiert wurden (hier **Standard** und **Kennlinie**). Tabelle und Diagramm können gegeneinander durch Verschieben der Trennlinie mit der Maus vergrößert oder verkleinert werden.

An vielen Stellen haben beide Maustasten (links und rechts) eine entscheidende Funktion:

Bedienelement	Linke Maustaste	Rechte Maustaste
1 CASSY-Anordnung	Anschalten und Ändern eines Kanals	Anschalten und Ändern eines Kanals
Kanal-Button	Öffnen und Schließen des Anzeigeinstruments, Drag & Drop nach 2 und bis 8	Einstellungen des Kanals
3 Anzeigeinstrument	Verschieben der Trennlinie Analog- zu Digitalanzeige, Drag & Drop der Werte nach 5	Einstellungen des Kanals
Name der Darstellung	Umschalten in eine andere definierte Darstellung	
5 Tabelle	Editieren von Messwerten, Drag & Drop der Werte innerhalb der Tabelle oder der Kanäle nach	Darstellung der Tabelle, z. B. Schriftgröße, Löschen von Zeilen und Messreihen
6 Diagramm	Markieren von Auswertungsbereichen	Einstellungen und Auswertungen im Diagramm
<b>7</b> Skala	Verschieben der Skala	Minimum, Maximum und Um- rechnung der Skala festlegen
8 Achsensymbole	Umschalten der y-Skala, Drag & Drop nach 2	Einstellungen des Kanals
9 Trennlinie	Verschieben der Trennlinie Tabelle zu Diagramm	



Auch die Tastenbelegung der Speed-Buttons erleichtert oft die Arbeit:



Löscht entweder die aktuelle Messung unter Beibehaltung ihrer Einstellungen oder, wenn keine Messung vorhanden ist, die aktuellen Einstellungen.

Eine zweimalige Anwendung löscht eine Messung mit ihren Einstellungen.



Lädt eine Messreihe mit ihren Einstellungen und ihren Auswertungen.

Dabei kann die Messreihe auch an eine vorhandene Messreihe angehängt werden (ohne ihre Einstellungen und Auswertungen mit zu laden). Dies ist möglich, wenn die Messreihen die gleichen Messgrößen besitzen. Alternativ kann eine weitere Messreihe auch nachträglich gemessen und angehängt werden.

Außerdem steht ein ASCII-Import-Filter (Dateityp \*.txt) zur Verfügung.



Speichert die aktuellen Messreihen mit ihren Einstellungen und ihren Auswertungen ab.

Es lassen sich auch reine Einstellungen (ohne Messdaten) abspeichern, mit denen dann später ein Experiment einfach wiederholt werden kann.

Außerdem steht ein ASCII-Export-Filter (Dateityp \*.txt) zur Verfügung. Aber auch die CASSY Lab-Dateien (Dateityp \*.lab) sind mit jedem Texteditor lesbar.



Druckt die aktuelle Tabelle oder das aktuelle Diagramm aus.



#### F9

Startet und stoppt eine neue Messung.

Alternativ kann die Messung durch die Vorgabe einer Messzeit gestoppt werden.



#### F5

Ändert die aktuellen Einstellungen (z. B. CASSY, Parameter/Formel/FFT, Darstellung, Kommentar, Serielle Schnittstelle). Für die Messparameter muss diese Funktion **doppelt** betätigt werden.



#### EG

Stellt den Inhalt der Statuszeile groß dar oder blendet ihn wieder aus.



#### F1

Ruft diese Hilfe auf.



Gibt Auskunft über die Version der Software und ermöglicht die Eingabe des Freischaltcodes.



Schließt alle geöffneten Anzeigeinstrumente oder öffnet sie wieder.



## **ASCII-Export und Import**

Wählt man im Dateiauswahlfenster als Dateityp \*.txt, dann ist bequem der Export- und Import von ASCII-Dateien möglich.

Das Datenformat beginnt mit einem Header, in dem alle Zeilen wiederum mit einem Schlüsselwort beginnen. Dadurch werden Messbereiche (MIN, MAX), Skalierungen (SCALE), Anzahl signifikanter Nachkommastellen (DEC) und die eigentliche Definition der Messgrößen (DEF) festgelegt. Bis auf die DEF-Zeile sind alle Zeilen optional. Nach dem Header folgt die eigentliche Messwerttabelle.

Die genaue Syntax ist z. B. der Datei anzusehen, die bei einem Datenexport entsteht.

#### Statuszeile

In die Statuszeile am unteren Bildschirmrand werden Auswertungsergebnisse eingetragen. Diese Ergebnisse lassen sich durch Drücken von oder **F6** auch in einem größeren Fenster darstellen bzw. wieder ausblenden.

#### **Drag & Drop**

Die Auswertungsergebnisse der Statuszeile lassen sich mit der Maus in die Tabelle ziehen (Drag & Drop). Auf diese Weise lassen sich Diagramme erstellen, die von Auswertungsergebnissen abhängen.



# Messung



Startet (und stoppt) eine neue Messung. Während oder nach einer Messung öffnet die rechte Maustaste in der Tabelle das Tabellendarstellungsmenü und im Diagramm das Auswertungsmenü.



Gibt die Möglichkeit zur Änderung der Einstellungen und der Messparameter (bei **doppelter** Betätigung), durch welche die Messung selbst gesteuert wird:



Die Vorgaben in diesem Fenster hängen von den aufgesteckten Sensorboxen ab. Das vereinfacht die Anpassung an eine spezielle Messaufgabe, weil sensorboxtypische Einstellungen bereits durchgeführt worden sind. Bei Messungen mit der **VKA-Box** sieht dieses Fenster anders aus.

#### **Automatische Aufnahme**

Die Software entscheidet über den exakten Zeitpunkt einer Messwertaufnahme. Nach dem Start der Messung (z. B. mit F9) wird zunächst auf einen eventuell eingestellten Trigger gewartet und danach jeweils nach Ablauf des angegebenen Zeitintervalls eine Messwertzeile aufgenommen. Das Intervall, die Anzahl der Messpunkte pro Messung sowie die gesamte Messzeit können vorher den Erfordernissen angepasst werden. Dabei kann mit wiederholende Messung eine fortlaufende Anzeige erreicht werden.

Bei Zeitintervallen ab 100 ms wird zusätzlich zum Trigger auch die **Messbedingung** ausgewertet und eventuell ein **akustisches Signal** bei Messwertaufnahme abgegeben. Die Messbedingung ist eine Formel. Ein Formelergebnis ungleich 0 bedeutet AN="Messwertaufnahme möglich", ein Formelergebnis gleich 0 bedeutet AUS="Messwertaufnahme blockiert". Der Messvorgang läuft dann solange die Messung gestartet ist **und** das Ergebnis der Formel AN ist. Wird z. B. die Messung am 21.4.1999 zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr erwünscht, so kann die Formel lauten: date = 21.4.1999 and time >= 13:00 and time <= 14:00.

Bei einigen Messgrößen (z. B. Rate, Frequenz, Laufzeit, Dunkelzeit, Weg bei Verwendung der GM-Box oder der Timer-Box) wertet die Software das angegebene Zeitintervall nicht aus. In diesem Fall wird die Messung von der Torzeit oder den Messimpulsen selbst gesteuert.

#### **Manuelle Aufnahme**

Der Anwender entscheidet über den exakten Zeitpunkt einer Messwertaufnahme. Bei jedem Start (z. B. mit **F9**) wird genau **eine** Messwertzeile aufgenommen, d. h. die aktuellen Anzeigewerte der Instrumente in die Tabelle und in das Diagramm übernommen. Für eine komplette Messreihe ist daher eine wiederholte manuelle Aufnahme erforderlich.

#### Neue Messreihe anhängen

Ermöglicht die aufeinanderfolgende Aufnahme mehrerer Messreihen. Alle Messreihen werden gleichzeitig in der Tabelle und im Diagramm dargestellt. Dabei wird für die Darstellung einer weiteren Messreihen jeweils eine andere Farbe verwendet.

Alternativ können die einzelnen Messreihen auch erst nacheinander aufgenommen und einzeln abgespeichert werden. Beim Laden mehrerer vergleichbarer Messreihen (mit gleichen Messgrößen) können Messreihen auch nachträglich noch angehängt werden.



# Messwerte ändern und löschen / Parametereingabe

Alle Messwerte (außer Zeit und Formeln) können in der Tabelle editiert werden. Dazu wird die Messwertzelle angeklickt und mit der Tastatur der Zahlenwert editiert. Das ist auch die einzige Möglichkeit, einen Parameter in die Tabelle einzugeben.

Zum Löschen von Messwerten gibt es mehrere Möglichkeiten. Im Kontextmenü (rechte Maustaste) der Tabelle können die jeweils letzten Tabellenzeilen oder ganze (angehängte) Messreihen gelöscht werden. Im Kontextmenü (rechte Maustaste) des Diagramms können ganze Bereiche von Messwerten gelöscht werden.




# Messung (VKA-Box)



Startet (und stoppt) eine neue Messung. Während oder nach einer Messung öffnet die rechte Maustaste in der Tabelle das Tabellendarstellungsmenü und im Diagramm das Auswertungsmenü.



Gibt die Möglichkeit zur Änderung der Einstellungen und der Messparameter (bei **doppelter** Betätigung), durch welche die Messung selbst gesteuert wird:

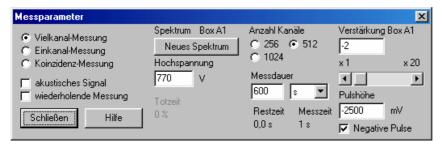

Dies ist die zentrale Steuerstelle einer Messung mit der VKA-Box. Allgemeine Einstellungen wie die Messzeit werden im linken Teil des Fensters vorgenommen. Je nach gewählten Messmodus (Vielkanal, Einkanal, Koinzidenz) können im rechten Teil des Fensters andere Optionen eingestellt werden.

#### Vielkanal-Messung (VKA)

Die Anzahl der Kanäle, die Messzeit und die Verstärkung der Box werden im rechten Teil des Fensters eingestellt. Das beste Ergebnis wird bei Verstärkungseinstellungen von 1, 2, 5 oder 10 erreicht oder leicht darüber. Eine rote Schrift bedeutet eine falsche Vorgabe.

## Einkanal-Messung

Die Anzahl der Kanäle wird durch die Anzahl der Messpunkte ersetzt, die nacheinander gemessen werden

Die Messdauer und die Messzeit pro Punkt beeinflussen sich gegenseitig über die Anzahl der Messpunkte.

Die Breite des Messfensters für jede Einzelmessung kann wahlweise in Prozent des vollen Messbereiches oder über den Abstand zweier Messpunkte angegeben werden.

Die Verstärkung wird wie im Vielkanal-Modus eingestellt.

# Koinzidenz-Messung

Hier werden zwei VKA-Boxen auf einem CASSY eingesetzt. Eine davon nimmt ein Vielkanal-Spektrum auf, aber nur, wenn gleichzeitig Impulse im Koinzidenz-Fenster der anderen Box registriert werden (Koinzidenz) oder wenn keine Impulse registriert werden (Anti-Koinzidenz).

Der prinzipielle Messmodus entspricht der Vielkanal-Messung, die Einstellungen für die Anzahl der Kanäle und die Verstärkung in der Mitte des Fensters gelten für die Box, welche das Spektrum aufnimmt.

Rechts davon werden die Parameter für die Koinzidenz eingestellt. Die minimale und maximale Impulshöhe des Fensters werden in Prozent des Messbereiches angegeben. Über den Knopf **Zeigen** kann ein Bereich in einem zuvor mit dieser (!) Box gemessenen Spektrum markiert und als Fenster übernommen werden.



# Tabellendarstellung ändern

Die Darstellung der Tabelle lässt sind nach einem Klick mit der rechten Maustaste in der Tabelle ändern. Einzelne Messwerte lassen sich nach dem Anklicken mit der linken Maustaste ändern oder auf andere Messwertzellen ziehen (Drag & Drop).

- Spaltenbelegung ändern
- Schriftgröße wählen
- Letzte Tabellenzeile löschen
- Letzte Messreihe löschen
- Tabelle/Fenster kopieren

#### Spaltenbelegung ändern

Ruft das Darstellungsfenster auf. Dort kann die Belegung der x-Spalte und der bis zu 8 y-Spalten der Tabelle geändert werden. Auch eine Umrechnung der Spalten ist dort möglich.

Alternativ kann die Spaltenbelegung durch Drag & Drop zwischen den Kanal-Buttons und dem Tabellenkopf geändert werden.

#### Schriftgröße wählen

Die Schriftgröße der Tabelle ist einstellbar. Zur Auswahl steht eine kleine, mittlere und eine große Schrift.

Die aktuelle Einstellung kann als Vorgabe für weitere Starts des Programms in den Allgemeinen Einstellungen abgespeichert werden.

#### Letzte Tabellenzeile löschen

Löscht die jeweils letzte Zeile in der Tabelle. Dabei werden auch die nicht sichtbaren Werte anderer Kanäle gelöscht, die gleichzeitig aufgenommen worden sind. Alternativ können ganze Messreihen gelöscht werden.

Dies ist dafür gedacht, eine Fehlmessung bei manueller Aufnahme zu löschen.

#### Abkürzung

Tastatur: Alt + L

#### Letzte Messreihe löschen

Löscht die jeweils letzte Messreihe in der Tabelle. Dabei werden auch die nicht sichtbaren Werte anderer Kanäle gelöscht, die gleichzeitig aufgenommen worden sind. Alternativ können auch letzte Tabellenzeilen gelöscht werden.

Dies ist dafür gedacht, eine Fehlmessung bei automatischer Aufnahme zu löschen.

#### Zwischenablage

Mit **Tabelle kopieren** und **Fenster kopieren** kann die Tabelle als Text und das Hauptfenster als Bitmap in die Zwischenablage von Windows kopiert werden. Dort stehen sie dann zur Weiterverarbeitung anderen Windows-Programmen zur Verfügung.

# Grafische Auswertungen

Die zahlreichen grafischen Auswertungen sind nach einem Klick mit der rechten Maustaste im Diagramm zugänglich.

- Achsenbelegung ändern
- Koordinaten anzeigen
- Linienbreite wählen
- Werteanzeige wählen
- Skalierung wählen
- Raster einblenden
- Zoomen
- Zoom ausschalten
- Markierung setzen
- Text
- Senkrechte Linie
- Waagerechte Linie
- Differenz messen
- Mittelwert einzeichnen
- Anpassung durchführen
- Integral berechnen
- Poissonverteilung berechnen
- Gau
  ßverteilung berechnen
- Peakschwerpunkt berechnen
- Formfaktor bestimmen
- Welligkeit bestimmen
- Gaußkurven anpassen
- Äquivalenzpunkt bestimmen
- Systole und Diastole bestimmen
- Letzte Auswertung löschen
- Alle Auswertungen löschen
- Bereich löschen (nur Messwerte)
- Diagramm/Fenster kopieren

## Markieren eines Kurvenbereiches

Für einige Auswertungen ist es erforderlich, einen Kurvenbereich zu markieren, für den die Auswertung berechnet werden soll.

Dazu bewegt man den Mauszeiger bei gedrückter linker Maustaste vom Anfang bis zum Ende des Kurvenbereichs. Alternativ kann auch der Anfangs- und der Endpunkt angeklickt werden.

Während der Markierung des Kurvenbereichs erscheint der markierte Bereich grün.

## Achsenbelegung ändern

Ruft das Darstellungsfenster auf. Dort kann die Belegung der x-Achse und der bis zu 8 y-Achsen geändert werden. Auch eine Umrechnung der Achsen ist dort möglich.

Alternativ kann die Achsenbelegung durch Drag & Drop zwischen den Kanal-Buttons und dem Diagramm geändert werden.

#### Koordinaten anzeigen

Nach dem Einschalten dieser Funktion enthält die Statuszeile die aktuellen Koordinaten des Mauszeigers, wenn dieser sich in einem Diagramm befindet. Die Koordinatenanzeige ist solange aktiv, bis sie durch die erneute Wahl dieses Menüpunkts wieder ausgeschaltet wird oder eine der Auswertungen Markierung setzen, Mittelwert einzeichnen, Anpassung durchführen, Integral berechnen oder eine der weiteren Auswertungen ein Ergebnis in die Statuszeile schreibt.

Die aktuellen Koordinaten können auch in das Diagramm geschrieben werden. Dabei muss der Menüpunkt Text mit Alt+T über die Tastatur aufgerufen werden, ohne die Position des Mauszeigers zu verändern, da sonst die falschen Koordinaten übernommen werden.

Die aktuelle Einstellung kann als Vorgabe für weitere Starts des Programms in den Allgemeinen Einstellungen abgespeichert werden.

18 CASSY Lab



#### **Abkürzung**

Tastatur: Alt + K

#### Linienbreite wählen

Die Linienbreite für die Anzeige des Diagramms und der darin durchgeführten Auswertungen ist einstellbar. Zur Auswahl stehen schmale, mittelbreite und dicke Linien.

Die aktuelle Einstellung kann als Vorgabe für weitere Starts des Programms in den Allgemeinen Einstellungen abgespeichert werden.

#### Werteanzeige wählen

Es stehen sechs verschiedene Funktionen zur Verfügung, um die Anzeige der Werte zu beeinflussen.

Werte einblenden Quadrate, Dreiecke, Kreise, Rauten, ...

Verbindungslinien einblenden Verbindungslinien zwischen den Messpunkten

Akima-Interpolation Werte zwischen Messpunkten nach Akima interpoliert

sinc-Interpolation Werte zwischen Messpunkten mit  $sinc(x) = sin(\pi x)/\pi x$  interpoliert

Balken einblenden Messwertbalken

Achsen einblenden Nulllinie der x- und y-Achse

Die aktuelle Einstellung kann als Vorgabe für weitere Starts des Programms in den Allgemeinen Einstellungen abgespeichert werden.

Die Interpolationen Akima und sinc werden nicht über Definitionslücken hinweg und nicht während einer Messung berechnet. Während der Messung werden die Punkte nur durch gerade Linienstücke verbunden. Erst nach der Messung berechnet die Interpolation die Kurvenstücke zwischen den Messpunkten. Die sinc-Interpolation ist ideal für Signale, die keine Frequenzanteile über der halben Abtastfrequenz enthalten. Sie führt dann zu einem 10-fach Oversampling.

#### Skalierung wählen

Im Diagramm kann die Skalierung aus- und links-oben oder links-unten eingeblendet werden.

Die aktuelle Einstellung kann als Vorgabe für weitere Starts des Programms in den Allgemeinen Einstellungen abgespeichert werden.

#### Raster einblenden

Im Diagramm kann ein Raster aus- und wieder eingeblendet werden.

Die aktuelle Einstellung kann als Vorgabe für weitere Starts des Programms in den Allgemeinen Einstellungen abgespeichert werden.

## Zoomen

Nach Aktivierung dieses Menüpunkts, muss der Bereich definiert werden, der vergrößert werden soll. Das geschieht mit der linken Maustaste.

Eine bereits gezoomte Darstellung lässt sich auch weiter zoomen. Ein Zoom kann anschließend durch Zoom ausschalten wieder zurückgesetzt werden.

#### **Abkürzung**

Tastatur: Alt + Z

#### Zoom ausschalten

Setzt den aktuell gewählten Ausschnitt des Diagramms wieder in seine Ausgangsgröße zurück.

#### Abkürzung

Tastatur: Alt + A



#### **Energiekalibrierung (VKA-Box)**

Aufgenommene Spektren sind zunächst in Kanäle eingeteilt. Ordnet man einem oder zwei Kanälen eine Energie zu, so kann auch eine Darstellung über der Energie gewählt werden. Nach Aufruf der Energiekalibrierung kann mit der Maus eine Markierung gesetzt werden, der entsprechende Kanal wird in der Dialogbox eingetragen. Alternativ kann man nach einem Klick in das Dialogfenster auch die Kanäle von Hand eintragen. Als dritte Möglichkeit bietet sich die Anpassung einer Gaußfunktion an, deren Ergebnis man dann mittels Drag & Drop aus der Statuszeile in der Dialogbox ablegt. Beide Auswahlboxen für die Energien enthalten bereits Vorgaben für die üblichen radioaktiven Präparate.

Wenn die Option **globale Energiekalibrierung** gewählt ist, gelten die eingetragenen Werte für alle bisher aufgenommenen und zukünftigen Spektren dieser Messreihe. Wenn diese Option nicht gewählt ist, so gilt die Kalibrierung für das eingetragene Spektrum und zukünftige Spektren dieser Reihe. Die Kalibrierung wird verworfen, wenn das Programm beendet wird, die VKA-Box gewechselt oder die Verstärkung der Box verändert wird. Wenn schon kalibrierte Spektren vorliegen, kann deren Kalibrierung übernommen werden.

#### **Abkürzung**

Tastatur: Alt + E

#### Markierung setzen

Es stehen vier verschiedene Markierungsfunktionen zur Verfügung. Die Markierungen können durch Doppelklick mit der linken Maustaste auf die jeweilige Markierung editiert bzw. verschoben und wieder aus dem Diagramm gelöscht werden.

#### Alt+T: Text

Mit der Textfunktion kann das Diagramm an beliebigen Stellen mit frei wählbarem Text beschriftet werden. Nach der Texteingabe ist der Text nur noch an die gewünschte Stelle zu verschieben und mit der linken Maustaste zu platzieren.

Nach allen Auswertungen, die in der Statuszeile Zahlenwerte als Ergebnis geliefert haben, werden diese Zahlenwerte als Textvorschlag angegeben, der übernommen, editiert oder verworfen werden kann.

#### Alt+S: Senkrechte Linie

Mit dieser Funktion lassen sich beliebig positionierbare senkrechte Linien in das Diagramm einzeichnen. Die Position wird in der Statuszeile eingetragen. Eine eventuell dort platzierte Koordinatenanzeige wird dabei ausgeschaltet.

#### Alt+W: Waagerechte Linie

Mit dieser Funktion lassen sich beliebig positionierbare waagerechte Linien in das Diagramm einzeichnen. Die Position wird in der Statuszeile eingetragen. Eine eventuell dort platzierte Koordinatenanzeige wird dabei ausgeschaltet.

## Alt+D: Differenz messen

Nach Anklicken eines Bezugspunktes können beliebige Linien in das Diagramm eingezeichnet werden. Die Koordinatendifferenz zwischen Start- und Endpunkt der jeweiligen Linie wird in der Statuszeile eingetragen. Eine eventuell dort platzierte Koordinatenanzeige wird dabei ausgeschaltet.

#### Mittelwert einzeichnen

Nach Wahl der Mittelwertberechnung muss noch mit der linken Maustaste der Kurvenbereich gewählt werden, für den der Mittelwert berechnet werden soll. Der Mittelwert wird zusammen mit seinem statistischen Fehler in der Statuszeile eingetragen. Eine eventuell dort platzierte Koordinatenanzeige wird dabei ausgeschaltet.

Der aktuelle Mittelwert kann auch als Text in das Diagramm geschrieben werden. Durch Doppelklick auf eine Mittelwertlinie kann diese wieder aus dem Diagramm gelöscht werden.



#### Anpassung durchführen

Es stehen acht verschiedene Anpassungen zur Verfügung:

 Ausgleichsgerade
 y=Ax+B

 Ursprungsgerade
 y=Ax

 Parabel
 y=Ax²+Bx+C

 Normalparabel
 y=Ax²

 Hyperbel 1/x
 y=A/x+B

Hyperbel 1/xy=A/x+BHyperbel 1/x² $y=A/x^2+B$ Exponentialfunktiony=A\*exp(-x/B)

**Einhüllende einer Schwingung** y=±A\*exp(-x/B)+C (Dämpfung bei Luftreibung)

Freie Anpassung y=f(x,A,B,C,D)

Nach Wahl der Anpassung muss noch mit der linken Maustaste der Kurvenbereich gewählt werden, in dem die Anpassung ausgeführt werden soll.

Bei der freien Anpassung müssen vor der Bereichsmarkierung die Funktion f(x,A,B,C,D), sinnvolle Startwerte und die maximal erlaubte Ausführungszeit angegeben werden. Für die Funktionseingabe gelten die üblichen Regeln. Die Startwerte sollten möglichst realistisch gewählt werden, damit die Anpassung eine gute Chance auf Erfolg hat. Falls eine Anpassung fehlschlägt, kann sie mit veränderten Startwerten und/oder längeren Ausführungszeiten wiederholt werden. Außerdem können einzelne Parameter A, B, C oder D während der Anpassung konstant gehalten werden.

Die freie Anpassung erlaubt auch die automatische Erzeugung eines neuen Kanals durch **Ergebnis automatisch als neuen Kanal (Parameter) darstellen**. Dadurch werden unterschiedliche Anpassungen in verschiedenen Farben dargestellt und können nachträglich durch Formeln weiter ausgewertet werden.

Die aktuellen Parameter der Anpassung (A, B, C und D) werden bei der Anpassung in der Statuszeile eingetragen. Eine eventuell dort platzierte Koordinatenanzeige wird dabei ausgeschaltet. Diese Werte können danach als Text in das Diagramm geschrieben werden. Durch Doppelklick auf eine Anpassung kann diese wieder aus dem Diagramm gelöscht werden.

#### Integral berechnen

Der Wert des Integrals ergibt sich aus der Fläche, die der mit der linken Maustaste gewählte Kurvenbereich mit der x-Achse einschließt, bzw. aus der Peakfläche. Der Wert des Integrals wird in der Statuszeile eingetragen. Eine eventuell dort platzierte Koordinatenanzeige wird dabei ausgeschaltet.

Die aktuelle Wert des berechneten Integrals kann auch als Text in das Diagramm geschrieben werden.

## Weitere Auswertungen → Poissonverteilung berechnen

(nur sinnvoll bei Häufigkeitsverteilungen)

Aus dem markierten Bereich des Histogramms wird die Gesamtanzahl n der Ereignisse, der Mittelwert  $\mu$  und die Standardabweichung  $\sigma$  berechnet, in die Statuszeile eingetragen sowie die daraus errechnete Poissonverteilung eingezeichnet:  $y=n\cdot\mu^x/x!$ \*exp(- $\mu$ ).

# Weitere Auswertungen $\rightarrow$ Gaußverteilung berechnen

(nur sinnvoll bei Häufigkeitsverteilungen)

Aus dem markierten Bereich des Histogramms wird die Gesamtanzahl n der Ereignisse, der Mittelwert  $\mu$  und die Standardabweichung  $\sigma$  berechnet, in die Statuszeile eingetragen sowie die daraus errechnete Gaußverteilung eingezeichnet:  $y=n/\sigma/Sqrt(2\pi)^*exp(-(x-\mu)^2/2\sigma^2)$ .

## Weitere Auswertungen → Peakschwerpunkt berechnen

Es wird der Schwerpunkt des markierten Peaks berechnet und in die Statuszeile eingetragen. Durch Doppelklick auf die Schwerpunktslinie kann diese wieder aus dem Diagramm gelöscht werden.

## Weitere Auswertungen → Formfaktor bestimmen

(nur sinnvoll bei periodischen Kurven)

Für den markierten Bereich [t1,t2] eines periodischen Signals (z. B. U(t)) werden berechnet und in die Statuszeile eingetragen:



Gleichrichtwert (Mittelwert des Absolutbetrags)

$$U_{\text{ABS MEAN}} = \int_{t_1}^{t_2} |U(t)| \cdot dt / (t_2 - t_1)$$

$$U_{\text{ABS MEAN}} = \int_{t_1}^{t_2} |U(t)| \cdot dt / (t_2 - t_1)$$
Effektivwert
$$U_{\text{RMS}} = \sqrt{\int_{t_1}^{t_2} U^2(t) \cdot dt / (t_2 - t_1)}$$

$$f = U_{RMS}/U_{ABSMEAN}$$

Dabei sollte immer ein ganze Zahl von Perioden markiert werden.

#### Weitere Auswertungen → Welligkeit bestimmen

(nur sinnvoll bei periodischen Kurven)

Für den markierten Bereich [t1,t2] eines periodischen Signals (z.B. U(t)) werden berechnet und in die Statuszeile eingetragen:

Mittelwert

$$U_{\text{MEAN}} = \int_{t_1}^{t_2} U(t) \cdot dt / (t_2 - t_1)$$
Effektivwert

$$U_{\text{RMS}} = \sqrt{\int_{t_1}^{t_2} U^2(t) \cdot dt / (t_2 - t_1)}$$

• Welligkeit
$$r = \sqrt{U_{\text{RMS}}^2 - U_{\text{MEAN}}^2} / U_{\text{MEAN}}$$

Dabei sollte immer ein ganze Zahl von Perioden markiert werden.

## Weitere Auswertungen → Gaußkurven anpassen (VKA-Box)

Es können wahlweise unabhängige Gaußkurven und Gaußkurven gleicher absoluter oder relativer Breite angepasst werden. Das Ergebnis der Gauß-Anpassung ist eine Formel aus mehreren Summanden der Art

$$A \cdot e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

wobei durch die Anpassung die Parameter A,  $\mu$  und  $\sigma$  bestimmt werden

Im einfachsten Fall wird eine einzelne Gaußfunktion verwendet. Um eine Summe aus mehreren Gaußfunktionen anzupassen, müssen die ungefähren Lagen der einzelnen Gaußfunktionen vorher markiert werden. Jeder Peakschwerpunkt ist Startwert einer Gaußkurve bei der Anpassung. Es werden dabei nur die Peakschwerpunkte innerhalb des markierten Bereiches berücksichtigt. Zur Flächenberechnung der Gaußkurven finden Sie nachfolgend weitere Anmerkungen.

## Weitere Auswertungen → Äquivalenzpunkt bestimmen

(nur sinnvoll bei Titrationskurven pH gegen Volumen)

Im markierten Kurvenbereich der Titrationskurve werden der Äquivalenzpunkt und der pK-Wert bestimmt und in die Statuszeile eingetragen. Bei starken Säuren oder Basen (mit pK < 1) ist es sinnvoll, nur den Bereich unmittelbar vor und nach dem Äguivalenzpunkt zu markieren. Dadurch kann vermieden werden, dass ein unkorrekter pK-Wert ausgegeben wird. Durch Doppelklick auf den Äquivalenzpunkt kann dieser wieder aus dem Diagramm gelöscht werden.

#### Weitere Auswertungen → Systole und Diastole bestimmen

(nur sinnvoll bei Blutdruckkurven)

Im markierten Kurvenbereich der Blutdruckkurve werden Systole und Diastole bestimmt und in die Statuszeile eingetragen. Durch Doppelklick auf die Systole oder Diastole können diese wieder aus dem Diagramm gelöscht werden.



## Letzte Auswertung löschen

Die jeweils letzte Auswertung wird wieder zurückgenommen. Dies ist für folgende Auswertungen möglich:

- Markierung setzen
- Mittelwert einzeichnen
- Anpassung durchführen
- Integral berechnen
- Weitere Auswertungen

## Abkürzung

Tastatur: Alt + Backspace

#### Alle Auswertungen löschen

Alle Auswertungen werden gelöscht. Betroffen sind die Auswertungen:

- Markierung setzen
- Mittelwert einzeichnen
- Anpassung durchführen
- Integral berechnen
- Weitere Auswertungen

## Bereich löschen (nur Messwerte)

Die Messwerte des markierten Kurvenbereichs werden gelöscht. Das betrifft nur Messwerte, die auf der y-Achse dargestellt werden. Nicht gelöscht werden können ausgewertete Größen (z. B. durch eine Formel berechnet) oder Werte auf der x-Achse.

## Zwischenablage

Mit **Diagramm kopieren** und **Fenster kopieren** können das Diagramm und das Hauptfenster als Bitmap in die Zwischenablage von Windows kopiert werden. Dort stehen sie dann zur Weiterverarbeitung anderen Windows-Programmen zur Verfügung.



# Addition / Subtraktion von Spektren (VKA-Box)

Das Addieren / Subtrahieren von Spektren erfolgt in der Übersichtsdarstellung. Hierzu wird einfach ein Spektrum auf ein anderes gezogen (Drag & Drop). Alternativ kann auch das Symbol eines Spektrum aus der Symbolzeile in ein Diagramm gezogen werden. In der dazugehörenden Auswahlbox kann dann die Rechenoperation und das Ziel der Berechnung bestimmt werden.

# Gaußkurven und Zählraten (VKA-Box)

Bei der Berechnung von Gesamtzählraten unter einem Peak sind einige Details zu berücksichtigen, die in Verbindung mit Gaußkurven relevant sind.

Im gemessenen Spektrum kann die Gesamtzählrate als Integral in einem Bereich, z.B. unter einem Peak, bestimmt werden. Bei VKA-Messungen ist das Ergebnis aber kein echtes Integral über die x-Achse (Energie oder Kanäle), sondern nur die Summe über die Kanäle und hat die Einheit "Ereignisse".

Die Gesamtzählrate einer Linie kann auch aus der Anpassung einer Gaußkurve bestimmt werden. Das Ergebnis der Gauß-Anpassung ist eine Formel aus mehreren Summanden der Art

$$A \cdot e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

wobei durch die Anpassung die Parameter A,  $\mu$  und  $\sigma$  bestimmt werden.

Die Fläche unter einer Gaußkurve kann berechnet werden und beträgt

$$\int_{-\infty}^{\infty} A \cdot e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} dx = A \cdot \sigma \sqrt{2\pi}$$

Dieses echte Integral über die Gaußkurve besitzt nun aber die Einheit "Ereignisse \* Energie", da die Linienbreite  $\sigma$  die Einheit "Energie" besitzt.

Zur Umrechnung auf die Zählrate als Summe über alle Kanäle muss dieses Ergebnis der Anpassung noch durch die Energiebreite eines einzelnen Kanals geteilt werden. Die Breite eines Energiekanals wird aus der Energiedifferenz ΔE zweier Kanäle in der Tabelle abgelesen, oder aus den Eigenschaften eines gemessenen Spektrums entnommen (mit rechter Maustaste auf das Symbol eines Spektrums klicken).

Die Gesamtzählrate einer Gaußkurve beträgt damit

$$\frac{A \cdot \sigma \sqrt{2\pi}}{\Delta E}$$

Die Parameter A und  $\sigma$  werden beim Anpassen der Gaußkurve als Ergebnis ausgegeben, die Breite  $\Delta E$  eines Kanals kann aus der Energiedifferenz zweier Kanäle in der Tabelle abgelesen werden.

Die mathematisch saubere Lösung dieses Problems wäre die Angabe der Amplitude A generell in "Zählrate pro Energieintervall", aber dies ist in der Praxis unüblich.



# Einstellungen



Über dieses Dialogfenster lassen sich alle Einstellungen außer der Messparameter vornehmen. Diese Einstellungen sind in sechs Gruppen gegliedert:


- CASSY (Definition der Ein- und Ausgänge der CASSYs)
- Parameter/Formel/FFT (Definition zusätzlicher Größen als Parameter, durch Formel, FFT)
- Darstellung (Änderung der Spaltenbelegung der Tabelle und Achsenbelegung des Diagramms)
- Modellbildung (Definition von Modellen über Differenzialgleichungen)
- Kommentar (Platz für eigenen Text)

# Einstellungen CASSY



F5

Hier wird die aktuelle Anordnung von CASSY-Modulen und Sensorboxen angezeigt. Wenn sich die aktuelle Anordnung ändert (z. B. neues Modul oder neue Sensorbox), wird diese Änderung auch in der Anzeige durchgeführt.

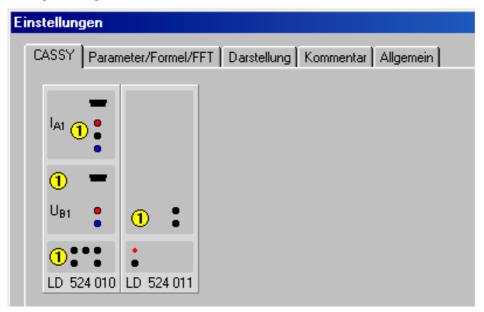

Durch Anklicken eines Kanals lässt sich dieser aktivieren und einstellen. Die einstellbaren Größen hängen vom CASSY-Modul und der aufgesteckten Sensorbox ab. Für jeden aktivierten Kanal werden während einer Messung Messwerte in die Tabelle und das Diagramm aufgenommen. Deren Darstellung (Spalten- und Achsenbelegung) kann geändert werden.

Wenn bereits Kanäle aktiviert sind, wird nicht mehr die aktuelle Anordnung angezeigt. Stattdessen werden die aktiven Kanäle mit der aktuellen Anordnung verglichen und die Abweichungen angezeigt. Somit ist es z. B. leicht möglich, nach dem Laden einer Messdatei, die damals vorliegende Anordnung von CASSY-Modulen und Sensorboxen wiederherzustellen.

Wird nicht die aktuelle Anordnung angezeigt, so kann dies durch **Anordnung aktualisieren** erzwungen werden. Dabei gehen die aktivierten Kanäle verloren.

Sind bereits Kanäle aktiviert, dann kann durch **Messparameter anzeigen** das Messparameter-Fenster geöffnet werden.

■ Siehe auch.



# **Einstellungen Parameter/Formel/FFT**



Einige Größen können nicht direkt mit CASSY gemessen werden und liegen deshalb nicht als CASSY-Kanal vor. Wenn solche Größen trotzdem in einer Tabelle oder in einem Diagramm angezeigt werden sollen, müssen die Größen hier definiert werden.

**Neue Größe** legt dazu einen neuen Datensatz an, beginnend mit dem Namen dieser Größe. Die neue Größe muss ein Symbol erhalten, unter dem sie angesprochen werden kann. Dieses Symbol sollte aus möglichst wenigen, aber aussagekräftigen Buchstaben bestehen und darf auch aus einem &-Zeichen gefolgt von einem Buchstaben bestehen. Es wird dann der entsprechende griechische Buchstabe angezeigt (sonst nur der lateinische). Außerdem sind die vorgeschlagenen Werte für den Messbereich und die Achsenskalierung (wichtig für die analoge und grafische Darstellung) sowie die Anzahl der signifikanten Nachkommastellen (wichtig für die digitale und tabellarische Darstellung) den individuellen Erfordernissen anzupassen.

Es gibt acht verschiedene Typen neuer Größen:

#### Konstante

Eine Konstante ist eine Größe, auf deren Wert über das vergebene Symbol dieser Konstante in Formeln und Modellbildungen zugegriffen werden kann. Der große Vorteil von Konstanten ist die einfache Veränderung ihres Wertes durch Ziehen am Zeiger ihres Anzeigeinstruments. Dadurch lassen sich Formeln (siehe unten) oder Modellbildungen beispielsweise leicht so variieren, dass das Ergebnis der Rechnung möglichst genau mit der Messung übereinstimmt. Damit Parameter und Konstanten leicht von anderen Kanälen unterschieden werden können, sind ihre Zeiger magenta.

Durch Definition eines Anzeigebereichs von 0 bis 1 und Anzahl Nachkommastellen gleich 0 lassen sich auch binäre Konstanten (Schalter) definieren, die durch Klick auf ihr Anzeigeinstrument umgeschaltet werden können.

#### **Parameter**

Für einen Parameter wird lediglich eine Tabellenspalte reserviert. Alle Zahlenwerte, die in dieser Tabellenspalte stehen sollen, können dort über die Tastatur eingetragen werden. Das kann vor oder nach der Aufnahme der anderen Messwerte durch Anklicken der Tabellenzelle mit der Maus erfolgen. Es ist sinnvoll den Parameter **vorher** einzugeben, damit bei der manuellen Messwertaufnahme direkt die richtigen Messpunkte im Diagramm erscheinen und nicht noch einmal der alte Parameterwert verwendet wird.

Alternativ kann der Parameterwert auch in den Einstellungen des Parameters vorgegeben oder mit der linken Maustaste im Anzeigeinstrument verschoben werden. Damit Parameter und Konstanten leicht von anderen Kanälen unterschieden werden können, sind ihre Zeiger magenta.

#### **Formel**

Abhängig von bereits bekannten Größen lässt sich über eine mathematische Formel eine neue Messgröße definieren. Die bekannten Größen werden dabei über Ihre Symbole angesprochen, die in der angezeigten Liste aufgeführt sind. Die eigentliche Formel wird unter Beachtung der korrekten Formelschreibweise eingegeben (siehe auch Beispiele). Damit umgerechnete Größen leicht von anderen Kanälen unterschieden werden können, sind ihre Zeiger violett.

Wenn alte Formeln von einer neuen Größe abhängen sollen, muss zunächst die Reihenfolge der Größen durch Drag & Drop innerhalb der Speed-Buttons in der oberen Zeile geändert werden. Alle Variablen einer Formel müssen sich links von dieser Formel befinden.

# Ableitung, Integral, Mittelwert, FFT (Fourier Transformation), Histogramm

Für die zeitliche Ableitung, das zeitliche Integral und die FFT (Fourier Transformation) muss lediglich der zu transformierende Kanal ausgewählt werden. Beim Mittelwert muss zusätzlich das Zeitintervall vorgegeben werden, in dem gemittelt werden soll. Für sinnvolle Mittelungen muss das Zeitintervall der Mittelung größer als das Zeitintervall der Messung sein. Beim Histogramm muss zusätzlich die Kanalbreite vorgegeben werden. Für die FFT wird das **Frequenzspektrum** und für das Histogramm die



**Häufigkeitsverteilung** automatisch als weitere Darstellung erzeugt, auf die über die Darstellungsseiten umgeschaltet werden kann. Damit umgerechnete Größen leicht von anderen Kanälen unterschieden werden können, sind ihre Zeiger violett.

## Anmerkungen

Bei einer Ableitung verschlechtert sich die Auflösung mit kleinerem Zeitintervall  $\Delta t$ . Ist beispielsweise die Auflösung einer Wegmessung  $\Delta s = 1$  mm und mit einem Zeitintervall von  $\Delta t = 100$  ms gemessen, so hat die erste Ableitung v(i) =  $(s(i+1)-s(i-1))/2\Delta t$  eine Auflösung von  $\Delta v = 0,005$  m/s und die zweite Ableitung eine Auflösung  $\Delta a = 0,025$  m/s². Bei einem Zeitintervall von  $\Delta t = 50$  ms erhöhen sich diese Fehler auf  $\Delta v = 0,01$  m/s und  $\Delta a = 0,1$  m/s². Daher sollte  $\Delta t$  möglichst groß gewählt werden (z. B. 200 ms für Bewegungen auf einer Fahrbahn oder 50 ms für schwingende Federn).

Die maximale Frequenz einer FFT beträgt die Hälfte der Abtastrate. Wird also mit einem Zeitintervall  $\Delta t = 10 \ \mu s$  (f = 100 kHz) gemessen, so geht der Frequenzbereich der FFT bis 50 kHz. Die Auflösung in diesem Frequenzbereich hängt dagegen von der Anzahl der Messwerte ab. Je mehr Originalmesswerte aufgenommen worden sind, um so besser ist auch die Frequenzauflösung im Frequenzspektrum.

# Einstellungen Darstellung



Eine Darstellung besteht aus einer Tabelle und einem Diagramm mit x-Achse und bis zu 8 y-Achsen. Jede Messgröße kann frei auf eine dieser Achsen gelegt und im Bedarfsfall dabei noch umgerechnet werden  $(x^2, 1/x, 1/x^2, \log x)$  werden. Für die x-Achse sind drei weitere Größen vordefiniert: n (Tabellenzeile), t (Zeit), f (Frequenz für FFT).

Wenn mehr als eine y-Achse dargestellt wird, kann die sichtbare y-Achsenskalierung im Diagramm durch einen entsprechend bezeichneten Button umgeschaltet werden. Dies wirkt auch auf eine Koordinatenanzeige, aber nicht auf die anderen Auswertungen.

Wenn eine Darstellung nicht ausreicht, können durch **neue Darstellung** weitere erzeugt werden, die mit ihrem Namen in die Darstellungsseiten unter den Speed-Buttons einsortiert werden. Dort kann dann mit der Maus bequem zwischen den verschiedenen Darstellungen umgeschaltet werden.

In jeder Darstellung kann gewählt werden, ob ein kartesisches Diagramm oder ein Polardiagramm dargestellt werden soll. Die kartesischen Diagramme bieten zu jeder y-Achse die Option, die Werte als Balken darzustellen (Histogramm). Bei Polardiagrammen muss als x-Achse ein Winkel (Bereich 0° bis 360°) gewählt werden. Jede y-Achse wird dann als Betrag r einer komplexen Zahl gedeutet und entsprechend des Winkels dargestellt. Dabei muss der Ursprung nicht bei r = 0 liegen, sondern kann auch negativ sein (z. B. für die Darstellung von Antennen-Richtdiagrammen in dB).

#### **Anmerkungen**

Die angezeigten Kanäle lassen sich alternativ auch mit der linken Maustaste zwischen den Kanal-Buttons und der Tabelle und dem Diagramm hin und herziehen (Drag & Drop).

Die rechte Maustaste eröffnet auf den Skalen auch die Möglichkeit, die Achsen umzurechnen ( $x^2$ , 1/x,  $1/x^2$ ,  $\log x$ ) sowie Skalenminimum und Maximum zu verändern. Mit der linken Maustaste können Skalen verschoben werden.



# Einstellungen Modellbildung



Mit der Modellbildung werden real gemessene Werte mit einem mathematischen Modell verglichen. Es können insbesondere geeignete Konstanten so gewählt und verändert werden, dass das Modell möglichst gut mit der Realität überein stimmt. Im Gegensatz zur Anpassung (z. B. freie Anpassung), bei der die Funktionsgleichung bereits bekannt sein muss, reicht für die Modellbildung die Angabe von ein oder zwei Differenzialgleichungen erster Ordnung aus.

Neues Modell legt dazu einen neuen Datensatz an, beginnend mit dem Namen des Modells. Das neue Modell wird von ein oder zwei Modellgrößen beschrieben, die jeweils ein Symbol erhalten müssen, unter dem sie angesprochen werden können (voreingestellt x und y). Dieses Symbol sollte aus möglichst wenigen, aber aussagekräftigen Buchstaben bestehen und darf auch aus einem &-Zeichen gefolgt von einem Buchstaben bestehen. Es wird dann der entsprechende griechische Buchstabe angezeigt (sonst nur der lateinische). Außerdem sind die vorgeschlagenen Werte für den Messbereich und die Achsenskalierung (wichtig für die analoge und grafische Darstellung) sowie die Anzahl der signifikanten Nachkommastellen (wichtig für die digitale und tabellarische Darstellung) den individuellen Erfordernissen anzupassen. Damit Modellgrößen leicht von anderen Kanälen unterschieden werden können, sind ihre Zeiger blau.

Die mathematische Definition des Modells geschieht durch die Angabe der Anfangswerte für die Zeit t und der beiden definierten Modellgrößen sowie durch die Angabe der beiden Differenzialgleichungen. Diese insgesamt fünf Zahlenwerte oder Formeln müssen unter Beachtung der korrekten Formelschreibweise eingegeben werden. Alle fünf Formeln dürfen dabei von Konstanten abhängen, deren Werte nachträglich durch Ziehen am Zeiger ihres Anzeigeinstruments verändert werden können. Zusätzlich dürfen die beiden Differenzialgleichungen von der Messzeit t, von den beiden definierten Modellgrößen und von Formeln abhängen, die wiederum selbst nur von Konstanten oder von der Messzeit t abhängen dürfen. Alle erlaubten Abhängigkeiten der Differenzialgleichungen sind vor ihrem Eingabefeld aufgelistet.

Normalerweise werden mit der Modellbildung ein oder zwei Differenzialgleichungen erster Ordnung definiert. Mit 2. Ordnung lässt sich die Eingabe einer Differenzialgleichung zweiter Ordnung vereinfachen. Die erste Differenzialgleichung verknüpft dann automatisch die beiden Modellgrößen x und y durch x'=y und die zweite Differenzialgleichung hat die Form y'=x"=f(t,x',x"). Beispielsweise ist bei der Bewegungsgleichung s=x und v=y=x'. Damit muss nur die Differenzialgleichung s"=v' (=a=F/m) eingegeben werden.

Die wählbare Genauigkeit legt das Abbruchkriterium fest, mit dem die nummerische Integration der Differenzialgleichungen beendet werden soll. Eine geringere Genauigkeit verringert die Rechenzeit, erhöht aber auch den Fehler des Ergebnisses. Die Genauigkeit erhöht sich auch, wenn der angegebene Messbereich der ersten Modellgröße verkleinert wird.

Die wählbare Rechenzeit legt die maximale Zeit fest, die zur nummerischen Integration der Differenzialgleichungen zur Verfügung steht. Wenn die Rechenzeit unter Berücksichtigung der vorgegebenen Genauigkeit zu niedrig gewählt wurde, dann beginnen die berechneten Werte nach wie vor bei der gewählten Anfangszeit, enden aber vorzeitig.

## **Beispiele**

Das bekannteste Beispiel einer Differenzialgleichung zweiter Ordnung ist sicher die Newtonsche Bewegungsgleichung F=m·a oder s"=F(s,v,t)/m. Die beiden Modellgrößen sind in diesem Fall der Weg s und die Geschwindigkeit v und die erste Differenzialgleichung ist s'=v. Die beschleunigende Kraft F aus der zweiten Differenzialgleichung s"=v'=(F1+F2+F3)/m hängt vom speziellen Experiment ab und ist z. B.:

F1 = −m·g für Fallversuche

 $F_1 = -D \cdot s$  für Federschwingungen

Außerdem können unterschiedliche Reibungsarten auftreten, die zusätzliche Kräfte bewirken:

 $F_2 = -c \cdot sgn(v)$ für Coulomb-Reibung (z. B. Festkörperreibung)  $F2 = -c \cdot sgn(v) \cdot |v|$ für Stokes-Reibung (z. B. laminare Fluidreibung)

 $F2 = -c \cdot sgn(v) \cdot |v|^2$ für Newton-Reibung (z. B. Luftwiderstand, turbulente Fluidreibung)



Bei erzwungenen Schwingungen (Resonanz) kommt dann noch die anregende Kraft hinzu, z. B.:

F3 =  $A \cdot \sin(360 \cdot f \cdot t)$  sin berechnet den Sinus im Gradmaß F3 =  $A \cdot r\sin(\omega \cdot t)$  rsin berechnet den Sinus im Bogenmaß

Kombiniert man die verschiedenen Kräfte kommt man schnell zu einer ansehnlichen Anzahl von Experimenten, die leicht im Rahmen einer Modellbildung untersucht werden können.

Als weitere Beispiele bieten sich die Kondensatoraufladung und -entladung, Hochpass und Tiefpass an, die alle mit einer Differenzialgleichung erster Ordnung Q'=(U0–Q/C)/R für die Ladung Q des Kondensators beschrieben werden können.

In den Versuchsbeispielen sind einige Modellbildungen enthalten:

- Freier Fall mit g-Leiter (mit Modellbildung)
- Schwingungen eines Federpendels (mit Modellbildung)
- Schwingungen eines Federpendels mit Festkörperreibung (mit Modellbildung)
- Schwingungen eines Federpendels mit Schmiermittelreibung (mit Modellbildung)
- Schwingungen eines Federpendels mit laminarer Flüssigkeitsreibung (mit Modellbildung)
- Schwingungen eines Federpendels mit tubulenter Flüssigkeitsreibung/Luftreibung (mit Modellbildung)
- Auf- und Entladung eines Kondensators (mit Modellbildung)
- Gedämpfter Schwingkreis (mit Modellbildung)
- Erzwungene Schwingungen (mit Modellbildung)
- Tiefpass-Filter (mit Modellbildung)
- Hochpass-Filter (mit Modellbildung)

# Einstellungen Kommentar



Zur besseren Dokumentation von eigenen Versuchsdateien besteht hier die Möglichkeit Text einzugeben, zusammen mit der Versuchsdatei abzuspeichern und später wieder zu laden. Der Text lässt sich auch über die Zwischenablage mit Strg+V in das Eingabefeld einfügen.

# Allgemeine Einstellungen



F5

Hier kann die serielle Schnittstelle umgestellt werden, an der CASSY und/oder die anderen seriellen Messgeräte am Computer angeschlossen sind. Für CASSYs am USB-Port (ab Windows 98/2000) muss keine serielle Schnittstelle angegeben werden - sie werden automatisch gefunden. Außerdem kann die Sprache umgestellt werden.

Wenn diese Umstellung auch beim den nächsten Start der Software gelten soll, muss noch **Neue Vorgaben abspeichern** gewählt werden. Gleichzeitig speichert dies auch die aktuellen Einstellungen von:

- Schriftgröße wählen
- Koordinaten anzeigen
- Linienbreite wählen
- Werteanzeige wählen
- Skalierung wählen
- Raster einblenden

Die angegebenen CASSY-Module bezeichnen die erkannten Geräte und die Versionsinformation der CASSY-Module. Wenn die Versionen der in den CASSY-Modulen implementierten Software neuer oder älter als die hier vorliegende Software ist, erfolgt eine entsprechende Mitteilung. Durch CASSY-Module



**aktualisieren** überschreibt die hier vorliegende Software die Software, die in den CASSY-Modulen implementiert ist (egal ob neuer oder älter).

#### Tipp

Wenn die hier vorliegende Software älter ist als die CASSY-Module oder die Software aktualisiert werden soll, kann vom Internetserver http://www.ld-didactic.de die aktuelle Version geladen werden.

■ Update aus dem Internet laden

#### **Formelschreibweise**

## Variablen einer Formel f(time,date,n,t,...,old)

Die Formel f(...) darf von allen unten aufgeführten Kanälen abhängen. Dazu ist das Symbol des Kanals als Variablenname zu verwenden. Z. B. ist das Ergebnis der Formel **UA1 > 5** gleich 1, wenn die Spannung größer ist als 5 V und sonst gleich 0.

Formel für darf abhängen von

Messbedingung allen Kanälen

Formel Eingängen, Konstanten, seriellen Messgeräten und früher definierten Formeln

Relais/Spannungsquelle Eingängen, Konstanten, seriellen Messgeräten, Formeln Analogausgang Eingängen, Konstanten, seriellen Messgeräten, Formeln Digitalausgang Eingängen, Konstanten, seriellen Messgeräten, Formeln

Modell Modellgrößen, Konstanten und Formeln, die nur von der Zeit t abhängen

Zusätzlich darf die Formel noch von der Uhrzeit **time** in Sekunden, dem Datum **date** der Messzeit **t** in Sekunden, der Anzahl **n** der aufgenommenen Messwerte und dem letzten Wert der Formel **old** abhängen. Am Ende einer Formel darf ein Kommentar stehen, wenn dieser durch ein Semikolon von der Formel getrennt ist.

Mitunter bestehen die Symbole aus einem &-Zeichen gefolgt von einem Buchstaben. In diesem Fall wird der entsprechende griechische Buchstabe angezeigt (sonst der lateinische). Bei der Formeleingabe ist das &-Zeichen mit einzugeben.

#### Funktionen in einer Formel

Innerhalb einer Formel dürfen die folgenden Funktionen auftreten. Die Funktionsargumente müssen nur dann in Klammern stehen, wenn sie zusammengesetzt sind, z. B. bei **square(t/10)**.

**ramp** Rampe (Sägezahn zwischen 0 und 1, ramp(x) = frac(x)) **square** Rechteck (zwischen 0 und 1, square(x) = ramp(x) < 0.5)

saw Dreieck (zwischen 0 und 1)

shift Einmalige Rampe (ist 0 wenn Argument < 0, 1 wenn Argument > 1, sonst gleich dem Ar-

gument)

sin Sinus im Gradmaß (Periode 360°)
cos Cosinus im Gradmaß (Periode 360°)
tan Tangens im Gradmaß (Periode 360°)

 $\begin{array}{lll} \textbf{arcsin} & \textbf{Arcus Sinus im Gradma} \\ \textbf{arccos} & \textbf{Arcus Cosinus im Gradma} \\ \textbf{arctan} & \textbf{Arcus Tangens im Gradma} \\ \textbf{rsin} & \textbf{Sinus im Bogenma} \\ \textbf{Gosinus i$ 

rarcsin Arcus Sinus im Bogenmaß
rarctan Arcus Cosinus im Bogenmaß
Arcus Tangens im Bogenmaß

Argument zum Zeitpunkt der letzten Messwertaufnahme (letzte Tabellenzeile)

delta Änderung gegenüber der letzten Messwertaufnahme (delta(x) = x-last(x))

**next** Argument zum Zeitpunkt der nächsten Messwertaufnahme (nächste Tabellenzeile)

**new** ist 1, wenn sich das Argument geändert hat, 0 sonst

**random** Zufallszahl ( $0 \le \text{random}(x) \le x$ )

sqrQuadratwurzelexpExponentialfunktionInnatürlicher Logarithmuslogdekadischer Logarithmus

int Integer-Funktion (die nächst kleinere ganze Zahl)

frac Nachkomma-Funktion (Abstand zur nächst kleineren ganzen Zahl)

abs Absolutbetrag

sgn Signum (ist 1 wenn Argument > 0, -1 wenn Argument < 0, 0 wenn Argument = 0)

odd ist 1 wenn Argument ungerade, 0 wenn Argument geradeeven ist 1 wenn Argument gerade, 0 wenn Argument ungerade



not logische Invertierung (ist 1 wenn Argument gleich 0, ist 0 sonst)defined ist 1 wenn Argument definiert ist, 0 wenn Argument undefiniert

rundet die Zeit auf volle Sekunden ab (sec(x) = int(x))
rundet die Zeit auf volle Minuten ab (min(x) = 60\*int(x/60))

day gibt den Wochentag zurück (1 = Montag, ...)

#### Verknüpfung der Variablen und Funktionen

Alle Variablen (oder auch eingegebene Zahlenwerte) können durch die üblichen mathematischen Operatoren verknüpft werden.

Die Operatoren haben unterschiedliche Prioritäten. Je höher ein Operator in der folgenden Liste steht, desto höher ist seine Priorität bei der Auswertung der Formel ("Punktrechnung vor Strichrechnung"). Soll eine andere Auswertungsreihenfolge erzwungen werden, so sind die betreffenden Ausdrücke in Klammern zu setzen.

- 1) ^ Potenzierung
- 2) \* Multiplikation
  - Division
- 3) + Addition
  - Subtraktion
- 4) = Test auf Gleichheit
  - <> Test auf Ungleichheit
  - > Test auf Größer
  - >= Test auf Größer oder Gleich
  - < Test auf Kleiner
  - Test auf Kleiner oder Gleich
- 5) and logische Und-Verknüpfung
- 6) or logische Oder-Verknüpfung
- Siehe auch.

## Beispiele für die Verwendung der Variablen time, date, n, t und old

#### t <= 100

hat während der ersten 100 s der Messung den Wert 1 und danach den Wert 0. Diese Formel kann z. B. für das Zeitfenster verwendet werden um die Messung nach 100 s zu stoppen.

#### time >= 12:30:35

hat ab der Uhrzeit 12:30:35 den Wert 1, vorher den Wert 0. Es muss der Operator >= verwendet werden, da exakte Gleichheit nur für 1/100 s gilt und damit praktisch nicht erreicht wird.

#### min(time) = 11:45 and date = 18.3.1997

ist nur während der einen Minute am 18.3.1997 um 11:45 wahr (Wert 1) und sonst falsch (Wert 0).

## (T < 25) or (T < 27 and old)

realisiert einen Zweipunkt-Regler. Ist die Temperatur T kleiner 25 °C, so ist das Funktionsergebnis 1 (hier z. B. Heizung eingeschaltet). Ist die Temperatur T kleiner 27 °C **und** war die Heizung vorher bereit eingeschaltet, dann bleibt sie auch eingeschaltet. Erst wenn die Temperatur über 27 °C steigt, schaltet sich die Heizung aus und bleibt auch solange aus, bis die Temperatur wieder unter 25 °C sinkt.

## 0,5 \* (n – 1)

errechnet aus der Nummer der laufenden Messung z. B. ein Volumen. In diesem Fall werden alle 0,5 ml ein Messwert aufgenommen und so aus n das Volumen berechnet. Für die erste Tabellenzeile hat n den Wert 1.

## Beispiele für die Erzeugung von Frequenzen

# ramp(t/10)

erzeugt eine Rampe mit einer Periodendauer von 10 Sekunden (t ist die Messzeit in Sekunden und startet mit Start der Messung bei 0). Die Rampe startet mit 0 und endet mit 1. Werden andere Amplituden benötigt, so muss zusätzlich mit der gewünschten Amplitude multipliziert werden.



#### saw(t/5)

erzeugt ein Dreieck mit einer Periodendauer von 5 Sekunden.

#### square(t/5)

erzeugt analog zum vorigen Beispiel ein Rechteck mit einer Periodendauer von 5 Sekunden. Nach jeweils 2.5 Sekunden wird zwischen 0 und 1 und umgekehrt gewechselt.

## 10\*(ramp(t/10) < 0.4)

erzeugt wieder ein Rechteck. Diesmal jedoch mit der Amplitude 10 und einem Tastverhältnis von 40%. 40% der Zeit ist der Klammerausdruck 1 (wahr) und die restlichen 60% der Zeit ist er 0 (falsch).

#### shift((time-12:30)/100)

erzeugt eine einmalige Rampe ab der Uhrzeit 12:30 für die Dauer von 100 Sekunden. In dieser Zeit wächst der Wert der Formel kontinuierlich von 0 auf 1.

#### sin(360\*t/7)

erzeugt eine Sinusschwingung mit der Periodendauer 7 Sekunden und der Amplitude 1.

#### Beispiele für die Rangfolge der Auswertung arithmetischer Ausdrücke

#### $x+y^z*2$

besitzt die Operator-Rangfolge ^,\* und +. Das hat zur Folge, dass zuerst y^z ausgewertet wird, das Ergebnis anschließend mit zwei multipliziert und erst zum Schluss x addiert wird. Soll die vorgegebene Operator-Rangfolge unterdrückt werden, so müssen die betreffenden Ausdrücke in Klammern gesetzt werden.

#### $(x+y)^{(z*2)}$

im Gegensatz zum vorigen Beispiel werden hier zunächst die Addition x+y sowie die Multiplikation z\*2 ausgeführt. Erst zum Schluss werden die beiden Einzelergebnisse miteinander potenziert.

#### Beispiele für die Auswertung Boolescher Ausdrücke

#### x < 5

kann entweder den Wert 0 (falsch, für  $x \ge 5$ ) oder den Wert 1 (wahr, für x < 5) haben.

#### x1 < 5 and x2 > 0

hat den Wert 1 (wahr, wenn gleichzeitig x1 < 5 und x2 > 0 ist) und sonst den Wert 0. Es müssen keine Klammern gesetzt werden, da der Operator and eine geringere Priorität hat als < und >.

# 5\*(T < 20)

hat in der Klammer nur die Werte 0 (falsch) und 1 (wahr). Diese Werte werden jedoch noch mit 5 multipliziert. Eine solche Formel ist daher nur bei Analogausgängen sinnvoll. In diesem Fall würde am Analogausgang eine Spannung von 5 V ausgegeben werden, wenn T kleiner als 20 wird (z. B. eine Temperatur).

## time >= 12:30

hat ab der Uhrzeit 12:30 den Wert 1, vorher den Wert 0. Es muss der Operator >= verwendet werden, da exakte Gleichheit nur für 1/100 s gilt und damit praktisch nicht erreicht wird.

#### sec(time) = 11:45:07 and date = 18.3.1997

ist nur während der einen Sekunde am 18.3.1997 um 11:45:07 wahr (Wert 1) und sonst falsch (Wert 0).

#### day(date) = 1

ist jeden Montag wahr (Wert 1) und sonst falsch (Wert 0).



# **Formelbeispiele**

## Einfacher Regler: ∂A11<25

( $\vartheta$  als &J eingeben) ist 1, wenn die Temperatur kleiner als 25 °C ist und 0 sonst (z. B. zur Steuerung einer Heizung).

#### Zweipunkt-Regler: %A11<25 or (%A11<27 and old)

 $(\vartheta$  als &J eingeben) ist 1, wenn die Temperatur kleiner als 25 °C ist oder - für den Fall, dass der Wert vorher auch schon 1 war - sogar bis 27 °C und 0 sonst (z. B. zur Zweipunkt-Steuerung einer Heizung). Der Regler schaltet also unter 25 °C ein und über 27 °C wieder aus.

## Rampe: 8\*ramp(t/10)

erzeugt eine Rampe von 0 bis 8 mit der Periodendauer 10 s (0,1 Hz).

#### Rechteck mit freiem Tastverhältnis: ramp(t/10) < 0.8

erzeugt ein Rechteck mit der Periodendauer 10 s (0,1 Hz). 80% der Periodendauer ist das Rechteck 1 und sonst 0.

## Temperaturkompensation pH: 7+(pHA1-7)\*(25+273)/(∂B1+273)


(ϑ als &J eingeben) korrigiert den bei 25 °C kalibrierten pH-Wert pHa1 für die neue Temperatur ϑB1.

# Temperaturkompensation Leitfähigkeit: CA1/(1+(∂B1-25)/45)

(θ als &J eingeben) korrigiert die bei 25 °C kalibrierte Leitfähigkeit CA1 für die neue Temperatur θΒ1.



## Sensor-CASSY

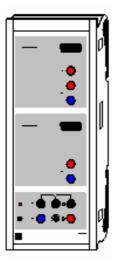

#### Einführung

Sensor-CASSY (USB bzw. seriell) ist ein kaskadierbares Interface zur Messdatenaufnahme

- zum Anschluss an den USB-Port eines Computers (ab Windows 98/2000) bzw. die serielle Schnittstelle RS232, an ein weiteres CASSY-Modul oder an das CASSY-Display
- 4-fach galvanisch getrennt (Eingänge A und B, Relais R, Spannungsquelle S)
- bis zu 8 CASSY-Module kaskadierbar (dadurch Vervielfachung der Ein- und Ausgänge)
- bis zu 8 Analogeingänge pro Sensor-CASSY über Sensorbox nachrüstbar
- automatische Sensorboxerkennung durch CASSY Lab (plug & play)
- mikrocontrollergesteuert mit CASSY-Betriebssystem (jederzeit bequem über Software für Leistungserweiterungen aktualisierbar)
- variabel aufstellbar als Tisch-, Pult- oder Demogerät (auch im CPS/TPS-Experimentierrahmen)
- Spannungsversorgung 12 V AC/DC über Hohlstecker oder ein benachbartes CASSY-Modul
- Developer Information für eigene Softwareentwicklung im Internet verfügbar

## Sicherheitshinweise

- Zu Ihrer eigenen Sicherheit Sensor-CASSY nicht mit Spannungen über 100 V beschalten.
- Transport mehrerer kaskadierter CASSY-Module nur im Experimentierrahmen oder einzeln (die mechanische Stabilität der Kopplung ohne Experimentierrahmen reicht nur zum Experimentieren und nicht zum Transport aus).
- Zur Spannungsversorgung der CASSY-Module möglichst nur mitgeliefertes Steckernetzgerät (12 V / 1,6 A) verwenden.
- Ein Sensor-CASSY kann auch ein benachbartes Modul mit Spannung versorgen solange die Gesamtstromaufnahme kleiner 1,6 A bleibt (reicht für max. 2 Module, schaltet bei Überlast ab). Erforderlichenfalls weitere Sensor-CASSYs separat mit Spannung versorgen.
- Siehe auch.

## **Technische Daten**

5 Analoge Eingänge (jeweils 2 beliebige Eingänge A und B gleichzeitig nutzbar)

2 Analoge Spannungseingänge A und B auf 4-mm-Sicherheitsbuchsen

Auflösung: 12 Bit

Messbereiche: ±0,3/1/3/10/30/100 V

Messfehler: ±1 % zuzüglich 0,5 % vom Bereichsendwert

Eingangswiderstand: 1 M $\Omega$ 

Abtastrate: max. 200.000 Werte/s (= 100.000 Werte/s pro Eingang) Anzahl Messwerte: praktisch unbegrenzt (PC-abhängig) bis 100 Werte/s,

bei höherer Messrate max. 32.000 Werte

(= 16.000 Werte pro Eingang)

1 Analoger Stromeingang A auf 4-mm-Sicherheitsbuchsen

Messbereiche:  $\pm 0,1/0,3/1/3$  A

Messfehler: Spannungsmessfehler zuzüglich 1 %

Eingangswiderstand:  $< 0.5 \Omega$  (außer bei Überlast)

weitere Daten siehe Spannungseingänge

2 Analoge Eingänge auf Sensorbox-Steckplätzen A und B (Anschluss aller CASSY-Sensorboxen und Sensoren möglich)

Messbereiche: ±0,003/0,01/0,03/0,1/0,3/1 V

Eingangswiderstand:  $10 \text{ k}\Omega$ 

weitere Daten siehe Spannungseingänge

Technische Daten ändern sich entsprechend einer aufgesteckten Sensorbox

Erkennung der dann möglichen Messgrößen und Bereiche automatisch durch CASSY Lab

nach Aufstecken einer Sensorbox

4 Timer-Eingänge mit 32-Bit-Zählern auf Sensorbox-Steckplätzen A und B

(z. B. für BMW-Box, GM-Box oder Timer-Box)

Zählfrequenz: max. 100 kHz Zeitauflösung: 0,25 µs

Messzeit zwischen zwei Ereignissen am selben Eingang: min. 100 µs Messzeit zwischen zwei Ereignissen an verschiedenen Eingängen: min. 0,25 µs

Speicher: max. 10.000 Zeitpunkte (= 2.500 pro Eingang)

1 Umschaltrelais (Schaltanzeige mit LED) Bereich: max. 100 V / 2 A

1 Analoger Ausgang (PWM-Ausgang) (pulsweitenmoduliert, schaltbare Spannungsquelle, Schalt-

anzeige mit LED, z. B. für Haltemagnet oder Experimentversorgung)

Spannung variabel: max. 16 V / 200 mA (Last  $\geq$  80  $\Omega$ )

PWM-Bereich: 0 % (aus), 5-95 % (1 % Auflösung), 100 % (an)

PWM-Frequenz: 100 Hz

12 Digitale Eingänge (TTL) auf Sensorbox-Steckplätzen A und B (z. Zt. nur für automatische Sensorbox-Erkennung verwendet)

6 Digitale Ausgänge (TTL) auf Sensorbox-Steckplätzen A und B

(z. Zt. nur für automatische Messbereichsumschaltung einer Sensorbox verwendet)

1 USB-Port (USB-Version) bzw. serielle Schnittstelle RS232 (SubD-9) zum Anschluss eines Computers

CASSY-Bus zum Anschluss weiterer CASSY-Module oder des CASSY-Displays

Abmessungen (BxHxT): 115 mm x 295 mm x 45 mm

Masse: 1,0 kg

#### Lieferumfang

1 Sensor-CASSY

- 1 Software CASSY Lab ohne Freischaltcode für Windows 95/98/NT oder höher mit ausführlicher Hilfe (20 Nutzungen frei, dann als Demoversion nutzbar)
- 1 Installationsanleitung
- 1 USB-Kabel bzw. serielles Kabel (SubD-9)
- 1 Steckernetzgerät 12 V / 1,6 A



# Einstellungen Sensoreingang

Sensor-CASSY bietet zwei galvanisch getrennte Sensoreingänge A und B, die sowohl Spannung (bzw. Eingang A auch Stromstärke) als auch andere Messgrößen – bestimmt durch die aufgesteckte Sensorbox – erfassen können. Die Erkennung der Sensorbox und damit der Messmöglichkeiten geschieht **automatisch**, d. h., in der Darstellung der CASSY-Anordnung werden die Eingänge mit eventuell aufgesteckten Sensorboxen skizziert. Dort werden sie zur Vorbereitung einer Messung auch durch Anklicken aktiviert.

Die angezeigte Auswahl der Messgrößen und Messbereiche hängt also davon ab, ob und welche Sensorbox aufgesteckt ist. Andere Messgrößen erfordern eine andere Sensorbox (siehe auch Produktkatalog).

Die ausgewählte Messgröße kann als Momentanwert gemessen, über viele Messwerte gemittelt oder ihr Effektivwert bestimmt werden. Normalerweise reicht eine ungemittelte Messung der **Momentanwerte** aus. Ist das Eingangssignal jedoch verrauscht oder mit "Brumm" überlagert, sind **gemittelte Werte** erforderlich. Bei Wechselspannungen misst man in der Regel **Effektivwerte** (eine zweikanalige Effektivwertmessung erzeugt automatisch den passenden  $\cos \phi$ -Kanal). Wenn das Zeitintervall kleiner als 10 ms ist, weicht in den letzten beiden Fällen die Messwertaufnahme in die Tabelle und in das Diagramm von den Anzeigeinstrumenten ab. Dadurch ist es gleichzeitig möglich, Kurvenformen und Effektivwerte darzustellen.

Standardmäßig werden die gemittelten Werte und die Effektivwerte während einer Zeit von 100 ms berechnet. Diese Zeit kann global für alle Eingänge verändert werden. Bei Verwendung des Power-CASSYs oder des Profi-CASSYs wird diese Zeit bei jeder Frequenzänderung des Ausgangssignals so verändert, dass immer eine ganze Anzahl von Perioden ausgewertet wird.

Wenn die Genauigkeit der Messwerte nicht ausreicht, kann diese durch Korrigieren noch erhöht werden. Dies kann z. B. erforderlich werden, wenn eine spezielle pH-Elektrode an das Programm angepasst werden soll.

## Spezialtasten (oft nicht sichtbar)

Box-LED Leuchtdiode auf der Sensorbox an/aus, z. B. SMOOTH (Brücken-Box) oder COMPENSATION (Voraussetzung zum Taraabgleich bei der B-Box)

→ 0 ← Nullpunkteinstellung (macht den aktuellen Wert zum Nullpunkt), z. B. für Weg, Kraft, Druck, Ereignisse, Stoß

s ↔ -s Vorzeichenumkehr beim Weg (Bewegungsaufnehmer mit der BMW-Box)

Außerdem gibt es noch spezielle Eingabefelder, die die Benutzung der BMW-Box, GM-Box und Timer-Box erheblich erleichtern (z. B. Torzeit, Breite der Unterbrecherfahne) und auch nur angezeigt werden, wenn die passende Box aufgesteckt ist.

Bei der Reaktionstest-Box muss das Reaktionssignal erst durch das Drücken eines Tasters (Hand- oder Fußtaster) angefordert werden. Die eigentliche Reaktion muss dann nach Erscheinen des Zeigers im Anzeigeinstrument entsprechend der Farbe des Zeigers (rot, grün oder gelb) erfolgen.

Siehe auch.

# Messgrößen Sensoreingang

Die erfassbaren Messgrößen eines Sensoreingangs hängen ganz entscheidend von der Sensorbox ab, die auf den Sensoreingang aufgesteckt ist. Folgende Tabelle definiert die Zuordnung zwischen Sensorbox, Messgröße und Sensor:

Nr.	Sensorbox	Messgröße	Sensor	Bemerkung
	ohne	Spannung Strom		nur Eingang A und nur für Ströme kleiner 3 A
524 031	Stromquellen- Box	Widerstand Weg	Wegaufnehmer (529 031)	Potentiometer zur Wegmessung
524 032	BMW-Box	Weg (∆s=±1 mm)	Bewegungsaufnehmer (337 631*)	obere Buchse auf BMW-Box
		Winkel (∆s=±1 mm)	dto.	mit Bewegungsrichtung dto.
		Weg (∆s=+1 cm)	Paar Registrierrollen (337 16*)	zusätzlich Radius angeben untere Buchse auf BMW-Box nur erstes Rad verwenden
		Winkel (∆s=+1 cm)	dto.	dto. zusätzlich Radius angeben
524 033	GM-Box	Ereignisse Rate	Fensterzählrohr (z. B. 559 01) dto.	Torzeit angeben mit Häufigkeitsverteilung als alternative Darstellung
524 0331	GM-Zählrohr S	Ereignisse Rate	integriert integriert	Torzeit angeben mit Häufigkeitsverteilung als alternative Darstellung
524 034	Timer-Box	Pegel Ereignisse		
		Frequenz Rate		Torzeit angeben dto. mit Häufigkeitsverteilung als alternative Darstellung
		Periodendauer Laufzeit Verdunkelungen Dunkelzeit Weg (Δs=1 cm)	Gabellichtschranke (337 46*) dto. Speichenrad (z. B. 337 461) oder g-Leiter (529 034) jeweils mit Gabellichtschranke (337 46*)	von Ereignis an E nach F Nummer der Verdunkelung Dauer der Verdunkelung
		Winkel ( $\Delta s=1$ cm) Linearer Stoß (v) Drehstoß ( $\omega$ )	dto. 2 Gabellichtschranken (337 46*) dto.	Radius angeben Fahnenbreite angeben Fahnenbreite und Radius angeben
524 035	pH-Box	pH-Wert Spannung	pH-Elektrode (z. B. 667 424) dto.	mit zwei Pufferlösungen korrigieren Temperaturkompensation über Formel möglich spezielle Auswertung für Äquiva- lenzpunkt
524 036	KTY-Box	Temperatur Widerstand	KTY-Sensor (529 036) dto.	
524 037	Leitfähigkeits- Box	Leitfähigkeit	Leitfähigkeits-Messzelle (667 426)	mit aufgedrucktem Faktor k der Messzelle korrigieren Temperaturkompensation über Formel möglich
524 038	B-Box	magnetische Flussdichte	Tangentiale B-Sonde (516 60*) Axiale B-Sonde (516 61*)	zum Offsetabgleich mit → 0 ← muss LED auf der Box mit <b>Box-LED</b>
		Relativdruck (2000 hPa) Relativdruck (70 hPa) Absolutdruck	Drucksensor (529 038*) Drucksensor 70 hPa (529 040*) Absolutdrucksensor (529 042*)	angeschaltet sein
524 0381	Kombi B-Sonde S	magnetische Flussdichte (tangential oder axial)	integriert	Offsetabgleich mit $\rightarrow$ 0 $\leftarrow$
524 0382	Axiale B-Sonde S	magnetische Flussdichte (axial)	integriert	Offsetabgleich mit $\rightarrow$ 0 $\leftarrow$
524 039	dU-Box	Spannung		wegen galvanischer Trennung nicht mehr erforderlich
524 040	μV-Box	Spannung		hochempfindlicher Eingang (Auflösung bis 0,5 μV)
524 041	Brücken-Box	Kraft	Kraftsensor (314 261*)	Box-LED schaltet zwischen ge- glättet (SMOOTH) und ungeglättet um; ist durch Kraftsensor S, ±1 N ersetzt



524 042	Kraftsensor S, ±50 N	Kraft Beschleunigung	integriert	für große Kräfte bis 50 N
524 043	30-A-Box	Strom		nur für Ströme größer 3 A verwenden (sonst ohne Box auf A)
524 044	Temperatur- sensor S (NTC)	Temperatur	integriert	
524 045	Tempera- tur-Box	Temperatur  Differenztemperatur	Temperaturfühler NTC (666 212) oder NiCr-Ni (666 193) 2 NiCr-Ni (666 193)	
524 046	Reaktionstest- Box	Reaktionszeit	Handtaster (662 148) oder Fuß- taster (662 149)	zum Start vorher Taste drücken - zur Reaktion wieder entsprechend der Farbe des Zeigers
524 0461	Reaktionstest- Adapter S	Reaktionszeit	Handtaster (662 148) oder Fuß- taster (662 149)	zum Start vorher Taste drücken - zur Reaktion wieder entsprechend der Farbe des Zeigers
524 047	Puls-Box	Puls Spannung	integriert	zum Einpegeln der Box mind. 10 s warten Durchblutungskurve
524 0471	Puls-Sensor S	Puls	integriert	zum Einpegeln des Sensors mind. 10 s warten
524 048	Hautwider-	Spannung Hautwiderstand	integriert	Durchblutungskurve Messbereich individuell anpassen
	stands-Box			(Achse mit Maus verschieben oder mit rechter Maustaste anklicken)
524 0481	Hautwider- stands-Sensor S	Hautwiderstand	integriert	Messbereich individuell anpassen (Achse mit Maus verschieben oder mit rechter Maustaste anklicken)
524 049	EKG/EMG-Box	3 EKG-Ableitungen EMG	integriert	
524 050	Blutdruck-Box	Blutdruck	integriert	spezielle Auswertung für Systole und Diastole
524 0501	Blutdruck-	Puls Blutdruck	integriert	nur Blutdruckschwankungen spezielle Auswertung für
024 0001	Sensor S	Puls	mognore	Systole und Diastole nur Blutdruckschwankungen
524 051	Lux-Box	Beleuchtungsstärke	Luxsensor (666 243) IR-Sensor (666 247) UV-A-Sensor (666 244) UV-B-Sensor (666 245) UV-C-Sensor (666 246)	mit aufgedrucktem Faktor F des Sensors korrigieren
524 0511	Lux-Adapter S	Beleuchtungsstärke	Luxsensor (666 243) IR-Sensor (666 247) UV-A-Sensor (666 244) UV-B-Sensor (666 245) UV-C-Sensor (666 246)	mit aufgedrucktem Faktor F des Sensors korrigieren
524 052	Sauerstoff-Box	O2-Sättigung O2-Konzentration	Sauerstoffelektrode (667 458)	in O2-Gas auf 100% korrigieren mit gleichem Faktor wie bei Sätti- gung korrigieren
524 0521	Sauer- stoff-Adapter S	Temperatur O2-Sättigung O2-Konzentration Temperatur	Sauerstoffelektrode (667 458)	in O2-Gas auf 100% korrigieren mit gleichem Faktor wie bei Sätti- gung korrigieren
524 054	Elektrome-	Spannung		extrem hochohmiger Eingang, z. B.
524 055	ter-Box Amplifier-Box	Spannung		für Elektrostatik ist durch μV-Box ersetzt
524 056	Spirometer-Box	Volumenfluss	integriert	
524 057	Klima-Box	rel. Luftfeuchte Temperatur Temperatur Luftdruck	Feuchtesensor (529 057) Feuchtesensor (529 057) Temperaturfühler NTC (666 212) integriert	mit aufgedruckten Werten C1 bis C4 kalibrieren
F0 4 0 5 7 0	Familiation	Beleuchtungsstärke	Luxsensor (666 243)	mit aufgedrucktem Faktor F des Sensors korrigieren
524 0572	Feuchtefühler S	rel. Luftfeuchte Temperatur	integriert integriert	
524 058	VKA-Box	Impulshöhenverteilung	Szintillationszähler (559 901) mit Detektor-Ausgangsstufe (559 912) oder Halbleiter-Detektor (559 92) mit Diskriminator-Vorverstärker (559 93*)	Messung radioaktiver Spektren

1		١
•	Ľ	,

524 059	Mikrofon S	Spannung Frequenz Laufzeit Pegel	integriert	externes Mikrofon anschließbar
524 060	Kraftsensor S, ±1 N	Kraft	integriert	für Kräfte bis 1 N
524 062	UI-Sensor S	Spannung Strom	integriert 1 $\Omega$ Shunt	für Pocket-CASSY und Mo- bile-CASSY
524 0621	UIP-Sensor S	Spannung Strom	integriert integriert	für Pocket-CASSY und Mo- bile-CASSY
524 064	Drucksensor S, 2000 hPa	Relativdruck	integriert	
524 065	Absolutdruck- sensor S	Absolutdruck	integriert	
524 066	Drucksensor S, 70 hPa	Relativdruck	integriert	
524 067	Chemie-Box	pH-Wert Leitfähigkeit Temperatur Temperatur Differenztemperatur	pH-Sensor (667 4172) Leitfähigkeits-Sensor (529 670) Leitfähigkeits-Sensor (529 670) Temperatur-Sensor (529 676) 2 Temperatur-Sensoren (529 676)	
F24 0674	Leitfähig-	Potential	Leitfähigkeits-Sensor (529 670)	
524 0671	keits-Adapter S	Leitfähigkeit Temperatur	Leitfähigkeits-Sensor (529 670)	
524 0672	pH-Adapter S	pH-Wert Potential	pH-Sensor (667 4172)	
524 0673	NiCr-Ni-Adapter S	Temperatur Differenztemperatur	Temperatur-Sensor (529 676) 2 Temperatur-Sensoren (529 676)	
524 068	Fliehkraftgerät S	Fliehkraft	integriert	
524 069	Ein- tauch-Photomet er S	Transmission Extinktion Konzentration	integriert	
524 070	Ultraschall- Bewegungs- sensor S	Weg Temperatur	integriert integriert	
524 071	Ethanol-Sensor S	Konzentration Temperatur	integriert integriert	
524 073	Laser- Bewegungs- sensor S	Weg	integriert	
524 074	Timer S	Pegel Ereignisse		
		Frequenz Rate		Torzeit angeben dto. mit Häufigkeitsverteilung als alternative Darstellung
		Periodendauer Laufzeit		von Ereignis an E nach F
		Verdunkelungen Dunkelzeit	Gabellichtschranke (337 46*) dto.	Nummer der Verdunkelung Dauer der Verdunkelung
		Weg (∆s=1 cm)	Speichenrad (z. B. 337 461) oder g-Leiter (529 034) jeweils mit Gabellichtschranke (337 46*)	Ü
		Winkel ( $\Delta s=1$ cm) Linearer Stoß (v) Drehstoß ( $\omega$ ) Weg ( $\Delta s=\pm 1$ mm)	dto. 2 Gabellichtschranken (337 46*) dto. Kombilichtschranke (337 462*) mit Kombispeichenrad (337 464)	Radius angeben Fahnenbreite angeben Fahnenbreite und Radius angeben an linker Buchse anschließen
		Winkel (∆s=±1 mm)	dto.	zusätzlich Radius angeben
524 076	Auto-Box i	Drehzahl Zündwinkel Pegel Frequenz Tastverhältnis Ausschaltzeit Einschaltzeit	Werkstatt-OT-Geber (738 989) Induktiver Impulsgeber (738 986)	



524 077	Auto-Box Z	Primarspannung Sekundärspannung Schließabschnitt Drehzahl	Kapazitiver Messwertgeber (738 987)
524 078	CAN-Bus-Box	CAN-Bus-Botschaft CAN-Bus-Daten	integriert
524 081	LIN-Bus-Box	LIN-Bus-Spannung LIN-Bus-Botschaft LIN-Bus-Daten	integriert

Mit \* bezeichnete Sensoren brauchen zum Anschluss an die Sensorbox ein 6-poliges Verbindungskabel (501 16).



# Korrigieren Sensoreingang

Zur Korrektur von Messwerten gibt es verschiedene Möglichkeiten, die sich alle einfach aus dem Dialogfenster ergeben.

Links vom Gleichheitszeichen können ein Offset (Verschiebung) und/oder ein Faktor eingegeben werden, mit denen die Software aus den links angezeigten Messwerten (Istwerte) die Anzeigewerte rechts vom Gleichheitszeichen (Sollwerte) berechnet. Zur Berechnung der Korrektur muss jeweils **Offset korrigieren** oder **Faktor korrigieren** betätigt werden.

Alternativ können auch die beiden Sollwerte oder jeweils ein Sollwert und ein Rechenwert vorgegeben werden. **Korrektur löschen** verwirft die Korrektur.

#### **Abspeichern**

Eine Korrektur wird zusammen mit den anderen Einstellungen des Programms abgespeichert. Damit die Korrektur nach einem erneuten Laden noch der Realität entspricht, ist darauf zu achten, dass die selben Elektroden und Sensorboxen am selben Sensor-CASSY wieder verwendet werden (evtl. Elektroden, Sensorboxen und CASSYs markieren).

#### **Beispiele**

Zwei Pufferlösungen mit pH 3 und pH 9 sollen zur Korrektur verwendet werden. Dann sind die beiden Sollwerte 3 und 9 (rechts eingeben). Wenn die pH-Elektrode in der pH 3-Lösung eingetaucht ist, muss der Taster neben dem Sollwert 3 (z. B. **Offset korrigieren**) und bei pH 9-Lösung der andere Taster (z. B. **Faktor korrigieren**) betätigt werden.

Eine Leitfähigkeitselektrode mit dem K-Faktor 1,07 soll an die Software angepasst werden. Dazu ist lediglich der Faktor 1,07 in die zweite Zeile als Faktor einzugeben und **Faktor korrigieren** zu wählen.

#### Besonderheit bei der Klima-Box (524 057)

Bei der Klima-Box muss vor der ersten Messung mit dem Feuchtesensor (529 057) dieser kalibriert werden. Dazu sind auf dem Feuchtesensor vier Werte C1 bis C4 angegeben. Wenn diese einmal eingegeben worden sind, werden sie im Sensor-CASSY gespeichert. Sie brauchen dann nicht noch einmal angegeben werden und stehen auch für eine spätere Messung mit dem CASSY-Display zur Verfügung.



## Einstellungen Relais/Spannungsquelle

Sensor-CASSY bietet ein Relais R und eine über einen Drehknopf einstellbare Spannungsquelle S. Beide können von der Software geschaltet werden. Dazu müssen sie erst in der CASSY-Anordnung durch Anklicken aktiviert werden.

Am einfachsten ist die Synchronisation mit dem Start einer Messung (z. B. für einen Haltemagneten an der Spannungsquelle S). Dazu muss lediglich **Umschalten während automatischer Aufnahme** aktiviert werden.

Es lässt sich aber auch der Schaltzustand des Relais oder der Spannungsquelle explizit über eine Formel definieren. Eine Formel darf von allen Größen abhängen, die in der angezeigten Liste aufgeführt sind, und muss unter Beachtung der korrekten Formelschreibweise eingegeben werden (siehe auch Beispiele). Ein Formelergebnis ungleich 0 bedeutet AN="eingeschaltet", ein Formelergebnis gleich 0 bedeutet AUS="ausgeschaltet". Diese Formel wird nicht mehr während der Messung ausgewertet, wenn **Umschalten während automatischer Aufnahme** aktiviert ist.

#### **PWM-Analogausgang**

Die Spannungsquelle S ist eigentlich ein pulsweitenmodulierter Analogausgang. Die Maximalspannung wird am Drehknopf eingestellt. Die Formel steuert dann nicht nur AUS (=0) oder AN (=1), sondern erlaubt auch Zwischenwerte (z. B. 0,41 = abwechselnd 41 % der Zeit AN und 59 % der Zeit AUS mit einer Periodendauer von 10 ms). Für diese Zwischenwerte ist **Umschalten während automatischer Aufnahme** wirkungslos.

Mit diesem Analogausgang lassen sich also Baugruppen steuern, für die nur der Mittelwert oder der Effektivwert der Ausgangsspannung relevant ist (z. B. würde die Formel **saw(time/10)** eine kleine Glühlampe 5 s lang heller und 5 s lang wieder dunkler werden lassen).

Einen universelleren Analogausgang bietet das Power-CASSY und das Profi-CASSY.



#### **Power-CASSY**



#### Einführung

Power-CASSY (USB bzw. seriell) ist ein kaskadierbares Interface nutzbar als programmierbare Spannungs- oder Stromquelle (Leistungsfunktionsgenerator) mit integrierter Strom- oder Spannungsmessung

- zum Anschluss an den USB-Port eines Computers (ab Windows 98/2000) bzw. die serielle Schnittstelle RS232, an ein weiteres CASSY-Modul oder an das CASSY-Display
- · galvanisch getrennt
- bis zu 8 CASSY-Module kaskadierbar (dadurch Vervielfachung der Ein- und Ausgänge)
- mikrocontrollergesteuert mit CASSY-Betriebssystem (jederzeit bequem über Software für Leistungserweiterungen aktualisierbar)
- variabel aufstellbar als Tisch-, Pult- oder Demogerät (auch im CPS/TPS-Experimentierrahmen)
- Spannungsversorgung 12 V (nur Wechselspannung) über Hohlstecker
- Developer Information für eigene Softwareentwicklung im Internet verfügbar

#### Sicherheitshinweise

- Transport mehrerer kaskadierter CASSY-Module nur im Experimentierrahmen oder einzeln (die mechanische Stabilität der Kopplung ohne Experimentierrahmen reicht nur zum Experimentieren und nicht zum Transport aus).
- Zur Spannungsversorgung der CASSY-Module möglichst nur mitgeliefertes Steckernetzgerät (12 V / 1,6 A) verwenden.
- Siehe auch.



#### **Technische Daten**

1 Programmierbare Spannungsquelle mit gleichzeitiger Strommessung

(z. B. für Kennlinienaufnahme)
Auflösung:
12 Bit
Aussteuerbereich:
±10 V
Messbereich:
±0,1/0,3/1 A

Spannungsfehler: ±1 % zuzüglich 0,5 % vom Bereichsendwert

Stromfehler: Spannungsfehler zuzüglich ±1 %

Abtastrate: 200.000 Werte/s

(= 100.000 Werte/s Spannung und Strom)

Anzahl Messwerte: praktisch unbegrenzt (PC-abhängig) bis 100 Werte/s,

bei höherer Messrate max. 32.000 Werte (= 16.000 Werte für Spannung und Strom)

1 Programmierbare Stromguelle mit gleichzeitiger Spannungsmessung

(alternativ zur Spannungsquelle wählbar)

Aussteuerbereich: ±1 A
Messbereich: ±1/3/10 V
weitere Daten siehe Spannungsquelle

1 USB-Port (USB-Version) bzw. serielle Schnittstelle RS232 (SubD-9) zum Anschluss eines Com-

puters

1 CASSY-Bus zum Anschluss weiterer CASSY-Module oder des CASSY-Displays

Abmessungen (BxHxT): 115 mm x 295 mm x 45 mm

Masse: 1,0 kg

#### Lieferumfang

1 Power-CASSY

- 1 Software CASSY Lab ohne Freischaltcode für Windows 95/98/NT oder höher mit ausführlicher Hilfe (20 Nutzungen frei, dann als Demoversion nutzbar)
- 1 Installationsanleitung
- 1 USB-Kabel bzw. serielles Kabel (SubD-9)
- 1 Steckernetzgerät 12 V / 1,6 A

#### Hinweise zur Leistungsgrenze

Das Power-CASSY kann bedingt durch die Leistungsfähigkeit des mitgelieferten Steckernetzgeräts nicht in allen Fällen einen Gleichstrom von 1 A bei 10 V garantieren. Erst wenn ein zweites Steckernetzgerät (nicht im Lieferumfang enthalten) eingesteckt ist, hat das Power-CASSY auch in solchen Grenzfällen noch ausreichend Leistungsreserven.

Die Abtastrate von 100 kHz für den Ausgabekanal begrenzt die ausgegebene Frequenz auf maximal 10 kHz. Dabei ist die Signalform mit 10 µs aufgelöst, besteht also aus mindestens 10 Punkten pro Periode jeweils im Abstand von 10 µs. Lässt sich damit die eingestellte Frequenz oder das Tastverhältnis nicht exakt erreichen, dann wird versucht, beide Vorgaben über eine längere Zeit gemittelt möglichst genau zu erreichen.

Wird Power-CASSY als Stromquelle betrieben, wird die maximale Frequenz zusätzlich durch eine virtuelle Ausgangskapazität von bis zu 10  $\mu F$  verringert. Bei einer ohmschen Last von R = 100  $\Omega$  ergibt die Ausgangskapazität eine Zeitkonstante von R\*C=1 ms und damit eine Grenzfrequenz von etwa 1000 Hz. Bei induktiven Lasten liegt die Grenzfrequenz noch deutlich darunter (ein Widerstand in Serie mit der Induktivität kann helfen). Bei kapazitiven Lasten liegt die wirksame Kapazität um bis zu 10  $\mu F$  höher.



## **Einstellungen Funktionsgenerator**

Das Power-CASSY ist ein computergesteuerter Leistungsfunktionsgenerator. Die Stellgröße des Funktionsgenerators ist wahlweise die Spannung U (Spannungsquelle) oder der Strom I (Stromquelle). Beim Betrieb als Spannungsquelle wird gleichzeitig der fließende Strom I und im Betrieb als Stromquelle die anliegende Spannung U gemessen. Stellbereich und Messbereich sind dabei wählbar.

Die Ausgabe des Funktionsgenerators kann durch nur während einer Messung aktiv (single shot) auf die eigentliche Messzeit beschränkt werden. Zwischen zwei Messungen ist der Funktionsgenerator dann aus und es ist dann auch keine Bestimmung von Mittelwerten oder Effektivwerten möglich.

Die ausgegebene Kurvenform, Frequenz f (in Hz oder kHz), Amplitude A (in Vp oder Ap), Gleichspannungsoffset O (in V= oder A=) und Tastverhältnis (in %) kann in bestimmten Bereichen eingestellt werden:

Kurve	enform	Frequenz f	Amplitude A	Offset O	Tastverhältnis
DC		-	-	-10 V 10 V / -1 A 1 A	-
Sinus		0,01 Hz - 10 kHz	-10 V 10 V / -1 A 1 A	-10 V 10 V / -1 A 1 A	0 % 100 %
Recht	eck	0,01 Hz - 10 kHz	-10 V 10 V / -1 A 1 A	-10 V 10 V / -1 A 1 A	0 % 100 %
Dreie	ck	0,01 Hz - 10 kHz	-10 V 10 V / -1 A 1 A	-10 V 10 V / -1 A 1 A	0 % 100 %
Forme	el	0,01 Hz - 10 kHz	-10 V 10 V / -1 A 1 A	-10 V 10 V / -1 A 1 A	-

Rechteck und Dreieck stehen in zwei Varianten zur Verfügung. Die symmetrische Kurvenform liegt zwischen -A und +A. Die asymmetrische Kurvenform zwischen 0 und +A.

Negative Amplituden A sind erlaubt und spiegeln das Signal um 0. Das Tastverhältnis legt das Verhältnis zwischen ansteigenden und abfallenden Kurventeilen fest. So kann z.B. leicht aus einem Dreiecksignal (50 %) ein Sägezahnsignal (100 %) werden.

Zusätzlich zu den üblichen Kurvenformen bietet das Power-CASSY auch eine frei programmierbare Kurvenform. Dazu muss eine Formel f(x) eingegeben werden, die die Kurvenform beschreibt. Zur Ermittlung der Kurvenform wird diese Funktion der Variablen x im Intervall [0,1[ ausgewertet und mit der angegebenen Frequenz f, Amplitude A und Offset O ausgegeben. Zur Formeleingabe gelten die auch sonst üblichen Regeln. Außerdem erlaubt die Funktion synth(a:b:c:...) die Definition einer harmonischen Zusammensetzung nach a\*sin(360\*x)+b\*sin(2\*360\*x)+c\*sin(3\*360\*x)+.... Das Signal wird auch wieder mit der angegebenen Frequenz f, Amplitude A und Offset O ausgegeben (siehe auch das Beispiel zur Tonsynthese).

Das Feld zur Formeleingabe ist relativ klein. Für die Eingabe längerer Formeln kann auch ein üblicher Texteditor verwendet werden und dann die Formel über Kopieren und Einfügen in das Eingabefeld (rechte Maustaste) übertragen werden.


Die Spannung U und der Strom I können als Momentanwert dargestellt, über viele Messwerte gemittelt oder ihr Effektivwert bestimmt werden. Normalerweise reicht eine ungemittelte Darstellung der **Momentanwerte** aus. Wenn Power-CASSY kontinuierlich aktiv ist (und nicht nur während einer Messung), dann können auch **gemittelte Werte** oder **Effektivwerte** (erzeugt automatisch den entsprechenden φ-Kanal für den Phasenwinkel zwischen Spannung und Strom) angezeigt werden. Wenn das Zeitintervall kleiner als 10 ms ist, weicht in den letzten beiden Fällen die Messwertaufnahme in die Tabelle und in das Diagramm von den Anzeigeinstrumenten ab. Dadurch ist es gleichzeitig möglich, Kurvenformen und Effektivwerte darzustellen.

#### Tipp

Anstelle von festen Zahlenwerten lassen sich auch bereits definierte Kanäle für Frequenz, Amplitude, Offset und Tastverhältnis angeben. So lässt sich z. B. die Frequenz einer Sinusschwingung oder die ausgegebene Spannung flexibel steuern (z. B. durch Formelvorgabe bei Resonanzkurvenaufnahmen oder Regelungen). Allerdings kann die Initialisierung der Ausgabe einer neuen Frequenz (oder Amplitude, Offset, Tastverhältnis) im Power-CASSY ein paar 100 ms dauern. Die Parameter können daher nur schrittweise und nicht kontinuierlich erhöht werden.



#### **Profi-CASSY**

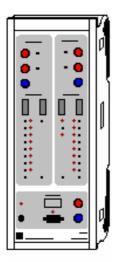

#### Einführung

Profi-CASSY ist ein intelligentes Interface für alle Bereiche der Elektrotechnik

- zum Anschluss an den USB-Port eines Computers (ab Windows 98/2000)
- galvanisch getrennt vom Computer
- mit Sensor-CASSY oder Power-CASSY kaskadierbar (dadurch Vervielfachung der Ein- und Ausgänge)

**CASSY Lab** 

- mikrocontrollergesteuert mit CASSY-Betriebssystem (jederzeit bequem über Software für Leistungserweiterungen aktualisierbar)
- variabel aufstellbar als Tisch-, Pult- oder Demogerät (auch im CPS/TPS-Experimentierrahmen)
- Spannungsversorgung 12 V (nur Wechselspannung) über Hohlstecker
- Developer Information für eigene Softwareentwicklung im Internet verfügbar

#### Sicherheitshinweise

- Transport mehrerer kaskadierter CASSY-Module nur im Experimentierrahmen oder einzeln (die mechanische Stabilität der Kopplung ohne Experimentierrahmen reicht nur zum Experimentieren und nicht zum Transport aus).
- Zur Spannungsversorgung der CASSY-Module möglichst nur mitgeliefertes Steckernetzgerät (12 V / 1.6 A) verwenden.
- Ein Profi-CASSY kann auch ein benachbartes Modul mit Spannung versorgen solange die Gesamtstromaufnahme kleiner 1,6 A bleibt (reicht für max. 2 Module, schaltet bei Überlast ab). Erforderlichenfalls weitere CASSYs separat mit Spannung versorgen.
- Siehe auch.

## **Technische Daten**

2 Analoge Spannungseingänge A und B auf 4-mm-Sicherheitsbuchsen

Auflösung: 12 Bit Messbereich: ±10 V

Messfehler: ±1 % zuzüglich 0,5 % vom Bereichsendwert

Eingangswiderstand: 1 M $\Omega$ 

Abtastrate: 20.000 Werte/s

(= 10.000 Werte/s für jeden Eingang)

Anzahl Messwerte: praktisch unbegrenzt (PC-abhängig) bis 100 Werte/s, bei höherer Messrate

max. 16.000 Werte (= 8.000 Werte für jeden Eingang)

2 Analoge Spannungsausgänge X und Y auf 4-mm-Sicherheitsbuchsen

Auflösung: 12 Bit Aussteuerbereich: ±10 V

Fehler: ±1 % zuzüglich 0,5 % vom Bereichsendwert

Ausgangsstrom: max. 100 mA pro Ausgang
Abtastrate: 10.000 Werte/s für Ausgang X

max. 100 Werte/s für Ausgang Y (PC-abhängig)

Anzahl Messwerte: praktisch unbegrenzt (PC-abhängig) bis 100 Werte/s, bei höherer Messrate

max. 8.000 Werte (nur Ausgang X)

16 Digitale Eingänge Io bis I15

Logik: 5 V oder 24 V

Abtastrate: max. 100 Werte/s (PC-abhängig)

Die digitalen Eingänge sind mit jeweils zwei 10-poligen Steckverbindern zum direkten Anschluss an die Automatisierungstechnik versehen. Zusätzlich sind jeweils acht mit 2-mm-Buchsen und Zustand-LEDs bestückt.

16 Digitale Ausgänge Qo bis Q15

Logik: 5 V oder 24 V

Ausgangsstrom: 10 mA bei interner 5 V-Versorgung

500 mA bei externer Stromversorgung bis 30 V

Summenstrom: 2 A

Abtastrate: max. 100 Werte/s (PC-abhängig)

Die digitalen Ausgänge sind mit jeweils zwei 10-poligen Steckverbindern zum direkten Anschluss an die Automatisierungstechnik versehen. Zusätzlich sind jeweils acht mit 2-mm-Buchsen und Zustand-LEDs bestückt.

1 PROFIBUS-Anschluss mit 9-poliger Sub-D-Buchse

passiver Teilnehmer (Slave) am Feldbus PROFIBUS-DP mit 16 digitalen Ein- und Ausgängen und einer Übertragungsrate bis max. 3 Mbit/s

Adresse über CASSY Lab einstellbar

1 USB-Port zum Anschluss eines Computers

1 CASSY-Bus zum Anschluss von Sensor-CASSYs oder Power-CASSYs

Abmessungen (BxHxT): 115 mm x 295 mm x 45 mm

Masse: 1,0 kg

#### Lieferumfang

1 Profi-CASSY

- 1 Software CASSY Lab ohne Freischaltcode für Windows 95/98/NT oder höher mit ausführlicher Hilfe (20 Nutzungen frei, dann als Demoversion nutzbar)
- 1 Installationsanleitung
- 1 USB-Kabel
- 1 Steckernetzgerät 12 V / 1,6 A
- 1 GSD-Datei LD066F.GSD zur einfachen Parametrierung des PROFIBUS auf der CASSY Lab-CD

#### Anwendungen

- CBS9 Anlagen Simulator f
   ür SPS, COM3LAB, Digitaltechnik und MFA
- CASSY<sup>®</sup> Lab zur Aufnahme und Auswertung der Messdaten
- WinFACT® für Anwendungen in der Regelungstechnik



# **Einstellungen Analogeingang**

Das Profi-CASSY bietet zwei analoge Spannungseingänge A und B. Die Spannung UA oder UB kann als Momentanwert gemessen, über viele Messwerte gemittelt oder ihr Effektivwert bestimmt werden. Normalerweise reicht eine ungemittelte Messung der **Momentanwerte** aus. Ist das Eingangssignal jedoch verrauscht oder mit "Brumm" überlagert, sind **gemittelte Werte** erforderlich. Bei Wechselspannungen misst man in der Regel **Effektivwerte** (eine zweikanalige Effektivwertmessung erzeugt automatisch den passenden cos  $\phi$ -Kanal). Wenn das Zeitintervall kleiner als 10 ms ist, weicht in den letzten beiden Fällen die Messwertaufnahme in die Tabelle und in das Diagramm von den Anzeigeinstrumenten ab. Dadurch ist es gleichzeitig möglich, Kurvenformen und Effektivwerte darzustellen.

Standardmäßig werden die gemittelten Werte und die Effektivwerte während einer Zeit von 100 ms berechnet. Bei Verwendung des Power-CASSYs oder des Profi-CASSYs wird diese Zeit bei jeder Frequenzänderung des Ausgangssignals so verändert, dass immer eine ganze Anzahl von Perioden ausgewertet wird.

Wenn die Genauigkeit der Messwerte nicht ausreicht, kann diese durch Korrigieren noch erhöht werden.



## **Einstellungen Analogausgang X (Funktionsgenerator)**

Das Profi-CASSY ist auch ein computergesteuerter Funktionsgenerator am Ausgang X. Die Ausgabe des Funktionsgenerators kann durch **nur während einer Messung aktiv (single shot)** auf die eigentliche Messzeit beschränkt werden. Zwischen zwei Messungen ist der Funktionsgenerator dann aus und es ist dann auch keine Bestimmung von Mittelwerten oder Effektivwerten möglich.

Die ausgegebene Kurvenform, Frequenz f (in Hz), Amplitude A (in Vp oder Ap), Gleichspannungsoffset O (in V= oder A=) und Tastverhältnis (in %) kann in bestimmten Bereichen eingestellt werden:

Kurvenform	Frequenz f	Amplitude A	Offset O	Tastverhältnis
DC	-	-	-10 V 10 V	-
Sinus	0,01 Hz - 1000 Hz	-10 V 10 V	-10 V 10 V	0 % 100 %
Rechteck	0,01 Hz - 1000 Hz	-10 V 10 V	-10 V 10 V	0 % 100 %
Dreieck	0,01 Hz - 1000 Hz	-10 V 10 V	-10 V 10 V	0 % 100 %
Formel	0,01 Hz - 1000 Hz	-10 V 10 V	-10 V 10 V	-

Rechteck und Dreieck stehen in zwei Varianten zur Verfügung. Die symmetrische Kurvenform liegt zwischen -A und +A. Die asymmetrische Kurvenform zwischen 0 und +A.

Negative Amplituden A sind erlaubt und spiegeln das Signal um 0. Das Tastverhältnis legt das Verhältnis zwischen ansteigenden und abfallenden Kurventeilen fest. So kann z. B. leicht aus einem Dreiecksignal (50 %) ein Sägezahnsignal (100 %) werden.

Zusätzlich zu den üblichen Kurvenformen bietet das Profi-CASSY auch eine frei programmierbare Kurvenform. Dazu muss eine Formel f(x) eingegeben werden, die die Kurvenform beschreibt. Zur Ermittlung der Kurvenform wird diese Funktion der Variablen x im Intervall [0,1[ ausgewertet und mit der angegebenen Frequenz f, Amplitude A und Offset O ausgegeben. Zur Formeleingabe gelten die auch sonst üblichen Regeln. Außerdem erlaubt die Funktion synth(a:b:c:...) die Definition einer harmonischen Zusammensetzung nach a\*sin(360\*x)+b\*sin(2\*360\*x)+c\*sin(3\*360\*x)+.... Das Signal wird auch wieder mit der angegebenen Frequenz f, Amplitude A und Offset O ausgegeben (siehe auch das Beispiel zur Tonsynthese).

Das Feld zur Formeleingabe ist relativ klein. Für die Eingabe längerer Formeln kann auch ein üblicher Texteditor verwendet werden und dann die Formel über Kopieren und Einfügen in das Eingabefeld (rechte Maustaste) übertragen werden.

Die Spannung Ux kann als Momentanwert dargestellt, über viele Messwerte gemittelt oder ihr Effektivwert bestimmt werden. Normalerweise reicht eine ungemittelte Darstellung der **Momentanwerte** aus. Wenn Profi-CASSY kontinuierlich aktiv ist (und nicht nur während einer Messung), dann können auch **gemittelte Werte** oder **Effektivwerte** (erzeugt automatisch den entsprechenden  $\phi$ -Kanal für den Phasenwinkel zwischen Ausgang X und Eingang A) angezeigt werden. Wenn das Zeitintervall kleiner als 10 ms ist, weicht in den letzten beiden Fällen die Messwertaufnahme in die Tabelle und in das Diagramm von den Anzeigeinstrumenten ab. Dadurch ist es gleichzeitig möglich, Kurvenformen und Effektivwerte darzustellen.

#### **Tipp**

Anstelle von festen Zahlenwerten lassen sich auch bereits definierte Kanäle für Frequenz, Amplitude, Offset und Tastverhältnis angeben. So lässt sich z. B. die Frequenz einer Sinusschwingung oder die ausgegebene Spannung flexibel steuern (z. B. durch Formelvorgabe bei Resonanzkurvenaufnahmen oder Regelungen). Allerdings kann die Initialisierung der Ausgabe einer neuen Frequenz (oder Amplitude, Offset, Tastverhältnis) im Profi-CASSY ein paar 100 ms dauern. Die Parameter können daher nur schrittweise und nicht kontinuierlich erhöht werden.



# Einstellungen Analogausgang Y

Das Profi-CASSY bietet neben dem Analogausgang X, der als Funktionsgenerator genutzt werden kann, auch einen zweiten Analogausgang Y, der mit einer Formel belegt werden und dadurch seinen Ausgangspegels programmgesteuert ändern kann.

■ Siehe auch.

# Einstellungen Digitaleingang/-ausgang

Das Profi-CASSY bietet 16 Digitaleingänge und 16 Digitalausgänge, die jeweils in Gruppen von 8 Einoder Ausgängen aktiviert werden können.

Die Eingänge Io bis I15 geben den aktuellen Pegel der Eingänge wieder. Die Ausgänge Qo bis Q15 können mit Formeln belegt werden und dadurch ihre Ausgangspegel programmgesteuert ändern.



## **CASSY-Display**



#### Einführung

CASSY-Display (USB bzw. seriell) ist eine 2-kanalige Anzeige für die Messwertanzeige ohne Computer

- mikrocontrollergesteuert mit CASSY-Betriebssystem (jederzeit bequem über Software für Leistungserweiterungen aktualisierbar)
- variabel aufstellbar als Tisch-, Pult- oder Demogerät (auch im CPS/TPS-Experimentierrahmen)
- unterstützt bis zu 8 Sensor-CASSYs (entspricht 16 Messkanäle)
- Messung geschieht im Sensor-CASSY oder einer dort aufgesteckten Sensorbox (Messgrößen und -bereiche siehe dort)
- Messwerte einzeln umschaltbar und kalibrierbar. Messgröße und Einheit werden bei auf- oder umgesteckter Sensorbox automatisch umgeschaltet
- mit integrierter Echtzeituhr und Datenlogger Datenspeicher für bis zu 32.000 Messwerte bleibt beim Ausschalten erhalten und kann so später über den USB-Port (ab Windows 98/2000) bzw. über die serielle Schnittstelle von einem Computer ausgelesen werden
- Spannungsversorgung 12 V AC/DC über Hohlstecker

#### Sicherheitshinweise

- Transport mehrerer kaskadierter CASSY-Module nur im Experimentierrahmen oder einzeln (die mechanische Stabilität der Kopplung ohne Experimentierrahmen reicht nur zum Experimentieren und nicht zum Transport aus).
- Zur Spannungsversorgung der CASSY-Module möglichst nur Steckernetzgerät (12 V / 1,6 A) verwenden.

## **Datenlogger**

Das CASSY-Display hat einen integrierten Datenspeicher, in dem es Messdaten abspeichern kann. Von dort aus können die Daten später von CASSY Lab ausgelesen werden. Wenn das CASSY-Display am Computer angeschlossen ist, wird es in der aktuellen Anordnung der CASSY-Module auf der CASSY-Seite der Einstellungen dargestellt. Das Auslesen der Daten geschieht dann einfach über Anklicken von **Daten auslesen**.

Gleichzeitig wird dabei auch die Echtzeituhr des CASSY-Displays auf die Systemzeit des Computers gestellt. Bitte sorgen Sie daher für eine korrekte Systemzeit des Computers.

Für die weitere Bedienung des CASSY-Displays bitte die dort beiliegende Gebrauchsanweisung beachten.



## **Pocket-CASSY**



#### Einführung

Pocket-CASSY ist ein Interface zur Messdatenaufnahme

- zum Anschluss an den USB-Port eines Computers (ab Windows 98/2000) oder eines aktiven Hubs
- kompatibel zu USB 1.x und 2.0 (Full speed)
- bis zu 8 Analogeingänge pro Pocket-CASSY über Sensorbox erreichbar
- bis zu 8 Pocket-CASSYs gleichzeitig an verschiedenen USB-Ports verwendbar (dadurch weitere Vervielfachung der Eingänge)
- automatische Sensorboxerkennung durch CASSY Lab (plug & play)
- Spannungsversorgung über USB-Port (500 mA)
- Developer Information für eigene Softwareentwicklung im Internet verfügbar

#### Sicherheitshinweise

- Zu Ihrer eigenen Sicherheit Sensoren und Sensorboxen nicht mit Spannungen über 30 V beschalten.
- Mögliche Masseverbindung zwischen Sensoren und Computer beachten.
- Siehe auch.

## **Technische Daten**

1 Analoger Eingang auf Sensor-Steckplatz

(Anschluss aller CASSY-Sensorboxen und Sensoren möglich)

Auflösung: 12 Bit

Messbereiche:  $\pm 0,003/0,01/0,03/0,1/0,3/1 \text{ V}$ 

Messfehler: ±1 % zuzüglich 0,5 % vom Bereichsendwert

Eingangswiderstand:  $10 \text{ k}\Omega$ 

Abtastrate: max. 7.800 Werte/s

Anzahl Messwerte: praktisch unbegrenzt (PC-abhängig) bis 100 Werte/s,

bei höherer Messrate max. 16.000 Werte

Technische Daten ändern sich entsprechend einer aufgesteckten Sensorbox

Erkennung der dann möglichen Messgrößen und Bereiche automatisch durch CASSY Lab nach

Aufstecken einer Sensorbox

2 Timer-Eingänge auf Sensor- Steckplatz

(z. B. für BMW-Box, GM-Box oder Timer-Box)

Zählfrequenz: max. 10 kHz

Zeitauflösung: 1 µs

Messzeit zwischen

zwei Ereignissen: min. 100 µs

Speicher: max. 5.000 Zeitpunkte (= 2.500 pro Eingang)

6 Digitale Eingänge (TTL) auf Sensor- Steckplatz

(z. Zt. nur für automatische Sensorbox-Erkennung verwendet)

3 Digitale Ausgänge (TTL) auf Sensor- Steckplatz

(z. Zt. nur für automatische Messbereichsumschaltung einer Sensorbox verwendet)

1 USB-Port zum Anschluss eines Computers und zur Spannungsversorgung (500 mA)

Abmessungen (BxHxT): 50 mm x 25 mm x 60 mm

Masse: 0,1 kg

#### Lieferumfang

- 1 Pocket-CASSY
- 1 Software CASSY Lab ohne Freischaltcode für Windows 95/98/NT oder höher mit ausführlicher Hilfe (20 Nutzungen frei, dann als Demoversion nutzbar)
- 1 Installationsanleitung
- 1 USB-Kabel
- Siehe auch.



#### Einsatz von Pocket-CASSY

Pocket-CASSY ist ein Interface, das als preiswertes Schülerübungsgerät konzipiert worden ist. Deshalb wurde auf einige Leistungsmerkmale des Sensor-CASSYs verzichtet. Trotzdem lassen sich die meisten der beschriebenen Experimente auch mit Pocket-CASSY durchführen. Diese Experimente sind mit dem Pocket-CASSY-Logo gekennzeichnet. Die weitere Beschreibung und die angegebenen Gerätelisten beziehen sich aber trotzdem auf die Verwendung von Sensor-CASSY.

## Durchführung eines Sensor-CASSY-Experiments mit dem Pocket-CASSY


- Für Spannungs- und Strommessungen ist beim Pocket-CASSY der UI-Sensor S (524 062) oder der UIP-Sensor S (524 0621) erforderlich.
- Werden beim Sensor-CASSY beide analogen Eingänge A und B verwendet, müssen statt dessen zwei Pocket-CASSYs eingesetzt werden (evtl. mit zwei UI-Sensoren S). Bei kombinierter Spannungs- und Strommessung reicht auch ein Pocket-CASSY mit UIP-Sensor S aus.
- Die Symbole der Messgrößen haben einen Index weniger als in den Versuchsbeschreibungen angegeben, da beim Pocket-CASSY nicht zwischen Eingang A oder B unterschieden werden muss, z. B. U1 und U2 (zwei Pocket-CASSYs) statt UA1 und UB1 (ein Sensor-CASSY).

#### Einschränkungen von Pocket-CASSY im Vergleich zu Sensor-CASSY

- Es ist nur ein Sensor-Eingang vorhanden. Wenn genug USB-Ports zur Verfügung stehen, können mehrere Sensor-Eingänge durch gleichzeitige Verwendung mehrerer Pocket-CASSYs realisiert werden. Da kein direkter Signalweg zwischen mehreren Pocket-CASSYs besteht, können dabei Triggerzeitfehler von bis zu 5 ms auftreten.
- Es sind keine Spannungs- und Stromeingänge auf 4-mm-Buchsen vorhanden. Diese können mit dem UI-Sensor S oder dem UIP-Sensor S nachgerüstet werden. Der UI-Sensor S hat aber nur 7 statt 10 Messbereiche. Ihm fehlen die Bereiche ±100 V, ±3 A, ±0,1 A. Außerdem kann er U und I nicht parallel erfassen. Dem UIP-Sensor S fehlt nur der Bereich ±100 V.
- Es sind keine Zeitauflösungen Δt < 100 μs wählbar. Pocket-CASSY tastet intern mit Δt >= 128 μs ab, so dass für Δt = 100 μs bereits interpoliert wird.
- Es ist kein Relais R und keine Spannungsquelle S vorhanden.
- Die Timereingänge haben nur 1 μs Auflösung eine variable Latenzzeit von bis zu 10 μs kann zusätzlich auftreten. Die max. messbare Frequenz beträgt ca. 10 kHz.
- Pocket-CASSY ist nicht galvanisch getrennt. Abhängig vom angeschlossenen Sensor kann zwischen Sensor und Computer eine durchgängige Masseverbindung bestehen. Beim gleichzeitigen Einsatz von zwei Pocket-CASSYs am gleichen Computer besteht sogar die Möglichkeit, dass zwei Sensoren elektrisch miteinander verbunden sind. Um diesen Nachteil auszugleichen wurde der häufig verwendete UI-Sensor S (524 062) und der UIP-Sensor S (524 0621) als Differenzverstärker ausgelegt. Deren Eingangsbuchsen sind nur über hohe Widerstände mit Masse verbunden.
- Siehe auch.



#### Mobile-CASSY

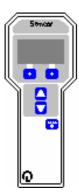

## Einführung

Mobile-CASSY ist ein universelles Handmessgerät

- für fast alle CASSY-Sensoren und Sensorboxen
- automatische Sensorboxerkennung (plug & play)
- bis zu 8 Analogeingänge pro Mobile-CASSY über Sensorbox erreichbar
- Spannungsversorgung über 4 Mignonzellen (AA, Batterien/Akkus) oder Steckernetzgerät 12 V AC/DC
- mit integriertem Datenlogger für bis zu 16.000 Messwerte
- mit Anschlussmöglichkeit an den USB-Port eines Computers (ab Windows 98/2000) zum Auslesen des Datenloggers oder zur Großanzeige der Messwerte
- kompatibel zu USB 1.x und 2.0
- bis zu 8 Mobile-CASSYs gleichzeitig an verschiedenen USB-Ports verwendbar
- galvanisch getrennt vom Computer
- Developer Information für eigene Softwareentwicklung im Internet verfügbar

## Sicherheitshinweise

- Zu Ihrer eigenen Sicherheit Sensoren und Sensorboxen nicht mit Spannungen über 30 V beschalten.
- Siehe auch.



#### **Technische Daten**

1 Analoger Eingang auf Sensor-Steckplatz

(Anschluss fast aller CASSY-Sensorboxen und Sensoren möglich)

Auflösung: 12 Bit

Messbereiche:  $\pm 0,003/0,01/0,03/0,1/0,3/1 \text{ V}$ 

Messfehler: ±1 % zuzüglich 0,5 % vom Bereichsendwert

Eingangswiderstand:  $10 \text{ k}\Omega$ 

Abtastrate: max. 5 Werte/s

Anzahl Messwerte: 16.000 im integrierten Datenlogger oder

praktisch unbegrenzt (PC-abhängig) bei Messung im PC

Technische Daten ändern sich entsprechend einer aufgesteckten Sensorbox

Erkennung der dann möglichen Messgrößen und Bereiche automatisch nach Aufstecken einer

Sensorbox

1 Display zur gleichzeitigen Darstellung von bis zu vier Werten in verschiedenen Schriftgrößen

1 USB-Port zum Anschluss eines Computers

Abmessungen (BxHxT): 87 mm x 215 mm x 30 mm

Masse: 0,25 kg

#### Lieferumfang

1 Mobile-CASSY

1 Software CASSY Lab ohne Freischaltcode für Windows 95/98/NT oder höher mit ausführlicher Hilfe (20 Nutzungen frei, dann als Demoversion nutzbar)

- 1 Gebrauchsanweisung
- 1 USB-Kabel
- Siehe auch.

#### **Einsatz von Mobile-CASSY**

Mobile-CASSY ist ein Interface, das für den mobilen Einsatz konzipiert worden ist. Deshalb wurde auf viele Leistungsmerkmale des Sensor-CASSYs verzichtet und dafür ein Datenlogger integriert. Trotzdem lassen sich einige der beschriebenen Experimente auch mit Mobile-CASSY durchführen. Diese Experimente sind mit dem Mobile-CASSY-Logo gekennzeichnet. Die weitere Beschreibung und die angegebenen Gerätelisten beziehen sich aber trotzdem auf die Verwendung von Sensor-CASSY.

#### Durchführung eines Sensor-CASSY-Experiments mit dem Mobile-CASSY

- Für Spannungs- und Strommessungen ist beim Mobile-CASSY der UI-Sensor S (524 062) oder der UIP-Sensor S (524 0621) erforderlich.
- Werden beim Sensor-CASSY beide analogen Eingänge A und B verwendet, müssen statt dessen zwei Mobile-CASSYs eingesetzt werden (evtl. mit zwei UI-Sensoren S). Bei kombinierter Spannungs- und Strommessung reicht auch ein Mobile-CASSY mit UIP-Sensor S aus.
- Die Symbole der Messgrößen haben einen Index weniger als in den Versuchsbeschreibungen angegeben, da beim Mobile-CASSY nicht zwischen Eingang A oder B unterschieden werden muss, z. B. U1 und U2 (zwei Mobile-CASSYs) statt UA1 und UB1 (ein Sensor-CASSY).

## Einschränkungen von Mobile-CASSY im Vergleich zu Sensor-CASSY

- Es ist nur ein Sensor-Eingang vorhanden. Wenn genug USB-Ports zur Verfügung stehen, können mehrere Sensor-Eingänge durch gleichzeitige Verwendung mehrerer Mobile-CASSYs realisiert werden.
- Es sind keine Spannungs- und Stromeingänge auf 4-mm-Buchsen vorhanden. Diese können mit dem UI-Sensor S oder dem UIP-Sensor S nachgerüstet werden. Der UI-Sensor S hat aber nur 7 statt 10 Messbereiche. Ihm fehlen die Bereiche ±100 V, ±3 A, ±0,1 A. Außerdem kann er U und I nicht parallel erfassen. Dem UIP-Sensor S fehlt nur der Bereich ±100 V.
- Es sind keine Zeitauflösungen Δt < 200 ms wählbar.</li>
- Es ist kein Relais R und keine Spannungsquelle S vorhanden.
- Die Timereingänge werden nur sehr eingeschränkt unterstützt.

#### Datenlogger


Das Mobile-CASSY hat einen integrierten Datenspeicher, in dem es Messdaten abspeichern kann und die auch ohne Spannungsversorgung erhalten bleiben. Von dort aus können die Daten später von CASSY Lab ausgelesen werden. Wenn das Mobile-CASSY am Computer angeschlossen ist, wird es in der aktuellen Anordnung der CASSY-Module auf der CASSY-Seite der Einstellungen dargestellt. Das Auslesen der Daten geschieht dann einfach über Anklicken von **Daten auslesen**.

Gleichzeitig wird dabei auch die Echtzeituhr des Mobile-CASSY auf die Systemzeit des Computers gestellt. Bitte sorgen Sie daher für eine korrekte Systemzeit des Computers.

Für die weitere Bedienung des Mobile-CASSYs bitte die dort beiliegende Gebrauchsanweisung beachten.



#### Joule- und Wattmeter

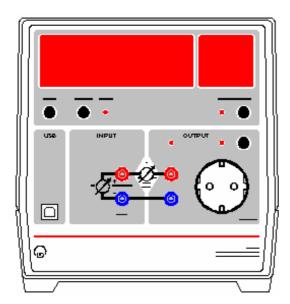

## Einführung

Das Joule- und Wattmeter ist ein universelles Multimeter mit Leistungsmesser

- zur Messung und Anzeige von Effektivspannung U und Strom I für Spannungen und Ströme beliebiger Kurvenform
- zur Anzeige der daraus ermittelten Wirkleistung P sowie der zeitlichen Integrale ∫ P(t) dt (Arbeit), ∫ U(t) dt (Spannungsstoß) und ∫ I(t) dt (Ladung)
- mit großem Leistungsbereich von nW bis kW (12 Dekaden)
- mit großer, weithin sichtbarer Leuchtziffernanzeige
- mit Verbraucheranschluss wahlweise über 4-mm-Sicherheitsbuchsen oder über Steckdose (Frontseite)
- mit Anschlussmöglichkeit an den USB-Port eines Computers (ab Windows 98/2000) zum Auslesen der zeitaufgelösten Kurvenformen U(t), I(t) und P(t) und deren Effektivwerte
- kompatibel zu USB 1.x und 2.0 (full speed)
- · galvanisch getrennt vom Computer
- Developer Information f
  ür eigene Softwareentwicklung im Internet verf
  ügbar

## Sicherheitshinweise

Das Gerät entspricht den Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte nach DIN EN 61010 Teil 1. Es ist für den Betrieb in trockenen Räumen vorgesehen, welche für elektrische Betriebsmittel oder Einrichtungen geeignet sind.

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist der sichere Betrieb des Gerätes gewährleistet. Die Sicherheit ist jedoch nicht garantiert, wenn das Gerät unsachgemäß bedient oder unachtsam behandelt wird. Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, ist das Gerät unverzüglich außer Betrieb zu setzen (z. B. bei sichtbaren Schäden).

#### Vor Erstinbetriebnahme:

- überprüfen, ob der auf dem Leistungsschild aufgedruckte Wert für die Netzanschlussspannung mit dem ortsüblichen Wert übereinstimmt.
- Gebrauchsanweisung des Gerätes anhand der Katalognummer auf der mitgelieferten CD "Gebrauchsanweisungen" suchen und lesen.

#### Vor Inbetriebnahme:

• das Gehäuse auf Beschädigungen untersuchen und bei Funktionsstörungen oder sichtbaren Schäden das Gerät außer Betrieb setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern.

#### Bei jeder Inbetriebnahme:

- Gerät nur an Steckdosen mit geerdetem Nullleiter und Schutzleiter anschließen.
- Nicht mit Spannungen über 250 V und Strömen über 10 A beschalten.



- Experimentierleitungen, Prüfleitungen und Tastköpfe vor dem Anschluss auf schadhafte Isolation und blanke Drähte überprüfen.
- Beim Experimentieren mit berührungsgefährlichen Spannungen nur 4-mm-Sicherheitskabel verwenden.
- Steckdose auf der Frontseite kann auch Spannung führen, wenn der Ausgang nicht aktiv ist.
- Defekte Sicherung nur mit einer dem Originalwert entsprechenden Sicherung (T 10 A / 250 V) ersetzen.
- Sicherung oder Sicherungshalter niemals kurzschließen.
- Lüftungsschlitze am Gehäuse immer frei lassen, um ausreichende Luftzirkulation zur Kühlung der inneren Bauteile zu gewährleisten.
- Metallene Gegenstände, andere Fremdkörper und Wasser von Lüftungsschlitzen fernhalten.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn solche Gegenstände ins Innere des Gerätes gelangt sind.
- Gerät nur durch eine Elektrofachkraft öffnen lassen.
- Starke Erschütterungen des Gerätes vermeiden.
- Siehe auch.



#### **Technische Daten**

1 Analoger Spannungseingang auf 4-mm-Buchsen

Auflösung: 12 Bit

Messbereiche:  $\pm 5^{**}/\pm 50^{**}/\pm 500 \text{ mV} / \pm 5/\pm 50/\pm 250 \text{ V}$ 

Messgenauigkeit\*: 1 % Eingangswiderstand:  $\geq$ 1 M $\Omega$ 

Abtastrate: max. 10.000 Werte/s

Anzahl Messwerte: praktisch unbegrenzt (PC-abhängig) bis 100 Werte/s,

bei höherer Messrate max. 16.000 Werte

1 Analoger Spannungseingang für Steckdose (alternativ verwendbar)

Auflösung: 12 Bit Messbereich: 250 V Messgenauigkeit\*: 1 % Eingangswiderstand:  $2 M\Omega$ 

Abtastrate: max. 10.000 Werte/s

Anzahl Messwerte: praktisch unbegrenzt (PC-abhängig) bis 100 Werte/s,

bei höherer Messrate max. 16.000 Werte

1 Analoger Stromeingang für 4-mm-Sicherheitsbuchsen und Steckdose

Auflösung: 12 Bit

Messbereiche:  $\pm 0.2/\pm 2/\pm 20 \text{ mA} / \pm 0.2/\pm 2/\pm 10 \text{ A}$ 

Messgenauigkeit\*: 1 %

Eingangswiderstand:  $10 \Omega / ca. 0,01 \Omega$ Abtastrate: max. 10.000 Werte/s

Anzahl Messwerte: praktisch unbegrenzt (PC-abhängig) bis 100 Werte/s,

bei höherer Messrate max. 16.000 Werte

Anschluss des Verbrau- wahlweise über 4-mm-Sicherheitsbuchsen oder Steckdose (Frontseite)

chers:

Anzeige: 5-stellige 7-Segment-Anzeige für Zahlenwert und 7x15-Matrix für Einheit

Ziffernhöhe: 25 mm

USB-Port: USB 1.x und 2.0 (full speed), galvanisch getrennt

Anschluss: 230 V, 50/60 Hz Abmessungen (BxHxT): 20 cm x 21 cm x 23 cm

Masse: 2 kg

#### Lieferumfang


- 1 Joule- und Wattmeter
- 1 Software CASSY Lab ohne Freischaltcode für Windows 95/98/NT oder höher mit ausführlicher Hilfe (für Joule- und Wattmeter unbeschränkt nutzbar)
- 1 Gebrauchsanweisung
- 1 USB-Kabel
- Siehe auch.

<sup>\*</sup> Die angegebene Genauigkeit gilt am Messbereichsende für DC sowie für AC mit einer Frequenz von 50 oder 60 Hz und einem Crestfaktor = Spitzenwert : Effektivwert ≤ 2.

<sup>\*\*</sup> Dieser Messbereich ist nur für DC geeignet (nicht für AC).



## **Universelles Messinstrument Physik**

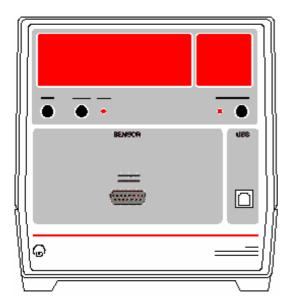

## Einführung

Das Universelle Messinstrument Physik ist ein universelles Multimeter

- zur Messung und Anzeige von vielen physikalischen Größen
- mit großer, weithin sichtbarer Leuchtziffernanzeige
- mit Anschlussmöglichkeit an den USB-Port eines Computers (ab Windows 98/2000) zum Auslesen der zeitaufgelösten Kurvenformen
- kompatibel zu USB 1.x und 2.0 (full speed)
- galvanisch getrennt vom Computer
- Developer Information für eigene Softwareentwicklung im Internet verfügbar

## Sicherheitshinweise

Das Gerät entspricht den Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte nach DIN EN 61010 Teil 1. Es ist für den Betrieb in trockenen Räumen vorgesehen, welche für elektrische Betriebsmittel oder Einrichtungen geeignet sind.

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist der sichere Betrieb des Gerätes gewährleistet. Die Sicherheit ist jedoch nicht garantiert, wenn das Gerät unsachgemäß bedient oder unachtsam behandelt wird. Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, ist das Gerät unverzüglich außer Betrieb zu setzen (z. B. bei sichtbaren Schäden).

#### Vor Erstinbetriebnahme:

- überprüfen, ob der auf dem Leistungsschild aufgedruckte Wert für die Netzanschlussspannung mit dem ortsüblichen Wert übereinstimmt.
- Gebrauchsanweisung des Gerätes anhand der Katalognummer auf der mitgelieferten CD "Gebrauchsanweisungen" suchen und lesen.

#### Vor Inbetriebnahme:

• das Gehäuse auf Beschädigungen untersuchen und bei Funktionsstörungen oder sichtbaren Schäden das Gerät außer Betrieb setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern.

## Bei jeder Inbetriebnahme:

- Gerät nur an Steckdosen mit geerdetem Nullleiter und Schutzleiter anschließen.
- Lüftungsschlitze am Gehäuse immer frei lassen, um ausreichende Luftzirkulation zur Kühlung der inneren Bauteile zu gewährleisten.
- Metallene Gegenstände, andere Fremdkörper und Wasser von Lüftungsschlitzen fernhalten.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn solche Gegenstände ins Innere des Gerätes gelangt sind.
- Gerät nur durch eine Elektrofachkraft öffnen lassen.
- Starke Erschütterungen des Gerätes vermeiden.



#### **Technische Daten**

1 Analoger Sensoranschluss auf 15-poliger Buchse für viele Sensoren S

Auflösung: 12 Bit

Messbereiche: sensorabhängig

Messgenauigkeit: 1 % zuzüglich Sensorfehler

Eingangswiderstand:  $10 \text{ k}\Omega$ 

Abtastrate: max. 10.000 Werte/s

Anzahl Messwerte: praktisch unbegrenzt (PC-abhängig) bis 100 Werte/s,

bei höherer Messrate max. 16.000 Werte

Anzeige: 5-stellige 7-Segment-Anzeige für Zahlenwert und 7x15-Matrix für Einheit

Ziffernhöhe: 25 mm

USB-Port: USB 1.x und 2.0 (full speed), galvanisch getrennt

Anschluss: 230 V, 50/60 Hz

Abmessungen (BxHxT): 20 cm x 21 cm x 23 cm

Masse: 2 kg

#### Lieferumfang

1 Universelles Messinstrument Physik

1 Software CASSY Lab ohne Freischaltcode für Windows 95/98/NT oder höher mit ausführlicher Hilfe (für das Universelle Messinstrument Physik unbeschränkt nutzbar)

- 1 Gebrauchsanweisung
- 1 USB-Kabel
- Siehe auch.

## Andere serielle Geräte

CASSY Lab unterstützt neben dem CASSY auch andere serielle Geräte. Sie können auch gleichzeitig zu CASSY an einer anderen freien seriellen Schnittstelle verwendet werden. Dazu gehören:

- ASCII (einstellbar)
- Waage (div. Hersteller)
- VideoCom (337 47)
- IRPD (332 11)
- Multifunktionsmessgerät MFA 2001 (727 230)
- Metra Hit (531 28 531 30)
- Temperaturmessgerät (666 209 / 666 454)
- Digitales Spektralphotometer (667 3491)
- Data Logger (666 252)
- pH-Meter (666 221)
- Conductivity-Meter (666 222)
- Lux-Meter (666 223 / 666 230)
- O2-Meter (666 224)
- Photo-Meter (666 225)
- Sound-Level-Meter (666 231)
- CO2-CO-CH4-Meter (666 232)
- Optical Power-Meter (736 435)
- Antennendrehtisch (737 405)

## ASCII, Waage, VideoCom, IRPD, MFA 2001

Neben Waagen, VideoCom (337 47), IR Position Detector (332 11) und Multifunktionsmessgerät MFA 2001 (727 230) werden auch beliebige Geräte an der seriellen Schnittstelle unterstützt, solange sie ASCII-Daten (Klartext, Zahl und Einheit, Mode 8N1 = 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit oder Mode 7E1 = 7 Datenbits, gerade Parität, 1 Stoppbit) senden. Es wird dann nur die vorgegebene Einheit mit der gesendeten Einheit verglichen. Stimmen diese mindestens am Anfang überein, dann wird der gesendete Zahlenwert als Messwert angezeigt. Wird keine Einheit angegeben, werden alle gesendeten Zahlenwerte angezeigt.

Bei VideoCom und dem IRPD ist die Baudrate fest vorgegeben. Da Waagen und andere Geräte mit unterschiedlichen Baudraten arbeiten können, ist diese dann einstellbar.

#### Problemlösungen

Werden keine Messwerte angezeigt, kann dies unterschiedliche Gründe haben:

- Serielle Schnittstelle falsch angegeben
- Schnittstellenparameter falsch: Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit der gleichen Baudrate und im gleichen Mode (8N1 = 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit oder 7E1 = 7 Datenbits, gerade Parität, 1 Stoppbit) sendet. VideoCom und IRPD erfüllen dies immer.
- Verbindungskabel falsch: Je nach Gerät kann ein ungekreuztes Kabel (1:1-Kabel) oder ein gekreuztes Kabel (Nullmodemkabel) notwendig sein. VideoCom, IRPD und MFA 2001 benötigen ein 1:1-Kabel, Waagen in der Regel ein Nullmodemkabel.
- Einheit falsch: Zu Testzwecken kann die Einheit gelöscht werden. Dann werden alle Zahlenwerte angezeigt. Bei VideoCom, IRPD und MFA 2001 stimmt die Einheit immer.
- Gerät sendet nicht: Überprüfen Sie dies mit einem Terminalprogramm wie Hyperterminal (gehört zu Windows, eine Nachinstallation dieser Komponente in der Systemsteuerung kann aber notwendig sein).

#### Einschränkungen bei VideoCom

Der angegebene Anzeigebereich wird gleichzeitig zur Wegkalibrierung von VideoCom verwendet und sollte daher der Breite des Sichtfeldes von VideoCom entsprechen.

Es wird nur die Position des ersten erkannten Reflexes angezeigt. Für mehrere Positionen kann nach wie vor die VideoCom-Software verwendet werden.



Die Messung wird nicht zeitsynchron durchgeführt. VideoCom sendet zwar 80 Positionen pro Sekunde, doch die Software synchronisiert die Messwertaufnahme nicht darauf. Es sollte also ein Zeitintervall von mindestens 100 ms zur Messung verwendet werden. Dies reicht für die typische VideoCom-Anwendung zusammen mit CASSY auch aus (Positionsregelung).

Siehe auch.

#### MetraHit

Es wird ein MetraHit 14S bis 18S (531 28 - 531 30) unterstützt, wenn dieses mit einem Schnittstellenadapter (531 31) ausgerüstet ist.

Die Messgröße muss entsprechend der Einstellung am MetraHit gewählt werden. Der angegebene Anzeigebereich kann jederzeit verändert werden und hat mit dem eigentlichen Messbereich im MetraHit nichts zu tun. Wenn der Messbereich im MetraHit umgestellt wird, bleibt der Anzeigebereich in der Software erhalten, bis er auch dort verändert wird.

Die unterschiedlichen MetraHits messen unterschiedlich viele signifikante Nachkommastellen. Um eine identische Anzeige zu erhalten, kann die Software **eine Nachkommastelle unterdrücken**.

#### Problemlösungen

Werden keine Messwerte angezeigt, kann dies unterschiedliche Gründe haben:

- Serielle Schnittstelle falsch angegeben
- Verbindungskabel falsch: Verwenden Sie das ungekreuzte Kabel (1:1-Kabel), welches zum Schnittstellenadapter (531 31) gehört.
- Messgröße falsch: Stellen Sie am Gerät und in der Software die richtige Messgröße ein.
- LED am Schnittstellenadapter blinkt nicht: Aktivieren Sie die Datenübertragung am MetraHit (gleichzeitig **DATA** und **ON** drücken).
- Siehe auch.

## **Temperaturmessgerät**

Es wird das Temperaturmessgerät (666 209 oder 666 454) unterstützt. Alle vier Temperaturen erhalten jeweils ein Anzeigeinstrument, welches im Hauptfenster bei den Speed-Buttons einsortiert wird.

Der angegebene Anzeigebereich kann jederzeit verändert werden und hat mit dem eigentlichen Messbereich im Temperaturmessgerät nichts zu tun.

Das Temperaturmessgerät verfügt über einen Messwertspeicher, der ausgelesen werden kann. Dazu muss lediglich **Speicher auslesen** betätigt werden.

## Problemlösungen

Werden keine Messwerte angezeigt, kann dies unterschiedliche Gründe haben:

- Serielle Schnittstelle falsch angegeben
- Verbindungskabel falsch: Verwenden Sie ein ungekreuztes Kabel (1:1-Kabel).
- Falsches Gerät ausgewählt: Überprüfen Sie die Katalognummer des Geräts mit der Angabe im Dialogfenster. Alte Versionen des Temperaturmessgeräts lassen sich als ASCII (einstellbar) betreiben.
- Kein Temperaturfühler eingesteckt
- Siehe auch.

## **Digitales Spektralphotometer**

Es wird das Digitale Spektralphotometer (667 3491) unterstützt. Sowohl die aktuelle Wellenlänge  $\lambda$  als auch die aktuell gemessene Transmission T in Prozent erhalten jeweils ein Anzeigeinstrument, welches im Hauptfenster bei den Speed-Buttons einsortiert wird.

Sollen zusätzlich auch die Werte der Absorption (100-T) oder der Extinktion (-log(T/100)) angezeigt werden, können diese Werte durch Formeln berechnet werden oder die Einstellungen des entsprechenden Versuchsbeispiels geladen werden.

#### Problemlösungen

Werden keine Messwerte angezeigt, kann dies unterschiedliche Gründe haben:

- Serielle Schnittstelle falsch angegeben
- Verbindungskabel falsch: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel.
- Falsches Gerät ausgewählt: Überprüfen Sie die Katalognummer des Geräts mit der Angabe im Dialogfenster.
- Siehe auch.

## Handmessgeräte und Data Logger

Es werden alle Geräte aus der Handmessgeräteserie sowie der dazugehörende Data Logger unterstützt:

- Data Logger (666 252)
- pH-Meter (666 221)
- Conductivity-Meter (666 222)
- Lux-Meter (666 223 / 666 230)
- O2-Meter (666 224)
- Photo-Meter (666 225)
- Sound-Level-Meter (666 231)
- CO2-CO-CH4-Meter (666 232)
- Optical Power-Meter (736 435)

Jedes Handmessgerät kann aber nur einmal angeschlossen werden. Soll ein Handmessgerät gleichzeitig mehrmals verwendet werden (z. B. zwei pH-Meter), so müssen diese Geräte über den Data Logger angeschlossen werden.

Der angegebene Anzeigebereich kann jederzeit verändert werden und hat mit dem eigentlichen Messbereich im Handmessgerät nichts zu tun. Wenn der Messbereich im Gerät umgestellt wird, bleibt der Anzeigebereich in der Software erhalten, bis er auch dort verändert wird.

Zu jeder Messgröße wird ein Anzeigeinstrument erzeugt, welches im Hauptfenster bei den Speed-Buttons einsortiert wird.

Der Data Logger sowie das Sound-Level-Meter verfügt über einen Messwertspeicher, der ausgelesen werden kann. Dazu muss **Speicher auslesen** betätigt sowie am Gerät das Senden der Werte initiiert werden.

#### Problemlösungen

Werden keine Messwerte angezeigt, kann dies unterschiedliche Gründe haben:

- Serielle Schnittstelle falsch angegeben
- Verbindungskabel falsch: Verwenden Sie nur das spezielle Computeranschlusskabel (666 251).
- Falsches Gerät ausgewählt: Überprüfen Sie die Katalognummer des Geräts mit der Angabe im Dialogfenster.
- Messgröße falsch: Stellen Sie am Gerät die richtige Messgröße ein.
- Siehe auch.



#### **Antennendrehtisch**

Es wird der Antennendrehtisch (737 405) unterstützt. Neben zahlreichen vordefinierten Versuchsbeispielen können für den optimalen Einsatz folgende Parameter manuell verändert werden:

#### Bereich von

Startwinkel in Grad für die Messung angeben, z. B. -180

#### · Bereich bis

Zielwinkel in Grad angeben, z. B. 180

#### Winkelschritt

Auswahlmenü für die Winkelauflösung, Drehintervalle sind zwischen 0,5° / 1° / 2° auswählbar.

#### Biasstrom

ein / ausschaltbar. Die in der Dipolantenne (737 411) verwendete Schottky Detektor Diode benötigt einen kleinen DC-Vorstrom (Bias) in der Größenordnung von 15  $\mu$ A. Ohne diesen Vorstrom sinkt die Empfindlichkeit des Detektors deutlich ab.

#### • Gunn-Modulation

Überlagert der DC-Versorgung für den Gunn-Oszillator eine Rechteckspannung von ca. 1 kHz, 1 Vpp. Nur einschalten, falls kein PIN-Modulator (737 05) vorhanden ist.

#### Detektorcharakteristik

Die Testantennen müssen immer mit einem Detektor verbunden werden (z. B. Koax-Detektor 737 03), bzw. sie besitzen eine fest eingebaute Detektordiode. Das eigentliche Antennensignal A vor dem Detektor kann nicht direkt gemessen werden sondern nur der Spannungsabfall U, den der Detektorstrom am Messverstärker erzeugt. Im Allgemeinen ist A nicht proportional zu U. Auswählbar sind:

- Quadratischer Detektor: A ∝ U^(1/2) (gute Näherung für kleine Empfangsspannungen U < 5 mV)
- Linearer Detektor: A ∝ U (Näherung für große Empfangsspannungen U > 5 mV)
- Frei: A  $\propto$  U^(1/m) (hier muss die Detektorcharakteristik m selbst eingeben werden, z. B. nach Kontrollmessung mit einem kalibrierten Dämpfungsglied 737 09).

#### • Fernfeld-Rechner

Eingabe von DT (größte Querabmessung der Testantenne in mm). Unter Berücksichtigung der Ausdehnung der Sendeantenne DQ (z. B. große Hornantenne 737 21: DQ = 100 mm) und der Wellenlänge  $\lambda 0 = 32$  mm wird der Minimalabstand ro zwischen Sende- und Empfangsantenne errechnet, ab dem mit Fernfeldbedingungen gerechnet werden kann:

$$r_{_{0}} \geq \frac{2 \big(D_{_{Q}} + D_{_{T}}\big)^2}{\lambda_{_{0}}}$$

## Pegel normieren

Bildet den Quotienten A= U/Umax, im Maximum also 1. Für das logarithmische Dämpfungsmaß a gilt im Maximum a = 0 dB.

#### • Maximum auf 0° drehen

Bringt das Maximum der Messkurve auf  $0^{\circ}$ . Mit den beiden Pfeiltasten kann die Messkurve manuell gedreht oder verschoben werden. Achtung Cursorbetrieb: Die Messinstrumente (z. B. Pegel A oder Winkel  $\vartheta$ ) geben den aktuellen Messwert wieder und nicht die Position des Cursors im Diagramm oder der Tabelle!

## · Referenzpunkt anfahren

Bricht die aktuelle Messung ab und fährt den Drehtisch in die Startposition nach +/-180°. Das ist z.B. nötig, wenn der freie Lauf des Drehtellers behindert wurde und die Positionserfassung fehlerhaft wird.

#### Drehtisch anhalten

Stoppt den Drehtisch. Statische Messungen sind möglich, z.B. für die Bestimmung des Antennengewinns. Eine schrittweise Steuerung des Drehtisches ist über die Pfeiltasten möglich.

#### Problemlösungen

Werden keine Messwerte angezeigt, kann dies unterschiedliche Gründe haben:

- Serielle Schnittstelle falsch angegeben
- Verbindungskabel falsch: Verwenden Sie ein ungekreuztes Kabel (1:1-Kabel).
- Falsches Gerät ausgewählt: Überprüfen Sie die Katalognummer des Geräts mit der Angabe im Dialogfenster.

## SVN (Schülerversuche Naturwissenschaften)

Die Versuchsbeispiele helfen Ihnen beim Einsatz von CASSY. Die Messdaten oder Einstellungen der Beispiele können direkt in CASSY Lab geladen werden. Klicken Sie einfach auf die ■-Zeichen in den Beschreibungen. Neue Beispiele sind mit einem roten • gekennzeichnet.

#### Lehrerversionen

Die Lehrerversionen können die Beispiele mit Messdaten laden und geben auch die Antworten vor. Dazu ist aber die separate Installation der SVN-Hilfe notwendig. Falls Sie diese noch nicht installiert haben, holen Sie dies bitte mit der CASSY Lab CD-ROM nach. Danach können Sie auch zukünftige Versionen der SVN-Hilfe aus dem Internet installieren.

Texte, die in den Lehrerversionen rot sind, sind in den Schülerversionen nicht vorhanden.

#### Mechanik

- P1.3.1.3 Gleichmäßig beschleunigte Bewegung Weg-Zeit-Diagramm (Lehrerversion)
- Gleichförmige Bewegung zwischen zwei Lichtschranken (Lehrerversion)
- Gleichmäßig beschleunigte Bewegung zwischen Haltemagnet und Lichtschranke (Lehrerversion)
- Zusammenhang zwischen Beschleunigung und Masse (F=konstant) (Lehrerversion)
- Zusammenhang zwischen Beschleunigung und Kraft (m=konstant) (Lehrerversion)

#### Elektrizitätslehre


- Ohmsches Gesetz (Lehrerversion)
- P3.2.3.1a Reihenschaltung von Widerständen (Lehrerversion)
- P3.2.3.1b Parallelschaltung von Widerständen (Lehrerversion)
- P3.2.3.2 Spannungseinstellung mit einem Potentiometer (Lehrerversion)
- P3.2.3.3 Prinzip der Wheatstoneschen Messbrücke (Lehrerversion)

## Atom- und Kernphysik

 Der Einfluss des Abstandes zwischen Strahlenquelle und Z\u00e4hlrohr auf die Z\u00e4hlrate (Lehrerversion)



## Gleichmäßig beschleunigte Bewegung - Weg-Zeit-Diagramm

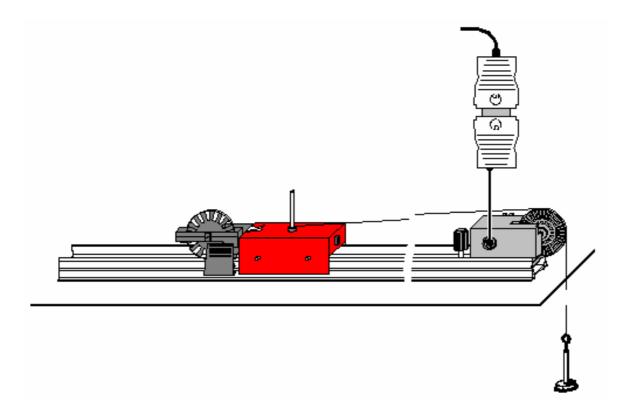

#### **Aufgabe**

Die Bewegung eines durch eine über eine Umlenkrolle angehängte Masse angetriebenen Wagens untersuchen.

## **Benötigte Geräte**

1	Pocket-CASSY	524 006
1	CASSY Lab	524 200
1	Timer S	524 074
1	Kombilichtschranke	337 462
1	Kombispeichenrad	337 464
1	Adapter Kombilichtschranke	
	für Schülerfahrbahn	337 465
1	Verbindungskabel, 6-polig	501 16
1	Präzisionsmetallschiene, 1 m	460 81
1	Messwagen, 85 g	337 00
1	Satz Antriebsmassen	337 04
1	Schnur	200 70 322
1	Einzelumlenkrolle auf Reiter	337 14
	alternativ: 1 Klemmreiter	460 95
1	PC ab Windows 98/2000	

## Versuchsaufbau (siehe Skizze)

- Ca. 80 cm Schnur abschneiden und in die Enden Schlaufen binden. Die Schnur soll so lang sein, dass die angehängte Masse den Boden gerade nicht berührt, wenn der Wagen am Ende der Fahrbahn steht.
- Wagen auf der Fahrbahn bewegen, bis die angehängte Masse die Umlenkrolle gerade noch nicht berührt. Als Startpunkt des Wagens nun die Einzelumlenkrolle auf Reiter (oder einen Klemmreiter) auf der Präzisionsmetallschiene befestigen.
- Zunächst nur die Tellermasse (5,2 g) anhängen.



# CASSY Lab 69

## Versuchsdurchführung

■ Einstellungen laden

 Wagen an den Startpunkt schieben und festhalten, im Fenster Einstellungen Weg s1 Nullpunkt durch Betätigen von → 0 ← festlegen. Messung durch Betätigen der F9-Taste oder durch Anklicken von

starten und den Wagen loslassen.


• Zusätzlich Massen (jeweils 5 g) auf den Teller legen und den Versuch wiederholen.

Αu	swe	rtu	na
Au.	_,,,		шч

•	Was wurde im Experiment gemessen (siehe Tabelle oder Diagramm)?
•	Was ist im Diagramm dargestellt?
•	Wie verhalten sich die Wegdifferenzen in gleichen Zeiträumen?
•	Auf welcher Kurve liegen die Messwerte? Vermutung:
•	Die Vermutung mit einer entsprechenden Kurve durch Anpassung durchführen bestätigen. In welcher Beziehung stehen also der Weg <i>s</i> und die Zeit <i>t</i> zueinander?
•	Im Blatt <b>Überprüfung</b> die Achsen durch Anklicken mit der rechten Maustaste entsprechend darstellen. Danach den Proportionalitätsfaktor durch Anpassung einer Ursprungsgeraden bestimmen. Es gilt für die drei Bewegungen:  1.)
	2.)
•	3.) Wie kann also allgemein die Bewegung mathematisch beschrieben werden (Bewegungsgleichung)?



## Gleichförmige Bewegung zwischen zwei Lichtschranken

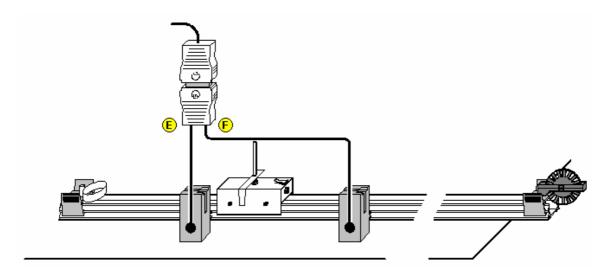

#### **Aufgabe**

Den Zusammenhang zwischen Weg s und Zeit t und zwischen Geschwindigkeit v und Zeit t bei der gleichförmigen Bewegung eines Fahrbahnwagens zwischen zwei Lichtschranken untersuchen.

## **Benötigte Geräte**

1	Pocket-CASSY	524 006
1	CASSY Lab	524 200
1	Timer S	524 074
1	Präzisions-Metallschiene, 1 m	460 81
1	Messwagen 1	337 00
1	Einzel-Umlenkrolle	337 14
1	Feder und Prallplatte	337 03
1	Klemmreiter	460 95
1	Verlängerungsstift	309 00 441
1	Zubehör für elektrische Zeitmessung	337 466
2	Kombi-Lichtschranken	337 462
2	Verbindungskabel, 6-polig	501 16
1	PC ab Windows 98/2000	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

- Lichtschranke 1 in 40 cm Abstand vom Anfang der Metallschiene positionieren und am Eingang E des Timer S anschließen. Lichtschranke 2 mit dem Eingang F verbinden.
- Messwagen mit Feder und Unterbrecherfahne auf die Metallschiene setzten.
- Klemmreiter und Verlängerungsstift als Startvorrichtung am Anfang und Einzel-Umlenkrolle als Stoppvorrichtung am Ende der Metallschiene anbringen.

## Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Die Lichtschranke 2 in 10 cm Abstand von Lichtschranke 1 positionieren. Den Zeiger im Anzeigefenster Weg s mit der Maus auf 10 cm ziehen.
- Messwagen zum Start mit der Feder gegen den Haltestift drücken. Dabei sollte die Feder etwa um 2 cm zusammengedrückt werden.
- Wagen loslassen. Die Messwerte mit der Taste F9 in die Tabelle übernehmen.
- Messung in Abständen von 5 cm wiederholen.

Beim Zurückschieben des Messwagens zum Nullpunkt wird beim Unterbrechen der Lichtschranke 1 die Zeitmessung ausgelöst. Um diese wieder zu stoppen muss die Lichtschranke 2 danach ebenfalls unterbrochen werden. Einfacher ist es jedoch, den Messwagen von der Schiene zu nehmen und vor der Lichtschranke 1 wieder aufzusetzen.




CASSY Lab 71

# **Auswertung**

•	Durch die Messpunkte im s(t)-Diagramm eine Ursprungsgerade legen! Welcher Zusammenhang zwischen s und $\Delta t1$ kann abgeleitet werden?
•	Den Anstieg A der Geraden ablesen!
•	Den Mittelwert vm der Messpunkte im v(t)-Diagramm bestimmen!
•	Den Anstieg A der Geraden im s(t)-Diagramm mit dem Mittelwert vm der Geschwindigkeit vergleichen!
•	Welche Bewegungsgleichung kann für die gleichförmige Bewegung abgeleitet werden?



# Gleichmäßig beschleunigte Bewegung zwischen Haltemagnet und Lichtschranke

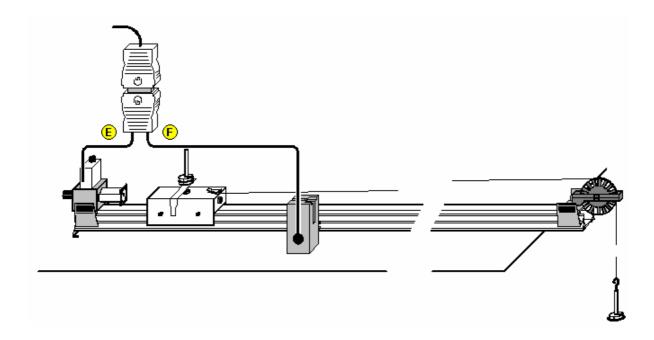

## **Aufgabe**


Den Zusammenhang zwischen Weg s und Zeit t sowie Durchschnittsgeschwindigkeit vm und Zeit t bei der gleichmäßig beschleunigten Bewegung eines Fahrbahnwagens zwischen Haltemagnet und Lichtschranke untersuchen.

## **Benötigte Geräte**

1	Pocket-CASSY	524 006
1	CASSY Lab	524 200
1	Timer S	524 074
1	Präzisions-Metallschiene, 1 m	460 81
1	Messwagen 1	337 00
1	Satz Antriebsmassen	337 04
1	Angelschnur	309 48
1	Einzel-Umlenkrolle	337 14
1	Haltemagnet für Fahrbahn	683 41
1	Haltemagnetadapter mit Auslöser	336 25
1	Zubehör für elektrische Zeitmessung	337 466
1	Kombi-Lichtschranke	337 462
1	Verbindungskabel, 6-polig	501 16
1	PC ab Windows 98/2000	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

- Haltemagnet mit Haltemagnetadapter aufsetzen und an den Eingang E des Timer S anschließen.
- Lichtschranke in 20 cm Abstand vom Anfang der Metallschiene positionieren und mit dem Eingang F verbinden.
- Messwagen mit Haltestift auf die Metallschiene stellen.
- Faden am Wagen befestigen, das Tellergewicht anhängen und ein Schlitzgewicht auflegen.
- Die Schraube am Haltemagnet so einstellen, dass der Wagen gerade nicht losfährt.
- Messwagenwagen gemeinsam mit dem Haltemagnet so verschieben, dass die Unterbrecherfahne des Wagens die Lichtschranke gerade nicht unterbricht (Nullpunkt)

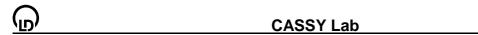

### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Die Lichtschranke im Abstand s von 10 cm hinter dem festgelegten Nullpunkt positionieren.
- Den Zeiger im Anzeigefenster Weg s mit der Maus auf 10 cm ziehen.
- Zum Start der Messung den Taster am Haltemagnetadapter betätigen.
- Den Weg s und die Laufzeit Δt1 mit **F9** in die Tabelle übernehmen.
- Abstand s der Lichtschranken in Schritten von 5 cm vergrößern und jeweils Messung wiederholen.


**73** 

<b>Auswert</b>	una
AUSWUI	.uiiq

•	Durch die Messpunkte im s(t)-Diagramm eine Normalparabel legen! Welcher Zusammenhang zwischen s und $\Delta t_1$ kann abgeleitet werden?
•	Durch die Messpunkte im vm(t)-Diagramm eine Ursprungsgerade legen! Welcher Zusammenhang zwischen der Durchschnittsgeschwindigkeit vm und der Laufzeit ∆t1 kann abgeleitet werden.



### **Zusammenhang zwischen Beschleunigung und Masse (F=konstant)**

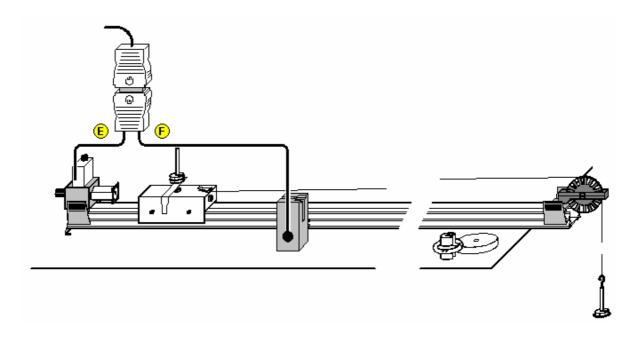

### **Aufgabe**

Den Zusammenhang zwischen Beschleunigung a und Masse m bei der gleichmäßig beschleunigten Bewegung eines Fahrbahnwagens zwischen Haltemagnet und Lichtschranke untersuchen.

### **Benötigte Geräte**

1	Pocket-CASSY	524 006
1	CASSY Lab	524 200
1	Timer S	524 074
1	Präzisions-Metallschiene, 1 m	460 81
1	Messwagen 1	337 00
1	Satz Antriebsmassen	337 04
1	Zusatzmasse 1	337 05
1	Laststück, 50 g	aus 340 85
1	Angelschnur	309 48
1	Einzel-Umlenkrolle	337 14
1	Haltemagnet für Fahrbahn	683 41
1	Haltemagnetadapter mit Auslöser	336 25
1	Zubehör für elektrische Zeitmessung	337 466
1	Kombi-Lichtschranke	337 462
1	Verbindungskabel, 6-polig	501 16
1	Universalwaage	667 794
1	PC ab Windows 98/2000	

### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

- Haltemagnet mit Haltemagnetadapter aufsetzen und an den Eingang E des Timer S anschließen.
- Lichtschranke in 20 cm Abstand vom Anfang der Metallschiene positionieren und mit dem Eingang F verbinden.
- Fahrbahnwagen mit Haltestift auf die Metallschiene stellen.
- Faden am Wagen befestigen und das Tellergewicht mit einem Schlitzgewicht anhängen (F = 0,10 N).
- Die anderen Schlitzgewichte auf die Steckachse am Wagens stecken.
- Die Schraube am Haltemagnet so einstellen, dass der Wagen gerade nicht losfährt.
- Fahrbahnwagen gemeinsam mit dem Haltemagnet so verschieben, dass die Unterbrecherfahne des Wagens die Lichtschranke gerade nicht unterbricht (Nullpunkt).



**CASSY Lab 75** 


### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Masse m des Wagens (inklusive Tellergewicht und Schlitzgewichte) bestimmen.
- Die Lichtschranke im Abstand s = 30 cm vom Nullpunkt positionieren.
- Zum Start der Messung den Taster am Haltemagnetadapter betätigen.
- Die Laufzeit Δt1 aus den Anzeigefenstern ablesen und mit F9 zur Berechnung der Beschleunigung übernehmen.
- Die Masse des Wagens jeweils um 50 g erhöhen und die Messung wiederholen.
- Vor Aufnahme einer weiteren Messreihe mit der Maus im Messparameterfenster (zweimal F5 drücken) Neue Messreihe anhängen auswählen.
- Danach die beschleunigende Kraft durch Auflegen eines bzw. zweier Schlitzgewichte erhöhen und die Messungen wiederholen.

swertung
Wie kann die Beschleunigung a des Messwagens aus dem Weg s und der Laufzeit $\Delta t1$ berechnet werden?
Die jeweiligen Massen m (Messwagen, Zusatzwägestücke, Tellergewicht und Schlitzgewichte) in die Tabelle eintragen! Durch die Messpunkte im a(m)-Diagramm Hyperbeln (1/x) legen! Welcher Zusammenhang zwischen Beschleunigung a und Masse m kann abgeleitet werden?
Von welcher physikalischen Größe ist die Beschleunigung a des Messwagens bei gleicher Masse abhängig?



### Zusammenhang zwischen Beschleunigung und Kraft (m=konstant)

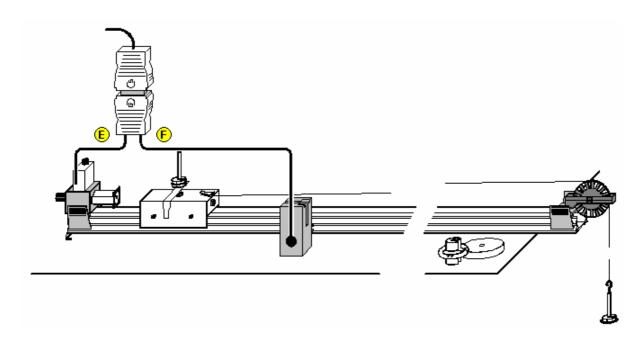

### **Aufgabe**

Den Zusammenhang zwischen Beschleunigung und Kraft bei der gleichmäßig beschleunigten Bewegung eines Fahrbahnwagens zwischen Haltemagnet und Lichtschranke untersuchen.

### **Benötigte Geräte**

1	Pocket-CASSY	524 006
1	CASSY Lab	524 200
1	Timer S	524 074
1	Präzisions-Metallschiene, 1 m	460 81
1	Messwagen 1	337 00
1	Satz Antriebsmassen	337 04
1	Zusatzmasse 1	337 05
1	Laststück, 50 g	aus 340 85
1	Angelschnur	309 48
1	Einzel-Umlenkrolle	337 14
1	Haltemagnet für Fahrbahn	683 41
1	Haltemagnetadapter mit Auslöser	336 25
1	Zubehör für elektrische Zeitmessung	337 466
1	Kombi-Lichtschranke	337 462
1	Verbindungskabel, 6-polig	501 16
1	Universalwaage	667 794
1	PC ab Windows 98/2000	

### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

- Haltemagnet mit Haltemagnetadapter aufsetzen und an den Eingang E des Timer S anschließen.
- Lichtschranke in 20 cm Abstand vom Anfang der Metallschiene positionieren und mit dem Eingang F verbinden.
- Messwagen mit Haltestift auf die Metallschiene stellen.
- Faden am Wagen befestigen, das Tellergewicht anhängen und alle drei Schlitzgewichte auflegen.
- Die Schraube am Haltemagnet so einstellen, dass der Wagen gerade nicht losfährt.
- Fahrbahnwagen gemeinsam mit dem Haltemagnet so verschieben, dass die Unterbrecherfahne des Wagens die Lichtschranke gerade nicht unterbricht (Nullpunkt).




### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Masse m des Wagens (inklusive Tellergewicht und Schlitzgewichten) bestimmen.
- Die Lichtschranke im Abstand s = 30 cm vom Nullpunkt positionieren.
- Alle drei Schlitzgewichte vom Tellergewicht nehmen und auf die Steckachse des Wagens stecken.
- Zum Start der Messung den Taster am Haltemagnetadapter betätigen.
- Die Laufzeit Δt1 aus den Anzeigefenstern ablesen und mit F9 zur Berechnung der Beschleunigung übernehmen.
- Jeweils ein Schlitzgewicht von der Steckachse nehmen, auf das Tellergewicht legen und die Messung wiederholen.
- Vor Aufnahme einer weiteren Messreihe mit der Maus im Messparameterfenster (zweimal F5 drücken) Neue Messreihe anhängen auswählen.

•	Danach die Masse des Wagens um 0,05 kg bzw. 0,10 kg erhöhen und die Messungen wiederholen.
Αι	uswertung
•	Wie kann die Beschleunigung des Messwagens aus Weg s und Laufzeit $\Delta$ t1 berechnet werden?
	Die jeweils auf den Messwagen wirkende Kraft F in die Tabelle eintragen! Durch die Messpunkte im a(F)-Diagramm Ursprungsgeraden legen! Welcher Zusammenhang zwischen a und F kann aus der graphischen Darstellung abgeleitet werden?
•	Von welcher physikalischen Größe ist die Beschleunigung a des Messwagens bei gleicher Kraft abhängig?



### **Ohmsches Gesetz**

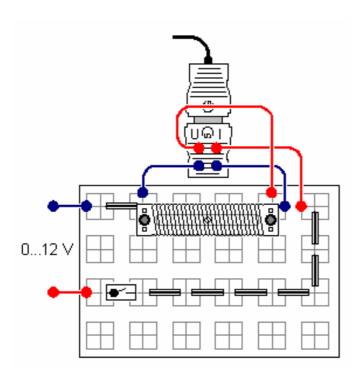

### **Aufgabe**

Für stromdurchflossene Leiter ist der Zusammenhang zwischen der anliegenden Spannung U und der Stromstärke I zu ermitteln.

### **Benötigte Geräte**

1	Pocket-CASSY		524 006
1	CASSY Lab		524 200
1	UIP-Sensor S		524 0621
1	Rastersteckplatte		576 74
1	Satz 10 Brückenstecker		501 48
1	Drahtwickelplatte		567 18
1	STE Schalter, ein-aus		579 13
1	Chrom-Nickel-Draht,		
	0,25 mm, ca. 200 cm lang	aus	550 46
1	STE Widerstand 100 $\Omega$		577 32
3	Kabel, rot, 25 cm		500 411
3	Kabel, blau, 25 cm		500 412
1	Spannungsquelle, 012 V, einstellbar	z.B.	521 230
1	PC ab Windows 98/2000		

### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

- Chrom-Nickel-Draht auf die Drahtwickelplatte wickeln. Dabei über die Schrauben elektrischen Kontakt mit den Steckern herstellen.
- Schaltung gemäß Skizze aufbauen. Der Schalter ist zunächst offen.
- Zur Spannungs- und Stromstärkenmessung Kabel gemäß Skizze an den UIP-Sensor S anschließen.

### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Stromkreis mit dem Schalter schließen. Ersten Messwert bei U = 0 V durch Betätigen der **F9**-Taste oder durch Anklicken von speichern.



 Verschiedene Spannungen (3 V, 6 V, 9 V und 12 V) am Netzgerät einstellen und jeweils die Messwerte speichern.

**79** 

Hinweis: Strom jeweils nur kurze Zeit fließen lassen, so dass es durch eine Erwärmung des Drahtes nicht zu einer Erhöhung des Widerstandes und damit zu einer Verfälschung des Messergebnisses kommt.

- Drahtwickelplatte in der Schaltung durch den STE-Widerstand 100  $\Omega$  und zwei Brückenstecker ersetzen.
- Im Fenster Messparameter (z.B. durch Betätigen der F5-Taste) Neue Messreihe anhängen ankreuzen.
- Versuch mit dem STE-Widerstand 100  $\Omega$  wiederholen.

Δı	121	Nρ	rtı	ın	a

•	Es gilt: Je größer die Spannung <i>U</i> , desto

- Wie ändert sich die Stromstärke / durch einen Draht, wenn die Spannung U verdoppelt wird?
- In der grafischen Darstellung (Diagramm) für beide Messreihen eine Geradenanpassung durchführen. Wie liegen die Messwerte?
- In welcher Beziehung stehen also die Spannung *U* und die Stromstärke *I* in den beiden Versuchen zueinander?
- Der elektrische Widerstand R ist definiert als Quotient aus U und I:

$$R = \frac{U}{I}$$

Die Einheit des elektrischen Widerstandes ist  $\Omega$  (Ohm):


$$[R] = \Omega = \frac{V}{A}$$

Was gilt für die beiden verwendeten Widerstände?

•	Wie groß ist der Widerstand des verwendeten Chrom-Nickel-Drahtes und des STE-Widerstandes?
	Chrom-Nickel-Draht:
	STE-Widerstand:



### Reihenschaltung von Widerständen

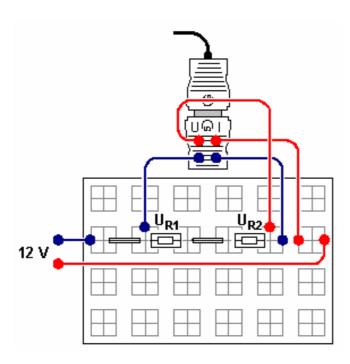

### **Aufgabe**

An zwei in Reihe geschalteten Widerständen *R1* und *R2* die Spannungen *U0*, *UR1*, *UR2* und die Stromstärke *I0* messen und den Zusammenhang zwischen *R1*, *R2* und dem Gesamtwiderstand *R0* ermitteln.

### **Benötigte Geräte**

1	Pocket-CASSY		524 006
1	CASSY Lab		524 200
1	UIP-Sensor S		524 062
1	Rastersteckplatte		576 74
1	Satz 10 Brückenstecker		501 48
1	STE Widerstand 220 $\Omega$		577 36
1	STE Widerstand 330 $\Omega$		577 38
1	STE Widerstand 470 $\Omega$		577 40
1	STE Widerstand 1 kΩ		577 44
3	Kabel, rot, 25 cm		500 411
3	Kabel, blau, 25 cm		500 412
1	Spannungsquelle, 012 V, einstellbar	z.B.	521 230
1	PC ab Windows 98/2000		

### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

- Schaltung für eine Widerstandskombination, z. B. 220  $\Omega/330~\Omega$ , gemäß Skizze aufbauen.
- Zur Messung der Spannung Uo und der Stromstärke Io Kabel gemäß Skizze an den UIP-Sensor S anschließen.

### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Am Netzgerät eine Spannung von ca. 12 V einstellen.
- Spannung *Uo* und Stromstärke *Io* messen. Die Messwerte mit der Maus aus den Anzeigeinstrumenten *U* und *I* in die vorbereitete Tabelle schieben (Drag & Drop).
- Kabel zur Spannungsmessung UR1 anschließen (siehe Skizze) und Spannung UR1 messen. Den Messwert mit der Maus aus dem Anzeigeinstrument U in die vorbereitete Tabelle schieben und Widerstandswert R1 manuell eintragen.



### CASSY Lab 81

- Kabel zur Spannungsmessung UR2 anschließen (siehe Skizze) und Spannung UR2 messen. Den Messwert mit der Maus aus dem Anzeigeinstrument U in die vorbereitete Tabelle schieben und Widerstandswert R2 manuell eintragen.
- Versuch für weitere Widerstandskombinationen wiederholen.


### **Auswertung**

Zur Auswertung des Versuches steht die vorbereitete Tabelle **Auswertung** zur Verfügung, aus der die Zusammenhänge zwischen den Spannungen *Uo, UR1, UR2* und den Widerständen *Ro, R1, R2* ersichtlich werden.

•	Der Strom, der durch die hintereinander geschalteten Widerständen $R_1$ und $R_2$ fließt, ist
•	Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Spannungen <i>UR1</i> und <i>UR2</i> und der Gesamtspannung <i>U0</i> ?
•	Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Verhältnis der Widerstände $R_1$ und $R_2$ und den Verhältnis der Spannungen $UR_1$ und $UR_2$ ?
•	Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Gesamtwiderstand $R_0 = U_0/I_0$ und den Wider ständen $R_1$ und $R_2$ ?



### Parallelschaltung von Widerständen

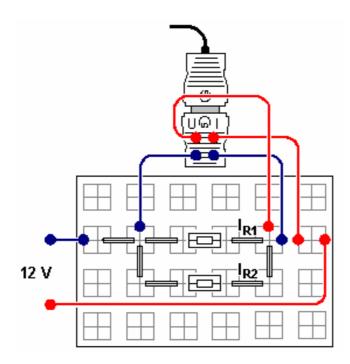

### **Aufgabe**

An zwei parallel geschalteten Widerständen  $R_1$  und  $R_2$  Spannung  $U_0$  und Stromstärken  $I_0$ ,  $I_{R_1}$ ,  $I_{R_2}$  messen und den Zusammenhang zwischen  $R_1$  und  $R_2$  und dem Gesamtwiderstand  $R_0$  ermitteln.

### **Benötigte Geräte**

1	Pocket-CASSY		524 006
1	CASSY Lab		524 200
1	UIP-Sensor S		524 0621
1	Rastersteckplatte		576 74
1	Satz 10 Brückenstecker		501 48
1	STE Widerstand 220 $\Omega$		577 36
1	STE Widerstand 330 $\Omega$		577 38
1	STE Widerstand 470 $\Omega$		577 40
1	STE Widerstand 1 kΩ		577 44
3	Kabel, rot, 25 cm		500 411
3	Kabel, blau, 25 cm		500 412
1	Spannungsquelle, 012 V, einstellbar	z.B.	521 230
4	DC ab Windows 00/2000		

1 PC ab Windows 98/2000

### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

- Schaltung für eine Widerstandskombination, z. B. 220  $\Omega/330~\Omega$ , gemäß Skizze aufbauen.
- Zur Messung der Spannung Uo und der Stromstärke Io Kabel gemäß Skizze an den UIP-Sensor S anschließen.

### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Am Netzgerät eine Spannung von ca. 12 V einstellen.
- Spannung *Uo* und Stromstärke *Io* messen. Die Messwerte mit der Maus aus den Anzeigeinstrumenten *U* und *I* in die vorbereitete Tabelle schieben (Drag & Drop).
- Kabel zur Strommessung *IR1* anschließen (siehe Skizze, Brückenstecker umstecken) und Stromstärke *IR1* messen. Den Messwert mit der Maus aus dem Anzeigeinstrument *I* in die vorbereitete Tabelle schieben und Widerstandswert *R1* manuell eintragen.



CASSY Lab 83

- Kabel zur Strommessung *IR2* anschließen (siehe Skizze, Brückenstecker umstecken) und Stromstärke *IR2* messen. Den Messwert mit der Maus aus dem Anzeigeinstrument *I* in die vorbereitete Tabelle schieben und Widerstandswert *R2* manuell eintragen.
- Versuch für weitere Widerstandskombinationen wiederholen.


### **Auswertung**

Zur Auswertung des Versuches steht die vorbereitete Tabelle **Auswertung** zur Verfügung, aus denen die Zusammenhänge zwischen den Strömen *Io*, *IR1*, *IR2* und den Widerständen *R0*, *R1*, *R2* ersichtlich werden.

•	Die Spannungen UR1 und UR2 an den Widerständen R1 und R2 sind gleich der
•	Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Stromstärken IR1 und IR2 und dem Gesamtstrom stärke Io?
•	Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Verhältnis der Widerstände $R_1$ und $R_2$ und den Verhältnis der Stromstärken $IR_1$ und $IR_2$ ?
•	Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Gesamtwiderstand $R_0 = U_0/I_0$ und den Widerständen $R_1$ und $R_2$ ?



### Spannungseinstellung mit einem Potentiometer

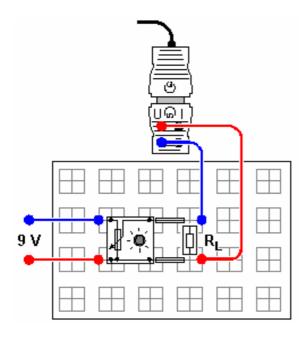

### **Aufgabe**

Teilspannung *U*<sup>1</sup> am Potentiometer im stromlosen, unbelasteten Zustand für verschiedene Potentiometerstellungen messen.

Teilspannung *U1* am Potentiometer als Funktion der Potentiometerstellung für verschiedene Belastungswiederstände *RL* messen und mit der Messung im unbelasteten Zustand vergleichen (*RL* bleibt pro Messreihe konstant).

### **Benötigte Geräte**

1	Pocket-CASSY	524 006
1	CASSY Lab	524 200
1	UIP-Sensor S	524 0621
1	Rastersteckplatte	576 74
1	Satz 10 Brückenstecker	501 48
1	STE Widerstand 47 $\Omega$	577 28
2	STE Widerstand 100 $\Omega$	577 32
1	STE Widerstand 150 $\Omega$	577 34
1	STE Widerstand 470 $\Omega$	577 40
1	STE-Potentiometer 220 Ω, 3 W	577 90
2	Kabel, rot, 25 cm	500 411
2	Kabel, blau, 25 cm	500 412
1	Spannungsquelle, 015 V, einstellbar z.B.	521 45
1	PC ab Windows 98/2000	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Schaltung gemäß Skizze aufbauen und zur Spannungsmessung den UIP-Sensor anschließen. Den Belastungswiderstand *RL* zunächst nicht einsetzen.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Eine Gesamtspannung von ca. 9 V anlegen.
- Spannung  $U_1$  für verschiedene Potentiometerstellungen bei  $RL = \infty$  (d. h. ohne Belastung) durch

jeweiliges Betätigen von **F9** oder durch Anklicken von in vorgegebene Tabelle übernehmen und durchnummerierte Schalterstellung in Spalte PN eintragen.



CASSY Lab 85


- Vor der Aufnahme einer Messreihe mit einem anderen Belastungswiderstand jeweils im Fenster Messparameter (z.B. durch Betätigen von F5) Neue Messreihe anhängen ankreuzen.
- STE-Widerstand RL = 470  $\Omega$  in die Schaltung einsetzen und eine neue Messreihe für ein belastetes Potentiometer aufnehmen.
- Versuch für weitere Belastungswiderstände RL = 100  $\Omega$ , 47  $\Omega$  wiederholen.

Auswertung	tuna
------------	------

•	Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Teilspannung $U_1$ und dem Widerstand $R_1$ beim unbelasteten Potentiometer?
•	Was bewirkt die Belastung des Potentiometers mit einem Widerstand RL?
•	Wo erwartet man den Verlauf der Kurve für die Messreihe, wenn das Potentiometer mit einem Widerstand $RL < 47~\Omega$ belastet wird?



### Prinzip der Wheatstoneschen Messbrücke

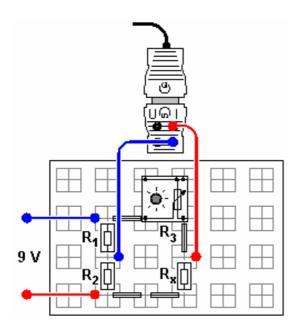

### **Aufgabe**

Zur Bestimmung eines "unbekannten" Widerstandes *Rx* den variablen Widerstand *R*3 (Potentiometer) in der Messbrücke so verändern bis kein Strom mehr zwischen den beiden Armen der Brücke fließt.

### **Benötigte Geräte**

1	Pocket-CASSY		524 006
1	CASSY Lab		524 200
1	UIP-Sensor S		524 062
1	Rastersteckplatte		576 74
1	Satz 10 Brückenstecker		501 48
1	STE Widerstand 220 $\Omega$		577 36
2	STE Widerstand 330 $\Omega$		577 38
1	STE Widerstand 470 $\Omega$		577 40
1	STE Widerstand 1 k $\Omega$		577 44
1	STE-Potentiometer 1 kΩ, 1 W		577 92
	oder 10-Gang-Potentiometer 1 k $\Omega$ , 2 W		577 93
2	Kabel, rot, 25 cm		500 411
2	Kabel, blau, 25 cm		500 412
1	Spannungsquelle, 015 V, einstellbar	z.B.	521 45
1	PC ah Windows 08/2000		

### 1 PC ab Windows 98/2000

Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Schaltung gemäß Skizze für die Widerstandskombination  $R_1 = 1 \text{k}\Omega / R_2 = 470 \Omega$  aufbauen und zur Stromstärkemessung UIP-Sensor anschließen.

#### Versuchsdurchführung

■ Einstellungen laden

- Falls notwendig, Anzeige der Stromstärke in Einstellungen 11 auf  $\rightarrow 0 \leftarrow$  setzen.
- Spannung von ca. 9 V anlegen.
- Potentiometer für einen gewählten Widerstand Rx (z. B. 330  $\Omega$ ) so einstellen, dass zwischen den beiden Armen der Brücke kein Strom  $I_1$  mehr fließt.
- Den eingestellten Widerstandswert  $R_3$  ablesen in die vorbereitete Tabelle eintragen. Der Widerstandswert  $R_3$  kann bei Verwendung des STE-Potentiometer 1 k $\Omega$  aus der Stellung des Drehknopfes abgeschätzt werden: Linksanschlag entspricht ca. 1 k $\Omega$
- Messung für weitere Widerstände Rx wiederholen.

## עטי Auswertung

•	Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Widerstandsverhältnissen der beiden Brückenarme, wenn zwischen den beiden Armen kein Strom fließt (// = 0)?
•	Wie bestimmt man Rx, wenn die Widerstände R1, R2 und R3 bekannt sind?
•	Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Spannungen $U_1$ und $U_3$ bzw. $U_2$ und $U_x$ , die über den 4 Widerständen $R_1$ und $R_3$ bzw. $R_2$ und $R_x$ abfallen, wenn die Brücke abgeglichen ist ( $I_1 = 0$ )?
•	Welchen Einfluss hat die angelegte Spannung $U$ auf die Bestimmung des Widerstandes $Rx$ , wenn die Brücke abgeglichen ist $(I1 = 0)$ ?


### Hinweis

Natürlich könnte man den Widerstand Rx auch dadurch bestimmen, dass man den Spannungsabfall U bei einem fließenden Strom I ermittelt, also durch Rx=U/I. Das setzt aber voraus, dass man die Innenwiderstände der Messgeräte vernachlässigen kann, was auch meistens der Fall ist. Bei Verwendung der Messbrücke spielt der Innenwiderstand des Stromstärkemessgeräts aber keine Rolle mehr, da gar kein Strom fließt. Wenn die drei anderen Widerstände sehr genau bekannt sind, bietet sich also eine präzise Möglichkeit zur Bestimmung des vierten Widerstands.



# Der Einfluss des Abstandes zwischen Strahlenquelle und Zählrohr auf die Zählrate

**CASSY Lab** 

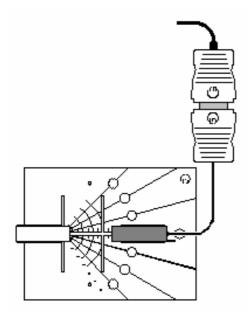

### **Aufgabe**

Die Abstand d zwischen Strahlenquelle und Zählrohr schrittweise vergrößern und jedes Mal die Zählrate R messen.

### **Benötigte Geräte**

1	Pocket-CASSY	524 006
1	CASSY Lab	524 200
1	GM-Zählrohr S	524 0331
1	RAD-Experimentierplatte	309 00 372
1	Satz 2 Halter für Zählrohr und	
	Präparat	308 01 356
1	Ra226-Präparat 3,3 kBg	559 430

1 PC ab Windows 98/2000

### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

- Sicherheitshinweise beim Umgang mit dem radioaktiven Präparat berücksichtigen, d.h. insbesondere Präparat nur für die Dauer der Versuchsdurchführung aus dem Schutzbehälter nehmen, die Strahlaustrittsöffnung nicht in die Nähe der Augen bringen und nicht berühren.
- Zählrohr und Ra226-Präparat so auf der RAD-Experimentierplatte befestigen, dass sie sich in einem Abstand von 2 cm gegenüberstehen.
- Schutzkappe vom Z\u00e4hlrohr entfernen.
   Hinweis: Das Eintrittsfenster auf keinen Fall mit einem Finger oder dem Pr\u00e4parat ber\u00fchren, da es sehr d\u00fcnn und damit leicht zerst\u00f6rbar ist.

### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- In die in Spalte d/cm der Tabelle den Abstand 2 eintragen. Messung durch Drücken der Taste **F9** oder des Buttons starten. Sobald die Messung erfolgt ist wird die Zählrate *R* automatisch in die Tabelle eingetragen.
- Versuch mit schrittweise größeren Abständen wiederholen. Dabei den Abstand jeweils um 1 cm bis zu 10 cm vergrößern.
- Ra226-Präparat wieder in den Schutzbehälter stecken



CASSY Lab 89

- Im Fenster Messparameter Neue Messreihe anhängen anklicken.
- Versuch ohne Präparat zur Bestimmung der Nullrate durch die Untergrundstrahlung durchführen.
- Nach Versuchsdurchführung die Schutzkappe wieder vorsichtig auf das Zählrohr schieben, dabei auf keinen Fall die Öffnung in der Schutzkappe für den Druckausgleich zuhalten.

•	Wodurch unterscheidet sich die Größe N1 von der Zählrate R?		
•	Wie verändert sich die Zählrate $R$ mit dem Abstand $d$ zwischen dem Präparat und dem Zählrohr?		
•	Auf welcher Kurve liegen die Messwerte? Vermutung:		
•	Die Vermutung mit einer entsprechenden Kurve durch Anpassung durchführen bestätigen. In welcher Beziehung stehen also die Zählrate $R$ und der Abstand $d$ zueinander?		
•	Welche Schutzmaßnahme ergibt sich damit für den Umgang mit radioaktiven Materialien?		
•	Wie groß ist die Nullrate <i>Ro</i> ?		
•	In welchem Abstand ergibt sich beim vorliegenden Präparat nur eine zusätzlich Bestrahlung, die ir der Größenordnung der Untergrundstrahlung liegt? Dazu die Messkurve zoomen damit der Wer abgelesen werden kann.		

90 CASSY Lab



### Versuchsbeispiele Physik

Die Versuchsbeispiele helfen Ihnen beim Einsatz von CASSY Lab. Gegebenenfalls ist die entsprechende Kennzahl des Hauptkatalogs Physikversuche mit angegeben. Die Messdaten oder Einstellungen der Beispiele können direkt in CASSY Lab geladen werden. Klicken Sie einfach auf die Leichen in den Beschreibungen. Neue Beispiele sind mit einem roten • gekennzeichnet.

### Mechanik

•		Gleichförmige Bewegungen zwischen zwei Lichtschranken
•		Beschleunigte Bewegungen zwischen Haltemagnet und Lichtschranke
•	P1.3.2.3a	Bewegungen mit Speichenrad (Newtondefinition)
•	P1.3.3.4-6	Bewegungen auf der Luftkissenfahrbahn (Newtonsche Bewegungsgleichung)
•	P1.3.4.1-2ab	Impuls- und Energieerhaltung (Stoß)
•		Impulserhaltung durch Messung der Schwerpunktbewegung (Stoß)
•		Actio=Reactio durch Messung der Beschleunigungen (Stoß)
•	P1.3.5.3	Freier Fall mit g-Leiter
•		Freier Fall mit g-Leiter (mit Modellbildung)
•	P1.4.1.2	Drehbewegungen (Newtonsche Bewegungsgleichung)
•	P1.4.2.1-2	Drehimpuls- und Energieerhaltung (Drehstoß)
•		Zentrifugalkraft (Fliehkraft-Dreharm)
•	P1.4.3.3	Zentrifugalkraft (Fliehkraftgerät)
•	P1.5.2.1	Harmonische Schwingungen eines Federpendels
•	P1.5.2.2	Abhängigkeit der Schwingungsdauer eines Federpendels von der Masse
•		Schwingungen eines Federpendels (mit Modellbildung)
•		Schwingungen eines Federpendels mit Festkörperreibung (mit Modellbildung)
•		Schwingungen eines Federpendels mit Schmiermittelreibung (mit Modellbildung)
•		Schwingungen eines Federpendels mit laminarer Flüssigkeitsreibung (mit Modellbildung)
•		Schwingungen eines Federpendels mit turbulenter Flüssigkeitsreibung/Luftreibung (mit
	Modellbildu	ung)
•	P1.5.4.4	Gekoppelte Pendel
•	P1.7.1.3	Akustische Schwebungen
•	P1.7.2.1	Saitenschwingungen
•	P1.7.3.3	Schallgeschwindigkeit in Luft
•		Schallgeschwindigkeit in Luft mit 2 Mikrofonen
•	P1.7.3.4	Schallgeschwindigkeit in Gasen
•	P1.7.3.5	Schallgeschwindigkeit in Festkörpern
•	P1.7.7.1	Fourier-Analyse von simulierten Signalen
•	P1.7.7.2	Fourier-Analyse von Signalen eines Funktionsgenerators
•	P1.7.7.4	Tonanalyse
•		Tonsynthese

### Kalorik

•	P2.3.3.2	Umwandlung von mechanischer Energie in thermische Energie
•	P2.3.4.3	Umwandlung von elektrischer Energie in thermische Energie
•	P2.6.2.4	pV-Diagramm eines Heißluftmotors

### Elektrizitätslehre

•	P3.1.2.3	Coulombsches Gesetz
•	P3.3.3.3	Kraft im magnetischen Feld einer Luftspule
•	P3.3.3.2	Kraft im magnetischen Feld eines Elektromagneten
•	P3.3.3.4	Kraft zwischen stromdurchflossenen Leitern (Amperedefinition)
•	P3.4.1.1	Spannungsstoß (Faradaysches Induktionsgesetz)
•	P3.4.3.1-2	Induktion durch ein veränderliches Magnetfeld
•	P3.4.5.3	Zeitabhängige Aufzeichnung von Spannung und Strom eines Transformators
•	P3.4.5.4	Leistungsübertragung eines Transformators
•		Leistung beliebiger mit Netzwechselspannung betriebener Verbraucher

	1
1	<u>יט</u>

•	Auf- und Entladung eines Kondensators
•	Auf- und Entladung eines Kondensators (mit Modellbildung)
•	Auf- und Entladung eines kleinen Kondensators (Kabelkapazitäten)
•	Gedämpfter Schwingkreis
•	Gedämpfter Schwingkreis (mit Modellbildung)
• P1.7.7.3	Gekoppelte Schwingkreise

Erzwungene Schwingungen (Resonanz)
 Erzwungene Schwingungen (mit Modellbildung)
 RLC-Filter (Tiefpass, Hochpass, Bandpass)

Tiefpass-Filter (mit Modellbildung)Hochpass-Filter (mit Modellbildung)

### **Elektronik**

•	P4.1.2.1	Kennlinie einer Glühlampe
•		Kennlinie einer Diode
•		Kennlinie eines Transistors
•	D3.4.7.7a	Leistungskennlinie einer Solarzelle
•		Temperaturregelung
•	P4.3.2.2	Helligkeitsregelung
•	P4.3.2.3	Spannungsregelung

### Optik

•	P5.3.1.4	Beugung am Einzelspalt
•	P5.3.1.5	Beugung an Mehrfachspalten
•	P5.5.1.2a	Quadratisches Abstandsgesetz für Licht
•	P5.6.3.3	Lichtgeschwindigkeit in Luft
•	P5.6.3.4	Lichtgeschwindigkeit in verschiedenen Materialien

### Atom- und Kernphysik


		A41111
•	P6.1.2.3-4	Millikan-Versuch
•	P6.3.7.2	Compton-Effekt an Röntgenstrahlung
•	P6.4.2.1	Poissonverteilung
•	P6.4.3.2	Halbwertszeit von Radon
•	P6.5.4.1	α-Spektroskopie an radioaktiven Proben (Am-241)
•	P6.5.4.2	Bestimmung des Energieverlustes von α-Strahlung in Luft
•	P6.5.4.3	Bestimmung des Energieverlustes von α-Strahlung in Aluminium und in Gold
•	P6.5.4.4	Altersbestimmung an einer Ra-226 Probe
•	P6.5.5.1	Nachweis von γ-Strahlung mit einem Szintillationszähler (Cs-137)
•	P6.5.5.2	Aufnahme und Kalibrierung eines γ-Spektrums
•	P6.5.5.3	Absorption von $\gamma$ -Strahlung
•	P6.5.5.4	Identifizierung und Aktivitätsbestimmung von schwach radioaktiven Proben
•	P6.5.5.5	Aufnahme eines β-Spektrums mit einem Szintillationszähler
•	P6.5.6.1	Quantitative Beobachtung des Compton Effekts
•		Aufnahme des komplexen $\gamma$ -Spektrums von Ra-226 und seinen Zerfallsprodukten
•		Aufnahme des komplexen γ-Spektrums eines Glühstrumpfes
•	P6.5.5.6	Koinzidenz und γ-γ-Winkelkorrelation beim Zerfall von Positronen
•		Messungen mit dem Einkanal-Analysator

### Festkörperphysik

- P7.2.2.1-2 Elektrische Leitung in Festkörpern
- P7.3.2.1 Hysterese von Trafoeisen



### Gleichförmige Bewegungen zwischen zwei Lichtschranken

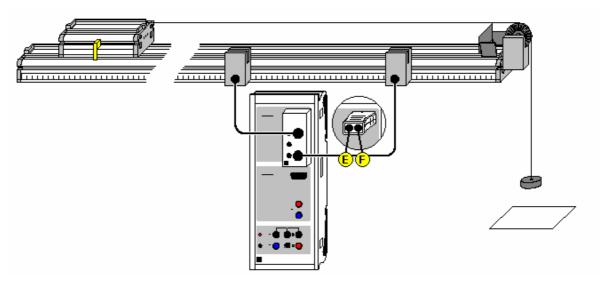



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

### Versuchsbeschreibung

Es werden die Zeiten t gemessen, die ein Fahrbahnwagen braucht, um verschiedene Wege s zwischen zwei Lichtschranken mit konstanter Geschwindigkeit v zurückzulegen. Dabei wird der Weg s auf einem Maßstab unmittelbar an der Fahrbahn abgelesen und das s(t)-Diagramm der Bewegung gezeichnet.

Zusätzlich können die Durchschnittsgeschwindigkeiten  $v_m = s/t$  berechnet und in einem  $v_m(t)$ -Diagramm dargestellt werden.

### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Timer-Box oder Timer S	524 034 oder 524 074
1	Fahrbahn	337 130
1	Fahrbahnwagen	337 110
1	Teller für Schlitzgewichte	315 410
4	Schlitzgewichte	315 418
2	Kombi-Lichtschranken	337 462
1	Halter für Kombi-Speichenrad	337 463
1	Kombi-Speichenrad	337 464
1	Angelschnur	309 48
2	Verbindungskabel, 6-polig	501 16
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die beiden Lichtschranken werden so an der Fahrbahn montiert, dass sie von der Unterbrecherfahne des Fahrbahnwagens unterbrochen werden. Die Lichtschranken werden an die Eingänge E und F der Timer-Box auf Eingang A des Sensor-CASSYs angeschlossen. Die Bewegungsrichtung geht immer von der Lichtschranke an E zur Lichtschranke an F.

Um eine konstante Geschwindigkeit zwischen den beiden Lichtschranken zu erreichen, muss ein Reibungsausgleich durch geringfügiges Neigen der Fahrbahn erfolgen.

Vor jeder Messung muss der Fahrbahnwagen auf eine konstante reproduzierbare Geschwindigkeit beschleunigt werden. Dazu wird er von einer fixen Position aus von einer Antriebsmasse beschleunigt,



die aber nach einem konstanten Beschleunigungsweg abgefangen wird (z. B. auf einer Unterlage aufliegt). Danach rollt der Wagen mit konstanter Geschwindigkeit weiter.


### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Wagen durch wie oben beschrieben auf konstante Geschwindigkeit beschleunigen und danach durch beide Lichtschranken fahren lassen
- Messwert mit F9 abspeichern
- Weg s zwischen beiden Lichtschranken ablesen und in Tabelle eintragen dazu Tabellenzelle mit der Maus anklicken
- Messung für andere Wege s wiederholen dazu Wagen wieder auf die gleiche Geschwindigkeit beschleunigen, durch beide Lichtschranken fahren lassen und Messwert mit F9 abspeichern

### **Auswertung**

Das s(t)-Diagramm einer gleichförmigen Bewegung ist eine Gerade. Die Steigung der Geraden entspricht der Geschwindigkeit v und lässt sich z. B. aus einer Geradenanpassung ermitteln. In der Darstellung **Durchschnittsgeschwindigkeit** (mit der Maus anklicken) lassen sich die jeweiligen Quotienten  $v_m = s/t$  auch direkt ablesen.

### Beschleunigte Bewegungen zwischen Haltemagnet und Lichtschranke

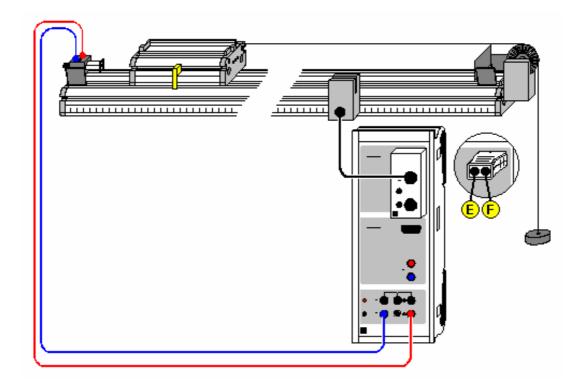

### ■ Beispiel laden

### Versuchsbeschreibung

Es werden die Zeiten t gemessen, die ein gleichmäßig beschleunigter Fahrbahnwagen braucht, um verschiedene Wege s zwischen einem Haltemagneten und einer Lichtschranke zurückzulegen. Dabei wird der Weg s auf einem Maßstab unmittelbar an der Fahrbahn abgelesen und das s(t)-Diagramm der Bewegung gezeichnet.

Zusätzlich können die Durchschnittsgeschwindigkeiten  $v_m = s/t$  berechnet und in einem  $v_m(t)$ -Diagramm dargestellt werden.

Außerdem werden die Dunkelzeiten  $\Delta t$  der Lichtschranke ermittelt, die entstehen, weil die Lichtschranke durch eine Fahne der Breite  $\Delta s$  unterbrochen wird. Daraus können dann in guter Näherung die Momentangeschwindigkeiten  $v=\Delta s/\Delta t$  am Ort der Lichtschranke ermittelt und in einem v(t)-Diagramm dargestellt werden. Dabei wird der Unterschied zwischen Durchschnittsgeschwindigkeit und Momentangeschwindigkeit deutlich.

### **Benötigte Geräte**

Sensor-CASSY	524 010
CASSY Lab	524 200
Timer-Box oder Timer S	524 034 oder 524 074
Fahrbahn	337 130
Fahrbahnwagen	337 110
Teller für Schlitzgewichte	315 410
Schlitzgewichte	315 418
Haltemagnet	683 41
Kombi-Lichtschranke	337 462
Halter für Kombi-Speichenrad	337 463
Kombi-Speichenrad	337 464
Angelschnur	309 48
Verbindungskabel, 6-polig	501 16
Paar Kabel, 100 cm, rot und blau	501 46
PC ab Windows 95/98/NT	
	Timer-Box oder Timer S Fahrbahn Fahrbahnwagen Teller für Schlitzgewichte Schlitzgewichte Haltemagnet Kombi-Lichtschranke Halter für Kombi-Speichenrad Kombi-Speichenrad Angelschnur Verbindungskabel, 6-polig



### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Lichtschranke wird so an der Fahrbahn montiert, dass sie von der Unterbrecherfahne des Fahrbahnwagens unterbrochen wird. Die Lichtschranke wird an den Eingang E der Timer-Box auf Eingang A des Sensor-CASSYs angeschlossen. Der Haltemagnet wird vom Spannungsausgang S des Sensor-CASSYs versorgt. Dieser wird gleichzeitig mit dem Start der Zeitmessung vom Sensor-CASSY abgeschaltet.

Um gute Messergebnisse zu erzielen, muss ein Reibungsausgleich durch geringfügiges Neigen der Fahrbahn erfolgen.

Wagen mit konstanter Masse über das Speichenrad beschleunigen. Haltemagnetspannung so einstellen, dass der Wagen gerade noch gehalten wird.

### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Evtl. maximale Messzeit im Messparameter-Fenster anpassen (aktuell 2 s)
- Wagen vom Haltemagneten festhalten lassen
- Messung mit F9 starten (Wagen fährt los)
- Weg s zwischen Haltemagnet und Lichtschranke ablesen und in Tabelle eintragen dazu Tabellenzelle mit der Maus anklicken
- Messung für andere Wege s wiederholen dazu wieder Wagen vom Haltemagneten festhalten lassen und Messung mit F9 starten

#### Auswertung


Das s(t)-Diagramm einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung ist eine Parabel. Dies lässt sich z. B. mit einer Parabelanpassung bestätigen.

Die Darstellung **Durchschnittsgeschwindigkeit** (mit der Maus anklicken) zeigt den Anstieg der Durchschnittsgeschwindigkeiten  $v_m = s/t$ . Diese entsprechen bei einer beschleunigten Bewegung aber **nicht** den Momentangeschwindigkeiten zum gleichen Zeitpunkt t.

Die Momentangeschwindigkeiten v ergeben sich in guter Näherung aus den Dunkelzeiten  $\Delta t$  der Lichtschranke, die durch die Fahne der Breite  $\Delta s$  unterbrochen wird. Beide zeitlichen Verläufe der Dunkelzeiten und der Momentangeschwindigkeiten lassen sich in den entsprechenden Darstellungen (mit der Maus anklicken) ablesen.

Es zeigt sich, dass das v(t)-Diagramm einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung eine Gerade ist. Die Steigung der Geraden entspricht der konstanten Beschleunigung a. Sie lässt sich z. B. aus einer Geradenanpassung bestimmen.

### Bewegungen mit Speichenrad (Newtondefinition)

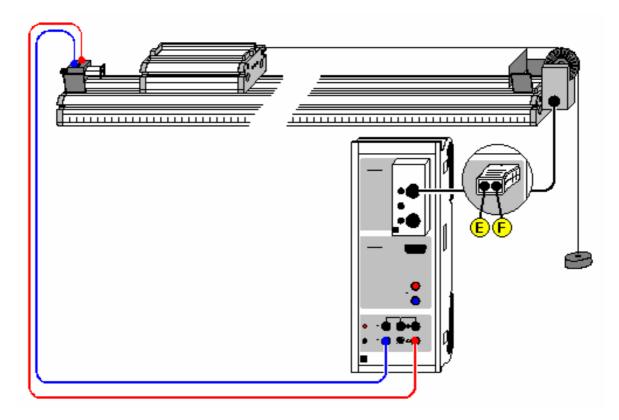

### ■ Beispiel laden

### Versuchsbeschreibung

Es werden Bewegungsabläufe untersucht, die über einen dünnen Faden auf ein Speichenrad übertragen werden können. Das Speichenrad dient als leichtlaufende Umlenkrolle und gleichzeitig zur Wegmessung. Die Speichenradsignale der Lichtschranke werden aufgenommen und in ein Weg-Zeit-Diagramm umgerechnet. Da dieses Diagramm gleichzeitig mit dem Ablauf des Experiments entsteht, wird eine anschauliche Verknüpfung zwischen Bewegungsablauf und Diagramm hergestellt.

Mit dem gleichen Versuchsablauf kann auch die Wirkung der Beschleunigung einer Masse m=1 kg mit einer Kraft F=1 N veranschaulicht werden. Die resultierende Beschleunigung a wird dann erwartungsgemäß zu a=1 m/s² ermittelt (Newtondefinition).

### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Timer-Box oder Timer S	524 034 oder 524 074
1	Fahrbahn	337 130
1	Fahrbahnwagen	337 110
1	Newtonmassen	337 115
1	Haltemagnet	683 41
1	Kombi-Lichtschranke	337 462
1	Kombi-Speichenrad	337 464
1	Angelschnur	309 48
1	Verbindungskabel, 6-polig	501 16
1	Paar Kabel, 100 cm, rot und blau	501 46
1	PC ab Windows 95/98/NT	



### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Das Kombi-Speichenrad dient gleichzeitig als Umlenkrolle und als Signalgeber. Dazu wird das Speichenrad von der Kombi-Lichtschranke gehalten, die an den Eingang E der Timer-Box auf Eingang A des Sensor-CASSYs angeschlossen wird. Jede Speiche unterbricht die Lichtschranke und gibt damit jeden Zentimeter ein Signal an das Sensor-CASSY. Der Haltemagnet wird vom Spannungsausgang S des Sensor-CASSYs versorgt. Dieser wird gleichzeitig mit dem Start der Zeitmessung vom Sensor-CASSY abgeschaltet.

Um eine beschleunigende Kraft von F = 1 N zu erhalten, muss eine Antriebsmasse von 102 g gewählt werden. Damit die insgesamt beschleunigte Masse m = 1 kg beträgt, bleibt für den Wagen (inkl. der Rollenersatzmassen) eine Masse von 898 g übrig. Dies ist mit den Zusatzmassen zur Newtondefinition möglich.

Um gute Messergebnisse zu erzielen, muss ein Reibungsausgleich durch geringfügiges Neigen der Fahrbahn erfolgen.

Haltemagnetspannung so einstellen, dass der Wagen gerade noch gehalten wird.

### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Evtl. automatischen Messstopp in den Einstellungen sa1 anpassen (aktuell 70 Flanken für 0,7 m)
- Evtl. maximale Messzeit im Messparameter-Fenster anpassen (aktuell 2 s)
- Wagen vom Haltemagneten festhalten lassen
- Wegnullpunkt definieren (→ 0 ← in Einstellungen sA1)
- Messung mit F9 starten (Wagen fährt los)
- · Messung stoppt nach vorgegebener Flankenanzahl automatisch
- Evtl. Messung für andere beschleunigende Kräfte F wiederholen dazu wieder Wagen vom Haltemagneten festhalten lassen, Wegnullpunkt definieren und Messung mit **F9** starten

### **Auswertung**

Das s(t)-Diagramm einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung ist eine Parabel. Dies lässt sich z. B. mit einer Parabelanpassung bestätigen.

Die Darstellung **Geschwindigkeit** (mit der Maus anklicken) zeigt die daraus berechneten Geschwindigkeiten v(t). Es zeigt sich, dass das v(t)-Diagramm einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung eine Gerade ist. Die Steigung der Geraden ist die konstante Beschleunigung a. Sie lässt sich z. B. aus einer Geradenanpassung bestimmen.

Im Beispiel wurde für die beschleunigende Kraft F = 1 N und für die beschleunigende Masse m = 1 kg gewählt (Newtondefinition). In diesem Fall ergibt sich aus dem v(t)-Diagramm eine Geschwindigkeit v nach t = 1 s von 1 m/s. Außerdem hat die Gerade im v(t)-Diagramm die Steigung a = 1 m/s².

#### **Anmerkung**

Die einzelnen Geschwindigkeitswerte v(i) werden als


$$v(i) = (s(i+1) - s(i-1)) / (t(i+1) - t(i-1))$$

errechnet. Dies ist die Durchschnittsgeschwindigkeit im Zeitintervall [t(i-1),t(i+1)] und in erster Näherung die Momentangeschwindigkeit zum Zeitpunkt  $\frac{1}{2}(t(i-1)+t(i+1))$ , also nicht zum Zeitpunkt t(i).

Dies wurde aber bei der v(t)-Darstellung bereits durch eine geeignet umgerechnete Zeitachse berücksichtigt.



### Bewegungen auf der Luftkissenfahrbahn (Newtonsche Bewegungsgleichung)

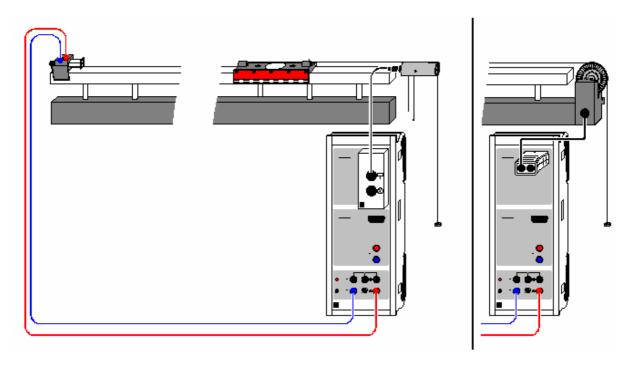

- Beispiel laden (m = konstant)
- Beispiel laden (F = konstant)

### Versuchsbeschreibung

Ein Wagen konstanter Masse m wird mit unterschiedlichen Kräften F beschleunigt. Die ermittelten Beschleunigungen a in Abhängigkeit von den beschleunigenden Kräften F aufgetragen ergibt F proportional a (mit m als Proportionalitätsfaktor) und bestätigt damit die Newtonsche Bewegungsgleichung F=m·a.

Alternativ kann auch die beschleunigende Kraft F konstant gehalten und die Masse m variiert werden. Dies ergibt m proportional 1/a (mit F als Proportionalitätsfaktor).

#### Benötigte Geräte

1	Sensor-CASSY CASSY Lab	524 010 524 200
1 1 od	BMW-Box Bewegungsaufnehmer	524 032 337 631
1	Timer S	524 074
1	Kombi-Lichtschranke	337 462
1	Kombi-Speichenrad	337 464
1	Luftkissenfahrbahn	337 501
1	Luftversorgung	337 53
1	Leistungsstellgerät	667 823
1	Verbindungskabel, 6-polig	501 16
1	Paar Kabel, 100 cm, rot und blau	501 46

### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

1 PC ab Windows 95/98/NT

Zunächst wird die Luftkissenfahrbahn in Betrieb genommen und die Versorgungsspannung des Haltemagneten so eingestellt, dass der Wagen gerade noch festgehalten wird. Der Wagen wird durch kleine Massestücke beschleunigt, die am Übertragungsfaden hängen. Der Übertragungsfaden wird um den Bewegungsaufnehmer geführt, der über die obere Buchse der BMW-Box am Sensor-CASSY angeschlossen ist.



Die kleinen Massestücke werden auch beschleunigt und zählen deshalb mit zur beschleunigten Masse m. Wenn die Masse m konstant gehalten werden soll, dann müssen die Massestücke, die gerade nicht am Faden hängen, dafür auf dem Wagen stecken.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden (m = konstant) oder
- Einstellungen laden (F = konstant)
- Maximal fahrbare Wegstrecke sA1 in Messbedingung des Messparameterfensters (erscheint mit **F5**) eingeben (aktuell **sA1 < 0,8** für 0,8 m)
- Eventuell Zeitintervall (aktuell 200 ms) im Messparameterfenster (erscheint mit **F5**) anpassen (längeres Intervall hat weniger Messwerte und weniger Streuungen in a(t) zur Folge)
- Gegebenenfalls Vorzeichen der Wegmessung invertieren (s ↔ -s in Einstellungen sa1)
- · Wagen vom Haltemagneten festhalten lassen
- Wegnullpunkt definieren ( $\rightarrow 0 \leftarrow$  in Einstellungen sA1)
- Messung mit F9 starten und am Ende wieder mit F9 stoppen. Eine Fehlmessung kann durch Letzte Messreihe löschen (rechte Maustaste auf Tabelle) wieder aus der Tabelle entfernt werden.
- Messung mit veränderten Parametern (andere beschleunigende Kraft oder andere beschleunigte Masse) wiederholen. Dazu Wegnullpunkt wieder neu definieren.

#### Auswertung

Zusätzlich zu den s(t)-Diagrammen werden die v(t)- und a(t)-Diagramme berechnet. Sie stehen auf den weiteren Darstellungsseiten zur Verfügung und brauchen nur angeklickt zu werden. Als Auswertungen bieten sich Parabel- und Geradenanpassung sowie Mittelwertberechnung an.

Zur Bestätigung der Newtonschen Bewegungsgleichung muss eine weitere Tabelle gefüllt werden, die auf der Newton-Seite der Darstellung schon vorbereitet ist. Nach der Bestimmung eines Beschleunigungswertes als Mittelwert eines a(t)- oder als Steigung eines v(t)-Diagramms kann dieser mit der Maus aus der Statuszeile in die Tabelle gezogen werden (Drag & Drop). Der Parameter Kraft F bzw. Masse m wird direkt über die Tastatur in die Tabelle eingetragen. Bereits während der Tabelleneingabe entsteht das gewünschte Diagramm. Die Achsen können nach Anklicken mit der rechten Maustaste leicht umgerechnet oder umskaliert werden (z. B. a  $\rightarrow$  1/a).

Als weitere Auswertung ist es möglich, durch zusätzliche Formeln z. B. die kinetische Energie mit der geleisteten Arbeit zu vergleichen. Die kinetische Energie ist


E = **0.5\*m\*v^2** (m als Zahlenwert eintippen)

und die geleistete Arbeit berechnet sich zu


W = F\*sA1 (F als Zahlenwert eintippen).



## Impuls- und Energieerhaltung (Stoß)

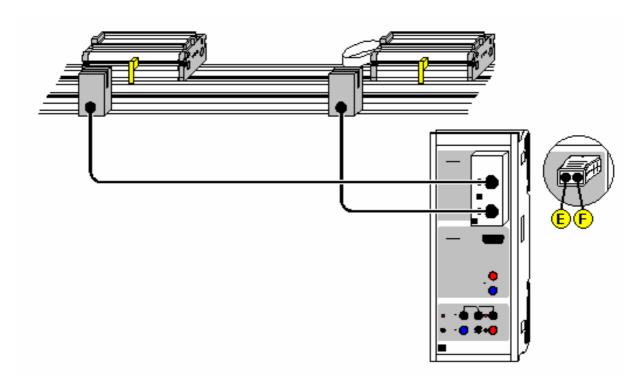

### Alternativ (mit Luftkissenfahrbahn):

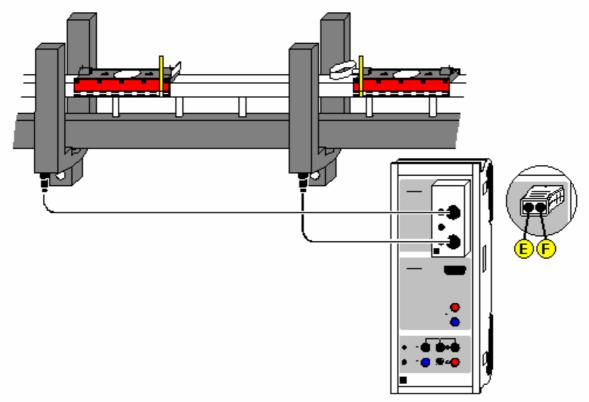



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden



### Versuchsbeschreibung

Auf einer Fahrbahn lassen sich die Geschwindigkeiten v zweier Wagen vor und nach ihrem Stoß aus den Verdunkelungszeiten zweier Lichtschranken ermitteln. Auf diese Weise lassen sich der Impulserhaltungssatz für den elastischen und unelastischen Stoß sowie der Energieerhaltungssatz für den elastischen Stoß bestätigen.

### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Timer-Box oder Timer S	524 034 oder 524 074
1	Fahrbahn	337 130
2	Fahrbahnwagen	337 110
1	Zusatzmassen	337 114
1	Stoßfeder für Fahrbahnwagen	337 112
2	Kombi-Lichtschranken	337 462
2	Verbindungskabel, 6-polig	501 16
1	PC ab Windows 95/98/NT	

### Alternativ (mit Luftkissenfahrbahn)

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Timer-Box oder Timer S	524 034 oder 524 074
1	Luftkissenfahrbahn	337 501
1	Fahrbahngestell	337 45
1	Luftversorgung	337 53
1	Leistungsstellgerät	667 823
2	Gabellichtschranken	337 46
2	Verbindungskabel, 6-polig	501 16
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Zunächst wird die Fahrbahn in Betrieb genommen und die beiden Lichtschranken (an den Eingängen E und F der Timer-Box) so positioniert, dass der Stoß der beiden Wagen zwischen den Lichtschranken stattfinden wird. Die Fahnen der beiden Wagen müssen beim Durchfahren der Lichtschranken diese unterbrechen.

### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Massen m1 und m2 in die Tabelle eintragen (Feld unter m1 und m2 anklicken)
- Wagenanordnung vor dem Stoß in Relation zu den Lichtschranken E und F angeben (Einstellungen v1, v2, v1´ oder v2´). Es gibt vier verschiedene Anordnungen:

beide Wagen außerhalb der Lichtschranken

linker Wagen dazwischen und rechter Wagen außerhalb

linker Wagen außerhalb und rechter Wagen dazwischen

beide Wagen dazwischen (Explosion)

- Fahnenbreite angeben (auch Einstellungen v1, v2, v1 oder v2)
- Stoß durchführen (falls bereits vor dem Stoß Geschwindigkeiten angezeigt werden, können diese durch  $\rightarrow 0 \leftarrow$  gelöscht werden) und darauf achten, dass keine überzähligen Impulse von den Lichtschranken registriert werden (z. B. durch Reflexion eines Wagens am Ende der Fahrbahn)
- Messung durch Stoß-Ende beenden (nach vier gemessenen Geschwindigkeiten beendet sich die Messung von selbst)
- Messwerte mit **F9** in die Tabelle für die Auswertung übernehmen oder mit  $\rightarrow 0 \leftarrow$  nächste Messung initialisieren

### Auswertung

Für die Impulse vor und nach dem Stoß, die Gesamtimpulse, Energien, Gesamtenergien sowie den Energieverlust sind eigene Tabellenseiten vorbereitet, in die die Messwerte mit F9 übernommen werden. Zur Anzeige sind die Tabellenseiten anzuklicken. Sollen diese Größen bereits unmittelbar nach dem



Stoß sichtbar sein, können die entsprechenden Anzeigeinstrumente geöffnet werden.

Außerdem können zusätzliche Formeln für einen Vergleich mit der Theorie definiert werden. Für den elastischen Stoß gilt


und für den unelastischen Stoß gilt

$$v1' = v2' = (m1*v1 + m2*v2) / (m1+m2).$$

### Tabelle zum Umrechnen zwischen angegebenen Einheiten und SI-Einheiten

Größe	SI-Einheit =	Faktor	· angegebene Einheit
Masse m	$kg \\ m/s \\ N \cdot s = kg \cdot m/s \\ J = kg \cdot m^2/s^2$	1	kg
Geschwindigkeit v		1	m/s
Impuls p		1000	mN·s
Energie E		1000	mJ

### Impulserhaltung durch Messung der Schwerpunktbewegung (Stoß)

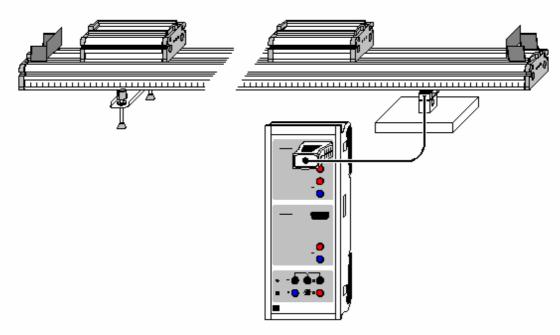



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

### Versuchsbeschreibung

Es wird die Schwerpunktbewegung während des elastischen oder inelastischen Stoßes zweier Wagen beobachtet und damit in beiden Fällen gezeigt, dass die Geschwindigkeit des Schwerpunkts während des gesamten Stoßprozesses konstant ist. Daraus folgt dann unmittelbar die Impulserhaltung während des gesamten Stoßprozesses.

### Messprinzip

Auf einer Fahrbahn lässt sich die Bewegung des Massenschwerpunkts s zweier stoßender Wagen der Massen m1 und m2 einfach durch die Auflagekraft F auf einen Kraftsensor bestimmen.

Betrachtet man nämlich die Summe der Drehmomente M um den linken Auflagepunkt, dann muss - da die Fahrbahn in Ruhe ist - diese Summe 0 sein, also

 $m1 \cdot g \cdot s1 + m2 \cdot g \cdot s2 + F \cdot d = 0$ ,

wobei d der Abstand der beiden Auflagepunkte ist. Der Massenschwerpunkt s ist nun gegeben durch

 $s = (m_1 \cdot s_1 + m_2 \cdot s_2) / (m_1 + m_2).$ 

Damit ergibt sich

 $s \cdot g/(m_1 + m_2) + F \cdot d = 0$ 

oder

 $s = -F \cdot d/(m_1+m_2)/g$ .

Es reicht also die Messung der Auflagekraft F aus, um eine Aussage über die Schwerpunktbewegung während eines Stoßes zu treffen. Ist s(t) eine Gerade, dann bedeutet dies, dass sich der Schwerpunkt mit einer konstanten Geschwindigkeit v bewegt, also

 $v = (m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2) / (m_1 + m_2) = p / (m_1 + m_2) = konstant,$ 

und damit der Gesamtimpuls p erhalten ist.



### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Kraftsensor S, ±50 N	524 042
1	Fahrbahn	337 130
2	Fahrbahnwagen	337 110
1	Paar Zusatzmassen	337 114
1	Stoßfeder	337 112
1	PC ab Windows 95/98/NT	

### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Der Kraftsensor S wird anstelle des rechten Ständers so unter die Fahrbahn gelegt, dass die Fahrbahn weiterhin waagerecht liegt oder falls gewünscht, weiterhin ein guter Reibungsausgleich gewährleistet ist. Da der Kraftsensor etwas kürzer als der Ständer ist, muss dazu der Kraftsensor etwas unterfüttert werden.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Massen m1 und m2 sowie Abstand d der beiden Auflagepunkte in die Anzeigeinstrumente eintragen (mit rechter Maustaste anklicken und als Parameter eingeben). Die Gesamtmasse eines Wagens ergibt sich aus der Summe der Wagenmasse (0,5 kg) sowie gegebenenfalls der Feder (0,01 kg) und einer Zusatzmasse (0,5 kg).
- In den Einstellungen FA1 die Kraft auf → 0 ← setzen; dabei wird auch der Schwerpunkt s auf 0
  gesetzt
- Messung mit F9 starten
- Elastischen oder inelastischen Stoß durchführen; Messung stoppt automatisch nach 5 s

### **Auswertung**

Die Darstellung **Standard** zeigt das F(t)-Diagramm und die Darstellung **Schwerpunkt** das dazugehörende s(t)-Diagramm (siehe Messprinzip).

Beide Diagramme zeigen einen linearen Verlauf, auch während der Zeit des eigentlichen Stoßes. Aus dem s(t)-Diagramm liefert eine Geradenanpassung die Geschwindigkeit v des Schwerpunkts und damit den konstanten Gesamtimpuls  $p(t) = (m_1 + m_2) \cdot v$ .

Aus der Impulserhaltung folgt wiederum, dass


```
0 = d/dt \; (p_1(t) + p_2(t)) = m_1 \cdot a_1(t) + m_2 \cdot a_2(t) = F_1(t) + F_2(t), also
```

$$F_1(t) = -F_2(t)$$
 ("Actio = Reactio").

Voraussetzung für diese Schlussfolgerung ist die Tatsache, dass der gesamte Verlauf von p(t) konstant ist, also auch während des Stoßvorganges. Alleine die Tatsache, dass der Gesamtimpuls vor dem Stoß der gleiche ist wie nach dem Stoß (z. B. durch Messung mit Lichtschranken) reicht dazu nicht aus.



### Actio=Reactio durch Messung der Beschleunigungen (Stoß)

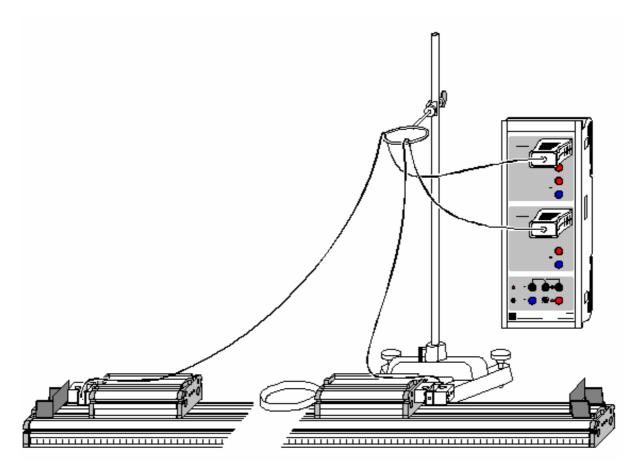



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

#### Versuchsbeschreibung

Es werden während eines elastischen Stoßes die Beschleunigungen  $a_1(t)$  und  $a_2(t)$  beider Wagen gemessen. Multipliziert man die gemessenen Beschleunigungen mit den Massen  $m_1$  und  $m_2$ , so erhält man die Kräfte  $F_1(t)$  und  $F_2(t)$ . Es wird bestätigt, dass während des Stoßes  $F_1(t) = -F_2(t)$ .

### Messprinzip

Wird ein Kraftsensor der Masse m so auf einem Wagen angebracht, dass die Hälfte des Sensors, an dem die Zuleitung befestigt ist, fest am Wagen montiert ist, hängt die andere Hälfte der Masse m/2 beweglich in der Luft. Beschleunigt man nun den Wagen, so übt diese Masse die Trägheitskraft F=m·a/2 aus. Diese Kraft wird vom Kraftsensor gemessen und automatisch in die Beschleunigung a umgerechnet.

Nach Angabe der beiden beschleunigten Massen (Wagen + Kraftsensor + Feder) berechnet die Software daraus die beiden Kräfte  $F_1(t) = m_1 \cdot a_1(t)$  und  $F_2(t) = m_2 \cdot a_2(t)$ .

### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
2	Kraftsensoren S, ±50 N	524 042
4	Kupplungsstecker	340 89
1	Fahrbahn	337 130



2	Fahrbahnwagen	337 110
1	Paar Zusatzmassen	337 114
1	Große Stoßfeder	337 473
1	Kleiner Stativfuß, V-förmig	300 02
1	Stativstange, 1 m	300 44
1	Muffe mit Ring	301 10
1	PC ab Windows 95/98/NT	

### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die beiden Kraftsensoren werden mit jeweils 2 Kupplungssteckern so an den Außenseiten der Wagen befestigen, dass die Zuleitungen starr am Wagen und nicht an der beweglichen Hälfte des Kraftsensors herausgeführt sind. Dabei die Zuleitungen so sichern, dass sie sich beim Stoß nicht im Kraftsensor bewegen (z. B. mit Tesafilm am Wagen sichern). Außerdem die Zuleitungen so führen, dass sie beim Stoß die Wagen nicht behindern.

Der Stoß wird mit der großen Stoßfeder abgefangen, die an einem der beiden Wagen auf der Innenseite befestigt ist. Es wurde bewusst die große Stoßfeder vorgeschlagen, da damit der Stoßvorgang etwas länger dauert und deshalb während des Stoßes mehr Messwerte aufgenommen werden können. Die Feder ist aber relativ weich und sollte beim Stoßvorgang nicht überlastet werden.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Massen m1 und m2 in die Anzeigeinstrumente eintragen (mit rechter Maustaste anklicken und als Parameter eingeben). Die Gesamtmasse eines Wagens ergibt sich aus der Summe der Wagenmasse (0,5 kg), der Masse des Kraftsensors (0,1 kg) sowie gegebenenfalls der Feder (0,01 kg) und einer Zusatzmasse (0,5 kg).
- In Einstellungen aA1 und aB1 die Beschleunigungen auf → 0 ← setzen
- Messung mit F9 starten
- Elastischen Stoß durchführen; Messung stoppt automatisch nach 5 s

### **Auswertung**

Die Darstellung **Standard** zeigt die beiden a(t)-Diagramme und die Darstellung **Kraft** die dazugehörenden F(t)-Diagramme (siehe Messprinzip).


In den F(t)-Diagrammen sieht man leicht, dass

$$F_1(t) = -F_2(t)$$
 ("Actio = Reactio").

Damit kann nun auch der Impulserhaltungssatz gefolgert werden, da die Integrale über beide Kurven (Impulsüberträge) zwischen zwei beliebigen Zeiten t1 und t2 immer vom Betrag gleich groß sind und ein entgegengesetztes Vorzeichen haben.



### Freier Fall mit g-Leiter

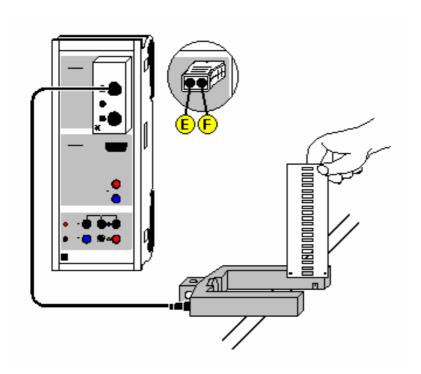



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

### Versuchsbeschreibung

Während eine Leiter durch eine Lichtschranke fällt, werden die Zeitpunkte der Verdunkelungen der Lichtschranke durch die Sprossen der Leiter registriert. Der bekannte Sprossenabstand zusammen mit der Zeitinformation liefert das s(t)-Diagramm des Falls. Daraus wird dann ein v(t)- und ein a(t)-Diagramm errechnet. Aus jedem der drei Diagramme kann die Erdbeschleunigung g ermittelt werden.

### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Timer-Box oder Timer S	524 034 oder 524 074
1	g-Leiter	529 034
1	Gabellichtschranke	337 46
1	Verbindungskabel, 6-polig	501 16
1	Satz Laststücke, 50 g, optional	342 61
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die g-Leiter wird so über die Lichtschranke gehalten, dass sie beim Fall mit ihren Sprossen die Lichtschranke unterbricht. Die Lichtschranke wird über den Eingang E der Timer-Box am Sensor-CASSY angeschlossen. Durch Anhängen von Laststücken an die Leiter kann die Massenunabhängigkeit der Erdbeschleunigung bestätigt werden. Außerdem kann durch Aufkleben kleiner Flügel bzw. durchsichtiger Folie der Luftwiderstand der g-Leiter vergrößert bzw. verringert werden.



### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Messung mit F9 starten
- Leiter so durch die Lichtschranke fallen lassen, dass alle 21 Sprossen die Lichtschranke passieren
- Messung stoppt automatisch 0,2 s nach Erkennen der ersten Sprosse oder nach 21 Sprossen. Eine Fehlmessung kann durch Letzte Messreihe löschen (rechte Maustaste auf Tabelle) wieder aus der Tabelle entfernt werden.
- Messung kann für andere Massen oder Fallhöhen wiederholt werden. Dazu wieder mit F9 starten.

#### **Auswertung**

Es ist jeweils eine Darstellung für Weg s(t), Geschwindigkeit v(t) und Beschleunigung a(t) vorbereitet, die angeklickt werden kann. Im s(t)-Diagramm kann durch eine Parabelanpassung und im v(t)-Diagramm kann durch eine Geradenanpassung und im a(t)-Diagramm durch eine Mittelwertbildung die Erdbeschleunigung g ermittelt werden. Die Zahlenwerte der Auswertung in der Statuszeile lassen sich durch **F6** groß darstellen.

Da beim Unterbrechen der Lichtschranke durch die ersten Sprosse die Leiter eine Anfangsgeschwindigkeit hatte, ist der Scheitelpunkt der s(t)-Parabel nicht zu sehen und geht die v(t)-Gerade nicht durch den Ursprung. Zur besseren Veranschaulichung können aber z. B. die t- und s-Achse mit der Maus so verschoben werden, dass nach einer Parabelanpassung auch deren Scheitelpunkt sichtbar wird.

### **Anmerkung**

Die einzelnen Geschwindigkeitswerte v(i) werden als

$$v(i) = (s(i+1) - s(i-1)) / (t(i+1) - t(i-1))$$


errechnet. Dies ist die Durchschnittsgeschwindigkeit im Zeitintervall [t(i-1),t(i+1)] und in erster Näherung die Momentangeschwindigkeit zum Zeitpunkt  $\frac{1}{2}(t(i-1)+t(i+1))$ , also nicht zum Zeitpunkt t(i). Gleiches gilt für die Beschleunigungswerte

$$a(i) = (v(i+1) - v(i-1)) / (\frac{1}{2}(t(i+2) - t(i-2))).$$

Dies wurde aber bei der v(t)- und a(t)-Darstellung bereits durch eine geeignet umgerechnete Zeitachse berücksichtigt.



# Freier Fall mit g-Leiter (mit Modellbildung)

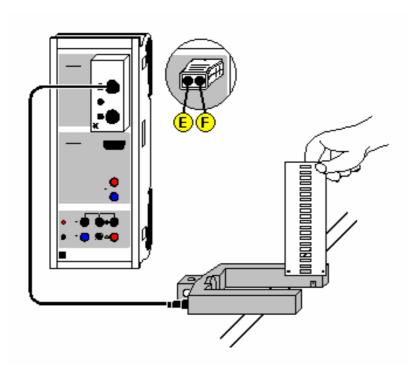



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

# Versuchsbeschreibung

Während eine Leiter durch eine Lichtschranke fällt, werden die Zeitpunkte der Verdunkelungen der Lichtschranke durch die Sprossen der Leiter registriert. Der bekannte Sprossenabstand zusammen mit der Zeitinformation liefert das s(t)-Diagramm des Falls.

Als Ergänzung zum vorangegangenen Versuch wird hier die gemessene Bewegung mit der Bewegung verglichen, die durch die Gleichung

$$s'' = a = g$$

beschrieben wird.

# **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Timer-Box oder Timer S	524 034 oder 524 074
1	g-Leiter	529 034
1	Gabellichtschranke	337 46
1	Verbindungskabel, 6-polig	501 16
1	Satz Laststücke, 50 g, optional	342 61

1 PC ab Windows 95/98/NT

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die g-Leiter wird so über die Lichtschranke gehalten, dass sie beim Fall mit ihren Sprossen die Lichtschranke unterbricht. Die Lichtschranke wird über den Eingang E der Timer-Box am Sensor-CASSY angeschlossen.



# Versuchsdurchführung


- Einstellungen laden
- Messung mit F9 starten
- Leiter so durch die Lichtschranke fallen lassen, dass alle 21 Sprossen die Lichtschranke passieren
- Messung stoppt automatisch 0,2 s nach Erkennen der ersten Sprosse oder nach 21 Sprossen. Eine Fehlmessung kann durch Letzte Messreihe löschen (rechte Maustaste auf Tabelle) wieder aus der Tabelle entfernt werden.
- Messung kann für andere Massen oder Fallhöhen wiederholt werden. Dazu wieder mit F9 starten.

# Modellbildung

Im vorliegenden Beispiel wurden die beiden Anfangsbedingungen s(t=0)=0 und v(t=0)=v0 sowie die Beschleunigung g=9,81 m/s² gewählt, wobei g und vo durch Ziehen am Zeiger des entsprechenden Anzeigeinstruments (oder durch Linksklick oder nach Rechtsklick) so verändert werden können, dass das Modell mit der Messung überein stimmt.





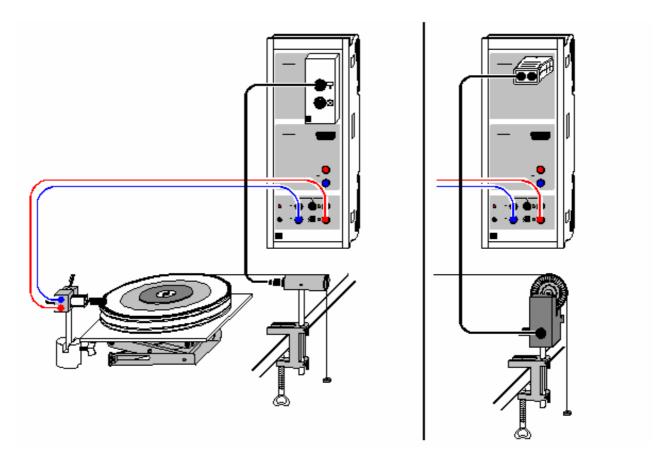

- Beispiel laden (J = konstant)
- Beispiel laden (M = konstant)

# Versuchsbeschreibung

Ein rotierender Körper mit konstantem Trägheitsmoment J wird mit unterschiedlichen Drehmomenten M beschleunigt. Die ermittelten Winkelbeschleunigungen  $\alpha$  in Abhängigkeit von den beschleunigenden Drehmomenten M aufgetragen ergibt M proportional  $\alpha$  (mit J als Proportionalitätsfaktor) und bestätigt damit die Newtonsche Bewegungsgleichung M=J· $\alpha$ .

Alternativ kann auch das beschleunigende Drehmoment M konstant gehalten und die Trägheitsmoment J variiert werden. Dies ergibt J proportional  $1/\alpha$  (mit M als Proportionalitätsfaktor).

### **Benötigte Geräte**

1 1	Sensor-CASSY CASSY Lab	524 010 524 200
1	BMW-Box Bewegungsaufnehmer Jer	524 032 337 631
	· ·	E04.074
1	Timer S	524 074
1	Kombi-Lichtschranke	337 462
1	Kombi-Speichenrad	337 464
1	Drehsystem	347 23
1	Verbindungskabel, 6-police	501 16
1	Haltemagnet	336 21
1	Stativstange, 25 cm	300 41
1	Sockel	300 11
1	Tischklemme, einfach	301 07
1	Laborbov II	300 76



- 1 Paar Kabel, 100 cm, rot und blau 501 46
- 1 Büroklammer
- 1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Der Übertragungsfaden wird an der Fahne des Drehsystems (r = 10 cm) oder an einem der Stifte der Zusatzscheibe (r = 5 cm, 2,5 cm) befestigt und läuft über den Bewegungsaufnehmer ab, der über die obere Buchse der BMW-Box am Sensor-CASSY angeschlossen ist. Der Haltemagnet verhindert den Start der Rotation, indem er in die Nähe der Büroklammer gestellt wird, die auf die Fahne des Drehsystems geklemmt ist.

Als beschleunigende Kraft dienen z. B. 3 kleine angehängte Massestücke à 1 g (F = 0.0294 N). Die unterschiedlichen Drehmomente bei konstantem Trägheitsmoment werden durch die unterschiedlichen Abrollradien erzielt ( $M = r \cdot F = 2.94$  mNm, 1,47 mNm, 0,73 mNm). Alternativ werden die unterschiedlichen Trägheitsmomente bei konstantem Drehmoment durch Zusatzscheiben realisiert.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden (J = konstant) oder
- Einstellungen laden (M = konstant)
- Maximal abrollbaren Winkel βA1 in Messbedingung des Messparameterfensters (erscheint mit F5) anpassen (aktuell &bA1 < 6 für 6 Radien, &b steht für β)</li>
- Eventuell Zeitintervall (aktuell 500 ms) im Messparameterfenster (erscheint mit **F5**) anpassen (längeres Intervall hat weniger Messwerte und weniger Streuungen in α(t) zur Folge)
- Gegebenenfalls Vorzeichen der Winkelmessung invertieren (s ↔ -s in Einstellungen βA1)
- Rotierende Scheibe vom Haltemagneten festhalten lassen
- Aktuellen Abrollradius und Wegnullpunkt definieren (beides in Einstellungen βΑ1)
- Messung mit F9 starten und am Ende wieder mit F9 stoppen. Eine Fehlmessung kann durch Letzte Messreihe löschen (rechte Maustaste auf Tabelle) wieder aus der Tabelle entfernt werden.
- Messung mit veränderten Parametern (anderes beschleunigendes Drehmoment oder anderes beschleunigtes Trägheitsmoment) wiederholen. Dazu Abrollradius und Wegnullpunkt wieder neu definieren.

#### Auswertung

Zusätzlich zu den  $\beta(t)$ -Diagrammen werden die  $\omega(t)$ - und  $\alpha(t)$ -Diagramme berechnet. Sie stehen auf den weiteren Darstellungsseiten zur Verfügung und brauchen nur angeklickt zu werden. Als Auswertungen bieten sich Parabel- und Geradenanpassung sowie Mittelwertberechnung an.

Zur Bestätigung der Newtonschen Bewegungsgleichung muss eine weitere Tabelle gefüllt werden, die auf der Newton-Seite der Darstellung schon vorbereitet ist. Nach der Bestimmung eines Winkelbeschleunigungswertes als Mittelwert eines  $\alpha(t)$ - oder als Steigung eines  $\omega(t)$ -Diagramms kann dieser mit der Maus aus der Statuszeile in die Tabelle gezogen werden (Drag & Drop). Der Parameter Drehmoment M bzw. Trägheitsmoment J wird direkt über die Tastatur in die Tabelle eingetragen. Bereits während der Tabelleneingabe entsteht das gewünschte Diagramm. Die Achsen können nach Anklicken mit der rechten Maustaste leicht umgerechnet oder umskaliert werden (z. B.  $\alpha \to 1/\alpha$ ).

Als weitere Auswertung ist es möglich, durch zusätzliche Formeln z.B. die Rotationsenergie mit der geleisteten Arbeit zu vergleichen. Die Rotationsenergie ist


 $E = 0.5*J*&w^2$  (J als Zahlenwert eintippen, &w steht für ω)

und die geleistete Arbeit berechnet sich zu

W = M\*&bA1 (M als Zahlenwert eintippen, &b steht für  $\beta$ ).



# **Drehimpuls- und Energieerhaltung (Drehstoß)**

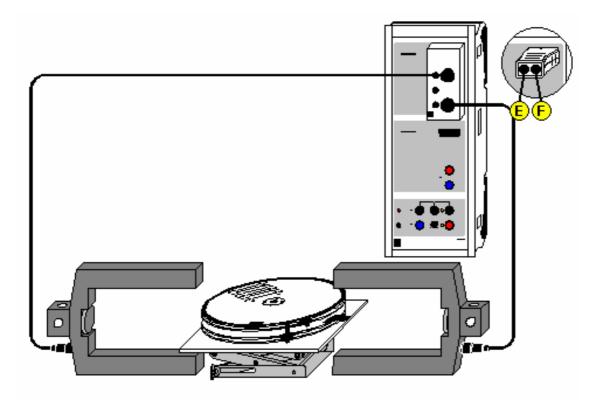



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

#### Versuchsbeschreibung

Mit dem Drehsystem lassen sich die Winkelgeschwindigkeiten  $\omega$  zweier Körper vor und nach ihrem Stoß aus den Verdunkelungszeiten zweier Lichtschranken ermitteln. Auf diese Weise lassen sich der Drehimpulserhaltungssatz für den elastischen und unelastischen Drehstoß sowie der Energieerhaltungssatz für den elastischen Drehstoß bestätigen.

### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Timer-Box oder Timer S	524 034 oder 524 074
1	Drehsystem	347 23
2	Gabellichtschranken	337 46
2	Verbindungskabel, 6-polig	501 16
1	Laborboy II	300 76
1	PC ab Windows 95/98/NT	

### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Zunächst werden das Drehsystem und die beiden Lichtschranken (an den Eingängen E und F der Timer-Box) so positioniert, dass sich die Fahnen der beiden rotierenden Körper beim Drehstoß **zwischen** den beiden Lichtschranken befinden werden. Die Fahnen der beiden Körper müssen beim Durchfahren der Lichtschranken diese unterbrechen.

114 CASSY Lab

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Trägheitsmomente J1 und J2 in die Tabelle eintragen (Feld unter J1 und J2 anklicken)
- Anordnung der Fahnen vor dem Stoß in Relation zu den Lichtschranken E und F angeben (<u>Einstellungen</u> ω1, ω2, ω1′ oder ω2′). Es gibt vier verschiedene Anordnungen: beide Fahnen außerhalb der Lichtschranken

linke Fahne dazwischen und rechte Fahne außerhalb

linke Fahne außerhalb und rechte Fahne dazwischen

beide Fahnen dazwischen (Explosion)

- Fahnenbreite und Radius angeben (auch Einstellungen ω1, ω2, ω1 oder ω2)
- Stoß durchführen (falls bereits vor dem Stoß Winkelgeschwindigkeiten angezeigt werden, können diese durch → 0 ← gelöscht werden) und darauf achten, dass keine überzähligen Impulse von den Lichtschranken registriert werden (z. B. durch Reflexion eines rotierenden Körpers)
- Messung durch Stoß-Ende beenden (nach vier gemessenen Winkelgeschwindigkeiten beendet sich die Messung von selbst)
- Messwerte mit F9 in die Tabelle für die Auswertung übernehmen oder mit → 0 ← nächste Messung initialisieren

#### **Auswertung**

Für die Drehimpulse vor und nach dem Stoß, die Gesamtdrehimpulse, Energien, Gesamtenergien sowie den Energieverlust sind eigene Tabellenseiten vorbereitet, in welche die Messwerte mit **F9** übernommen werden. Zur Anzeige sind die Tabellenseiten anzuklicken. Sollen diese Größen bereits unmittelbar nach dem Stoß sichtbar sein, können die entsprechenden Anzeigeinstrumente geöffnet werden.

Außerdem können zusätzliche Formeln für einen Vergleich mit der Theorie definiert werden. Für den elastischen Drehstoß gilt

```
&w1' = (2*J2*&w2 + (J1-J2)*&w1) / (J1+J2) \\ &w2' = (2*J1*&w1 + (J2-J1)*&w2) / (J1+J2)
```

und für den unelastischen Drehstoß gilt

$$&w1' = &w2' = (J1*&w1 + J2*&w2) / (J1+J2).$$


In allen Formeln ist statt dem griechischen ω das lateinische w mit vorangestelltem & einzugeben.

# Tabelle zum Umrechnen zwischen angegebenen Einheiten und SI-Einheiten

Größe	SI-Einheit =	Faktor	· angegebene Einheit
Trägheitsmoment J	$kg \cdot m^2$	1000	g·m²
Winkelgeschwindigkeit ω	rad/s	1	rad/s
Drehimpuls L	$N \cdot s \cdot m = kg \cdot m^2/s$	1000	mJ·s
Energie E	$J = kg \cdot m^2/s^2$	1000	mJ



# Zentrifugalkraft (Fliehkraft-Dreharm)

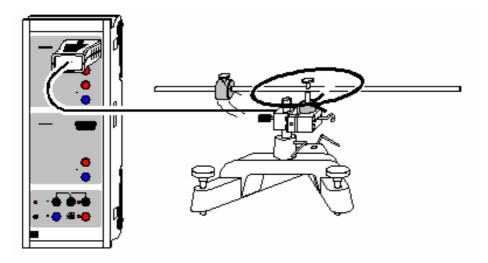



auch für Pocket-CASSY geeignet

- Beispiel laden (einzelne Messung)
- $\blacksquare$  Beispiel laden (r = 190 mm, m und  $\omega$  variabel)
- $\blacksquare$  Beispiel laden (m = 200 g, r und  $\omega$  variabel)

#### Versuchsbeschreibung

Die auf eine rotierende Masse m wirkende Zentrifugalkraft F wird beschrieben durch  $F = m \cdot \omega^2 \cdot r$  ( $\omega$ : Winkelgeschwindigkeit, r: Abstand des Masseschwerpunkts von der Drehachse). Dieses Gesetz wird durch Variation der drei Parameter m,  $\omega$  und r bestätigt.

Die Zentrifugalkraft F kann durch den Kraftsensor S, ±50 N gemessen werden. Da er Kräfte nahezu nur in einer Richtung misst, ergibt sich ein sinusförmiger Kraftverlauf, dessen Minima und Maxima der radial gerichteten Zentrifugalkraft entsprechen.

### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Kraftsensor S, ±50 N	524 042
1	Fliehkraft-Dreharm	347 211
1	Großer Stativfuß, V-förmig	300 01
1	Stativstange, 10 cm	300 40
1	PC ab Windows 95/98/NT	

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Der Kraftsensor wird horizontal liegend mit der Stativstange möglichst kurz in dem Stativfuß befestigt. Alle Schrauben fest anziehen! Anschließend wird der Stativfuß mit seinen Stellschrauben horizontal ausgerichtet, sodass der Fliehkraft-Dreharm möglichst wenig pendelt und auch bei geringer Drehfrequenz mit konstanter Geschwindigkeit dreht.

# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Massestücke im definierten Abstand (r wird zwischen der Drehachse und der Mitte des Massestückes bestimmt) auf dem Dreharm festschrauben.
- In Einstellungen Kraft FA1 den Kraftsensor auf → 0 ← setzen.
- Dreharm nahe der Drehachse mit dem Finger in Rotation versetzen und bei Erreichen der Kraft von etwa 5 N Messaufzeichnung mit F9 starten und alle 5 bis 10 s wiederholen bis die gemessene Kraft



etwa 1 N beträgt. Man erhält eine Schar von Sinuskurven, deren Amplituden kleiner und deren Perioden länger werden. Durch die Triggereinstellung des Beispiels beginnen alle Kurven im Koordinatenursprung.

#### Auswertung

Für jede Sinuskurve werden die Periodendauer T und die minimale und maximale Kraft F<sub>min</sub> und F<sub>max</sub> der ersten Periode durch Anklicken mit der Maus und Ablesen des Tabellenwertes bestimmt und in die Darstellung **Eingabe** (mit der Maus anklicken) übertragen. Die Berücksichtigung von F<sub>min</sub> und F<sub>max</sub> gleicht eventuelle Ungenauigkeiten bei der Aufstellung oder der Nullpunkteinstellung des Kraftsensors aus.

In der Darstellung **Zentrifugalkraft** wird das Ergebnis dieser Auswertung automatisch aufgetragen. Die dort dargestellte Zentrifugalkraft  $F = (F_{max}-F_{min})/2$  und die Winkelgeschwindigkeit  $\omega=2\pi/T$  ist aus den angegebenen Werten berechnet. Sehr schön ist die Proportionalität  $F \sim \omega^2$  zu sehen.

Für die Bestätigung der Proportionalitäten  $F \sim m$  und  $F \sim r$  müssen die Messungen mit anderen Massen und Radien wiederholt und dann gemeinsam ausgewertet werden. Dabei ist es sinnvoll, jede Messung einzeln auszuwerten und in einer separaten Datei abzuspeichern, da mehrere Messungen in einer grafischen Darstellung zur Auswertung unübersichtlich werden. Mehrere ausgewertete Messungen können anschließend zusammen in eine gemeinsame Darstellung geladen werden.


#### Tipp

Da für eine vollständige Auswertung das Experiment mit anderen Massen m und Radien r wiederholt werden muss, ist die manuelle Auswertung aller Messungen sehr mühsam. Die Periodendauer T und die beiden Kräfte Fmin und Fmax können aber auch automatisch bestimmt werden. Dazu müssen nur die Anzeigeinstrumente T', F'min, und F'max der oberen Zeile geöffnet werden. Direkt nach einer einzelnen Messung können dann die dort berechneten Werte direkt mit der Maus in die Darstellung **Eingabe** verschoben werden (Drag & Drop). Solange sich der Dreharm noch dreht und die gemessenen Kraft noch größer als etwa 1 N ist, wird dies dann für die abnehmenden Winkelgeschwindigkeiten  $\omega$  zügig wiederholt.





# Zentrifugalkraft (Fliehkraftgerät)

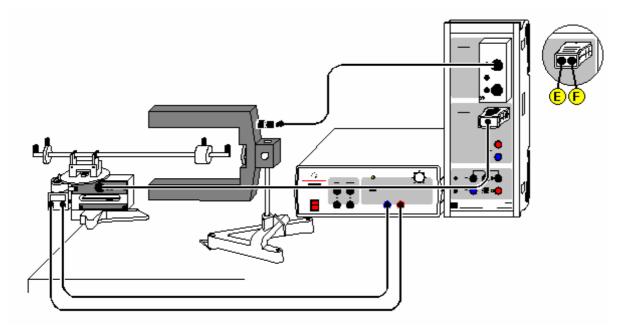



auch für Pocket-CASSY geeignet

- $\blacksquare$  Beispiel laden (r = 0,25 m, m und  $\omega$  variabel)
- $\blacksquare$  Beispiel laden (m = 0,1 kg, r und  $\omega$  variabel)

# Versuchsbeschreibung

Mit dem Fliehkraftgerät lässt sich die Zentrifugalkraft F in Abhängigkeit von der rotierenden Masse m, dem Abstand r der Masse vom Drehpunkt und der Winkelgeschwindigkeit  $\omega$  experimentell untersuchen. Damit kann die Beziehung für die Zentrifugalkraft F =  $m \cdot \omega^2 \cdot r$  bestätigt werden.

Beim Fliehkraftgerät wird die bei Rotation auf die Masse m wirkende Kraft F über einen gelenkig gelagerten Hebel und einen in der Drehachse angebrachten Druckstift auf ein Stück Federstahl übertragen, dessen Auslenkung mit einem DMS (Dehnungsmessstreifen) in Brückenschaltung elektrisch gemessen wird. Im benutzten Messbereich ist die Verformung des Federstahls elastisch und damit proportional zur Kraft F.

## **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Timer-Box oder Timer S	524 034 oder 524 074
1	Fliehkraftgerät S	524 068
1	Netzgerät	521 49
1	Gabellichtschranke	337 46
1	Verbindungskabel, 6-polig	501 16
1	Tischklemme	301 06
1	Kleiner Stativfuß, V-förmig	300 02
1	Stativstange, 10 cm	300 40
1	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501 45
1	PC ab Windows 95/98/NT	

Vorhandene Fliehkraftgeräte (347 21) können mit dem Fliehkraftadapter (524 0681) nachgerüstet werden. Diese Kombination unterscheidet sich in der Handhabung und in den Messergebnissen nicht vom Fliehkraftgerät S (524 068). Vor dem ersten Gebrauch des Fliehkraftgerätes (347 21) mit dem Fliehkraftadapter (524 0681) sollten jedoch Nullpunkt und Verstärkung am Fliehkraftgerät gemäß Gebrauchsanleitung zum Fliehkraftadapter einmal eingestellt werden.



#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Zunächst wird das Fliehkraftgerät mit der Tischklemme am Tisch befestigt. Die Lichtschranke wird unter Verwendung der Stativstange und des kleinen Stativfußes so aufgestellt, dass der Dreharm durch die beiden Schenkel der Lichtschranke frei rotieren kann; die Unterbrechung des Lichtes sollte nicht mit dem Massestück erfolgen. Das Fliehkraftgerät wird am Eingang B, die Lichtschranke unter Verwendung des 6-poligen Kabels an die Timer-Box auf Eingang A des Sensor-CASSYs angeschlossen. Das Netzgerät wird über zwei Verbindungsleitungen mit dem Antriebsmotor des Fliehkraftgerätes verbunden. Die maximale Spannung zum Antrieb des Motors sollte so gewählt werden, dass der Kraftmessbereich von 15 N nicht überschritten wird.

### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden (r = konstant) oder
- Einstellungen laden (m = konstant)
- Kraftanzeige bei nicht rotierendem Dreharm auf 0 setzen. Dazu in Einstellungen Kraft FB1 (rechte Maustaste) das Fliehkraftgerät auf → 0 ← setzen.
- Korrekturmasse auf dem kurzen Arm des Gerätes so justieren, dass bei einer Messung ohne Zusatzmasse m aber mit Sicherheitsschraube keine Kraft F gemessen wird.
- ullet Angefangen von kleinen Winkelgeschwindigkeiten  $\omega$  manuell mit **F9** die gemessene Kraft in der Tabelle abspeichern
- Messung mit höheren Winkelgeschwindigkeiten ω wiederholen
- Nach Aufnahme einer Messreihe die Messungen mit anderen Massen m (r = konstant) oder Radien r (m = konstant) wiederholen. Dazu in den Messparametern (F5) neue Messreihe anhängen wählen und wieder mit kleinen Winkelgeschwindigkeiten beginnen.


#### **Auswertung**

Jede Messreihe für sich bestätigt leicht durch eine Geradenanpassung die Proportionalität zwischen der Kraft F und  $\omega^2$ . Möchte man nun auch die anderen beiden Proportionalitäten zwischen F und m ( $\omega$ ,r konstant) und F und r ( $\omega$ ,m konstant) bestätigen, müssen zunächst die Kräfte F für konstante Winkelgeschwindigkeiten  $\omega$  ermittelt werden. Dazu zeichnet man bei einem Wert von  $\omega^2$  eine senkrechte Line in das Diagramm und liest die Koordinaten der Schnittpunkte mit den F( $\omega^2$ )-Geraden ab (Koordinatenanzeige einschalten). Diese Koordinaten werden dann manuell in die vorbereitete zweite Darstellung F(m) bzw. F(r) eingetragen (Tabellenfeld mit der Maus anklicken). Dort zeigt sich schließlich die gewünschte Proportionalität.

Durch Ermittelung der Proportionalitätsfaktoren bestätigt man  $F = m \cdot \omega^2 \cdot r$ .

# (D)

# Harmonische Schwingungen eines Federpendels

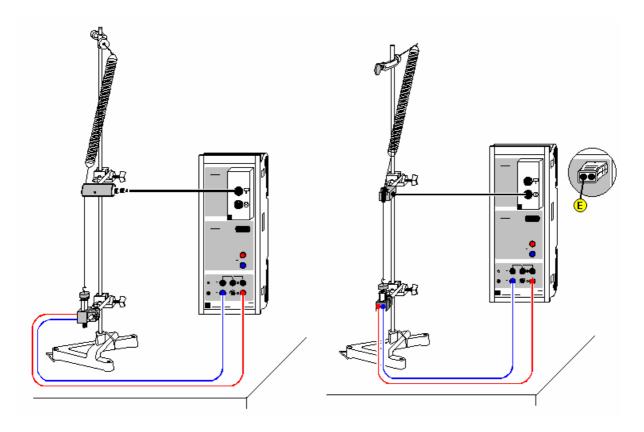

# ■ Beispiel laden

# Versuchsbeschreibung

Es werden die harmonischen Schwingungen eines Federpendels als Funktion der Zeit t aufgenommen. Zur Auswertung werden Weg s, Geschwindigkeit v und Beschleunigung a miteinander verglichen. Sie können wahlweise als Funktion der Zeit t oder in Form eines Phasendiagramms dargestellt werden.

# Benötigte Geräte

1	Sensor-CASSY CASSY Lab	524 010 524 200
1	BMW-Box	524 032
1	Bewegungsaufnehmer	337 631
od	· <del>-</del> ·	
1	Timer S	524 074
1	Kombi-Lichtschranke	337 462
1	Kombi-Speichenrad	337 464
1	Verbindungskabel, 6-polig	501 16
1	Schraubenfeder, 3 N/m	352 10
1	Satz Laststücke, 50 g	342 61
1	Haltemagnet	336 21
1	Großer Stativfuß, V-förmig	300 01
1	Stativstange, 25 cm	300 41
1	Stativstange, 150 cm	300 46
2	Leybold-Muffen	301 01
1	Muffe mit Haken	301 08
1	Angelschnur, 10 m	309 48
1	Paar Kabel, 100 cm, rot und blau	501 46
1	PC ab Windows 95/98/NT	



#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Der Faden des Federpendels wird so um die Umlenkrolle des Bewegungsaufnehmers geführt, dass die Schwingung des Pendels schlupffrei auf den Bewegungsaufnehmer übertragen wird, der an die obere Buchse der BMW-Box angeschlossen ist. Der Haltemagnet sorgt für einen definierten Start der Schwingung, indem er das Massestück des Pendels vor dem Start der Messwertaufnahme im unteren Umkehrpunkt der Schwingung festhält.

Weiterführend können die Luftreibung (z. B. durch ein Stück Pappe am Massestück) oder die Masse des Pendels verändert werden.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Eventuell Zeitintervall im Messparameterfenster (erscheint mit **F5**) anpassen (kürzeres Zeitintervall ermöglicht mehr Messwerte und ein glätteres s(t)- und v(s)-Diagramm, längeres Intervall hat weniger Messwerte und weniger Streuungen in a(t) zur Folge)
- Gegebenenfalls Vorzeichen der Wegmessung invertieren (s ↔ -s in Einstellungen sA1)
- Wegnullpunkt in Gleichgewichtslage des Pendels definieren (→ 0 ← in Einstellungen sA1)
- Pendel etwa 10 cm auslenken und vom Haltemagneten festhalten lassen
- Messung mit F9 starten und am Ende wieder mit F9 stoppen
- Beim Wiederholen der Messung vorher wieder Wegnullpunkt in Gleichgewichtslage überprüfen.

#### **Auswertung**


Neben der Wegdarstellung sind bereits eine Übersichtsdarstellung mit s(t), v(t) und a(t) und ein Phasendiagramm v(s) vorbereitet. Die verschiedenen Darstellungen können durch Anklicken ausgewählt werden.

Sehr schön lassen sich die Phasenbeziehungen und die Dämpfung erkennen.

#### **Anmerkung**

Die gezeichneten Kurvenformen hängen stark vom gewählten Zeitintervall ab. Das Zeitintervall kann nur ein Kompromiss sein zwischen dichter Messwertfolge, gut ausgeprägten s(t)-Minima und Maxima (kleineres Zeitintervall) sowie kleinen Fehlern im v(t)- und a(t)-Diagramm (größeres Zeitintervall).

# Abhängigkeit der Schwingungsdauer eines Federpendels von der schwingenden Masse

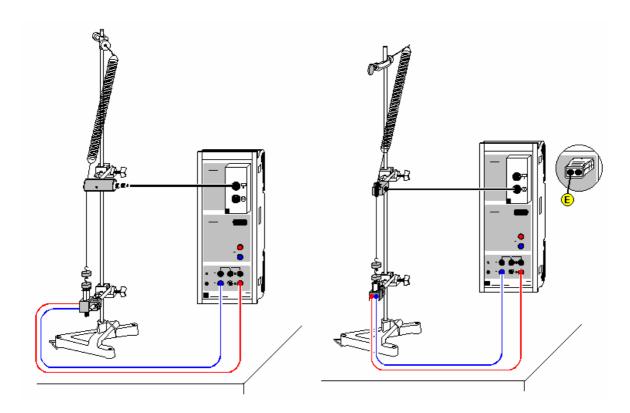

# ■ Beispiel laden

# Versuchsbeschreibung

Es werden die harmonischen Schwingungen eines Federpendels als Funktion der Zeit t für verschiedene angehängte Massen aufgenommen. Aus dem Weg-Zeit-Diagramm s(t) wird die Schwingungsdauer T bestimmt. Die Darstellung von  $T^2$  als Funktion der angehängten Masse m bestätigt den Zusammenhang  $T^2 = (2\pi)^2 \cdot m/D$  (D = Federkonstante).

# **Benötigte Geräte**

Sensor-CASSY	524 010
CASSY Lab	524 200
BMW-Box	524 032
Bewegungsaufnehmer	337 631
ler	
Timer S	524 074
Kombi-Lichtschranke	337 462
Kombi-Speichenrad	337 464
Verbindungskabel, 6-polig	501 16
Schraubenfeder, 3 N/m	352 10
Satz 12 Laststücke, je 50 g	342 61
Haltemagnet	336 21
Großer Stativfuß, V-förmig	300 01
Stativstange, 25 cm	300 41
Stativstange, 150 cm	300 46
Leybold-Muffen	301 01
Muffe mit Haken	301 08
Angelschnur, 10 m	309 48
Paar Kabel, 100 cm, rot und blau	501 46
PC ab Windows 95/98/NT	
	BMW-Box Bewegungsaufnehmer ler Timer S Kombi-Lichtschranke Kombi-Speichenrad  Verbindungskabel, 6-polig Schraubenfeder, 3 N/m Satz 12 Laststücke, je 50 g Haltemagnet Großer Stativfuß, V-förmig Stativstange, 25 cm Stativstange, 150 cm Leybold-Muffen Muffe mit Haken Angelschnur, 10 m Paar Kabel, 100 cm, rot und blau



#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

- Stativstange im Stativfuß einspannen und Muffe mit Haken am oberen Ende der Stativstange befestigen.
- Feder am Haken einhängen und über ein Fadenstück von ca. 45 cm Länge mit gewünschter Anzahl von Massenstücken auslenken.
- Muffe mit Bewegungsaufnehmer etwa in der Mitte des Fadenstücks befestigen.
- Fadenstück so um die Umlenkrolle des Bewegungsaufnehmers führen, dass die Schwingungen des Pendels schlupffrei auf den Bewegungsaufnehmer übertragen werden. Die Federachse sollte dabei nicht zu sehr von der Vertikalen abweichen, um die Dämpfung der Schwingung gering zu halten.
- Haltemagnet im unteren Umkehrpunkt der Schwingung des Federpendels positionieren.
- Bewegungsaufnehmer über die obere Buchse der BMW-Box an den Eingang A des Sensor CASSYs anschließen.
- Haltemagnet an den Ausgang S des Sensor-CASSYs anschließen.

#### Experimentierhinweise

Der Haltemagnet sorgt für einen definierten Start der Schwingung, indem er die jeweils angehängten Massestücke vor dem Start der Messwertaufnahme im unteren Umkehrpunkt der Schwingung festhält. Der Bewegungsaufnehmer und der Haltemagnet müssen je nach Anzahl der angehängten Massestücke in Bezug zur Position des Hakens vertikal verschoben werden. Idealerweise befindet sich der Bewegungsaufnehmer ungefähr in der Mitte des Fadens, wenn sich das Pendel in der Gleichgewichtslage befindet.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Gewünschte Anzahl von Massestücken anhängen und die Höhe des Haltemagneten und des Bewegungsaufnehmers einstellen.
- Wegnullpunkt sA1 in Gleichgewichtslage des Pendels kalibrieren dazu in den Einstellungen sA1 die Schaltfläche → 0 ← anklicken.
- Gegebenenfalls Vorzeichen der Wegmessung invertieren (Schaltfläche s ↔ -s in den Einstellungen sA1)
- Pendel auslenken und vom Haltemagnet festhalten lassen.
- Messung mit F9 starten.
- Zum Wiederholen einer Messung vor Beginn der Datenaufnahme den Wegnullpunkt in der Gleichgewichtslage des Pendels überprüfen.

# **Auswertung**

Für jedes Weg-Zeit-Diagramm wird mit der rechten Maustaste durch Differenz messen (oder **Alt+D**) und anschließendem Anklicken zweier entsprechender Nulldurchgänge mit der linken Maustaste die Schwingungsdauer T bestimmt. Der dann in der Statuszeile angezeigte Wert der Schwingungsdauer kann mit Hilfe der Maus in die vorbereitete Darstellung **Eingabe** übertragen werden (Drag & Drop). Zusätzlich muss die zu T zugehörende Masse m in die Tabelle eingetragen werden. Durch Anpassung einer Geraden in der Darstellung **Auswertung** wird in einem weiteren Schritt die Proportionalität T² ~ m bestätigt.


Aus der Steigung der Geraden kann die Federkonstante D bestimmt werden. Man beachte, dass die Gerade keine Ursprungsgerade ist. Zur Beschreibung dieses experimentellen Ergebnisses muss auch die Federmasse berücksichtigt werden.

# Tipp

Da für eine vollständige Auswertung das Experiment für unterschiedliche Massen m wiederholt werden muss, müsste die Schwingungsdauer T jedes Mal manuell bestimmt werden. Die Schwingungsdauer T kann alternativ auch automatisch bestimmt werden. Dazu muss nur das Anzeigeinstrument T' der oberen Zeile geöffnet werden. Nach der Aufnahme einer Schwingung kann dann der dort angezeigte Wert mit der Maus direkt in die vorbereitete Tabelle der Darstellung **Eingabe** kopiert werden (Drag & Drop).



# Schwingungen eines Federpendels (mit Modellbildung)

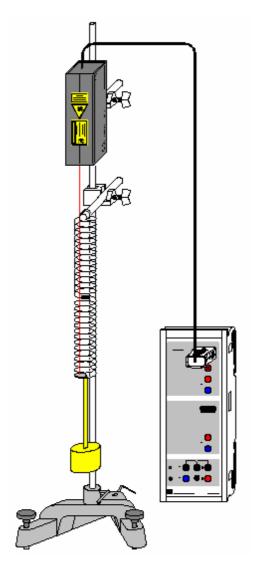



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

## **Sicherheitshinweis**

Sicherheitshinweise aus der Gebrauchsanweisung des Laser-Bewegungssensors S beachten.

# Versuchsbeschreibung

Ein Federpendel wird angeregt und die freie Schwingung für unterschiedliche Massen m aufgezeichnet.

Als Ergänzung zur rein messtechnischen Untersuchung der Schwingungen eines Federpendels wird hier zusätzlich die gemessene Schwingung mit der Schwingung s(t) verglichen, der sich aus der Gleichung

$$s'' = a = -D/m \cdot s$$

ergibt. Die Gewichtskraft -m·g bleibt unberücksichtigt (siehe Anmerkung zur Gewichtskraft). Die Konstanten D und m entsprechen der Federkonstanten und der schwingenden Masse. Weil auch ein Teil der Feder schwingt, ist die schwingende Masse um etwa 20 g (=1/3 der Federmasse) größer als die Masse des Pendelkörpers.



#### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Laser-Bewegungssensor S	524 073
1	Stativstab mit Gewinde	309 00 335
1	Paar Schraubenfedern	352 15
1	Teller für Schlitzgewichte, 500 g	315 452
1	Schlitzgewicht 100 g	315 456
1	Schlitzgewicht 200 g	315 458
1	Stativstange, 1 m	300 44
1	Stativstange, 25 cm	300 41
2	Leybold-Muffen	301 01
1	Großer Stativfuß, V-förmig	300 01
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### **Alternative**

Statt des Laser-Bewegungssensors S kann auch der Kraftsensor S, ±50 N (524 042) zur Wegmessung verwendet werden. Aus der gemessenen Kraft FA1 und der Federkonstanten D kann dann durch eine Formel die Auslenkung sA1=FA1/D berechnet werden.

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Das Federpendel mit der großen Feder ( $\varnothing$ =3,5 mm) aufbauen. Zur Wegmessung an der untersten Federwindung ein Stück retroreflektierende Folie so anbringen, dass der Laserspot des Bewegungssensors während der gesamten Schwingung auf die Folie trifft (wenn notwendig, Folie außerhalb der Feder anbringen).

Die spezielle Feder ermöglicht durch die Umkehrung ihres Schraubensinns in der Mitte eine freie stabile Auf- und Abwärtsschwingung, weil keine Drehschwingung angeregt wird.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Falls die Modellbildung noch nicht erwünscht ist, während der Messung auf Darstellung Standard schalten
- Wegnullpunkt in Gleichgewichtslage des Pendels definieren (→ 0 ← in Einstellungen sA1, eventuell Laser-Bewegungssensor S vorher ein paar Minuten warm laufen lassen)
- Pendelkörper nach unten auslenken
- Messung mit F9 starten
- Pendelkörper loslassen. Die Messung startet automatisch beim ersten Durchqueren der Gleichgewichtslage bei s=0.
- Experiment nach Durchführung der Auswertung für unterschiedliche Massen (Schlitzgewichte) wiederholen und mit der Vorhersage der Modellbildung vergleichen.

## Modellbildung

Im vorliegenden Beispiel wurden die beiden Anfangsbedingungen s(t=0)=0 und v(t=0)=vo gewählt, weil im Wegnullpunkt getriggert wurde. Anfangsgeschwindigkeit vo, Federkonstante D und Masse m können durch Ziehen am Zeiger des entsprechenden Anzeigeinstruments (oder durch Linksklick oder nach Rechtsklick) so verändert werden, dass das Modell mit der Messung überein stimmt.

Zur Bestätigung des Modells kann die Masse m erhöht werden und das Experiment mit dieser erhöhten Masse wiederholt werden. Die neue gemessene Schwingung wird sich wieder an das mathematische Modell halten (eventuell Anfangsgeschwindigkeit korrigieren).

#### Lösung der Differenzialgleichung

Die Differenzialgleichung kann auch analytisch gelöst werden und man erhält mit den Anfangsbedingungen s(t=0)=0 und v(t=0)=v0

```
s(t) = v_0/\omega_0 \cdot sin(\omega_0 \cdot t)
```

mit  $\omega_0 = \operatorname{sqr}(D/m)$ .

# **Anmerkung zur Gewichtskraft**


In der oben verwendeten Modellgleichung wurde nicht berücksichtigt, dass auf die Pendelmasse m auch die Gewichtskraft m·g wirkt. Die Modellgleichung müsste also eigentlich

$$s'' = a = -D/m \cdot s - g = -D/m \cdot (s + m \cdot g/D) = -D/m \cdot (s - s_0)$$

mit so=-m·g/D lauten. Genau diese gewichtskraftsabhängige Nullpunktverschiebung des Pendels zeigt sich auch sehr schön in der mit der Maus wählbaren Darstellung **Modellbildung mit g**. Weil sich nur der Nullpunkt verschiebt, wird üblicherweise auf die Gewichtskraft in der Modellgleichung verzichtet. So auch in den folgenden Beispielen, in denen die Festkörperreibung, Schmiermittelreibung, laminare Flüssigkeitsreibung und die turbulente Flüssigkeitsreibung/Luftreibung untersucht wird.



# Schwingungen eines Federpendels mit Festkörperreibung (mit Modellbildung)

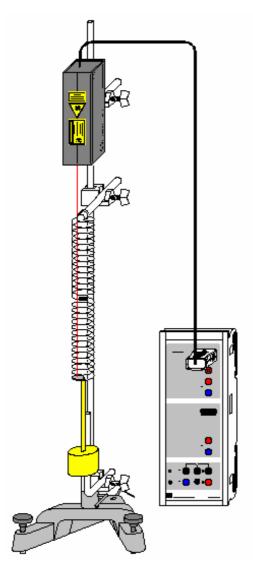



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

#### **Sicherheitshinweis**

Sicherheitshinweise aus der Gebrauchsanweisung des Laser-Bewegungssensors S beachten.

# Versuchsbeschreibung

Als Ergänzung zum Versuch Schwingungen eines Federpendels wird der schwingende Körper einer zusätzlichen Reibungskraft F durch Gleitreibung an einem Metallstab (Coulomb-Reibung) ausgesetzt. Diese Reibungskraft ist dem Betrag nach konstant, aber immer gegen die Bewegung gerichtet. Sie kann also als F=–F0-sgn(v) mit konstantem F0 geschrieben werden. Als Modellgleichung ergibt sich damit

$$s'' = a = -D/m \cdot s - F_0/m \cdot sgn(v)$$
.

Die Gewichtskraft –m⋅g bleibt unberücksichtigt (siehe Anmerkung zur Gewichtskraft). Die Konstanten D und m entsprechen der Federkonstanten und der schwingenden Masse. Weil auch ein Teil der Feder schwingt, ist die schwingende Masse um etwa 20 g (=1/3 der Federmasse) größer als die Masse des Pendelkörpers.

# Benötigte Geräte

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Laser-Bewegungssensor S	524 073
1	Stativstab mit Gewinde	309 00 335
1	Paar Schraubenfedern	352 15
1	Teller für Schlitzgewichte, 500 g	315 452
1	Stativstange, 1 m	300 44
1	Stativstange, 25 cm	300 41
1	Stativstange, 90° abgewinkelt	300 51
3	Leybold-Muffen	301 01
1	Großer Stativfuß, V-förmig	300 01
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### **Alternative**

Statt des Laser-Bewegungssensors S kann auch der Kraftsensor S, ±50 N (524 042) zur Wegmessung verwendet werden. Aus der gemessenen Kraft FA1 und der Federkonstanten D kann dann durch eine Formel die Auslenkung sA1=FA1/D berechnet werden.

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Das Federpendel mit der großen Feder (Ø=3,5 mm) aufbauen. Zur Wegmessung an der untersten Federwindung ein Stück retroreflektierende Folie so anbringen, dass der Laserspot des Bewegungssensors während der gesamten Schwingung auf die Folie trifft (wenn notwendig, Folie außerhalb der Feder anbringen).

Die spezielle Feder ermöglicht durch die Umkehrung ihres Schraubensinns in der Mitte eine freie stabile Auf- und Abwärtsschwingung, weil keine Drehschwingung angeregt wird.

Der Pendelkörper sollte sich in der Gleichgewichtslage etwa in der Mitte der abgewinkelten Stativstange befinden. Während der Schwingung des Pendelkörpers sollte er ständig an der abgewinkelten Stativstange reiben.

# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Falls die Modellbildung noch nicht erwünscht ist, während der Messung auf Darstellung **Standard** schalten.
- Wegnullpunkt in Gleichgewichtslage des Pendels definieren (→ 0 ← in Einstellungen sA1, eventuell Laser-Bewegungssensor S vorher ein paar Minuten warm laufen lassen)
- Pendelkörper nach unten auslenken
- Messung mit F9 starten
- Pendelkörper loslassen. Die Messung startet automatisch beim ersten Durchqueren der Gleichgewichtslage bei s=0.
- Experiment nach Durchführung der Auswertung für andere Reibungskräfte wiederholen und mit der Vorhersage der Modellbildung vergleichen. Dazu die abgewinkelte Stativstange etwas weiter vorne oder etwas weiter hinten fest klemmen.

#### Modellbildung

Im vorliegenden Beispiel wurden die beiden Anfangsbedingungen s(t=0)=0 und v(t=0)=vo gewählt, weil im Wegnullpunkt getriggert wurde. Anfangsgeschwindigkeit vo, Federkonstante D, Masse m und Betrag der Reibungskraft Fo können durch Ziehen am Zeiger des entsprechenden Anzeigeinstruments (oder durch Linksklick oder nach Rechtsklick) so verändert werden, dass das Modell mit der Messung überein stimmt.

Die Abhängigkeit der Modell-Reibungskraft von der Geschwindigkeit ist in der Darstellung **Reibungskraft** zu sehen.

Zur Bestätigung des Modells kann der Betrag der Reibungskraft Fo erhöht werden (dazu die abgewinkelte Stativstange etwas weiter vorne fest klemmen). Wird nun der Betrag der Reibungskraft Fo im Modell entsprechend erhöht und eventuell die Anfangsgeschwindigkeit vo korrigiert, so werden die neue gemessene Schwingung und das mathematische Modell wieder überein stimmen.



## Abschätzung der Reibungskraft

Die Größenordnung der Gleitreibungskraft kann direkt aus dem experimentellen Aufbau abgeschätzt werden. Der Betrag der Reibungskraft für Gleitreibung ist gegeben durch

$$F_0 = \mu \cdot F_N = \mu \cdot m \cdot g \cdot \sin \alpha$$

mit der Gleitreibungszahl  $\mu$  und der Normalkraft FN=m·g·sin  $\alpha$ . Im Beispiel war der Winkel  $\alpha$  zwischen Lot und Reibungsachse etwa 2° und  $\mu$ =0,12 (Gleitreibungszahl für Stahl auf Stahl) und man erhält in Übereinstimmung mit dem Ergebnis der Modellbildung F0=20 mN.

#### Einhüllende

Die lineare Abnahme der Schwingungsamplitude bei betragsmäßig konstanter Reibungskraft folgt aus der Energieerhaltung. Zwischen zwei aufeinander folgenden Umkehrpunkten s1>0 und s2<0 leistet die Reibung die Arbeit W = F0.s1+(-F0).s2. Weil an den Umkehrpunkten die kinetische Energie 0 ist, bleibt nur die Energie in der Feder  $1/2.D.s1^2$  und  $1/2.D.s2^2$  (siehe auch Anmerkung zur Gewichtskraft).

Die Energiebilanz ist also

 $1/2 \cdot D \cdot s1^2 = 1/2 \cdot D \cdot s2^2 + W$  oder

$$W = 1/2 \cdot D \cdot (s1^2 - s2^2) = 1/2 \cdot D \cdot (s1 + s2) (s1 - s2) = F0 \cdot (s1 - s2).$$

Daraus folgt für die Differenz der Amplitudenbeträge |s1|-|s2|=s1+s2=2F0/D. Für eine gesamte Periode folgt dann die konstante Amplitudenabnahme  $\Delta s=4F0/D$ .

Auch die Anfangsamplitude so der Einhüllenden ergibt sich aus den Konstanten der Modellbildung aus  $1/2 \cdot m \cdot vo^2 = 1/2 \cdot D \cdot so^2$ .


Für kleine Reibungskräfte lässt sich die Funktionsgleichung der Einhüllenden als

$$\pm f(t) = s_0 - 4F_0/D \cdot t/T = |v_0|/\omega_0 - 4F_0/D \cdot t/(2\pi/\omega_0) = |v_0|/\omega_0 \cdot (1 - 2/\pi \cdot F_0/m/|v_0| \cdot t) = s_0 \cdot (1 - 2/\pi \cdot k \cdot t)$$

mit  $\omega_0=\text{sqr}(D/m)$ ,  $s_0=|v_0|/\omega_0$  und  $k=F_0/m/|v_0|$  schreiben.



# Schwingungen eines Federpendels mit Schmiermittelreibung (mit Modellbildung)

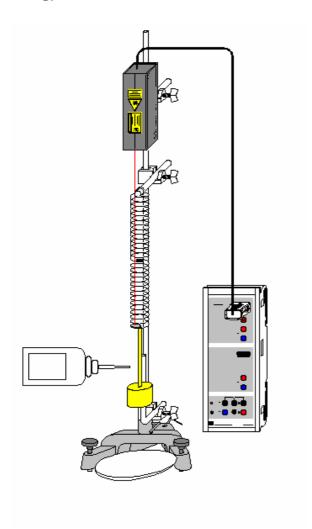



auch für Pocket-CASSY geeignet

Beispiel laden

# **Sicherheitshinweis**

Sicherheitshinweise aus der Gebrauchsanweisung des Laser-Bewegungssensors S beachten.

### Versuchsbeschreibung

Als Ergänzung zum Versuch Schwingungen eines Federpendels wird der schwingende Körper einer zusätzlichen Reibungskraft F durch Schmiermittelreibung (Reynolds-Reibung) ausgesetzt. Diese Reibungskraft ist dem Betrag nach proportional zur Wurzel der Geschwindigkeit, aber immer gegen die Bewegung gerichtet. Sie kann also als F=-F0·sqr|v/v0|·sgn(v) geschrieben werden. Anschaulich ist F0 der Betrag der Reibungskraft, die bei der Anfangsgeschwindigkeit |v0| auf das System wirkt. Als Modellgleichung ergibt sich damit

 $s'' = a = -D/m \cdot s - F_0/m \cdot sqr|v/v_0| \cdot sgn(v)$ .

Die Gewichtskraft –m·g bleibt unberücksichtigt (siehe Anmerkung zur Gewichtskraft). Die Konstanten D und m entsprechen der Federkonstanten und der schwingenden Masse. Weil auch ein Teil der Feder schwingt, ist die schwingende Masse um etwa 20 g (=1/3 der Federmasse) größer als die Masse des Pendelkörpers.



#### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Laser-Bewegungssensor S	524 073
1	Stativstab mit Gewinde	309 00 335
1	Paar Schraubenfedern	352 15
1	Teller für Schlitzgewichte, 500 g	315 452
1	Paraffin, dickfüssig, 100 ml	674 0800
1	Petrischale	664 183
1	Stativstange, 1 m	300 44
1	Stativstange, 25 cm	300 41
1	Stativstange, 90° abgewinkelt	300 51
3	Leybold-Muffen	301 01
1	Großer Stativfuß, V-förmig	300 01
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### **Alternative**

Statt des Laser-Bewegungssensors S kann auch der Kraftsensor S, ±50 N (524 042) zur Wegmessung verwendet werden. Aus der gemessenen Kraft FA1 und der Federkonstanten D kann dann durch eine Formel die Auslenkung sA1=FA1/D berechnet werden.

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Das Federpendel mit der großen Feder ( $\emptyset$ =3,5 mm) aufbauen. Zur Wegmessung an der untersten Federwindung ein Stück retroreflektierende Folie so anbringen, dass der Laserspot des Bewegungssensors während der gesamten Schwingung auf die Folie trifft (wenn notwendig, Folie außerhalb der Feder anbringen).

Die spezielle Feder ermöglicht durch die Umkehrung ihres Schraubensinns in der Mitte eine freie stabile Auf- und Abwärtsschwingung, weil keine Drehschwingung angeregt wird.

Der Pendelkörper sollte sich in der Gleichgewichtslage etwa in der Mitte der abgewinkelten Stativstange befinden. Während der Schwingung sollte das dickflüssige Paraffin ständig einen Film zwischen Pendelkörper und abgewinkelter Stativstange bilden. Als Schmiermittel eignen sich auch Flüssigseifen oder Vaseline (675 3100) mit Öl vermischt.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Falls die Modellbildung noch nicht erwünscht ist, während der Messung auf Darstellung **Standard** schalten.
- Reichlich dickflüssiges Paraffin auf die abgewinkelte Stativstange auftragen, damit sich während der Messung ständig ein Film zwischen Pendelkörper und Stativstange befindet.
- Wegnullpunkt in Gleichgewichtslage des Pendels definieren ( $\rightarrow 0 \leftarrow$  in Einstellungen sa1, eventuell Laser-Bewegungssensor S vorher ein paar Minuten warm laufen lassen)
- Pendelkörper nach unten auslenken
- Messung mit F9 starten
- Pendelkörper loslassen. Die Messung startet automatisch beim ersten Durchqueren der Gleichgewichtslage bei s=0.

### Modellbildung

Im vorliegenden Beispiel wurden die beiden Anfangsbedingungen s(t=0)=0 und v(t=0)=vo gewählt, weil im Wegnullpunkt getriggert wurde. Anfangsgeschwindigkeit vo, Federkonstante D, Masse m und Reibungskonstante Fo können durch Ziehen am Zeiger des entsprechenden Anzeigeinstruments (oder durch Linksklick oder nach Rechtsklick) so verändert werden, dass das Modell mit der Messung überein stimmt.

Die Abhängigkeit der Modell-Reibungskraft von der Geschwindigkeit ist in der Darstellung **Reibungskraft** zu sehen.



# Einhüllende


Bei kleinen Reibungskräften proportional zur Wurzel der Geschwindigkeit gilt für die Funktionsgleichung der Einhüllenden (vergl. Vogel, Probleme aus der Physik)

 $\pm f(t) = |v_0|/\omega_0 \cdot (1 - 0.2782 \cdot F_0/m/|v_0| \cdot t)^2 = s_0 \cdot (1 - 0.2782 \cdot k \cdot t)^2$ 

mit  $\omega_0$ =sqr(D/m), s0=|v0|/ $\omega_0$  und k=F0/m/|v0|.



# Schwingungen eines Federpendels mit laminarer Flüssigkeitsreibung (mit Modellbildung)

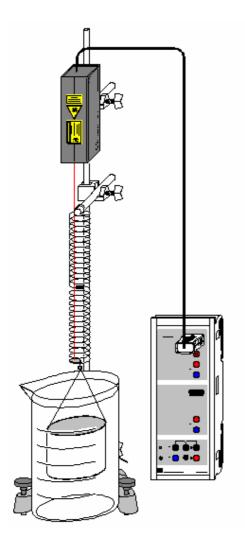



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

## **Sicherheitshinweis**

Sicherheitshinweise aus der Gebrauchsanweisung des Laser-Bewegungssensors S beachten.

### Versuchsbeschreibung

Als Ergänzung zum Versuch Schwingungen eines Federpendels wird der schwingende Körper einer zusätzlichen Reibungskraft F durch laminare Flüssigkeitsreibung (Stokes-Reibung) in Wasser ausgesetzt. Diese Reibungskraft ist dem Betrag nach proportional zur Geschwindigkeit, aber immer gegen die Bewegung gerichtet. Sie kann also als F=-F0·v/|vo| geschrieben werden. Anschaulich ist Fo der Betrag der Reibungskraft, die bei der Anfangsgeschwindigkeit |vo| auf das System wirkt. Als Modellgleichung ergibt sich damit

$$s'' = a = -D/m \cdot s - F_0/m \cdot v/|v_0|.$$

Die Gewichtskraft –m·g bleibt unberücksichtigt (siehe Anmerkung zur Gewichtskraft). Die Konstanten D und m entsprechen der Federkonstanten und der schwingenden Masse. Weil Wasser bewegt wird und auch ein Teil der Feder schwingt, ist die schwingende Masse größer als die Masse des Pendelkörpers.

# **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Laser-Bewegungssensor S	524 073
1	Stativstab mit Gewinde	309 00 335
1	Paar Schraubenfedern	352 15
1	Hohlzylinder für Flüssigkeitsreibung	342 11
1	Becher, 3000 ml	664 134
1	Stativstange, 1 m	300 44
1	Stativstange, 25 cm	300 41
2	Leybold-Muffen	301 01
1	Großer Stativfuß, V-förmig	300 01
1	PC ab Windows 95/98/NT	

# Alternative

Statt des Laser-Bewegungssensors S kann auch der Kraftsensor S, ±50 N (524 042) zur Wegmessung verwendet werden. Aus der gemessenen Kraft FA1 und der Federkonstanten D kann dann durch eine Formel die Auslenkung sA1=FA1/D berechnet werden.

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Das Federpendel mit der großen Feder ( $\emptyset$ =3,5 mm) aufbauen. Zur Wegmessung an der untersten Federwindung ein Stück retroreflektierende Folie so anbringen, dass der Laserspot des Bewegungssensors während der gesamten Schwingung auf die Folie trifft (wenn notwendig, Folie außerhalb der Feder anbringen).

Die spezielle Feder ermöglicht durch die Umkehrung ihres Schraubensinns in der Mitte eine freie stabile Auf- und Abwärtsschwingung, weil keine Drehschwingung angeregt wird.

Der Hohlzylinder sollte sich in der Gleichgewichtslage etwa in der Mitte des mit Wasser gefüllten Bechers befinden. Um eine annähernd laminare Flüssigkeitsreibung zu erzielen, Hohlzylinder möglichst senkrecht ausrichten.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Falls die Modellbildung noch nicht erwünscht ist, während der Messung auf Darstellung Standard schalten
- Wegnullpunkt in Gleichgewichtslage des Pendels definieren (→ 0 ← in Einstellungen sA1, eventuell Laser-Bewegungssensor S vorher ein paar Minuten warm laufen lassen)
- Hohlzylinder nach unten auslenken
- Messung mit F9 starten
- Hohlzylinder loslassen. Die Messung startet automatisch beim ersten Durchqueren der Gleichgewichtslage bei s=0.

#### Modellbildung

Im vorliegenden Beispiel wurden die beiden Anfangsbedingungen s(t=0)=0 und v(t=0)=vo gewählt, weil im Wegnullpunkt getriggert wurde. Anfangsgeschwindigkeit vo, Federkonstante D, Masse m und Reibungskonstante Fo können durch Ziehen am Zeiger des entsprechenden Anzeigeinstruments (oder durch Linksklick oder nach Rechtsklick) so verändert werden, dass das Modell mit der Messung überein stimmt.

Die Abhängigkeit der Modell-Reibungskraft von der Geschwindigkeit ist in der Darstellung **Reibungskraft** zu sehen.

## Lösung der Differenzialgleichung

Im Gegensatz zur Coulomb-Reibung, Reynolds-Reibung und Newton-Reibung kann bei der Stokes-Reibung die Differenzialgleichung analytisch gelöst werden. Man erhält mit den Anfangsbedingungen s(t=0)=0 und v(t=0)=v0

```
s(t) = v_0/\omega \sin(\omega \cdot t) \exp(-1/2 \cdot k \cdot t)
```

mit  $\omega_0 = \operatorname{sqr}(D/m)$ ,  $\omega = \operatorname{sqr}(\omega_0^2 - k^2/4)$  und  $k = F_0/m/|v_0|$ .



# Einhüllende


Bei Reibungskräften proportional zur Geschwindigkeit gilt für die Funktionsgleichung der Einhüllenden daher

 $\pm f(t) = s_0 \cdot exp(-1/2 \cdot k \cdot t)$ 

mit so= $|v_0|/\omega$ .



# Schwingungen eines Federpendels mit turbulenter Flüssigkeitsreibung/Luftreibung (mit Modellbildung)

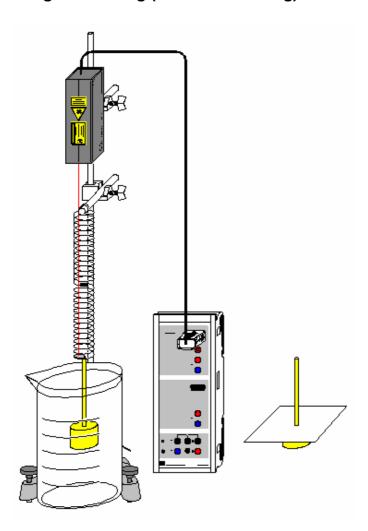



auch für Pocket-CASSY geeignet

- Beispiel laden (Flüssigkeitsreibung)
- Beispiel laden (Luftreibung)

#### Sicherheitshinweis

Sicherheitshinweise aus der Gebrauchsanweisung des Laser-Bewegungssensors S beachten.

#### Versuchsbeschreibung

Als Ergänzung zum Versuch Schwingungen eines Federpendels wird der schwingende Körper einer zusätzlichen Reibungskraft F durch turbulente Flüssigkeitsreibung in Wasser oder turbulente Luftreibung (Newton-Reibung) ausgesetzt. Diese Reibungskraft ist dem Betrag nach proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit, aber immer gegen die Bewegung gerichtet. Sie kann also als  $F=-F0\cdot(v/v0)^2\cdot sgn(v)$  geschrieben werden. Anschaulich ist F0 der Betrag der Reibungskraft, die bei der Anfangsgeschwindigkeit |v0| auf das System wirkt. Als Modellgleichung ergibt sich damit

$$s'' = a = -D/m \cdot s - F_0/m \cdot (v/v_0)^2 \cdot sgn(v).$$

Die Gewichtskraft –m·g bleibt unberücksichtigt (siehe Anmerkung zur Gewichtskraft). Die Konstanten D und m entsprechen der Federkonstanten und der schwingenden Masse. Weil Wasser bewegt wird und auch ein Teil der Feder schwingt, ist die schwingende Masse größer als die Masse des Pendelkörpers.



Aus der Reibungskonstanten Fo kann der Widerstandsbeiwert (cw-Wert) für den zylinderförmigen Pendelkörper abgeschätzt werden.

#### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Laser-Bewegungssensor S	524 073
1	Stativstab mit Gewinde	309 00 335
1	Paar Schraubenfedern	352 15
1	Teller für Schlitzgewichte, 500 g	315 452
1	Becher, 3000 ml	664 134
1	Stativstange, 1 m	300 44
1	Stativstange, 25 cm	300 41
2	Leybold-Muffen	301 01
1	Großer Stativfuß, V-förmig	300 01
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### **Alternativen**

Statt des Laser-Bewegungssensors S kann auch der Kraftsensor S, ±50 N (524 042) zur Wegmessung verwendet werden. Aus der gemessenen Kraft FA1 und der Federkonstanten D kann dann durch eine Formel die Auslenkung sA1=FA1/D berechnet werden.

Für die Untersuchung der Luftreibung, die Luftreibung durch einen Bogen Pappe auf dem Pendelkörper herbeiführen.

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Das Federpendel mit der großen Feder ( $\emptyset$ =3,5 mm) aufbauen. Zur Wegmessung an der untersten Federwindung ein Stück retroreflektierende Folie so anbringen, dass der Laserspot des Bewegungssensors während der gesamten Schwingung auf die Folie trifft (wenn notwendig, Folie außerhalb der Feder anbringen).

Die spezielle Feder ermöglicht durch die Umkehrung ihres Schraubensinns in der Mitte eine freie stabile Auf- und Abwärtsschwingung, weil keine Drehschwingung angeregt wird.

Der Pendelkörper sollte sich in der Gleichgewichtslage etwa in der Mitte des mit Wasser gefüllten Bechers befinden.

# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden (Flüssigkeitsreibung)
- Einstellungen laden (Luftreibung)
- Falls die Modellbildung noch nicht erwünscht ist, während der Messung auf Darstellung Standard schalten.
- Wegnullpunkt in Gleichgewichtslage des Pendels definieren (→ 0 ← in Einstellungen sA1, eventuell Laser-Bewegungssensor S vorher ein paar Minuten warm laufen lassen)
- Pendelkörper nach unten auslenken
- · Messung mit F9 starten
- Pendelkörper loslassen. Die Messung startet automatisch beim ersten Durchqueren der Gleichgewichtslage bei s=0.

# Modellbildung

Im vorliegenden Beispiel wurden die beiden Anfangsbedingungen s(t=0)=0 und v(t=0)=v0 gewählt, weil im Wegnullpunkt getriggert wurde. Anfangsgeschwindigkeit v0, Federkonstante D, Masse m und Reibungskonstante F0 können durch Ziehen am Zeiger des entsprechenden Anzeigeinstruments (oder durch Linksklick oder nach Rechtsklick) so verändert werden, dass das Modell mit der Messung überein stimmt.

Die Abhängigkeit der Modell-Reibungskraft von der Geschwindigkeit ist in der Darstellung **Reibungskraft** zu sehen.

Die Widerstandskraft FL in der Flüssigkeit ist für den umströmten Pendelkörper gegeben durch



$$FL = cw \cdot 1/2 \cdot \rho \cdot v^2 \cdot A = F0 \cdot (v/v_0)^2$$

mit dem Widerstandsbeiwert cw, dem Staudruck p= $1/2 \cdot \rho \cdot v^2$  und der Staufläche A= $\pi \cdot r^2$ . Der Widerstandsbeiwert ist das Verhältnis der gemessenen Kraft zur gedachten Staukraft p·A. Es ergibt sich

$$cw = 2F_0/v_0^2/(\rho \cdot A)$$
.

Im vorliegenden Beispiel ist r=2.5 cm und  $\rho=1$  g/cm³, also  $\rho \cdot A=1.96$  kg/m. Die Modellbildung ergibt F0 = 0.1828 N und v0 = 0.325 m/s. Damit ist cw = 1.7.

#### Einhüllende


Bei kleinen Reibungskräften proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit gilt für die Funktionsgleichung der Einhüllenden (vergl. Vogel, Probleme aus der Physik)

 $\pm f(t) = |v_0| \cdot sqr(m/D)/(1+4/3\pi \cdot F_0/m/|v_0| \cdot t) = s_0/(1+4/3\pi \cdot k \cdot t)$ 

mit  $\omega_0$ =sqr(D/m), s0=|v0|/ $\omega_0$  und k=F0/m/|v0|.



# **Gekoppelte Pendel**

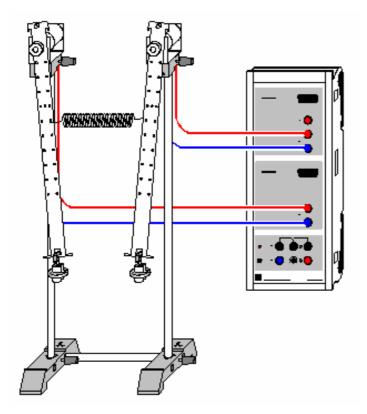



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

### Versuchsbeschreibung

Zwei gekoppelte Pendel schwingen gleichphasig mit der Frequenz f1, wenn sie um die gleiche Strecke aus der Ruhelage ausgelenkt wurden. Wird das zweite Pendel in entgegengesetzter Richtung ausgelenkt, schwingen die Pendel gegenphasig mit der Frequenz f2. Lenkt man nur ein Pendel aus, wird eine gekoppelte Schwingung mit der Frequenz

$$fn = \frac{1}{2} (f1 + f2)$$

erzeugt, bei der die Schwingungsenergie zwischen den beiden Pendeln hin und her übertragen wird. Das erste Pendel kommt nach einer gewissen Zeit zur Ruhe, während das zweite gleichzeitig seine größte Amplitude erreicht. Die Zeit von einem Stillstand eines Pendels zum nächsten bezeichnet man Ts. Für die zugehörige Schwebungsfrequenz gilt

$$fs = | f1 - f2 |$$
.

# **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Paar Stabpendel	346 03
1	Satz Laststücke	340 85
2	Haltebügel, steckbar	314 04
1	Schraubenfeder, 3 N/m	352 10
2	STE-Tachogeneratoren	579 43
2	Muffenblocks	301 25
1	Stativstange, 25 cm, d = 10 mm	301 26
2	Stativstangen, 50 cm, d = 10 mm	301 27



- 2 Stativfüße MF 301 21
- 2 Paar Kabel, 100 cm, rot und blau 501 46
- 1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Bewegung der Pendel wird auf die Tachogeneratoren übertragen. Die Spannung der Tachogeneratoren wird an den Eingängen A und B des Sensor-CASSYs gemessen. Zur Variation der Kopplung kann die Kopplungsfeder in unterschiedlichen Höhen angebracht werden.

## Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Messung mit F9 starten und beide Pendel gleichphasig auslenken (Messung stoppt nach 30 s)
- Messung mit F9 starten und beide Pendel gegenphasig auslenken (Messung stoppt nach 30 s)
- Messung mit F9 starten und nur das erste Pendel anstoßen (Messung stoppt nach 30 s)

#### **Auswertung**

In der Darstellung **Eigenschwingungen** (mit der Maus anklicken) werden die beiden Eigenschwingungen

$$U_+ = U_A + U_B$$
  
 $U_- = U_A - U_B$ 

dargestellt. Bei der gleichphasigen Anregung schwingt nur U+ mit der Frequenz f1, bei der gegenphasigen nur U- mit der Frequenz f2. Erst nach dem alleinigen Anstoßen des ersten Pendels schwingt das System mit beiden Eigenfrequenzen und erzeugt damit die typische Schwebung in der **Standard**-Darstellung.

Als Hilfsmittel zur Bestimmung der Schwebungsfrequenz fs und der neuen Schwingungsfrequenz fn eignen sich z. B. senkrechte Markierungslinien oder die direkte Differenzmessung (zur Erhöhung der Genauigkeit sollte bei der Bestimmung der Schwingungsfrequenz fn über mehrere Perioden gemittelt werden).

Im Beispiel ergibt sich  $f_1 = 0.875$  Hz,  $f_2 = 0.986$  Hz,  $f_n = 0.93$  Hz,  $f_s = 0.11$  Hz und bestätigt damit gut die Theorie  $f_n = \frac{1}{2}$  ( $f_1 + f_2$ ) = 0.93 Hz und  $f_s = |f_1 - f_2| = 0.11$  Hz.

Im **Frequenzspektrum** lassen sich die Frequenzen und Amplituden von U+, U- und UA miteinander vergleichen. Die Frequenzen lassen sich dort am einfachsten als Peakschwerpunkte bestimmen.

# Theorie

Die Bewegungsgleichungen der Pendelkörper lauten unter Verwendung geeigneter Näherungen (kleine Auslenkungen, vernachlässigbare Masse der Kopplungsfeder und des Pendelstabes, keine Dämpfung):

```
F_1 = ma_1 = -Dx_1 + C(x_2 - x_1)

F_2 = ma_2 = -Dx_2 - C(x_2 - x_1)
```

-Dxi (mit D = mg/I) beschreibt die Rückstellkraft eines einzelnen Pendels und C( $x_2 - x_1$ ) beschreibt die Kraft durch die Kopplung zwischen beiden Pendeln. Als Lösung ergibt sich die Superposition

```
x(t) = A \cos(\omega_1 \cdot t) + B \cos(\omega_2 \cdot t)
```

mit den Fundamentalfrequenzen  $\omega_1$  und  $\omega_2$ . Die speziellen Anfangsbedingungen liefern die Werte für A und B:

Gleichphasige Anregung liefert A = x0, B = 0 (harmonische Schwingung mit  $\omega$ 1) Gegenphasige Anregung liefert A = 0, B = x0 (harmonische Schwingung mit  $\omega$ 2) Auslenkung nur eines Pendels liefert A = B =  $\frac{1}{2}$  x0.


Im letzten Fall gilt

```
\begin{split} x(t) &= \frac{1}{2} \text{ x0 (} \cos(\omega_1 \cdot t) + \cos(\omega_2 \cdot t) \text{ )} = x_0 \cos(\frac{1}{2} \omega_5 \cdot t) \cos(\omega_n \cdot t) \\ \text{mit } \omega_5 &= |\omega_1 - \omega_2| \text{ und } \omega_n = \frac{1}{2} (\omega_1 + \omega_2) \text{ oder fs} = |f_1 - f_2| \text{ und fn} = \frac{1}{2} (f_1 + f_2). \end{split}
```

Wenn die Abweichung der beiden Frequenzen f1 und f2 klein ist, beschreibt diese Gleichung eine Schwingung der Frequenz fn, die mit der langsamen Frequenz fs moduliert wird – also eine Schwebung.



# **Akustische Schwebungen**

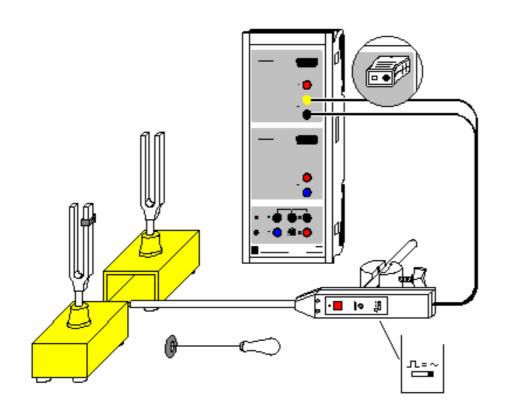



auch für Pocket-CASSY geeignet

- Beispiel laden (Universalmikrofon)
- Beispiel laden (Mikrofon S)

# Versuchsbeschreibung

Es wird die Schwebung aufgezeichnet, die durch zwei geringfügig gegeneinander verstimmte Stimmgabeln erzeugt wird. Die Einzelfrequenzen f1 und f2, die neue Schwingungsfrequenz fn und die Schwebungsfrequenz fs werden ermittelt und können mit den theoretischen Werten

 $fn = \frac{1}{2} (f1 + f2) \text{ und } fs = |f1 - f2|$ 

verglichen werden.

# **Benötigte Geräte**

-	Sensor-CASSY CASSY Lab	524 010 524 200
1	Universalmikrofon mit Sockel	586 26 300 11
OC	ler	
1	Mikrofon S	524 059
	Paar Resonanzstimmgabeln PC ab Windows 95/98/NT	414 72

## Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Das Universalmikrofon (Funktionsschalter auf Betriebsart "Signal" und Einschalten nicht vergessen) wird zwischen beiden Stimmgabeln positioniert und an Eingang A des Sensor-CASSYs angeschlossen. Eine der Stimmgabeln wird durch eine Zusatzmasse geringfügig verstimmt.



### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden (Universalmikrofon)
- Einstellungen laden (Mikrofon S)
- Erste Stimmgabel anstoßen und Messung mit F9 auslösen
- Signalstärke mit Einsteller am Mikrofon optimieren
- Frequenz f1 ermitteln (z. B. durch senkrechte Markierungslinien in der Standard-Darstellung oder als Peakschwerpunkt im Frequenzspektrum)
- Messung mit F4 löschen
- Zweite Stimmgabel anstoßen und Messung mit F9 auslösen
- Frequenz f2 ermitteln
- Messung mit F4 löschen
- Beide Stimmgabeln möglichst gleich stark anstoßen und Messung mit F9 auslösen

#### Auswertung


Wenn die Amplituden der beiden Stimmgabeln gleich groß sind, bilden sich in der Schwebung die Knoten und Bäuche gut aus. Die Schwebungsfrequenz  $f_s$  ergibt sich aus dem Abstand  $T_s$  zwischen zwei Knoten zu  $f_s = 1/T_s$ .

Für eine gute Genauigkeit der Ermittlung der neuen Schwingungsdauer  $T_n$  ist es sinnvoll, über etwa 10 Perioden zu mitteln und erst dann die neue Schwingungsfrequenz als  $f_n = 1/T_n$  zu bestimmen. Als Hilfsmittel zur Bestimmung der Zeitdifferenzen eignen sich z. B. senkrechte Markierungslinien oder die direkte Differenzbestimmung.

Im Beispiel ergibt sich f1 = 425 Hz, f2 = 440 Hz, fn = 433 Hz, fs = 14,5 Hz und bestätigt damit gut die Theorie fn =  $\frac{1}{2}$  (f1 + f2) = 432,5 Hz und fs =  $\frac{1}{2}$  f1 - f2 | = 15 Hz.

Im **Frequenzspektrum** (mit der Maus anklicken) lassen sich die beiden Frequenzen f1 und f2 der Stimmgabeln sowie deren Amplituden ablesen. Die Frequenzen lassen sich dort am einfachsten als Peakschwerpunkte bestimmen.

# Saitenschwingungen

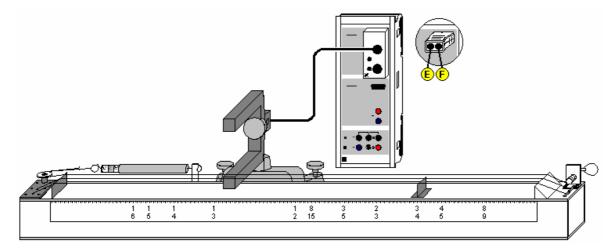



auch für Pocket-CASSY geeignet

- Beispiel laden (konstante Saitenlänge L = 1,2 m)
- Beispiel laden (konstante Spannkraft F = 60 N)

# Versuchsbeschreibung

Bei einer eingespannten Saite ist für die Grundschwingung die Saitenlänge L gleich der halben Wellenlänge: L =  $\lambda/2$ . Daher gilt für die Frequenz f des Grundtones der Saite

$$f = c/(2L)$$
.

Hierbei ist c die Phasengeschwindigkeit der Saite. Sie hängt von der Spannkraft F, der Querschnittsfläche A und der Dichte  $\rho$  ab, was durch folgenden Zusammenhang beschrieben wird:

$$c^2 = F/(A\rho)$$

Im Versuch wird die Schwingungsfrequenz f und damit die Tonhöhe der Saite in Abhängigkeit von der Saitenlänge L und der Spannkraft F untersucht. Dazu wird das CASSY als hochauflösende Stoppuhr zur Messung der Schwingungsdauer T eingesetzt und die Zusammenhänge f² ~ F und f ~ 1/L bestätigt.

### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Timer-Box oder Timer S	524 034 oder 524 074
1	Gabellichtschranke, infrarot	337 46
1	Verbindungskabel, 6-polig, 1,5 m	501 16
1	Monocord	414 01
1	Präzisionskraftmesser, 100 N	314 201
1	Kleiner Stativfuß, V-förmig	300 02
1	Stativstange, 10 cm	300 40
1	Stativstange, 25 cm	300 41
1	Leybold-Muffe	301 01
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Zur Messung der Schwingungsdauer T wird eine Gabellichtschranke verwendet. Diese wird zwischen den hölzernen Resonanzkörper des Monochords und der Saite positioniert und mittels des 6-poligen Verbindungskabels über die Timer-Box an den Eingang A des Sensor-CASSYs angeschlossen.



#### Experimentierhinweise

Eine eindeutige Bestimmung der Schwingungsdauer T erhält man, wenn man die Durchgänge der Saite durch die Ruhelage bestimmt. Dazu muss die Saite so positioniert werden, dass die seitlich an der Gabellichtschranke angebrachte rote Leuchtdiode im Ruhezustand der Saite nicht leuchtet. Die Gabellichtschranke hat zwei kleine Öffnungen für den Infrarotstrahl. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Saite direkt über der kleineren der beiden Öffnungen positioniert wird (eventuell Lichtschranke umdrehen).

Die Saite wird zum Schwingen angeregt, in dem man sie mit dem Finger möglichst parallel zur Oberfläche des Resonanzkörpers anzupft.

Die Messung der Spannkraft F erfolgt manuell mit dem Präzisionskraftmesser. Dazu ist der Haken durch den des Präzisionskraftmesser zu ersetzen. Die Spannung der Saite kann beim Monochord über eine Winde variiert werden. Beim ersten Versuch werden die besten Resultate erzielt, wenn zunächst eine Saitenspannung von 100 N einstellt und dann die Messung von großer zu kleiner Saitenspannung durchführt wird.

Bei der Messung mit veränderlicher Saitenlänge L geschieht die Variation der Saitenlänge durch die Verschiebung des Steges. Beim Anzupfen der Saite mit der anderen Hand den nicht schwingenden Teil der Saite festhalten. Für eine optimale Messung der Schwingungsdauer T die Gabellichtschranke jeweils in der Mitte des schwingenden Teils der Saite positionieren.

# Versuchsdurchführung

- a) Variation der Spannkraft
- Einstellungen laden (konstante Saitenlänge L)
- Durch Verdrehen des Wirbels gewünschte Saitenspannung F einstellen.
- Die am Kraftmesser angezeigte Kraft F in die vorbereitete Spalte der Tabelle eintragen.
- Gabellichtschranke unter der ruhenden Saite positionieren und kontrollieren, ob die rote Leuchtdiode nicht leuchtet; gegebenenfalls Gabellichtschranke neu positionieren.
- Saite durch Zupfen zum Schwingen anregen (während die Saite schwingt leuchtet die Leuchtdiode) und unmittelbar danach den angezeigten Messwert mit Funktionstaste F9 in die Tabelle übernehmen.
- b) Variation der Saitenlänge
- Einstellungen laden (konstante Spannkraft F)
- Gewünschte Saitenlänge durch Positionieren des Steges einstellen.
- Saitenlänge ablesen und in die vorbereitete Spalte der Tabelle eintragen.
- Kontrollieren, ob rote Leuchtdiode nicht leuchtet; gegebenenfalls Gabellichtschranke neu positionieren
- Saite durch Zupfen zum Schwingen anregen (während die Saite schwingt leuchtet die Leuchtdiode) und unmittelbar danach den angezeigten Messwert mit Funktionstaste F9 in die Tabelle übernehmen.

#### **Auswertung**


#### a) Variation der Spannkraft

Bereits während der Messung erscheint das T(F)- und das f(F)-Diagramm. In der vorbereiteten Darstellung **Auswertung** ist das Quadrat der Frequenz f über der Spannkraft F aufgetragen. Durch Anpassung einer Ursprungsgeraden (rechte Maustaste) kann der Zusammenhang  $f^2 \sim F$  bestätigt werden. D. h. die Tonhöhe und damit die Frequenz einer schwingenden Saite steigt mit wachsender Saitenspannung. Entsprechend kann die Tonhöhe einer Saite erniedrigt werden, in dem man die Saitenspannung verringert.

# b) Variation der Saitenlänge

Bereits während der Messung erscheint das T(L)- und das f(L)-Diagramm. In der vorbereiteten Darstellung **Auswertung** ist die Frequenz f über 1/L aufgetragen. Durch Anpassung einer Ursprungsgeraden (rechte Maustaste) kann der Zusammenhang f ~ 1/L bestätigt werden. D. h. die Tonhöhe und damit die Frequenz einer schwingenden Saite wächst mit abnehmender Länge.

# Schallgeschwindigkeit in Luft

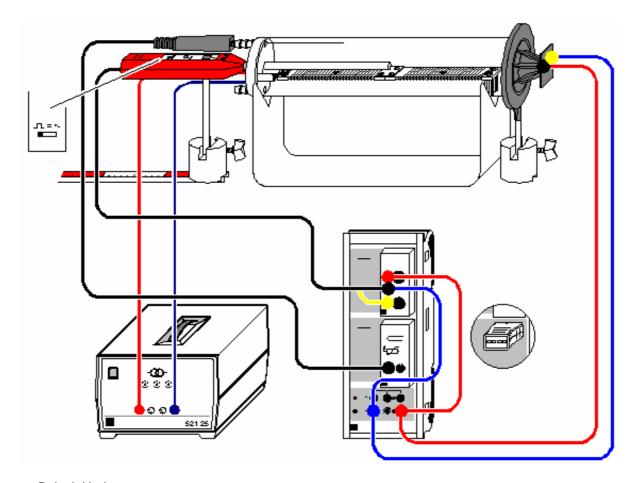

# ■ Beispiel laden

### Versuchsbeschreibung

Im Versuch wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Schallimpulses bestimmt, und damit – da Gruppen- und Phasengeschwindigkeit übereinstimmen – die Schallgeschwindigkeit. Der Schallimpuls wird erzeugt, indem eine steile Spannungsflanke die Membran eines Lautsprechers ruckartig bewegt; diese Bewegung bewirkt die Druckschwankung in der Luft. Im einem Abstand zum Lautsprecher wird der Schallimpuls mit einem Mikrofon registriert.

Zur Bestimmung der Schallgeschwindigkeit c wird die Zeit t zwischen der Impulserzeugung am Lautsprecher und der Registrierung am Mikrofon gemessen. Da der genaue Startort des Schallimpulses am Lautsprecher nicht direkt bestimmt werden kann, werden zwei Messungen durchgeführt, wobei sich das Mikrofon einmal am Ort s1 und einmal bei s2 befindet. Die Schallgeschwindigkeit ergibt sich aus der Wegdifferenz  $\Delta s = s1-s2$  und der zugehörigen Laufzeitdifferenz  $\Delta t = t1-t2$  zu  $c = \Delta s/\Delta t$ .

In dem Gerät zur Schallgeschwindigkeit kann mit Hilfe eines Heizkörpers die Lufttemperatur erhöht werden, gleichzeitig sind störende Umgebungseinflüsse wie Temperaturunterschiede sowie Luftkonvektionen minimiert. In diesem System bleibt der Druck p konstant (tatsächlicher Umgebungsluftdruck). Mit steigender Temperatur T sinkt die Dichte  $\rho$ , die Schallgeschwindigkeit c nimmt zu.

#### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Timer-Box	524 034
1	Temperatur-Box	524 045
1	Temperaturfühler NiCr-Ni	666 193
OC	lar	



1 1	NiCr-Ni-Adapter S Temperaturfühler NiCr-Ni, Type K	524 0673 529 676
1	Gerät zur Schallgeschwindigkeit	413 60
1	Ständer für Rohre und Spulen	516 249
1	Hochtonlautsprecher	587 07
1	Universalmikrofon	586 26
1	Transformator 12 V, 3,5 A, z. B.	521 25
1	Maßstabschiene, 0,5 m	460 97
2	Sockel	300 11
1	Paar Kabel, 25 cm, rot und blau	501 44
2	Paar Kabel, 100 cm, rot und blau	501 46
1	PC ab Windows 95/98/NT	

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

- Heizkörper des Gerätes zur Schallgeschwindigkeit im Kunststoffrohr auf die Steckerstifte im Deckel aufstecken.
- Kunststoffrohr auf den Ständer für Rohre und Spulen legen und den Lautsprecher so heranschieben, dass das Kunststoffrohr möglichst dicht abgeschlossen ist.
- Universalmikrofon etwa 1 cm weit in die mittlere Bohrung des Deckels schieben und so ausrichten, dass es sich beim Verschieben parallel zum Kunststoffrohr bewegt. Funktionsschalter des Universalmikrofons auf Betriebsart "Trigger" stellen und Einschalten nicht vergessen.
- Maßstabschiene direkt unter den Sockel legen.
- Timer-Box auf Eingang A und Temperatur-Box auf Eingang B des Sensor-CASSYs stecken und Schaltung gemäß Skizze herstellen; Spannungsquelle S auf maximale Ausgangsspannung stellen.

#### Sicherheitshinweise

Das Kunststoffrohr des Geräts zur Schallgeschwindigkeit kann thermisch zerstört werden.

- nicht über eine Temperatur von 80 °C hinaus heizen
- maximal zulässige Spannung von 25 V (ca. 5 A) für den Heizdraht nicht überschreiten.

#### Versuchsdurchführung

- a) Messung bei Raumtemperatur
- Einstellungen laden (die Schallimpulse werden bereits erzeugt und die Laufzeiten ∆tA1 angezeigt)
- Mehrere Einzelmessungen mit **F9** abspeichern
- Universalmikrofon ganz in das Kunststoffrohr hineinschieben und Verschiebeweg ∆s auf der Maßstabschiene ablesen.
- Mehrere Einzelmessungen mit F9 abspeichern
- Schallgeschwindigkeit aus  $c = \Delta s/\Delta t$  ermitteln (Mittelwerte der Laufzeiten im Diagramm durch **Mittelwert einzeichnen** bestimmen).
- b) Messung in Abhängigkeit von der Temperatur
- Einstellungen laden (die Schallimpulse werden bereits erzeugt und die Laufzeiten tA1 angezeigt)
- Universalmikrofon wieder herausziehen
- Bei Raumtemperatur erneut die Laufzeit ∆tA1 bestimmen und mit der bereits ermittelten Schallgeschwindigkeit c den Abstand s=c·∆tA1 zwischen Mikrofon und Lautsprecher berechnen und in Tabelle eintragen (erste Tabellenzelle der s-Spalte anklicken).
- Heizdraht über Buchsen im Deckel des Gerätes zur Schallgeschwindigkeit an Spannungsversorgung (12 V / ca. 3,5 A) anschließen.
- Bei steigender Temperatur die aktuellen Laufzeiten mit **F9** abspeichern (z. B. alle 5 °C).

#### **Auswertung**


Nachdem die Schallgeschwindigkeit bei Raumtemperatur in a) und damit der Abstand s zwischen Mikrofon und Lautsprecher in b) bereits ermittelt wurden, berechnet die Software zu jeder Laufzeit  $\Delta t$ A1 gleichzeitig die passende Schallgeschwindigkeit c. In der Darstellung **Temperatur** werden bereits während der Messung die Schallgeschwindigkeiten gegen die Temperatur dargestellt. Mit einer Geradenanpassung lässt sich die Literaturangabe

$$c = (331,3 + 0.6 \cdot \vartheta/^{\circ}C) \text{ m/s}$$

bestätigen.



# Schallgeschwindigkeit in Luft mit 2 Mikrofonen

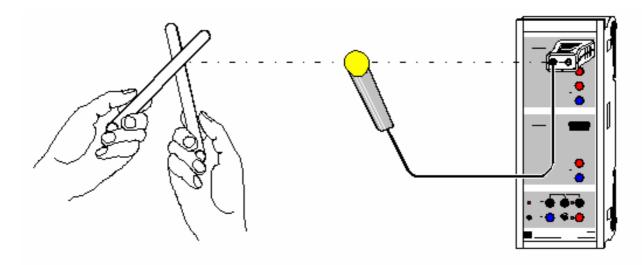



auch für Pocket-CASSY geeignet. Mit Pocket-CASSY an alten Rechnern kann der Stoppimpuls manchmal zu spät erkannt werden. Abhilfe schafft dann eine Verkürzung des Abstands beider Mikrofone oder die Verwendung eines aktuellen Rechners unter Windows XP.

# Beispiel laden

#### Versuchsbeschreibung

Im Versuch wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Schallimpulses bestimmt, und damit – da Gruppen- und Phasengeschwindigkeit übereinstimmen – die Schallgeschwindigkeit. Der Schallimpuls wird erzeugt, indem zwei Stativstangen aneinander geschlagen werden. Dies bewirkt die Druckschwankung in der Luft. Der Schallimpuls wird nacheinander von zwei Mikrofonen registriert, die einen Abstand  $\Delta$ s voneinander haben.

Zur Bestimmung der Schallgeschwindigkeit c wird die Zeit  $\Delta t$  zwischen den beiden Registrierungen an den Mikrofonen gemessen. Die Schallgeschwindigkeit ergibt sich aus der Wegdifferenz  $\Delta t$  und der zugehörigen Laufzeitdifferenz  $\Delta t$  zu  $c = \Delta s/\Delta t$ .

# **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Mikrofon S	524 059
1	Holzmaßstab	311 03
2	Stativstangen, 47 cm	300 42

- Kondensatormikrofon mit
   5 mm-Klinkenstecker, z. B.
   aus dem Computerfachhandel
- 1 PC ab Windows 95/98/NT

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Das externe Mikrofon wird in einem Abstand  $\Delta s = 0,50$  m vor dem internen Mikrofon aufgebaut. Bei der Schallerzeugung durch die Stativstangen ist darauf zu achten, dass die Schallquelle in direkter Verlängerung der Strecke zwischen den beiden Mikrofonen liegt. Außerdem sollte die Schallkopplung über den Tisch möglichst gering sein, da sonst zu hohe Geschwindigkeiten gemessen werden können.

## Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Messung mit F9 starten



- Einige Messungen durch Aneinanderschlagen der Stativstangen auslösen. Dabei sollten Umgebungsgeräusche möglichst vermieden werden, um die Messung nicht zu beeinflussen.
- Messung mit **F9** stoppen
- Abstand ∆s zwischen den beiden Mikrofonen vergrößern
- · Messung wiederholen

#### **Auswertung**

Während der Messung können Umgebungsgeräusche Fehlmessungen erzeugen. Diese Fehlmessungen können leicht gelöscht werden. Dazu im Diagramm den falschen Wert anklicken und löschen (Backspace).


Anschließend die Mittelwerte der Laufzeiten im Diagramm durch **Mittelwert einzeichnen** bestimmen. Jeder Mittelwert kann bequem direkt nach seiner Berechnung in die Darstellung **Schallgeschwindigkeit** (mit der Maus anklicken) übernommen werden, indem er aus der Statuszeile in die neue Tabelle gezogen wird (Drag & Drop).

Zusätzlich wird der dazugehörende Abstand  $\Delta s$  der beiden Mikrofone in die entsprechende Spalte eingetragen. Dabei entsteht dann ein  $\Delta s(\Delta t)$ -Diagramm, dessen Gerade die Steigung  $c = \Delta s/\Delta t$  hat.

Bei Raumtemperatur ergibt sich eine Schallgeschwindigkeit von etwa c = 346 m/s.



# Schallgeschwindigkeit in Gasen

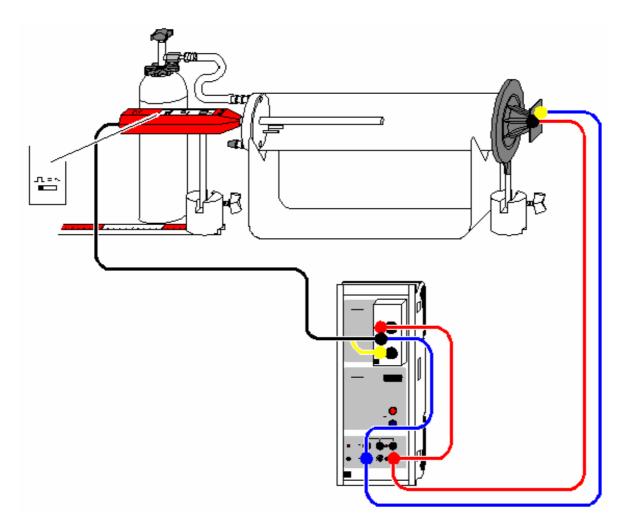

## ■ Beispiel laden

## Vorsicht beim Umgang mit Minican-Druckgasflaschen

Behälter stehen unter Druck; zur Gasentnahme nur Feinregulierventil (660 980) verwenden.

Behälter vor Sonnenbestrahlung oder Erwärmung über 50 °C schützen.

Behälter nicht gewaltsam öffnen.

Behälter nur völlig entleert entsorgen.

Behälter niemals wiederbefüllen.

## Versuchsbeschreibung

Im Versuch wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Schallimpulses in Kohlendioxid und in den Edelgasen Helium und Neon bestimmt. Da Schallwellen in Gasen nur eine geringe Dispersion zeigen, – d. h. bei der Schallausbreitung in Gasen stimmen Gruppen- und Phasengeschwindigkeit in guter Näherung überein – kann im Versuch die Schallgeschwindigkeit c einfach aus der Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Schallimpulses bestimmt werden:

$$c^2 = p \kappa/\rho \text{ mit } \kappa = Cp/CV$$

κ: Adiabatenexponent

ρ: Dichte

p: Druck

Cp, Cv: spezifische Wärmekapazität



Der Schallimpuls wird erzeugt, indem eine steile Spannungsflanke die Membran eines Lautsprechers ruckartig bewegt. Diese Bewegung der Membran bewirkt eine Druckschwankung im Gas, welche mit einem Mikrofon registriert werden kann.

Zur Bestimmung der Schallgeschwindigkeit c in einem gasförmigen Medium wird die Laufzeit t zwischen der Impulserzeugung am Lautsprecher und der Registrierung am Mikrofon gemessen. Da der genaue Startort des Schallimpulses am Lautsprecher nicht direkt gemessen werden kann, wird zunächst für die Bestimmung der effektiven Messstrecke die Schallgeschwindigkeit cLuft in Luft bestimmt. Dazu werden zwei Laufzeitmessungen durchgeführt, bei denen sich das Mikrofon einmal am Ort sA1 und einmal am Ort sA2 befindet. Aus der Wegdifferenz  $\Delta s = sA1-sA2$  und der zugehörigen Laufzeitdifferenz  $\Delta t = t1-t2$  ergibt sich dann die Schallgeschwindigkeit in Luft zu cLuft =  $\Delta s/\Delta t$ . Damit kann dann für den Ort sA1 die effektive Messstrecke seff = cLuft · t1 bestimmt werden, was schließlich eine direkte Messung der Schallgeschwindigkeit in einem Gas ermöglicht.

# **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Timer-Box	524 034
1	Gerät zur Schallgeschwindigkeit	413 60
1	Ständer für Rohre und Spulen	516 249
1	Hochtonlautsprecher	587 07
1	Universalmikrofon	586 26
1	Maßstabschiene, 0,5 m	460 97
2	Sockel	300 11
1	Minican-Druckgasdose, Kohlendioxid	660 999
1	Minican-Druckgasdose, Helium	660 984
1	Minican-Druckgasdose, Neon	660 985
1	Feinreguliergerät zu Minican-Druckgasdosen	660 980
1	Silikonschlauch, 7 x 1,5 mm, 1 m	667 194
1	Gummischlauch, d = 4 mm	604 481
1	Schlauchverbinder	604 510
1	Paar Kabel, 25 cm, rot und blau	501 44
1	Paar Kabel, 100 cm, rot und blau	501 46
1	PC ab Windows 95/98/NT	

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

- Kunststoffrohr (ohne Heizkörper) auf den Ständer für Rohre und Spulen legen und so drehen bis sich die beiden Schlaucholiven senkrecht übereinander befinden.
- Lautsprecher so an das Kunststoffrohr heranschieben, dass das Kunststoffrohr möglichst dicht abgeschlossen ist.
- Universalmikrofon ca. 1 cm weit in die mittlere Bohrung des Deckels schieben und so ausrichten, dass es sich beim Verschieben parallel zum Kunststoffrohr bewegt. Funktionsschalter des Universalmikrofons auf Betriebsart "Trigger" stellen und Einschalten nicht vergessen.
- Maßstabschiene direkt unter den Sockel legen.
- Timer-Box auf Eingang A des Sensor-CASSYs stecken und Schaltung gemäß Versuchsskizze herstellen; Spannungsquelle S auf maximale Ausgangsspannung stellen.

#### Experimentierhinweise

Um einen ungewollten Gasverlust zu vermeiden, das Handrad des Feinregulierventils bis zum Anschlag nach rechts drehen, bevor das Feinregulierventil auf die Druckgasdose geschraubt wird.

Jede Undichtigkeit der Messapparatur führt zum Entweichen des Gases und damit zu einer Verfälschung des Messergebnisses; deswegen den Lautsprecher so nah wie möglich an das Kunststoffrohr schieben.

Zum Einfüllen von Kohlendioxid den Silikonschlauch auf die untere Schlaucholive des Kunststoffrohres stecken. Damit wird ein annähernd vollständiger Gasaustausch erreicht, da beim Einfüllen von Kohlendioxid die leichtere Luft durch die obere Schlaucholive hinausgedrückt wird. Entsprechend ist bei der Messung mit den Edelgasen Helium und Neon umgekehrt zu verfahren: Helium bzw. Neon durch obere Schlaucholive einströmenden lassen, so dass die schwere Luft durch die untere Schlaucholive hinausgedrückt wird.



Für die Messungen mit Helium und Neon ist ferner zu beachten: Da die Messapparatur nicht absolut dicht sein kann, entweicht ein Teil des eingefüllten, sehr leicht flüchtigen Gases. Die Messungen werden durch den so bedingten relativ hohen Luftanteil verfälscht - deshalb die Messungen zügig durchführen.

#### Versuchsdurchführung

■ Einstellungen laden (die Schallimpulse werden bereits erzeugt und die Laufzeiten ∆tA1 angezeigt)

Zunächst die effektive Messstrecke seff bestimmen:

- Universalmikrofon ca. 1 cm in das Kunststoffrohr schieben, Position sA1 ablesen und in die erste Tabellenzeile eintragen. Die Laufzeit ΔtA1 mit **F9** in die Tabelle eintragen. Zur Verbesserung der Messgenauigkeit die Laufzeitmessung mehrmals wiederholen.
- Universalmikrofon ganz in das Kunststoffrohr schieben, Position saz ablesen und in der nächsten Tabellenzeile eintragen. Die Laufzeit 
   <u>Ata1</u> mit **F9** in die Tabelle eintragen. Zur Verbesserung der Messgenauigkeit die Laufzeitmessung mehrmals wiederholen.
- Zur Bestimmung der mittleren Laufzeiten t1 und t2 Mittelwert einzeichnen und Schallgeschwindigkeit in Luft bestimmen cLuft =  $\Delta s/\Delta t = (sA1-sA2)/(t1-t2)$ .
- Effektive Messstrecke seff = cLuft · t1 bestimmen; dazu in den Einstellungen seff (rechte Maustaste auf seff) die ermittelten Laufzeiten t1 und t2 in der angegebenen Formel (sA1-sA2)/(t1-t2)\*t1 eintragen.

Nun kann die Schallgeschwindigkeit in Kohlendioxid, Helium und Neon direkt gemessen werden:

- Universalmikrofon wieder auf die Position sA1 schieben
- Gas in die Schlaucholive einlassen, dazu sehr vorsichtig Feinregulierventil öffnen, bis das Gas hörbar aus der Druckdose strömt.
- Schallgeschwindigkeit abgelesen und in der vorbereiteten Darstellung **Eingabe** in die Tabelle eintragen oder mit Drag & Drop ziehen. Dort auch die Dichte ρ des verwendeten Gases angeben:

Gas	Dichte $\rho$	Adiabatenexponent $\kappa = C_p/C_V$
Kohlendioxid	1,98 kg/m³	1,29
Stickstoff (Luft)	1,25 kg/m³	1,40
Neon	0,90 kg/m³	1,64
Helium	0,18 kg/m <sup>3</sup>	1,63

## Auswertung


In der vorbereiteten Darstellung **Auswertung** wird der Zusammenhang zwischen  $c^2$  und 1/p dargestellt. Dort kann man z. B. durch Angabe der Formel  $101300^*1,4^*x$  in der freien Anpassung die Gerade einzeichnen, die bei normalem Luftdruck p=1013 hPa dem mittleren Adiabatenexponenten  $\kappa$ =1,4 entspricht.

Abweichungen der Messwerte von dieser Gerade sind insbesondere beim extrem leicht flüchtigen Helium normal, weil dann die tatsächliche Dichte des Gases höher ist.

Die großen Unterschiede in den Schallgeschwindigkeiten von Gasen sind im Wesentlichen durch die unterschiedlichen Dichten  $\rho$  der Gase begründet, da die Unterschiede in den Adiabatenexponenten  $C_p/C_V$  vergleichsweise gering sind.



# Schallgeschwindigkeit in Festkörpern

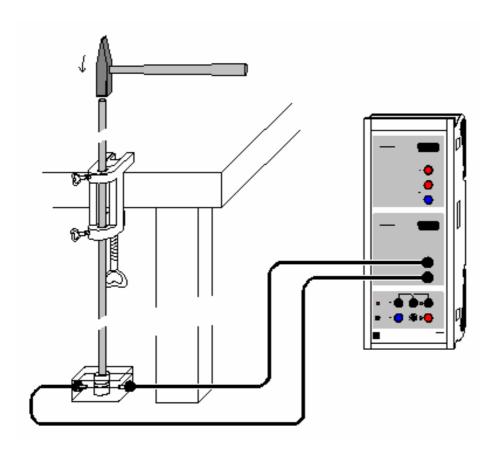

## ■ Beispiel laden

# Versuchsbeschreibung

Es werden die Schallgeschwindigkeiten in Aluminium-, Kupfer-, Messing- und Stahlstäben bestimmt. Zur Messung wird die Mehrfachreflexion eines kurzen Schallimpulses an den Stabenden ausgenutzt. Der Impuls wird durch Anticken des oberen Stabendes mit einem kleinen Hammer erzeugt und läuft zunächst nach unten. An beiden Stabenden wird er nacheinander mehrfach reflektiert, wobei die an einem Stabende ankommenden Impulse gegeneinander um  $\Delta t$  verzögert sind. Da  $\Delta t$  die Summe aus Hin- und Rücklaufzeit ist, ergibt sich die Schallgeschwindigkeit c zusammen mit der Stablänge s zu

 $c = 2s / \Delta t$ .

## **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Satz 3 Metallstangen	413 65
1	Stativstange, 150 cm	300 46
1	Piezoelektrischer Körper	587 25
1	Tischklemme, einfach	301 07
2	Kabel, 200 cm, schwarz	501 38

1 Kleiner Hammer

1 PC ab Windows 95/98/NT

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Metallstäbe ruhen auf dem piezoelektrischen Körper, der die Druckschwingungen des Schallimpulses in elektrische Schwingungen umwandelt. Diese werden an Eingang B des Sensor-CASSYs aufgezeichnet.



# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Messung mit F9 starten (wartet auf Triggersignal)
- Oberes Ende des ersten Metallstabs mit kleinem Hammer anticken (erzeugt Triggersignal)
- Experiment mit anderem Metallstab wiederholen oder Fehlmessung durch Letzte Messreihe löschen (rechte Maustaste auf Tabelle) eliminieren

# **Auswertung**

Die zeitlichen Abstände  $\Delta t$  der Minima oder Maxima lassen sich z. B. durch senkrechte Markierungslinien, Peakschwerpunkte oder direkte Differenzmessung bestimmen. Da  $\Delta t$  die Summe aus Hin- und Rücklaufzeit ist, ergibt sich die Schallgeschwindigkeit c zusammen mit der Stablänge s zu

$$c = 2s / \Delta t$$
.

Im Beispiel ergeben sich folgende Schallgeschwindigkeiten

Metall	Messung	Literaturwert
Messing	3500 m/s	3300 m/s
Kupfer	3900 m/s	3710 m/s
Aluminium	5000 m/s	5040 m/s



# Fourier-Analyse von simulierten Signalen

- Beispiel laden (simuliertes Rechtecksignal)
- Beispiel laden (simuliertes Dreiecksignal)

#### Versuchsbeschreibung

Die Frequenzanalyse ist eine gebräuchliche Arbeitsmethode für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen zeitlich veränderliche Signale (oder Messwerte) auftreten. So ist beispielsweise in der Akustik die genaue Kenntnis der Obertöne eines Klangs für die künstliche Erzeugung von Klängen oder Sprache wichtig.

In diesem Versuch soll als Einstieg in das Thema der Fourier-Transformation zunächst die Fourier-Transformierte von einfachen periodischen Signalen untersucht werden. Dazu wird in einem ersten Schritt die Fourier-Transformierte eines nummerisch simulierten Signals berechnet und die Frequenzen und die zugehörigen Amplituden bestimmt (Fourier-Analyse). Auf der Basis dieser harmonischen Analyse wird dann in einem zweiten Schritt das zeitlich veränderliche Signal entsprechend dem Fourier-Theorem wieder zusammengesetzt und mit der theoretisch berechneten Fourier-Reihe sowie dem nummerisch simulierten Ausgangssignal verglichen (Fourier-Synthese).

## **Benötigte Geräte**

1 CASSY Lab 524 200

1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Versuchsaufbau

Hinweis: Dieser Versuch ist ein reines Simulationsexperiment zur Fourier-Analyse mit CASSY Lab. Für ein Experiment mit elektrischen Signalen entsprechender Signalform sei auf den nächsten Versuch verwiesen. Die in diesem Versuch untersuchten Signale S1 werden durch folgende Funktionen erzeugt:

Dreieck: S1 = 4\*(1-2\*saw(f\*t))Rechteck: S1 = 4\*(2\*square(f\*t)-1)

mit der Frequenz f = 0.5 Hz.

#### Anmerkungen zur Fourier-Transformation

Ein kontinuierliches zeitabhängiges Signal S1 wird bei der computergestützten Messung zu bestimmten Zeiten abgetastet. Auf diese Weise erhält man ein digitalisiertes Signal, das mit üblichen Methoden der digitalen Signalverarbeitung (Signal-Rausch-Verbesserung durch Fourier-Transformation, Glätten des Signals durch Mittelung, etc.) weiter bearbeitet werden kann. Das Abtast-Theorem gibt Auskunft darüber, in welchem zeitlichen Abstand eine Messung des Signalwertes erfolgen muss, damit der zeitliche Signalverlauf wieder aus den digitalisierten Messwerten (Datenpunkte) ermittelt werden kann. Für eine Digitalisierung des Signals mit hinreichender Anzahl von Datenpunkte muss die Abtastfrequenz fs mindestens doppelt so groß sein wie die maximale im Signal vorkommende Frequenz fmax, welche die Breite des Frequenzspektrums bestimmt. Ist diese Bedingung  $fs \ge 2f_{max}$  nicht erfüllt, d. h. erfolgte die Digitalisierung des Signals bei einer zu niedrigen Abtastfrequenz fs, so wird die Form des Signals nicht mehr erfasst (Aliasing). Die Abtastfrequenz fs des Messsignals wird in den Messparametern (**F5**) durch das eingestellte Intervall  $\Delta t=1/fs$  festgelegt.

Das Fourier-Theorem besagt, dass jedes zeitabhängige periodische Signal S1 durch eine gewichtete Summe von cos- oder sin-Funktionen dargestellt werden kann. Für die im Versuch verwendete Dreieckbzw. Rechteckfunktion lautet die Reihenentwicklung von S1 nach trigonometrischen Funktionen bis zur neunten Ordnung:

#### Dreieck:

```
S_3 = 4*8/3.14^2 * (\cos(360*f*t) + 1/9*\cos(360*3*f*t) + 1/25*\cos(360*5*f*t) + 1/49*\cos(360*7*f*t)) + 1/81*\cos(360*9*f*t)
```

#### Rechteck:

```
S3 = 4*4/3.14* (\sin(360*f*t) + 1/3*\sin(360*3*f*t) + 1/5*\sin(360*5*f*t) + 1/7*\sin(360*7*f*t) + 1/9*\sin(360*9*f*t)
```



Der zeitabhängigen Funktion S1 entspricht somit ein diskretes Frequenzspektrum mit unterschiedlichen Amplituden. Die Verallgemeinerung dieser Zerlegung auf nicht periodische Signale führt zum Fourier-Integral, das dem zeitabhängigen Signal S1 ein kontinuierliches Frequenzspektrum F1 zuordnet.

Die nummerische Berechnung des Frequenzspektrums F1 wird besonders effizient, wenn man ein digitalisiertes Signal von N=2^p Datenpunkten zugrundelegt. Statt der ca. N² Rechenoperationen müssen dann nur noch ca. N·log2(N) Operationen durchgeführt werden. Dieses wesentlich weniger zeitaufwändige Verfahren bezeichnet man als schnelle Fourier-Transformation (FFT).

Mit einem solchen Algorithmus berechnet CASSY Lab das Frequenzspektrum F1. Zunächst werden allerdings die vorhandenen Messpunkte derart gewichtet, dass Nichtperiodizitäten am Rand keine große Rolle mehr spielen (am Rand mit 0, in der Mitte maximal, Kaiser-Bessel-Wichtung(4.0)). Damit auch immer genau 2^p Messpunkte vorliegen, werden eventuell fehlende Messpunkte noch durch Nullen aufgefüllt.

Als Ergebnis der FFT zeigt CASSY Lab insgesamt N/2 reelle Amplituden (Phasenunterschiede werden also nicht mit ausgewertet). Diese Amplituden werden "überhöht" dargestellt, also Ai := Ai-1 + Ai + Ai+1 damit die Amplituden scharfer Peaks in etwa der Theorie entsprechen. Ohne diese Überhöhung müsste für eine Amplitudenermittlung, wie sie in diesem Versuch durchgeführt wird, die Summe über alle Amplituden eines Peaks berechnet werden.

Die Verwendung der FFT zur Frequenzanalyse ist durch zwei grundlegende Beziehungen begrenzt. Die erste Beziehung verknüpft die höchste noch analysierbare Frequenz fmax mit der Abtastfrequenz fs:

fmax = fs/2.

Jede Frequenz, die größer als fmax ist, erscheint im Frequenzspektrum zwischen Null und fmax und ist damit nicht mehr unterscheidbar von den Frequenzanteilen, die tatsächlich zwischen 0 und fmax liegen. Die damit verbundene Veränderung der Signalform bezeichnet man mit Aliasing.

Die zweite Beziehung verbindet die Auflösung des Frequenzspektrums  $\Delta f$  (= Abstand benachbarter Punkte des Frequenzspektrums) mit der Abtastfrequenz fs:

$$\Delta f = fmax/(N/2-1) = fs/(N-2) = 1/\Delta t/(N-2) \approx 1/T$$

mit T =  $(N-1)\cdot\Delta t$ .

Das bedeutet, dass eine Erhöhung der Auflösung des Frequenzspektrums nur durch eine längere Messzeit zu erreichen ist.

# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden (simuliertes Rechtecksignal)
- Einstellungen laden (simuliertes Dreiecksignal)
- Den Zeiger im Anzeigeinstrument Frequenz f mit der Maus auf die gewünschte Frequenz einstellen.
- **F9** simuliert die Aufnahme der Messwerte der Funktion S1. Die Simulation dauert 50 s und nimmt dabei 500 Werte auf ( $\Delta t = 100$  ms).
  - Längere Aufnahmezeiten erhöhen, kürzere Aufnahmezeiten erniedrigen schrittweise die Frequenzauflösung der FFT.

# Auswertung


Bereits während der Simulation der Messwertaufzeichnung erscheint das S1(t)-Diagramm des nummerisch simulierten Signals. Nach der Simulation steht die Fourier-Transformierte F1 in der Darstellung **Frequenzspektrum** zur Verfügung.

Das Frequenzspektrum zeigt Peaks bei ungeraden Vielfachen der eingestellten Signalfrequenz f, also bei f, 3\*f, 5\*f, 7\*f, usw.. Die Amplituden der Peaks können durch Anklicken der Kurve oder aus der Koordinatenanzeige abgelesen werden.

Zur Analyse nun die ersten 5 Amplituden als Faktoren vor den sin(360\*n\*f\*t)-Funktionen in den Einstellungen A1, A3, A5, A7 und A9 eintragen. In der Darstellung **Fourier-Analyse** wird der zeitliche Verlauf der einzelnen Terme A1, A3, A5, A7 und A9 wiedergegeben.

Im Diagramm **Fourier-Synthese** wird die experimentell bestimmte Reihe S2 = A1 + A3 + A5 + A7 + A9 mit der theoretisch bestimmten Fourier-Reihe S3 und der nummerisch simulierten Funktion S1 verglichen. Es zeigt sich, dass in praktischen Anwendungen das periodische Signal S1 hinreichend gut durch ein trigonometrisches Polynom S2 bzw. S3 von wenigen Termen angenähert werden kann.

# Fourier-Analyse von Signalen eines Funktionsgenerators

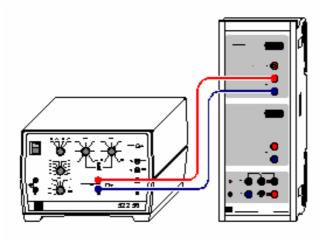



auch für Pocket-CASSY geeignet

- Beispiel laden (Rechteck)
- Beispiel laden (Dreieck)
- Beispiel laden (Sägezahn)

#### Versuchsbeschreibung

Die Frequenzanalyse ist eine gebräuchliche Arbeitsmethode für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen zeitlich veränderliche Signale (oder Messwerte) auftreten. So ist beispielsweise in der Akustik die genaue Kenntnis der Obertöne eines Klangs für die künstliche Erzeugung von Klängen oder Sprache wichtig. In der Messtechnik wird die Fourier-Analyse beispielsweise zur Überprüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) von elektronischen Geräten eingesetzt.

In diesem Versuch soll als Einstieg in das Thema der Fourier-Transformation die Fourier-Transformierte von einfachen periodischen Signalformen untersucht werden. Dazu werden elektrische (Analog-)Signale eines Funktionsgenerators eingelesen und die Fourier-Transformierte des nun digital vorliegenden Signals berechnet. Aus dem Frequenzspektrum werden die Amplituden der verschiedenen Harmonischen bestimmt (Fourier-Analyse) und mit den theoretisch berechneten verglichen.

# **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Funktionsgenerator P	522 56
1	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501 45

1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Das variabel einstellbare Signal des Funktionsgenerators wird am Eingang A des Sensor-CASSYs angeschlossen.

Hinweis: Dieser Versuch befasst sich mit der Fourier-Analyse von digitalisierten Signalen eines Funktionsgenerators. Für Anmerkungen zur schnellen Fourier-Transformation und die Behandlung der Fourier-Synthese von entsprechenden Signalformen sei auf den vorangegangenen Simulationsversuch verwiesen.

#### Experimentierhinweise

Für manche Funktionsgeneratortypen kann es notwendig sein, den DC-Offset exakt auf Null zu stellen, um keine verfälschten Frequenzspektren zu erhalten.



#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden (Rechteck)
- Einstellungen laden (Dreieck)
- Einstellungen laden (Sägezahn)
- Gewünschte Signalform und eine Frequenz von etwa 500 Hz am Funktionsgenerator einstellen (DC-Offset auf Null stellen).
- Zur Aufnahme des Signals Messung mit F9 starten.
- Gegebenenfalls die Abtastrate (Intervall) und die Anzahl der Messpunkte im Fenster Messparameter (F5) entsprechend der gewählten Signalfrequenz anpassen, um ein hinreichend aufgelöstes Frequenzspektrum zu erhalten.

#### Auswertung

Bereits während der Aufnahme des Signals erscheint das UA1(t)-Diagramm, das eine digitalisierte Version des Analogsignals des Funktionsgenerators darstellt. Nach der Aufnahme des Signals UA1 steht in der Darstellung **Frequenzspektrum** die Fourier-Transformierte von UA1 zur Frequenzanalyse zur Verfügung.

Zur Bestimmung der Amplituden der Harmonischen jeweils nacheinander folgende Schritte durchführen:

- Darstellung Frequenzspektrum wählen und mit einer Waagerechten Linie (Alt+W) die Amplituden der Harmonischen der N-ten Ordnung bestimmen.
- Zur Darstellung Auswertung wechseln, Wert der Amplitude mit der Maus von der Statuszeile in die vorbereitete Tabelle in die Spalte A ziehen (Drag & Drop) und Ordnung N der N-ten Harmonischen eingeben.


Durch eine anschließende Freie Anpassung (**Alt+F**) einer Hyperbel A/ $x^2$  (Dreieck: N = 1, 3, 5, ...) bzw. A/x (Rechteck N = 1, 3, 5, ...; Sägezahn: N = 1, 2, 3, 4, ...) kann die theoretische berechnete Abhängigkeit der Amplituden von der N-ten Harmonischen für die jeweilige Signalform bestätigt werden. Alternativ kann die theoretisch gefundene Abhängigkeit der Amplituden von N auch durch Umrechnen der x-Achse in  $1/x^2$  (Dreieck) bzw. Achse in 1/x (Rechteck, Sägezahn) mit anschließender Anpassung einer Ursprungsgeraden überprüft werden.

Je nach gewählter Signalform zeigt das Frequenzspektrum auch Beiträge kleiner Amplitude bei Frequenzen zwischen den theoretisch berechneten Frequenzen (z. B. beim Dreiecksignal zwischen N = 1, 3, 5, ...). Dies ist eine Folge der nicht idealen Signalform und der nicht strengen Periodizität des Signals während des Aufnahmezeitfensters.

Hinweis: Ein Beispiel zur Verwendung von Power-CASSY als Funktionsgenerator zeigt der Versuch zur Tonsynthese.



# **Tonanalyse**

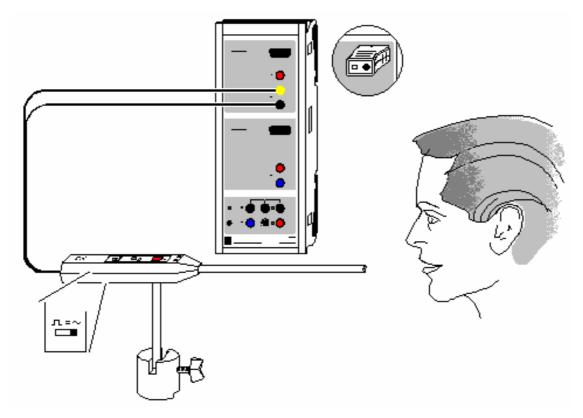



auch für Pocket-CASSY geeignet

- Beispiel laden (Universalmikrofon)
- Beispiel laden (Mikrofon S)

# Versuchsbeschreibung

Es werden Klänge unterschiedlicher Klangfarbe und –höhe (z. B. Vokale der menschlichen Stimme oder Klänge von Musikinstrumenten) durch eine Fourieranalyse untersucht. Das entstehende Frequenzspektrum zeigt die Grundfrequenz fo mit den angeregten Oberwellen.

Die verschiedenen Vokale unterscheiden sich vor allem in den Oberwellenamplituden. Die Grundfrequenz fo hängt von der Stimmhöhe ab. Sie beträgt bei hohen Stimmen ca. 200 Hz und bei tiefen Stimmen ca. 80 Hz. Die Stimmfarbe wird durch die etwas unterschiedliche Anregung der Oberwellen bestimmt. Das gleiche gilt für die Klangfarbe von Musikinstrumenten.

## **Benötigte Geräte**

-	Sensor-CASSY CASSY Lab	524 010 524 200
1	Universalmikrofon mit Sockel	586 26 300 11
OC	der	
1	Mikrofon S	524 059

1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Das Universalmikrofon (Funktionsschalter auf Betriebsart "Signal" und Einschalten nicht vergessen) wird an Eingang A des Sensor-CASSYs angeschlossen.

158 CASSY Lab



## Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden (Universalmikrofon)
- Einstellungen laden (Mikrofon S)
- · Messung mit F9 starten
- Standard-Darstellung wählen und Signalstärke mit Einsteller am Mikrofon optimieren
- Verschiedene Töne aufnehmen und vergleichen (Standard-Darstellung zeigt Signalform und Frequenzspektrum zeigt Fourieranalyse)
- Zum Stoppen der Messung die **wiederholende Messung** im Messparameterfenster ausschalten oder sofort nach Ende einer Aufnahme **F9** drücken
- Zum Vergleich verschiedener Frequenzspektren **neue Messreihe anhängen** im Messparameterfenster wählen und Messung erneut mit **F9** starten


# **Auswertung**

Die Grundfrequenz sowie die Frequenzen der Oberwellen lassen sich leicht mit der Koordinatenanzeige oder auch als Peakschwerpunkte im **Frequenzspektrum** (mit der Maus anklicken) bestimmen. Die Amplituden der Oberwellen machen die Klangfarbe des aufgenommenen Klangs aus.

Da das menschliche Ohr Schallintensitäten logarithmisch wahrnimmt, ist die logarithmische Darstellung des Frequenzspektrums dem Hörempfinden des menschlichen Ohr besser angepasst als die lineare Darstellung. Die logarithmische Darstellung kann durch Klick mit der rechten Maustaste auf die y-Achse des Frequenzspektrums gewählt werden (Minimum dabei etwas hochsetzen, z. B. auf –3).



# **Tonsynthese**

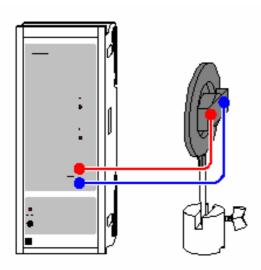

# ■ Beispiel laden

#### Versuchsbeschreibung

Es werden Klänge unterschiedlicher Klangfarbe und –höhe erzeugt, indem die Grundfrequenz fo, sowie das Amplitudenverhältnis zwischen der Grundfrequenz und ihren Oberwellen vorgegeben wird. Das Ergebnis ist als Oszillogramm und als Frequenzspektrum sichtbar, sowie als Ton hörbar.

Es zeigt sich, dass die Klangfarbe durch die spezielle Anregung der Oberwellen bestimmt wird. Außerdem lässt sich exemplarisch zeigen, wie sich periodische Funktionen durch die harmonische Zusammensetzung von Sinusschwingungen erzeugen lassen.

#### **Benötigte Geräte**

1	Power-CASSY	524 011
1	CASSY Lab	524 200
1	Breitbandlautsprecher	587 08
1	Sockel	300 11
1	Paar Kabel, 100 cm, rot und blau	501 46

1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Der Lautsprecher wird an den Ausgang des Power-CASSYs angeschlossen.

## Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Eine durch Sinusschwingungen angenährte Rechteckschwingung wird am Lautsprecher ausgegeben. Als Formel für die Kurvenform wurde synth(1:0:1/3:0:1/5:0:1/7:0:1/9:0:1/11:0:1/13:0:1/15:0:1/17:0:1/19) angegeben. Dies ist eine Abkürzung für die ebenfalls mögliche ausgeschriebene Form 1\*sin(360\*x)+ 0\*sin(2\*360\*x)+ 1/3\*sin(3\*360\*x)+ 0\*sin(4\*360\*x)+ 1/5\*sin(5\*360\*x)+ 0\*sin(6\*360\*x)+ 1/7\*sin(7\*360\*x)+ 0\*sin(8\*360\*x)+ 1/9\*sin(9\*360\*x)+ 0\*sin(10\*360\*x)+ 1/11\*sin(11\*360\*x)+ 0\*sin(12\*360\*x)+ 1/13\*sin(13\*360\*x)+ 0\*sin(14\*360\*x)+ 1/15\*sin(15\*360\*x)+ 0\*sin(16\*360\*x)+ 1/17\*sin(17\*360\*x)+ 0\*sin(18\*360\*x)+ 1/19\*sin(19\*360\*x).
- In den Einstellungen U1 lassen sich einzelne Oberwellenamplituden verändern. Grundfrequenz und Amplitude lassen sich dort ebenfalls einstellen. Das Ergebnis ist sofort hörbar, sowie nach dem Start einer Messung mit **F9** auch sichtbar.
- Zur angenäherten Synthese eines Dreiecks kann synth(1:0:-1/3^2:0:1/5^2:0:-1/7^2:0:1/9^2: 0:-1/11^2:0:1/13^2) verwendet werden. Die Formel muss nicht eingetippt werden, sondern kann auch über Kopieren aus dem Hilfesystem und Einfügen in das Formeleingabefeld (rechte Maustaste) übertragen werden.




# **Auswertung**

Nach einer Aufzeichnung mit **F9** lässt sich in der Darstellung **Frequenzspektrum** (mit der Maus anklicken) leicht eine Änderung der Verhältnisse der Oberwellenamplituden verfolgen.



CASSY Lab 161

# Umwandlung von mechanischer Energie in thermische Energie

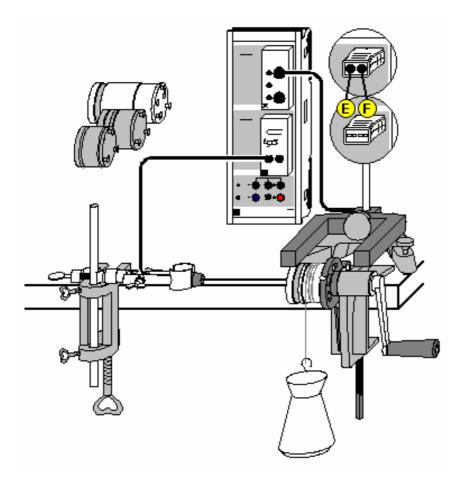



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

#### **Sicherheitshinweis**

Standort des Experimentators so wählen, dass Verletzungen durch ein versehentliches Herabfallen des 5 kg-Wägestücks ausgeschlossen sind.

# Versuchsbeschreibung

Die Energie gehört zu den fundamentalen Größen der Physik. Energie tritt in unterschiedlichen Erscheinungsformen auf, die sich ineinander umwandeln lassen. Die gesamte Energie bleibt bei Umwandlungsprozessen in einem abgeschlossenen System erhalten.

In diesem Versuch wird die Äquivalenz von mechanischer Energie  $E_m$  und thermischer Energie  $E_th$  experimentell nachgewiesen. Dazu wird im Experiment durch Kurbeln gegen die Reibungskraft mechanische Arbeit  $E_m$  verrichtet. Dies führt zu einer Temperaturerhöhung des Kalorimeters und damit zu einer Erhöhung der thermischen Energie  $E_th$ . Durch die Messung der Temperatur  $\vartheta$  und der Anzahl der Umdrehungen können die beiden Energieformen mit den Einheiten Newtonmeter (Nm) und Joule (J) quantitativ erfasst werden, so dass ihre zahlenmäßige Äquivalenz experimentell nachweisbar wird:  $E_m = E_th$ .

#### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200

1 Timer-Box oder Timer S 524 034 oder 524 074

1		1
1	Ľ	D

1 1 od	Temperatur-Box Temperaturfühler NiCr-Ni er	524 045 666 193
1	NiCr-Ni-Adapter S Temperaturfühler NiCr-Ni, Type K	524 0673 529 676
1 1 1	Gabellichtschranke, infrarot Verbindungskabel, 6-polig, 1,5 m Wärmeäquivalent-Grundgerät Kalorimeter	337 46 501 16 388 00
	z.B. Wasserkalorimeter oder	388 01
	Kupferkalorimeter mit Heizung oder	388 02
	Aluminiumkalorimeter mit Heizung oder	388 03
	Großes Aluminiumkalorimeter mit Heizung	388 04
1	Tischklemme, einfach	301 07
1	Kleiner Stativfuß, V-förmig	300 02
1	Stativstange, 10 cm	300 40
1	Stativstange, 25 cm	300 41
1	Muffe mit Klemme	301 11
1	Wägestück mit Haken, 5 kg PC ab Windows 95/98/NT	388 24

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

- Wärmeäquivalent-Grundgerät an einer Tischecke befestigen.
- Tischklemme an der Tischkante im Abstand von ca. 40 cm zur Kunststoffhalterung des Grundgerätes befestigen. Muffe mit Klemme mit Hilfe des Stativstange 25 cm zur späteren Fixierung des Temperaturfühlers entsprechend Abbildung einspannen.
- Kalorimeter mit der Bohrung nach oben aufstellen und Wasser in die Öffnung einfüllen.
- Dichtung in Bohrung einsetzen und mit Verschlussschraube festhalten.
- Gefüllten Kalorimeterkörper ins Grundgerät einsetzen. Dazu Nietzapfen am Boden des Kalorimeters in die Schlitze der Kunststoffhalterung stecken und so drehen, dass sie einrasten und der Kalorimeterkörper fest sitzt.
- Temperaturfühler so weit wie möglich in die Kalorimeteröffnung einführen und Verschlussschraube des Kalorimeters anziehen. Temperaturfühler mit dem bereits vorbereiteten Stativmaterial entsprechend Abbildung fixieren.
- 5 kg-Wägestück unterhalb den Kalorimeterkörper stellen.
- Das Nylonband ca. 4 (maximal 6) Mal um das Kalorimeter wickeln und an dem auf dem Boden stehenden Wägestück 5 kg befestigen. Das Wägestück soll an der Kurbelseite nach vorne herunterhängen.
- Kurbel betätigen und überprüfen, ob das 5 kg-Wägestück um einige cm angehoben wird und bei weiterem Drehen auf einer konstanten Höhe gehalten wird. Falls es zu weit angehoben wird, Windungszahl des Nylonbandes verringen; hebt es nicht vom Boden ab, Anzahl der Windungen erhöhen.
- Gabellichtschranke zur Messung der Umdrehungen nEA1 (=Anzahl der Verdunklungen) mit Hilfe des Stativfußes entsprechend Abbildung positionieren und über die Timer-Box an den Eingang A des Sensor-CASSYs anschließen.
- Temperaturfühler zur Messung der Temperatur ϑB11 über die Temperatur-Box (Buchse T1) am Eingang B des Sensor-CASSYs anschließen.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Verdunkelung auf Null stellen, dazu in Einstellungen nEA1  $ightarrow 0 \leftarrow$  betätigen.
- · Messung mit F9 starten.
- Kurbel drehen und Temperaturzunahme in Abhängigkeit von den durchgeführten Umdrehungen messen.
- Messung bei gewünschter Endtemperatur ϑB11 wieder mit **F9** stoppen.



#### **Auswertung**

Bereits während der Messung wird die Temperatur  $\vartheta$ B11 als Funktion der Umdrehungen nEA1 grafisch dargestellt. Im vorbereiteten Diagramm **Auswertung** wird die thermische Energie gegen die mechanische Energie aufgetragen, welche beim Kurbeln gegen die Reibung aufgebracht wurde. Die mechanische Energie Em ergibt sich aus dem Produkt von Reibungskraft F und dem zurückgelegten Weg s:

 $Em = F \cdot s$ 

 $mit F = m \cdot g$  F = Reibungskraft

m = Masse des Wägestücks = 5 kg g = Erdbeschleunigung = 9,81 m/s<sup>2</sup>

und  $s = N \cdot d \cdot \pi$  s = Reibungsweg

N = Zahl der Umdrehungen

d = Durchmesser des Kalorimeters = 0,047 m

Damit gilt nun für die mechanische Energie: Em =  $m \cdot g \cdot d \cdot \pi \cdot N$ .

Die Zunahme der thermischen Energie in Folge der Temperaturerhöhung ist gegeben durch:

Eth =  $C \cdot (\vartheta_2 - \vartheta_1)$ 

Die Wärmekapazität C hängt vom verwendeten Kalorimeter ab und muss gemäß folgender Tabelle in den Einstellungen C eingetragen werden:


Kalorimeter Wärmekapazität C/(J/K)

Wasser (388 01)  $\begin{array}{ll} 40 + \text{mH2O/g} \cdot 4,2 \text{ (mit Masse des Wassers in g)} \\ \text{Kupfer (388 02)} & 264 + 4,2 \text{ (für 1 g Wasserfüllung in der Bohrung)} \\ \text{Aluminium, groß (388 04)} & 188 + 4,2 \text{ (für 1 g Wasserfüllung in der Bohrung)} \\ 384 + 4,2 \text{ (für 1 g Wasserfüllung in der Bohrung)} \\ \end{array}$ 


Durch Anpassen einer Ursprungsgerade kann die Äquivalenz zwischen mechanischer Energie Em und thermischer Energie Eth bestätigt werden. Die Steigung der Ursprungsgeraden ist gewöhnlich etwas kleiner als 1. Dies ist auf nicht erfasste Wärmeverluste wie z. B. thermischer Kontakt des Kalorimeters mit der Nylonschnur oder der Kunststoffhalterung zurückzuführen.



# Umwandlung von elektrischer Energie in thermische Energie

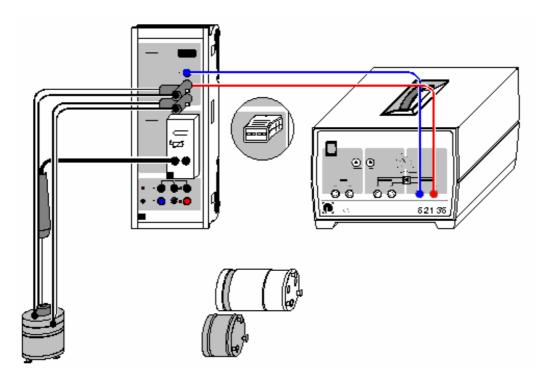

## Alternativ:

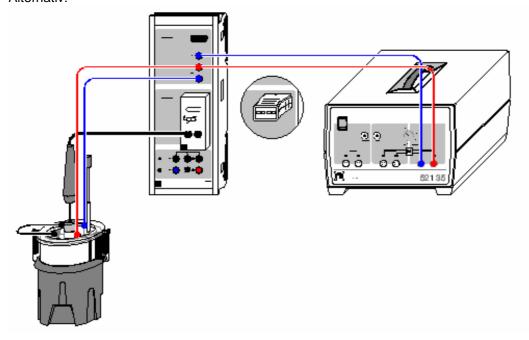

# ■ Beispiel laden

## **Sicherheitshinweis**

Implosionsgefahr: Das Dewargefäß ist ein dünnwandiges, hochevakuiertes Glasgefäß, das bei mechanischer Belastung zerspringen kann.

Dewargefäß nicht stoßen oder fallen lassen.

Keine harten Gegenstände in den Glasmantel fallen lassen.

Glasmantel nicht mit scharfen Gegenständen verkratzen.

# Versuchsbeschreibung

Energie ist ein Maß für gespeicherte Arbeit. Sie kann in unterschiedlichen Erscheinungsformen auftreten, die sich ineinander umwandeln lassen. In einem abgeschlossenen System bleibt bei Umwandlungsprozessen die gesamte Energie erhalten. Die Energie gehört daher zu den fundamentalen Größen der Physik.

In diesem Versuch wird die Äquivalenz von elektrischer Energie Eel und thermischer Energie Eth experimentell nachgewiesen. Dazu wird die im Experiment zugeführte elektrische Energie Eel in der Heizwicklung (oder Heizspirale) in Wärme Eth umgewandelt. Dies führt zu einer Temperaturerhöhung des Kalorimeters (oder Wassers, in welches die Heizspirale eingetaucht ist). Durch die parallele Messung des Stromes I und der Temperatur  $\vartheta$  als Funktion der Zeit t können bei bekannter konstanter Spannung U die beiden Energieformen mit den Einheiten Wattsekunde (Ws) und Joule (J) quantitativ erfasst werden, so dass ihre zahlenmäßige Äquivalenz experimentell nachweisbar wird: Eel = Eth.

#### **Benötigte Geräte**

	_	
1 1	Sensor-CASSY CASSY Lab	524 010 524 200
1 1	Temperatur-Box Temperaturfühler NiCr-Ni	524 045 666 193
od	er	
1	NiCr-Ni-Adapter S Temperaturfühler NiCr-Ni, Type K	524 0673 529 676
1	Spannungsquelle, 012 V z. B. Kleinspannungs-Stelltrafo S	521 35
1	Kalorimeter mit Anschlusskabel, z.B.	
	Kupferkalorimeter mit Heizung	388 02
	Paar Anschlusskabel für Kalorimeter oder	388 06
	Aluminiumkalorimeter mit Heizung	388 03
	Paar Anschlusskabel für Kalorimeter oder	388 06
	Großes Aluminiumkalorimeter mit Heizung	388 04
	Paar Anschlusskabel für Kalorimeter oder	388 06
	Gerät für Elektrisches Wärmeäquivalent	384 20
	Dewargefäß	386 48
	Becherglas, n.F. Duran, 250 ml	664 103
		665 755
	Messzylinder, Kunststoff-Fuß, 250 ml	
	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501 45
	Experimentierkabel, 50 cm, schwarz	501 28
1	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau PC ab Windows 95/98/NT	501 45

#### Versuchsaufbau mit Kalorimeter (siehe Skizze)

- Kalorimeter mit der Bohrung nach oben aufstellen und Wasser in die Öffnung einfüllen.
- Dichtung in Bohrung einsetzen und mit Verschlussschraube festhalten.
- Temperaturfühler so weit wie möglich in die Kalorimeteröffnung einführen und Verschlussschraube des Kalorimeters anziehen.
- CASSY zur Strom- und Spannungsmessung entsprechend Abbildung an den Kleinspannung-Stelltrafo S anschließen.
- Heizwicklung des Kalorimeter an den Eingangs A des Sensor-CASSYs anschließen (dazu die großen Bananenstecker zusammenstecken und ein Kabel auf die blaue und eines an die rote U-Sicherheitsbuchse legen)
- Temperaturfühler zur Messung der Temperatur ϑB11 über die Temperatur-Box (Buchse T1) am Eingang B des Sensor-CASSYs anschließen.



#### Versuchsaufbau mit elektrischem Wärmeäquivalent (siehe Skizze)

- Dewargefäß mit Hilfe des Messzylinders mit ca. 200 ml Wasser füllen.
- Gerät für elektrisches Wärmeäquivalent in das Dewargefäß setzen und Deckel mit Hilfe der Federn befestigen.
- Temperaturfühler mit aufgesetzter Dichtungsscheibe über den Gummistopfen in das Dewargefäß eintauchen. Temperaturfühler sollte durch die Dichtungsscheibe gehalten werden, so dass sich die Spitze des Sensors unterhalb der Heizspirale befindet. Die Spitze des Temperaturfühler sollte jedoch den Boden des Dewargefäßes nicht berühren.
- CASSY zur Strom- und Spannungsmessung entsprechend Abbildung an den Kleinspannung-Stelltrafo S anschließen.
- Heizspiralen in Reihenschaltung an den Eingangs A des Sensor-CASSYs anschließen (dazu von jeder Heizspirale ein Kabel an die blaue bzw. rote U-Sicherheitsbuchse legen und die noch freien Anschlüsse der beiden Heizspiralen mit einem schwarzen Kabel verbinden).
- Temperaturfühler zur Messung der Temperatur ϑB11 über die Temperatur-Box (Buchse T1) am Eingang B des Sensor-CASSYs anschließen.

# Experimentierhinweis

Bei der Durchführung des Versuches mit dem elektrischen Wärmeäquivalent muss während eingeschalteter Spannung das Wasser gerührt werden, damit eine gleichmäßige Erwärmung stattfindet. Dazu den Rührer während der Messung langsam auf und ab bewegen.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- In den Einstellungen IA1 als Messgröße **Spannung UA1** wählen.
- Kleinspannungs-Stelltrafo S einschalten und die Spannung UA1 auf ca. 9 V (Kalorimeter) bzw. ca.
   4 V (elektrisches Wärmeäquivalent) einstellen.
- Genauen Messwert UA1 ablesen und in den Einstellungen U als Parameter eintragen.
- Kleinspannungs-Stelltrafo S wieder ausschalten und in den Einstellungen UA1 als Messgröße wieder **Strom IA1** und als Messbereich **0** .. **2,1 A** wählen.
- Messung mit F9 starten.
- Nach Erreichen einer konstanten Anfangstemperatur ϑB11 Kleinspannungs-Stelltrafo S einschalten und bei gewünschter Endtemperatur ϑB11 wieder ausschalten.
- Messung nach Erreichen einer konstanten Endtemperatur mit F9 stoppen.

# **Auswertung**

Bereits während der Messung wird die Temperatur  $\vartheta$ B11 und der Strom IA1 als Funktion der Zeit grafisch dargestellt. Im vorbereiteten Diagram **Auswertung** wird die thermische Energie Eth =  $C \cdot (\vartheta$ B11 -  $\vartheta$ 1) gegen die elektrische Energie Eel =  $\Sigma$  U·I· $\Delta$ t aufgetragen. Die Wärmekapazität C hängt vom verwendeten Kalorimeter ab und muss gemäß folgender Tabelle in den Einstellungen C eingetragen werden:

Kalorimeter	Wärmekapazität C/(J/K)
Kupfer (388 02) Aluminium (388 03) Aluminium, groß (388 04) Elekt. Wärmeäquivalent (384 20)	264 + 4,2 (für 1 g Wasserfüllung in der Bohrung) 188 + 4,2 (für 1 g Wasserfüllung in der Bohrung) 384 + 4,2 (für 1 g Wasserfüllung in der Bohrung)
mit Dewargefäß (386 48)	(mH2O/g + 24) · 4,2 (mit Masse des Wassers in g und Wasserwert mD = 24 g des Dewargefäßes


Durch Anpassen einer Ursprungsgerade kann die Äquivalenz zwischen elektrischer Energie Eel und thermischer Energie Eth bestätigt werden. Die Steigung der Ursprungsgeraden liegt gewöhnlich etwas unterhalb vom erwarteten Wert von 1, was auf Wärmeverluste durch Wärmeabstrahlung zurückgeführt werden kann. Dies wird vor allem bei längeren Messzeiten deutlich, wo eine signifikante Abweichung der Messdaten von der Ursprungsgeraden zu beobachten ist.

#### Tipp

Alternativ kann die Messung auch manuell ausgewertet werden: Dazu den Mittelwert der Anfangstemperatur  $\vartheta_1$  und Endtemperatur  $\vartheta_2$  bestimmen (mit rechter Maustaste Mittelwert einzeichnen wählen) und die thermische Energie Eth =  $C \cdot (\vartheta_2 - \vartheta_1)$  berechnen. Mit Differenz messen (**Alt+D**) die Zeit der elektrischen Energiezufuhr bestimmen. Damit Eel =  $U \cdot I \cdot \Delta t$  berechnen und mit Eth vergleichen.



# pV-Diagramm eines Heißluftmotors

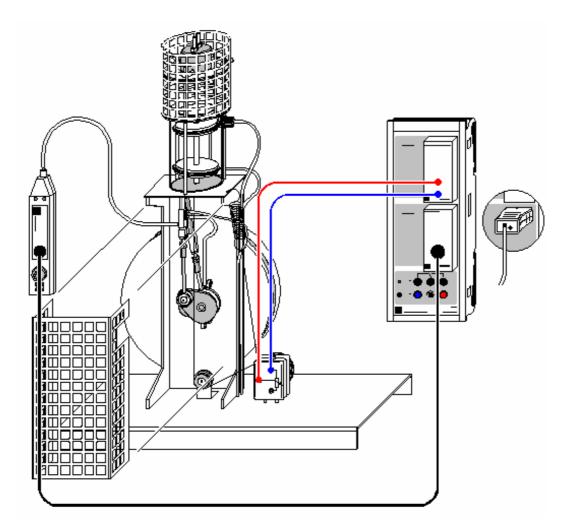



auch für Pocket-CASSY geeignet

#### ■ Beispiel laden

#### Sicherheitshinweise

- Vor jedem Versuch sicherstellen, dass die Heizplatte entsprechend der Kerben aufgesetzt ist und die Heizwendel den Verdrängerkolben nicht berührt.
- Der Heizkopf des Heißluftmotors kann sehr heiß werden und die Pleuel des Antriebs- und Verdrängerkolbens können bei laufendem Motor zu Verletzungen führen. Deshalb müssen die Berührungsschutzkörbe im Betrieb immer verwendet werden.
- Motor nicht ohne Kühlwasserdurchfluss benutzen. Der Motor kann sowohl an der Wasserleitung als auch mit einer Umwälzpumpe und einem Wasserreservoir benutzt werden, das zweckmäßigerweise mit destilliertem oder abgekochten Wasser (kalkfrei) gefüllt wird.
   Sollte sich bei Betrieb mit Leitungswasser der Durchfluss verringern, gesamtes System mit warmer Entkalkungslösung spülen.
- Beide Kolben des Heißluftmotors müssen regelmäßig mit Silikonöl geschmiert werden. Am einfachsten geht das, wenn man die Heizplatte abnimmt, den Verdrängerkolben in seine untere Stellung fährt und mit einem Trinkhalm Silikonöl mit einer Spritzflasche so einbringt, dass es an der Wand des Kolbens auf den oberen Dichtring nach unten läuft. Da die Dichtung nicht völlig dicht ist, gelangt nach kurzer Zeit auch genügend Öl auf den unteren Dichtring.
- Bei ungenügender Schmierung wird der Motor laut und läuft nur noch mit verringerter Drehzahl!
- Netzspule (562 21) nicht ohne Transformatorkern anschließen.



#### Versuchsbeschreibung

Thermodynamische Kreisprozesse werden häufig als geschlossene Kurven in einem pV-Diagramm (p: Druck, V: Volumen) beschrieben. Die dem System je nach Umlaufsinn entnommene oder zugeführte Arbeit entspricht dann der durch die Kurve eingeschlossenen Fläche.

Im Versuch wird das pV-Diagramm des Heißluftmotors als Wärmekraftmaschine aufgezeichnet. In Abhängigkeit von der Zeit t misst ein Drucksensor den Druck p im Zylinder und ein Wegaufnehmer die Position s des Arbeitskolbens, aus der das eingeschlossene Volumen V berechnet wird. Die Messwerte werden auf dem Bildschirm direkt in einem pV-Diagramm dargestellt. Zur weiteren Auswertung wird die als Kolbenreibung verrichtete mechanische Arbeit

$$W = -\int p \cdot dV$$

pro Umlauf berechnet.

## **Benötigte Geräte**

1 1 1	Sensor-CASSY CASSY Lab Stromquellen-Box Wegaufnehmer	524 010 524 200 524 031 529 031
1	B-Box mit Drucksensor und Verbindungskabel, 6-polig	524 038 529 038 501 16
od	ler	
1	Drucksensor S, ±2000 hPa	524 064
1	Heißluftmotor	388 182
1	Angelschnur	309 48
1	Schraubenfeder	352 08
1	U-Kern mit Joch	562 11
1	Spannvorrichtung	562 12
1	Netzspule, 500 Windungen	562 21
1	Kleinspannungsspule, 50 Wnd.	562 18
2	PVC-Schlauch, Ø 8 mm	307 70
1	Tauchpumpe 12 V	388 181
1	Kleinspannungs-Netzgerät	521 230
1	Kanister	604 307
2	Kabel, 100 cm, schwarz	501 33
1	Paar Kabel, 100 cm, rot und blau	501 46
1	Wasserbehälter 10 I	

1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Der zerlegbare Transformator wird montiert und das Joch fest aufgespannt.

Die Heizplatte wird entsprechend Gebrauchsanleitung montiert und die Heizung mit den beiden Experimentierkabeln an die beiden äußersten Buchsen der Kleinspannungsspule angeschlossen.

Der Schlauch des Drucksensors wird an den Druckstutzen des Arbeitskolben-Pleuels angeschlossen. Der Drucksensor wird über die B-Box an Eingang B des Sensor-CASSYs angeschlossen. Der Wegaufnehmer wird mit zwei Kupplungssteckern auf der Grundplatte befestigt und ein Faden entsprechend Skizze geschlungen und über die Stromquellen-Box an Eingang A angeschlossen. Der Arbeitskolben hat nach unten einen Stift mit Öse zum Befestigen des Fadens. Die Rückholfeder wird in das Loch am Gestellkopf eingehängt. Sie muss im unteren Totpunkt bereits Spannung aufweisen. Faden zweimal um die Rolle des Wegaufnehmers schlingen, damit kein Schlupf auftritt! Die Stellung des Potentiometers muss so eingestellt werden, dass im oberen Totpunkt des Arbeitszylinders ein Volumen von ca. 50 cm³ angezeigt wird.



# Versuchsdurchsführung

- Einstellungen laden
- Test der richtigen Einstellung des Wegaufnehmers: Der Motor wird einmal von Hand durchgedreht und beobachtet, ob die Volumenanzeige innerhalb des Messbereiches ist. Ist das nicht der Fall, wird der Faden leicht entspannt und das Rad des Wegaufnehmers bis zur korrekten Anzeige verdreht.
- Heizung mittels Schalter an der Netzspule einschalten. Beim ersten Start ist es sinnvoll, ca. 1 Minute zu warten, bevor man den Motor anwirft, damit das Gas für einen leichten Anlauf heiß genug wird. Bei weiteren Versuchen kann man den Motor starten, wenn die Heizwendel zu glühen beginnt.
- Messung mit F9 starten. Es werden die voreingestellte Anzahl Messpunkte automatisch gemessen und dargestellt; die Messung ist auf wenige Umläufe eingestellt, damit das folgende Integrieren einfacher wird.

#### **Auswertung**

Volumenbestimmung (bereits im Beispiel durchgeführt): Der Innendurchmesser des Arbeitszylinders beträgt 60 mm, womit sich eine Kolbenfläche von 28,3 cm² ergibt. Zusammen mit dem Weg sa1 ergibt sich die Formel für das Volumen mit dem dazugehörigen Messinstrument.

Die Arbeit pro Umlauf ergibt sich aus der eingeschlossenen Fläche. Man erhält sie folgendermaßen: Integral berechnen (Peakfläche) im Auswertungsmenü (rechte Maustaste im Diagramm) wählen und einen Umlauf markieren (Anfangspunkt anklicken und Umlauf bei gedrückter Maustaste abfahren). Die Messpunkte, die zur Integration beitragen, werden farblich anders dargestellt. Es ist in der Regel nicht zu erreichen, dass alle Messpunkte eines Umlaufs erfasst werden; es ist aber auch für die Berechnung der Fläche unerheblich, wenn ein oder zwei Punkte durch eine Gerade substituiert werden. Nach dem Loslassen der Maustaste wird die Fläche ausgefüllt und der Flächeninhalt in der Statuszeile angezeigt.


Im Beispiel erhält man für die Arbeit W etwa W = 18900 hPa·cm³ = 1,89 Nm.

#### **Anmerkung**

Die Leistung des Motors erhält man zu P = W · f mit der Leerlauf-Drehfrequenz f.

Die Frequenz f kann man mit einer Lichtschranke und einem Zählgerät ermitteln. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung des **Frequenzspektrums** (mit der Maus anklicken). Für eine bessere Frequenzauflösung müssen allerdings mehr Messwerte als im Beispiel registriert werden (Anzahl im Messparameter-Fenster von 125 z. B. auf 2000 erhöhen).

## **Coulombsches Gesetz**

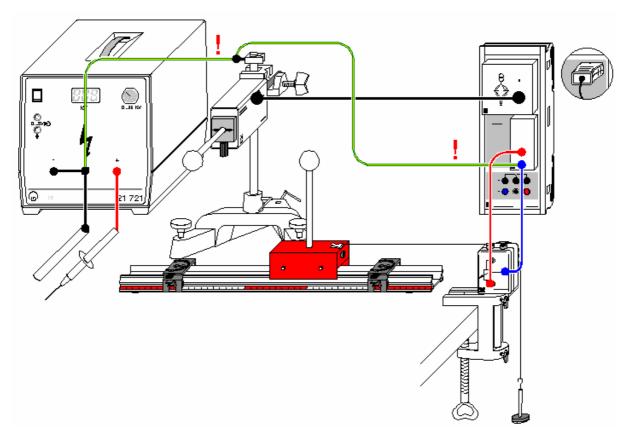



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

# **Vorsicht beim Umgang mit Hochspannung**

Der hochspannungsführende Steckerstift darf weder den Experimentator noch Teile der Versuchsanordnung berühren. Insbesondere ist weder der Kraftsensor noch das Sensor-CASSY gegen Hochspannung geschützt.

Außerdem den Abstand zwischen Hochspannungskabel und den anderen isolierten Kabel während des gesamten Experiments maximal halten.

# Versuchsbeschreibung

Zwei gleichnamig oder ungleichnamig aufgeladene Kugeln üben eine Kraft aufeinander aus. Diese Kraft ist proportional zu der Ladung Q einer jeden Kugel und umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes x der Kugeln voneinander. Die Proportionalität  $F \sim 1/x^2$  wird bestätigt.

## **Benötigte Geräte**

1 1	Sensor-CASSY CASSY Lab	524 010 524 200	
1	Brücken-Box mit Kraftsensor und Verbindungskabel, 6polig, 1,5 m	524 041 314 261 501 16	
oder			
1	Kraftsensor S, ±1 N	524 060	
1	Stromquellen-Box	524 031	



1	Wegaufnehmer	529 031
1	Hochspannungsnetzgerät, 25 kV	521 721
1	Hochspannungskabel	501 05
1	Satz Ladungskörper	314 263
1	Präzisions-Metallschiene	460 82
1	Messwagen 1	337 00
2	Klemmreiter	460 95
1	Federstecker	590 02
1	Anschlussstab	532 16
1	Stativstange, 25 cm	300 41
1	Kleiner Stativfuß, V-förmig	300 02
1	Leybold-Muffe	301 01
1	Satz Antriebsmassen	337 04
1	Tischklemme, einfach	301 07
1	Angelschnur	309 48
1	Paar Kabel, 100 cm, rot und blau	501 46
1	Kabel, 25 cm, schwarz	500 414
3	Kabel, 100 cm, schwarz	500 444
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Der Kraftsensor wird über die Brücken-Box auf den Eingang A des Sensor-CASSYs angeschlossen. Eine der Kugeln aus dem Satz Ladungsträger wird über das isolierende Zwischenstück auf den Kraftsensor aufgesteckt. Die zweite Kugel wird auf den Messwagen gesteckt, der sich bis zum Klemmreiter frei auf der Präzisions-Metallschiene bewegen kann.

Die Abstandsmessung der Kugeln geschieht über den Wegaufnehmer an der Stromquellen-Box auf Eingang B des Sensor-CASSYs. Dazu wird ein Faden vom Messwagen über die Umlenkrolle des Wegaufnehmers mit einem Massestück gespannt. Dabei muss die Weganzeige sB1 bei zunehmendem Abstand ebenfalls zunehmen und bei Berührung etwa 0 cm anzeigen.

Aus Sicherheitsgründen muss die Stromquellenbox und der Kraftsensor geerdet werden. Dazu ist mit Hilfe eines Federsteckers und eines Experimentierkabels der Kraftsensor mit der Erdbuchse des Hochspannungsnetzgeräts zu verbinden.

# Experimentierhinweise

Für den Experimentiererfolg ist es entscheidend, dass genug Ladung auf die Kugeln aufgebracht werden kann und die Ladung auch dort bleibt (wenigstens während der kurzen Zeit des Experiments). Nach der Aufladung beider Kugeln sollte bei einem Abstand von 0,5 cm eine Kraft von mindestens 5 mN gemessen werden und auch einige Sekunden unverändert bleiben. Falls nicht:

- Isolatoren und Kugeln säubern (z. B. mit Wasser und Spülmittel, mit destilliertem Wasser nachspülen)
- Isolatoren und Kugeln trocknen (z. B. vorsichtig mit der nichtleuchtenden Flamme eines Bunsenbrenners oder mit der Warmluft aus einem Fön)
- Keine brennende Flamme in der Umgebung des Experiments während der Durchführung (sonst wird die Luft ionisiert)
- Anstelle der Hochspannungsquelle andere Ladungsquellen (z. B. an frisch gewaschenen Haaren geriebener PVC-Stab) ausprobieren
- Trockenes Wetter ist Voraussetzung

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Wegnullpunkt kalibrieren dazu Kugeln berühren lassen, in Einstellungen sB1 Korrigieren wählen, als ersten Sollwert 3,8 cm (=Abstand der beiden Kugelmittelpunkte voneinander) eingeben und Offset korrigieren wählen
- Startposition bei etwa 0,5 cm lichtem Abstand zwischen beiden Kugeln einnehmen
- Ladungen beider Kugeln über den geerdeten Anschlussstab ableiten
- Kraftnullpunkt einstellen dazu in Einstellungen FA1 → 0 ← betätigen (evtl. mehrmals) und falls erforderlich durch **LED an/aus** die Smooth-LED auf der Brücken-Box einschalten



- Kugeln gleich- oder gegennamig aufladen dazu am Hochspannungsnetzgerät ein Pol auf Erde und den anderen Pol für wenige Sekunden auf jeweils eine Kugel legen. Dabei sollte sich eine Kraft von mindestens 5 mN einstellen (siehe obige Experimentierhinweise). Falls gewünscht, kann der Nullpunkt des Kraft-Fensters (und damit der y-Achse des Diagramms) in den Einstellungen FA1 von mittig auf links oder rechts umgestellt werden.
- Messung mit F9 starten
- Messwagen langsam von Hand vom Kraftsensor wegbewegen
- Bei etwa 15 cm Abstand Messung wieder mit **F9** stoppen


## **Auswertung**

Bereits während der Messung erscheint das F(x)-Diagramm. Das Coulombsche Gesetz kann nun durch eine Hyperbelanpassung  $1/x^2$  oder durch Umrechnen der x-Achse in  $1/x^2$  (Achse mit rechter Maustaste anklicken) mit anschließender Geradenanpassung bestätigt werden.

Dabei stellt sich heraus, dass  $F \sim 1/x^2$  erst ab einem Abstand von etwa 6 cm der beiden Kugelmittelpunkte gilt. Bei kürzeren Entfernungen müsste die Abstand korrigiert werden, da es sich nicht um punktförmige Ladungen handelt.



# Kraft im magnetischen Feld einer Luftspule

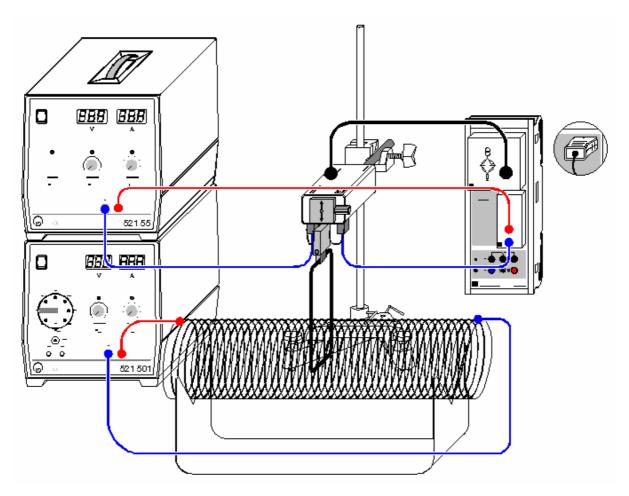



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

## ■ Beispiel laden

# Versuchsbeschreibung

Die magnetische Flussdichte oder einfacher das Magnetfeld **B** ist eine vektorielle Größe. Auf eine Ladung q, die sich mit der Geschwindigkeit **v** im Magnetfeld **B** bewegt, wirkt eine Kraft **F**, die von Größe und Richtung der Geschwindigkeit und von Stärke und Richtung des Magnetfeldes abhängt. Es gilt

$$\mathbf{F} = \mathbf{q} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

Diese sog. Lorentz-Kraft  ${\bf F}$  ist ebenfalls eine vektorielle Größe und steht senkrecht auf der Ebene, die durch  ${\bf v}$  und  ${\bf B}$  aufgespannt wird.

Die Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld kann man auffassen als die Summe der Einzelkräfte auf die bewegten Ladungsträger, die den Strom bilden. Auf jeden einzelnen Ladungsträger q, der sich mit der Driftgeschwindigkeit  $\mathbf{v}$  bewegt, wirkt die Lorentzkraft  $\mathbf{F}$ . Bei einem geraden Leiter resultiert daraus die Gesamtkraft

$$\mathbf{F} = \mathbf{q} \cdot \mathbf{nAs} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{B}),$$

denn die Anzahl der Ladungsträger im Leiter ist das Produkt aus Ladungsträgerdichte n, Leiterquerschnitt A und der Länge s des im Magnetfeld befindlichen Leiterabschnitts.

Es ist üblich, den Vektor **s** einzuführen, der in Richtung des Leiterabschnitts zeigt. Außerdem entspricht das Produkt qnAv der Stromstärke I. Damit ist die Kraft eines Magnetfeldes auf einen geraden stromdurchflossenen Leiterabschnitt gegeben durch



$$F = I \cdot (s \times B)$$

bzw. der Betrag der Kraft durch

$$F = I \cdot s \cdot B$$

wenn **s** und **B** senkrecht zueinander stehen. Kraft F und Stromstärke I sind also proportional zueinander mit dem Proportionalitätsfaktor s·B.

Im Experiment wird die Kraft auf eine Leiterschleife im homogenen Magnetfeld einer Luftspule in Abhängigkeit vom Leiterschleifenstrom I gemessen. Das homogenes Magnetfeld wird in einer langen geschlitzten Luftspule erzeugt, wobei eine am Kraftsensor befestigte Leiterschleife der Länge s = 8 cm in den Schlitz eintaucht. Nur der horizontale Teil des Leiters erzeugt eine Kraftkomponente, die vom Kraftsensor gemessen werden kann. Aus der Proportionalität zwischen Kraft F und Leiterschleifenstrom I kann somit die magnetische Flussdichte B bestimmt werden.

Die Luftspule hat den Vorteil, dass die magnetische Flussdichte B in ihrem Innern leicht berechnet und mit dem experimentell ermittelten Wert verglichen werden kann. Für eine lange Luftspule gilt

$$B = \mu 0 \cdot N \cdot lc / L$$

mit der magnetischen Feldkonstanten  $\mu 0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$  Vs/Am, der Windungszahl N der Luftspule, dem Spulenstrom Ic und der Länge L der Luftspule.

## **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY CASSY Lab	524 010 524 200
1	Brücken-Box mit Kraftsensor und Verbindungskabel, 6polig, 1,5 m	524 041 314 261 501 16
od	ler .	
1	Kraftsensor S, ±1 N	524 060
1	30-A-Box	524 043
1	Leiterschleifenhalter	314 265
1	Leiterschleifen für Kraftmessung	516 34
1	Feldspule d = 120 mm	516 244
1	Ständer für Rohre und Spulen	516 249
1	Hochstrom-Netzgerät	521 55
1	AC/DC Netzgerät 015 V	521 501
1	Kleiner Stativfuß, V-förmig	300 02
1	Stativstange, 47 cm	300 42
1	Leybold-Muffe	301 01
1	Experimentierkabel, 50 cm, blau	501 26
2	Experimentierkabel, 100 cm, rot	501 30
2	Experimentierkabel, 100 cm, blau	501 31
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Der Kraftsensor hält die 8 cm lange Leiterschleife mit dem Leiterschleifenhalter und wird so positioniert, dass die Leiterschleife in den Schlitz der Luftspule eintaucht. Die Leiterschleife darf die Luftspule hierbei nicht berühren. Die beiden 4-mm-Buchsen auf der Unterseite des Kraftsensors sind als Einspeisepunkte für den Leiterschleifenhalter gedacht. Sie sind intern nicht beschaltet. Der Kraftsensor wird über die Brückenbox an Eingang A des Sensor-CASSYs angeschlossen.

Der Strom fließt vom 20-A-Netzgerät über die 30-A-Box auf Eingang B des Sensor-CASSYs durch die Leiterschleife und wieder zurück zum Netzgerät. Der Strom des zweiten 5-A-Netzgerätes fließt durch die Luftspule.

### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- In Einstellungen Kraft FA1 Kraftsensor durch → 0 ← auf Null setzen und falls erforderlich durch LED an/aus die Smooth-LED auf der Brücken-Box einschalten



- Evtl. in Einstellungen Strom IB1 den Stromwert zu 0 A korrigieren (dazu ersten Sollwert auf 0 A setzen und Offset korrigieren)
- Am Netzteil der Luftspule etwa Ic = 5 A einstellen
- Leiterschleifenstrom I von 0-20 A in 2 bis 5 A Schritten durchfahren und jeweils Messwerte mit F9 aufnehmen. Eine Fehlmessung kann durch Letzte Tabellenzeile löschen (rechte Maustaste auf Tabelle) wieder aus der Tabelle entfernt werden
- Falls nur negative Kräfte gemessen werden, Anschlüsse am Leiterschleifenhalter vertauschen
- Zügig experimentieren, da Leiterschleife und Leiterschleifenhalter nur kurzzeitig mit 20 A belastet werden dürfen
- Leiterschleifenstrom am Ende wieder auf 0 A stellen

# **Auswertung**


Die Kraft steigt linear mit Zunahme des Stroms an. Der Proportionalitätsfaktor  $F/I = B \cdot s$  ergibt sich aus der Steigung einer Ausgleichsgeraden. Daraus lässt sich nun die magnetische Feldstärke B bestimmen.

Im Beispiel ist F/I = 0.138 mN/A und mit s = 0.08 m folgt B = 1.725 mT.

Aus B =  $\mu$ 0 · N · Ic / L ergibt sich mit den Werten  $\mu$ 0 = 1,257  $\mu$ Vs/Am, N = 120, Ic = 4,75 A und L = 0,41 m der berechnete Wert von B = 1,75 mT. Die beiden Ergebnisse stimmen im Rahmen der Messgenauigkeit gut überein.



# Kraft im magnetischen Feld eines Elektromagneten

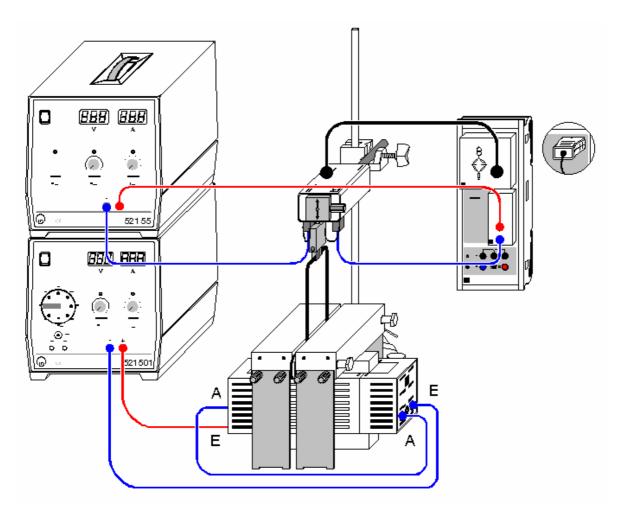



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

# Versuchsbeschreibung

In diesem Versuch wird ein homogenes Magnetfeld B durch einen Elektromagneten mit U-Kern und Polschuhaufsatz erzeugt. Gemessen wird die Kraft F auf eine stromdurchflossene Leiterschleife in Abhängigkeit von der Stromstärke I (F proportional I). Die Messergebnisse für verschiedene Leiterlängen s werden in einer Übersichtsgrafik zusammengestellt und ausgewertet (F/I proportional s). Insgesamt wird

 $F = I \cdot s \cdot B$ 

bestätigt.

# **Benötigte Geräte**

-	Sensor-CASSY CASSY Lab	524 010 524 200
1	Brücken-Box mit Kraftsensor und Verbindungskabel, 6polig, 1,5 m	524 041 314 261 501 16
oc	ler	
1	Kraftsensor S +1 N	524 060



1	30-A-Box	524 043
1	Leiterschleifenhalter	314 265
1	Leiterschleifen für Kraftmessung	516 34
1	U-Kern mit Joch	562 11
2	Spulen mit 500 Windungen	562 14
1	Polschuhaufsatz	562 25
1	Hochstrom-Netzgerät	521 55
1	AC/DC Netzgerät 015 V	521 501
1	Kleiner Stativfuß, V-förmig	300 02
1	Stativstange, 47 cm	300 42
1	Leybold-Muffe	301 01
2	Experimentierkabel, 50 cm, blau	501 26
2	Experimentierkabel, 100 cm, rot	501 30
2	Experimentierkabel, 100 cm, blau	501 31
1	PC ah Windows 95/98/NT	

#### 1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die beiden Spulen werden auf den U-Kern geschoben. Die beiden schweren Polschuhe werden quer darüber gesetzt. Die seitlichen Ständer lassen sich hierzu in ihrer Höhe verändern. Der Spalt kann durch Verschieben eines der beiden Polschuhe verändert und mit nichtmagnetischen Abstandshaltern justiert werden.

Der Kraftsensor hält eine der Leiterschleifen mit dem Leiterschleifenhalter und wird so positioniert, dass die Leiterschleife in den Schlitz zwischen den Polschuhen des Elektromagneten eintaucht. Die Leiterschleife darf die Polschuhe hierbei nicht berühren. Die beiden 4-mm-Buchsen auf der Unterseite des Kraftsensors sind als Einspeisepunkte für den Leiterschleifenhalter gedacht. Sie sind intern nicht beschaltet. Der Kraftsensor wird über die Brückenbox an Eingang A des Sensor-CASSYs angeschlossen.

Der Strom fließt vom 20-A-Netzgerät über die 30-A-Box auf Eingang B des Sensor-CASSYs durch die Leiterschleife und wieder zurück zum Netzgerät. Der Strom des zweiten 5-A-Netzgerätes fließt nacheinander durch die beiden Spulen. Dabei beachten, dass sich die Magnetfelder der beiden Spulen addieren (A mit A verbinden, beide E zum Netzgerät, siehe Skizze).

## Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- In Einstellungen Kraft FA1 Kraftsensor durch → 0 ← auf Null setzen und falls erforderlich durch LED an/aus die Smooth-LED auf der Brücken-Box einschalten
- Evtl. in Einstellungen Strom IB1 den Stromwert zu 0 A korrigieren (dazu ersten Sollwert auf 0 A setzen und Offset korrigieren)
- Am Netzteil der Spulen etwa 2,5 A einstellen
- Leiterschleifenstrom I von 0-20 A in 2 bis 5 A Schritten durchfahren und jeweils Messwerte mit F9 aufnehmen. Eine Fehlmessung kann durch Letzte Tabellenzeile löschen (rechte Maustaste auf Tabelle) wieder aus der Tabelle entfernt werden
- Falls nur negative Kräfte gemessen werden, Anschlüsse am Leiterschleifenhalter vertauschen
- Zügig experimentieren, da Leiterschleife und Leiterschleifenhalter nur kurzzeitig mit 20 A belastet werden dürfen
- Leiterschleifenstrom am Ende wieder auf 0 A stellen
- Weitere Messkurven mit anderer Leiterschleifenlänge s aufnehmen. Dazu im Messparameterfenster neue Messreihe anhängen wählen


#### Auswertung

Für jede Messreihe F(I) wird eine Ausgleichsgerade bestimmt. Nach jeder Ausgleichsgeraden wird in die Darstellung **Magnetfeld** (mit der Maus anklicken) gewechselt. Hier wird eine weitere Tabelle gefüllt, indem zu der jeweiligen Leiterschleifenlänge s die gerade ermittelte Steigung F/I mit der Maus aus der Statuszeile in die Tabelle gezogen wird (Drag & Drop). Der Leiterschleifenlänge s in m wird direkt über die Tastatur in die Tabelle eingetragen. Bereits während der Tabelleneingabe entsteht das gewünschte Diagramm.

In dieser Darstellung ergibt sich aus der Steigung der Ausgleichsgeraden die magnetische Feldstärke B zwischen den Polschuhen, da  $F/I = B \cdot s$  (im Beispiel ergibt sich  $B = 164 \text{ mN/(A} \cdot m) = 164 \text{ mT)}$ .



# Kraft zwischen stromdurchflossenen Leitern (Amperedefinition)

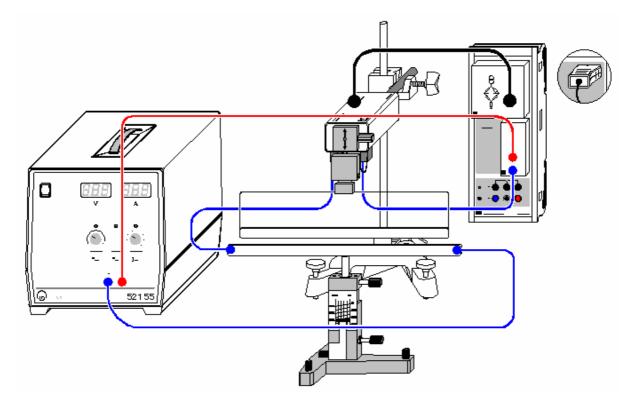



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

## Versuchsbeschreibung

Die Kraft F auf einen Leiter der Länge s, der vom Strom I durchflossen wird, ist in einem Feld der magnetischen Flussdichte B gleich

 $F = I \cdot s \cdot B$ .

Wird die Flussdichte B durch einen langen Leiter im Abstand r hervorgerufen, dann gilt

 $B = const. \cdot I / r.$ 

Damit ist die Kraft F, die zwischen zwei parallelen Leitern wirkt, die vom gleichen Strom I durchflossen werden, gegeben durch

 $F = const. \cdot I^2 \cdot s / r.$ 

Man definiert nun die elektrische Stromstärke folgendermaßen (Amperedefinition): Die Stromstärke I hat den Wert 1 A, wenn zwischen zwei im Abstand r=1 m parallel angeordneten, geradlinigen unendlich lang gedachten und vom gleichen elektrischen Strom durchflossenen Leitern mit gegen Null gehendem Durchmesser der Betrag der Kraft F pro Länge s

 $F/s = 2 \cdot 10^{-7} N/m$ 

beträgt. Man legt also fest:

const. =  $2 \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$ .

Üblicherweise wird const. mit  $\mu$ 0/2 $\pi$  bezeichnet und man erhält

 $F = \mu 0/2\pi \cdot l^2 \cdot s / r$ 

mit  $\mu 0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/Am}$ .



Im Experiment wird ein Leiter der Länge s = 0,30 m in einem Abstand r von wenigen Millimetern über einen etwas längeren Leiter gehängt. Gemessen wird die Kraft F, die für verschiedene Stromstärken I und Abstände r auf den hängenden Leiter wirkt. Das Ergebnis bestätigt die Amperedefinition.

## **Benötigte Geräte**

1 1	Sensor-CASSY CASSY Lab	524 010 524 200
1	Brücken-Box mit Kraftsensor und Verbindungskabel, 6polig, 1,5 m	524 041 314 261 501 16
od	er	
1	Kraftsensor S, ±1 N	524 060
1	30-A-Box	524 043
1	Leiterschleifenhalter	314 265
1	Leiterschleifen zur elektrodyn.	
	Amperedefinition	516 33
1	Höhenverstellbarer Ständer	516 31
1	Hochstrom-Netzgerät	521 55
1	Kleiner Stativfuß, V-förmig	300 02
1	Stativstange, 47 cm	300 42
1	Leybold-Muffe	301 01
2	Experimentierkabel, 50 cm, blau	501 26
1	Experimentierkabel, 100 cm, rot	501 30
1	Experimentierkabel, 100 cm, blau	501 31
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Der Kraftsensor hält eine obere Leiterschleife mit dem Leiterschleifenhalter und wird so positioniert, dass der Abstand der beiden Leiterschleifen bei mittlerem Hub des höhenverstellbaren Ständers etwa 5 mm beträgt.

Die beiden 4-mm-Buchsen auf der Unterseite des Kraftsensors sind als Einspeisepunkte für den Leiterschleifenhalter gedacht. Sie sind intern nicht beschaltet. Der Kraftsensor wird über die Brückenbox an Eingang A des Sensor-CASSYs angeschlossen. Der Strom fließt vom 20-A-Netzgerät über die 30-A-Box auf Eingang B des Sensor-CASSYs nacheinander durch beide Leiterschleifen und wieder zurück zum Netzgerät.

Nun Leiterschleife auf dem Ständer langsam der hängenden Leiterschleife nähern, bis sich beide gerade berühren (dann haben die Drahtmitten einen Abstand r=2 mm). Dabei Parallelität des höhenverstellbaren Ständers zur hängenden Leiterschleife überprüfen und gegebenenfalls mit seinen Stellschrauben korrigieren.

Nullpunktschieber am höherverstellbaren Ständer auf eine definierte Marke einstellen und mittels Höhenverstellung den gewünschten Abstand zwischen beiden Leiterschleifen einstellen (z. B. r = 4 mm).

Gute Messergebnisse erfordern hier sehr sorgfältige Justierungen.

## Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- In Einstellungen Kraft FA1 Kraftsensor durch → 0 ← auf Null setzen und falls erforderlich durch LED an/aus die Smooth-LED auf der Brücken-Box einschalten
- Evtl. in Einstellungen Strom IB1 den Stromwert zu 0 A korrigieren (dazu ersten Sollwert auf 0 A setzen und Offset Korrigieren)
- Leiterschleifenstrom I von 0-20 A in 2 A Schritten durchfahren und jeweils Messwerte mit F9 aufnehmen. Eine Fehlmessung kann durch Letzte Tabellenzeile löschen (rechte Maustaste auf Tabelle) wieder aus der Tabelle entfernt werden
- Falls nur negative Kräfte gemessen werden, Anschlüsse am Leiterschleifenhalter vertauschen
- Zügig experimentieren, da Leiterschleife und Leiterschleifenhalter nur kurzzeitig mit 20 A belastet werden dürfen
- Leiterschleifenstrom am Ende wieder auf I = 0 A stellen



• Weitere Messkurven mit anderen Leiterschleifenabständen r aufnehmen. Dazu im Messparameterfenster neue Messreihe anhängen wählen

#### **Auswertung**

Für jede Messreihe F(I) wird eine Parabel angepasst. Nach jeder Parabel wird in die Darstellung **Amperedefinition** (mit der Maus anklicken) gewechselt. Hier wird eine weitere Tabelle gefüllt, indem zu dem jeweiligen Leiterschleifenabstand r der gerade ermittelte Parameter F/I² der Parabel aus der Statuszeile mit der Maus in die Tabelle gezogen wird (Drag & Drop). Der Leiterschleifenabstand r wird direkt über die Tastatur in die Tabelle eingetragen. Bereits während der Tabelleneingabe entsteht das gewünschte Diagramm.

In dieser Darstellung ergibt sich aus dem Parameter  $F/I^2$ r einer Hyperbelanpassung 1/x die Konstante der Amperedefinition zu

 $\mu 0/2\pi = F/I^2 \cdot r / s = F/I^2 \cdot r / 0.3 \text{ m}.$ 

Für das Beispiel bedeutet dies

 $\mu 0/2\pi = 0.000062 \text{ mN·m/A}^2 / 0.3 \text{ m} = 2.1 \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2 = 2.1 \cdot 10^{-7} \text{ Vs/Am}.$ 


Alternativ kann in der Darstellung Amperedefinition auf die x-Achse von r in 1/r umgerechnet werden (Achse mit der rechten Maustaste anklicken). In dieser Darstellung ergibt sich  $\mu 0/2\pi$  durch eine Geradenanpassung.

#### **Anmerkung**

Die Messung enthält systematische Fehler. Zum einen hat der Leiter eine endliche Länge. Dies bedeutet, dass am Leiterende nicht mehr das angenommene Magnetfeld herrscht und hier die Kräfte kleiner werden. Außerdem wirkt auf den hängende Leiter eine kleine entgegengesetzte Kraftkomponente begründet im oberen zurücklaufenden Leiterteil.

CASSY Lab 181



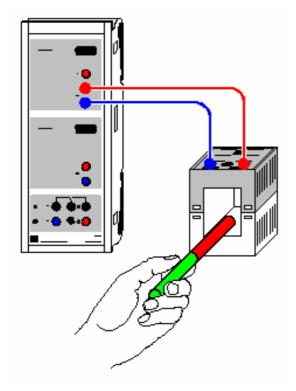



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

# Versuchsbeschreibung

Faraday fand im Jahre 1831, dass jede Änderung des magnetischen Flusses  $\Phi$  durch eine geschlossene Leiterschleife in dieser eine elektrische Spannung induziert. Der magnetische Fluss ist dabei durch das Leiterschleifenflächenintegral der magnetischen Flussdichte bzw. Induktion **B** 

$$\Phi = \int_{\mathbf{A}} \mathbf{B} \cdot \mathbf{dA}$$

gegeben. Insbesondere zeigte er, dass diese induzierte Spannung proportional zur zeitlichen Ableitung des magnetischen Flusses  $\Phi$  ist und damit der Spannungsstoß

$$\int_{1}^{2} U dt \sim \Phi_{2} - \Phi_{1} = \Delta \Phi$$

nur von der Änderung des magnetischen Flusses abhängt. Er entdeckte schließlich das Faradaysche Induktionsgesetz

$$U = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \,.$$

Es wird die induzierte Spannung U(t) für unterschiedliche magnetische Flussdichten B und Windungszahlen N verschiedener Spulen gemessen und in der Auswertung einer aufgenommenen Kurve das Zeitintegral und damit der Spannungsstoß bestimmt um letztendlich das Faradaysche Induktionsgesetz zu bestätigen.

# **Benötigte Geräte**

1 Sensor-CASSY 524 010 1 CASSY Lab 524 200



2	Rundstabmagnete	510 11
1	Spule mit 250 Windungen	562 13
1	Spule mit 500 Windungen	562 14
1	Spule mit 1000 Windungen	562 15
1	Paar Kabel, 100 cm, rot und blau	501 46

1 PC ab Windows 95/98/NT

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Eine Spule wird an Eingang A des Sensor-CASSYs angeschlossen.

# Versuchsdurchführung

- a) Messung in Abhängigkeit vom magnetischen Fluss  $\Phi$
- Einstellungen laden
- Spule mit 250 Windungen an Eingang A anschließen
- Messung mit F9 starten
- 1 Magnet bis zur Mitte eintauchen und wieder herausziehen
- Messung mit **F9** stoppen (oder nach 10 s automatisch)
- Messung mit F9 starten und warten, bis die neue Messung soweit fortgeschritten ist, dass sie die alte Messung nicht mehr überdeckt
- 2 Magnete bis zur Mitte eintauchen und wieder herausziehen
- Messung mit F9 stoppen (oder nach 10 s automatisch)
- b) Messung in Abhängigkeit von der Windungszahl N
- Einstellungen laden
- Spule mit 250 Windungen an Eingang A anschließen
- Messung mit F9 starten
- Magnet bis zur Mitte eintauchen und wieder herausziehen
- Messung mit **F9** stoppen (oder nach 10 s automatisch)
- Spule mit 500 Windungen an Eingang A anschließen
- Messung mit F9 starten und warten, bis die neue Messung soweit fortgeschritten ist, dass sie die alte Messung nicht mehr überdeckt
- Magnet bis zur Mitte eintauchen und wieder herausziehen
- Messung mit F9 stoppen (oder nach 10 s automatisch)
- Spule mit 1000 Windungen an Eingang A anschließen
- Messung mit F9 starten und warten, bis die neue Messung soweit fortgeschritten ist, dass sie die alte Messung nicht mehr überdeckt
- Magnet bis zur Mitte eintauchen und wieder herausziehen
- Messung mit F9 stoppen (oder nach 10 s automatisch)

# **Auswertung**

In Versuchsteil a) lässt sich durch Integration leicht feststellen, dass die Spannungsstöße beim Eintauchen und Herausziehen des Magneten aus einer Spule sind betragsmäßig gleich groß sind, aber ein unterschiedliches Vorzeichen haben, also

$$\int_{I} U(t) dt = - \int_{I} U(t) dt.$$

Die Verwendung von 2 Magneten bestätigt zusätzlich eine Proportionalität zwischen den Spannungsstößen und der Anzahl der verwendeten Magnete bzw. der erzeugten Differenz des magnetischen Flusses

$$\int_{1}^{2} U(t) dt \sim \Phi_{2} - \Phi_{1} = \Delta \Phi.$$

Durch Differenzierung wird daraus das Faradaysche Induktionsgesetz

$$U = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

bestätigt.



Der magnetische Fluss durch eine Spule hängt auch von deren Windungszahl N ab, da jede einzelne Windung die Flussdifferenz  $\Delta\Phi$ o sieht und der Gesamtfluss durch  $\Delta\Phi = N \cdot \Delta\Phi$ o gegeben ist.

Betrachtet man nun in Versuchsteil b) die Abhängigkeit eines Spannungstoßes von der Windungszahl N der verwendeten Spule, so lässt dieser Zusammenhang auch bestätigen. Dazu werden z. B. alle positiven Flächen bestimmt und zusammen mit der Windungszahl N in der Darstellung **Windungszahl** eingetragen (Tabellenzellen anklicken). Aus der Proportionalität folgt dann wieder

$$\int_{1}^{2} U(t) dt \sim N \cdot \Delta \Phi_{0} = \Delta \Phi.$$

Die Steigung der Geraden in der Darstellung der Spannungsstöße gegen die Windungszahl entspricht dem magnetischen Fluss Φo, der durch den Magneten in einer einzelnen Spulenwindung erzeugt wird.


# **Tipp zur Integration**

Zur Integration muss der Bereichsanfang gefunden werden, was nicht immer sofort gelingt, wenn mehrere Messkurven übereinander liegen. Einfacher geht es, wenn die Messung sofort nach dem Spannungsstoß mit **F9** gestoppt wird (nicht bis zum Ablauf der 10 s warten) und Integrale sofort nach der Messung berechnet werden. Wird dann bei der nächsten Messung mit dem Spannungsstoß bis nach Ende der vorherigen Messkurven gewartet, dann liegt keine Kurve während der Integration über einer anderen.






# Induktion durch ein veränderliches Magnetfeld

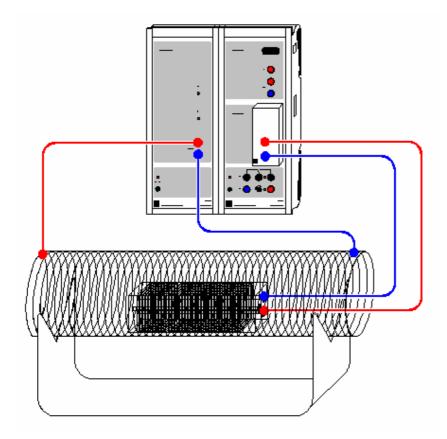

Alternativ (ohne Power-CASSY):

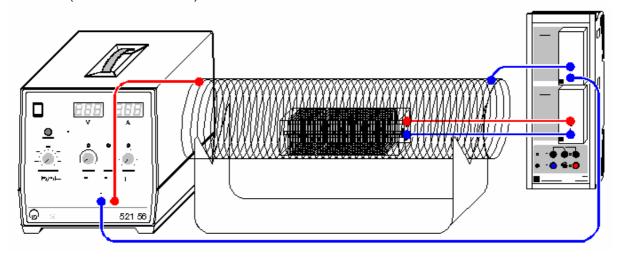



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

- Beispiel laden (mit Power-CASSY)
- Beispiel laden (ohne Power-CASSY)

# Versuchsbeschreibung

Spannungen und Ströme, die durch Veränderung von Magnetfeldern entstehen, nennt man Induktionsspannungen bzw. Induktionsströme, den Vorgang selbst magnetische Induktion. Befindet sich in einem Magnetfeld **B** eine Leiterschleife, so ist der sie durchsetzende magnetische Fluss durch das



Leiterschleifenflächenintegral

$$\Phi = \int_{\mathbf{A}} \mathbf{B} \cdot \mathbf{dA}$$

gegeben. Handelt es sich anstelle der Leiterschleife um eine Spule mit N1 Windungen, die sich alle senkrecht zum Magnetfeld befinden, dann vergrößert sich  $\Phi$  entsprechend zu

$$\Phi = B \cdot A \cdot N_1$$
.

Ändert sich das Magnetfeld B nicht, dann bleibt auch der magnetische Fluss  $\Phi$  konstant. Bei zeitlicher Änderung des Magnetfeldes und somit des magnetischen Flusses durch die Spulenfläche wird in der Spule eine Spannung und somit ein Strom induziert, deren Stärke und Richtung von der Art dieser Änderung abhängt. Es gilt das Faradaysche Induktionsgesetz

$$U = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

und damit

$$U = -\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} \cdot A \cdot N_1.$$

Andererseits erzeugt ein elektrischer Strom ein Magnetfeld, z. B. wenn eine Spule von einem Strom I durchflossen wird. Für das Magnetfeld im Inneren einer großen Zylinderspule der Länge L und der Windungszahl N2 gilt

$$B = \mu_0 \frac{N_2}{L} I$$

mit  $\mu 0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$  Vs/Am (magnetische Feldkonstante).

Im Versuch wird eine große Zylinderspule als Feldspule von einem sich ändernden Strom I(t) durchflossen, durch den in ihrem Inneren ein sich änderndes Magnetfeld B(t) entsteht. In diese Feldspule werden rechteckige Induktionsspulen unterschiedlicher Flächen A und Windungszahlen N1 gebracht. In diesen Induktionsspulen wird eine Spannung U induziert, die sich folglich zu

$$U = -\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \cdot \mu_0 \cdot A \cdot \frac{N_2}{L} \cdot N_1$$

berechnen lässt.

Im Versuch werden die Proportionalitäten zwischen der induzierten Spannung U und der zeitlichen Änderung dl/dt des Feldspulenstromes I, der Fläche A der Induktionsspulen sowie der Windungszahl N1 der Induktionsspulen bestätigt. Dafür besonders gut geeignet ist das Power-CASSY (524 011) oder das Dreieckstrom-Netzgerät (521 56), da der zeitliche Verlauf des Ausgangsstromes I so gesteuert werden kann, dass die Steigung | dl/dt | konstant ist. Außerdem stehen drei Induktionsspulen mit jeweils N1 = 300 Windungen zur Verfügung: Spule 1 mit dem Querschnitt A =  $50 \times 50$  mm², Spule 2 mit A =  $30 \times 50$  mm² und Spule 3 mit A =  $20 \times 50$  mm². Außerdem hat Spule 1 zusätzliche Abgriffe bei N1 = 100 und N1 = 200 Windungen.

# **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	Power-CASSY	524 011
1	CASSY Lab	524 200
1	μV-Box	524 040
1	Feldspule d = 120 mm	516 244
1	Ständer für Rohre und Spulen	516 249
1	Satz Induktionsspulen	516 241
2	Experimentierkabel, 100 cm, rot	501 30
2	Experimentierkabel, 100 cm, blau	501 31
1	PC ab Windows 95/98/NT	



#### **Alternativ (ohne Power-CASSY)**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	μV-Box	524 040
1	30-A-Box	524 043
1	Feldspule d = 120 mm	516 244
1	Ständer für Rohre und Spulen	516 249
1	Satz Induktionsspulen	516 241
1	Dreieckstrom-Netzgerät	521 56
1	Experimentierkabel, 50 cm, blau	501 26
2	Experimentierkabel, 100 cm, rot	501 30
2	Experimentierkabel, 100 cm, blau	501 31
1	PC ab Windows 95/98/NT	

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die große Spule wird mit konstantem | dl/dt | entweder vom Power-CASSY oder vom Dreieckstrom-Netzgerät versorgt. Im zweiten Fall muss der fließende Strom noch mit der 30-A-Box an Eingang A des Sensor-CASSYs gemessen werden. Die induzierte Spannung der Induktionsspulen wird mit der  $\mu V$ -Box auf Eingang B erfasst.

# Versuchsdurchführung

- a) Messung der Induktionsspannung U in Abhängigkeit von der Fläche A der Induktionsspulen
   Einstellungen laden
- Spule 1 (A = 0,0025 m², N1 = 300 Windungen) in große Feldspule legen und an μV-Box anschließen
- Messung mit F9 durchführen
- Messung mit den Spulen 2 (A = 0,0015 m²) und 3 (A = 0,0010 m²) wiederholen
- b) Messung der Induktionsspannung U in Abhängigkeit von der Anzahl N1 der Spulenwindungen ■ Einstellungen laden
- Spule 1 (N1 = 100 Windungen) in der großen Feldspule an μV-Box anschließen
- Messung mit F9 durchführen
- Messung mit N1 = 200 und N1 = 300 der Spule 1 wiederholen
- c) Messung der Induktionsspannung U in Abhängigkeit von dl/dt
- Einstellungen laden
- Spule 1 (N1 = 300 Windungen) in der großen Feldspule an μV-Box anschließen
- Messung mit F9 durchführen
- Messung mit verkleinertem maximalen Strom Imax bzw. dl/dt wiederholen; dazu den Zeiger des Anzeigeinstruments mit der Maus auf die gewünschte Position verschieben

# **Alternativ (ohne Power-CASSY)**

- a) Messung der Induktionsspannung U in Abhängigkeit von der Fläche A der Induktionsspulen
- Einstellungen laden
- Spule 1 (A = 0,0025 m², N1 = 300 Windungen) in große Feldspule legen und an μV-Box anschließen
- Spannungsstellknopf des Dreieckstrom-Netzgeräts auf Rechtsanschlag drehen, Stromstellknopf soweit aufdrehen, dass Leistungsbegrenzung (LED Pmax) gerade noch nicht aktiv ist
- Mittlere dl/dt-Einstellung wählen und Taster zum Einschalten des Dreieckstrommodus drücken
- Messung mit F9 starten (Messwertaufnahme beginnt bei steigender Flanke der Induktionsspannung UB1, evtl. Trigger abschalten)
- Nach einigen Stromperioden wieder mit **F9** stoppen
- Messung mit den Spulen 2 (A = 0,0015 m²) und 3 (A = 0,0010 m²) wiederholen
- b) Messung der Induktionsspannung U in Abhängigkeit von der Anzahl N1 der Spulenwindungen ■ Einstellungen laden
- Spule 1 (N1 = 100 Windungen) in der großen Feldspule an μV-Box anschließen
- Spannungsstellknopf des Dreieckstrom-Netzgeräts auf Rechtsanschlag drehen, Stromstellknopf soweit aufdrehen, dass Leistungsbegrenzung (LED Pmax) gerade noch nicht aktiv ist
- Mittlere dl/dt-Einstellung wählen und Taster zum Einschalten des Dreieckstrommodus drücken





- Messung mit F9 starten (Messwertaufnahme beginnt bei steigender Flanke der Induktionsspannung UB1, evtl. Trigger abschalten)
- Nach einigen Stromperioden wieder mit **F9** stoppen
- Messung mit N1 = 200 und N1 = 300 der Spule 1 wiederholen
- c) Messung der Induktionsspannung U in Abhängigkeit von der Erregerfeldfrequenz
- Einstellungen laden
- Spule 1 (N1 = 300 Windungen) in der großen Feldspule an μV-Box anschließen
- Spannungsstellknopf des Dreieckstrom-Netzgeräts auf Rechtsanschlag drehen, Stromstellknopf soweit aufdrehen, dass Leistungsbegrenzung (LED Pmax) gerade noch nicht aktiv ist
- dl/dt = 0,2 A/s wählen und Taster zum Einschalten des Dreieckstrommodus drücken
- Messung mit F9 starten (Messwertaufnahme beginnt bei steigender Flanke der Induktionsspannung UB1, evtl. Trigger abschalten)
- Während der Messung dl/dt in Schritten von etwa 0,4 A/s erhöhen
- Messung wieder mit F9 stoppen

#### **Auswertung**

Je nach Versuchsteil kann nach der Messung in die passenden Darstellung (**Fläche**, **Windungszahl** oder **dl/dt** mit der Maus anklicken) gewechselt werden. Hier wird eine weitere Tabelle gefüllt, indem zum jeweiligen Parameter A, N1 oder dl/dt (über Tastatur in Tabelle eingeben, dl/dt kann durch eine Geradenanpassung bestimmt werden) die Induktionsspannung U ermittelt wird. Die Induktionsspannung U ergibt sich z. B. aus einer Mittelwertbildung. Sie kann danach mit der Maus aus der Statuszeile in die Tabelle gezogen werden (Drag & Drop). Bereits während der Tabelleneingabe entsteht das gewünschte Diagramm.

Alle drei Diagramme bestätigen die Proportionalitäten zwischen Induktionsspannung U und Fläche A, Windungszahl N1 sowie dl/dt.

Im Beispiel ergibt sich als Proportionalitätsfaktor U/A = 101 mV/m² (bzw. 129 mV/m² ohne Power-CASSY) zwischen der Induktionsspannung U und dem Spulenquerschnitt A. Die Theorie fordert den Proportionalitätsfaktor

$$\frac{U}{A} = -\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \cdot \mu_0 \cdot \frac{N_2}{L} \cdot N_1 .$$

Zum Vergleich folgt aus den Windungszahlen N1 = 300 der Induktionsspule und N2 = 120 der Luftspule, aus der Länge L = 0,41 m der Luftspule, aus dem ermittelten Anstieg des Stroms dI/dt = 1,00 A/s (bzw. 1,19 A/s) und der magnetischen Feldkonstante  $\mu$ 0 =  $4\pi\cdot10^{-7}$  Vs/Am der Proportionalitätsfaktor U/A = -110 mV/m² (bzw. -131 mV/m²), was sich mit dem experimentellen Ergebnis deckt. Das Vorzeichen hängt von den beiden Wicklungssinnen und dem Anschluss an die  $\mu$ V-Box ab.


# Anmerkungen

Die  $\mu$ V-Box kann einen kleinen Offset haben, der in den Einstellungen UB durch **Korrigieren**, Sollwert 0 mV, **Offset korrigieren** behoben werden kann; dazu jedoch vorher den Stromkreis der Luftspule unterbrechen.


Das Power-CASSY kann auch eine deutlich höhere Frequenz ausgeben und damit die  $\mu$ V-Box über-flüssig machen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Stromregelung des Power-CASSYs bei höheren Frequenzen und induktiven Lasten zu kleinen Überschwingern neigt, die sich jedoch in der induzierten Spannung (1. Ableitung des Stroms) unschön bemerkbar machen. Abhilfe schafft ein in Reihe geschalteter ohmscher Widerstand von etwa 10  $\Omega$ .



# Zeitabhängige Aufzeichnung von Spannung und Strom eines Transformators

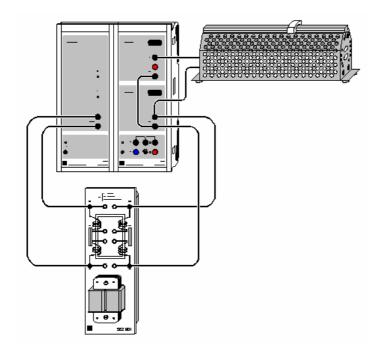

# Alternativ (ohne Power-CASSY):

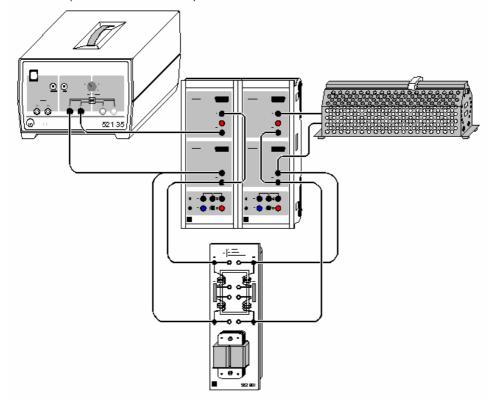



auch für Pocket-CASSY geeignet

- Beispiel laden (mit Power-CASSY)
- Beispiel laden (ohne Power-CASSY)



#### Versuchsbeschreibung

Es werden Primär- und Sekundärspannung sowie Primär- und Sekundärstrom eines belasteten Transformators als zeitabhängige Größen erfasst. CASSY Lab ermittelt daraus unmittelbar die zeitabhängigen Leistungen im Primär- und Sekundärkreis sowie die Effektivwerte von Spannung und Strom, die Phasenbeziehungen und die Wirkleistungen.

# **Benötigte Geräte**

1	Power-CASSY	524 011
1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Übungstransformator	562 801
1	Schiebewiderstand 100 $\Omega$	537 34
1	Kabel, 25 cm, schwarz	500 414
6	Kabel, 100 cm, schwarz	500 444
1	PC ab Windows 95/98/NT	

# **Alternativ (ohne Power-CASSY)**

2	Sensor-CASSYs	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Kleinspannungs-Stelltrafo S	521 35
1	Übungstransformator	562 801
1	Schiebewiderstand 100 $\Omega$	537 34
2	Kabel, 25 cm, schwarz	500 414
	Kabel, 100 cm, schwarz	500 444
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Primärseite des Transformators wird vom Power-CASSY bzw. vom Stelltrafo (ca. 6 V~) gespeist. Im zweiten Fall muss Primärspannung, Primärstrom und Phasenlage (cos  $\phi$ ) noch von einem zweiten Sensor-CASSY gemessen werden.

Auf der Sekundärseite übernimmt ein Sensor-CASSY die erforderlichen Messungen von Spannung, Strom und Phasenlage ( $\cos \varphi$ ). Der Transformator wird durch den Schiebewiderstand ohmsch ( $\cos \varphi = 1$ ) belastet. Bei Verfügbarkeit kann der Transformator aber auch induktiv oder kapazitiv ( $\cos \varphi < 1$ ) belastet werden. Die Härte des Transformators kann durch Parallelschaltung jeweils zweier Spulen auf Primär- und Sekundarseite des Übungstransformators erhöht werden.

Anstelle des Übungstransformators kann auch der zerlegbare Transformator verwendet werden.

# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden (mit Power-CASSY)
- Einstellungen laden (ohne Power-CASSY)
- Messung mit F9 starten
- Last variieren (z. B. auch induktiv oder kapazitiv) und Rückwirkung auf Sekundarkreis und Primärkreis beobachten
- Härte variieren und Verhalten unter Last beobachten
- Evtl. Kurvenform oder Frequenz der Primärspannung in Einstellungen U1 des Power-CASSYs verändern und Ergebnis beobachten
- Messung mit F9 beenden

#### Auswertung


Während oder nach der Messung kann in die Darstellung **Leistung** (mit der Maus anklicken) gewechselt werden. Dort werden auch die beiden zeitabhängigen Leistungen dargestellt.

#### Tipp


Die Messinstrumente lassen sich mit F7 gleichzeitig ausblenden und wieder einblenden.



# Leistungsübertragung eines Transformators

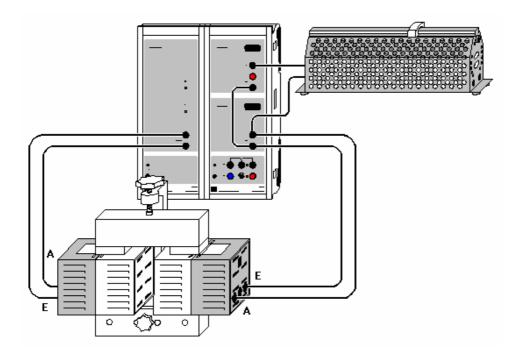

# Alternativ (ohne Power-CASSY):

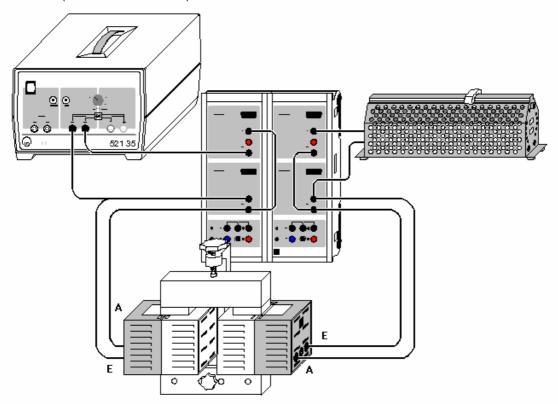



auch für Pocket-CASSY geeignet

- Beispiel laden (mit Power-CASSY)
- Beispiel laden (ohne Power-CASSY)



#### Versuchsbeschreibung

Es wird die Leistungsübertragung eines Transformators untersucht. Dazu werden gleichzeitig die Effektivwerte von Primär- und Sekundärspannung sowie von Primär- und Sekundärstrom für einen variablen Lastwiderstand R = 0-100  $\Omega$  gemessen. Außerdem wird die Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom auf der Primär- und Sekundärseite bestimmt. Zur Auswertung werden die Primärleistung P1, die Sekundärleistung P2 und der Wirkungsgrad  $\eta$  = P2/P1 berechnet und grafisch gegen den Lastwiderstand R aufgetragen.

#### **Benötigte Geräte**

1	Power-CASSY	524 011
1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	U-Kern mit Joch	562 11
1	Spannvorrichtung	562 12
2	Spulen mit 250 Windungen	562 13
1	Schiebewiderstand 100 $\Omega$	537 34
1	Kabel, 25 cm, schwarz	500 414
6	Kabel, 100 cm, schwarz	500 444
1	PC ah Windows 95/98/NT	

# **Alternativ (ohne Power-CASSY)**

2	Sensor-CASSYs	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Kleinspannungs-Stelltrafo S	521 35
1	U-Kern mit Joch	562 11
1	Spannvorrichtung	562 12
2	Spulen mit 250 Windungen	562 13
1	Schiebewiderstand 100 $\Omega$	537 34
2	Kabel, 25 cm, schwarz	500 414
8	Kabel, 100 cm, schwarz	500 444
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Primärseite des Transformators wird vom Power-CASSY bzw. vom Stelltrafo (ca. 6 V $\sim$ ) gespeist. Im zweiten Fall muss Primärspannung, Primärstrom und Phasenlage (cos  $\phi$ ) noch von einem zweiten Sensor-CASSY gemessen werden.

Auf der Sekundärseite übernimmt ein Sensor-CASSY die erforderlichen Messungen der Effektivwerte von Spannung und Strom und deren Phasenlage ( $\cos \varphi$ ). Der Transformator wird durch den Schiebewiderstand ohmsch ( $\cos \varphi = 1$ ) belastet.

Anstelle des zerlegbaren Transformators kann auch der Übungstransformator verwendet werden.

# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden (mit Power-CASSY)
- Einstellungen laden (ohne Power-CASSY)
- Schiebewiderstand auf Minimum (etwa 0  $\Omega$ ) einstellen
- Messung mit F9 auslösen
- Widerstand in Stufen vergrößern und jeweils wieder Messwerte mit F9 aufnehmen

#### Auswertung


Die Punkte maximaler Leistungsabgabe und maximalen Wirkungsgrades lassen sich leicht im Diagramm ablesen.

#### Tipp

Die Messinstrumente lassen sich mit F7 gleichzeitig ausblenden und wieder einblenden.

# (I)

# Leistung beliebiger mit Netzwechselspannung betriebener Verbraucher

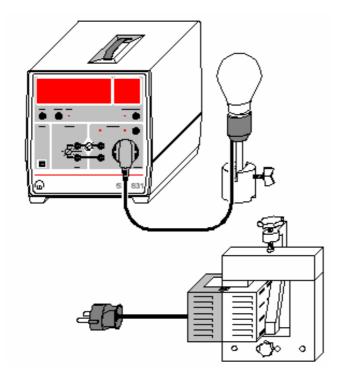

- Beispiel laden (Glühlampe)
- Beispiel laden (Energiesparlampe)
- Beispiel laden (Netzspule)

# **Sicherheitshinweis**

An der Steckdose des Joule- und Wattmeters liegt Netzspannung an. Auch wenn diese durch die Einstellungen der Software abgeschaltet werden kann, bleibt sie potentiell gefährlich. Spätestens beim Verlassen der Software liegt wieder Netzspannung an.

# Versuchsbeschreibung

Es werden die zeitabhängigen Größen U(t), I(t) und P(t) für einige an Netzwechselspannung angeschlossene Verbraucher aufgezeichnet. Zusätzlich werden die Wirkleistung P, die Scheinleistung S, die Blindleistung Q und der Leistungsfaktor cosφ angezeigt und können miteinander verglichen werden.

Die Wirkleistung P ist der Mittelwert der Momentanleistung  $P(t)=U(t)\cdot I(t)$ . Die Scheinleistung S ist definiert als Produkt der beiden Effektivwerte U und I, also  $S=U\cdot I$ . Der Leistungsfaktor  $\cos \phi$  ist das Verhältnis zwischen Wirk- und Scheinleistung, also  $\cos \phi = P/S$ . Dies gilt auch bei beliebigem nicht sinusförmigen Verlauf der Spannung U(t) und des Stroms I(t). Allerdings kann  $\phi$  dann nicht mehr als Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung interpretiert werden. Die Blindleistung Q berechnet sich schließlich aus der Wirkleistung P und der Scheinleistung S zu

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$

#### **Benötigte Geräte**

1	Joule- und Wattmeter	531 831
1	Lampenfassung E 27	451 17
1	Glühlampe 60 W, E 27	505 301
1	Energiesparlampe 14 W, E 27	505 3181
1	Sockel	300 11
1	U-Kern mit Joch	562 11
1	Spannvorrichtung	562 12
1	Netzspule, 230 V	562 21
4	DO 1 1411 1 00/0000	

1 PC ab Windows 98/2000

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Lampen in die Lampenfassung schrauben bzw. Netzspule auf U-Kern stecken, diesen mit Joch schließen und mit der Spannvorrichtung fest anschrauben.

Stecker der Lampenfassung bzw. der Netzspule (Netzspule einschalten) mit der Steckdose des Jouleund Wattmeters verbinden.

# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden (Glühlampe)
- Einstellungen laden (Energiesparlampe)
- Einstellungen laden (Netzspule)
- Durch Klick auf das Anzeigeinstrument Schalter X den Verbraucher einschalten.
- Messung mit F9 auslösen.
- · Verbraucher wieder ausschalten.

#### Auswertung

Die Netzwechselspannung U(t) verläuft immer annähernd sinusförmig.

# Glühlampe

Die Funktionen I(t) und P(t) sind annähernd sinusförmig. Die Momentanleistung P(t) nimmt nur positive Werte an. Die Wirk- und Scheinleistung sind identisch. Die Blindleistung ist vernachlässigbar klein. Der Leistungsfaktor cosφ beträgt 1.

# Energiesparlampe

Die Funktionen I(t) und P(t) sind nicht sinusförmig. Die Momentanleistung P(t) nimmt nur positive Werte an. Die Wirkleistung ist kleiner als die Schein- und die Blindleistung. Der Leistungsfaktor  $\cos \varphi$  beträgt ca. 0,64.

### Netzspule mit Eisenkern


Die Funktion I(t) und P(t) sind nicht sinusförmig. Die Momentanleistung P(t) nimmt sowohl positive als auch negative Werte an. Die Wirkleistung ist viel kleiner als die Schein- und die Blindleistung. Der Leistungsfaktor cosφ beträgt ca. 0,18.

# Hinweis

Es können auch andere Verbraucher untersucht werden. Es kann aber notwendig sein, den Messbereich des Stroms anzupassen (rechte Maustaste auf Schaltfläche I). Danach müssen eventuell die Formeln und Einheiten für S und Q angepasst werden (z. B. U\*I/1000, wenn U und I in V und A, aber S in kW angezeigt werden soll).



# Auf- und Entladung eines Kondensators

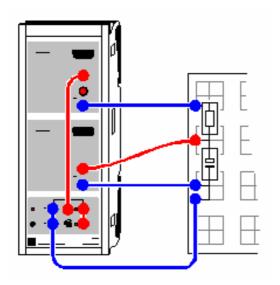

# ■ Beispiel laden

# Versuchsbeschreibung

Ein Kondensator wird über einen Widerstand aufgeladen oder entladen. Es werden die Spannungsverläufe am Kondensator sowie der Lade- oder Entladestrom gemessen. Daraus kann die Zeitkonstante  $\tau$  = RC bestimmt sowie der Energieinhalt des Kondensators berechnet werden.

#### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Rastersteckplatte, DIN A4	576 74
3	STE Kondensatoren 100 µF	578 39
1	STE Widerstand 100 $\Omega$	577 32
1	Experimentierkabel, 50 cm, blau	500 422
1	Paar Kabel, 25 cm, rot und blau	501 44
2	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501 45

1 PC ab Windows 95/98/NT

### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Der Auf- und Entladestromkreis wird gemäß Skizze an die Eingänge A (Strom) und B (Spannung) des Sensor-CASSYs angeschlossen. Das Relais R lädt in Position EIN (LED an) den Kondensator mit der Spannung aus der Spannungsquelle S auf und entlädt den Kondensator in Position AUS (LED aus).

# Versuchsdurchführung

- a) Entladung
- Einstellungen laden
- Ladespannung UB1 am Kondensator auf etwa 9,5 V einstellen dazu Drehknopf an Spannungsquelle S entsprechend einstellen
- Entladung mit F9 starten
- Entladung mit unterschiedlichen Kapazitäten wiederholen (z. B. 200 μF und 300 μF)
- b) Aufladung
- Relais manuell umschalten dazu in Einstellungen Relais R1 die Formel von 1 nach 0 ändern und Eingabetaste betätigen
- Aufladung mit F9 starten
- Aufladung mit unterschiedlichen Kapazitäten wiederholen (z. B. 200 μF und 300 μF)



# **Auswertung**

Für die Bestimmung der Zeitkonstanten  $\tau$  = RC können die Darstellungen **Spannung** und **Strom** (mit der Maus auswählen) logarithmiert werden. Dazu kann die y-Achse mit der rechten Maustaste angeklickt und umgerechnet werden. Zur besseren Darstellung sollten beim Logarithmieren die Minima manuell vorgegeben werden (z. B. -1 bei log U bzw. -3 bei log I). Die sich ergebene Steigung A einer Geradenanpassung ist in beiden Fällen A = -0,4343/RC.

Die Zeitkonstante ergibt sich alternativ direkt aus einer Exponentialanpassung oder einer freien Anpassung der Funktion A\*exp(-x/B) oder A\*(1-exp(-x/B)) mit geeigneten Startwerten für die Ladespannung A und die Zeitkonstante B = RC =  $\tau$ .

Man kann die Kapazitäten C aber auch aus der zuführten oder abgeführten Ladung Q ermitteln. Die Ladung Q ergibt sich als Integral der I(t)-Diagramme und Q = CU (U ist Ladespannung).


Die gespeicherte Energie E = ½CU² ist das Integral der P(t)-Diagramme in der Darstellung Leistung.

#### Tipp

Einen definierten Zeitnullpunkt erreicht man am einfachsten über die Einstellung eines Triggers. Am besten eignet sich dazu der Strom IA1 (bei Aufladung z. B. 0,001 A, steigende Flanke, bei Entladung z. B. –0,001 A, fallende Flanke). Bei eingeschaltetem Trigger kann zur besseren Übersichtlichkeit der Schaltung anstatt des Relais auch ein externen Umschalter verwendet werden.



# Auf- und Entladung eines Kondensators (mit Modellbildung)

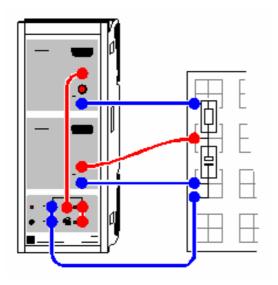

- Beispiel laden (Kondensatoraufladung)
- Beispiel laden (Kondensatorentladung)

# Versuchsbeschreibung

Ein Kondensator wird über einen Widerstand aufgeladen oder entladen. Es wird der Spannungsverlauf am Kondensator gemessen.

Als Ergänzung zum vorangegangenen Versuch wird hier der gemessene Spannungsverlauf mit dem Spannungsverlauf UC(t) verglichen, der sich aus der Energieerhaltung ergibt. Die von außen zugeführte Leistung U·I(t)muss der Summe der Leistungen des Kondensators d(1/2·C·UC(t)²)/dt und des Widerstands R·I(t)² entsprechen, also

$$U \cdot I(t) = U \cdot Q'(t) = d(1/2 \cdot Q(t)^2/C)/dt + R \cdot I(t)^2 = Q(t)/C \cdot Q'(t) + R \cdot Q'(t)^2$$

und nach Q'(t) umgeformt

$$Q'(t) = I(t) = -Q(t)/RC+U/R.$$

U ist die extern angelegte Spannung und entspricht der Spannung am Ende des Auf- oder Entladevorgangs. Die Konstanten R und C entsprechen dem verwendeten Widerstand und dem Kondensator. Die Spannung Uc(t) am Kondensator ist Q(t)/C.

# **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Rastersteckplatte, DIN A4	576 74
3	STE Kondensatoren 100 µF	578 39
1	STE Widerstand 100 $\Omega$	577 32
1	Experimentierkabel, 50 cm, blau	500 422
1	Paar Kabel, 25 cm, rot und blau	501 44
2	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501 45

# 1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Der Auf- und Entladestromkreis wird gemäß Skizze an die Eingänge A (Strom) und B (Spannung) des Sensor-CASSYs angeschlossen. Das Relais R lädt in Position EIN (LED an) den Kondensator mit der Spannung aus der Spannungsquelle S auf und entlädt den Kondensator in Position AUS (LED aus).



#### Versuchsdurchführung

- a) Entladung
- Einstellungen laden
- Ladespannung UB1 am Kondensator auf etwa 9,5 V einstellen dazu Drehknopf an Spannungsquelle S entsprechend einstellen
- Entladung mit F9 starten
- Entladung mit unterschiedlichen Kapazitäten wiederholen (z. B. 200 μF und 300 μF)
- b) Aufladung
- Einstellungen laden
- Aufladung mit F9 starten
- Aufladung mit unterschiedlichen Kapazitäten wiederholen (z. B. 200 μF und 300 μF)


# Modellbildung

Bei der Aufladung des Kondensators ist die Anfangsbedingung Q(t=0)=0. Die Konstanten Widerstand R, Kapazität C und die extern angelegte Spannung U können durch Ziehen am Zeiger des entsprechenden Anzeigeinstruments (oder durch Linksklick oder nach Rechtsklick) so verändert werden, dass das Modell mit der Messung überein stimmt.

Bei der Entladung des Kondensators ist die Anfangsbedingung Q(t=0)=C·U0. Die Konstanten Widerstand R, Kapazität C und Anfangsspannung U0 des Kondensators können durch Ziehen am Zeiger des entsprechenden Anzeigeinstruments (oder durch Linksklick oder nach Rechtsklick) so verändert werden, dass das Modell mit der Messung überein stimmt.



# Auf- und Entladung eines kleinen Kondensators (Kabelkapazitäten)

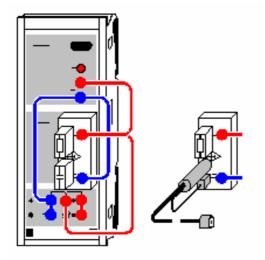

# ■ Beispiel laden

# Versuchsbeschreibung

Ein Kondensator wird über einen Widerstand aufgeladen oder entladen. Es werden die Spannungsverläufe UB(t) am Kondensator sowie der Lade- oder Entladestrom IA(t)=(UA-UB(t))/R gemessen. Daraus kann die Zeitkonstante  $\tau$  = RC bestimmt sowie der Energieinhalt des Kondensators berechnet werden.

Als Kondensator dienen kleine STE-Kondensatoren oder ein BNC-Kabel, dessen Kabelkapazität bestimmt werden kann.

Für die extrem hochohmige Messung am Kondensator wird die Elektrometer-Box verwendet.

# **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Elektrometer-Box	524 054
1	STE Widerstand 1 G $\Omega$	577 02
1	STE Kondensator 47 pF	578 21
1	STE Kondensator 100 pF	578 22
1	STE Kondensator 220 pF	578 23
1	Messkabel BNC/4 mm, 120 pF	575 24
3	Paar Kabel, 25 cm, rot und blau	501 44

# 1 PC ab Windows 95/98/NT

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Der Auf- und Entladestromkreis wird gemäß Skizze an die Eingänge A und B des Sensor-CASSYs angeschlossen. Das Relais R lädt in Position EIN (LED an) den Kondensator mit der Spannung aus der Spannungsquelle S auf und entlädt den Kondensator in Position AUS (LED aus).

# Versuchsdurchführung

- a) Entladung
- Einstellungen laden
- Ladespannung UB1 am Kondensator auf etwa 7,5 V einstellen dazu Drehknopf an Spannungsquelle S entsprechend einstellen
- Entladung mit F9 starten
- Entladung mit unterschiedlichen Kapazitäten wiederholen (z. B. 100 pF und 220 pF)



- Relais manuell umschalten dazu in Einstellungen Relais R1 die Formel von 1 nach 0 ändern und Eingabetaste betätigen
- Aufladung mit F9 starten
- Aufladung mit unterschiedlichen Kapazitäten wiederholen (z. B. 100 pF und 220 pF)

#### **Auswertung**

Für die Bestimmung der Zeitkonstanten  $\tau$  = RC können die Darstellungen **Spannung** und **Strom** (mit der Maus auswählen) logarithmiert werden. Dazu kann die y-Achse mit der rechten Maustaste angeklickt und umgerechnet werden. Zur besseren Darstellung sollten beim Logarithmieren die Minima manuell vorgegeben werden (z. B. -1 bei log U bzw. -3 bei log I). Die sich ergebene Steigung A einer Geradenanpassung ist in beiden Fällen A = -0,4343/RC.

Die Zeitkonstante ergibt sich alternativ direkt aus einer Exponentialanpassung oder einer freien Anpassung der Funktion A\*exp(-x/B) oder A\*(1-exp(-x/B)) mit geeigneten Startwerten für die Ladespannung A und die Zeitkonstante B = RC =  $\tau$ . Die Zeitkonstante in s entspricht für R = 1 G $\Omega$  der Kapazität in nF.

Man kann die Kapazitäten C aber auch aus der zuführten oder abgeführten Ladung Q ermitteln. Die Ladung Q ergibt sich als Integral der I(t)-Diagramme und Q = CU (U ist Ladespannung).


Die gespeicherte Energie E = ½CU² ist das Integral der P(t)-Diagramme in der Darstellung Leistung.

# **Tipp**

Einen definierten Zeitnullpunkt erreicht man am einfachsten über die Einstellung eines Triggers. Am besten eignet sich dazu die Spannung UA1 (bei Aufladung z. B. 0,5 V, steigende Flanke, bei Entladung z. B. 0,5 V, fallende Flanke). Bei eingeschaltetem Trigger kann zur besseren Übersichtlichkeit der Schaltung anstatt des Relais auch ein externen Umschalter verwendet werden.



# Gedämpfter Schwingkreis

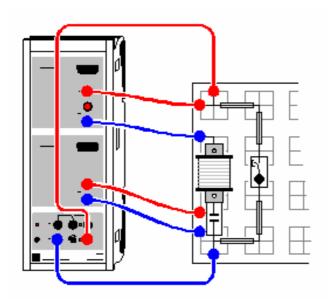

Beispiel laden

#### Versuchsbeschreibung

Ein elektrischer Schwingkreis wird angeregt und die freie Schwingung aufgezeichnet. Die Dämpfung und die Phasendifferenz zwischen U(t) und I(t) wird sichtbar. In der Auswertung werden die ermittelten Parameter Frequenz  $\omega$  und Dämpfungsfaktor  $\delta$  der Schwingung mit der Theorie verglichen.

# **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Rastersteckplatte, DIN A4	576 74
1	STE Spule 1000 Windungen	590 84
1	STE Kondensator 1 µF, 5 %	578 15
1	Taster (Schließer)	579 10
1	Satz Brückenstecker	501 48
3	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501 45

1 PC ab Windows 95/98/NT

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Der Schwingkreis wird gemäß Skizze auf der Rastersteckplatte aufgebaut. Der Strom fließt durch Eingang A des Sensor-CASSYs und die Kondensatorspannung wird an Eingang B gemessen. Zu Beginn der Experiments wird der Kondensator aus der Spannungsquelle S aufgeladen. Zum Start der Schwingung wird der Taster gedrückt, welcher dabei die Spannungsquelle S kurzschließt.

#### Hinweis

Anstelle des Tasters könnte auch das Relais R verwendet werden. Dieses kann jedoch beim Schalten so stark prellen, dass in den ersten Millisekunden der Schwingung diese noch gestört wird.

# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Ladespannung UB1 am Kondensator auf etwa 9,5 V einstellen dazu Spannungsquelle S entsprechend einstellen
- Messung mit **F9** starten (wartet dann auf Triggersignal)
- Schwingkreis mit Taster schließen (erzeugt Triggersignal)

# **Auswertung**

Die Frequenz f der Schwingung lässt sich am leichtesten im **Frequenzspektrum** ermitteln (Darstellung anklicken und Peakschwerpunkt berechnen). Die Anfangsamplitude und die Zeitkonstante der Dämpfung ergibt sich aus den Parametern A und B der Anpassung einer Einhüllenden.

Mit diesen Parametern lässt sich eindrucksvoll Übereinstimmung von U(t) mit y(t) = A\*exp(-t/B)\*sin(f\*t\*360) zeigen. Dazu müssen die Parameter A, B und f in den Einstellungen der Formel y geändert und die Darstellung **Anpassung** gewählt werden.

#### **Beispiel**

Das Versuchsbeispiel liefert aus der U(t)-Einhüllenden die Anfangsamplitude A = 6,64 V und die Zeitkonstante B = 1,77 ms. Die Schwingungsfrequenz wird zu 1235 Hz ermittelt. Die Funktion der Schwingung lautet daher

```
y(t) = 6.64 \exp(-t/0.00177) \sin(1235 t 360)
```

und ist als Funktion der Anpassung an U(t) eingegeben. Für I(t) gelten die gleiche Zeitkonstante und Frequenz aber eine andere Anfangsamplitude und Phasenlage.

Aus den ermittelten Parametern lassen sich auch Rückschlüsse auf die Parameter R, L und C des Schwingkreises schließen, da im gedämpften Schwingkreis gilt:

```
U(t) = U0 \exp(-\delta t) \sin(\omega t) mit
```

```
(1) \omega^2 = \omega 0^2 - \delta^2,
```

- (2)  $\omega 0^2 = 1/LC$  und
- (3)  $\delta = R/2L$  (= 1/B der Einhüllenden).

Die ermittelten Werte eingesetzt liefert dann:

```
\omega = 2\pi f = 7760 /s


\delta = 565 /s

\omega 0 = 7781 /s aus (1).
```

Aus (2) lässt sich nun die Induktivität L der Spule berechnen, wenn die Kapazität C bekannt ist. Im Beispiel folgt L = 0,0165 H (mit C = 1  $\mu$ F). Aus (3) folgt nun der Dämpfungswiderstand R = 18,6  $\Omega$ . Dies deckt sich gut mit der Spezifikation der verwendeten Spule (R = 18  $\Omega$ ).



# Gedämpfter Schwingkreis (mit Modellbildung)

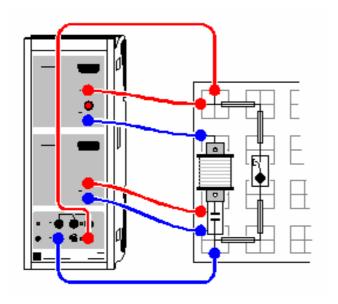

#### Beispiel laden

# Versuchsbeschreibung

Ein elektrischer Schwingkreis wird angeregt und die freie Schwingung als Stromfluss durch den Schwingkreis aufgezeichnet.

Als Ergänzung zum vorangegangenen Versuch wird hier der gemessene Stromverlauf mit dem Stromverlauf I(t) verglichen, der sich aus der Energieerhaltung ergibt. Die Summe der Leistungen des Kondensators d(1/2·C·Uc(t)²)/dt, der Spule d(1/2·L·I(t)²)/dt und des Widerstands R·I(t)² muss null sein, weil während der freien Schwingung keine Energie zugeführt wird, also

$$d(1/2\cdot Q(t)^2/C)/dt + d(1/2\cdot L\cdot I(t)^2)/dt + R\cdot I(t)^2 = Q(t)/C\cdot Q'(t) + L\cdot Q'(t)\cdot Q''(t) + R\cdot Q'(t)^2 = 0$$
 und nach Q''(t) umgeformt

$$Q''(t) = I'(t) = -Q(t)/LC - R \cdot Q'(t)/L$$

Die Konstanten R, L und C entsprechen dem verwendeten Widerstand, der Spule und dem Kondensator.

# **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Rastersteckplatte, DIN A4	576 74
1	STE Spule 1000 Windungen	590 84
1	STE Kondensator 1 µF, 5 %	578 15
1	Taster (Schließer)	579 10
1	Satz Brückenstecker	501 48
3	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501 45

1 PC ab Windows 95/98/NT

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Der Schwingkreis wird gemäß Skizze auf der Rastersteckplatte aufgebaut. Der Strom fließt durch Eingang A des Sensor-CASSYs und die Kondensatorspannung wird an Eingang B gemessen. Zu Beginn der Experiments wird der Kondensator aus der Spannungsquelle S aufgeladen. Zum Start der Schwingung wird der Taster gedrückt, welcher dabei die Spannungsquelle S kurzschließt.




# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Ladespannung UB1 am Kondensator auf etwa 9,5 V einstellen dazu Spannungsquelle S entsprechend einstellen
- Messung mit F9 starten (wartet dann auf Triggersignal)
- Schwingkreis mit Taster schließen (erzeugt Triggersignal)

# Modellbildung

Die Anfangsbedingung für die Ladung Q des Kondensators ist  $Q(t=0)=-U_0\cdot C$  mit der Anfangsspannung Uo. Diese Spannung Uo ist nicht genau die Ladespannung des Kondensators, weil die Messung erst etwas später bei I=0 getriggert wird. Deshalb ist auch die zweite Anfangsbedingung einfach I(t=0)=0. Die Konstanten Widerstand R, Kapazität C, Induktivität L und Anfangsspannung Uo können durch Ziehen am Zeiger des entsprechenden Anzeigeinstruments (oder durch Linksklick oder nach Rechtsklick) so verändert werden, dass das Modell mit der Messung überein stimmt. Dabei ist der Gleichstromwiderstand der Spule (ca. 20  $\Omega$ ) beim Dämpfungswiderstand R mit zu berücksichtigen.

# **Gekoppelte Schwingkreise**

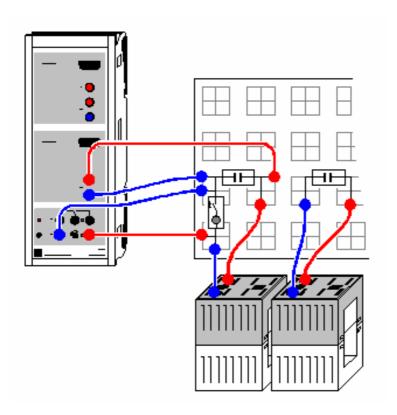

# ■ Beispiel laden

#### Versuchsbeschreibung

Es wird das Frequenzspektrum gekoppelter elektrischer Schwingkreise mit dem Spektrum eines ungekoppelten Schwingkreises verglichen. Das fouriertransformierte Signal der gekoppelten Schwingkreise zeigt die Aufspaltung in zwei symmetrisch um das ungekoppelte Signal liegende Verteilungen, deren Abstand von der Kopplung der Schwingkreise abhängt.

# **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Rastersteckplatte, DIN A4	576 74
1	Taster	579 10
2	STE Kondensatoren 1 µF, 5 %	578 15
2	Spulen mit 500 Windungen	562 14
4	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501 45
1	PC ab Windows 95/98/NT	

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Der erste Schwingkreis wird gemäß Skizze aufgebaut. Die Kondensatorspannung wird an Eingang B des Sensor-CASSYs gemessen. Zu Beginn der Experiments wird der Kondensator aus der Spannungsquelle S aufgeladen. Zum Start der Schwingung wird der Taster gedrückt, welcher dabei die Spannungsquelle S kurzschließt.

Der zweite Schwingkreis wird separat aufgebaut. Seine Spule wird für die Kopplung der Schwingkreise direkt neben die erste Spule gestellt.

#### Hinweis

Anstelle des Tasters könnte auch das Relais R verwendet werden. Dieses kann jedoch beim Schalten so stark prellen, dass in den ersten Millisekunden der Schwingung diese noch gestört wird.





# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Ladespannung UB1 am Kondensator auf etwa 9,5 V einstellen dazu Spannungsquelle S entsprechend einstellen
- Messung mit F9 starten (wartet dann auf Triggersignal)
- Schwingkreis mit Taster schließen (erzeugt Triggersignal)
- Spule des zweiten Schwingkreises zur Kopplung direkt neben die erste Spule stellen
- Messung mit F9 starten (wartet dann auf Triggersignal)
- Schwingkreis mit Taster schließen (erzeugt Triggersignal)

# **Auswertung**

Im ungekoppelten Fall ergibt sich eine gedämpfte harmonische Schwingung. Die gekoppelte Schwingung ist eine Schwebung mit der gleichen Einhüllenden und der gleichen Schwingungsfrequenz.

Im ungekoppelten Fall zeigt das **Frequenzspektrum** nur einen Peak, dessen Frequenz sich durch die Berechnung des Peakschwerpunkts ermitteln lässt.

Im gekoppelten Fall spaltet die Frequenz symmetrisch in zwei Frequenzen auf. Die Amplituden sind nur halb so groß wie im ungekoppelten Fall und der Abstand hängt von der Kopplung ab.

Ausgehend von den Differenzialgleichungen der gekoppelten Schwingkreise

$$L\ddot{I}_1 + kL\ddot{I}_2 + I_1/C = 0$$
  
 $L\ddot{I}_2 + kL\ddot{I}_1 + I_2/C = 0$ 

mit Kopplung k  $(0 \le k < 1)$  folgen die beiden Eigenfrequenzen  $\omega 1$  und  $\omega 2$  zu

$$\frac{\omega_0}{\sqrt{1+k}} = \omega_1 < \omega_0 < \omega_2 = \frac{\omega_0}{\sqrt{1-k}}.$$

Insbesondere ist die Schwingungsfrequenz des gekoppelten Systems gleich


$$\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 - k^2}} \approx \omega_0$$

und damit praktisch unverändert gegenüber dem ungekoppelten System (für kleine k).

# Hinweis

Die Aufspaltung in zwei exakt gleich große Peaks gelingt nur bei genau gleichen Schwingkreisen. Durch Toleranzen der Induktivitäten L und der Kapazitäten C ist das nicht immer genau gegeben.

# **Erzwungene Schwingungen (Resonanz)**

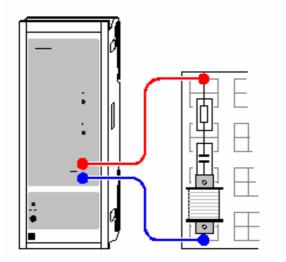

# ■ Beispiel laden

### Versuchsbeschreibung

Einem elektrischen RLC-Serienschwingkreis wird eine Sinusschwingung der Frequenz f mit konstanter Amplitude aufgeprägt. Dabei stellt sich nach einer kurzen Einschwingzeit im Schwingkreis ebenfalls eine Schwingung der Frequenz f ein.

Untersucht wird der Effektivwert des fließenden Stroms I und die Phasenlage  $\phi$  des Stroms zur aufgeprägten Spannung in Abhängigkeit von der Frequenz f und dem ohmschen Dämpfungswiderstand R. Die Ortskurven veranschaulichen die Addition komplexer Widerstände.

# **Benötigte Geräte**

1	Power-CASSY	524 011
1	CASSY Lab	524 200
1	Rastersteckplatte DIN A4	576 74
1	STE Spule 500 Windungen	590 83
1	STE Kondensator 4,7 µF, 5 %	578 16
2	STE Widerstände 1 $\Omega$	577 19
1	STE Widerstand 5,1 $\Omega$	577 21
1	STE Widerstand 10 $\Omega$	577 20
1	STE Widerstand 20 $\Omega$	577 23
1	STE Widerstand 47 $\Omega$	577 28
1	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501 45
1	PC ab Windows 95/98/NT	

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Der Schwingkreis wird entsprechend der Skizze an das Power-CASSY angeschlossen. Bei Bedarf werden zusätzliche Dämpfungswiderstände in Serie geschaltet.

# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Messung mit F9 starten. Es wird die Frequenz f automatisch in kleinen Schritten erhöht. Nach einer kurzen Einschwingzeit werden jeweils der Effektivwert des Stroms I sowie die Phasenlage φ zwischen Spannung und Strom gemessen und dargestellt.
  - Die Schrittweite ist variabel und richtet sich nach den Vorgaben für die Anzahl no, die Startfrequenz fo und die ungefähre Resonanzfrequenz f1. Zwischen den beiden Frequenzen f0 und f1 werden no Messwerte aufgenommen. Danach wird die Frequenz f noch weiter erhöht und zwar so, dass um f=f1, also in der Nähe der Resonanzfrequenz, die Werte besonders dicht aufgenommen

werden. Dadurch reduziert sich die erforderliche Messzeit erheblich im Vergleich zu äquidistanten Frequenzschritten. Die Vorgaben können durch Schieben der Zeiger mit der Maus oder durch Ändern des Parameterwertes nach Anklicken mit der rechten Maustaste geändert werden.

Die Messbedingung f < 5\*f1 and f < 5000 and delta t > 2/f+2 erlaubt die Messwertaufnahme bis 5 kHz (oder der 5-fachen Resonanzfrequenz), aber frühestens nach 2/f+2 s nach einer Frequenzerhöhung (Einschwingzeit).

- Messung mit F9 bei Erreichen der gewünschten Frequenz stoppen.
- Messung bei Bedarf mit anderen Dämpfungswiderständen wiederholen.

#### **Auswertung**

Zur exakten Bestimmung der Resonanzfrequenz des Schwingkreises eignet sich beispielsweise die Bestimmung des Peakschwerpunkts in der Darstellung **Resonanz**.

In weiteren Darstellungen werden auch die Leistung und die Phase über der Frequenz dargestellt.

Die beiden letzten Darstellungen zeigen die **Ortskurven** für den komplexen Widerstand Z des Schwingkreises sowie für den komplexen Leitwert Y. In der Z-Darstellung lässt sich sehr schön die Addition komplexer Widerstände in der Serienschaltung ablesen:  $Z=R+i\omega L+1/i\omega C$ . Da im Beispiel für jeden Dämpfungswiderstand nur die Frequenz  $\omega$ , und damit der Imaginärteil von Z variiert wird, bleibt der reelle ohmsche Teil konstant. In der komplexen Zahlenebene entstehen somit senkrechte Geraden, deren Abstand von der imaginären Achse gerade dem ohmschen Widerstand R entspricht. Da im Beispiel die Spule einen ohmschen Innenwiderstand von etwa 4  $\Omega$  besitzt, ist auch der Abstand von der imaginären Achse um etwa 4  $\Omega$  größer als der jeweilige Dämpfungswiderstand.

#### **Anmerkung**

Für einen Wechselstromkreis kann man schreiben

 $U = |U| * e^i\omega t$  und  $I = |I| * e^i(\omega t + \varphi)$ 

wobei der komplexe Widerstand Z = U/I nicht mehr von t abhängt

 $Z = |U|/|I| * e^{-i\varphi} = |Z| * e^{-i\varphi}$  (Z-Ortskurve)

Umgekehrt gilt

 $Y = 1/Z = 1/|Z| * e^i \varphi (Y-Ortskurve)$ 

Die Y-Ortskurve entspricht der komplexen Inversion der Z-Ortskurve (r -> -r,  $\phi$  -> - $\phi$ ). Durch diese Transformation entstehen aus den Geraden Z = R + i $\omega$ L + 1/i $\omega$ C der Z-Ortskurven in der Y-Darstellung Kreise (Spiegelung am Einheitskreis).


# **Tipps**

Die Messinstrumente lassen sich mit F7 gleichzeitig ausblenden und wieder einblenden.

Eine einfache Logarithmierung der Frequenz- oder der Stromachse lässt sich nach Anklicken der entsprechenden Achse mit der rechten Maustaste erreichen.



# **Erzwungene Schwingungen (mit Modellbildung)**

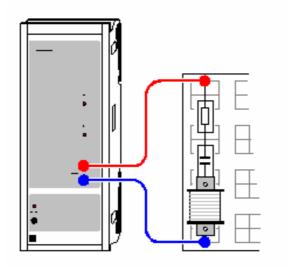

# ■ Beispiel laden

# Versuchsbeschreibung

Einem elektrischen RLC-Serienschwingkreis wird eine Sinusschwingung der Frequenz f mit konstanter Amplitude aufgeprägt. Dabei stellt sich nach einer kurzen Einschwingzeit im Schwingkreis ebenfalls eine Schwingung der Frequenz f ein.

Als Ergänzung zum vorangegangenen Versuch wird hier der gemessene Stromverlauf mit dem Stromverlauf I(t) verglichen, der sich aus der Energieerhaltung ergibt. Die von außen zugeführte Leistung U(t)·I(t) muss der Summe der Leistungen des Kondensators d(1/2·C·Uc(t)²)/dt, der Spule d(1/2·L·I(t)²)/dt und des Widerstands R·I(t)² entsprechen, also

 $U(t)\cdot I(t) = U(t)\cdot Q'(t) = d(1/2\cdot Q(t)^2/C)/dt + d(1/2\cdot L\cdot I(t)^2)/dt + R\cdot I(t)^2 = Q(t)/C\cdot Q'(t) + L\cdot Q'(t)\cdot Q''(t) + R\cdot Q'(t)^2$  und nach Q''(t) umgeformt

$$Q''(t) = I'(t) = U(t)/L - Q(t)/LC - R \cdot Q'(t)/L$$

Die Konstanten R, L und C entsprechen dem verwendeten Widerstand, der Spule und dem Kondensator.

#### **Benötigte Geräte**

1	Power-CASSY	524 011
1	CASSY Lab	524 200
1	Rastersteckplatte DIN A4	576 74
1	STE Spule 500 Windungen	590 83
1	STE Kondensator 4,7 µF, 5 %	578 16
2	STE Widerstände 1 $\Omega$	577 19
1	STE Widerstand 5,1 $\Omega$	577 21
1	STE Widerstand 10 $\Omega$	577 20
1	STE Widerstand 20 $\Omega$	577 23
1	STE Widerstand 47 $\Omega$	577 28
1	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501 45
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Der Schwingkreis wird entsprechend der Skizze an das Power-CASSY angeschlossen. Bei Bedarf werden zusätzliche Dämpfungswiderstände in Serie geschaltet.



# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Messung mit F9 starten
- Messung bei Bedarf mit veränderter Frequenz f (Zeiger im Anzeigeinstrument verschieben) oder mit anderen Dämpfungswiderständen wiederholen.


# Modellbildung

Die Anfangsbedingungen für die Ladung Q des Kondensators und für den Strom I sind beide Null, weil der Schwingkreis vor der Messung spannungs- und stromlos ist. Die Konstanten Widerstand R, Kapazität C und Induktivität L können durch Ziehen am Zeiger des entsprechenden Anzeigeinstruments (oder durch Linksklick oder nach Rechtsklick) so verändert werden, dass das Modell mit der Messung überein stimmt. Dabei ist der Gleichstromwiderstand der Spule (ca. 4  $\Omega$ ) beim Dämpfungswiderstand R mit zu berücksichtigen.

Das Power-CASSY schaltet erst mit Start der Messung die anregende Frequenz ein. Dadurch wird auch der Einschwingvorgang des Schwingkreises sichtbar. Abhängig von Dämpfung und Frequenz kann man sehen, dass der Schwingkreis zu Anfang mit seiner Eigenfrequenz (Resonanzfrequenz) schwingt, bevor er auf die anregende Frequenz gezwungen wird.



# **RLC-Filter (Tiefpass, Hochpass, Bandpass)**

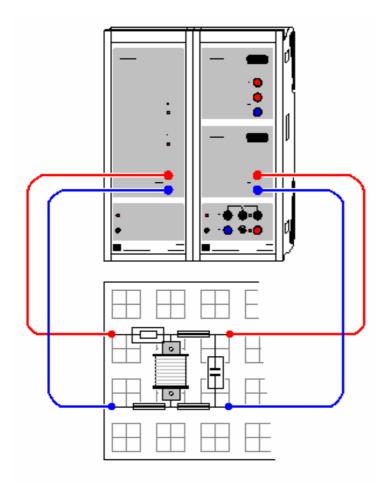

# ■ Beispiel laden

# Versuchsbeschreibung

Einem elektrischen Filter aus Widerstand und Kondensator (RC), Widerstand und Spule (RL) oder einem Widerstand und einem LC-Parallelschwingkreis (RLC) wird eine Sinusschwingung der Frequenz f mit konstanter Amplitude aufgeprägt. Dabei stellt sich nach einer kurzen Einschwingzeit am Ausgang des Filters ebenfalls eine Schwingung der Frequenz f ein.

Untersucht werden die Effektivwerte der Ausgangsspannung U und des fließenden Stroms I, die Wechselstromwiderstände Z1 =  $1/(1/i\omega C + i\omega L)$  (nur LC) und Z = R +  $1/(1/i\omega C + i\omega L)$  (R mit LC) und die Phasenlage  $\phi$  zwischen Strom und aufgeprägter Spannung in Abhängigkeit von der Frequenz f.

Dabei lässt sich sehr schön die Wirkung eines Tiefpasses (RC), Hochpasses (RL) und Bandpasses (RLC) zeigen, sowie die Wechselstromwiderstände, Phasenverschiebungen und die Parallelresonanz am RLC-Filter diskutieren. Die Ortskurven veranschaulichen die Addition komplexer Widerstände.

# **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	Power-CASSY	524 011
1	CASSY Lab	524 200
1	Rastersteckplatte DIN A4	576 74
1	STE Widerstand 100 $\Omega$	577 32
1	STE Spule 500 Windungen	590 83
	STE Kondensator 4,7 µF, 5 %	578 16
2	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501 45

1 PC ab Windows 95/98/NT



# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Das elektrische Filter wird entsprechend der Skizze an das Power-CASSY und das Sensor-CASSY angeschlossen. Während des Versuchs kann die Art des Filters (RC, RL oder RLC) durch Ausstecken oder Einstecken der Spule (L) oder des Kondensators (C) variiert werden.

# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- RC-Filter durch Herausnehmen der Spule realisieren.
- Messung mit F9 starten. Es wird die Frequenz f automatisch in kleinen Schritten erhöht. Nach einer kurzen Einschwingzeit werden jeweils die Effektivwerte der Ausgangsspannung U und des Stroms I gemessen und dargestellt.
  - Die Schrittweite ist variabel und richtet sich nach den Vorgaben für die Anzahl no, die Startfrequenz fo und die ungefähre Resonanzfrequenz f1. Zwischen den beiden Frequenzen fo und f1 werden no Messwerte aufgenommen. Danach wird die Frequenz f noch weiter erhöht und zwar so, dass um f=f1, also in der Nähe der Resonanzfrequenz, die Werte besonders dicht aufgenommen werden. Dadurch reduziert sich die erforderliche Messzeit erheblich im Vergleich zu äquidistanten Frequenzschritten. Die Vorgaben können durch Schieben der Zeiger mit der Maus oder durch Ändern des Parameterwertes nach Anklicken mit der rechten Maustaste geändert werden.
  - Die Messbedingung f < 5\*f1 and f < 5000 and delta t > 2/f+3 erlaubt die Messwertaufnahme bis 5 kHz (oder der 5-fachen Resonanzfrequenz), aber frühestens nach 2/f+3 s nach einer Frequenzerhöhung (Einschwingzeit).
- Messung mit **F9** bei Erreichen der gewünschten Frequenz stoppen.
- Messung mit RL- und RLC-Filter wiederholen.

# **Auswertung**

Die Darstellungen **Ausgangsspannung** und **Strom** (mit der Maus anklicken) zeigen die Verläufe der Ausgangsspannung und des fließenden Stroms in Abhängigkeit von der Frequenz. Das RC-Filter dämpft die Ausgangsspannung bei hohen Frequenzen pro Oktave (Frequenzverdopplung) um etwa die Hälfte (Tiefpass). Das RL-Filter dagegen dämpft die niedrigen Frequenzen pro Oktave (Frequenzhalbierung) um etwa die Hälfte (Hochpass). Das RLC-Filter dämpft außerhalb der Resonanzfrequenz des LC-Parallelschwingkreises entsprechend der einzelnen Filter. Im Resonanzbereich hat die Ausgangsspannung aber ein ausgeprägtes Maximum (Bandpass). Die Resonanzfrequenz in von R unabhängig.

Außerdem werden die beiden Wechselstromwiderstände Z1 (nur LC) sowie Z (R mit LC) berechnet und dargestellt. Der Widerstand des LC-Parallelschwingkreises ist bei seiner Resonanzfrequenz maximal (im Idealfall wäre er sogar unendlich). Der fließende Strom wird daher minimal und damit auch der Spannungsabfall am Widerstand. Deshalb ist die Ausgangsspannung im Resonanzfall maximal.

Die Darstellung **Phase** zeigt dann die Phasenverschiebung zwischen aufgeprägter Spannung und fließendem Strom.

Die beiden letzten Darstellungen zeigen die **Ortskurven** für den komplexen Widerstand Z des Filters sowie für den komplexen Leitwert Y. In der Z-Darstellung lässt sich sehr schön die Addition komplexer Widerstände in der Serienschaltung ablesen. Beim Tiefpass gilt  $Z=R+1/i\omega C$  und beim Hochpass gilt  $Z=R+i\omega L$ . Da nur die Frequenz  $\omega$ , und damit der Imaginärteil von Z variiert wird, bleibt der reelle ohmsche Teil konstant. In der komplexen Zahlenebene entstehen somit senkrechte Geraden, deren Abstand von der imaginären Achse gerade dem ohmschen Widerstand R entspricht. Da im Beispiel die Spule einen ohmschen Innenwiderstand von etwa 4  $\Omega$  besitzt, ist beim Hochpass auch der Abstand von der imaginären Achse um etwa 4  $\Omega$  größer als beim Tiefpass.

# **Anmerkung**

Für einen Wechselstromkreis kann man schreiben

 $U = |U| * e^i\omega t$  und  $I = |I| * e^i(\omega t + \varphi)$ 

wobei der komplexe Widerstand Z = U/I nicht mehr von t abhängt

 $Z = |U|/|I| * e^{-i\varphi} = |Z| * e^{-i\varphi}$  (Z-Ortskurve)

Umgekehrt gilt

 $Y = 1/Z = 1/|Z| * e^{i\varphi}$  (Y-Ortskurve)

212 CASSY Lab



Die Y-Ortskurve entspricht der komplexen Inversion der Z-Ortskurve (r -> -r,  $\phi$  -> - $\phi$ ). Durch diese Transformation entstehen aus den Geraden Z = R +  $1/i\omega$ C und Z = R +  $i\omega$ L der Z-Ortskurven in der Y-Darstellung Halbkreise (Spiegelung am Einheitskreis).

# **Tipps**


Die Messinstrumente lassen sich mit **F7** gleichzeitig ausblenden und wieder einblenden.

Eine einfache Logarithmierung der Koordinatenachsen lässt sich nach Anklicken der entsprechenden Achse mit der rechten Maustaste erreichen.

Die Dämpfungen von 6 dB/Oktave (bzw. 20 dB/Dekade) lassen sich in einer doppelt logarithmierten Darstellung einfach als Steigung ±1 ablesen.



# **Tiefpass-Filter (mit Modellbildung)**

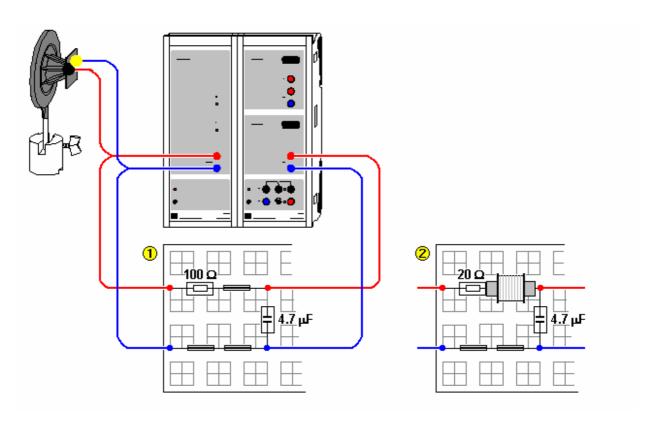

- Beispiel laden (Sprungantwort)
- Beispiel laden (Amplitudengang)

# Versuchsbeschreibung

Im ersten Versuch werden einem Tiefpass-Filter erster Ordnung 1 aus Widerstand und Kondensator (RC) oder einem Tiefpass-Filter 2. Ordnung 2 aus Widerstand, Spule und Kondensator (RLC) Rechteckimpulse mit konstanter Amplitude aufgeprägt. Es wird die Antwort des Filters auf diese Impulse untersucht (Sprungantwort) und mit einem Modell verglichen.

Im zweiten Versuch wird dem Tiefpass-Filter ein Eingangssignal variabler Frequenz (Chirp) aufgeprägt. Sowohl dieses Eingangssignal als auch das gemessene Ausgangssignal wird einer Fouriertransformation unterzogen und beide Frequenzspektren durcheinander dividiert. Die so erhaltene frequenzabhängige Amplitudenänderung (Amplitudengang) wird dargestellt und mit einem Modell verglichen.

Die Gleichungen des Modells 1. Ordnung (RC) und 2. Ordnung (RLC) ergeben sich aus der Energieerhaltung. Die von außen zugeführte Leistung U(t)·I(t) muss der Summe der Leistungen des Kondensators d(1/2·C·Uc(t)²)/dt, der Spule d(1/2·L·I(t)²)/dt und des Widerstands R·I(t)² entsprechen, also

 $U(t) \cdot I(t) = U(t) \cdot Q'(t) = d(1/2 \cdot Q(t)^2/C)/dt + d(1/2 \cdot L \cdot I(t)^2)/dt + R \cdot I(t)^2 = Q(t)/C \cdot Q'(t) + L \cdot Q'(t) \cdot Q''(t) + R \cdot Q'(t)^2.$ 

Daraus ergibt sich für einen Tiefpass 1. Ordnung (L = 0)

QRC'(t) = -QRC(t)/RC+U(t)/R

und für einen Tiefpass 2. Ordnung (L > 0)

 $QRLC''(t) = IRLC'(t) = U(t)/L - QRLC(t)/LC - R \cdot QRLC'(t)/L$ 

Die Konstanten R, L und C entsprechen dem verwendeten Widerstand, der Spule und dem Kondensator. Für die Ausgangsspannung des Filters gilt abhängig von der Ordnung URC(t)=QRC(t)/C bzw. URLC(t)=QRLC(t)/C.



#### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	Power-CASSY	524 011
1	CASSY Lab	524 200
1	Rastersteckplatte DIN A4	576 74
1	STE Widerstand 20 $\Omega$	577 23
1	STE Widerstand 47 $\Omega$	577 28
1	STE Widerstand 100 $\Omega$	577 32
1	STE Spule 500 Windungen	590 83
1	STE Kondensator 4,7 µF, 5 %	578 16
2	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501 45
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### empfehlenswert:

1	Hochtonlautsprecher	587	07
1	Sockel	300	11
1	Eisenkern, geblättert aus	593	21
1	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501	45

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Das Tiefpass-Filter erster oder zweiter Ordnung wird entsprechend der Skizze an das Power-CASSY und das Sensor-CASSY angeschlossen. Zur Erhöhung der Spuleninduktivität L kann ein geblätterter Eisenkern verwendet werden. Zum besseren Verständnis der Messung des Amplitudengangs ist der Anschluss des Hochtonlautsprechers am Ausgang des Power-CASSYs empfehlenswert.

# Versuchsdurchführung

- a) Sprungantwort
- Einstellungen laden
- RC-Filter (1. Ordnung) bzw. RLC-Filter (2. Ordnung) realisieren.
- Messung mit F9 starten
- Messung bei Bedarf mit veränderter Frequenz f (Zeiger im Anzeigeinstrument verschieben) oder Ordnung wiederholen.
- b) Amplitudengang
- Einstellungen laden
- RC-Filter (1. Ordnung) bzw. RLC-Filter (2. Ordnung) realisieren.
- Messung mit F9 starten
- Messung bei Bedarf mit veränderter Ordnung wiederholen.

# Modellbildung

Die Konstanten Widerstand R, Kapazität C und Induktivität L können durch Ziehen am Zeiger des entsprechenden Anzeigeinstruments (oder durch Linksklick oder nach Rechtsklick) so verändert werden, dass das Modell mit der Messung überein stimmt. Dabei ist der Gleichstromwiderstand der Spule (ca.  $4~\Omega$ ) beim Dämpfungswiderstand R mit zu berücksichtigen.

#### a) Sprungantwort

Die Darstellungen **Modell RC** und **Modell RLC** (mit der Maus auswählen) zeigen den Vergleich der gemessenen Filterantwort mit dem entsprechenden Modell. Das Power-CASSY gibt die anregende Frequenz kontinuierlich aus. Deshalb ist im Messsignal der Einschwingvorgang des Filters nicht zu sehen. Damit auch im Modell der Einschwingvorgang unsichtbar ist, wurde als Startzeitpunkt der Berechnung eine Periode vor Null gewählt, also to=-1/f.

Die weiteren Darstellungen **Frequenzspektrum RC** und **Frequenzspektrum RLC** erlauben den Vergleich der Dämpfung des Eingangssignals in Abhängigkeit von der Frequenz und der Ordnung des Filters. Eine andere Möglichkeit dieses Vergleichs bietet die direkte Messung des Amplitudengangs.

# b) Amplitudengang

Das Power-CASSY regt das Filter mit einer variablen Frequenz (Chirp) an. In diesem Chirp wird die Frequenz sehr schnell von 0 Hz bis ca. 2500 Hz erhöht. Im **Amplitudengang** wird das Verhältnis der



Amplituden des Ausgangssignals zum Eingangssignal des Filters dargestellt. Die schwarze Kurve ist die Messkurve, die rote Kurve ist das Ergebnis des Modells 1. Ordnung und die blaue Kurve zeigt das Modell 2. Ordnung.

Bei der Messung ist darauf zu achten, dass die Filterantwort das Sensor-CASSY nicht übersteuert (siehe Darstellung **Standard**). Gegebenenfalls ist die Messung mit verringerter Amplitude A oder vergrößertem Widerstand R zu wiederholen.

# Anmerkung zur Messung des Amplitudengangs


Bei Veränderung der Grundfrequenz f des Chirps (im Beispiel ist f = 2,5 Hz) auch gleichzeitig das Messintervall so verändern, dass die Messzeit T wieder der Chirpperiode entspricht (im Beispiel ist T= 400 ms).

Außerdem ist eine Anpassung des Definitionsbereichs der Amplituden AB, ARC und ARLC notwendig. Im Beispiel ist sind die Amplitudenverhältnisse nur dann definiert, wenn die Amplitude der FFT im Nenner mindestens 1,5 % der Eingangsamplitude A beträgt.

Die Berechnungszeit der Modelle ist auf 5 s begrenzt. Reicht dies bei langsamen Computern nicht aus, dann wird die anschließende Fourier-Analyse nur von der unvollständigen Lösung berechnet. In diesem Fall erhöhen Sie bitte die maximale Berechnungszeit der Modelle.



# **Hochpass-Filter (mit Modellbildung)**

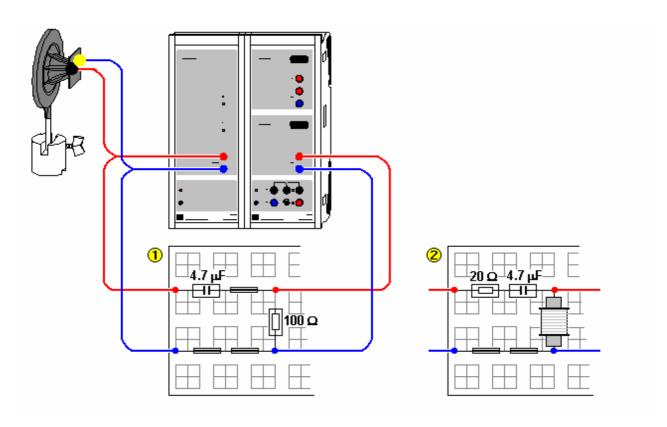

- Beispiel laden (Sprungantwort)
- Beispiel laden (Amplitudengang)

#### Versuchsbeschreibung

Im ersten Versuch werden einem Hochpass-Filter erster Ordnung 1 aus Widerstand und Kondensator (RC) oder einem Hochpass-Filter 2. Ordnung 2 aus Widerstand, Kondensator und Spule (RLC) Rechteckimpulse mit konstanter Amplitude aufgeprägt. Es wird die Antwort des Filters auf diese Impulse untersucht (Sprungantwort) und mit einem Modell verglichen.

Im zweiten Versuch wird dem Hochpass-Filter ein Eingangssignal variabler Frequenz (Chirp) aufgeprägt. Sowohl dieses Eingangssignal als auch das gemessene Ausgangssignal wird einer Fouriertransformation unterzogen und beide Frequenzspektren durcheinander dividiert. Die so erhaltene frequenzabhängige Amplitudenänderung (Amplitudengang) wird dargestellt und mit einem Modell verglichen.

Die Gleichungen des Modells 1. Ordnung (RC) und 2. Ordnung (RLC) ergeben sich aus der Energieerhaltung. Die von außen zugeführte Leistung U(t)·I(t) muss der Summe der Leistungen des Kondensators d(1/2·C·Uc(t)²)/dt, der Spule d(1/2·L·I(t)²)/dt und des Widerstands R·I(t)² entsprechen, also

 $U(t) \cdot I(t) = U(t) \cdot Q'(t) = d(1/2 \cdot Q(t)^2 / C) / dt + d(1/2 \cdot L \cdot I(t)^2) / dt + R \cdot I(t)^2 = Q(t) / C \cdot Q'(t) + L \cdot Q'(t) \cdot Q''(t) + R \cdot Q'(t)^2.$ 

Daraus ergibt sich für einen Hochpass 1. Ordnung (L = 0)

QRC'(t) = -QRC(t)/RC+U(t)/R

und für einen Hochpass 2. Ordnung (L > 0)

 $QRLC''(t) = IRLC'(t) = U(t)/L - QRLC(t)/LC - R \cdot QRLC'(t)/L$ 

Die Konstanten R, L und C entsprechen dem verwendeten Widerstand, der Spule und dem Kondensator. Für die Ausgangsspannung des Filters gilt abhängig von der Ordnung  $URC(t)=U(t)-R\cdot I(t)$  bzw.  $URLC(t)=U(t)-R\cdot I(t)-QRLC(t)/C$ .



#### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	Power-CASSY	524 011
1	CASSY Lab	524 200
1	Rastersteckplatte DIN A4	576 74
1	STE Widerstand 20 $\Omega$	577 23
1	STE Widerstand 47 $\Omega$	577 28
1	STE Widerstand 100 $\Omega$	577 32
1	STE Spule 500 Windungen	590 83
1	STE Kondensator 4,7 µF, 5 %	578 16
2	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501 45
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### empfehlenswert:

1	Hochtonlautsprecher	587	07
1	Sockel	300	11
1	Eisenkern, geblättert aus	593	21
1	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501	45

### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Das Hochpass-Filter erster oder zweiter Ordnung wird entsprechend der Skizze an das Power-CASSY und das Sensor-CASSY angeschlossen. Zur Erhöhung der Spuleninduktivität L kann ein geblätterter Eisenkern verwendet werden. Zum besseren Verständnis der Messung des Amplitudengangs ist der Anschluss des Hochtonlautsprechers am Ausgang des Power-CASSYs empfehlenswert.

### Versuchsdurchführung

- a) Sprungantwort
- Einstellungen laden
- RC-Filter (1. Ordnung) bzw. RLC-Filter (2. Ordnung) realisieren.
- Messung mit F9 starten
- Messung bei Bedarf mit veränderter Frequenz f (Zeiger im Anzeigeinstrument verschieben) oder Ordnung wiederholen.
- b) Amplitudengang
- Einstellungen laden
- RC-Filter (1. Ordnung) bzw. RLC-Filter (2. Ordnung) realisieren.
- Messung mit F9 starten
- Messung bei Bedarf mit veränderter Ordnung wiederholen.

## Modellbildung

Die Konstanten Widerstand R, Induktivität L und Kapazität C können durch Ziehen am Zeiger des entsprechenden Anzeigeinstruments (oder durch Linksklick oder nach Rechtsklick) so verändert werden, dass das Modell mit der Messung überein stimmt. Dabei ist der Gleichstromwiderstand der Spule (ca.  $4~\Omega$ ) beim Dämpfungswiderstand R mit zu berücksichtigen.

#### a) Sprungantwort

Die Darstellungen **Modell RC** und **Modell RLC** (mit der Maus auswählen) zeigen den Vergleich der gemessenen Filterantwort mit dem entsprechenden Modell. Das Power-CASSY gibt die anregende Frequenz kontinuierlich aus. Deshalb ist im Messsignal der Einschwingvorgang des Filters nicht zu sehen. Damit auch im Modell der Einschwingvorgang unsichtbar ist, wurde als Startzeitpunkt der Berechnung eine Periode vor Null gewählt, also to=-1/f.

Die weiteren Darstellungen **Frequenzspektrum RC** und **Frequenzspektrum RLC** erlauben den Vergleich der Dämpfung des Eingangssignals in Abhängigkeit von der Frequenz und der Ordnung des Filters. Eine andere Möglichkeit dieses Vergleichs bietet die direkte Messung des Amplitudengangs.

### b) Amplitudengang

Das Power-CASSY regt das Filter mit einer variablen Frequenz (Chirp) an. In diesem Chirp wird die Frequenz sehr schnell von ca. 2500 Hz auf 0 Hz verringert. Im Amplitudengang wird das Verhältnis der

218 CASSY Lab



Amplituden des Ausgangssignals zum Eingangssignal des Filters dargestellt. Die schwarze Kurve ist die Messkurve, die rote Kurve ist das Ergebnis des Modells 1. Ordnung und die blaue Kurve zeigt das Modell 2. Ordnung.

Bei der Messung ist darauf zu achten, dass die Filterantwort das Sensor-CASSY nicht übersteuert (siehe Darstellung Standard). Gegebenenfalls ist die Messung mit verringerter Amplitude A oder vergrößertem Widerstand R zu wiederholen.

### Anmerkung zur Messung des Amplitudengangs

Bei Veränderung der Grundfrequenz f des Chirps (im Beispiel ist f = 2,5 Hz) auch gleichzeitig das Messintervall so verändern, dass die Messzeit T wieder der Chirpperiode entspricht (im Beispiel ist T= 400 ms).

Außerdem ist eine Anpassung des Definitionsbereichs der Amplituden AB, ARC und ARLC notwendig. Im Beispiel ist sind die Amplitudenverhältnisse nur dann definiert, wenn die Amplitude der FFT im Nenner mindestens 1,5 % der Eingangsamplitude A beträgt.

Die Berechnungszeit der Modelle ist auf 5 s begrenzt. Reicht dies bei langsamen Computern nicht aus, dann wird die anschließende Fourier-Analyse nur von der unvollständigen Lösung berechnet. In diesem Fall erhöhen Sie bitte die maximale Berechnungszeit der Modelle.



## Kennlinie einer Glühlampe



■ Beispiel laden

### Versuchsbeschreibung

Bei einer Glühlampe verlaufen Spannung und Strom nicht proportional zueinander. Ihr Widerstand hängt stark von der Temperatur ab. Da sich eine Glühlampe bei Stromzufuhr erwärmt, werden beim Einund Ausschalten des Stromes unterschiedliche Kennlinien durchfahren. Außerdem hängt die Kennlinie von der Anstiegsgeschwindigkeit dU/dt der Spannung ab.

### **Benötigte Geräte**

1	Power-CASSY	524 011
1	CASSY Lab	524 200
1	Satz 10 Glühlampen; 12 V/3 W	505 08
1	STE Schraubfassung E10, oben	579 06

1 PC ab Windows 95/98/NT

### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Glühlampe kann direkt auf das Power-CASSY aufgesteckt werden.

## Versuchsdurchführung


- Einstellungen laden
- Messung mit **F9** durchführen (Glühlampe wird ein- und wieder ausgeschaltet)
- Evtl. Schaltfrequenz der Glühlampe in Einstellungen U1 sowie Messzeit im Messparameter-Fenster ändern und Versuch wiederholen

#### **Auswertung**


In der Kennlinie lassen sich die Kehrwerte von Kalt- und Heißwiderstand der Glühlampe durch Geradenanpassungen ermitteln.



#### Kennlinie einer Diode

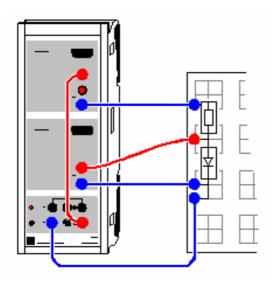

## Alternativ (mit Power-CASSY):

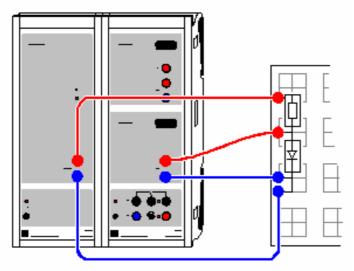

- Beispiel laden (ohne Power-CASSY)
- Beispiel laden (mit Power-CASSY)

### Versuchsbeschreibung

Zu den einfachsten Halbleiter-Bauelementen gehören die Halbleiter-Dioden. Sie enthalten einen Halbleiter-Kristall, in dem ein n-leitendes und ein p-leitendes Gebiet aneinandergrenzt. Durch Rekombination der Ladungsträger, also der Elektronen aus dem n-leitenden und der Löcher aus dem p-leitenden Gebiet, entsteht in der Grenzschicht eine Zone geringer Leitfähigkeit. Sie wird vergrößert, wenn ein äußeres elektrisches Feld die Elektronen bzw. Löcher aus der Grenzschicht zieht. Diese Richtung des elektrischen Feldes wird als Sperrrichtung bezeichnet. Bei umgekehrtem elektrischen Feld werden Elektronen bzw. Löcher in die Grenzschicht getrieben und erleichtern den Stromdurchgang durch die Diode.

Im Versuch werden Strom-Spannungs-Kennlinien verschiedener Dioden (Si-, Ge- und Leuchtdioden) aufgezeichnet und miteinander verglichen.



#### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Rastersteckplatte DIN A4	576 74
1	STE Widerstand 100 $\Omega$	577 32
1	STE Si-Diode 1N4007	578 51
1	STE Ge-Diode AA118	578 50
1	STE-Leuchtdiode grün	578 57
1	STE-Leuchtdiode gelb	578 47
1	STE-Leuchtdiode rot	578 48
1	STE-Leuchtdiode infrarot	578 49
1	Experimentierkabel, 50 cm, blau	500 422
2	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501 45
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Alternativ (mit Power-CASSY)

1	Sensor-CASSY	524 010
1	Power-CASSY	524 011
1	CASSY Lab	524 200
1	Rastersteckplatte DIN A4	576 74
1	STE Widerstand 100 $\Omega$	577 32
1	STE Si-Diode 1N4007	578 51
1	STE Ge-Diode AA118	578 50
1	STE-Leuchtdiode grün	578 57
1	STE-Leuchtdiode gelb	578 47
1	STE-Leuchtdiode rot	578 48
1	STE-Leuchtdiode infrarot	578 49
2	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501 45
1	PC ab Windows 95/98/NT	

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Der Stromkreis wird gemäß Skizze an die Eingänge A (Strom) und B (Spannung über der Diode) des Sensor-CASSYs angeschlossen. Die Diode wird von einem Vorwiderstand von  $100 \Omega$  geschützt.

Bei Verwendung des Power-CASSYs wird dieses zur Spannungsversorgung der Schaltung und zur Strommessung links neben das Sensor-CASSY gesteckt.

### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden (ohne Power-CASSY)
- Spannungsquelle S umpolen (für negativen Kennlinienteil) und Spannung UB1 auf etwa -3 V einstellen
- Messung mit F9 starten
- Spannung langsam bis Null drehen (links herum, gleichzeitig wird negativer Kennlinienteil aufgezeichnet)
- Spannungsquelle S wieder vorzeichenrichtig anschließen (für positiven Kennlinienteil)
- Spannung langsam erhöhen (gleichzeitig wird positiver Kennlinienteil aufgezeichnet) dabei Maximalstrom der Leuchtdioden nicht überschreiten
- Messung wieder mit F9 stoppen
- Messung mit anderer Diode wiederholen dazu Spannungsquelle S wieder umpolen und Messung mit F9 starten

### Alternativ (mit Power-CASSY)

- Einstellungen laden (mit Power-CASSY)
- für jede Diode die Kennlinie mit **F9** aufnehmen (das Power-CASSY fährt die Spannung automatisch durch)



#### **Auswertung**

Bei negativen Spannungen ist der Strom unabhängig von der anliegenden Spannung gleich Null (Sperrrichtung). Bei positiven Spannung tritt ab einer Durchlassspannung U ein Strom auf (Durchlassrichtung).

Es lassen sich die Durchlassspannungen U der verschiedenen Dioden miteinander vergleichen. Bei den Leuchtdioden kann gemäß


 $e \cdot U = h \cdot c/\lambda$ 

die Wellenlänge  $\lambda$  des emittierten Lichts grob abgeschätzt werden. Im Beispiel liegt die Durchlassspannung der roten Leuchtdiode bei etwa U = 1,4 V. Daraus folgt  $\lambda$  = hc/eU = 880 nm.

### **Anmerkung**

Bei Leuchtdioden kann keine präzise Angabe über die Wellenlänge des emittierten Lichts getätigt werden, da sie ein relativ breites Frequenzband emittieren welches i. a. noch durch ein eingefärbtes Gehäuse gefiltert wird. Daher ist die obige Wellenlängenbestimmung nur als grobe Abschätzung zu verstehen.

### Kennlinie eines Transistors

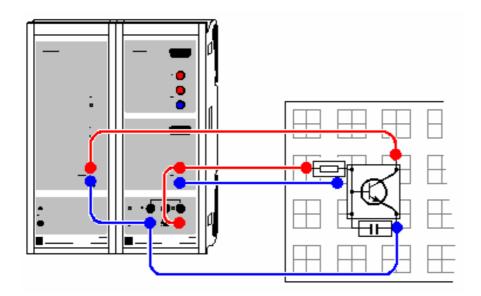

- Beispiel laden (Kollektorstrom gegen Basisstrom)
- Beispiel laden (Kollektorstrom gegen Kollektor-Emitter-Spannung)

### Versuchsbeschreibung

Transistoren gehören zu den wichtigsten Halbleiter-Bauelementen in der elektronischen Schaltungstechnik. Die Elektroden eines bipolaren Transistors heißen Emitter, Basis und Kollektor. Er besteht aus insgesamt 3 n-leitenden und p-leitenden Schichten in der Reihenfolge npn und pnp.

Es werden die beiden Ausgangskennlinien eines npn-Transistors gemessen, also die Abhängigkeit des Kollektorstroms IC vom Basisstrom IB (bei konstanter Kollektor-Emitter-Spannung) sowie die Abhängigkeit des Kollektorstroms IC von der Kollektor-Emitter-Spannung UCE (bei verschiedenen konstanten Basisströmen IB) untersucht.

#### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	Power-CASSY	524 011
1	CASSY Lab	524 200
1	Rastersteckplatte, DIN A4	576 74
1	STE Transistor BD 137	578 67
1	STE Widerstand 10 kΩ, 0,5 W	577 56
1	STE Kondensator 0,1 µF	578 31
1	Paar Kabel, 25 cm, rot und blau	501 44
2	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501 45
1	PC ab Windows 95/98/NT	

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Das Power-CASSY stellt die Kollektor-Emitter-Spannung UCE zur Verfügung und misst gleichzeitig den fließenden Kollektorstrom Ic. Das kaskadierte Sensor-CASSY (direkt rechts vom Power-CASSY anstecken) sorgt für einen einstellbaren Basisstrom IB und misst ihn gleichzeitig als Spannungsabfall am  $10~\text{k}\Omega$ -Widerstand. Der kleine Kondensator von 0,1  $\mu$ F zwischen Basis und Emitter unterdrückt störende Rauschsignale während der Messung.

Im Experiment werden Basisströme bis etwa 1 mA sowie Kollektorströme bis etwa 100 mA verwendet. Bitte nur geeignete Transistoren verwenden (z. B. BD 137).



#### Versuchsdurchführung

- a) Steuerkennlinie Kollektorstrom IC gegen Basisstrom IB
- Einstellungen laden
- Kollektor-Emitter-Spannung wird vom Power-CASSY konstant bei UCE = 2 V gehalten und der Kollektorstrom IC kontinuierlich gemessen
- Angezeigten Basisstrom IB an Spannungsquelle S der Sensor-CASSYs auf 0 mA stellen
- Messung mit F9 starten
- Basisstrom langsam erhöhen bis Kennlinie aufgenommen
- Messung wieder mit F9 stoppen
- b) Kennlinie Kollektorstrom IC gegen Kollektor-Emitter-Spannung UCE
- Einstellungen laden
- Kollektor-Emitter-Spannung wird vom Power-CASSY während der Messung auf UCE = 2 V hochgefahren und der Kollektorstrom IC gemessen
- Angezeigten Basisstrom IB an Spannungsquelle S der Sensor-CASSYs auf 0,1 mA stellen
- Messung mit **F9** starten (Kennlinie wird automatisch aufgenommen)
- Basisstrom IB in Stufen von 0,1 mA erhöhen und weitere Kennlinien wieder mit F9 aufnehmen


#### Auswertung

Aus der Steuerkennlinie a) kann leicht die Stromverstärkung durch eine Geradenanpassung ermittelt werden. Im Beispiel ergibt sich ein Stromverstärkungsfaktor von IC/IB = 149,6.

Auch die Kennlinie b) zeigt eindrucksvoll die Stromverstärkung des Transistors. Ab einer relativ kleinen Kollektor-Emitter-Spannung UCE bleibt der Ausgangsstrom IC nahezu konstant und hängt nur noch vom Basisstrom IB ab.



## Leistungskennlinie einer Solarzelle

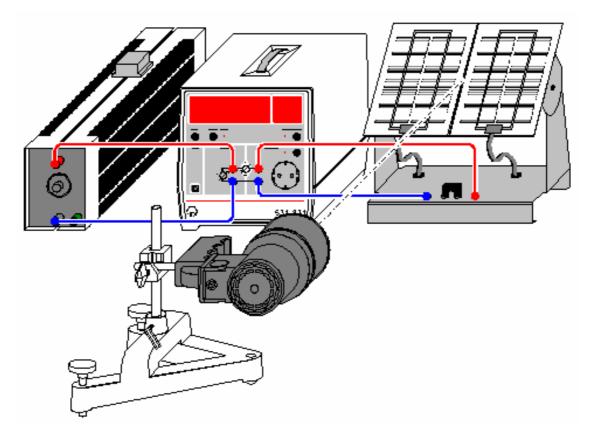

■ Beispiel laden

### Versuchsbeschreibung

Es wird die Leistung P einer Solarzelle bei unterschiedlichen Beleuchtungsstärken in Abhängigkeit von einem Lastwiderstand R1 aufgezeichnet. Aus den Kurvenverläufen werden die optimalen Lastwiderstände R<sub>max</sub> ermittelt, bei denen jeweils die maximale Leistung der Solarzelle erreicht wird.

Bei jeder Beleuchtungsstärke (unterschiedliche Neigungswinkel  $\alpha$  der Solarzelle) werden außerdem Leerlaufspannung und Kurzschlussstromstärke gemessen und die Innenwiderstände Ro der Solarzelle berechnet: Ro=Uo/Io. Die Innenwiderstände Ro werden mit Rmax verglichen.

## **Benötigte Geräte**

1	Joule- und Wattmeter	531 831
1	Solarzelle	664 431
1	Fotoleuchte, 1000 W	450 70
1	Schiebewiderstand	537 34
1	Rollbandmaß	311 77
1	Großer Stativfuß	300 01
1	Stativstange, 100 mm	300 40
1	Leybold-Muffe	301 01
2	Paar Kabel, 100 cm	501 46

#### 1 PC ab Windows 98/2000

## Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Fotoleuchte im Abstand von ca. 40 cm vor der Solarzelle positionieren. Solarzelle zunächst senkrecht zum einfallenden Licht aufstellen und an die 4-mm-Buchsen im Feld OUTPUT anschließen. Lastwiderstand an die 4-mm-Buchsen im Feld INPUT anschließen.



#### Hinweis

Die Leistung der Solarzelle ändert sich auch mit der Temperatur. Damit die Temperatur bei der Messung weitgehend konstant bleibt, sollte die Solarzelle bereits 15 min vor Beginn der Messwertaufnahme mit der Lichtquelle bestrahlt werden.

### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- a) Aufnahme der Leistungskennlinie
- Schiebewiderstand so einstellen, dass am Anzeigeinstrument Lastwiderstand R1 ein Widerstand von 2  $\Omega$  angezeigt wird.
- Messwert mit **F9** manuell in die Tabelle übernehmen.
- Lastwiderstand jeweils um 2  $\Omega$  erhöhen und weitere Messwerte aufnehmen.
- Zur Variation der Beleuchtungsstärke Solarzelle um 45° bzw. 30° zum einfallenden Licht neigen. Versuch für jeden Winkel wiederholen.
- Für jede Beleuchtungsstärke den Lastwiderstand Rmax ermitteln, bei dem die maximale Leistung der Solarzelle erreicht wird.
- b) Messung von Leerlaufspannung und Kurzschlussstromstärke
- Die Anzeigeinstrumente U, I, Uo, Io und Ro durch Anklicken von aufklappen.
- Solarzelle an die mit U bezeichneten 4-mm-Buchsen des Joule- und Wattmeters anschließen.
- Den im Anzeigeinstrument U gemessenen Wert mit der Maus in das Anzeigeinstrument Leerlaufspannung U0 ziehen (Drag & Drop).
- Solarzelle an die mit I bezeichneten Buchsen des Joule- und Wattmeters anschließen.
- Den im Anzeigeinstrument I gemessenen Wert mit der Maus in das Anzeigeinstrument Kurzschlussstromstärke Io ziehen (Drag & Drop). Innenwiderstand Ro der Solarzelle ablesen.


### **Auswertung**

Die abgegebene Leistung einer Solarzelle ist vom Lastwiderstand und der Beleuchtungsstärke abhängig.

Die maximale Leistung der Solarzelle wird erreicht, wenn der Lastwiderstand etwa dem Innenwiderstand der Solarzelle entspricht.

Die maximale Leistung der Solarzelle ist um so größer, je größer die Beleuchtungsstärke ist (bei konstanter Temperatur).

## **Temperaturregelung**

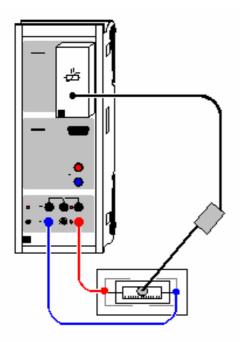

- Beispiel laden (Zweipunktregelung)
- Beispiel laden (PI-Regelung)

### Versuchsbeschreibung

Am Beispiel eines Temperaturreglers lässt sich sehr schön die Funktionsweise eines Zweipunktreglers und eines PI-Reglers demonstrieren. Dabei lässt die Trägheit der Temperaturregelstrecke ausreichend Zeit für eine genaue Beobachtung der Regelalgorithmen.

Beim Zweipunktregler wird beim Unterschreiten einer Temperaturschwelle  $\vartheta$ 1 ein Heizelement eingeschaltet und beim Überschreiten einer zweiten Temperaturschwelle  $\vartheta$ 2 das Heizelement wieder ausgeschaltet.

Alternativ kann die Temperaturreglung als PI-Regelung realisiert werden. Ein PI-Regler ermittelt aus dem Messwert  $x = \vartheta A1$  (Temperatur) und der Führungsgröße w (Sollwert der Temperatur) die Regelabweichung w-x.

Zusammen mit der Grundlast y0 ergibt sich beim PI-Regler die Stellgröße  $y = y0 + KP^*(w-x) + KI^*\int (w-x)^*dt$ . Der Proportionalbeiwert KP und Integrierbeiwert KI können als Parameter der Regelung so optimiert werden, dass sich nach einer Störung (z. B. Änderung der Führungsgröße w) möglichst rasch wieder eine Regelabweichung w-x von etwa 0 einstellt. Die Grundlast y0 kann hier konstant 0 gesetzt werden.

Verwendet man nur einen P-Regler (KI = 0), stellt sich eine bleibende Regelabweichung w-x ein, die erst beim Einsatz eines I-Anteils verschwindet.

### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	KTY-Box	524 036
1	KTY-Sensor	529 036
1	Steckplattensegment	576 71
1	Heizelement, 100 Ω, 2 W	579 38
1	Paar Kabel, 100 cm, rot und blau	501 46

1 PC ab Windows 95/98/NT



#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Spannungsquelle S versorgt das Heizelement. Die Temperatur des Heizelements wird durch einen KTY-Sensor mit der KTY-Box auf Steckplatz A des CASSY gemessen. Dazu sollten ein paar Tropfen Wasser in das Heizelement eingefüllt und der KTY-Sensor in das Wasser eingetaucht werden.

### Versuchsdurchführung

- a) Zweipunktregelung
- Einstellungen laden
- Potentiometer der Spannungsquelle S ganz nach rechts drehen
- Schaltschwellen ϑ1 und ϑ2 durch individuelle Werte ersetzen; dazu den Zeiger des Anzeigeinstruments mit der Maus verschieben oder in den Einstellungen ϑ1 oder ϑ2 (rechte Maustaste) den Wert des Parameters entsprechend ändern
- Wenn gewünscht, Temperaturverlauf während der Regelung mit **F9** aufnehmen und Aufnahme wieder mit **F9** stoppen
- b) PI-Regelung
- Einstellungen laden
- Potentiometer der Spannungsquelle S ganz nach rechts drehen
- Führungsgröße w etwa 5 °C über die aktuelle Temperatur ⊕A1 setzen; dazu den Zeiger des Anzeigeinstruments mit der Maus verschieben oder in den Einstellungen w (rechte Maustaste) den Wert der Führungsgröße entsprechend ändern
- Proportionalbeiwert KP und Integrierbeiwert KI durch individuelle Werte ersetzen; dazu in den Einstellungen KP oder KI (rechte Maustaste) den Wert des Parameters entsprechend ändern
- Temperaturregelung mit F9 starten und auch später wieder stoppen

#### **Auswertung**

Beim Zweipunktregler lassen sich zur Verdeutlichung die beiden Schaltschwellen  $\vartheta$ 1 und  $\vartheta$ 2 durch waagerechte Markierungslinien im Diagramm eintragen.

Die Güte des PI-Regler hängt entscheidend von der Wahl des Proportionalbeiwerts KP und des Integrierbeiwerts KI ab. Die schwarze Linie entspricht der Führungsgröße w (Sollwert). Die rote Kurve entspricht der die Regelgröße x (Messwert) und sollte sich nach einer Störung schnell wieder der schwarzen Kurve annähern. Die blaue Kurve gibt die Stellgröße y wieder und entspricht daher der Heizspannung.

#### **Empirische Optimierung des PI-Temperaturreglers**

Die Temperaturregelstrecke ist sehr langsam. Daher sind die Auswirkungen der Änderungen von KP und KI erst sehr spät zu sehen. Die empirische Optimierung wird also einige Zeit in Anspruch nehmen:

- Kı auf 0 setzen, KP in sinnvollen Stufen erhöhen (z. B. um 1), bis Regelkreis oszilliert
- KP wieder verringern, bis die Oszillationen abklingen. Dabei entsteht eine bleibende Regelabweichung
- Kı in sinnvollen Stufen erhöhen (z. B. um KP/200), bis wieder Oszillationen einsetzen
- Kı wieder verringern, bis die Oszillationen abklingen. Der Regler wird allerdings langsamer, je kleiner
  Kı wird

Im Beispiel wurde KP=5 und KI=0,05 /s verwendet.

### Automatische Variation der Führungsgröße


Die Führungsgröße w (Sollwert) kann nicht nur manuell verändert werden, sondern auch automatisch. Dazu beispielsweise in den Einstellungen w als Formel 30+sin(360\*t/1000) eingeben. Damit wird ein sinusförmiger Temperaturverlauf zwischen 29 °C und 31 °C mit einer Periodendauer von 1000 s geregelt.

#### **Verwendung der Temperatur-Box (524 045)**

Alternativ zur KTY-Box kann auch die Temperatur-Box (524 045) mit NiCr-Ni-Fühler oder NTC eingesetzt werden. Dazu in den Einstellungen  $\vartheta$ A1 die Temperatur zunächst löschen, dann in den Einstellungen CASSY (**F5**) die Temperatur-Box auf Eingang A anklicken sowie auf **gemittelte Werte** und **Nullpunkt links** stellen. Es muss dann nur noch in den Einstellungen w der Messbereich auf 0 °C bis 120 °C und in den Einstellungen w-x die Formel auf (w-&JA11)/50 verändert werden.



## Helligkeitsregelung

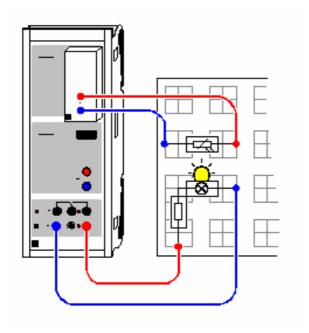

■ Beispiel laden

### Versuchsbeschreibung

Es wird eine Helligkeitsregelung einer Glühlampe unter veränderten Vorwiderständen realisiert. Dabei kommt ein PI-Regler zum Einsatz. Ein PI-Regler ermittelt aus dem Messwert x = RA1 (Widerstand eines LDR) und der Führungsgröße w (Sollwert des Widerstands des LDR) die Regelabweichung w-x.

Zusammen mit der Grundlast y0 ergibt sich beim PI-Regler die Stellgröße  $y = y0 + Kp^*(w-x) + KI^*[(w-x)^*dt$ . Der Proportionalbeiwert KP und Integrierbeiwert KI können als Parameter der Regelung so optimiert werden, dass sich nach einer Störung (z. B. zusätzlicher Vorwiderstand, Änderung der Führungsgröße w oder der Grundlast y0) möglichst rasch wieder eine Regelabweichung w-x von etwa 0 einstellt.

Verwendet man nur einen P-Regler (KI = 0), stellt sich eine bleibende Regelabweichung w-x ein, die erst beim Einsatz eines I-Anteils verschwindet.

#### Benötigte Geräte

	_	
1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Stromquellen-Box	524 031
1	Rastersteckplatte, DIN A4	576 74
1	Schraubfassung E10, seitlich	579 05
1	Satz 10 Glühlampen 3,8 V/0,07 A	505 10
1	Kippschalter, einpolig	579 13
1	Fotowiderstand LDR 05	578 02
1	STE Widerstand 10 $\Omega$ , 2 W	577 20
1	STE Widerstand 20 Ω, 2 W	577 23
1	STE Widerstand 47 $\Omega$ , 2 W	577 28
1	STE Widerstand 100 Ω, 2 W	577 32
2	Paar Kabel, 100 cm, rot und blau	501 46

## Versuchsaufbau (siehe Skizze)

1 PC ab Windows 95/98/NT

Die Spannungsquelle S versorgt über einen Schutzwiderstand von 100  $\Omega$  die Glühlampe. Die Helligkeit der Glühlampe wird durch einen lichtempfindlichen Widerstand (LDR) zusammen mit der Stromquellen-Box auf Eingang A des CASSY gemessen.



Als Störung können mit dem Kippschalter zusätzliche Vorwiderstände zugeschaltet werden. Ein geschlossener Kippschalter schließt den Vorwiderstand kurz und ein offener Kippschalter fügt den Vorwiderstand ein.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Potentiometer der Spannungsquelle S ganz nach rechts drehen
- Die Glühlampe leuchtet bereits, da eine Grundlast yo von 0,5 vorgegeben ist. Das bedeutet, dass der PWM-Ausgang S ein Tastverhältnis von 50 % liefert.
- Die Grundlast yo nach eigenen Wünschen verändern; dazu in den Einstellungen yo (rechte Maustaste auf yo) den Wert des Parameters entsprechend setzen
- Als Führungsgröße w den gemessenen Widerstand eingeben; dazu den Zeiger des Anzeigeinstruments mit der Maus verschieben oder in den Einstellungen w (rechte Maustaste) den Wert des Parameters entsprechend setzen
- Regelung mit **F9** starten und später auch wieder mit **F9** beenden
- Während der Regelung kann eine Störung aufgeprägt werden, z. B. ein Vorwiderstand zugeschaltet oder Führungsgröße oder Grundlast verändert werden
- Zur Optimierung des Reglers können Proportionalbeiwert KP und Integrierbeiwert KI variiert werden; dazu in den Einstellungen KP oder KI (rechte Maustaste) die Werte entsprechend setzen

#### Auswertung

An den aufgenommenen Kurven sieht man schön die Güte des Reglers. Die schwarze Linie entspricht der Führungsgröße w (Sollwert). Die rote Kurve entspricht der die Regelgröße x (Messwert) und sollte sich nach einer Störung schnell wieder der schwarzen Kurve annähern. Die blaue Kurve gibt die Stellgröße y wieder und entspricht daher der Lampenspannung.

### Empirische Optimierung des PI-Helligkeitsreglers

Die Werte für KP und KI müssen negativ gewählt werden, da der Widerstandsmesswert der Sensorbox kleiner wird, je größer die Spannung an der Spannungsquelle S ist.

- Kı auf 0 setzen, KP in sinnvollen Stufen erhöhen (z. B. um -0,1), bis Regelkreis oszilliert
- KP wieder verringern, bis die Oszillationen abklingen. Dabei entsteht eine bleibende Regelabweichung.
- Kı in sinnvollen Stufen erhöhen (z. B. um 10\*KP), bis wieder Oszillationen einsetzen
- Kı wieder verringern, bis die Oszillationen abklingen. Der Regler wird allerdings langsamer, je kleiner Kı wird.


Im Beispiel wurde KP=-0,5 und KI=-5 /s verwendet.

#### Automatische Variation der Führungsgröße

Die Führungsgröße w (Sollwert) kann nicht nur manuell verändert werden, sondern auch automatisch. Dazu beispielsweise in den Einstellungen w als Formel **1+0,5\*sin(360\*t/20)** eingeben. Damit wird ein sinusförmiger Widerstandsverlauf des LDR zwischen 0,5 k $\Omega$  und 1,5 k $\Omega$  mit einer Periodendauer von 20 s geregelt.



## **Spannungsregelung**

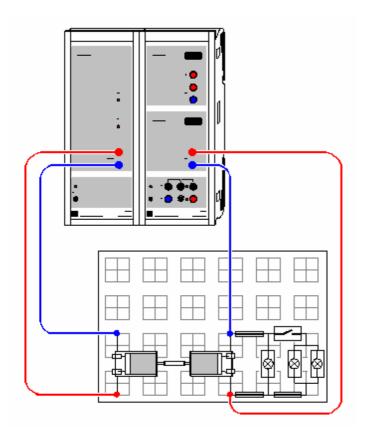

### ■ Beispiel laden

### Versuchsbeschreibung

Es wird die Spannungsregelung eines Generators unter einer veränderlichen Last realisiert. Dabei kommt ein PI-Regler zum Einsatz. Ein PI-Regler ermittelt aus dem Messwert x = UB2 (Spannung des Generators) und der Führungsgröße w (Sollwert des Generators) die Regelabweichung w-x.

Zusammen mit der Grundlast y0 ergibt sich beim PI-Regler die Stellgröße  $y = y0 + KP^*(w-x) + KI^*\int (w-x)^*dt$ . Der Proportionalbeiwert KP und Integrierbeiwert KI können als Parameter der Regelung so optimiert werden, dass sich nach einer Störung (z. B. zusätzliche Belastung, Änderung der Führungsgröße w oder der Grundlast y0) möglichst rasch wieder eine Regelabweichung w-x von etwa 0 V einstellt.

Verwendet man nur einen P-Regler (KI = 0), stellt sich eine bleibende Regelabweichung w-x ein, die erst beim Einsatz eines I-Anteils verschwindet.

## **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
- 1		
1	Power-CASSY	524 011
1	CASSY Lab	524 200
1	Rastersteckplatte, DIN A4	576 74
2	DC-Motoren und	
	Tachogeneratoren	579 43
1	Kippschalter, einpolig	579 13
3	Schraubfassungen E 10, oben	579 06
1	Satz 10 Glühlampen 3,8 V/0,07 A	505 10
1	Kunststoffschlauch 6 mm	307 641
1	Satz Brückenstecker	501 48
2	Paar Kabel, 100 cm, rot und blau	501 46
1	PC ab Windows 95/98/NT	



#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Das Power-CASSY versorgt den Motor (links), der über ein ca. 25 mm langes Teilstück eines Kunststoffschlauchs den Generator (rechts) antreibt. Die Spannung des Generators wird am Eingang B des Sensor-CASSYs gemessen. Dabei ist zu beachten, dass entweder der Motor oder der Generator umgekehrt gepolt angeschlossen werden, da der Motor und der Generator gegensinnig gekoppelt sind.

Zur Variation der Belastung des Generators dienen drei Glühlampen, von denen zwei mit einem Kippschalter zugeschaltet werden können.

### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Die Motor dreht sich bereits, da eine Grundlast yo von 6 V vorgegeben ist.
- Die Grundlast yo nach eigenen Wünschen verändern; dazu in den Einstellungen yo (rechte Maustaste auf yo) den Wert des Parameters entsprechend setzen
- Die gemessene Spannung UB2 kontrollieren; sie muss positiv sein (eventuell umpolen)
- Als Führungsgröße w die gemessene Spannung eingeben; dazu den Zeiger des Anzeigeinstruments mit der Maus verschieben oder in den Einstellungen w (rechte Maustaste) den Wert des Parameters entsprechend setzen
- Regelung mit **F9** starten und später auch wieder mit **F9** beenden
- Während der Regelung kann eine Störung aufgeprägt werden, z. B. die Generatorlast variiert oder Führungsgröße oder Grundlast verändert werden
- Zur Optimierung des Reglers können Proportionalbeiwert KP und Integrierbeiwert KI variiert werden; dazu in den Einstellungen KP oder KI (rechte Maustaste) die Werte entsprechend setzen

### **Auswertung**

An den aufgenommenen Kurven sieht man schön die Güte des Reglers. Die schwarze Linie entspricht der Führungsgröße w (Sollwert). Die rote Kurve entspricht der die Regelgröße x (Messwert) und sollte sich nach einer Störung schnell wieder der schwarzen Kurve annähern. Die blaue Kurve gibt die Stellgröße y wieder und entspricht daher der Motorspannung.

#### Empirische Optimierung des PI-Spannungsreglers

- Kı auf 0 setzen, KP in sinnvollen Stufen erhöhen (z. B. um 0,1), bis Regelkreis oszilliert
- KP wieder verringern, bis die Oszillationen abklingen. Dabei entsteht eine bleibende Regelabweichung.
- Kı in sinnvollen Stufen erhöhen (z. B. um 10\*KP), bis wieder Oszillationen einsetzen
- Kı wieder verringern, bis die Oszillationen abklingen. Der Regler wird allerdings langsamer, je kleiner Kı wird.

Im Beispiel wurde KP=0,5 und KI=4 /s verwendet.

### Automatische Variation der Führungsgröße

Die Führungsgröße w (Sollwert) kann nicht nur manuell verändert werden, sondern auch automatisch. Dazu beispielsweise in den Einstellungen w als Formel **4+sin(360\*t/20)** eingeben. Damit wird ein sinusförmiger Spannungsverlauf zwischen 3 V und 5 V mit einer Periodendauer von 20 s geregelt.


### Andere Regelstrecken

Dieses Beispiel lässt sich auch an andere Regelstrecken anpassen. Sofern die Regelgröße eine Spannung ist, reicht die Anpassung des Stellbereichs und Messbereichs sowie der Regelparameter KP und KI aus.

Wenn die Regelgröße von einer Sensorbox geliefert wird, muss zunächst der Kanal UB2 durch Auswahl von **Löschen** in den Einstellungen UB2 gelöscht werden, damit die Sensorbox auf dem Eingang B des Sensor-CASSYs erkannt wird. In den Einstellungen CASSY (**F5**) kann die Sensorbox dann mit der Maus aktiviert und wieder **gemittelte Werte** eingestellt werden. Einheit und Symbol der Führungsgröße w und Regelabweichung w-x müssen ebenso angepasst werden, wie die Berechnungsformel der Regelabweichung (z. B. **w-RB2** statt **w-UB2**). Die Einstellungen können wie üblich nach Anklicken des Kanals w oder w-x mit der rechten Maustaste verändert werden.



## **Beugung am Einzelspalt**

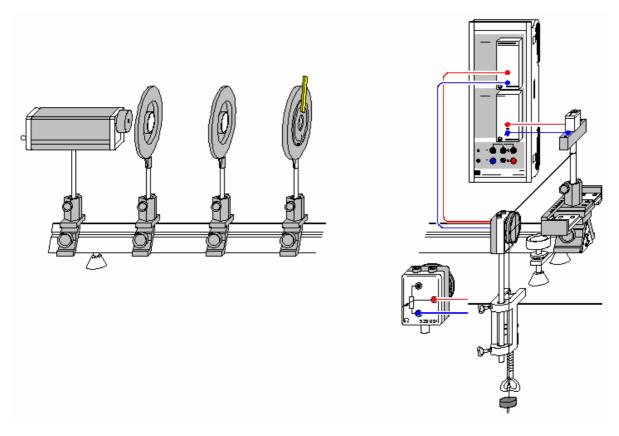



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

#### Vorsicht beim Experimentieren mit dem He-Ne-Laser

Der He-Ne-Laser genügt den "Sicherheitstechnischen Anforderungen für Lehr-, Lern- und Ausbildungsmittel-Laser; DIN 58126 Teil 6" für Laser Klasse 2. Bei Beachtung der entsprechenden Hinweise in der Gebrauchsanleitung ist das Experimentieren mit dem He-Ne-Laser ungefährlich.

Nicht in den direkten oder reflektierten Laserstrahl blicken.

Überschreitung der Blendungsgrenze vermeiden (d. h. kein Beobachter darf sich geblendet fühlen).

#### Versuchsbeschreibung

Beugungserscheinungen treten grundsätzlich auf, wenn die freie Ausbreitung des Lichtes durch Hindernisse – wie z. B. Lochblenden oder Spalte – geändert wird. Die dabei zu beobachtende Abweichung von der geradlinigen Ausbreitung des Lichtes bezeichnet man als Beugung.

Es wird die Spannung eines Fotoelementes in Abhängigkeit vom Beugungswinkel gemessen. Man beobachtet, dass mit abnehmender Spaltbreite die Intensitätsverteilung des Beugungsbildes immer mehr in den geometrischen Schattenraum hinein wandert. Die aufgezeichneten Messwerte werden mit der Modellrechnung für die Beugungsintensität U  $\propto (\sin(\pi b/\lambda \cdot \alpha)/(\pi b/\lambda \cdot \alpha))^2$  verglichen, in welche die Spaltbreite b und die Wellenlänge  $\lambda$  als Parameter eingehen. Für kleine Beugungswinkel  $\alpha$  lässt sich  $\alpha$  einfach aus dem Abstand L zwischen Beugungsobjekt und Fotoelement sowie dem Verschiebeweg s des Fotoelements zu  $\alpha \approx \tan \alpha = s/L$  bestimmen.



#### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	μV-Box	524 040
1	Stromquellen-Box	524 031
1	Wegaufnehmer	529 031
1	He-Ne-Laser, linear polarisiert	471 840
1	Optische Bank, Normalprofil 2 m	460 33
4	Optikreiter, H=90 mm/B=60 mm	460 374
1	Verschiebereiter	460 383
1	Linse f = +5 mm	460 01
1	Linse f = +50 mm	460 02
1	Verstellbarer Spalt	460 14
1	Halter für Steckelement	460 21
1	STE-Fotoelement	578 62
1	Tischklemme, einfach	301 07
1	Angelschnur, 10 m	309 48
1	Satz 12 Laststücke, je 50 g	342 61
2	Paar Kabel, 100 cm, rot und blau	501 46
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Hinweis: Justierung in einem leicht verdunkelten Raum durchführen.

- He-Ne-Laser entsprechend Skizze mittels eines Optikreiters auf der Optischen Bank befestigen.
- Fotoelement in ca. 1,90 m vom Laser entfernt mit Hilfe des Verschiebereiters und des Halters für Steckelement aufstellen. Das Fotoelement sollte in der Mitte des Verschiebereiters stehen. Fotoelement mit zwei dunklen Papierstreifen so abkleben, dass ein kleiner Eintrittsspalt mit der Breite von ca. 1 mm entsteht.
- Laser auf das Fotoelement ausrichten und einschalten.
- Die Höhe des Lasers so justieren, dass der Laserstrahl die Mitte der Fotozelle trifft.
- Kugellinse der Brennweite f = +5 mm in ca. 1 cm Abstand vor den Laser stellen. Der Laserstrahl soll das Fotoelement gut ausleuchten.
- Sammellinse der Brennweite f = +50 mm in ca. 55 mm Abstand vor der Kugellinse positionieren und auf der Optischen Bank in Richtung Kugellinse verschieben bis der Laserstrahl auf dem Fotoelement scharf abgebildet wird.
- Sammellinse auf der Optischen Bank dann noch ein wenig in Richtung der Kugellinse verschieben bis sich der Durchmesser des Laserstrahls auf der Fotozelle auf ca. 6 mm aufweitet. Der Laserstrahl sollte dann entlang der optischen Achse ein kreisrundes Profil von konstantem Durchmesser aufweisen.
- Verstellbarer Spalt auf die Optische Bank stellen und so verschieben, bis der Abstand L zwischen Fotoelement und Spaltblende 1,50 m beträgt.
- Tischklemme mit Wegaufnehmer entsprechend Skizze am Tisch befestigen.
- Die Messung des Verschiebungsweges sat senkrecht zur optischen Achse geschieht über den Wegaufnehmer an der Stromquellenbox auf Eingang A des Sensor-CASSYs.
- ullet Das Fotoelement wird zur Messung der Spannung über die  $\mu V$ -Box an den Eingang B des Sensor-CASSYs angeschlossen.

### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Fotoelement auf der dem Wegaufnehmer entgegengesetzten Position -6,0 cm stellen.
- Rad des Wegaufnehmers an den Anschlag drehen, so dass die Anzeige des Weges sA1 bei etwa
  -6,0 cm liegt. Sollte sich dabei herausstellen, dass die Wegmessung ein falsches Vorzeichen liefern
  wird, dann ist der Anschluss der Stromquellenbox auf dem anderen Arm des Wegaufnehmers zu
  legen.
- Angelschnur an den Halter für Steckelemente binden und einmal um das Rad des Wegaufnehmers wickeln und ein Massestück anhängen.



- Wegnullpunkt kalibrieren dazu Fotoelement in die Mitte des Verschiebereiters stellen (= Nullpunkt der Skala bzw. Lage des Intensitätshauptmaxima).
- In den Einstellungen sA1 Korrigieren den Sollwert 0 cm eingeben und anschließend Offset korrigieren wählen.
- Fotoelement wieder auf die dem Wegaufnehmer entgegengesetzten Position schieben und dort festhalten.
- Falls notwendig, die Hintergrundhelligkeit in den Einstellungen UB1 Korrigieren. Dazu den Sollwert 0 mV eingeben und anschließend Offset korrigieren wählen.
- Messung mit F9 starten (Meldung Triggersignal fehlt erscheint).
- Fotoelement sehr langsam von Hand in Richtung Wegaufnehmer verschieben. Sobald der Startpunkt bei -5,5 cm überschritten wird, beginnt das Einlesen von Messwerten.
- Messung mit F9 stoppen.

#### Auswertung

Bereits während der Messung erscheint die Intensitätsverteilung des Beugungsbildes. Die gemessene Intensitätsverteilung kann nun durch eine Freie Anpassung (**Alt+F**) mit dem Ergebnis der für kleine Beugungswinkel  $\alpha \approx \tan \alpha = s$ A1/L durchgeführten Modellrechung verglichen werden. Dazu folgende Formel verwenden:

A\*(sin(180\*B/0.633\*(x-C)/150)/(180\*B/0.633\*(x-C)/150))^2

mit

x: Verschiebung sa1 senkrecht zur optischen Achse

A: Intensität Io

B: Spaltbreite b in μm

C: Korrektur der Lage des Hauptmaxima

L: Abstand zwischen Blende und Fotoelement (hier: L = 150 cm)

 $\lambda$ : Wellenlänge des He-Ne-Lasers (hier:  $\lambda$  = 0,633  $\mu$ m)

Bei dieser Anpassung wurde die Wellenlänge  $\lambda$  = 0,633 µm des He-Ne-Lasers als bekannt vorausgesetzt und die Spaltbreite b bestimmt. Umgekehrt kann bei bekannter Spaltbreite b die Wellenlänge  $\lambda$  des Lasers bestimmt werden. Dazu kann die Formel beispielsweise so modifiziert werden:

A\*(sin(180\*240/B\*(x-C)/150)/(180\*240/B\*(x-C)/150))^2


Für die Freie Anpassung sollte ein sinnvoller Startwert für die Spaltbreite verwendet werden, z. B. B=240 (μm) für b=0,24 mm.

#### **Hinweis**

Bei diesem Versuch zur Beugung des Lichtes am Einzelspalt wird die Intensitätsverteilung manuell aufgenommen. Eine automatische Messwertaufnahme der Intensitätsverteilung kann mit VideoCom (Versuch P5.3.1.6) realisiert werden.



## Beugung an Mehrfachspalten

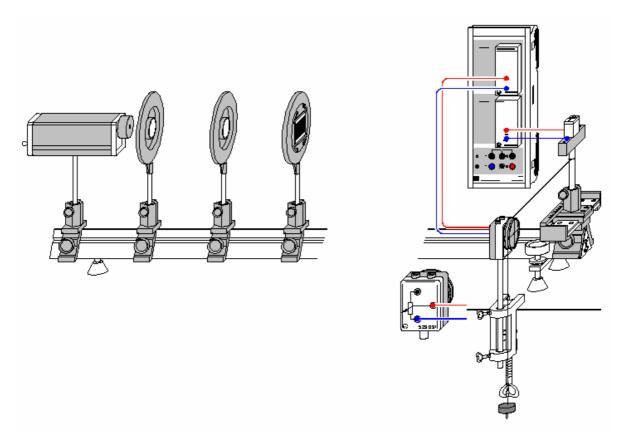



auch für Pocket-CASSY geeignet

- Beispiel laden (Blende mit 4 Doppelspalten (469 85): N = 2, b = 0,20 mm, d = 0,50 mm)
- Beispiel laden (Blende mit 5 Mehrfachspalten (469 86): N = 4, b = 0,20 mm, d = 0,25 mm)

#### Vorsicht beim Experimentieren mit dem He-Ne-Laser

Der He-Ne-Laser genügt den "Sicherheitstechnischen Anforderungen für Lehr-, Lern- und Ausbildungsmittel-Laser; DIN 58126 Teil 6" für Laser Klasse 2. Bei Beachtung der entsprechenden Hinweise in der Gebrauchsanleitung ist das Experimentieren mit dem He-Ne-Laser ungefährlich.

Nicht in den direkten oder reflektierten Laserstrahl blicken.

Überschreitung der Blendungsgrenze vermeiden (d. h. kein Beobachter darf sich geblendet fühlen).

#### Versuchsbeschreibung

Beugungserscheinungen treten grundsätzlich auf, wenn die freie Ausbreitung des Lichtes durch Hindernisse – wie z. B. Lochblenden oder Spalte – geändert wird. Die dabei zu beobachtende Abweichung von der geradlinigen Ausbreitung des Lichtes bezeichnet man als Beugung.

Es wird die Spannung eines Fotoelementes in Abhängigkeit vom Beugungswinkel gemessen. Man beobachtet, dass mit abnehmender Spaltbreite die Intensitätsverteilung des Beugungsbildes immer mehr in den geometrischen Schattenraum hinein wandert. Die aufgezeichneten Messwerte werden mit der Modellrechnung für die Beugungsintensität U  $\propto$   $(\sin(\pi b/\lambda \cdot \alpha)/(\pi b/\lambda \cdot \alpha))^2$  \*  $(\sin(N\pi d/\lambda \cdot \alpha)/\sin(\pi d/\lambda \cdot \alpha))^2$  verglichen, in welche die Spaltbreite b, der Spaltabstand d, Anzahl der Spalte N und die Wellenlänge  $\lambda$  als Parameter eingehen. Für kleine Beugungswinkel  $\alpha$  lässt sich  $\alpha$  einfach aus dem Abstand L zwischen Beugungsobjekt und Fotoelement sowie dem Verschiebeweg s des Fotoelements zu  $\alpha \approx \tan \alpha = s/L$  bestimmen.

# Benötigte Geräte

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	μV-Box	524 040
1	Stromquellen-Box	524 031
1	Wegaufnehmer	529 031
1	He-Ne-Laser, linear polarisiert	471 840
1	Optische Bank, Normalprofil 2 m	460 33
4	Optikreiter, H=90 mm/B=60 mm	460 374
1	Verschiebereiter	460 383
1	Linse f = +5 mm	460 01
1	Linse f = +50 mm	460 02
1	Blende mit 3 Doppelspalten	469 84
1	Blende mit 4 Doppelspalten	469 85
1	Blende mit 5 Mehrfachspalten	469 86
1	Halter mit Federklemmen	460 22
1	STE-Fotoelement	578 62
1	Halter für Steckelement	460 21
1	Tischklemme, einfach	301 07
1	Angelschnur, 10 m	309 48
1	Satz 12 Laststücke, je 50 g	342 61
2	Paar Kabel, 100 cm, rot und blau	501 46
1	PC ab Windows 95/98/NT	

### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Hinweis: Justierung in einem leicht verdunkelten Raum durchführen.

- He-Ne-Laser entsprechend Skizze mittels eines Optikreiters auf der Optischen Bank befestigen.
- Fotoelement in ca. 1,90 m vom Laser entfernt mit Hilfe des Verschiebereiters und des Halters für Steckelement aufstellen. Das Fotoelement sollte in der Mitte des Verschiebereiters stehen. Fotoelement mit zwei dunklen Papierstreifen so abkleben, dass ein kleiner Eintrittsspalt mit der Breite von ca. 1 mm entsteht.
- Laser auf das Fotoelement ausrichten und einschalten.
- Die Höhe des Lasers so justieren, dass der Laserstrahl die Mitte der Fotozelle trifft.
- Kugellinse der Brennweite f = +5 mm in ca. 1 cm Abstand vor den Laser stellen. Der Laserstrahl soll das Fotoelement gut ausleuchten.
- Sammellinse der Brennweite f = +50 mm in ca. 55 mm Abstand vor der Kugellinse positionieren und auf der Optischen Bank in Richtung Kugellinse verschieben bis der Laserstrahl auf dem Fotoelement scharf abgebildet wird.
- Sammellinse auf der Optischen Bank dann noch ein wenig in Richtung der Kugellinse verschieben bis sich der Durchmesser des Laserstrahls auf der Fotozelle auf ca. 6 mm aufweitet. Der Laserstrahl sollte dann entlang der optischen Achse ein kreisrundes Profil von konstantem Durchmesser aufweisen
- Halter mit Federklemmen mit eingespannter Blende auf die Optische Bank stellen und so verschieben, bis der Abstand L zwischen Fotoelement und Spaltblende 1,50 m beträgt.
- Tischklemme mit Wegaufnehmer entsprechend Skizze am Tisch befestigen.
- Die Messung des Verschiebungsweges sat senkrecht zur optischen Achse geschieht über den Wegaufnehmer an der Stromquellenbox auf Eingang A des Sensor-CASSYs.
- ullet Das Fotoelement wird zur Messung der Spannung über die  $\mu V$ -Box an den Eingang B des Sensor-CASSYs angeschlossen.

### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden (Blende mit 4 Doppelspalten (469 85): N = 2, b = 0,20 mm, d = 0,50 mm)
- Einstellungen laden (Blende mit 5 Mehrfachspalten (469 86): N = 4, b = 0,20 mm, d = 0,25 mm)
- Fotoelement auf der dem Wegaufnehmer entgegengesetzten Position -6,0 cm stellen.
- Rad des Wegaufnehmers an den Anschlag drehen, so dass die Anzeige des Weges sA1 bei etwa
  -6,0 cm liegt. Sollte sich dabei herausstellen, dass die Wegmessung ein falsches Vorzeichen liefern
  wird, dann ist der Anschluss der Stromquellenbox auf dem anderen Arm des Wegaufnehmers zu
  legen.



- Angelschnur an den Halter für Steckelemente binden und einmal um das Rad des Wegaufnehmers wickeln und ein Massestück anhängen.
- Wegnullpunkt kalibrieren dazu Fotoelement in die Mitte des Verschiebereiters stellen (= Nullpunkt der Skala bzw. Lage des Intensitätshauptmaxima).
- In den Einstellungen sat Korrigieren den Sollwert 0 cm eingeben und anschließend Offset korrigieren wählen.
- Fotoelement wieder auf die dem Wegaufnehmer entgegengesetzten Position schieben und dort festhalten.
- Falls notwendig, die Hintergrundhelligkeit in den Einstellungen UB1 Korrigieren. Dazu den Sollwert 0 mV eingeben und anschließend Offset korrigieren wählen.
- Messung mit F9 starten (Meldung Triggersignal fehlt erscheint).
- Fotoelement sehr langsam von Hand in Richtung Wegaufnehmer verschieben. Sobald der Startpunkt bei -5,5 cm überschritten wird, beginnt das Einlesen von Messwerten.
- Messung mit **F9** stoppen.

#### **Auswertung**

Bereits während der Messung erscheint die Intensitätsverteilung des Beugungsbildes. Die gemessene Intensitätsverteilung kann nun durch eine Freie Anpassung (**Alt+F**) mit dem Ergebnis der für kleine Beugungswinkel  $\alpha \approx \tan \alpha = s$ A1/L durchgeführten Modellrechung verglichen werden. Dazu folgende Formel verwenden:

A\*(sin(180\*B/0.633\*(x-C)/150)/(180\*B/0.633\*(x-C)/150))^2 (sin(2\*180\*D/0.633\*(x-C)/150)/sin(180\*D/0.633\*(x-C)/150))^2

mit

- x: Verschiebung sA1 senkrecht zur optischen Achse
- A: Intensität Io
- B: Spaltbreite b in μm
- C: Korrektur der Lage des Hauptmaxima
- D: Spaltabstand d in µm
- N: Anzahl der Spalte (hier Doppelspalt: N = 2)
- L: Abstand zwischen Blende und Fotoelement (hier: L = 150 cm)
- $\lambda$ : Wellenlänge des He-Ne-Lasers (hier:  $\lambda = 0.633 \, \mu \text{m}$ )

Bei dieser Anpassung wurde die Wellenlänge  $\lambda$  = 0,633 µm des He-Ne-Lasers als bekannt vorausgesetzt und die Spaltbreite b und der Spaltabstand d bestimmt. Umgekehrt kann bei bekannter Spaltbreite b und bekanntem Spaltabstand d die Wellenlänge  $\lambda$  des Lasers bestimmt werden.

Für die Freie Anpassung sollten sinnvolle Startwerte für Spaltbreite und Spaltabstand verwendet werden, z. B. B=200 (μm) für b=0,2 mm und D=250 (μm) für d=0,25 mm.


Wenn die Nebenmaxima bei N > 2 nicht deutlich in Erscheinung treten, kann die Freie Anpassung den Spaltabstand d nicht bestimmen. In diesem Fall sollte der korrekte Spaltabstand d als Startwert der Anpassung in  $\mu$ m angegeben und konstant gehalten werden (z. B. 250 für 0,25 mm).

#### **Hinweis**

Bei diesem Versuch zur Beugung des Lichtes an Mehrfachspalten wird die Intensitätsverteilung manuell aufgenommen. Eine automatische Messwertaufnahme der Intensitätsverteilung kann mit VideoCom (Versuch P5.3.1.7) realisiert werden.



# Quadratisches Abstandsgesetz für Licht

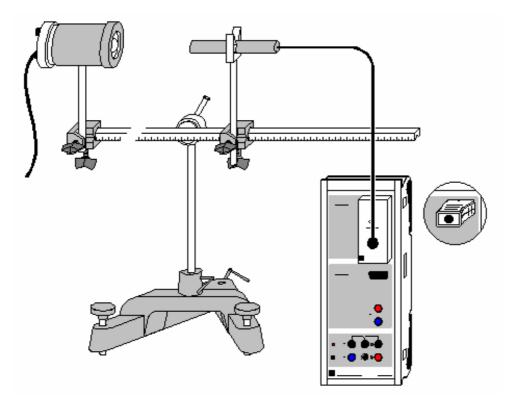



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

## ■ Beispiel laden

## Versuchsbeschreibung

Es wird die Beleuchtungsstärke E in Abhängigkeit vom Abstand d zwischen einer Glühwendel und einem Luxsensor gemessen. Dabei stellt sich heraus, dass E proportional zu 1/d² ist.

## **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Lux-Box oder Lux-Adapter S	524 051(1)
1	Luxsensor	666 243
1	Lampe, 6 V, 30 W	450 51
1	Lampengehäuse	450 60
1	Spannungsquelle,	
	6 V, 30 W, z. B.	521 210
1	Kleine optische Bank	460 43
2	Leybold-Muffen	301 01
1	Federstecker	590 02
1	Stativlochstab	590 13
1	Kleiner Stativfuß	300 02
1	PC ab Windows 95/98/NT	

## Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Das Lampengehäuse mit der Lampe sowie der Luxsensor werden auf der optischen Bank aufgebaut. Der Luxsensor wird mit dem Federstecker auf dem Stativlochstab befestigt. Der verschiebbare Einsatz des Lampengehäuses muss ganz hineingeschoben werden.



### Versuchsdurchführung


- Einstellungen laden
- Korrekturfaktor F des speziellen Luxsensors (dort aufgedruckt) eingeben dazu Einstellungen EA1 und Korrigieren wählen, Faktor eingeben und Faktor korrigieren
- Hintergrundhelligkeit korrigieren dazu Einstellungen EA1 und Korrigieren, Offset korrigieren
- Lampe einschalten und 10 cm Abstand zwischen Glühwendel und Luxsensor einstellen
- Abstand in Tabelle eintragen dazu erste Tabellenzelle der Spalte d anklicken und Wert eingeben
- Auch Beleuchtungsstärke mit **F9** in Tabelle übernehmen
- Abstand stufenweise vergrößern, in Tabelle eintragen und jeweils mit F9 auch neue Beleuchtungsstärke übernehmen

#### **Auswertung**

Bereits während der Messung werden die Messwerte im Diagramm dargestellt. Zur Bestätigung des quadratischen Abstandsgesetzes kann eine Hyperbelanpassung  $1/x^2$  durchgeführt oder alternativ die x-Achse in  $1/x^2$  umgerechnet (Achse mit rechter Maustaste anklicken) und eine Gerade angepasst werden.



## Lichtgeschwindigkeit in Luft

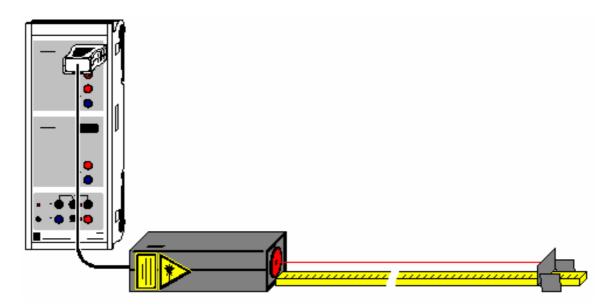



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

#### **Sicherheitshinweis**

Sicherheitshinweise aus der Gebrauchsanweisung des Laser-Bewegungssensors S beachten.

### Versuchsbeschreibung

Moderne Abstandsmesser bedienen sich bei Ihrer Messung eines periodisch modulierten Laserstrahls. Sie bestimmen die Phase zwischen dem ausgesendeten und dem reflektierten modulierten Laserstrahl und erhalten mit der bekannten Modulationsfrequenz die Laufzeit t des Lichts für den Weg zum Reflektor und wieder zurück. Die Abstandsmesser errechnen erst danach den Abstand unter Zuhilfenahme der bekannten Lichtgeschwindigkeit.

In diesem Versuch wird der Laser-Bewegungssensor S (Laser S) als Laufzeitmesser eingesetzt, weil dieser auch die Laufzeit t direkt ausgeben kann. Es wird die Proportionalität zwischen Weg und Laufzeit des Lichts bestätigt und die Lichtgeschwindigkeit berechnet.

### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY		524 010
1	CASSY Lab		524 200
1	Laser-Bewegungssensor S		524 073
1	Endpuffer	aus	337 116
1	Maßstab		311 03

1 PC ab Windows 95/98/NT

### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Laser S mit der breiten Seite nach unten flach auf den Tisch legen und mit dem Eingang A des CASSYs verbinden. Den Endpuffer mit einem Stück der zum Laser S gehörenden retroreflektierenden Folie bekleben und in 30 cm Abstand vor dem Laser so auf den Maßstab setzen, dass der Laserpunkt mittig und rechtwinklig auf die Folie trifft.

Vor der Messung Laser S etwa 5 Minuten aufwärmen lassen, damit die Nullpunktverschiebung möglichst klein wird.




## Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Laufzeitnullpunkt definieren ( $\rightarrow 0 \leftarrow$  in Einstellungen  $\Delta tA1$ )
- Abstand d=0 in die erste Tabellenspalte eintragen (1. Tabellenzelle mit der Maus anklicken)
- Mit **F9** den ersten Messpunkt (d=0, ∆t=0) aufnehmen
- Endpuffer um 10 cm vom Laser wegschieben und 0,1 m als Abstand in die erste Tabellenspalte eintragen (2. Tabellenzelle mit der Maus anklicken)
- Mit **F9** den zweiten Messpunkt (d=0,1 m, Δt) aufnehmen
- Messung für größere Abstände bis etwa 50 cm wiederholen

### **Auswertung**

Der optische Weg s des Laserstrahls entspricht dem doppelten Abstand d. Dies ist in der Darstellung **Lichtgeschwindigkeit** im s(t)-Diagramm bereits berücksichtigt. Das s(t)-Diagramm bestätigt die Proportionalität zwischen s und t, also  $s = c \cdot t$ . Die Anpassung einer Ursprungsgeraden ergibt als Proportionalitätskonstante c = 0.3 m/ns = 300.000 km/s.

## Lichtgeschwindigkeit in verschiedenen Materialen

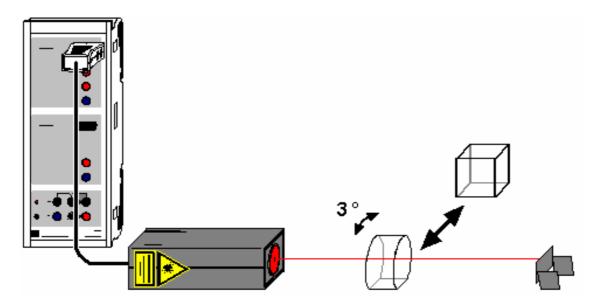



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

### **Sicherheitshinweis**

Sicherheitshinweise aus der Gebrauchsanweisung des Laser-Bewegungssensors S beachten.

### Versuchsbeschreibung

Moderne Abstandsmesser bedienen sich bei Ihrer Messung eines periodisch modulierten Laserstrahls. Sie bestimmen die Phase zwischen dem ausgesendeten und dem reflektierten modulierten Laserstrahl und erhalten mit der bekannten Modulationsfrequenz die Laufzeit t des Lichts für den Weg zum Reflektor und wieder zurück. Die Abstandsmesser errechnen erst danach den Abstand unter Zuhilfenahme der bekannten Lichtgeschwindigkeit.

In diesem Versuch wird der Laser-Bewegungssensor S (Laser S) als Laufzeitmesser eingesetzt, weil dieser auch die Laufzeit t direkt ausgeben kann. Es wird Wasser und Plexiglas der Dicke d in den Strahlengang gebracht und die dadurch erzielte Laufzeiterhöhung  $\Delta t$  gemessen. Mit der aus dem vorangegangenen Versuch ermittelten Lichtgeschwindigkeit c in Luft kann so die Lichtgeschwindigkeit cM in Materie bestimmt werden:

 $cM = 2d/(2d/c + \Delta t) = 1/(1/c + \Delta t/2d).$ 

Schließlich wird auch der Brechungsindex n aus

 $n = c/cM = c \cdot (1/c + \Delta t/2d) = 1 + c/2d \cdot \Delta t$ 

### **Benötigte Geräte**

ermittelt.

1	Sensor-CASSY		524 010
1	CASSY Lab		524 200
1	Laser-Bewegungssensor S		524 073
1	Endpuffer	aus	337 116
1	Spiegelglaskasten,		
	50 mm $\times$ 50 mm $\times$ 50 mm		477 03
1	Kunstglaskörper		476 34
1	PC ab Windows 95/98/NT		



#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Laser S mit der breiten Seite nach unten flach auf den Tisch legen und mit dem Eingang A des CASSYs verbinden. Den Endpuffer mit einem Stück der zum Laser S gehörenden retroreflektierenden Folie bekleben und in etwa 50 cm Abstand vor dem Laser so aufstellen, dass der Laserpunkt mittig und rechtwinklig auf die Folie trifft.

Vor der Messung Laser S etwa 5 Minuten aufwärmen lassen, damit die Nullpunktverschiebung möglichst klein wird.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Leeren und trockenen Spiegelglaskasten mittig so in den Strahlengang bringen, dass die sichtbaren Laserreflexe der Glasoberfläche gerade nicht mehr zurück zum Laser reflektiert werden (Kasten etwa um 3° verdrehen). Der Laser sieht sonst auch diese Reflexe und kann die Laufzeit nicht mehr korrekt bestimmen. Die dadurch entstehende Vergrößerung der Weglänge durch den Kasten ist kleiner als 1 % und damit vernachlässigbar.
- Laufzeitnullpunkt definieren (→ 0 ← in Einstellungen ΔtA1)
- Mit **F9** den ersten "Messpunkt" (Luft) aufnehmen
- Wasser in Spiegelkasten einfüllen
- Mit **F9** den zweiten Messpunkt (Wasser) aufnehmen
- Spiegelkasten entfernen
- Erneut Laufzeitnullpunkt definieren (→ 0 ← in Einstellungen ΔtA1)
- Kunstglaskörper mittig so in den Strahlengang bringen, dass die sichtbaren Laserreflexe der Glasoberfläche gerade nicht mehr zurück zum Laser reflektiert werden (Kunstglaskörper etwa um 3° verdrehen).
- Mit F9 den dritten Messpunkt (Kunstglas) aufnehmen


#### Auswertung

Die beiden Darstellungen **Lichtgeschwindigkeit** und **Brechungsindex** zeigen die Messergebnisse als Balkendiagramme. Die Lichtgeschwindigkeit nimmt bei optisch dichteren Materialien ab, der Brechungsindex steigt.

Der Literaturwerte der Brechungsindizes von Wasser und Plexiglas sind n=1,33 und n=1,5.



### Millikan-Versuch

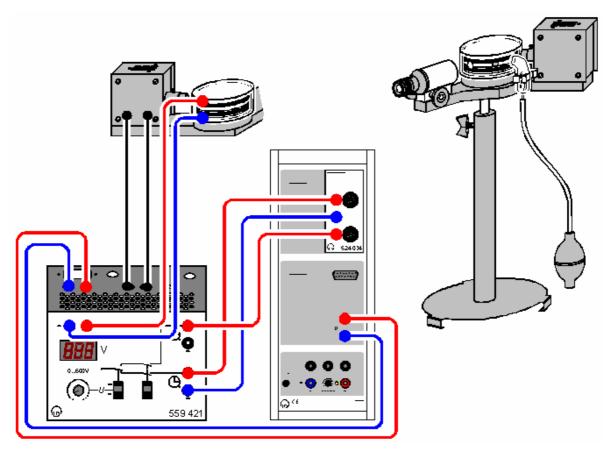



auch für Pocket-CASSY geeignet

- Beispiel laden (Schwebemethode)
- Beispiel laden (Sink-/Steigmethode)

### Versuchsbeschreibung

R. A. Millikan gelang 1910 mit seiner berühmten Öltröpfchenmethode der Nachweis des quantenhaften Auftretens kleinster Elektrizitätsmengen. Er beobachtete geladene Öltröpfchen im senkrechten elektrischen Feld eines Plattenkondensators mit Plattenabstand d und bestimmte aus ihrem Radius r und dem elektrischen Feld E=U/d die Ladung q eines schwebenden Tröpfchens. Dabei stellte er fest, dass q nur als ganzzahliges Vielfaches einer Elementarladung e auftritt, also  $q=n\cdot e$ .

#### **Theorie**

Wenn ein Öltröpfchen mit Radius ro mit der Geschwindigkeit -v1 nach unten sinkt (fällt), dann wirkt auf dieses Öltröpfchen die entgegengesetzte Stokessche Reibungskraft F1 =  $6\pi \cdot \eta \cdot r0 \cdot v1$  ( $\eta$  = Viskosität von Luft). Wenn das gleiche Öltröpfchen mit der Geschwindigkeit v2 in einem angelegten elektrischen Feldes E nach oben steigt, dann ist die entgegengesetzte Stokessche Reibungskraft F2 =  $-6\pi \cdot \eta \cdot r0 \cdot v2$ . Die Differenz dieser beiden Kräfte entspricht genau der Kraft  $q0 \cdot E$  durch das angelegte elektrische Feld E, also

$$q_0 \cdot E = q_0 \cdot U/d = F_1 - F_2 = 6\pi \cdot \eta \cdot r_0 \cdot (v_1 + v_2)$$
 oder

$$q_0 = 6\pi \cdot \eta \cdot r_0 \cdot d \cdot (v_1 + v_2) / U$$
.

Um die Ladung qo zu ermitteln, fehlt also nur noch der Radius ro des betrachteten Öltröpfchens, der sich aber leicht aus dem Kräftegleichgewicht seiner resultierenden Gewichtskraft  $F = -V \cdot \Delta \rho \cdot g$  und der Stokesschen Reibung F1 im Sinkfall ergibt, wobei  $\Delta \rho$  der Dichteunterschied zwischen Öl und Luft ist.



Es gilt also:

$$0 = F + F1 = -4/3 \pi \cdot r0^{3} \cdot \Delta \rho \cdot g + 6\pi \cdot \eta \cdot r0 \cdot v1 \quad \text{ode}$$

$$r_0 = \sqrt{(9\eta v_1 / 2\Delta \rho g)}.$$

Für eine genauere Ermittlung der Ladung q sollte man berücksichtigen, dass die Stokessche Reibung für sehr kleine Radien r korrigiert werden muss, weil diese in der Größenordung der mittleren freien Weglänge der Luftmoleküle liegen. Die vom Luftdruck p abhängige korrigierte Formel für die Reibungskraft lautet

$$F = 6\pi \eta r v / (1+b/rp)$$

mit b = 80 µm·hPa (konstant).

Mit der Abkürzung A = b/p ergibt sich der korrigierte Radius r zu

$$r = \sqrt{(r0^2 + A^2/4)} - A/2$$

und die korrigierte Ladung q zu

$$q = q_0 / (1+A/r)^1,5.$$

#### Schwebemethode

In dieser Variante des Experiments wird die Spannung U am Plattenkondensator so eingestellt, dass ein ausgesuchtes Öltropfchen schwebt, also die Steiggeschwindigkeit v2=0 ist. Die Sinkgeschwindigkeit v1 wird nach Abschalten der Kondensatorspannung U gemessen. Wegen v2=0 vereinfachen sich die oben angegebenen Formeln etwas.

Es lässt sich allerdings prinzipiell v2=0 nicht sehr genau einstellen. Damit ergeben sich bei der Schwebemethode größere Messfehler und breitere Streuungen in der Häufigkeitsverteilung, als dies bei der folgenden Methode der Fall ist.

## Sink-/Steigmethode

In der zweiten Variante werden beide Geschwindigkeiten v1 und v2 sowie die Spannung U gemessen. Diese Methode lässt genauere Messwerte als bei der Schwebemethode zu, weil die Geschwindigkeit v2 wirklich gemessen wird.

## **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Timer-Box	524 034
1	Millikan-Gerät	559 411
1	Millikan-Betriebsgerät	559 421
1	Experimentierkabel, 50 cm, rot	500 421
3	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501 45
1	Paar Kabel, 50 cm, schwarz	501 451
4	DO -1- Win-1 05/00/NIT	

#### 1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Millikan-Gerät nach Gebrauchsanweisung zusammenbauen, Öl einfüllen und Schaltung gemäß Skizze aufbauen. Dazu Stoppuhrausgang 1 mit Eingang E und Stoppuhrausgang 2 mit Eingang F der Timer-Box verbinden. Den Spannungsausgang des Betriebsgeräts mit Eingang B des Sensor-CASSYs verbinden.

Achtung: Das Mikroskop erzeugt ein umgekehrtes Bild. Alle Bewegungsrichtungen erscheinen deshalb umgekehrt. Es wird im Folgenden aber die reale Bewegung beschrieben.

Zur besseren Demonstration der Öltröpfchen ist die Aufnahme des Mikroskopbildes mit einer Videokamera (z. B. VideoFlex von ken-a-vision) empfehlenswert. In diesem Fall kann die Kamera auch "über Kopf" aufnehmen, so dass die sichtbare Bewegungsrichtung wieder der realen Bewegungsrichtung entspricht.

# Versuchsdurchführung

- a) Schwebemethode
- Einstellungen laden
- Okularmikrometer senkrecht stellen und durch Drehen des schwarzen Okularringes scharf stellen.
- Zunächst Schalter U und t nach unten stellen.
- Kondensatorspannung mit Schalter U einschalten und mit Drehpotentiometer so einstellen (400-600 V), dass ein ausgewähltes Öltröpfchen mit etwa 1-2 Skalenteilen/Sekunde steigt (also im Okular sinkt). Danach die Spannung erniedrigen, bis das Öltröpfchen gerade schwebt.
- Kondensatorspannung mit Schalter U ausschalten.
- Sobald sich das Öltröpfchen neben einem gewählten Skalenstrich befindet, Zeitmessung mit Schalter t starten.
- Sobald das Öltröpfchen um 20 weitere Skalenstriche (entspricht 1 mm) gesunken (also im Okular gestiegen) ist, Zeitmessung mit Schalter t wieder stoppen und Kondensatorspannung mit Schalter U wieder einschalten.
- Messwerte für die Sinkzeit t1 und die Spannung U mit **F9** in die Tabelle übernehmen. Die berechnete Ladung q wird automatisch im Histogramm eingetragen.
- Messung für andere Öltröpfchen wiederholen.
- b) Sink-/Steigmethode
- Einstellungen laden
- Okularmikrometer senkrecht stellen und durch Drehen des schwarzen Okularringes scharf stellen.
- Zunächst Schalter U und t nach unten stellen.
- Kondensatorspannung mit Schalter U einschalten und mit Drehpotentiometer so einstellen (400-600 V), dass ein ausgewähltes Öltröpfchen mit etwa 1-2 Skalenteilen/Sekunde steigt (also im Okular sinkt).
- Kondensatorspannung mit Schalter U ausschalten.
- Sobald sich das Öltröpfchen neben einem gewählten Skalenstrich befindet, Zeitmessung mit Schalter t starten.
- Sobald das Öltröpfchen um 20 weitere Skalenstriche (entspricht 1 mm) gesunken (also im Okular gestiegen) ist, Kondensatorspannung mit Schalter U wieder einschalten. Dies startet automatisch die Zeitmessung t2.
- Sobald sich das Öltröpfchen wieder neben dem ersten Skalenstrich befindet, Zeitmessung mit Schalter t stoppen.
- Messwerte für die Sinkzeit t1, die Steigzeit t2 und die Spannung U mit F9 in die Tabelle übernehmen.
   Die berechnete Ladung q wird automatisch im Histogramm eingetragen.
- Messung f
  ür andere Öltröpfchen wiederholen.

#### **Auswertung**

Zur Auswertung besteht die Möglichkeit, in der gemessenen Häufigkeitsverteilung Mittelwerte einzuzeichnen und die Beziehung  $q = n \cdot e$  (mit  $e = 1,6022 \cdot 10^{-19}$  C) zu bestätigen.

#### Hinweise

Werden Öltröpfchen mit geringer Ladung ausgesucht, wird die Statistik schneller aussagekräftig. Öltröpfchen geringer Ladung erkennt man daran, dass sie klein sind und sich im elektrischen Feld relativ langsam bewegen.


Bleibt im Unterricht zu wenig Zeit, um etwa 20-30 Öltröpfchen zu verfolgen, dann kann vor der Messung das Beispiel mit den Beispielmesswerten anstelle der nackten Einstellungen geladen werden. Die neu gemessenen Werte erscheinen im Histogramm dann als rote Balken und bestätigen so mit der üblichen statistischen Ungewissheit die schwarze Beispielmessung.

Zur Messung der negativen Ladungen q müssen die Anschlüsse sowohl am Plattenkondensator als auch am CASSY-Eingang B vertauscht werden.

Weicht der örtliche Luftdruck stark von 1013 hPa ab, dann sollte der Luftdruck in der Formel zum Korrekturparameter A entsprechend geändert werden. Dann stimmen allerdings eventuell angezeigte Beispielwerte nicht mehr.



# Compton-Effekt an Röntgenstrahlung

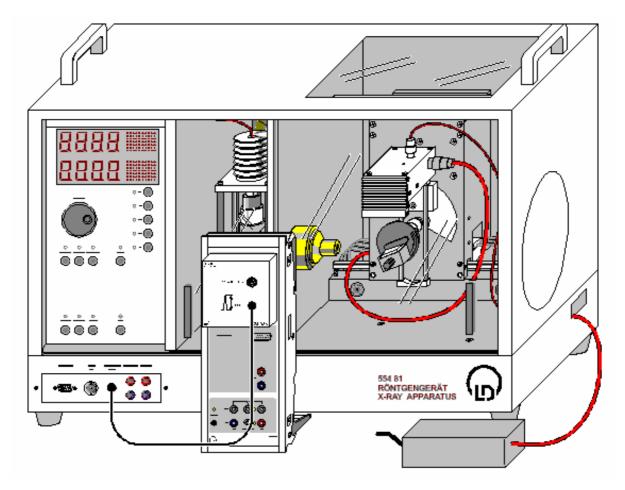



auch für Pocket-CASSY geeignet

#### ■ Beispiel laden

#### Sicherheitshinweise

Das Röntgengerät erfüllt die Vorschriften über die Bauart einer Schulröntgeneinrichtung und eines Vollschutzgeräts und ist als Schulröntgengerät und Vollschutzgerät unter NW 807 / 97 Rö bauartzugelassen.

Durch die werksseitig eingebauten Schutz- und Abschirmvorrichtungen ist die Dosisleistung außerhalb des Röntgengeräts auf unter 1  $\mu$ Sv/h reduziert, einen Wert, der in der Größenordnung der natürlichen Strahlenbelastung liegt.

- Vor der Inbetriebnahme das Röntgengerät auf Unversehrtheit überprüfen und das Abschalten der Hochspannung bei Öffnen der Schiebetüren kontrollieren (siehe Gebrauchsanweisung zum Röntgengerät).
- · Röntgengerät vor dem Zugriff Unbefugter schützen.

Eine Überhitzung der Anode in der Röntgenröhre Mo ist zu vermeiden.

• Bei Einschalten des Röntgengeräts überprüfen, ob sich der Lüfter im Röhrenraum dreht.

Das Goniometer wird ausschließlich über elektrische Schrittmotoren verstellt.

• Targetarm und Sensorarm des Goniometers nicht blockieren und nicht mit Gewalt verstellen.



#### Versuchsbeschreibung

Beim Durchgang durch Materie wird ein Teil der Röntgenstrahlung gestreut. Nach klassischer Vorstellung sollte sich dabei die Frequenz der Strahlung nicht ändern. Der amerikanische Physiker A. H. Compton beobachtete 1923 jedoch bei einem Teil der gestreuten Strahlung eine Verminderung der Frequenz.

Zur Erklärung muss der ganze Streuprozess quantenphysikalisch behandelt und die Röntgenstrahlung z. B. im Teilchenbild betrachtet werden. Außerdem wird angenommen, dass die streuenden Elektronen frei sind, was für die äußeren Elektronenschalen der Atome bei Energien im Bereich der Röntgenstrahlen eine gute Näherung ist. Somit trifft bei einem Streuprozess ein Photon der Frequenz  $v_1$ , also mit der Energie  $E_1 = h \cdot v_1$ , auf ein ruhendes freies Elektron der Ruhemasse  $w_0$ . Das Photon wird dabei um den Winkel  $v_0$  gestreut.

Compton berechnete nun unter der Voraussetzung von Energie- und Impulserhaltung die Energie E2 der gestreuten Strahlung zu

$$E_2 = E_1 / (1 + E_1/m_0 \cdot c^2 \cdot (1-\cos \vartheta)).$$

Im Versuch werden die Untersuchungen von Compton an einem Streukörper aus Plexiglas wiederholt und ihre Ergebnisse mit der obigen Gleichung verglichen. Zur Spektrumaufnahme wird der Röntgenenergiedetektor eingesetzt.

### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
	CASSY Lab	524 200
1	VKA-Box	524 058
1	Röntgengerät mit Röntgenröhre Mo	554 811
1	Comptonzusatz Xray II	554 837
1	Röntgenenergiedetektor	559 938
1	HF-Kabel, 1 m	501 02
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

- Zr-Filter (aus Lieferumfang des Röntgengeräts) auf die Strahleintrittsseite des Kreiskollimators (aus dem Lieferumfang des Comptonzusatzes Xray II) stecken
- Kreiskollimator in der Kollimatoraufnahme des Röntgengerätes montieren
- Anschlusskabel des Tischnetzgerätes durch den Leerkanal des Röntgengerätes führen und an die Mini-DINBuchse des Röntgenenergiedetektors anschließen
- Sensorhalter mit montiertem Röntgenenergiedetektor im Sensorarm des Goniometers befestigen
- Signalausgang des Röntgenenergiedetektors mittels mitgeliefertem BNC-Kabel an die BNC-Buchse SIGNAL IN des Röntgengerätes anschließen
- Anschlusskabel soweit nachführen, dass ein vollständiger Schwenk des Sensorarmes möglich ist
- Taster SENSOR drücken und den Sensorwinkel mit Dreheinsteller ADJUST von Hand auf 150° stellen, dazu das Goniometer ggf. weiter nach rechts schieben
- Abstand des Röntgenenergiedetektors zur Drehachse so wählen, dass das Detektorgehäuse bei diesem Sensorwinkel den Röntgenstrahl gerade nicht verdeckt
- Goniometer anschließend so weit nach links schieben, dass das Detektorgehäuse den Kreiskollimator gerade nicht berührt (ca. 8 cm Abstand zwischen Kreiskollimator und Drehachse)
- Sensor-CASSY an Computer anschließen und VKA-Box aufstecken
- Ausgang SIGNAL OUT im Anschlussfeld des Röntgengerätes mittels BNC-Kabel mit VKA-Box verbinden

#### Versuchsvorbereitung

- Einstellungen laden
- Tischnetzgerät ans Netz anschließen (nach ca. 2 min leuchtet die Leuchtdiode "grün" und der Röntgenenergiedetektor ist betriebsbereit)

Für eine genaue Messung der kleinen Energieverschiebungen muss berücksichtigt werden, dass sich die Kalibrierung des Röntgenenergiedetektors bei hohen Zählraten geringfügig verschiebt. Deshalb ist hier eine Beschränkung auf Zählraten bis 200 /s sinnvoll.



Abschätzung der Zählrate in Streuanordnung:

- Plexiglas-Streukörper auf Targettisch legen und festklemmen
- Taster TARGET drücken und den Targetwinkel mit Dreheinsteller ADJUST von Hand auf 20° stellen
- Röhren-Hochspannung U = 35 kV, Emissionsstrom I = 1,00 mA einstellen und Hochspannung einschalten
- Spektrumaufnahme mit **F9** starten
- Sensorwinkel langsam zwischen 150° und 30° variieren und jeweils oben rechts im CASSY Lab-Fenster die gesamte Z\u00e4hlrate ablesen
- Emissionsstrom reduzieren, falls die gesamte Z\u00e4hlrate 200 /s wesentlich \u00fcberschreitet

Anpassung der Zählrate des Primärstrahls:

- Targethalter mit dem Targettisch ausbauen und Sensor in 0°-Position bringen
- Abschwächerblende auf den Kreiskollimator setzen und sorgfältig ausrichten (mit den Schrauben nach oben und unten weisend)
- Emissionsstrom auf 0,1 mA reduzieren und Hochspannung einschalten
- Spektrumaufnahme mit F9 starten
- In 0,1°-Schritten um 0° den Sensorwinkel suchen, bei dem die Gesamtzählrate nur wenig über den in Streuanordnung gemessenen Zählraten liegt (ggf. den Emissionsstrom leicht verändern)

Falls keine oder nur geringe Zählrate zu messen ist:

 Ausrichtung der Abschwächerblende überprüfen (mit den Schrauben nach oben und unten weisend, eventuell um 180° drehen)

#### Versuchsdurchführung

Die zu messende Röntgenstrahlung erzeugt im Gehäuse der Si-PIN-Photodiode des Röntgenenergiedetektors zusätzlich Röntgenfluoreszenzstrahlung, die ebenfalls registriert wird. Im Primärspektrum sind daher neben der Mo K $\alpha$ - und der Mo K $\beta$ -Linie auch die Au L $\alpha$ - und die Au L $\beta$ -Linie zu erwarten. Mit Hilfe dieser Linien kann die Energiekalibrierung der Spektren durchgeführt werden.

#### ■ Einstellungen laden

- Mit **F9** Primärspektrum (0°-Position) aufnehmen
- Anschließend im Kontextmenü des Diagramms (rechte Maustaste) oder mit Alt+E die Energiekalibrierung öffnen, globale Energiekalibrierung wählen und rechts die Energien der Au Lα-Linie (9.72 keV) und der Mo Kα-Linie (17.48 keV) eintragen
- Im Kontext-Menü des Diagramms unter den weiteren Auswertungen Peakschwerpunkt berechnen auswählen, die Au Lα-Linie (kleiner Peak links neben der ebenfalls kleinen Au Lβ-Linie) markieren und das Ergebnis links in die Energiekalibrierung eintragen
- ullet Anschließend den Schwerpunkt der Mo Klpha-Linie (großer Peak) bestimmen und ebenfalls links eintragen
- Abschwächerblende entfernen
- Targethalter mit Targettisch auf Goniometer montieren
- Plexiglas-Streukörper auflegen und festklemmen
- Emissionsstrom I = 1,00 mA (bzw. den zuvor bei der Abschätzung der Zählrate ermittelten Emissionsstrom) einstellen und Hochspannung einschalten
- Targetwinkel auf 20° und Sensorwinkel auf 30° stellen
- Mit **F9** ein neues Spektrum (30°-Position) aufnehmen
- Anschließend bei konstantem Targetwinkel weitere Spektren für die Sensorwinkel 60°, 90°, 120° und 150° aufnehmen

#### **Auswertung**

Die Energie der gestreuten Strahlung verkleinert sich mit wachsendem Streuwinkel. Die Intensität der gestreuten Strahlung ist bei  $\vartheta = 90^{\circ}$  an kleinsten.

Zur weiteren Auswertung kann der Bereich um die gestreuten Peaks gezoomt und für jeden energieverschobenen Peak unter den weiteren Auswertungen Peakschwerpunkt berechnen gewählt werden. Ab einem Streuwinkel von  $\vartheta=90^\circ$  reicht die Energieauflösung des Detektors zur Trennung des unverschobenen Peaks (elastische Streuung an stark gebundenen Elektronen) und des verschobenen Peaks (inelastische Streuung an quasi freien Elektronen) aus. Für die Bestimmung des Peakschwerpunkts sollte nur der Bereich des energieverschobenen Peaks markiert werden.



Für jeden Peakschwerpunkt wird dessen Energie zusammen mit seinem Streuwinkel in die Darstellung **Auswertung** übertragen. Die Energie kann dabei mit der Maus (Drag & Drop) aus der Statuszeile in die Tabelle gezogen werden. Der Winkel muss manuell in die Tabelle eingetragen werden.

Zum Vergleich der gemessenen Energien mit den aus Energie- und Impulserhaltung berechneten Energien kann in der Darstellung **Auswertung** eine freie Anpassung der Gleichung

 $17,48/(1+17,48*(1-\cos(x))/A)$ 

mit dem Startwert A = 511 (=konstant) gewählt werden.


Das Resultat entspricht der theoretischen Kurve mit den Parametern E1 = 17,48 keV und  $\text{m}_0 \cdot \text{c}^2 = 511 \text{ keV}$ , die mit den Messwerten gut übereinstimmt.

Beim Durchgang durch Materie wird ein Teil der Röntgenstrahlung gestreut und erfährt dabei eine Energieverschiebung (Compton-Effekt). Die Energieverschiebung kann berechnet werden, indem man den Streuvorgang als Stoß zwischen einem Röntgenphoton und einem ruhenden freien Elektron beschreibt und für diesen Stoßvorgang die Erhaltung von Energie und Impuls verlangt.

#### Hinweis

Der Vergleich zwischen Messung und Theorie kann alternativ auch als Anpassung mit dem freien Anpassungsparameter A (der Ruhemasse des Stoßpartners der Röntgenphotonen) durchgeführt werden. Als Ergebnis erhält man einen Wert für den Parameter A, der in guter Näherung mit der Ruhemasse eines ruhenden freien Elektrons (mo·c² = 511 keV) übereinstimmt.

# Poissonverteilung

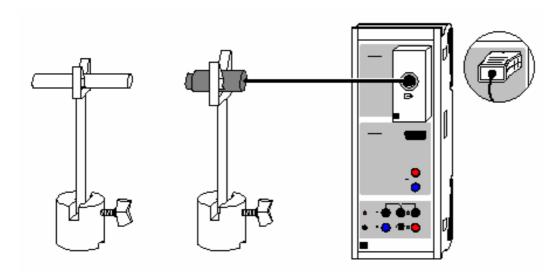



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

## Versuchsbeschreibung

Die Anzahl x der Zerfallsereignisse in einem radioaktiven Präparat in einem Zeitintervall  $\Delta t$  ist nicht konstant. Viele Einzelmessungen können als Häufigkeitsverteilung H(x) dargestellt werden, die um den Mittelwert  $\mu$  streut. Durch den Vergleich dieser Häufigkeitsverteilung mit der Poissonverteilung lässt sich bestätigen, dass x poissonverteilt um den Mittelwert  $\mu$  ist.

### **Benötigte Geräte**

1 1	Sensor-CASSY CASSY Lab	524 010 524 200
1	GM-Box mit Fensterzählrohr	524 033 559 01
od	ler	
1	GM-Zählrohr S	524 0331
1	Satz Radioaktive Präparate	559 83
1	Großer Federstecker	591 21
1	Federstecker	590 02
2	Anschlussstäbe	532 16
2	Sockel	300 11
1	PC ab Windows 95/98/NT	

## Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Das Fensterzählrohr wird über die GM-Box an Eingang A des Sensor-CASSYs angeschlossen. Zählrohr und Präparat vorsichtig behandeln.

### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Eventuell Torzeit ∆t anpassen (Einstellungen RA1)
- Eventuell Messvorwahl treffen. Dazu Anzahl Messungen in Messbedingung des Messparameterfensters (erscheint nach **F5**) eintragen (z. B. n < 1000 für 1000 Einzelmessungen)
- Messreihe mit F9 starten und nach der Aufnahme der Messreihe mit F9 wieder stoppen




# **Auswertung**

Zur Auswertung besteht die Möglichkeit, die gemessene Häufigkeitsverteilung mit einer Poissonverteilung zur vergleichen. Bei höheren Mittelwerten  $\mu$  geht die Poissonverteilung in eine Gaußverteilung über.



#### Halbwertszeit von Radon

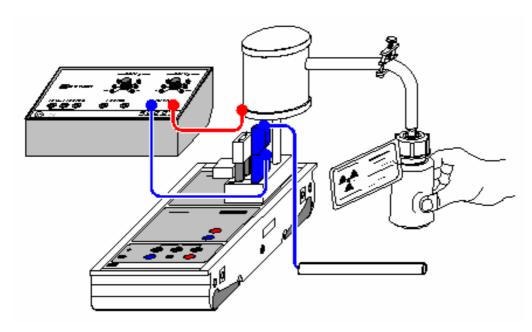



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

#### Versuchsbeschreibung

Aus der Tatsache, dass alle radioaktiven Atomkerne eines Isotops mit der gleichen Wahrscheinlichkeit zerfallen, folgt, dass während des folgenden Zeitintervalls dt die Zahl N dieser radioaktiven Kerne um

$$dN = - \lambda \cdot N \cdot dt$$

abnehmen wird (λ: Zerfallskonstante). Für die Anzahl N folgt daraus das Zerfallsgesetz

$$N(t) = N(t=0) \cdot e^{-(-\lambda \cdot t)}.$$

Es besagt u. a., dass nach der Halbwertszeit

$$t\frac{1}{2} = \ln 2 / \lambda$$

die Anzahl der radioaktiven Kerne halbiert ist.

Zur Bestimmung der Halbwertszeit von Radon 220 (Rn-220) wird eine Plastikflasche mit Thoriumsalz an eine Ionisationskammer angeschlossen und das in der Zerfallskette des Thorium auftretende Edelgas Radon in die Kammer gepumpt. Das Gas enthält u. a. das Isotop Rn-220, dessen Halbwertszeit ca. 55 s beträgt. Die Halbwertszeiten anderer Radon-Isotope sind von dieser Zeit wesentlich verschieden und brauchen nicht berücksichtigt zu werden.

Es wird nun der zeitliche Verlauf des Ionisationsstroms gemessen, der proportional zur Radioaktivität des Gases ist. Dabei dient die hochohmig beschaltete Elektrometer-Box als hochempfindliches Strommessgerät.

# **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Elektrometer-Box	524 054
1	Ionisationskammer	546 25
1	Gefäß mit Thoriumsalz	546 36
1	Netzgerät 450 V-	522 27
1	STE Widerstand 10 G $\Omega$	577 03

STE Kondensator 100 pF	578 22
Klemmstecker	590 011
Kupplungsstecker	340 89
Anschlussstäbe	532 16
Satz Brückenstecker	501 48
Experimentierkabel, 50 cm, blau	500 422
Paar Kabel, 100 cm, rot und blau	501 46
	Kupplungsstecker Anschlussstäbe Satz Brückenstecker Experimentierkabel, 50 cm, blau

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

1 PC ab Windows 95/98/NT

Der Versuch wird direkt auf der Elektrometer-Box auf Eingang A des Sensor-CASSYs aufgebaut. Die lonisationskammer wird mit dem Kupplungsstecker und dem Anschlussstab auf die obere rechte Buchse der Box gesteckt, die beiden oberen linken Buchsen werden mit einem Brückenstecker verbunden und die beiden unteren linken Buchsen nehmen den Messwiderstand von 10 G $\Omega$  sowie den Glättungskondensator von 100 pF auf (Klemmstecker zur Aufnahme beider Bauteile verwenden).

Die verbleibende Massebuchse der Elektrometer-Box dient der Erdung des Experimentators (er hält während des Experiments einen mit Masse verbundenen Anschlussstab in der Hand) um seinen Einfluss auf die empfindliche Messung zu minimieren.

## Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Eventuell Offset der Elektrometer-Box korrigieren, dazu Anschlussstab der Ionisationskammer erden, in Einstellungen UA1 Korrigieren wählen, als ersten Sollwert 0 V eingeben und Offset korrigieren
- Spannung von 450 V zwischen Masse der Elektrometer-Box und Zylinder der Ionisationskammer anlegen
- Durch mehrmaliges Drücken auf das Gefäß mit Thoriumsalz die Ionisationskammer mit Radon 220 beschicken
- Nach einer kurzen Beruhigungspause Messreihe mit F9 starten (stoppt nach 180 s automatisch)

#### **Auswertung**

Zur Bestimmung der Halbwertszeit gibt es mehrere Möglichkeiten. Durch Setzen von waagerechten und senkrechten Markierungslinien kann die Halbwertszeit grafisch veranschaulicht und abgelesen werden.


Eine Exponentialanpassung der I(t)-Kurve ergibt als Parameter B der Anpassung den Kehrwert der Zerfallskonstanten  $\lambda$ . Damit ist die Halbwertszeit  $t\frac{1}{2} = \ln 2 \cdot B = 0,693 \cdot B$ .

Aus dem Parameter A einer Geradenanpassung der logarithmierten Darstellung (rechte Maustaste auf y-Achse und logarithmieren wählen) ergibt sich die Halbwertszeit zu  $t\frac{1}{2} = -\log 2/A = -0.301/A$ .

Im Beispiel ergibt sich der Literaturwert  $t\frac{1}{2} = 55,6$  s.



# α-Spektroskopie an radioaktiven Proben (Am-241)

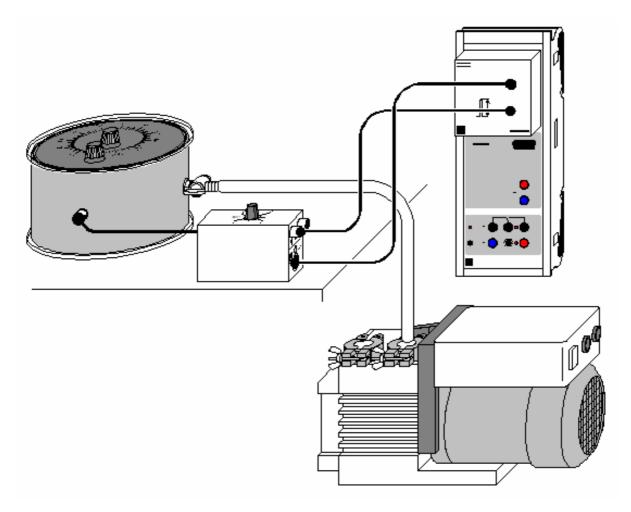



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

#### **Sicherheitshinweis**

Beim Umgang mit radioaktiven Präparaten sind länderspezifische Auflagen zu beachten, in der Bundesrepublik Deutschland z. B. die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV). Die im Versuch verwandten radioaktiven Stoffe sind nach StrlSchV für den Unterricht an Schulen bauartzugelassen. Da sie ionisierende Strahlung erzeugen, müssen beim Umgang dennoch folgende Sicherheitsregeln befolgt werden:

- Präparate vor dem Zugriff Unbefugter schützen.
- Vor Benutzung Präparate auf Unversehrtheit überprüfen.
- Zur **Abschirmung** Präparate im Schutzbehälter aufbewahren.
- Zur Gewährleistung einer **möglichst kurzen Expositionszeit** und einer **möglichst geringen Aktivität** Präparate nur zur Durchführung des Experiments aus dem Schutzbehälter nehmen.
- Zur Sicherstellung eines möglichst großen Abstandes Präparate nur am oberen Ende des Metallhalters anfassen.

#### Versuchsbeschreibung

Es wird das  $\alpha$ -Spektrum des Am-241 Präparates aufgenommen und eine Energiekalibrierung anhand bekannter Linien durchgeführt.

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	VKA-Box	524 058
1	Am-241-Präparat	559 82
1	Streukammer nach Rutherford	559 56
1	Diskriminator-Vorverstärker	559 93
1	Verbindungskabel, 6polig, 1,5 m	501 16
1	HF-Kabel, 1 m	501 02
1	HF-Kabel, 0,25 m	501 01
1	Drehschieber-Vakuumpumpe	378 73
1	Kleinflansch DN 16 KF mit Schlauchwelle	378 031
1	Vakuumschlauch, d = 8 mm	307 68
1	PC ab Windows 95/98/NT	
zu	ısätzlich empfohlen	
1	Zweikanal-Oszilloskop 303	575 211

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Das Präparat und der Detektor werden in der Rutherford-Streukammer platziert. Der Detektor wird über das kurze HF-Kabel mit dem Diskriminator-Vorverstärker verbunden. Der Diskriminator-Vorverstärker wird mit der VKA-Box verbunden. Die Pumpe wird an die Rutherford-Streukammer angeschlossen.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Rutherford-Streukammer evakuieren
- Messung mit **F9** starten
- Verstärkung der VKA-Box so verändern, dass das Spektrum die verfügbaren Kanäle ausfüllt. Dies ist typischerweise bei Verstärkungen um 5 der Fall.
- Bei Messungen mit dem Halbleiterdetektor entsteht ein relativ hoher Rauschpegel, der sich auch durch Erdung des Versuches nicht vollständig entfernen lässt. In den unteren 100 Kanälen entsteht so eine recht hohe Zählrate. Durch die automatische Skalierung des Spektrums ist die eigentliche Linie dann nur schlecht zu sehen. Hier sollte im Diagramm ein Zoom verwendet werden. Aufgrund der internen Architektur der VKA-Box bietet es sich in diesem Fall an, mit Verstärkungen unter 4,6 zu arbeiten.
- Nach jeder Änderung der Verstärkung empfiehlt es sich, das gemessene Spektrum mit F4 zu löschen, um eine Mischung von Spektren zu vermeiden. Die Messung läuft dabei weiter, und die Messzeit startet wieder neu.
- Nach Ablauf der eingestellten Messzeit stoppt die Messung.

#### Auswertung

Das Isotop Am-241 zerfällt zu Np-237 indem es ein  $\alpha$ -Teilchen emittiert. Da mehrere angeregte Zustände des Neptuniums möglich sind, werden bei diesem Zerfall  $\alpha$ -Teilchen mit verschiedenen Energien emittiert. Von 100 Zerfällen emittieren 84 ein  $\alpha$ -Teilchen mit 5486 keV und 13 eines mit 5443 keV. Dieser geringe Energieunterschied ist aber im Versuch nicht sichtbar.

Nach der Messung ist das Spektrum noch nicht kalibriert. Um das Spektrum über der Energie darzustellen, muss eine Energiekalibrierung durchgeführt werden.


#### **Hinweis**

Der Halbleiterdetektor ist lichtempfindlich, deshalb direkte Beleuchtung der Vakuumkammer vermeiden, um die Messergebnisse nicht zu verfälschen.

Bedingt durch die Abdeckung der Präparate ergibt sich ein hoher Offset der Energie. Das gemessene Spektrum beginnt erst bei einer Energie von 1-2 MeV. Teilchen mit geringerer Energie werden bereits vor dem Detektor gestoppt.



# Bestimmung des Energieverlustes von α-Strahlung in Luft

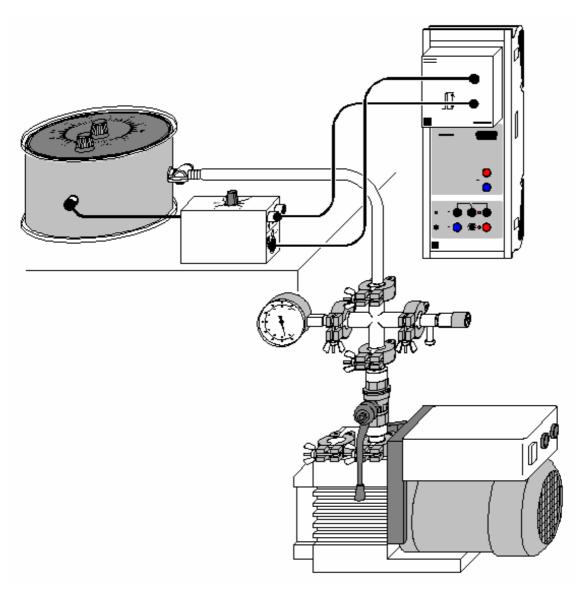



auch für Pocket-CASSY geeignet

# ■ Beispiel laden

#### **Sicherheitshinweis**

Beim Umgang mit radioaktiven Präparaten sind länderspezifische Auflagen zu beachten, in der Bundesrepublik Deutschland z. B. die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV). Die im Versuch verwandten radioaktiven Stoffe sind nach StrlSchV für den Unterricht an Schulen bauartzugelassen. Da sie ionisierende Strahlung erzeugen, müssen beim Umgang dennoch folgende Sicherheitsregeln befolgt werden:

- Präparate vor dem Zugriff Unbefugter schützen.
- Vor Benutzung Präparate auf Unversehrtheit überprüfen.
- Zur **Abschirmung** Präparate im Schutzbehälter aufbewahren.
- Zur Gewährleistung einer **möglichst kurzen Expositionszeit** und einer **möglichst geringen Aktivität** Präparate nur zur Durchführung des Experiments aus dem Schutzbehälter nehmen.
- Zur Sicherstellung eines möglichst großen Abstandes Präparate nur am oberen Ende des Metallhalters anfassen.



Der Energieverlust der  $\alpha$ -Strahlung einer Am-241-Probe wird in Abhängigkeit vom Luftdruck in der Streukammer gemessen. Daraus wird der Energieverlust bei Normaldruck in Abhängigkeit vom Abstand berechnet. Es ergibt sich die Reichweite der  $\alpha$ -Strahlung in Luft.

## **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	VKA-Box	524 058
1	Am-241-Präparat	559 82
1	Streukammer nach Rutherford	559 56
1	Diskriminator-Vorverstärker	559 93
1	Verbindungskabel, 6polig, 1,5 m	501 16
1	HF-Kabel, 1 m	501 02
1	HF-Kabel, 0,25 m	501 01
1	Drehschieber-Vakuumpumpe	378 73
1	Kleinflansch DN 16 KF	378 031
1	Vakuumschlauch, d = 8 mm	307 68
1	Kreuzstück DN 16 KF	378 015
1	Dosierventil mit DN 16 KF	378 776
1	Feder-Vakuummeter	378 510
4	Zentrierring DN 16 KF	378 045
4	Spannring DN 10/16 KF	378 050
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Das Präparat und der Detektor werden in der Rutherford-Streukammer platziert. Der Detektor wird über das kurze HF-Kabel mit dem Diskriminator-Vorverstärker verbunden. Der Diskriminator-Vorverstärker wird mit der VKA-Box verbunden. Die Pumpe und das Vakuummeter werden an die Rutherford-Streukammer angeschlossen.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Nach Einbau von Präparat und Detektor Rutherford-Streukammer vorsichtig evakuieren.
- Nach Erreichen des Vakuums Spektrum aufnehmen (F9), dabei die Verstärkung so variieren, dass die Linie des Am-241 ungefähr in der Mitte des Spektrums erscheint.
- Energie kalibrieren, siehe Hinweis
- Dosierventil öffnen, bis der Druck in der Vakuumkammer ca. 300 mbar beträgt. Neues Spektrum aufnehmen.
- Druck in der Vakuumkammer erhöhen und zunächst in Schritten von etwa 100 mbar, ab 800 mbar in kleineren Schritten, jeweils ein α-Spektrum aufnehmen (**F9**).

#### Auswertung

Aus den einzelnen Spektren wird die Energie der  $\alpha$ -Linie bestimmt. Der Luftdruck wird in die effektive Luftstrecke bei Normaldruck umgerechnet. Aus der Darstellung der Energie über der effektiven Luftstrecke wird die Reichweite der  $\alpha$ -Strahlung abgelesen.

## Hinweise

Eine direkte Messung der Reichweite in Luft, ohne die Streukammer zu verwenden, ist natürlich auch möglich. Durch Variation des Abstands kann die Reichweite bestimmt werden. Der Aufbau erfordert aber etwas Improvisation bei der Befestigung des Präparates. Der Detektor kann direkt auf den Diskriminator-Vorverstärker gesteckt werden. Er liefert dann deutlich höhere Pulse als in der Streukammer, da die Belastung durch die Kapazität des HF Kabels entfällt.

Der Halbleiterdetektor ist lichtempfindlich, deshalb direkte Beleuchtung der Vakuumkammer vermeiden, um die Messergebnisse nicht zu verfälschen.

Bei Messungen mit dem Halbleiterdetektor entsteht ein relativ hoher Rauschpegel, der sich auch durch Erdung des Versuches nicht vollständig entfernen lässt. In den unteren 100 Kanälen entsteht so eine


260 CASSY Lab



recht hohe Zählrate. Durch die automatische Skalierung des Spektrums ist die eigentliche Linie dann nur schlecht zu sehen. Hier sollte im Diagramm ein Zoom verwendet werden. Aufgrund der internen Architektur der VKA-Box bietet es sich in diesem Fall an, mit Verstärkungen unter 4,6 zu arbeiten.

Bedingt durch die Abdeckung der Präparate ergibt sich ein hoher Offset der Energie. Das gemessene Spektrum beginnt erst bei einer Energie von 1-2 MeV. Teilchen mit geringerer Energie werden bereits vor dem Detektor gestoppt.

# Bestimmung des Energieverlustes von α-Strahlung in Aluminium und in Gold

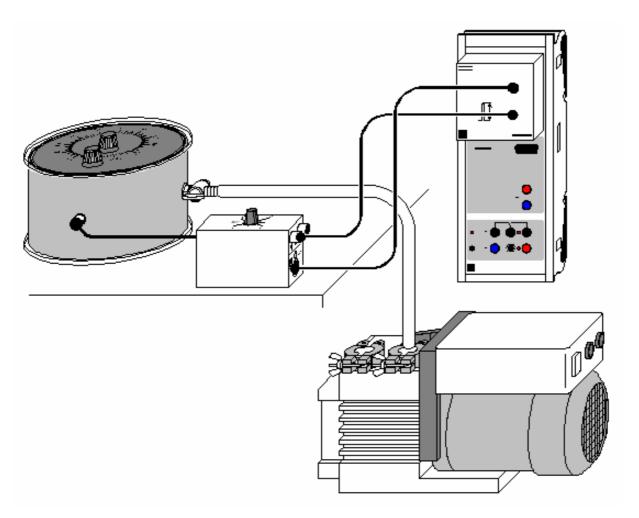



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

# **Sicherheitshinweis**

Beim Umgang mit radioaktiven Präparaten sind länderspezifische Auflagen zu beachten, in der Bundesrepublik Deutschland z. B. die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV). Die im Versuch verwandten radioaktiven Stoffe sind nach StrlSchV für den Unterricht an Schulen bauartzugelassen. Da sie ionisierende Strahlung erzeugen, müssen beim Umgang dennoch folgende Sicherheitsregeln befolgt werden:

- Präparate vor dem Zugriff Unbefugter schützen.
- Vor Benutzung Präparate auf Unversehrtheit überprüfen.
- Zur **Abschirmung** Präparate im Schutzbehälter aufbewahren.
- Zur Gewährleistung einer **möglichst kurzen Expositionszeit** und einer **möglichst geringen Aktivität** Präparate nur zur Durchführung des Experiments aus dem Schutzbehälter nehmen.
- Zur Sicherstellung eines möglichst großen Abstandes Präparate nur am oberen Ende des Metallhalters anfassen.

# Versuchsbeschreibung

Der Energieverlust von  $\alpha$ -Strahlung in einer Aluminiumfolie oder Goldfolie wird in Abhängigkeit von der  $\alpha$ -Energie bestimmt.



1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	VKA-Box	524 058
1	Am-241-Präparat	559 82
1	Ra-226-Präparat	559430
1	Streukammer nach Rutherford	559 56
1	Aluminium-Folie in Fassung	559 52
1	Diskriminator-Vorverstärker	559 93
1	Verbindungskabel, 6polig, 1,5 m	501 16
1	HF-Kabel, 1 m	501 02
1	HF-Kabel, 0,25 m	501 01
1	Drehschieber-Vakuumpumpe	378 73
1	Kleinflansch DN 16 KF	378 031
1	Vakuumschlauch, d = 8 mm	307 68
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Das Präparat, die Folie und der Detektor werden in der Rutherford-Streukammer montiert. Der Detektor wird über das kurze HF-Kabel mit dem Diskriminator-Vorverstärker verbunden. Der Diskriminator-Vorverstärker wird mit der VKA-Box verbunden. Die Pumpe wird an die Rutherford-Streukammer angeschlossen.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Ra-226 Präparat und Goldfolie in die Streukammer einbauen
- · Kammer evakuieren
- Goldfolie (2 μm dick) aus dem Strahlengang schwenken, Spektrum aufnehmen (F9), dabei die Verstärkung so einstellen, dass das Spektrum gut dargestellt wird
- Energiekalibrierung auf den äußeren Linien des Spektrums (4785 keV, 7687 keV) durchführen
- Goldfolie in den Strahlengang schwenken, Spektrum aufnehmen (F9)
- Kammer belüften, Aluminiumfolie (8 μm dick) einbauen, Kammer evakuieren, Spektrum aufnehmen
- Kammer belüften, Am-241 Präparat einbauen und Messungen mit Gold- und Aluminiumfolie wiederholen, ohne die Energiekalibrierung zu verändern

#### **Auswertung**


Aus den Spektren wird jeweils die Energie der Linien bestimmt. Der Energieverlust pro Wegstrecke in Aluminium und Gold wird über der Energie aufgetragen und mit den Ergebnissen der Bethe-Bloch Formel verglichen.

#### Hinweis

Der Halbleiterdetektor ist lichtempfindlich, deshalb direkte Beleuchtung der Vakuumkammer vermeiden, um die Messergebnisse nicht zu verfälschen.

Bedingt durch die Abdeckung der Präparate ergibt sich bei der Energiekalibrierung nach Literaturwerten ein hoher Offset der Energie. Das gemessene Spektrum beginnt erst bei einer Energie von 1-2 MeV. Teilchen mit geringerer Energie werden bereits vor dem Detektor gestoppt.

# Altersbestimmung an einer Ra-226 Probe

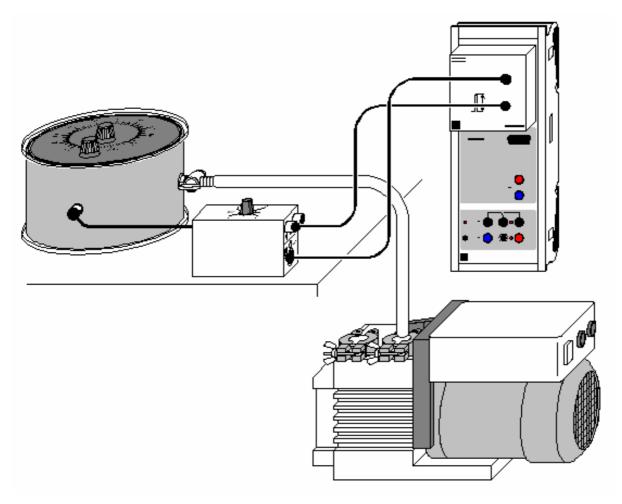



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

#### **Sicherheitshinweis**

Beim Umgang mit radioaktiven Präparaten sind länderspezifische Auflagen zu beachten, in der Bundesrepublik Deutschland z. B. die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV). Die im Versuch verwandten radioaktiven Stoffe sind nach StrlSchV für den Unterricht an Schulen bauartzugelassen. Da sie ionisierende Strahlung erzeugen, müssen beim Umgang dennoch folgende Sicherheitsregeln befolgt werden:

- Präparate vor dem Zugriff Unbefugter schützen.
- Vor Benutzung Präparate auf Unversehrtheit überprüfen.
- Zur **Abschirmung** Präparate im Schutzbehälter aufbewahren.
- Zur Gewährleistung einer **möglichst kurzen Expositionszeit** und einer **möglichst geringen Aktivität** Präparate nur zur Durchführung des Experiments aus dem Schutzbehälter nehmen.
- Zur Sicherstellung eines möglichst großen Abstandes Präparate nur am oberen Ende des Metallhalters anfassen.

#### Versuchsbeschreibung

Die relative Aktivität der Nuklide Ra-226 und Pb-210 in einer Ra-226-Probe wird bestimmt und daraus das Alter der Probe berechnet.



1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	VKA-Box	524 058
1	Ra-226-Präparat	559430
1	Streukammer nach Rutherford	559 56
1	Diskriminator-Vorverstärker	559 93
1	Verbindungskabel, 6polig, 1,5 m	501 16
1	HF-Kabel, 1 m	501 02
1	HF-Kabel, 0,25 m	501 01
1	Drehschieber-Vakuumpumpe	378 73
1	Kleinflansch DN 16 KF	378 031
1	Vakuumschlauch, d = 8 mm	307 68
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Das Präparat und der Detektor werden in der Rutherford-Streukammer platziert. Der Detektor wird über das kurze HF-Kabel mit dem Diskriminator-Vorverstärker verbunden. Der Diskriminator-Vorverstärker wird mit der VKA-Box verbunden. Die Pumpe wird an die Rutherford-Streukammer angeschlossen.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Das Ra-226 Präparat wird in der Streukammer montiert
- Nach Evakuieren der Kammer wird ein Spektrum aufgenommen (F9)
- Verstärkung der VKA-Box dabei so verändern, dass das Spektrum die verfügbaren Kanäle ausfüllt.
   Dies ist typischerweise bei Verstärkungen um 5 der Fall.
- Energiekalibrierung auf den äußeren Linien des Spektrums (4785 keV, 7687 keV) durchführen

#### **Auswertung**


Aus den Zählraten der beobachteten Linien wird das Alter des Präparates berechnet. Die Auswertung wird dadurch erschwert, dass sich die  $\alpha$ -Energien von Po-210 und Rn-222 nur wenig unterscheiden und beide Nuklide daher zu einem gemeinsamen Peak beitragen (dem mittleren der Dreiergruppe). Daher wird die Zählrate des Rn-222 durch eine Geradenanpassung aus den Zählraten von Ra-226, Po-218 und Po-214 ermittelt. Aus dem Verhältnis der Zählraten von Po-210 und Ra-226 lässt sich das Alter des Präparates berechnen.

#### **Hinweis**

Der Halbleiterdetektor ist lichtempfindlich, deshalb direkte Beleuchtung der Vakuumkammer vermeiden, um die Messergebnisse nicht zu verfälschen.

Bedingt durch die Abdeckung der Präparate ergibt sich bei der Energiekalibrierung nach Literaturwerten ein hoher Offset der Energie. Das gemessene Spektrum beginnt erst bei einer Energie von 1-2 MeV. Teilchen mit geringerer Energie werden bereits vor dem Detektor gestoppt.

# Nachweis von γ-Strahlung mit einem Szintillationszähler (Cs-137)

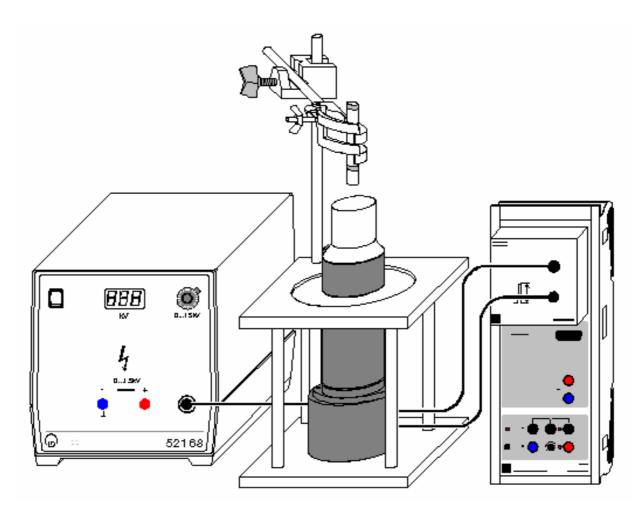



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

#### **Sicherheitshinweis**

Beim Umgang mit radioaktiven Präparaten sind länderspezifische Auflagen zu beachten, in der Bundesrepublik Deutschland z. B. die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV). Die im Versuch verwandten radioaktiven Stoffe sind nach StrlSchV für den Unterricht an Schulen bauartzugelassen. Da sie ionisierende Strahlung erzeugen, müssen beim Umgang dennoch folgende Sicherheitsregeln befolgt werden:

- Präparate vor dem Zugriff Unbefugter schützen.
- Vor Benutzung Präparate auf Unversehrtheit überprüfen.
- Zur **Abschirmung** Präparate im Schutzbehälter aufbewahren.
- Zur Gewährleistung einer **möglichst kurzen Expositionszeit** und einer **möglichst geringen Aktivität** Präparate nur zur Durchführung des Experiments aus dem Schutzbehälter nehmen.
- Zur Sicherstellung eines möglichst großen Abstandes Präparate nur am oberen Ende des Metallhalters anfassen.

#### Versuchsbeschreibung

Es wird das  $\gamma$ -Spektrum des Mischpräparates (Cs-137, Am-241, Sr-90) aufgenommen und eine Energiekalibrierung anhand bekannter Linien durchgeführt.



1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	VKA-Box	524 058
1	Mischpräparat $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$	559 84 oder aus 559 83
1	Szintillationszähler	559 901
1	Detektor-Ausgangsstufe	559 912
1	Hochspannungsnetzgerät 1,5 kV	521 68
1	Sockel zum Szintillationszähler	559 891
1	Stativstange, 47 cm	300 42
1	Leybold-Muffe	301 01
1	Universalklemme, 080 mm	666 555
1	PC ab Windows 95/98/NT	

zusätzlich empfohlen

1 Zweikanal-Oszilloskop 303 575 211

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Ausgangsstufe des Szintillationszählers wird mit der VKA-Box und dem Hochspannungsnetzgerät verbunden. Das Präparat wird mittels Stativmaterial über dem Szintillationszähler platziert, so dass es sich einige Zentimeter oberhalb des Detektors befindet. Zum Schutz des Szintillationszählers gegen Umkippen empfiehlt es sich, den Sockel (559 891) beim Aufbau zu verwenden, der auch eine Aufnahme für die Stativstange enthält.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- · Hochspannungsnetzgerät auf Null stellen und einschalten.
- Messung mit F9 starten
- Ohne Hochspannung am Szintillationszähler sollten keine Impulse gezählt werden.
- Hochspannung langsam erhöhen, bis bei einer Spannung von 700–900 V das Spektrum die verfügbaren Kanäle ausfüllt.
- Nach jeder Änderung der Hochspannung empfiehlt es sich, das gemessene Spektrum mit F4 zu löschen, um eine Mischung von Spektren zu vermeiden. Die Messung läuft dabei weiter, und die Messzeit startet wieder neu.
- Nach Ablauf der eingestellten Messzeit stoppt die Messung.

#### Auswertung

Die beiden Isotope Cs-137 und Am-241 im Mischpräparat emittieren  $\gamma$ -Strahlung, die im Versuch vom Szintillationszähler registriert wird. Das Am-241 emittiert eine Linie bei 59,5 keV, das Cs-137 eine Linie bei 662 keV. Das gemessene Spektrum zeigt mehr Details zwischen diesen beiden Linien, die aufgrund der Compton-Streuung in Präparat und Detektor entstehen.


Nach der Messung ist das Spektrum noch nicht kalibriert. Um das Spektrum über der Energie darzustellen, muss eine Energiekalibrierung durchgeführt werden, dabei werden die bekannten Energien der zwei Linien im Spektrum (59,5 und 662 keV) verwendet.

#### Hinweis

Das Präparat sollte bei der Messung nicht auf dem Detektor stehen, sondern einige Zentimeter entfernt sein. Wenn das Präparat direkt aufliegt, ergibt sich eine so hohe Zählrate, dass sich die einzelnen Pulse aufaddieren. Durch diese Addition mit dem Rest des Vorgängerpulses erscheinen die Linien bei zu hoher Energie.

Der Nal(TI) Einkristall in der Spitze des Szintillationszählers ist empfindlich gegen mechanische Beschädigung. Ebenso ist der Nal(TI) Kristall empfindlich gegen schnelle Temperaturwechsel, wie sie z. B. beim Auspacken nach Transporten auftreten können. In beiden Fällen entstehen Risse im Einkristall, die aufgrund der Streuung zu verminderter Empfindlichkeit führen und vor allem die Energieauflösung verschlechtern.

# Aufnahme und Kalibrierung eines γ-Spektrums

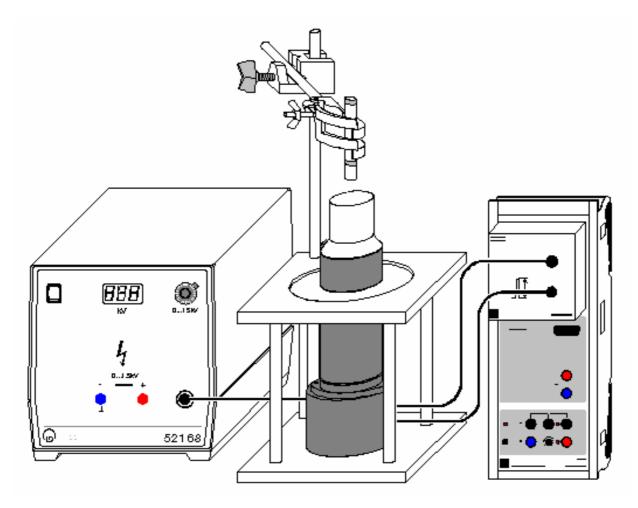



auch für Pocket-CASSY geeignet

Beispiel laden

#### **Sicherheitshinweis**

Beim Umgang mit radioaktiven Präparaten sind länderspezifische Auflagen zu beachten, in der Bundesrepublik Deutschland z. B. die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV). Die im Versuch verwandten radioaktiven Stoffe sind nach StrlSchV für den Unterricht an Schulen bauartzugelassen. Da sie ionisierende Strahlung erzeugen, müssen beim Umgang dennoch folgende Sicherheitsregeln befolgt werden:

- Präparate vor dem Zugriff Unbefugter schützen.
- Vor Benutzung Präparate auf Unversehrtheit überprüfen.
- Zur **Abschirmung** Präparate im Schutzbehälter aufbewahren.
- Zur Gewährleistung einer **möglichst kurzen Expositionszeit** und einer **möglichst geringen Aktivität** Präparate nur zur Durchführung des Experiments aus dem Schutzbehälter nehmen.
- Zur Sicherstellung eines möglichst großen Abstandes Präparate nur am oberen Ende des Metallhalters anfassen.

#### Versuchsbeschreibung

Die  $\gamma$ -Spektren einiger Standardpräparate (Cs-137, Co-60, Na-22) werden gemessen und nach einer Energiekalibrierung des Szintillationszählers werden die  $\gamma$ -Übergänge anhand der Literaturwerte identifiziert.



1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	VKA-Box	524 058
1	Satz Radioaktive Präparate	559 83
1	Szintillationszähler	559 901
1	Detektor-Ausgangsstufe	559 912
1	Hochspannungsnetzgerät 1,5 kV	521 68
1	Sockel zum Szintillationszähler	559 891
1	Stativstange, 47 cm	300 42
1	Leybold-Muffe	301 01
1	Universalklemme, 080 mm	666 555
4	DC ob Windows 05/00/NIT	

1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Ausgangsstufe des Szintillationszählers wird mit der VKA-Box und dem Hochspannungsnetzgerät verbunden. Das jeweilige Präparat wird mittels Stativmaterial über dem Szintillationszähler platziert, so dass es sich einige Zentimeter oberhalb des Detektors befindet. Zum Schutz des Szintillationszählers gegen Umkippen empfiehlt es sich, den Sockel (559 891) beim Aufbau zu verwenden.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Nacheinander die Spektren von Co-60, Na-22 und Cs-137 aufnehmen (F9). Es bietet sich an, mit dem Co-60 Präparat zu beginnen, da dieses die energiereichste Strahlung aussendet, so dass die Hochspannung und die Verstärkung zu Beginn passend eingeregelt werden können.
- Um die Spektren über der Energie darzustellen, muss eine Energiekalibrierung durchgeführt werden. Hierzu können beispielsweise die Linien des Na-22 bei 511 keV und 1275 keV verwendet werden.

#### Auswertung

Die Energien der einzelnen Linien werden bestimmt. Hierzu kann die Funktion Gausskurven anpassen verwendet werden. Ein Vergleich mit Literaturwerten erlaubt die Identifizierung der strahlenden Isotope.


#### Hinweise

Es gibt im Internet einige Datenbanken mit den bekannten Energien aller radioaktiven Stoffe, beispielsweise unter <a href="http://nucleardata.nuclear.lu.se/nucleardata/toi/">http://nucleardata.nuclear.lu.se/nucleardata/toi/</a>, die zur Identifikation der Strahler verwendet werden können.

Das Präparat sollte bei der Messung nicht auf dem Detektor stehen, sondern einige Zentimeter entfernt sein. Wenn das Präparat direkt aufliegt, ergibt sich eine so hohe Zählrate, dass sich die einzelnen Pulse überlappen. Durch diese Addition mit dem Rest des Vorgängerpulses erscheinen die Linien bei zu hoher Energie.



# Absorption von γ-Strahlung

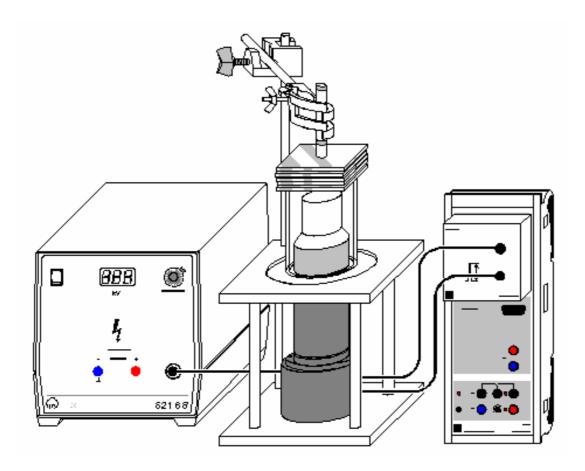



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

#### **Sicherheitshinweis**

Beim Umgang mit radioaktiven Präparaten sind länderspezifische Auflagen zu beachten, in der Bundesrepublik Deutschland z. B. die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV). Die im Versuch verwandten radioaktiven Stoffe sind nach StrlSchV für den Unterricht an Schulen bauartzugelassen. Da sie ionisierende Strahlung erzeugen, müssen beim Umgang dennoch folgende Sicherheitsregeln befolgt werden:

- Präparate vor dem Zugriff Unbefugter schützen.
- Vor Benutzung Präparate auf Unversehrtheit überprüfen.
- Zur **Abschirmung** Präparate im Schutzbehälter aufbewahren.
- Zur Gewährleistung einer möglichst kurzen Expositionszeit und einer möglichst geringen Aktivität Präparate nur zur Durchführung des Experiments aus dem Schutzbehälter nehmen.
- Zur Sicherstellung eines möglichst großen Abstandes Präparate nur am oberen Ende des Metallhalters anfassen.

#### Versuchsbeschreibung

Die Intensität von  $\gamma$ -Strahlung hinter einem Absorber wird in Abhängigkeit von der Absorberdicke gemessen. Daraus folgt die Bestätigung des Lambertschen Schwächungsgesetzes. Der lineare Schwächungskoeffizient  $\mu$  und die Halbwertsdicke d1/2 werden abgeleitet.



Sensor-CASSY	524 010
CASSY Lab	524 200
VKA-Box	524 058
Satz Radioaktive Präparate	559 83
Satz Absorber und Targets	559 94
Szintillationszähler	559 901
Detektor-Ausgangsstufe	559 912
Hochspannungsnetzgerät 1,5 kV	521 68
Sockel zum Szintillationszähler	559 891
Stativstange, 47 cm	300 42
Leybold-Muffe	301 01
Universalklemme, 080 mm	666 555
PC ab Windows 95/98/NT	
	CASSY Lab VKA-Box Satz Radioaktive Präparate Satz Absorber und Targets Szintillationszähler Detektor-Ausgangsstufe Hochspannungsnetzgerät 1,5 kV Sockel zum Szintillationszähler Stativstange, 47 cm Leybold-Muffe Universalklemme, 080 mm

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Ausgangsstufe des Szintillationszählers wird mit der VKA-Box und dem Hochspannungsnetzgerät verbunden. Der Szintillationszähler wird im Sockel montiert und die Spitze des Szintillationszählers mit dem Plexiglasrohr umgeben. Das Präparat wird mittels Stativmaterial über dem Szintillationszähler platziert, so dass es sich einige Zentimeter oberhalb des Detektors befindet. Die Absorber werden auf das Plexiglasrohr gelegt.

# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Zunächst das Co-60 Präparat einspannen und das Spektrum ohne Absorber aufnehmen (**F9**), dabei die Hochspannung so einstellen, dass das Spektrum den Messbereich gut ausfüllt.
- Nacheinander die Absorber (Aluminium, Eisen, Blei) in verschiedenen Schichtdicken auf das Plexiglasrohr legen und jeweils ein Spektrum aufnehmen (**F9**).
- Die Messungen jeweils für das Cs-137 und Am-241 Präparat wiederholen.

#### Auswertung

In den Spektren werden die Zählraten unter den jeweiligen Linien bestimmt, hierzu wird die Funktion Integral berechnen verwendet. Die Zählraten werden für die einzelnen Energien und Absorber in Abhängigkeit von der Absorberdicke dargestellt. Daraus ergibt sich der lineare Schwächungskoeffizient  $\mu$  und die Halbwertsdicke d1/2.

$$I = I_0 e^{-\mu \cdot x}$$

Typische Werte für µ sind:

E	60 keV	662 keV	1253 keV
AI Fe	0,51 1/cm 7.4 1/cm	0,16 1/cm 0.43 1/cm	0,13 1/cm 0,36 1/cm
Pb	7,4 1/0111	0,86 1/cm	0,55 1/cm


#### Hinweis

Der Nal(TI) Einkristall in der Spitze des Szintillationszählers ist empfindlich gegen mechanische Beschädigung. Vorsicht beim Auflegen der Absorber.

Es entstehen sonst Risse im Einkristall, die aufgrund der Streuung zu verminderter Empfindlichkeit führen und vor allem die Energieauflösung verschlechtern.



# Identifizierung und Aktivitätsbestimmung von schwach radioaktiven Proben

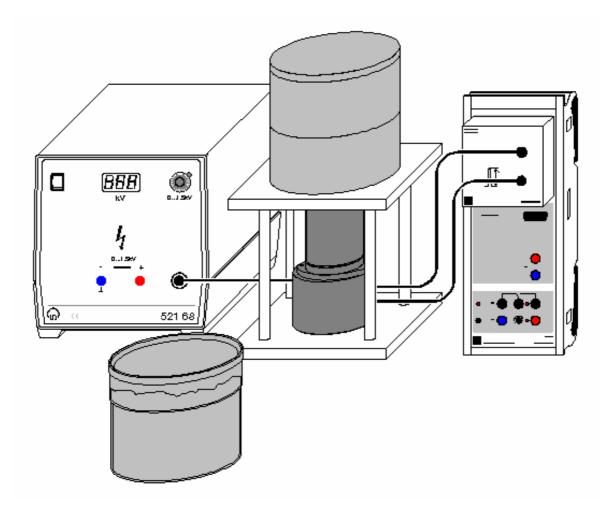



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

## **Sicherheitshinweis**

Beim Umgang mit radioaktiven Präparaten sind länderspezifische Auflagen zu beachten, in der Bundesrepublik Deutschland z. B. die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV). Die im Versuch verwandten radioaktiven Stoffe sind nach StrlSchV für den Unterricht an Schulen bauartzugelassen. Da sie ionisierende Strahlung erzeugen, müssen beim Umgang dennoch folgende Sicherheitsregeln befolgt werden:

- Präparate vor dem Zugriff Unbefugter schützen.
- Vor Benutzung Präparate auf **Unversehrtheit** überprüfen.
- Zur Abschirmung Präparate im Schutzbehälter aufbewahren.
- Zur Gewährleistung einer **möglichst kurzen Expositionszeit** und einer **möglichst geringen Aktivität** Präparate nur zur Durchführung des Experiments aus dem Schutzbehälter nehmen.
- Zur Sicherstellung eines **möglichst großen Abstandes** Präparate nur am oberen Ende des Metallhalters anfassen.

### Versuchsbeschreibung

Die Nachweiswahrscheinlichkeit des Szintillationszählers wird mittels Kalibrierpräparaten bei verschiedenen  $\gamma$ -Energien bestimmt. Das  $\gamma$ -Spektrums einer schwach radioaktiven Probe wird aufgenommen und die radioaktiven Bestandteile in der Probe ermittelt.



1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	VKA-Box	524 058
2	Marinelli-Becher	559 88
1	Kalibrierpräparat Cs-137, 5kBq	559 885
4	Kaliumchlorid, 250 g	672 5210
1	Szintillationszähler	559 901
1	Detektor-Ausgangsstufe	559 912
1	Hochspannungsnetzgerät 1,5 kV	521 68
1	Szintillationszähler-Abschirmung	559 89
1	Sockel zum Szintillationszähler	559 891
4	DO - I- M/:	

1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Ausgangsstufe des Szintillationszählers wird mit der VKA-Box und dem Hochspannungsnetzgerät verbunden und in den Sockel gestellt. Der Szintillationszähler wird von oben in den Sockel mit Bleiabschirmung eingebaut. Das Präparat wird im Marinellibecher über dem Szintillationszähler platziert.

#### Versuchsdurchführung

■ Einstellungen laden

- Ein Marinellibecher wird mit 1 kg Kaliumchlorid gefüllt und über dem Szintillationszähler platziert.
- Spektrum aufnehmen (F9), dabei durch Variation der Hochspannung den Messbereich gut ausnutzen.
- Marinellibecher entnehmen und Kalibrierpräparat Cs-137 einsetzen
- Spektrum aufnehmen
- Anhand der Linien in den beiden Spektren bei 1460 keV und 662 keV kann eine Energiekalibrierung durchgeführt werden.
- Präparat entfernen
- Probensubstanz gleichmäßig in einem Marinellibecher verteilen, diesen über dem Szintillationszähler platzieren und das Spektrum der Probe aufnehmen.
- Nullmessung / Untergrundmessung durchführen, ohne Präparat, mit der gleichen Messzeit wie bei der Probe.

#### Auswertung

Für das Kaliumchlorid (17 kBq/kg) und das Cs-137 Kalibrierpräparat (ca. 5 kBq, siehe Kalibrierzertifikat, Halbwertszeit beachten) sind die Aktivitäten bekannt. Aus der integralen Zählrate unter der Linie im jeweiligen Spektrum lässt sich so die Nachweiswahrscheinlichkeit des Szintillationszählers bei 1460 keV und 662 keV in dieser Geometrie bestimmen.

Das Untergrundspektrum wird vom Spektrum der Probe subtrahiert. Aus dem resultierenden Spektrum und der vorher bestimmten Nachweiswahrscheinlichkeit lässt sich die radioaktive Belastung der Probe ermitteln. Anhand der beobachteten Energien kann das strahlende Isotop in der Probe ermittelt werden und mit den soeben bestimmten Nachweiswahrscheinlichkeiten auch die Menge abgeschätzt werden.


#### Hinweise

Der Nal(TI) Einkristall in der Spitze des Szintillationszählers ist empfindlich gegen mechanische Beschädigung. Vorsicht beim Einsetzen der Marinelli-Becher.

Bei Messungen an stark strahlenden Proben die Anzeige der Totzeit beachten, gegebenenfalls verdünnen.

# <u>(ii)</u>

# Aufnahme eines β-Spektrums mit einem Szintillationszähler

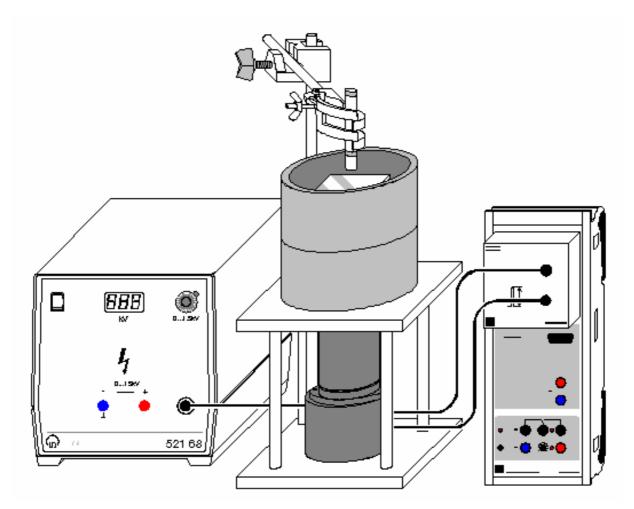



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

#### **Sicherheitshinweis**

Beim Umgang mit radioaktiven Präparaten sind länderspezifische Auflagen zu beachten, in der Bundesrepublik Deutschland z. B. die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV). Die im Versuch verwandten radioaktiven Stoffe sind nach StrlSchV für den Unterricht an Schulen bauartzugelassen. Da sie ionisierende Strahlung erzeugen, müssen beim Umgang dennoch folgende Sicherheitsregeln befolgt werden:

- Präparate vor dem Zugriff Unbefugter schützen.
- Vor Benutzung Präparate auf Unversehrtheit überprüfen.
- Zur Abschirmung Präparate im Schutzbehälter aufbewahren.
- Zur Gewährleistung einer **möglichst kurzen Expositionszeit** und einer **möglichst geringen Aktivität** Präparate nur zur Durchführung des Experiments aus dem Schutzbehälter nehmen.
- Zur Sicherstellung eines möglichst großen Abstandes Präparate nur am oberen Ende des Metallhalters anfassen.

#### Versuchsbeschreibung

Das  $\beta$ -Spektrum von Sr-90 wird mit einem Szintillationszähler aufgenommen. Der Energieverlust pro Wegstrecke dE/dx der  $\beta$ -Teilchen in Aluminiumabsorbern wird gemessen.



1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	VKA-Box	524 058
1	Satz Radioaktive Präparate	559 83
1	Satz Absorber und Targets	559 94
1	Szintillationszähler	559 901
1	Detektor-Ausgangsstufe	559 912
1	Hochspannungsnetzgerät 1,5 kV	521 68
1	Szintillationszähler-Abschirmung	559 89
1	Sockel zum Szintillationszähler	559 891
1	Stativstange, 47 cm	300 42
1	Leybold-Muffe	301 01
1	Universalklemme, 080 mm	666 555
1	PC ab Windows 95/98/NT	

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)


Die Ausgangsstufe des Szintillationszählers wird mit der VKA-Box und dem Hochspannungsnetzgerät verbunden und in den Sockel gestellt. Der Szintillationszähler wird von oben in den Sockel mit Bleiabschirmung eingebaut. Das Plexiglasrohr wird innerhalb der Bleiabschirmung über den Szintillationszähler gestellt. Das Präparat wird mittels Stativmaterial einige Zentimeter über dem Szintillationszähler platziert. Die Absorberplatten werden auf das Plexiglasrohr gelegt, so dass sie sich zwischen Detektor und Präparat befinden.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Sr-90 Präparat einbauen und dass Spektrum aufnehmen (**F9**). Dabei die Hochspannung am Detektor so einstellen, dass das Spektrum auf der rechten Seite nicht abgeschnitten wird.
- Zur Energiekalibrierung das Na-22 Präparat einbauen und die Energieachse anhand der 511 keV und 1275 keV Linien kalibrieren. Das Sr-90 Spektrum erstreckt sich bis ca. 2000 keV
- Eventuell den Untergrund ohne Präparat bestimmen.
- Wieder das Sr-90 Präparat einbauen, dabei darauf achten, das genug Platz unter dem Präparat für die Absorber zur Verfügung steht.
- Nacheinander Spektren ohne Absorber, mit 0,5 mm Aluminium als Absorber, 1 mm Aluminium, usw. bis 3 mm Aluminium aufnehmen.


#### Auswertung

Durch die Aluminium-Absorber verringert sich die maximale Energie der Elektronen, die in den Detektor gelangen. Aus den Sr-90 Spektren wird jeweils die höchste Energie bestimmt, bei der noch Elektronen detektiert werden. Diese Energien werden in einer Tabelle gegen die Dicke des Absorbers aufgetragen. Die Steigung der Ausgleichsgeraden ergibt den Energieverlust pro Wegstrecke dE/dx, hier etwa 400 – 450 keV/mm.

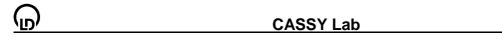

275

# **Quantitative Beobachtung des Compton-Effekts**

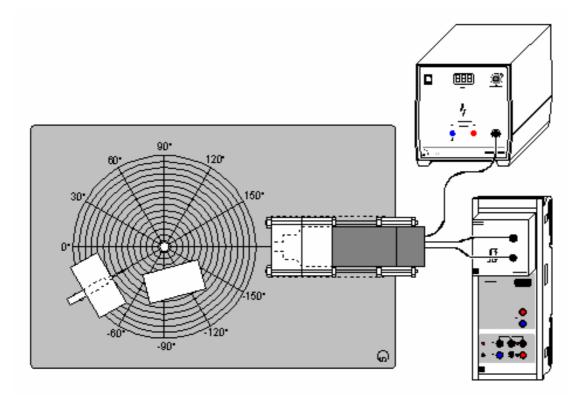



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

#### **Sicherheitshinweis**

Beim Umgang mit radioaktiven Präparaten sind länderspezifische Auflagen zu beachten, in der Bundesrepublik Deutschland z. B. die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV). Die im Versuch verwandten radioaktiven Stoffe sind nach StrlSchV für den Unterricht an Schulen bauartzugelassen. Da sie ionisierende Strahlung erzeugen, müssen beim Umgang dennoch folgende Sicherheitsregeln befolgt werden:

- Präparate vor dem Zugriff Unbefugter schützen.
- Vor Benutzung Präparate auf Unversehrtheit überprüfen.
- Zur Abschirmung Präparate im Schutzbehälter aufbewahren.
- Zur Gewährleistung einer **möglichst kurzen Expositionszeit** und einer **möglichst geringen Aktivität** Präparate nur zur Durchführung des Experiments aus dem Schutzbehälter nehmen.
- Zur Sicherstellung eines möglichst großen Abstandes Präparate nur am oberen Ende des Metallhalters anfassen.

#### Versuchsbeschreibung

Der Szintillationszähler wird energiekalibriert. Die energetische Verteilung der in einem Aluminiumstreuer gestreuten  $\gamma$ -Quanten wird für verschiedene Winkel zwischen Quelle und Detektor aufgenommen. Daraus folgt die quantitative Bestätigung des Compton-Effektes.

#### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	VKA-Box	524 058

1 Mischpräparat  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  559 84 oder aus 559 83



1	Gerätesatz Comptonstreuung	559 800
1	Cs-137-Präparat, 3,7 MBq	559 809
1	Szintillationszähler	559 901
1	Detektor-Ausgangsstufe	559 912
1	Hochspannungsnetzgerät 1,5 kV	521 68

#### 1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Ausgangsstufe des Szintillationszählers wird mit der VKA-Box und dem Hochspannungsnetzgerät verbunden. Die Experimentierplatte aus dem Gerätesatz Comptonstreuung wird ausgelegt und die Bleiabschirmungen entsprechend aufgestellt.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Zunächst wird der Szintillationszähler energiekalibriert, dazu das Mischpräparat in den Probenhalter des Gerätesatzes Comptonstreuung schieben und auf der 0° Markierung ausrichten, keinen Aluminiumstreuer aufstellen
- Spektrum aufnehmen (F9) und mittels der Linien bei 662 keV und 59,5 keV eine Energiekalibrierung durchführen
- Mischpräparat gegen das Cs-137 Präparat austauschen, das Präparat bei 10° aufstellen und den Aluminiumstreuer aufstellen. Die Zusatzabschirmung in die direkte Sichtlinie zwischen Präparat und Detektor stellen
- Spektrum aufnehmen (F9), dann Aluminiumstreuer entfernen und erneut ein Spektrum aufnehmen
- Die Differenz beider Spektren (mit und ohne Aluminiumstreuer) ergibt das Streuspektrum
- Die Messung bei verschiedenen Winkeln des Präparates wiederholen, jeweils ein Spektrum mit Aluminiumstreuer und ein Spektrum ohne subtrahieren. Beim Aufbau die Zusatzabschirmung entsprechend verschieben, so dass die direkte Sichtlinie Präparat Detektor blockiert ist

#### **Auswertung**

Aus den Streuspektren (Differenz mit und ohne Aluminiumstreuer) wird die Energie der gestreuten  $\gamma$ -Quanten bestimmt und über dem zugehörigen Winkel aufgetragen und mit dem theoretischen Wert


$$E_{\gamma}' = E_{\gamma} / \left( 1 + \frac{E_{\gamma}}{m_0 c^2} (1 - \cos \Theta) \right)$$

verglichen.

Alternativ kann auch eine Freie Anpassung versucht werden.



# Aufnahme des komplexen $\gamma$ -Spektrums von Ra-226 und seinen Zerfallsprodukten

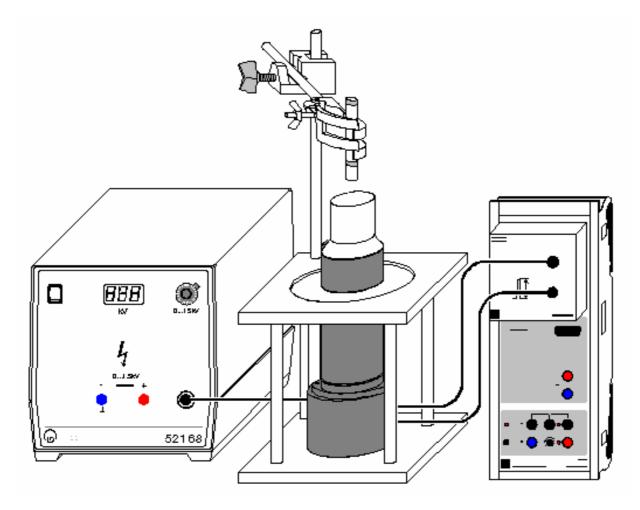



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

#### **Sicherheitshinweis**

Beim Umgang mit radioaktiven Präparaten sind länderspezifische Auflagen zu beachten, in der Bundesrepublik Deutschland z. B. die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV). Die im Versuch verwandten radioaktiven Stoffe sind nach StrlSchV für den Unterricht an Schulen bauartzugelassen. Da sie ionisierende Strahlung erzeugen, müssen beim Umgang dennoch folgende Sicherheitsregeln befolgt werden:

- Präparate vor dem Zugriff Unbefugter schützen.
- Vor Benutzung Präparate auf Unversehrtheit überprüfen.
- Zur **Abschirmung** Präparate im Schutzbehälter aufbewahren.
- Zur Gewährleistung einer **möglichst kurzen Expositionszeit** und einer **möglichst geringen Aktivität** Präparate nur zur Durchführung des Experiments aus dem Schutzbehälter nehmen.
- Zur Sicherstellung eines **möglichst großen Abstandes** Präparate nur am oberen Ende des Metallhalters anfassen.

#### Versuchsbeschreibung

Das komplexe Spektrum von Ra-226 und seinen Folgeprodukten wird aufgenommen.



1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	VKA-Box	524 058
1	Mischpräparat $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$	559 84 oder aus 559 83
1	Ra-226-Präparat	559 430
1	Szintillationszähler	559 901
1	Detektor-Ausgangsstufe	559 912
1	Hochspannungsnetzgerät 1,5 kV	521 68
1	Szintillationszähler-Abschirmung	559 89
1	Sockel zum Szintillationszähler	559 891
1	Stativstange, 47 cm	300 42
1	Leybold-Muffe	301 01
1	Universalklemme, 080 mm	666 555
1	PC ab Windows 95/98/NT	

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Ausgangsstufe des Szintillationszählers wird mit der VKA-Box und dem Hochspannungsnetzgerät verbunden. Das Präparat wird mittels Stativmaterial über dem Szintillationszähler platziert, so dass es sich einige Zentimeter oberhalb des Detektors befindet.

# Versuchsdurchführung


- Einstellungen laden
- Zur Energiekalibrierung das Mischpräparat über dem Detektor anbringen, Spektrum aufnehmen (**F9**) und anhand der Linien bei 662 keV und 59,5 keV kalibrieren.
- Das Mischpräparat entfernen und das Ra-226 Präparat anbringen. Spektrum aufnehmen

# **Auswertung**

Anhand der Literaturwerte oder auch von Internetadressen wie <a href="http://nucleardata.nuclear.lu.se/">http://nucleardata.nuclear.lu.se/</a> nucleardata/toi/ werden die gemessenen Linien den einzelnen Isotopen der Radium-Zerfallskette zugeordnet.



# Aufnahme des komplexen γ-Spektrums eines Glühstrumpfes

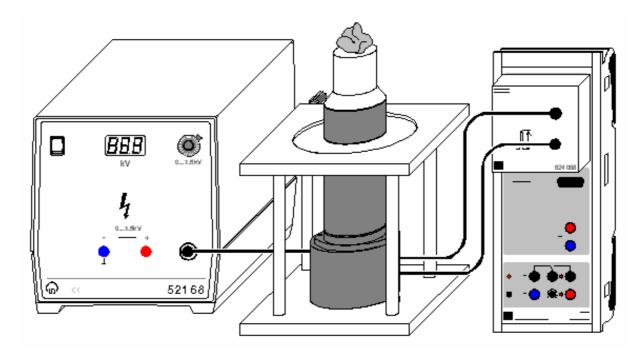



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

# Sicherheitshinweis

Beim Umgang mit radioaktiven Präparaten sind länderspezifische Auflagen zu beachten, in der Bundesrepublik Deutschland z. B. die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV). Die im Versuch verwandten radioaktiven Stoffe sind nach StrlSchV für den Unterricht an Schulen bauartzugelassen. Da sie ionisierende Strahlung erzeugen, müssen beim Umgang dennoch folgende Sicherheitsregeln befolgt werden:

- Präparate vor dem Zugriff Unbefugter schützen.
- Vor Benutzung Präparate auf **Unversehrtheit** überprüfen.
- Zur **Abschirmung** Präparate im Schutzbehälter aufbewahren.
- Zur Gewährleistung einer **möglichst kurzen Expositionszeit** und einer **möglichst geringen Aktivität** Präparate nur zur Durchführung des Experiments aus dem Schutzbehälter nehmen.
- Zur Sicherstellung eines möglichst großen Abstandes Präparate nur am oberen Ende des Metallhalters anfassen.

#### Versuchsbeschreibung

Das komplexe  $\gamma$ -Spektrum von Th-232 und seinen Zerfallsprodukten wird aufgenommen. Die Verwendung radioaktiver Substanzen in älteren Haushaltswaren wird nachgewiesen.

### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	VKA-Box	524 058

1 Mischpräparat  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  559 84 oder aus 559 83

1 Glühstrumpf aus 588 855
1 Szintillationszähler 559 901
1 Detektor-Ausgangsstufe 559 912
1 Hochspannungsnetzgerät 1,5 kV 521 68



1	Szintillationszähler-Abschirmung	559 89
1	Sockel zum Szintillationszähler	559 891
1	Stativstange, 47 cm	300 42
1	Leybold-Muffe	301 01
1	Universalklemme, 080 mm	666 555

1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Ausgangsstufe des Szintillationszählers wird mit der VKA-Box und dem Hochspannungsnetzgerät verbunden. Das Präparat wird mittels Stativmaterial über dem Szintillationszähler platziert oder einfach auf den Detektor gelegt.

# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Zur Energiekalibrierung das Mischpräparat über dem Detektor anbringen, Spektrum aufnehmen (F9)
  und anhand der Linien bei 662 keV und 59,5 keV kalibrieren.
- Das Mischpräparat entfernen und den Glühstrumpf (Th-232) anbringen. Spektrum aufnehmen

#### **Auswertung**

Anhand der Literaturwerte oder auch von Internetadressen wie <a href="http://nucleardata.nuclear.lu.se/">http://nucleardata.nuclear.lu.se/</a> nucleardata/toi/ werden die gemessenen Linien den einzelnen Isotopen der Thorium-Zerfallskette zugeordnet.

#### Hinweise


Neuere Glühstrümpfe enthalten kein Thorium mehr, sondern Yttrium.

Im Laufe der ersten Jahre nach Herstellung ändert sich die Intensität einzelner Linien, da sich das radioaktive Gleichgewicht neu einstellen muss. Insbesondere verhält sich die Intensität der Linien bei 338 und 911 keV (Zerfall von Ac-228 zu Th-228) anders als die restlichen Linien. Auch die  $K\alpha$ -Linien werden dadurch beeinflusst.

Aufgrund der Staubentwicklung möglichst keine bereits in einer Lampe entzündeten Glühstrümpfe verwenden.



# Koinzidenz und $\gamma$ - $\gamma$ -Winkelkorrelation beim Zerfall von Positronen

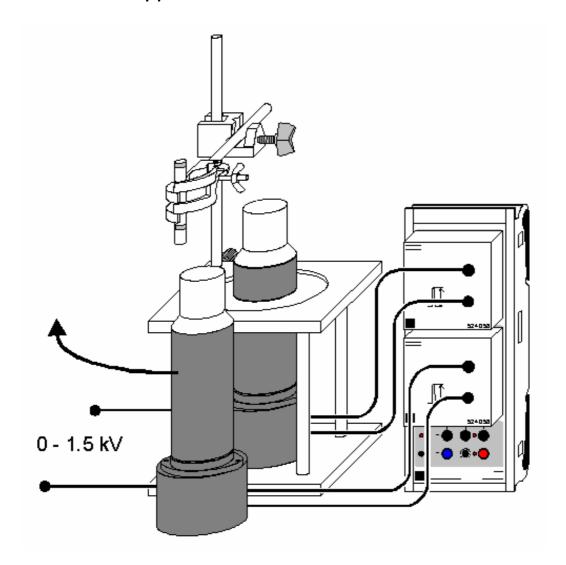

#### ■ Beispiel laden

#### **Sicherheitshinweis**

Beim Umgang mit radioaktiven Präparaten sind länderspezifische Auflagen zu beachten, in der Bundesrepublik Deutschland z. B. die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV). Die im Versuch verwandten radioaktiven Stoffe sind nach StrlSchV für den Unterricht an Schulen bauartzugelassen. Da sie ionisierende Strahlung erzeugen, müssen beim Umgang dennoch folgende Sicherheitsregeln befolgt werden:

- Präparate vor dem Zugriff Unbefugter schützen.
- Vor Benutzung Präparate auf Unversehrtheit überprüfen.
- Zur **Abschirmung** Präparate im Schutzbehälter aufbewahren.
- Zur Gewährleistung einer **möglichst kurzen Expositionszeit** und einer **möglichst geringen Aktivität** Präparate nur zur Durchführung des Experiments aus dem Schutzbehälter nehmen.
- Zur Sicherstellung eines möglichst großen Abstandes Präparate nur am oberen Ende des Metallhalters anfassen.

#### Versuchsbeschreibung

Die räumliche Koinzidenz der beiden  $\gamma$ -Quanten einer Elektron-Positron Paarvernichtung wird demonstriert. Die Impulserhaltung erfordert eine Emission der beiden Quanten unter 180°, die anschaulich gezeigt wird. Die selektive Messung eines Koinzidenz-Spektrums bringt eine Unterdrückung nicht korrelierter Linien.



1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
2	VKA-Box	524 058
1	Satz Radioaktive Präparate	559 83
2	Szintillationszähler	559 901
	Detektor-Ausgangsstufen	559 912
2	Hochspannungsnetzgeräte 1,5 kV	521 68
2	Sockel zum Szintillationszähler	559 891
1	Stativstange, 47 cm	300 42
1	Leybold-Muffe	301 01
1	Universalklemme, 080 mm	666 555
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Ausgangsstufen der Szintillationszähler werden mit den VKA-Boxen und dem Hochspannungsnetzgerät / den Hochspannungsnetzgeräten verbunden. Beide VKA-Boxen müssen auf demselben CASSY stecken. Das Präparat wird mittels Stativmaterial neben einem Szintillationszähler platziert, so dass der andere Detektoren darum herum bewegt werden kann, um so verschiedene Winkel Detektor 1 – Präparat – Detektor 2 einstellen zu können.

### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Zunächst mit jeweils einem Detektor das normale Na-22 Spektrum aufnehmen. Einen der beiden Detektoren kalibrieren.
- Koinzidenz-Modus auswählen, dabei das Spektrum mit dem kalibrierten Detektor messen, das Koinzidenzfenster des anderen Detektors wird auf die 511 keV Linie eingestellt.
- Den beweglichen Detektor so stellen, dass das Präparat zwischen den Detektoren steht. Koinzidenzspektrum aufnehmen
- Den beweglichen Detektor so stellen, dass er senkrecht zur Verbindungslinie Präparat anderer Detektor steht. Koinzidenzspektrum aufnehmen.
- Eventuell Koinzidenzspektren bei Zwischenwinkeln aufnehmen
- Cs-137 Präparat gemeinsam mit dem Na-22 Präparat zwischen den Detektoren befestigen, den beweglichen Detektor so stellen, dass die Präparate zwischen den Detektoren stehen. Koinzidenzspektrum aufnehmen
- normales VKA-Spektrum in dieser Anordnung aufnehmen
- Das Cs-137 Präparat wieder entfernen, das Koinzidenzfenster auf die 1275 keV Linie einstellen und ein Koinzidenzspektrum unter 180° und unter 90° aufnehmen.

#### Auswertung


Das normale Na-22 Spektrum besteht aus einer Linie bei 1275 keV und der Paarvernichtungs-Strahlung bei 511 keV. Die beiden 511 keV Quanten sind zeitlich und räumlich (Emission unter 180°) korreliert, die 1275 keV Quanten sind zeitlich mit den 511 keV Quanten korreliert, da die Verzögerung von 3,7 ps in diesem Aufbau nicht detektiert werden kann. Räumlich ist die Emission nicht korreliert.

Im normalen VKA-Spektrum sind beide Linien sichtbar, unter 180° Koinzidenz ist die 511 keV Linie deutlich hervorgehoben, da die anderen Bestandteile des Spektrums (1275 keV Linie, Compton-Verteilung) zwar zeitlich, aber nicht räumlich korreliert sind und so gegenüber der räumlich korrelierten 511 keV Linie um den Raumwinkel des zweiten Detektors abgeschwächt werden. Die absolute Zählrate der 511 keV Linie sinkt dabei entsprechend der Nachweiswahrscheinlichkeit des zweiten Detektors.

Dreht man den Detektor nun aus der 180° Richtung heraus, so verschwindet die 511 keV Linie, während die räumlich unkorrelierten Bestandteile erhalten bleiben.

Um die Unterdrückung zeitlich nicht korrelierter Quanten zu demonstrieren, werden zwei Präparate gleichzeitig verwendet. Das Cs-137 liefert dabei einen nicht korrelierten Untergrund, der in Koinzidenz nur aufgrund zufälliger Koinzidenzen sichtbar ist, ohne Koinzidenz-Messung aber deutlich sichtbar ist.

Bei Messungen in Koinzidenz zur 1275 keV Linie entfällt die räumliche Koinzidenz, die Spektren zu

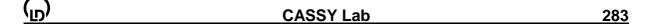


verschiedenen Winkeln sehen gleich aus. Da es nur ein 1275 keV  $\gamma$ -Quant pro Zerfall gibt, ist in Koinzidenz auch keine 1275 keV Linie zu beobachten.

# **Hinweis**

Das Zeitfenster für Koinzidenzen ist fest vorgegeben und beträgt 4  $\mu s$ .



# Messungen mit dem Einkanal-Analysator

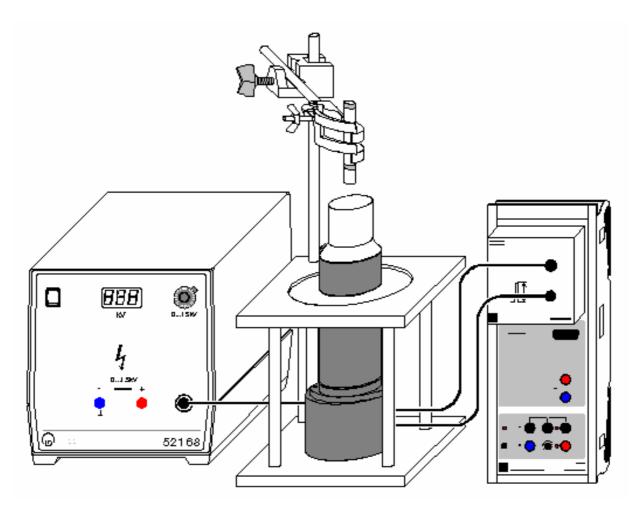



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

# **Sicherheitshinweis**

Beim Umgang mit radioaktiven Präparaten sind länderspezifische Auflagen zu beachten, in der Bundesrepublik Deutschland z. B. die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV). Die im Versuch verwandten radioaktiven Stoffe sind nach StrlSchV für den Unterricht an Schulen bauartzugelassen. Da sie ionisierende Strahlung erzeugen, müssen beim Umgang dennoch folgende Sicherheitsregeln befolgt werden:

- Präparate vor dem Zugriff Unbefugter schützen.
- Vor Benutzung Präparate auf **Unversehrtheit** überprüfen.
- Zur **Abschirmung** Präparate im Schutzbehälter aufbewahren.
- Zur Gewährleistung einer möglichst kurzen Expositionszeit und einer möglichst geringen Aktivität Präparate nur zur Durchführung des Experiments aus dem Schutzbehälter nehmen.
- Zur Sicherstellung eines möglichst großen Abstandes Präparate nur am oberen Ende des Metallhalters anfassen.

# Versuchsbeschreibung

Um den Zeitvorteil bei Messungen mit einem Vielkanal-Analysator zu demonstrieren wird eine Messung im VKA-Modus durchgeführt und zum Vergleich eine im Einkanal-Modus.



1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	VKA-Box	524 058
1	Mischpräparat $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$	559 84 oder aus 559 83
1	Szintillationszähler	559 901
1	Detektor-Ausgangsstufe	559 912
1	Hochspannungsnetzgerät 1,5 kV	521 68
1	Sockel zum Szintillationszähler	559 891
1	Stativstange, 47 cm	300 42
1	Leybold-Muffe	301 01
1	Universalklemme, 080 mm	666 555
1	PC ab Windows 95/98/NT	

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Ausgangsstufe des Szintillationszählers wird mit der VKA-Box und dem Hochspannungsnetzgerät verbunden. Das Präparat wird mittels Stativmaterial über dem Szintillationszähler platziert, so dass es sich einige Zentimeter oberhalb des Detektors befindet.


## Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Messung im VKA-Modus starten (F9)
- Messung im Einkanal-Modus starten, dabei beispielsweise mit gleicher Gesamtmesszeit arbeiten, oder mit gleicher Messzeit pro Punkt.

# **Auswertung**

Die parallele Messung aller Kanäle zeigt deutliche Zeitvorteile gegenüber der sequentiellen Messung einzelner Kanäle. Dieser Zeitvorteil wandelt sich bei gleicher Messzeit in einen Gewinn an Auflösung oder Signal/Rausch-Verhältnis.

# Elektrische Leitung in Festkörpern

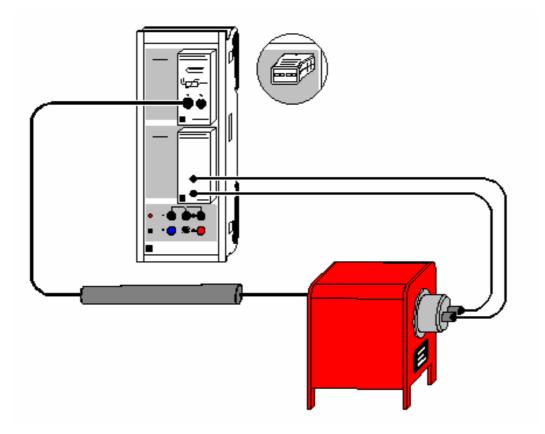



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

- Beispiel laden (Temperatur-Box)
- Beispiel laden (NiCr-Ni-Adapter S)

# Versuchsbeschreibung

Ein einfacher Test für Modelle zur elektrischen Leitfähigkeit von Leitern und Halbleitern ist die Untersuchung der Temperaturabhängigkeit des Widerstands R. In elektrischen Leitern nimmt R bei steigender Temperatur zu, da die Stöße der quasi-freien Elektronen aus dem Leitungsband mit den Atomrümpfen des Leiters eine immer größere Rolle spielen. In Halbleitern dagegen nimmt der Widerstand mit steigender Temperatur ab, weil immer mehr Elektronen aus dem Valenzband in das Leitungsband gelangen und zur Leitfähigkeit beitragen.

Im Versuch werden die Widerstandswerte eines Edelmetallwiderstands und eines Halbleiterwiderstands in Abhängigkeit von der Temperatur gemessen. Für den Edelmetallwiderstand wird im untersuchten Temperaturbereich in guter Näherung der Zusammenhang

R = R0 · (1 +  $\alpha$ · $\vartheta$ ) (R0: Widerstand bei  $\vartheta$  = 0 °C)

bestätigt. Für den Halbleiter ergibt die Auswertung eine Abhängigkeit der Form

 $R \sim e^{\Lambda}(\Delta E/2kT)$  (k = 1,38·10^-23 J/K: Boltzmann-Konstante)

mit dem Bandabstand  $\Delta E$ .

## **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Stromauellen-Box	524 031

	Temperatur-Box Temperaturfühler NiCr-Ni	524 045 666 193
od	er	
1	NiCr-Ni-Adapter S	524 0673
1	Temperaturfühler NiCr-Ni, Type K	529 676
1	Edelmetallwiderstand	586 80
1	Halbleiterwiderstand	586 82
1	Elektrischer Rohrofen, 230 V	555 81
1	Sicherheitsanschlussdose	502 061
2	Kabel, 100 cm, schwarz	500 444
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Temperatur des Fühlers im Rohrofen wird von der Temperatur-Box auf Eingang A des Sensor-CASSYs gemessen. Dabei die Messspitze so in die rückwärtige Bohrung des Ofens einführen, dass sich die Messspitze in unmittelbarer Nähe des Widerstandselements befindet. Der elektrische Widerstand wird von der Stromquellen-Box auf Eingang B erfasst.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden (Temperatur-Box)
- Einstellungen laden (NiCr-Ni-Adapter S)
- Messung mit F9 starten (alle 5 K Temperaturerhöhung wird ein Messwertpaar aufgenommen)
- Heizung des Rohrofens einschalten
- Nach Erreichen einer Temperatur von max. 470 K (ca. 200 °C) Messung mit F9 stoppen
- Rohrofen wieder ausschalten und Widerstand herausnehmen
- Nach Abkühlung des Rohrofens kann die Messung mit einem anderen Widerstand wiederholt werden


#### Auswertung


Bei Verwendung des Edelmetallwiderstands (Platin) ergibt sich eine lineare Widerstandserhöhung bei steigender Temperatur. Der Temperaturkoeffizient  $\alpha$  des Widerstands lässt sich leicht aus einer Geradenanpassung bestimmen. Im Beispiel ergibt sich eine Widerstandserhöhung von 0,407  $\Omega$ /K und ein Widerstand von 100  $\Omega$  bei 0 °C, also  $\alpha$  = 0,00407 /K. Dies deckt sich gut mit dem Literaturwert  $\alpha$  = 0,00392 /K für Platin.

Der Halbleiterwiderstand nimmt bei steigender Temperatur nicht linear ab. Eine Exponentialanpassung in der 1/T-Darstellung (mit der Maus anklicken) bestätigt den oben angegebenen Zusammenhang  $R \sim e^{(\Delta E/2kT)}$  für höhere Temperaturen T. Im Beispiel ergibt sich dort für den verwendeten Halbleiter  $2k/\Delta E = 0,000368$  /K, also  $\Delta E = 7,5\cdot10^{-20}$  J = 0,47 eV (1 eV = 1,602·10^-19 J).



# **Hysterese von Trafoeisen**

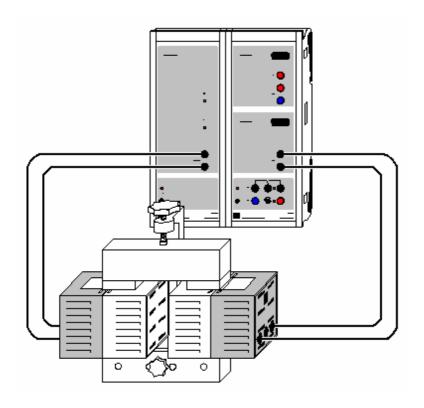

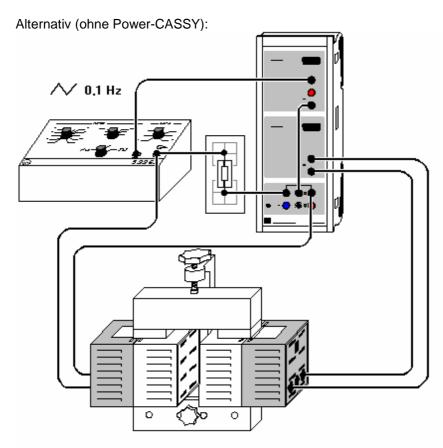

- Beispiel laden (mit Power-CASSY)■ Beispiel laden (ohne Power-CASSY)

### Versuchsbeschreibung

In einem Transformatorkern (Ferromagnet) ist das magnetische Feld

 $H = N1/L \cdot I$ 

proportional zum Spulenstrom I und der effektiven Windungsdichte N1/L der Primärspule. Die erzeugte magnetische Flussdichte oder magnetische Induktion

```
B = \mu r \cdot \mu 0 \cdot H (mit \mu 0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/Am})
```

ist aber nicht proportional zu H. Vielmehr erreicht sie bei steigendem Magnetfeld H einen Sättigungswert Bs. Die Permeabilitätszahl  $\mu$ r des Ferromagneten hängt von der Magnetfeldstärke H und außerdem von der magnetischen Vorbehandlung des Ferromagneten ab. Bei einem entmagnetisierten Ferromagneten ist für H=0 A/m auch die magnetische Feldstärke B = 0 T. Normalerweise behält ein Ferromagnet bei H = 0 A/m aber noch eine restliche magnetische Flussdichte B ungleich 0 T (Remanenz).

Es ist daher üblich, die magnetische Induktion B in einer Hysteresekurve als Funktion steigender und fallender Feldstärke H darzustellen. Die Hysteresekurve unterscheidet sich von der sogenannten Neukurve, die im Ursprung des Koordinatensystems beginnt und nur bei vollständig entmagnetisiertem Material zu messen ist (H = 0 A/m, B = 0 T).

Im vorliegenden Beispiel werden H und B nicht direkt gemessen, sondern es werden statt dessen die dazu proportionalen Größen Primärstrom I = L/N1·H und magnetischer Fluss  $\Phi$  = N2·A·B durch die Sekundärspule (N2: Windungszahl der Sekundärspule; A: Querschnitt des Ferromagneten) verwendet. Der magnetische Fluss  $\Phi$  wird als Integral der in der Sekundärspule induzierten Spannung U berechnet.

#### **Benötigte Geräte**

1	Power-CASSY	524 011
1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	U-Kern mit Joch	562 11
1	Spannvorrichtung	562 12
2	Spulen mit 500 Windungen	562 14
4	Kabel, 100 cm, schwarz	500 444
1	PC ab Windows 95/98/NT	

### **Alternativ (ohne Power-CASSY)**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	U-Kern mit Joch	562 11
1	Spannvorrichtung	562 12
2	Spulen mit 500 Windungen	562 14
1	Funktionsgenerator S12	522 621
1	STE Widerstand 1 $\Omega$ , 2 W	577 19
1	Steckplattensegment	576 71
1	Kabel, 50 cm, schwarz	500 424
7	Kabel, 100 cm, schwarz	500 444
1	PC ab Windows 95/98/NT	

Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Der Strom der Primärspule des Transformators liefert das Power-CASSY. Der magnetische Fluss  $\Phi$  wird aus der Induktionsspannung U der Sekundärspule, die von Eingang B des Sensor-CASSYs gemessen wird, berechnet.

Alternativ kann das Experiment auch ohne Power-CASSY unter Verwendung des Funktionsgenerators S12 durchgeführt werden. Dieser ist auf Dreieck, Frequenz etwa 0,1 Hz und Amplitude etwa 2 V einzustellen. Zur Aufnahme der Neukurve wird auf I = 0 A getriggert. Um diesen Zeitpunkt exakt zu erwischen, wird der Strom vor Aufnahme der Kurve vom Relais am Transformator vorbeigeleitet und fließt durch einen Widerstand von 1  $\Omega$ .



#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden (mit Power-CASSY)
- Einstellungen laden (ohne Power-CASSY)
- Evtl. Offset der am Eingang B korrigieren, dazu in Einstellungen UB **Korrigieren** wählen, als ersten Sollwert 0 V eingeben und **Offset korrigieren**
- Eisenkern entmagnetisieren, z. B. durch mehrere kräftige Schläge mit der Stirnfläche des Jochs auf die beiden Stirnflächen des U-Kerns
- Messung mit F9 starten
- Messung nach einer Periode der Hysteresekurve oder bei  $\Phi = 0$  Vs (dann entfällt nächstes Mal das Entmagnetisieren) wieder mit **F9** stoppen
- Wenn die Hysteresekurve im zweiten und vierten Quadranten verläuft, hilft ein Verpolen der Anschlüsse an einer der beiden Spulen
- Wenn während der Messung das Anzeigeinstrument UB übersteuert wird (blinkende Anzeige), in Einstellungen UB den Messbereich vergrößern

#### **Auswertung**

Da die Fläche einer Hystereseschleife B(H)

$$\int B \cdot dH = \frac{E}{V}$$

gerade dem Energieverlust E bei einer Ummagnetisierung pro Volumen V des ummagnetisierten Stoffes entspricht, ergibt die umschlossene Fläche im Diagramm  $\Phi(I)$ 

$$\int \Phi \cdot dI = \int N_2 A B \cdot \frac{L}{N_1} \cdot dH$$
$$= \frac{N_2}{N_1} V \int B \cdot dH = \frac{N_2}{N_1} E$$

für N1=N2 genau den Energieverlust E bei der Ummagnetisierung.

In Diagramm kann dieser Energieverlust durch die "Peakintegration" einer Hystereseschleife berechnet werden.

### Versuchsbeispiele Chemie

Die Versuchsbeispiele helfen Ihnen beim Einsatz von CASSY Lab. Gegebenenfalls ist die entsprechende Versuchsnummer mit angegeben. Die Messdaten oder Einstellungen der Beispiele können direkt in CASSY Lab geladen werden. Klicken Sie einfach auf die —-Zeichen in den Beschreibungen. Neue Beispiele sind mit einem roten • gekennzeichnet.

#### **Anorganische Chemie**

•	Der Bunsenbrenner
•	Dei Dunsenbienner

- C1.3.1.6a pH-Messung an Lebensmitteln
- C1.3.1.6b pH-Messung an Reinigungsmitteln
- C1.3.1.7 Bestimmung des pKa-Wertes von Essigsäure
- C1.3.1.8 Titration von Phosphorsäure

### **Analytische Chemie**

• C3.1.1.2	Schmelz- und Erstarrungspunkt von Palmitinsäure
•	Unterkühlen einer Schmelze von Natriumthiosulfat
• C3.1.4.5	Molmassenbestimmung durch Gefrierpunktserniedrigung
•	Titration von Salzsäure mit Natronlauge (pH und Leitfähigkeit)
• C3.3.7.2	Titration von Haushaltsessig
•	Titration von Essigsäure mit Natronlauge (pH und Leitfähigkeit)
•	Automatische Titration von NH3 mit NaH2PO4 (Motorbürette)
•	Automatische Titration (Tropfenzähler)
• C3.4.4.1	Gaschromatographie (Trennung von Alkanen aus Feuerzeuggas
• C3.4.4.2	Gaschromatographie (Trennung von Alkoholen)
• C3.4.4.3	Gaschromatographie (Trennung von Luft)
• C3.5.2.1	Aufnahme des Spektrums einer Rohchlorophyll-Lösung
	(mit dem Spektralphotometer 667 3491)

#### **Physikalische Chemie**

- Reaktion von Marmor mit Salzsäure (Carbonatbestimmung)
- Harnstoffspaltung durch Urease (Reaktion 0. Ordnung)
- C4.3.2.3 Hydrolyse von tertiärem Butylchlorid (Bestimmung der Reaktionsordnung)
- Reaktion von Marmor mit Salzsäure (Bestimmung der Reaktionsordnung)
- C4.3.2.4 Alkalische Hydrolyse von Essigsäureethylester (Bestimmung der Reaktionsordnung)
- Alkalische Hydrolyse von Essigsäureethylester (Bestimmung der Aktivierungsparameter)
- C4.4.3.5 Differenzthermoanalyse von Kupfersulfat
- Herstellung einer Kältemischung
- C4.4.4.5 Bestimmung der Schmelzenthalpie von Eis
- C4.5.1.1-4 Gasgesetze
- C4.6.1.1 Leitfähigkeitsbestimmung verschiedener Lösungen
- C4.6.1.4 Bestimmung der Grenzleitfähigkeit von Natriumchlorid
- C4.6.1.5 Bestimmung der Dissoziationskonstanten von Essigsäure

#### **Technische Chemie**


C5.2.4.2 Auftrennung eines Zweikomponentengemisches in der Rektifikationsapparatur CE2

#### Umwelttechnik


- Absorption von UV-Strahlung
- C6.1.4.3 Ozonlochsimulation
- C6.1.4.4 Treibhauswirkung von CO2



### Der Bunsenbrenner

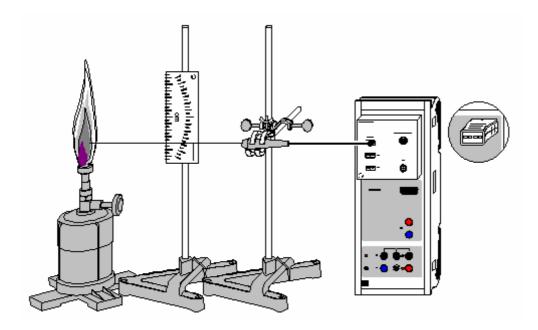

### Alternativ mit Temperatur-Box:

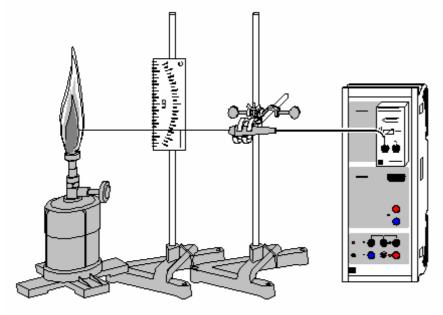



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

- Beispiel laden (Chemie-Box oder NiCr-Ni-Adapter S)
- Beispiel laden (Temperatur-Box)

### **Sicherheitshinweis**

- Verbrennungsgefahr. Um versehentliches Entzünden zu vermeiden, lange Haare zurückbinden und Schals ablegen.
- Wenn die Flamme wegen zu starker Luftzufuhr in den Gasbrenner zurückschlägt, sofort die Gaszufuhr schließen.
- Gasbrenner bei kurzzeitigem Nichtgebrauch auf leuchtende Flamme stellen und kleiner drehen.
- Gasbrenner nicht am Tischrand aufstellen.



#### Versuchsbeschreibung

Ein besonders häufig benutztes Gerät im Chemielabor ist der Gasbrenner. Dieser besteht aus einem Brennerrohr mit regelbarer Luftzufuhr, in das durch eine Düse Gas einströmen kann. Je nach Modell wird die Luftzufuhr durch eine schraubbare Scheibe oder durch andere einstellbare Öffnungen geregelt. Schließt man die Luftzufuhr, so erhält man eine gelb bis orange leuchtende Flamme mit Temperaturen bis 600 °C. Öffnet man die Luftzufuhr, verbrennt das Gas-Luft-Gemisch mit einer rauschenden, bläulichen, nicht-leuchtenden und wesentlich heißeren Flamme. Diese lässt sich gut mit einem NiCr-Ni-Temperaturfühler auf ihre unterschiedlichen, von der Höhe über der Brennerspitze abhängigen Temperaturbereiche untersuchen.

#### Benötigte Geräte (mit Chemie-Box oder NiCr-Ni-Adapter S)

1	Sensor-CASSY	524 010		
1	CASSY Lab	524 200		
1	Chemie-Box oder NiCr-Ni-Adapter S	524 067(3)		
1	Temperaturfühler NiCr-Ni, Type K	529 676		
1	Gasbrenner, z.B.	666 714		
2	Stativfüße, V-förmig	300 02		
2	Stativstangen, 47 cm	300 42		
1	Doppelskala	340 82		
1	Muffenblock	301 25		
2	Haltebügel, steckbar	314 04		
1	Kreuzmuffe	666 543		
1	Kleinklemme	666 551		
Q+	Streichhölzer oder Feuerzeug			

#### Streichhölzer oder Feuerzeug

#### Benötigte Geräte (alternativ mit Temperatur-Box)

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Temperatur-Box	524 045
1	Temperaturfühler NiCr-Ni, DIN-Buchse	666 193
1	Gasbrenner, z.B.	666 714
2	Stativfüße, V-förmig	300 02
2	Stativstangen, 47 cm	300 42
1	Doppelskala	340 82
1	Muffenblock	301 25
2	Haltebügel, steckbar	314 04
1	Kreuzmuffe	666 543
1	Kleinklemme	666 551

#### Streichhölzer oder Feuerzeug

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Chemie-Box (oder alternativ die Temperatur-Box) wird an Eingang A des Sensor-CASSY angeschlossen und der Temperaturfühler in den Eingang T1 gesteckt.

Aus dem Stativmaterial werden zwei Stative zusammengebaut: An dem einen wird mit dem Muffenblock und den Haltebügeln die Doppelskala so angebracht, dass ihre Unterkante mit der Spitze des Gasbrenners auf einer Höhe ist. An dem anderen Stativ wird der Temperaturfühler an der Kleinklemme genau waagerecht ausgerichtet.

Die beiden Stative werden so um den Gasbrenner angeordnet, dass die Messspitze des Temperaturfühlers auf der Zentimeterskala die Höhe über der Brennerspitze anzeigt und sich gleichzeitig die äußerste Spitze des Temperaturfühlers genau über der Öffnung des Brenners befindet. Bei der Aufstellung der Stative ist darauf zu achten, dass das Thermoelement ohne Verbrennungsgefahr in der Höhe verstellt werden kann.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden (Chemie-Box oder NiCr-Ni-Adapter S)
- Einstellungen laden (Temperatur-Box)

Hinweis: Mit NiCr-Ni-Temperaturfühlern können Temperaturen bis 1150 °C (Temperaturfühler zur



Chemie-Box) bzw. 1100 °C (Temperaturfühler zur Temperatur-Box) gemessen werden. Diesen Messbereich nicht überschreiten.

- Gasbrenner mit leuchtender Flamme (Luftzufuhr geschlossen) anzünden, dann Luftzufuhr öffnen, bis die rauschende Flamme eingestellt ist.
- Temperaturfühler am oberen Ende der Messskala fixieren. Darauf achten, dass sich die Spitze genau in der Mitte der Flamme befindet.
  - Auf einen annähernd stabilen Messwert warten (±5 °C). Den Messwert mit **F9** oder der Schaltfläche aufnehmen. Der Momentanwert der Temperatur kann über das Anzeigeinstrument (erreichbar über die Schaltfläche  $\vartheta$ A11 am oberen Bildschirmrand) formatfüllend auf dem Bildschirm angezeigt werden, so dass auch entfernter sitzende Personen die Temperatur ablesen können.
- Durch Anklicken der entsprechenden Tabellenzelle die zum Messwert gehörende Höhe über der Brennerspitze per Tastatur eintragen.
- Erreichen eines neuen Farbbereichs der Flamme (äußerer Kegel: schwach bläulich, innerer Kegel: hellblau) im Diagramm durch die Tastenkombination Alt+S und anschließendes Positionieren mit der Maus mit einer senkrechten Linie markieren. Mit Alt+T kann die Markierung mit einem Text beschriftet werden.
- Temperaturfühler 1 cm tiefer stellen und Messablauf wiederholen.
- Bei Erreichen des hellblauen Flammenbereichs Messabstände von 0,5 cm wählen.

#### **Auswertung**


Erwartungsgemäß ist die Temperatur in größerer Höhe über der Brennerflamme geringer als mitten im Flammenbereich. Jedoch erzeugt die hellblaue Flamme direkt über der Austrittsöffnung nur wesentlich geringere Temperaturen als die schwach bläuliche einige Zentimeter darüber. Daraus kann geschlossen werden, dass erst oberhalb des hellblauen Flammenbereichs das verwendete Gas vollständig verbrannt ist.

Beim chemischen Experimentieren lassen sich die verschieden heißen Bereiche der Brennerflamme gut ausnutzen. Sind besonders hohe Temperaturen gewünscht, wählt man den Bereich knapp oberhalb der hellblauen Flamme zum Heizen, möchte man weniger stark erhitzen, hält man größeren Abstand von der Brennerspitze.


295



### pH-Messung an Lebensmitteln

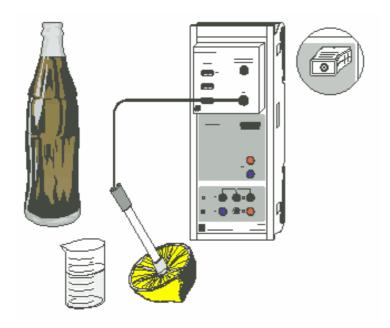

### Alternativ mit pH-Box:

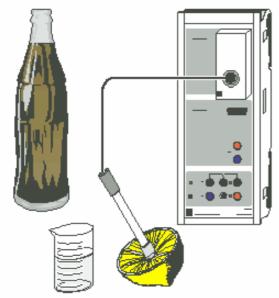



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

- Beispiel laden (Chemie-Box oder pH-Adapter S)
- Beispiel laden (pH-Box)

### Versuchsbeschreibung

Im vorliegenden Versuch werden Lebensmittel, vor allem Getränke, auf ihren pH-Wert untersucht. Der pH-Wert ist ein Maß für die Säure- bzw. Basenstärke einer Lösung. Er ist definiert als negativ-dekadischer Logarithmus der Konzentration der H3O<sup>+</sup>-Ionen in einer wässrigen Lösung:

$$pH = - \lg c(H3O^{+})$$

Die Konzentration der H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>-Ionen ist vom Autoprotolyse-Gleichgewicht des Wassers abhängig:



$$H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$$

In verdünnten Lösungen ist dieses Gleichgewicht unabhängig von der Konzentration der Wassermoleküle; die Gleichgewichtskonstante beträgt bei 25 °C:

$$K = c(H3O^{+}) \cdot c(OH^{-}) = 10^{-14} \text{ mol}^{2}/l^{2}$$

Die Säureionenkonzentration und die Hydroxidionenkonzentration in einer Lösung hängen also über das Protolyse-Gleichgewicht des Wassers miteinander zusammen; ihr Produkt ist immer 10<sup>-14</sup> mol²/l². Deshalb haben saure Lösungen (Säureionen überwiegen) einen pH-Wert zwischen 0 und 7, alkalische Lösungen (Hydroxidionen überwiegen) einen pH-Wert zwischen 7 und 14.

Die Messung des pH-Werts ist eines der wichtigsten Verfahren in der chemischen Analyse. Es wird z.B. zur Kontrolle der Wasserqualität, zur Bestimmung der Konzentration von sauren oder alkalischen Lösungen, zur Überwachung von Herstellungsprozessen (z.B. Lebensmittel, Körperpflegemittel, Farben und Lacke) und zur Feststellung der Luftverschmutzung (saurer Regen) eingesetzt. Bei vielen biochemischen Vorgängen, z.B. der Verdauung, spielt der pH-Wert eine wichtige Rolle.

### Benötigte Geräte (mit Chemie-Box oder pH-Adapter S)

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Chemie-Box oder pH-Adapter S	524 067(2)
1	pH-Elektrode mit BNC-Stecker	667 4172
1	Temperaturfühler NiCr-Ni (bei Bedarf)	529 676
1	Becherglas, 250 ml, niedrige Form	664 130
1	Labormesser	667 018
1	PC ab Windows 95/98/NT	

### Benötigte Geräte (alternativ mit pH-Box)

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	pH-Box	524 035
1	pH-Einstabmesskette	667 424
1	Becherglas, 250 ml, niedrige Form	664 130
1	Labormesser	667 018
1	PC ab Windows 95/98/NT	

### Benötigte Substanzen

Leitungswasser

Lebensmittel/Getränke, z.B.:

Mineralwasser mit und ohne Kohlensäure Wasser aus einem verkalkten Boiler

Limonade/Cola

Fruchtsaft

1 Zitrone

Kaffee

verschiedene Teesorten

Essig Speiseöl Milch

Pufferlösung pH 4,00 z.B. 250 ml: 674 4640 Pufferlösung pH 7,00 z.B. 250 ml: 674 4670

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Chemie-Box mit der angeschlossenen pH-Elektrode wird in den Eingang A des Sensor-CASSY eingesteckt.

Alternativ wird die pH-Box mit der pH-Einstabmesskette an den Eingang A des Sensor-CASSY angeschlossen.

Die Heißgetränke (Kaffee, Tees) frühzeitig ansetzen, damit sie bis zu Beginn der Messungen genügend



abgekühlt sind. Sind die Lösungen noch heiß, kann bei der Chemie-Box zur Temperaturkompensation auch ein Temperaturfühler am Eingang T1 angeschlossen und zusammen mit der pH-Elektrode in die Lösung getaucht werden. CASSY Lab berechnet daraus automatisch den auf 25 °C bezogenen pH-Wert.

Die Zitrone mit dem Messer an der Oberseite aufschneiden und eine Mulde formen, in der sich der Fruchtsaft sammeln kann. Diese Mulde muss so tief sein, dass die pH-Elektrode bis zum Diaphragma eintauchen kann.

Beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung der pH-Elektrode.

#### Kalibrierung

Für genaue Messungen muss beim ersten Mal und später in größeren Zeitabständen eine Kalibrierung der pH-Elektrode erfolgen:

- Einstellungen laden (Chemie-Box oder pH-Adapter S)
- Einstellungen laden (pH-Box)
- In den Einstellungen pHa1 Korrigieren wählen.
- pH-Elektrode mit destilliertem Wasser abspülen, in die Pufferlösung pH 7,00 eintauchen und kurz bewegen.
- Als ersten Sollwert 7,00 eintragen und nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche **Offset korrigieren** betätigen.
- pH-Elektrode mit destilliertem Wasser abspülen, in die Pufferlösung pH 4,00 eintauchen und kurz bewegen.
- Als zweiten Sollwert 4,00 eintragen und nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche **Faktor korrigieren** betätigen.
- Für spätere Verwendungen die kalibrierten Einstellungen mit **F2** unter einem neuen Namen abspeichern.
- Sensor-CASSY, pH-Elektrode und Chemie- bzw. pH-Box markieren, so dass sie später am gleichen Eingang wieder verwendet werden können (nur dann passt die gespeicherte Kalibrierung).

#### Versuchsdurchführung

Kalibrierte Einstellungen verwenden oder laden.

In der Reihenfolge:

Leitungswasser, Mineralwässer, Limonaden/Cola, Fruchtsäfte, Zitrone, Tees, Kaffee, Milch, Essig, Öl folgenden Ablauf einhalten:

- Flüssigkeit in das Becherglas füllen (den Saft der Zitrone zur Messung in der Mulde belassen).
- pH-Elektrode bis einschließlich zum Diaphragma eintauchen, Anzeige eines stabilen Wertes abwarten.
- Messwert mit **F9** oder der Schaltfläche aufnehmen.
- Messwert im Diagramm über die Tastenkombination Alt+T und Eintragung des untersuchten Stoffes beschriften
- Substanz wegschütten (nicht trinken!) und das Becherglas gut spülen.

#### **Auswertung**

Fast alle untersuchten Flüssigkeiten haben einen pH-Wert unter 8, liegen also im sauren bis neutralen Bereich. Getränke wie Fruchtsäfte, Früchtetees und Limonaden weisen mit einem pH-Wert zwischen 2,5 und 4 bereits sehr deutlich saure Eigenschaften auf, während keine der untersuchten Substanzen annähernd gleich stark alkalisch ist. Die mit einem pH-Wert von 8,9 am stärksten basische Lösung entstand durch das Erhitzen von Wasser in einem stark verkalkten Wasserkocher; die geringen Mengen sich lösenden Calciumcarbonats bewirkten dort die Erhöhung des pH-Werts gegenüber Leitungswasser um ca. 2.

Getränke mit Fruchtanteilen zeigen in der Regel verhältnismäßig stark saure Eigenschaften: Dies ist besonders gut an Hand der beiden im Beispiel untersuchten Teesorten zu verdeutlichen. Für den sauren Charakter sind die in Früchten enthaltenen Säuren als ursächlich zu betrachten: organische Säuren wie z.B. Citronensäure, Äpfelsäure und Weinsäure. Diese sind teilweise auch Bestandteile des menschlichen und tierischen Stoffwechsels (Citronensäurenzyklus). Kohlensäure (H2CO3) im Mineralwasser bewirkt nur eine im Vergleich zu den Getränken mit Fruchtgehalt wesentlich schwächere




Ansäuerung. Der niedrige pH-Wert von Cola ist darüber hinaus auch auf die enthaltene Phosphorsäure zurückzuführen.

Über die Feststellung des vorwiegend sauren Charakters der gemessenen Lebensmittel kann der Vorgang der Neutralisation einer Säure oder einer Base angesprochen werden: Was würde im Magen passieren, wenn stark alkalische Flüssigkeiten hineingelangten? Eventuell können Medikamente gegen Sodbrennen (Maaloxan, Bullrichsalz, Hirschhornsalz) in ihrer neutralisierenden Funktion untersucht werden.


Das erstellte Diagramm kann über das Druckersymbol in der oberen Bildschirmleiste ausgedruckt werden.



### pH-Messung an Reinigungsmitteln

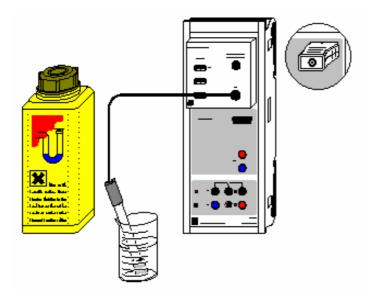

#### Alternativ mit pH-Box:

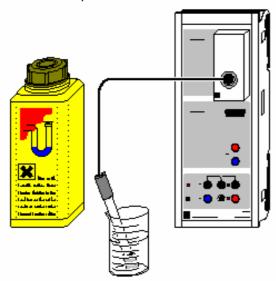



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

- Beispiel laden (Chemie-Box oder pH-Adapter S)
- Beispiel laden (pH-Box)

### Versuchsbeschreibung

Im vorliegenden Versuch werden Reinigungsmittel auf ihren pH-Wert untersucht. Je nach Einsatzbereich wird die gesamte pH-Skala durchschritten.

Der pH-Wert ist ein Maß für die Säure- bzw. Basenstärke einer Lösung. Er ist definiert als negativ-dekadischer Logarithmus der Konzentration der H3O<sup>+</sup>-lonen in einer wässrigen Lösung:

$$pH = - lg c(H3O^+)$$

Die Konzentration der H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>-Ionen ist vom Autoprotolyse-Gleichgewicht des Wassers abhängig:



In verdünnten Lösungen ist dieses Gleichgewicht unabhängig von der Konzentration der Wassermoleküle; die Gleichgewichtskonstante beträgt bei 25 °C:

$$K = c(H3O^{+}) \cdot c(OH^{-}) = 10^{-14} \text{ mol}^{2}/l^{2}$$

Die Säureionenkonzentration und die Hydroxidionenkonzentration in einer Lösung hängen also über das Protolyse-Gleichgewicht des Wassers miteinander zusammen; ihr Produkt ist immer 10<sup>-14</sup> mol²/l². Deshalb haben saure Lösungen (Säureionen überwiegen) einen pH-Wert zwischen 0 und 7, alkalische Lösungen (Hydroxidionen überwiegen) einen pH-Wert zwischen 7 und 14.

Die Messung des pH-Werts ist eines der wichtigsten Verfahren in der chemischen Analyse. Es wird z.B. zur Kontrolle der Wasserqualität, zur Bestimmung der Konzentration von sauren oder alkalischen Lösungen, zur Überwachung von Herstellungsprozessen (z.B. Lebensmittel, Körperpflegemittel, Farben und Lacke) und zur Feststellung der Luftverschmutzung (saurer Regen) eingesetzt. Bei vielen biochemischen Vorgängen, z.B. der Verdauung, spielt der pH-Wert eine wichtige Rolle.

### Benötigte Geräte (mit Chemie-Box oder pH-Adapter S)

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Chemie-Box oder pH-Adapter S	524 067(2)
1	pH-Elektrode mit BNC-Stecker	667 4172
1	Becherglas, 100 ml, hohe Form	664 137
1	Labormesser	667 018
4	DO -1- W:	

#### 1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Benötigte Geräte (alternativ mit pH-Box)

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	pH-Box	524 035
1	pH-Einstabmesskette	667 424
1	Becherglas, 100 ml, hohe Form	664 137
1	Labormesser	667 018

1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Benötigte Substanzen

Leitungswasser

Reinigungsmittel, z.B.:

Geschirrspülmittel

Essigreiniger

Abflussreiniger

als umweltfreundlich deklarierte Reiniger

zum Vergleich:

**Tafelessig** 

1 Zitrone

Pufferlösung pH 4,00 z.B. 250 ml: 674 4640 Pufferlösung pH 7,00 z.B. 250 ml: 674 4670

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Chemie-Box mit der angeschlossenen pH-Elektrode wird in den Eingang A des Sensor-CASSY eingesteckt.

Alternativ wird die pH-Box mit angeschlossener pH-Einstabmesskette in den Eingang A des Sensor-CASSY eingesteckt.

Die Zitrone mit dem Messer an der Oberseite aufschneiden und eine Mulde formen, in der sich der Fruchtsaft sammeln kann. Diese Mulde muss so tief sein, dass die pH-Elektrode bis zum Diaphragma eintauchen kann.

Beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung der pH-Elektrode.



#### Kalibrierung

Für genaue Messungen muss beim ersten Mal und später in größeren Zeitabständen eine Kalibrierung der pH-Elektrode erfolgen:

- Einstellungen laden (Chemie-Box oder pH-Adapter S)
- Einstellungen laden (pH-Box)
- In den Einstellungen pHa1 Korrigieren wählen.
- pH-Elektrode mit destilliertem Wasser abspülen, in die Pufferlösung pH 7,00 eintauchen und kurz bewegen.
- Als ersten Sollwert 7,00 eintragen und nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche **Offset korrigieren** betätigen.
- pH-Elektrode mit destilliertem Wasser abspülen, in die Pufferlösung pH 4,00 eintauchen und kurz bewegen.
- Als zweiten Sollwert 4,00 eintragen und nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche Faktor korrigieren betätigen.
- Für spätere Verwendungen die kalibrierten Einstellungen mit **F2** unter einem neuen Namen abspeichern.
- Sensor-CASSY, pH-Elektrode und Chemie- bzw. pH-Box markieren, so dass sie später am gleichen Eingang wieder verwendet werden können (nur dann passt die gespeicherte Kalibrierung).

#### Versuchsdurchführung

Kalibrierte Einstellungen verwenden oder laden.

Für alle untersuchten Reinigungsmittel folgenden Ablauf einhalten:

- Unter Beachtung eventueller Sicherheitshinweise und der Dosierungsvorschrift auf der Packung des Reinigungsmittels (umgerechnet auf das Volumen des Becherglases von 100 ml) die zu untersuchende Lösung im Becherglas ansetzen. Bei unverdünnt anzuwendenden Reinigungsmitteln möglichst wenig (ca. 30 ml) ins Becherglas füllen.
- Den Saft der Zitrone zur Messung in der Mulde belassen.
- pH-Elektrode bis einschließlich zum Diaphragma in die Lösung tauchen, Anzeige eines stabilen Wertes abwarten.
- Messwert mit **F9** oder der Schaltfläche aufnehmen.
- Messwert im Diagramm über die Tastenkombination Alt+T und Eintragung des untersuchten Stoffes beschriften.
- Substanz wegschütten und das Becherglas gut mit Leitungswasser spülen.

#### Auswertung

Je nach Einsatzbereich kommen bei Reinigungsmitteln alle pH-Bereiche von stark sauer bis stark alkalisch vor.

Vor allem Kalklöser und Bad-Reiniger weisen relativ niedrige pH-Werte auf. Das kann bis zu pH-Werten gehen, die bereits Salzsäure mit einer Konzentration von ca. 0,3 mol/l entsprechen. Dies liegt an der Kalk lösenden Reaktion von CaCO3 mit Säuren, die bei Kalklösern ausgenutzt wird:

$$CaCO_3 + 2H_3O^+ \xrightarrow{\quad aq. \quad} Ca^{2+} + CO_2 \uparrow + 3H_2O$$

Wegen des teilweise stark sauren Charakters dieser Reinigungsmittel steht der Hinweis, bei deren Verwendung Schutzhandschuhe zu tragen, also vollkommen berechtigt auf der Verpackung.

Der Umwelt-Zitronenreiniger löst CaCO3 nicht durch die Säurereaktion der Citronensäure, sondern dadurch, dass Citronensäure mit den Calcium-Ionen des Kalks einen gut wasserlöslichen Komplex bildet. Auf diese Weise kann der niedrige pH-Wert der anderen Reinigungsmittel vermieden werden.

Da basische Seifenlösungen ebenfalls für die Haut schädlich wirken, werden in Geschirrspülmitteln heutzutage zum Lösen von Fetten und Ölen vorwiegend neutrale Tenside an Stelle von alkalischen Seifen eingesetzt. Dies zeigt sich im nahezu pH-neutralen untersuchten Geschirrspülmittel. Da die menschliche Hautoberfläche jedoch schwach sauer (um pH 5,5) ist, wird das Geschirrspülen auch mit diesem Spülmittel eine - wenn auch geringere - Belastung für die Haut bleiben.



Auf der stark alkalischen Seite der Reinigungsmittel stehen vor allem Rohrreiniger, die dort wirksam Fettablagerungen und Haare lösen müssen, wo eine mechanische Reinigung nicht möglich ist. Diese Rohrreiniger enthalten hohe Konzentrationen von Natriumhydroxid (NaOH) und oft zusätzlich als Oxidationsmittel Hypochlorite, z.B. NaOCI. Rohrreiniger mit Hypochloriten dürfen nicht mit anderen Reinigern zusammenkommen, da bei Zugabe von Säuren aus NaOCI und dem ebenfalls in Rohrreinigern enthaltenen Kochsalz ätzendes Chlorgas entsteht:

NaOCI + NaCI + 
$$2H_3O^+ \rightarrow 2Na^+ + 3H_2O + Cl_2 \uparrow$$

Der gemessene pH-Wert des stark alkalischen Rohrreinigers ist bei Verwendung der üblichen pH-Elektroden mit einem sogenannten Alkalifehler besetzt. Glaselektroden zeigen ab pH-Werten von ca. 12 einen geringeren Wert als den tatsächlichen an; deshalb kann man davon ausgehen, dass in Wirklichkeit der überprüfte Rohrreiniger sogar noch stärker basisch ist.

Als Alternative werden heutzutage fast neutrale Bio-Rohrreiniger auf Enzymbasis angeboten. Der im Beispiel untersuchte Reiniger soll Fette enzymatisch zersetzen; dies wird bei fast neutralen Bedingungen erreicht, womit das Abwasser selbstverständlich wesentlich weniger belastet wird.

Das erstellte Diagramm kann über das Druckersymbol in der oberen Bildschirmleiste ausgedruckt werden.


#### Weitere Versuchsmöglichkeiten

Die Untersuchung des pH-Werts kann auf andere Stoffe der Alltagswelt ausgedehnt werden.

- Mit einer Einstichelektrode mit Kegelmembran könnten zusätzlich feste Seifenstücke oder Cremes untersucht werden.
- Auch die Feststellung des pH-Werts menschlicher Haut mit einer Elektrode mit Flachmembran vor und nach dem Waschen mit Seifen könnte zur Beurteilung der Substanzen bezüglich ihrer Hautverträglichkeit interessant sein.



## Bestimmung des pKa-Wertes von Essigsäure

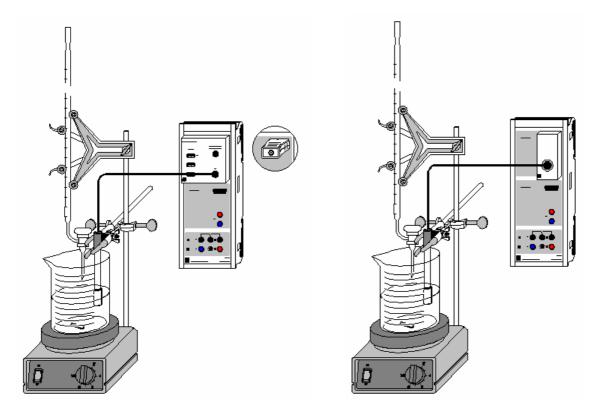



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

- Beispiel laden (Chemie-Box oder pH-Adapter S)
- Beispiel laden (pH-Box)

### Gefahrenhinweis

Säuren und Laugen wirken ätzend. Schutzbrille aufsetzen und säurefeste Handschuhe anziehen.

#### Versuchsbeschreibung

Das Maß für die Stärke einer mäßig starken bis schwachen Säure, den pKa-Wert, ermittelt man aus ihrer Titrationskurve mit einer starken Base. Nimmt man für die Säure die Dissoziationsgleichung:

$$HA + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$$

an, so gilt für den Halbäquivalenzpunkt (an dem die Hälfte der Säure mit der Base umgesetzt ist)

$$[A^{-}] = [HA].$$

Aus der Gleichgewichtsgleichung

$$K_a = \frac{\left[H_3O^+\right]\left[A^-\right]}{\left[HA\right]}$$

ergibt sich hier also

$$pK_a = pH$$

Nach der Bestimmung von Äquivalenzpunkt und Halbäquivalenzpunkt der Titration kann somit leicht der pKa-Wert abgelesen werden.

Benötigte Geräte (mit Chemie-Box oder pH-Adapter S)



1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Chemie-Box oder pH-Adapter S	524 067(2)
1	pH-Elektrode mit BNC-Stecker	667 4172
1	Magnetrührer	666 845
1	Becherglas, 250 ml, niedrige Form	664 103
1	Stativstab, 450 mm, Gewinde M10	666 523
1	Messpipette, 10 ml	665 997
1	Pipettierball	666 003
1	Bürette, 25 ml	665 845
1	Bürettentrichter	665 816
1	Einfach-Bürettenhalter	666 559
1	Kreuzmuffe	666 543
1	Kleinklemme	666 551
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Benötigte Geräte (alternativ mit pH-Box)

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	pH-Box	524 035
1	pH-Einstabmesskette	667 424
1	Magnetrührer	666 845
1	Becherglas, 250 ml, niedrige Form	664 103
1	Stativstab, 450 mm, Gewinde M10	666 523
1	Messpipette, 10 ml	665 997
1	Pipettierball	666 003
1	Bürette, 25 ml	665 845
1	Bürettentrichter	665 816
1	Einfach-Bürettenhalter	666 559
1	Kreuzmuffe	666 543
1	Kleinklemme	666 551
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Benötigte Chemikalien

Essigsäure, c = 0,1 mol/l	z.B. 500 ml: 671 9560
Natronlauge, c = 0,1 mol/l	z.B. 500 ml: 673 8410
Pufferlösung pH 4,00	z.B. 250 ml: 674 4640
Pufferlösung pH 7,00	z.B. 250 ml: 674 4670
dest. Wasser	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die pH-Box mit der pH-Einstabmesskette wird in den Eingang A des am PC angeschlossenen Sensor-CASSY eingesteckt.

Aus dem vorhandenen Stativmaterial sowie Magnetrührer, Becherglas und Bürette wird eine Titrierapparatur aufgebaut. In das Becherglas werden ungefähr 100 ml destilliertes Wasser und mit Hilfe der Pipette genau 10 ml 0,1 molare Essigsäure vorgelegt; die Bürette wird über den Trichter bis zur Nullmarkierung mit 0,1 molarer Natronlauge befüllt.

Die Einbauhöhe der pH-Elektrode sollte so eingestellt werden, dass das Messdiaphragma einerseits vollständig in die Flüssigkeit eingetaucht ist, andererseits aber die Glasmembran nicht vom rotierenden Rührstäbchen beschädigt werden kann. Zur Verdeutlichung des Äquivalenzpunktes können wenige Tropfen Phenolphthaleinlösung als Indikator zugegeben werden.

#### Kalibrierung

Für genaue Messungen muss beim ersten Mal und später in größeren Zeitabständen eine Kalibrierung der pH-Elektrode erfolgen:

- Einstellungen laden (Chemie-Box oder pH-Adapter S)
- Einstellungen laden (pH-Box)
- In Einstellungen pHA1 Korrigieren wählen.

- (<sup>[D</sup>)
- pH-Elektrode mit destilliertem Wasser abspülen, in die Pufferlösung pH 7,00 eintauchen und kurz bewegen.
- Als ersten Sollwert 7,00 eintragen und nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche Offset korrigieren betätigen.
- pH-Elektrode mit destilliertem Wasser abspülen, in die Pufferlösung pH 4,00 eintauchen und kurz bewegen.
- Als zweiten Sollwert 4,00 eintragen und nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche Faktor korrigieren betätigen.
- Für spätere Verwendungen die kalibrierten Einstellungen mit **F2** unter einem neuen Namen abspeichern.
- Sensor-CASSY, Elektrode und pH-Box markieren, so dass sie später am gleichen Eingang wieder verwendet werden können (nur dann passt die gespeicherte Kalibrierung).
- Sind andere Volumenabstände als 0,2 ml gewünscht, so kann in den Einstellungen V im Feld Formel die Vorgabe geändert und z.B. "0,5\*n-0,5" für Abstände von 0,5 ml eingegeben werden.

### Versuchsdurchführung

- · Kalibrierte Einstellungen verwenden oder laden.
- Den ersten Messwert mit der Taste **F9** oder der Schaltfläche ermitteln
- Die Natronlauge kontinuierlich langsam zutropfen lassen und in Abständen von 0,2 ml mit **F9** den pH-Wert aufnehmen.

#### Auswertung

Am Äquivalenzpunkt (V = Veq) ist die vorgelegte Essigsäure vollständig mit der Natronlauge umgesetzt:

$$HAc + NaOH \rightarrow Na^{+} + Ac^{-} + H2O$$


Zur Ermittlung des genauen Äquivalenzpunktes mit CASSY Lab betätigt man im Diagramm die rechte Maustaste, wählt im Menü weitere Auswertungen den Unterpunkt Äquivalenzpunkt bestimmen und erhält nach Markierung des Kurvenbereiches den Äquivalenzpunkt und den über den Halbäquivalenzpunkt (V = Vheq) ermittelten pKa-Wert graphisch angezeigt. Die dazu gehörenden Werte stehen links unten in der Statuszeile und können als Text an eine beliebige Stelle im Diagramm übertragen werden.


#### Weitere Versuchsmöglichkeiten

Durch Neutralisation einer Salzsäurelösung des gleichen pH-Wertes wie die vorliegende Essigsäurelösung (ca. 10 ml 0,01 molare HCl) und Vergleich der beiden Kurven kann der Begriff der Pufferlösung eingeführt werden. Die stark verdünnte Salzsäure ist schon bei 1 ml NaOH-Zugabe neutralisiert, während für die Neutralisation der ähnlich sauren Essigsäure ca. 10 ml NaOH benötigt werden. Eine Bestimmung des pKa-Wertes der Salzsäure ist dabei nicht sinnvoll.



### Titration von Phosphorsäure

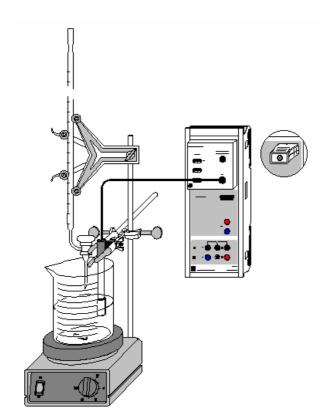

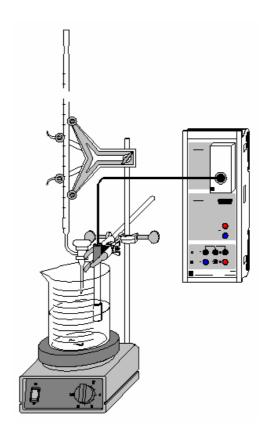





auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

- Beispiel laden (Chemie-Box oder pH-Adapter S)
- Beispiel laden (pH-Box)

#### **Gefahrenhinweis**

Säuren und Laugen wirken ätzend. Schutzbrille, -handschuhe und Schutzkleidung anziehen.

#### Versuchsbeschreibung

Mehrprotonige Säuren zeigen charakteristische Titrationskurven, die die Bestimmung der pKa-Werte der einzelnen Protolysestufen an Hand jeweils ähnlich verlaufender Kurvenabschnitte erlauben.

Phosphorsäure bildet in wässriger Lösung folgende Gleichgewichte:

1. 
$$H_3PO_4 + H_2O \rightleftharpoons H_2PO_4^- + H_3O^+$$
 (pK<sub>a1</sub> = 2,1)

2. 
$$H_2PO_4^- + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H_3O^+$$
 (pK<sub>a2</sub> = 7,1)

3. 
$$HPO_4^{2-} + H_2O \rightleftharpoons PO_4^{3-} + H_3O^+$$
 (pK<sub>a3</sub> = 12,3)

Da die pKa-Werte um 5 differieren, können die drei Gleichgewichte als voneinander vollkommen unabhängig betrachtet werden.

Bei der Titration mit Kalilauge lassen sich die Äquivalenzpunkte der ersten beiden Protolysestufen der Phosphorsäure ermitteln. Da KOH allerdings keine wesentlich stärkere Base als das Phosphat-Ion ist, liegt das Gleichgewicht 3 nicht weit genug auf der rechten Seite, um auch den dritten Äquivalenzpunkt bestimmen zu können. Dieser ist in wässriger Lösung nur auf dem umgekehrten Weg durch Titration von Kaliumphosphat z.B. mit Salzsäure zugänglich.



Die Hydrogenphosphate wirken im betrachteten pH-Bereich der Titration (ca. pH 2 bis pH 12) ampholytisch; stehen sie auf der rechten Seite des Gleichgewichts, stellen sie die Base des jeweiligen Säure/Base-Paares dar, auf der linken Seite des Gleichgewichts üben sie die Funktion der Säure aus.

#### Benötigte Geräte (mit Chemie-Box oder pH-Adapter S)

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Chemie-Box oder pH-Adapter S	524 067(2)
1	pH-Elektrode mit BNC-Stecker	667 4172
1	Temperaturfühler NiCr-Ni (bei Bedarf)	529 676
1	Magnetrührer	666 845
1	Becherglas, 250 ml, niedrige Form	664 103
1	Stativstab, 450 mm, Gewinde M10	666 523
1	Messpipette, 10 ml	665 997
1	Pipettierball	666 003
1	Bürette, 50 ml	665 847
1	Bürettentrichter	665 816
1	Einfach-Bürettenhalter	666 559
2	Kreuzmuffen	666 543
2	Kleinklemmen	666 551
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Benötigte Geräte (alternativ mit pH-Box)

	0	504.040
1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	pH-Box	524 035
1	pH-Einstabmesskette	667 424
1	Magnetrührer	666 845
1	Becherglas, 250 ml, niedrige Form	664 103
1	Stativstab, 450 mm, Gewinde M10	666 523
1	Messpipette, 10 ml	665 997
1	Pipettierball	666 003
1	Bürette, 50 ml	665 847
1	Bürettentrichter	665 816
1	Einfach-Bürettenhalter	666 559
1	Kreuzmuffe	666 543
1	Kleinklemme	666 551
1	PC ab Windows 95/98/NT	

### Benötigte Chemikalien

Phosphorsäure, 10 %, 100 ml	674 3440
Kalilauge, c = 1 mol/l, 1 l	672 4460
Pufferlösung pH 4,00, 250 ml	674 4640
Pufferlösung pH 7,00, 250 ml	674 4670
dest. Wasser	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Chemie-Box mit der pH-Elektrode wird in den Eingang A des am PC angeschlossenen Sensor-CASSY eingesteckt. Bei wesentlicher Abweichung der Temperatur von 25 °C empfiehlt sich der Einsatz eines Temperaturfühlers an Eingang T1. Die gemessene Temperatur der Lösung wird automatisch zur Kompensation der ermittelten Spannung an der pH-Elektrode verwendet.

Alternativ zur Chemie-Box wird die pH-Box mit der pH-Einstabmesskette in den Eingang A des Sensor-CASSY eingesteckt.

Aus dem vorhandenen Stativmaterial sowie Magnetrührer, Becherglas und Bürette wird eine Titrierapparatur aufgebaut.

Man legt im Becherglas knapp 100 ml destilliertes Wasser und mit Hilfe der Pipette 10 ml 10-prozentige Phosphorsäure (c(H3PO4) ca. 1,1 mol/l) vor; die Bürette wird über den Trichter bis zur Nullmarkierung mit 1-molarer Kalilauge befüllt.



Die Einbauhöhe der pH-Elektrode muss so eingestellt werden, dass das Messdiaphragma einerseits vollständig in die Flüssigkeit eintaucht, andererseits die Glasmembran aber nicht vom rotierenden Rührstäbchen beschädigt werden kann. Zur Verdeutlichung der Äquivalenzpunkte können wenige Tropfen eines Gemisches aus Methylrot und Phenolphthalein in die Lösung gegeben werden.

#### Kalibrierung

Für genaue Messungen muss beim ersten Mal und später in größeren Zeitabständen eine Kalibrierung der pH-Elektrode erfolgen:

- Einstellungen laden (Chemie-Box oder pH-Adapter S)
- Einstellungen laden (pH-Box)
- In Einstellungen pHA1 die Schaltfläche Korrigieren wählen.
- pH-Elektrode mit destilliertem Wasser abspülen, in die Pufferlösung pH 7,00 eintauchen und kurz bewegen.
- Als ersten Sollwert 7,00 eintragen und nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche Offset korrigieren betätigen.
- pH-Elektrode mit destilliertem Wasser abspülen, in die Pufferlösung pH 4,00 eintauchen und kurz bewegen.
- Als zweiten Sollwert 4,00 eintragen und nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche Faktor korrigieren betätigen.
- Für spätere Verwendungen die kalibrierten Einstellungen mit **F2** unter einem neuen Namen abspeichern.
- Sensor-CASSY, pH-Elektrode und Chemie- bzw. pH-Box markieren, so dass sie später am gleichen Eingang wieder verwendet werden können (nur dann passt die gespeicherte Kalibrierung).
- Sind andere Volumenabstände als 0,5 ml gewünscht, so kann in den Einstellungen V im Feld Formel die Vorgabe geändert und z.B. "0,2\*n-0,2" für Abstände von 0,2 ml eingegeben werden.

#### Versuchsdurchführung

- Kalibrierte Einstellungen verwenden oder laden.
- Den ersten Messwert mit der Taste F9 oder der Schaltfläche ermitteln.
- 40 ml Kalilauge kontinuierlich langsam zutropfen lassen und in Abständen von 0,5 ml mit **F9** den pH-Wert aufnehmen.

#### **Auswertung**

Die ermittelte Kurve weist mehrere charakteristische Bereiche auf, die den drei Protolyse-Gleichgewichten entsprechen. Die Ermittlung der Äquivalenzpunkte (V = Veq) erfolgt leicht in CASSY Lab: Nach Betätigen der rechten Maustaste im Diagramm **Standard** und Anwahl von **weitere Auswertungen** und **Äquivalenzpunkt bestimmen** kann man den Kurvenbereich markieren, innerhalb dessen der Äquivalenzpunkt ermittelt werden soll. Nach erfolgter Markierung werden der berechnete Äquivalenzpunkt und der pKa-Wert automatisch angezeigt; die dazu gehörenden Werte stehen links unten in der Statuszeile und können mit der Maus als Text an eine beliebige Stelle im Diagramm übertragen werden.

#### **Weitere Auswertung**

Der parallele Verlauf der drei Pufferbereiche kann verdeutlicht werden. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. In der Darstellung Geradenauswertung: Man wählt nach Klicken der rechten Maustaste im Diagramm die Menüpunkte Anpassung durchführen und Ausgleichsgerade, markiert dann symmetrisch zum jeweiligen im Diagramm Standard ermittelten Halbäquivalenzpunkt Vheq einen schmalen Kurvenbereich in einer der Pufferzonen und erhält eine Gerade mit der gemittelten Steigung des Markierungsbereichs. Ebenso verfährt man mit den anderen beiden Pufferzonen. Dazu errechnet man den dritten Äquivalenzpunkt aus den ersten beiden Äquivalenzpunkten. Die drei sich ergebenden Geraden sollten aufgrund der allgemeinen Formel für Pufferbereiche

$$\left[H_3O^+\right] = \frac{K_a \cdot \left[HA\right]}{\left|A^-\right|}$$

nahezu parallel verlaufen (leichte Ungenauigkeit durch Änderung des Volumens infolge der KOH-Zugabe und durch Erreichen der Grenzen des Messbereichs der pH-Elektrode).

- 2. In der Darstellung Geradenauswertung: Über die Tastenkombination Alt+F erhält man im Menüpunkt freie Anpassung die Möglichkeit, eigene Anpassungen zu definieren. Man gibt in die dafür vorgesehene Zeile die allgemeine Geradengleichung "A\*x+B" ein. Nach Weiter mit Bereich markieren klickt man mit der Maus einen schmalen, zum zweiten Halbäquivalenzpunkt symmetrischen Bereich an und erhält eine Gerade, deren Steigung A in der Statuszeile abzulesen ist. Nun stellt man A im Menüpunkt freie Anpassung (Alt+F) auf konstant und markiert dann die entsprechenden Bereiche um die anderen beiden Halbäquivalenzpunkte.
  - Bei einer sauberen Messreihe sollten die Pufferbereiche in der Nähe der Halbäquivalenzpunkte annähernd gleiche Steigungen aufweisen und durch die angepassten Geraden gut beschrieben werden.
- 3. In der Darstellung Pufferungskurven: Zum Auftragen des pH-Werts gegen den prozentualen Neutralisationsgrad N der jeweiligen Protolysestufe gibt man in den Einstellungen Veq1, Veq2 und Veq3 anstelle der Vorgaben des Versuchsbeispiels die Volumen-Werte der drei Äquivalenzpunkte ein. Der dritte Äquivalenzpunkt kann aus den ersten beiden errechnet werden. Der Neutralisationsgrad ist durch


$$N = 100 \cdot \left[ \frac{V}{V_{eq1}} \cdot \left( V \leq V_{eq1} \right) + \frac{V - V_{eq1}}{V_{eq2} - V_{eq1}} \cdot \left( \! \left( V > V_{eq1} \right) \! and \left( V < V_{eq2} \right) \! \right) + \frac{V - V_{eq2}}{V_{eq3} - V_{eq2}} \cdot \left( V \geq V_{eq2} \right) \right]$$

definiert und gibt den Fortschritt der Neutralisation der jeweiligen Protolysestufe in Prozent an. Innerhalb der großen Klammer bildet dabei der erste Ausdruck jedes Summanden das Volumenverhältnis für jede Protolysestufe, der zweite Ausdruck die Grenzen, innerhalb derer dieses Verhältnis aufgestellt werden soll.


In der Darstellung **Pufferungskurven** (pHA1 = f(N)) werden die drei Abschnitte der Titrationskurve übereinander in ein Diagramm gelegt. Deutlich sichtbar sind hier die Ähnlichkeiten der Pufferungskurven. Zur weiteren Auswertung können in das Diagramm wie oben beschrieben Geraden zur Überprüfung der Steigung der Pufferkurven eingefügt werden.



# Schmelz- und Erstarrungspunkt von Palmitinsäure

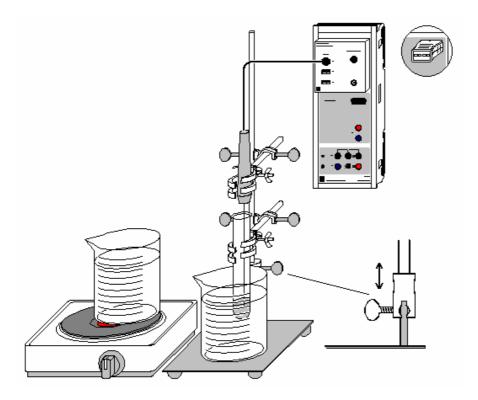

## Alternativ mit Temperatur-Box:

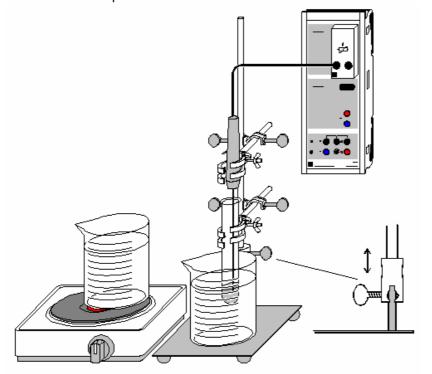



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

- Beispiel laden (Chemie-Box oder NiCr-Ni-Adapter S)
- Beispiel laden (Temperatur-Box)



Durch Aufnahme des Temperaturverlaufs beim Erhitzen einer Substanz kann deren Schmelz- und Erstarrungspunkt ermittelt werden.

#### Benötigte Geräte (mit Chemie-Box oder NiCr-Ni-Adapter S)

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Chemie-Box oder NiCr-Ni-Adapter S	524 067(3)
1	Temperaturfühler NiCr-Ni, Type K	529 676
2	Bechergläser, 250 ml, hF	664 113
1	Bunsenstativ	666 504
1	Stativrohr, 13 mm $\varnothing$	666 607
1	Universalmuffe	666 615
2	Doppelmuffen	301 09
2	Universalklemmen	666 555
1	Reagenzglas, aus	664 043
1	Doppelspatel	666 962
1	Heizplatte, z. B.	666 767
1	PC ab Windows 95/98/NT	

### Benötigte Geräte (alternativ mit Temperatur-Box)

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Temperatur-Box	524 045
1	Temperaturfühler NTC	666 212
2	Bechergläser, 250 ml, hF	664 113
1	Bunsenstativ	666 504
1	Stativrohr, 13 mm Ø	666 607
1	Universalmuffe	666 615
2	Doppelmuffen	301 09
2	Universalklemmen	666 555
1	Reagenzglas, aus	664 043
1	Doppelspatel	666 962
1	Heizplatte, z. B.	666 767
1	PC ab Windows 95/98/NT	

### Benötigte Chemikalien

1 Palmitinsäure, 50 g 674 0500

#### Versuchsvorbereitung (siehe Skizze)

- Ein Becherglas zu etwa ¾ mit Wasser füllen und auf der Heizplatte auf 80 bis 90 °C erhitzen.
- Das Reagenzglas 3 bis 4 cm hoch mit Palmitinsäure füllen und diese im Wasserbad zum Schmelzen bringen.
- Das 13 mm-Rohr mit Hilfe der Universalmuffe so über das 10 mm-Rohr schieben, dass es teleskopartig bewegbar ist. An das 13 mm-Rohr das Reagenzglas mit der Palmitinsäure und den NTC-Temperaturfühler so einspannen, dass sich der Fühler ca. 1 cm über dem Boden und in der Mitte des Reagenzglases befindet (nicht an der Wandung).
- Den Temperaturfühler mit dem Eingang T1 der Temperatur-Box verbinden. Die Box auf den Eingang A des Sensor-CASSYs stecken.
- Die Probe auf mindestens 40 °C abkühlen. Dazu das zweite Becherglas mit kaltem Wasser verwenden.

### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden (Chemie-Box oder NiCr-Ni-Adapter S)
- Einstellungen laden (Temperatur-Box)

Hinweis zum Kalibrieren

Falls erforderlich, kann der angeschlossene Temperaturfühler kalibriert werden. Dazu in den Einstellungen  $\vartheta$ A11 (rechte Maustaste) nach **Korrigieren** die beiden Sollwerte 0 °C und 100 °C einstellungen  $\vartheta$ A11 (rechte Maustaste)



- geben und **Offset korrigieren** (Temperaturfühler dabei in Eis/Wassergemisch) sowie **Faktor korrigieren** (Temperaturfühler dabei in kochendem Wasser) anklicken.
- Mit Hilfe des teleskopartigen Stativs das Reagenzglas mit der erstarrten Palmitinsäure und dem eingeschmolzenen Temperaturfühler in das ca. 80 °C heiße Wasserbad setzen.
- Im Programm durch Anklicken der Uhr auf der Symbolleiste (oder Drücken von F9) die Messwertaufnahme starten.
- Wenn die Temperatur oberhalb von etwa 60 °C wieder stärker ansteigt, die Probe mit dem Fühler mittels des Stativs aus dem heißen Wasserbad heben und zum schnelleren Abkühlen in das Becherglas mit kaltem Wasser setzen (alternativ kann man die Probe auch langsamer an der Luft abkühlen lassen).
- Wenn die Temperatur deutlich unter den Erstarrungspunkt gefallen ist (ca. 60 °C) kann die Messung mit F9 oder durch Klicken auf das Uhrensymbol beendet werden.

#### Auswertung


- Zur optimalen Darstellung der Grafik k\u00f6nnen die Bereiche der Fenster ver\u00e4ndert werden. Dazu mit der rechten Maustaste auf die jeweilige Achse klicken oder Zoomen (rechte Maustaste auf die Grafik).
- Zur Bestimmung und Markierung des Schmelz- und Erstarrungspunktes eine waagerechte Linie (rechte Maustaste auf die Grafik und Markierung setzen, Waagerechte Linie wählen) so positionieren, dass sie durch den konstanten Erstarrungsbereich verläuft.
- Der in der Statuszeile (links unten) angezeigte Wert kann als Text (rechte Maustaste auf die Grafik und **Markierung setzen**, **Text** wählen) in die Grafik übernommen werden. Wenn gewünscht, kann er dabei auch verändert werden.

#### Weitere Versuchsmöglichkeiten

- Aufnahme des Temperaturverlaufs anderer Stoffe, z. B. von Natriumthiosulfat-5-hydrat
- Vergleich der Temperaturkurven verschiedener Stoffe durch Überlagerung
- Vergleich der Temperaturkurven eines Stoffes mit unterschiedlicher Reinheit
- Untersuchung des Schmelz- und Erstarrungsverhaltens von Gemischen mit unterschiedlicher Zusammensetzung, Bestimmung des eutektischen Gemisches, Erstellen eines Phasendiagramms



### Unterkühlen einer Schmelze von Natriumthiosulfat

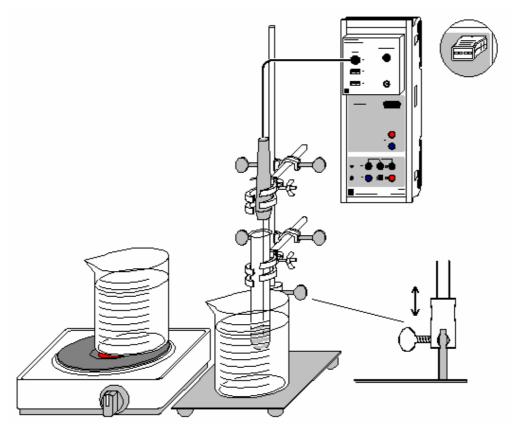



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

#### Versuchsbeschreibung

Die Schmelz- und Kristallisationskurve von Natriumthiosulfat-5-hydrat zeigt einige Besonderheiten. Die Substanz schmilzt bei ungefähr 48 °C, kristallisiert jedoch - bei genügender Reinheit und erschütterungsfreier Lagerung - erst nach starker Unterkühlung unter 30 °C. Während des Erstarrens steigt die Temperatur des Natriumthiosulfats wieder fast bis zum Schmelzpunkt an.

Diese verschiedenen Bereiche (Schmelzen, Unterkühlen, Kristallisation) werden bei der Aufnahme der Schmelz- und Kristallisationskurve von Natriumthiosulfat gut sichtbar.

Zur Unterkühlung einer Schmelze kommt es, wenn durch das Fehlen von Kristallisationskeimen die Einstellung des Gleichgewichts zwischen Feststoff und Schmelze verzögert wird. Zustände, die wie unterkühlte Schmelzen thermodynamisch instabil, jedoch kinetisch gehemmt sind, nennt man metastabil.

Die Eigenschaft von Natriumthiosulfat, eine relativ beständige unterkühlte Schmelze zu bilden, die beim Erstarren warm wird, wird zur chemischen Erzeugung von Wärme genutzt. Handwärmer und Einzelportionspackungen von Essen oder Getränken (z.B. für Reisende) können so erwärmt werden.

#### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Chemie-Box oder NiCr-Ni-Adapter S	524 067(3)
1	Temperaturfühler NiCr-Ni, Typ K	529 676
2	Bechergläser, 250 ml, niedrige Form	664 103
1	Bunsenstativ	666 504



1	Stativrohr, 13 mm Ø	666 607
1	Universalmuffe	666 615
2	Doppelmuffen	301 09
2	Kleinklemmen	666 551
1	Reagenzglas, z.B. aus	664 043
1	Doppelspatel	666 962
1	Heizplatte, z. B.	666 767
4	DO -1- W/:	

1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Benötigte Chemikalien

1 Natriumthiosulfat-5-hydrat, z.B. 100 g 673 8000

#### Versuchsvorbereitung (siehe Skizze)

- Die Chemie-Box mit dem an T1 angeschlossenen Temperaturfühler in den Eingang A des Sensor-CASSY stecken.
- Beide Bechergläser zu etwa ¾ mit Wasser füllen. Ein Becherglas auf die Heizplatte, eines daneben stellen.
- Das Reagenzglas 2 bis 3 cm hoch mit Natriumthiosulfat füllen.
- Das 13-mm-Rohr mit Hilfe der Universalmuffe so über das 10-mm-Rohr schieben, dass es teleskopartig bewegbar ist.
- Das Reagenzglas und den Temperaturfühler so mit den Kleinklemmen am 13-mm-Rohr befestigen, dass sich die Spitze des Fühlers einige mm über dem Boden und in der Mitte des Reagenzglases in der Substanz befindet (nicht an der Wandung).

#### Kalibrierung

Der angeschlossene Temperaturfühler sollte für genaue Messergebnisse vor der ersten Durchführung des Versuchs kalibriert werden:

- Einstellungen laden
- Den Temperaturfühler in ein Eis-Wasser-Gemisch tauchen, in den Einstellungen ϑA11 unter Korrigieren in der oberen Zeile den Sollwert "0 °C" eingeben und Offset korrigieren anklicken.
- Dann den Temperaturfühler in kochendes Wasser tauchen, in den Einstellungen ϑA11 unter **Korrigieren** in der oberen Zeile den Sollwert "100 °C" eingeben und **Faktor korrigieren** anklicken. Unter Umständen den Einfluss des Luftdrucks auf den Siedepunkt beachten.
- Kalibrierte Einstellungen mit F2 unter einem neuen Namen abspeichern.
- Sensor-CASSY, Chemie-Box und Temperaturfühler markieren, damit sie in derselben Kombination wieder verwendet werden können. Nur dann passt die gespeicherte Kalibrierung.

#### Versuchsdurchführung

- Kalibrierte Einstellungen verwenden oder laden.
- Heizplatte einschalten.
- Mit Hilfe des teleskopartigen Stativs das Reagenzglas mit dem Temperaturfühler in das Becherglas auf der Heizplatte setzen.
- Messung mit **F9** oder der Schaltfläche starten.
- Nach vollständigem Schmelzen des Natriumthiosulfats und Erreichen von ca. 65 °C das Reagenzglas mittels des Stativs aus dem heißen Wasserbad heben und zum schnelleren Abkühlen in das
  Becherglas mit kaltem Wasser setzen (alternativ kann man die Probe auch langsamer an der Luft
  abkühlen lassen).
- Um tiefe Unterkühlungstemperaturen zu erreichen, sollte man dafür sorgen, dass die Apparatur nicht erschüttert wird. Andererseits kann durch leichtes Klopfen gegen das Reagenzglas die Kristallisation initiiert und verstärkt werden.
- Die maximale Kristallisationstemperatur kann nach Einsetzen des Erstarrungsvorgangs (∂A11 steigt wieder an) durch Entnahme des Reagenzglases aus dem Wasserbad und weiteres Klopfen erreicht werden.
- Messung nach vollständiger Kristallisation des Natriumthiosulfats mit F9 oder der Schaltfläche beenden.





#### **Auswertung**


Es sind mehrere Bereiche in der Kurve zu unterscheiden:

- a) Erwärmung der festen Substanz
- b) Schmelzbereich von Natriumthiosulfat-5-hydrat. Da die Erwärmung schneller als die Einstellung der thermodynamischen Gleichgewichts erfolgt, ist nur ein Schmelzbereich, kein genauer Schmelzpunkt feststellbar.
- c) Erwärmung der Schmelze
- d) Abkühlen der Schmelze. Deutlich ist zu sehen, dass der Schmelzbereich unterschritten wird, ohne dass sich ein für einen Phasenübergang typisches Plateau zeigt.
- e) Im Minimum der Temperaturkurve setzt die Kristallisation des Natriumthiosulfat-5-hydrat ein. Dies bedingt einen Temperaturanstieg bis auf die Kristallisationstemperatur. Diese ist bestimmbar, indem man im Diagramm die rechte Maustaste betätigt, **Mittelwert einzeichnen** auswählt und den annähernd waagerechten Kurvenbereich im Temperaturmaximum des Kristallisationsbereichs markiert. Die durchschnittliche Kristallisationstemperatur wird in der Statuszeile angegeben und kann mit dem Mauszeiger oder über **Alt+T** ins Diagramm übertragen werden.
- f) Abkühlen der vollständig erstarrten Substanz.

Die verschiedenen Bereiche der Messkurve können zur deutlicheren Abtrennung voneinander durch senkrechte Linien markiert werden.



### Molmassenbestimmung durch Gefrierpunktserniedrigung

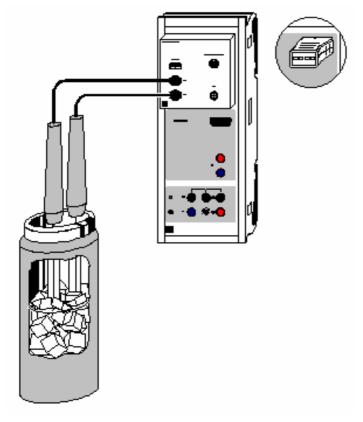




auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

#### ■ Beispiel laden

#### Versuchsbeschreibung

Eine relativ einfache Methode zur Bestimmung der Molmasse einer Substanz ist die Messung der Gefrierpunktserniedrigung von verdünnten Lösungen dieser Substanz in einem Lösungsmittel. Die Gefrierpunktserniedrigung ist als eine der kolligativen Eigenschaften von verdünnten Lösungen nur von der Stoffmenge der gelösten Teilchen abhängig, nicht jedoch von deren Art.

Wird eine Substanz in einem Lösemittel gelöst, bewirkt dies eine Verschiebung der Grenzlinien zwischen den Phasen fest (s), flüssig (l) und gasförmig (g) im Phasendiagramm (durchgezogen: reines Lösungsmittel, gestrichelt: Lösung). Diese Verschiebung hat eine Erhöhung des Siedepunktes und eine Erniedrigung des Gefrierpunktes ( $\Delta T$ ) der Lösung im Vergleich zum reinen Lösemittel zur Folge.

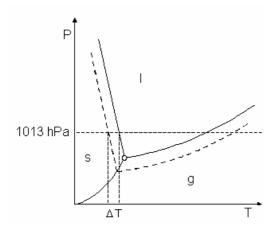



Für den Betrag der Gefrierpunktserniedrigung kann die Gleichung

$$\Delta T = \left(\frac{R \cdot T^{*2} \cdot M_2}{\Delta H_f}\right) \cdot \frac{n_1}{m_2}$$

hergeleitet werden. Hier ist R die allgemeine Gaskonstante, T\* und M2 sind Gefrierpunkt und Molmasse des reinen Lösungsmittels und  $\Delta Hf$  dessen molare Schmelzenthalpie. Dieser erste Ausdruck wird zu einer für jedes Lösungsmittel charakteristischen kryoskopische Konstante Kk zusammengefasst. Kk beträgt für Wasser 1853 K\*g/mol; in der chemischen Analyse wird wegen seiner hohen Konstante von Kk = 40000 K\*g/mol jedoch häufig Campher als Lösungsmittel vorgezogen. Der zweite Bruch in der oben stehenden Gleichung bezeichnet die Molalität (Stoffmenge n1 / Masse m2 des Lösungsmittels) des gelösten Stoffes.

Aus der Gefrierpunktserniedrigung ist leicht die Molmasse des gelösten Stoffes bestimmbar:

$$\Delta T = K_k \cdot \frac{n_1}{m_2} = K_k \cdot \frac{m_1}{M_1 \cdot m_2}$$

(m1: Masse des gelösten Stoffes in g, m2: Masse des Lösungsmittels in g, M1: Molmasse des gelösten Stoffes in g/mol)

Nach M1 aufgelöst ergibt sich:

$$M_1 = \frac{K_k \cdot m_1}{\Delta T \cdot m_2}$$

Diese Gleichung gilt für nicht dissoziierende Stoffe. Bei Salzen, Säuren und Basen ist die Zahl der entstehenden gelösten Teilchen und der Dissoziationsgrad  $\alpha$  zu berücksichtigen.

Im Versuchsbeispiel wird eine knapp 1-molare Lösung von Ethylenglykol (HO-CH2-CH2-OH) in Wasser untersucht. Ethylenglykol findet z.B. in Autos als Frostschutzmittel für Kühlwasser und Scheibenwaschanlage Anwendung.

Zum Kühlen der Lösungen wird einfach eine Kältemischung aus Kochsalz und Eis in einem Dewar-Gefäß verwendet (siehe Herstellung einer Kältemischung).

#### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Chemie-Box oder NiCr-Ni-Adapter S	524 067(3)
2	Temperaturfühler NiCr-Ni, Typ K	529 676
1	Dewar-Gefäß, 0,5 I	667 320
2	Reagenzgläser, 16x160 mm, z.B. aus	664 043
1	Pasteurpipette, z.B. aus	665 950
1	Kappe für die Pasteurpipette, z.B. aus	665 954
1	Gummistopfen, Ø 14-18 mm	667 253
1	Becherglas, 250 ml, hohe Form	664 138
1	Laborwaage, Auflösung ≤ 0,01 g, Wäge	bereich ≥ 300 g
1	PC mit Windows ab 95/98/NT	_

#### Benötigte Substanzen

Natriumchlorid, z.B. 250 g	673 5700
Ethylenglykol, z.B. 250 ml	671 9800
Eis, ca. 200 g	
destilliertes Wasser	

#### Kalibrierung

Um ausreichende Genauigkeit zu gewährleisten, muss vor der ersten Messung und später in größeren Zeitabständen eine Kalibrierung der Temperaturfühler erfolgen.

- Einstellungen laden
- Beide Temperaturfühler in Eiswasser (Gemisch aus Eis und wenig Wasser) tauchen, mit den



Temperaturfühlern umrühren und warten, bis sich in den Anzeigeinstrumenten auf  $\pm$  0,1 °C stabile Messwerte einstellen.

- In den Einstellungen ϑA12, ϑA13 und ΔTA1 jeweils unter **Korrigieren** in der ersten Zeile als Sollwert "0" eintragen und die Schaltfläche **Offset korrigieren** betätigen.
- Einstellungen mit F2 unter einem neuen Namen abspeichern.
- Sensor-CASSY, Chemie-Box und Temperaturfühler kennzeichnen, so dass sie beim nächsten Versuch in derselben Kombination wieder verwendet werden können (nur dann passt die gespeicherte Kalibrierung).

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

- Die Chemie-Box mit den beiden an T2 und T3 angeschlossenen Temperaturfühlern wird auf den Eingang A des Sensor-CASSY gesteckt.
- Zur Herstellung der Kältemischung ist es erforderlich, das Eis möglichst klein zu zerstoßen. Anschließend wird es in das Dewar-Gefäß gegeben.
- Auf der Waage werden ca. 40-50 g NaCl in das Becherglas eingewogen.
- Nach und nach das Salz zum Eis in das Dewar-Gefäß geben und mit einem der Temperaturfühler umrühren. Lässt sich das Eis nur schwer umrühren, sollte etwas destilliertes Wasser hinzugegeben werden.
- Umrühren, bis eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Dewar-Gefäß erreicht ist. Es ist eine Temperatur von ca. -18 bis -20 °C zu erwarten. Dies kann mit Hilfe des Anzeigeinstruments des Temperaturfühlers überprüft werden.
- Zwei trockene Reagenzgläser im Becherglas auf die Waage stellen und die Waage auf 0 stellen.
- Mit der Pasteurpipette ca. 0,5-0,7 g Ethylenglykol in eines der Reagenzgläser geben und die genaue Masse bestimmen. Waage auf 0 stellen, 10-12 g destilliertes Wasser zum Ethylenglykol geben und die genaue Masse bestimmen. In den Einstellungen Kommentar (über F5 erreichbar) können die Werte festgehalten und mit der Messung abgespeichert werden.
- Das Reagenzglas mit dem Gummistopfen verschließen und das Ethylenglykol durch Schütteln lösen.
- In das zweite Reagenzglas ca. 9-10 g destilliertes Wasser geben.
- Den sauberen, an T2 angeschlossenen Temperaturfühler in die Ethylenglykol-Lösung, den anderen, ebenfalls sauberen Fühler in das destillierte Wasser tauchen.

### Versuchsdurchführung

- Kalibrierte Einstellungen verwenden oder laden.
- Beide Reagenzgläser mit den eingetauchten Temperaturfühlern gleichzeitig und gleich tief in die Kältemischung einbringen. Die Flüssigkeitsspiegel in den Reagenzgläsern sollten unter dem der Kältemischung liegen. Darauf achten, dass keine Salzlösung aus der Kältemischung in die Reagenzgläser gerät.
- Messung mit **F9** oder der Schaltfläche starten.
- Mit den beiden Temperaturfühlern den Inhalt der Reagenzgläser ständig umrühren, bis die Flüssigkeiten vollständig gefroren sind.
- Messung fortsetzen, bis ΔTA1 wieder nahe 0 ist und sich nahezu konstante Temperaturen eingestellt haben.
- Messung mit F9 oder der Schaltfläche beender

### **Auswertung**

Bei der Messung werden gleichzeitig drei Kurven aufgenommen: die beiden <u>Erstarrungskurven</u> ( $\vartheta$ A12 und  $\vartheta$ A13) - eine für die Probe und eine Referenzkurve des destillierten Wassers - und die <u>Differenzkurve</u> ( $\Delta$ TA1).

Die Erstarrungskurven weisen mehrere Bereiche auf:

- a) Zu Beginn der Messung fallen die Temperaturen  $\vartheta$ A12 und  $\vartheta$ A13 zunächst steil ab, während die beiden Flüssigkeiten schnell abgekühlt werden.
- b) Der steile Temperaturabfall endet vor allem bei ∂A12 in einem lokalen Minimum, der sogenannten Unterkühlung der Flüssigkeiten.



c) Auf dieses Temperaturminimum folgt der für die Ermittlung der Gefrierpunktserniedrigung bedeutsame Erstarrungsbereich der Kurve. Bei reinen Lösungsmitteln bleibt die Temperatur während des Erstarrungsvorgangs exakt konstant, wodurch ein Plateaubereich in der Erstarrungskurve entsteht (siehe im Beispiel die Kurve  $\vartheta$ A13).

Anders verläuft der Erstarrungsbereich bei Lösungen: Da dort fast nur reines Lösungsmittel auskristallisiert und die gelöste Substanz somit in der flüssigen Phase verbleibt, erhöht sich deren Konzentration stetig. Aus diesem Grund sinkt der Erstarrungspunkt der Lösung weiter ab (siehe im Beispiel die Kurve  $\vartheta$ A12). Der gesuchte Gefrierpunkt der ursprünglichen Lösung liegt also im Maximum zu Beginn des Erstarrungsvorgangs.

d) Ist der Erstarrungsvorgang beendet, kühlen sich beide Substanzen in einem exponentiellen Kurvenverlauf rasch auf die Umgebungstemperatur ab. Da der reine Eiskristall im Gegensatz zu der gefrorenen Lösung keine Phasengrenzen aufweist, kann dort die Abkühlung wesentlich schneller erfolgen.

Zur Auswertung der Messdaten bestimmt man zunächst an Hand der Erstarrungskurve  $\vartheta$ A12 den Gefrierpunkt der Ethylenglykol-Lösung. Dieser zeigt sich als Maximum zu Beginn des Erstarrungsbereichs der Kurve. Die Koordinaten dieses schmalen Bereichs können in der Messwerttabelle abgelesen werden (dazu zweckmäßiger Weise das Maximum mit der linken Maustaste anklicken - der dazu gehörige Wert in der Tabelle wird markiert). Die Temperaturdifferenz zwischen den beiden Erstarrungskurven in diesem Bereich gibt die Gefrierpunktserniedrigung  $\Delta T$  der Lösung gegenüber reinem Wasser an. Da die Messung der Temperaturdifferenz  $\Delta T$ A1 mit der Chemie-Box in einer höheren Auflösung erfolgen kann, benutzt man diese Kurve zur Bestimmung der Gefrierpunktserniedrigung.

Dazu betätigt man zunächst **Alt+Z** und wählt den für die Auswertung interessierenden Bereich der Erstarrungs- und der Differenzkurve mit der linken Maustaste aus, um diesen Bereich vergrößert darzustellen. Nun betätigt man im Diagramm die rechte Maustaste, wählt **Mittelwert einzeichnen** und markiert mit der Maus auf der <u>Differenzkurve</u>  $\Delta TA1$  die Messwerte, die zum Maximum des Erstarrungsbereichs von  $\vartheta A12$  gehören. Während des Markierungsvorgangs kann die Position des Mauszeigers in der Statuszeile überprüft werden. Der Mittelwert für  $\Delta TA1$  wird in einer waagerechten Linie im Diagramm angegeben; der dazu gehörige Zahlenwert steht in der Statuszeile und kann über **Alt+T** als Text in das Diagramm eingefügt werden.

Aus der so ermittelten Gefrierpunktserniedrigung kann nach der Gleichung

$$M_1 = \frac{K_k \cdot m_1}{\Delta T \cdot m_2}$$

die Molmasse der untersuchten Substanz berechnet werden. Mit den Werten des Versuchsbeispiels (m1 = 0,63 g; m2 = 11,56 g;  $\Delta T = |\Delta TA1| = 1,59$  K; Kk = 1853 K\*g/mol) erhält man für Ethylenglykol: M1 = 63,51 g/mol.

Bei einem Literaturwert von 62,07 g/mol entspricht dies einem Fehler von 2,3 %.


#### Weitere Versuchsmöglichkeiten

Mit der gleichen Versuchsanordnung lassen sich Erstarrungskurven vieler Substanzen aufzeichnen.

Aus den Erstarrungskurven von gelösten Salzen, Säuren und Basen lässt sich bei bekannter Zusammensetzung der Dissoziationsgrad bei einer bestimmten Konzentration ermitteln. Dazu misst man die Gefrierpunktserniedrigung einer bestimmten Stoffmenge des Salzes und ermittelt daraus die Gesamt-Stoffmenge gelöster Teilchen. Daraus ist der Dissoziationsgrad berechenbar.



# Titration von Salzsäure mit Natronlauge (pH und Leitfähigkeit)

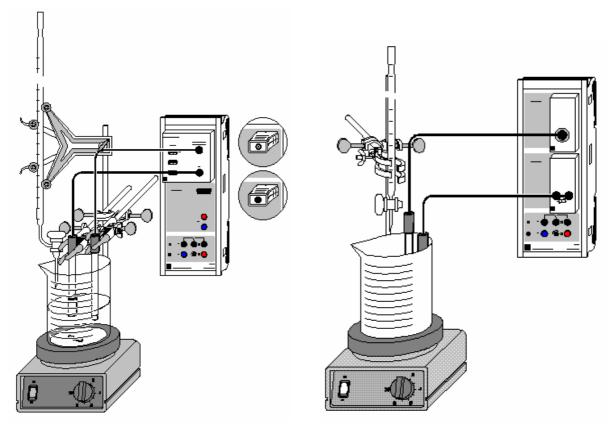



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

- Beispiel laden (Chemie-Box)
- Beispiel laden (pH-Adapter S und Leitfähigkeits-Adapter S)
- Beispiel laden (pH-Box und Leitfähigkeits-Box)

#### **Gefahrenhinweis**

Säuren und Laugen wirken ätzend. Schutzbrille aufsetzen.

### Versuchsbeschreibung

Während der Titration werden pH-Wert und Leitfähigkeit parallel erfasst und in der Auswertung der Äquivalenzpunkt und pKa-Wert der Titration bestimmt.

### Benötigte Geräte (mit Chemie-Box oder pH/Leitfähigkeits-Adapter S)

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Chemie-Box oder pH/Leitfähigkeits-Adapter S	524 067(2+1)
1	Leitfähigkeitssensor	529 670
1	pH-Elektrode mit BNC-Stecker	667 4172
1	Magnetrührer	666 845
1	Becherglas, 250 ml, hF	664 113
1	Stativstab, 450 mm, Gewinde M10	666 523
3	Kreuzmuffen	666 543
3	Universalklemmen	666 555
1	Bürette, 50 ml	665 847
1	Bürettentrichter	665 816
1	Pipette, 10 ml	665 975



1 Pipettierball 666 003

1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Benötigte Geräte (alternativ mit pH-Box und Leitfähigkeits-Box)

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	pH-Box	524 035
1	pH-Einstabmesskette	667 424
1	Leitfähigkeits-Box	524 037
1	Leitfähigkeits-Messzelle	667 426
1	Magnetrührer	666 845
1	Becherglas, 250 ml, hF	664 113
1	Stativstab, 450 mm, Gewinde M10	666 523
3	Kreuzmuffen	666 543
3	Universalklemmen	666 555
1	Bürette, 50 ml	665 847
1	Bürettentrichter	665 816
1	Pipette, 10 ml	665 975
1	Pipettierball	666 003
1	DC ab Windows 05/09/NT	

#### 1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Benötigte Chemikalien

Salzsäure, c = 0,1 mol/l, 500 ml	674 6950
Natronlauge, c = 0,1 mol/l, 500 ml	673 8410
dest. Wasser	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

pH-Wert und Leitfähigkeit werden vom Sensor-CASSY über die pH-Box an Eingang A und die Leitfähigkeits-Box an Eingang B gemessen.

Mit Hilfe von Magnetrührer, Becherglas, Stativmaterial und Bürette einen Titrationsaufbau erstellen. In das Becherglas ca. 100 ml Wasser und mit der Pipette 10 ml Salzsäure geben.

Die Elektroden so eintauchen und befestigen, dass sie einerseits eine ausreichende Eintauchtiefe aufweisen, andererseits aber nicht vom rotierenden Rührstäbchen getroffen werden.

### Kalibrierung

Für genaue Messungen sollte das erste Mal und später in größeren Zeitabständen eine Kalibrierung der Elektroden erfolgen:

- Einstellungen laden (Chemie-Box)
- Einstellungen laden (pH-Adapter S und Leitfähigkeits-Adapter S)
- Einstellungen laden (pH-Box und Leitfähigkeits-Box)
- In Einstellungen pH-Wert pHA1 Korrigieren wählen.
- Elektrode mit dest. Wasser abspülen und in Pufferlösung pH 7,00 eintauchen, kurz bewegen.
- Als ersten Sollwert 7,00 eintragen und Offset korrigieren.
- Elektrode mit dest. Wasser abspülen und in Pufferlösung pH 4,00 eintauchen, kurz bewegen.
- Als zweiten Sollwert 4,00 eintragen und **Faktor korrigieren**.
- In Einstellungen Leitfähigkeit CB1 Korrigieren wählen.
- Statt Faktor 1,00 den auf dem Elektrodenschaft eingravierten Faktor eintragen und **Faktor korrigieren.**
- Für eine spätere Verwendung kalibrierte Einstellungen mit F2 unter einem neuen Namen abspeichern.
- Sensor-CASSY, Elektroden und Sensorboxen so markieren, dass sie später am gleichen Eingang wieder verwendet werden können (nur dann passt die gespeicherte Kalibrierung).

#### Versuchsdurchführung

- Kalibrierte Einstellungen verwenden oder laden.
- Anfangswerte mit **F9** aufnehmen.
- Die Natronlauge kontinuierlich zutropfen lassen und alle 0,5 ml den zugehörigen pH- und Leitfähigkeitswert mit **F9** erfassen.



#### **Auswertung**

Für die Bestimmung des Äquivalenzpunkts gibt es zwei Möglichkeiten:

#### pH-Wert

Mit rechter Maustaste auf das Diagramm klicken, in weitere Auswertungen Äquivalenzpunkt bestimmen anklicken und den gewünschten Kurvenbereich markieren. Der Wert (gegebenenfalls mit pK-Wert) erscheint in der Statuszeile links unten und kann als Text an eine beliebige Stelle im Diagramm eingetragen werden.

#### Leitfähigkeit


Mit rechter Maustaste auf das Diagramm klicken, in **Anpassung durchführen** die **Ausgleichsgerade** wählen und den linken Ast der Leitfähigkeitskurve markieren. Ebenso für den rechten Ast verfahren. Als Markierung kann eine senkrechte Linie durch den Schnittpunkt der beiden Geraden gezeichnet werden. Ebenso ist auch eine Koordinatenanzeige möglich.


#### Weitere Versuchsmöglichkeiten

- Erfassung nur einer Messgröße (z. B. pH-Wert)
   Mit der rechten Maustaste auf das Leitfähigkeitsfenster klicken und Löschen wählen. Das Anzeigefenster und alle anderen der Leitfähigkeit verbundenen Daten verschwinden. Es wird jetzt nur noch der pH-Wert gemessen.
- Verwendung einer Gleichlauf- oder Motorkolbenbürette (automatische Titration)
   Im Messparameterfenster (zweimal F5) automatische Aufnahme wählen und als Intervall z. B. 1 s einstellen.
  - In den Einstellungen V für das Volumen die Formel **t/20** eingeben (hier wird angenommen, dass in 20 s 1 ml zudosiert wird. Dieser Wert, wie auch das maximale Volumen, muss ggf. angepasst werden).
- Verwenden einer Waage zur Volumenerfassung (automatische Titration)
  In den Allgemeinen Einstellungen (nach F5) an der seriellen Schnittstelle der Waage die Einstellung
  Waage vorgeben (z. B. COM2 auf Waage stellen, wenn die Waage an COM2 angeschlossen ist).
  Die Einstellungen der Waage (Baudrate, Mode, etc.) der Waagenprogrammierung anpassen (ggf.
  Handbuch zur Waage zu Rate ziehen).
  - In den Einstellungen V für das Volumen die Formel **m/1.05** eingeben (hier wird angenommen, dass die Dichte des Titrationsmittels 1,05 g/ml ist. Dieser Wert, wie auch das maximale Volumen, muss ggf. angepasst werden).



## **Titration von Haushaltsessig**

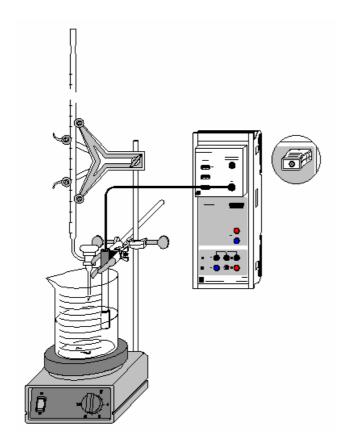

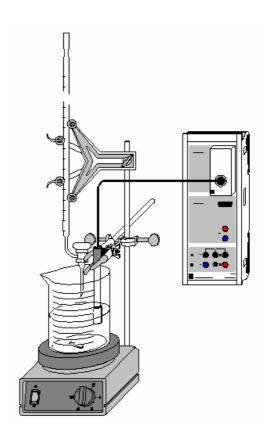



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

- Beispiel laden (Chemie-Box oder pH-Adapter S)
- Beispiel laden (pH-Box)

#### **Gefahrenhinweis**

Säuren und Laugen wirken ätzend. Schutzbrille aufsetzen und säurefeste Handschuhe anziehen.

### Versuchsbeschreibung

Über die Titration mit einer Maßlösung lässt sich die Konzentration von Säuren (oder Laugen) bestimmen. Dazu ermittelt man durch Titration den Äquivalenzpunkt eines genau abgemessenen Volumens V der Säure und kann dann bei bekannter Wertigkeit n ihre Konzentration c über die Gleichung

$$n_1 \cdot c_1 \cdot V_1 = n_2 \cdot c_2 \cdot V_2$$

bestimmen. Am Beispiel von Haushaltsessig kann die Bestimmung mit 1-molarer NaOH als Maßlösung einfach durchgeführt werden.

### Benötigte Geräte (mit Chemie-Box oder pH-Adapter S)

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Chemie-Box oder pH-Adapter S	524 067(2)
1	pH-Elektrode mit BNC-Stecker	667 4172
1	Temperaturfühler NiCr-Ni (bei Bedarf)	529 676
1	Magnetrührer	666 845
1	Becherglas, 250 ml, niedrige Form	664 103
1	Stativstab, 450 mm, Gewinde M10	666 523
1	Messpipette, 10 ml	665 997



1	Pipettierball	666 003
1	Bürette, 25 ml	665 845
1	Bürettentrichter	665 816
1	Einfach-Bürettenhalter	666 559
1	Kreuzmuffe	666 543
1	Kleinklemme	666 551
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Benötigte Geräte (alternativ mit pH-Box)

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	pH-Box	524 035
1	pH-Einstabmesskette	667 424
1	Magnetrührer	666 845
1	Becherglas, 250 ml, niedrige Form	664 103
1	Stativstab, 450 mm, Gewinde M10	666 523
1	Messpipette, 10 ml	665 997
1	Pipettierball	666 003
1	Bürette, 25 ml	665 845
1	Bürettentrichter	665 816
1	Einfach-Bürettenhalter	666 559
1	Kreuzmuffe	666 543
1	Kleinklemme	666 551
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Benötigte Chemikalien

Haushaltsessig dest. Wasser

 Natronlauge, c = 1 mol/l
 z.B. 500 ml: 673 8420

 Pufferlösung pH 4,00
 z.B. 250 ml: 674 4640

 Pufferlösung pH 7,00
 z.B. 250 ml: 674 4670

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Chemie-Box mit der pH-Elektrode wird in den Eingang A des am PC angeschlossenen Sensor-CASSY eingesteckt. Bei wesentlicher Abweichung der Temperatur von 25 °C empfiehlt sich der Einsatz eines Temperaturfühlers an Eingang T1. Die gemessene Temperatur der Lösung wird automatisch zur Kompensation der ermittelten Spannung an der pH-Elektrode verwendet.

Alternativ zur Chemie-Box wird die pH-Box mit der pH-Einstabmesskette in den Eingang A des Sensor-CASSY eingesteckt.

Aus dem vorhandenen Stativmaterial sowie Magnetrührer, Becherglas und Bürette wird eine Titrierapparatur aufgebaut. In das Becherglas werden ungefähr 100 ml destilliertes Wasser und mit Hilfe der Pipette genau 10 ml Haushaltsessig vorgelegt; die Bürette wird über den Trichter bis zur Nullmarkierung mit 1 molarer Natronlauge befüllt.

Die Einbauhöhe der pH-Elektrode sollte so eingestellt werden, dass das Messdiaphragma einerseits vollständig in die Flüssigkeit eingetaucht ist, andererseits aber nicht die Glasmembran vom rotierenden Rührstäbchen beschädigt werden kann. Zur Verdeutlichung des Äquivalenzpunktes können wenige Tropfen Phenolphthaleinlösung als Indikator zugegeben werden.

#### Kalibrierung

Für genaue Messungen muss beim ersten Mal und später in größeren Zeitabständen eine Kalibrierung der pH-Elektrode erfolgen:

- Einstellungen laden (Chemie-Box oder pH-Adapter S)
- Einstellungen laden (pH-Box)
- In Einstellungen pHA1 die Schaltfläche Korrigieren wählen.
- pH-Elektrode mit destilliertem Wasser abspülen, in die Pufferlösung pH 7,00 eintauchen und kurz bewegen.





- Als ersten Sollwert 7,00 eintragen und nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche Offset korrigieren betätigen.
- pH-Elektrode mit destilliertem Wasser abspülen, in die Pufferlösung pH 4,00 eintauchen und kurz bewegen.
- Als zweiten Sollwert 4,00 eintragen und nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche **Faktor korrigieren** betätigen.
- Für spätere Verwendungen die kalibrierten Einstellungen mit **F2** unter einem neuen Namen abspeichern.
- Sensor-CASSY, Elektrode und Chemie- bzw. pH-Box markieren, so dass sie später am gleichen Eingang wieder verwendet werden können (nur dann passt die gespeicherte Kalibrierung).
- Sind andere Messabstände als 0,2 ml gewünscht, so kann in den Einstellungen V im Feld Formel die Vorgabe geändert und z.B. "0,5\*n-0,5" für Abstände von 0,5 ml eingegeben werden.

## Versuchsdurchführung

- Kalibrierte Einstellungen verwenden oder laden.
- Den ersten Messwert mit der Taste **F9** oder der Schaltfläche ermitteln
- Die Natronlauge kontinuierlich langsam zutropfen lassen und in Abständen von 0,2 ml mit **F9** den pH-Wert aufnehmen.

## **Auswertung**

Am Äguivalenzpunkt (V = Veq) ist die vorgelegte Essigsäure vollständig mit der Natronlauge umgesetzt:

$$HAc + NaOH \rightarrow Na^{+} + Ac^{-} + H_{2}O.$$

Da die beiden Stoffe im Verhältnis 1:1 miteinander reagieren, berechnet sich die Konzentration der Essigsäure nach der Gleichung:

$$c_{HAc} \cdot V_{HAc} = c_{NaOH} \cdot V_{eq}$$

Zur Ermittlung des benötigten Volumens an NaOH wird der Äquivalenzpunkt durch CASSY Lab bestimmt. Dies geschieht einfach durch Betätigen der rechten Maustaste im Diagramm, Auswahl des Unterpunkts weitere Auswertungen und Anklicken von Äquivalenzpunkt bestimmen. Dazu muss man nur noch den gewünschten Kurvenbereich markieren, und sofort werden der Äquivalenzpunkt und der pKa-Wert der Kurve grafisch angezeigt. Die dazu gehörenden Werte stehen links unten in der Statuszeile und können als Text an eine beliebige Stelle im Diagramm übertragen werden.

## **Weitere Auswertung**

Weiterführende Berechnungen können einen Vergleich zwischen der gemessenen Konzentration in mol/l und der Angabe auf dem Etikett des Essigs in Vol.-% thematisieren.

Dazu berechnet man zunächst die Masse reiner Essigsäure in der Essiglösung, indem man deren Konzentration mit der Molmasse (MHAc = 60,05g/mol) multipliziert:


$$c_{HAc} \cdot M_{HAc} = \frac{m_{HAc}}{11}$$

Division des erhaltenen Wertes durch die Dichte reiner Essigsäure ( $\rho$ Hac = 1050g/l) ergibt den Volumenanteil reiner Essigsäure im titrierten Haushaltsessig, Multiplikation mit 100 den Prozentwert:

$$\frac{m_{HAc} \cdot 100}{11 \cdot \rho_{HAc}} = Vol.\%_{HAc}$$



# Titration von Essigsäure mit Natronlauge (pH und Leitfähigkeit)

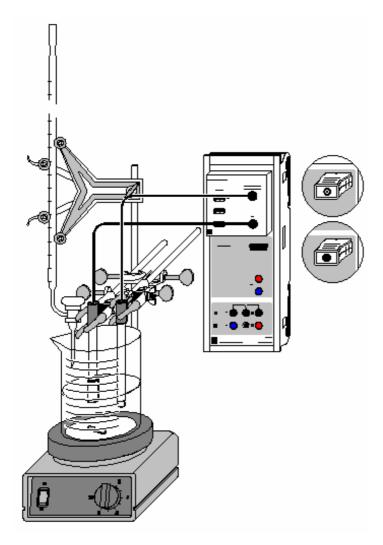





auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

- Beispiel laden (Chemie-Box)
- Beispiel laden (pH-Adapter S und Leitfähigkeits-Adapter S)

## **Gefahrenhinweis**

Säuren und Laugen wirken ätzend. Schutzbrille aufsetzen und säurefeste Handschuhe anziehen.

# Versuchsbeschreibung

Mit der Chemie-Box lassen sich mehrere Messungen parallel durchführen. Dies erlaubt die Betrachtung eines Versuchs unter mehreren Gesichtspunkten. Bei der Titration von Essigsäure mit Natronlauge können deshalb sowohl aus der pH-Messung als auch aus der Leitfähigkeit Informationen über den Verlauf der Reaktion gewonnen werden.

### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Chemie-Box oder pH/Leitfähigkeits-Adapter S	524 067(2+1)
1	Leitfähigkeitssensor	529 670
1	pH-Elektrode mit BNC-Stecker	667 4172

1			•	\
•	L	ľ	)	1

1	Magnetrührer	666 845
1	Becherglas, 250 ml, niedrige Form	664 103
1	Stativstab, 450 mm, Gewinde M10	666 523
1	Messpipette, 10 ml	665 997
1	Pipettierball	666 003
1	Bürette, 25 ml	665 845
1	Bürettentrichter	665 816
1	Einfach-Bürettenhalter	666 559
2	Kreuzmuffen	666 543
2	Kleinklemmen	666 551
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Benötigte Chemikalien

Essigsäure, c = 0,1 mol/l	z.B. 500 ml: 671 9560
Natronlauge, c = 0,1 mol/l	z.B. 500 ml: 673 8410
dest. Wasser	
Pufferlösung pH 4,00	z.B. 250 ml: 674 4640
Pufferlösung pH 7,00	z.B. 250 ml: 674 4670

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Chemie-Box mit Leitfähigkeitssensor und pH-Elektrode wird in den Eingang A des am PC angeschlossenen Sensor-CASSY eingesteckt.

Aus dem vorhandenen Stativmaterial sowie Magnetrührer, Becherglas und Bürette wird eine Titrierapparatur aufgebaut.

Im Becherglas werden ca. 120 ml destilliertes Wasser und mit Hilfe der Pipette genau 10 ml Essigsäure vorgelegt; die Bürette wird über den Trichter bis zur Nullmarkierung mit Natronlauge befüllt.

Um die Leitfähigkeitsmessung nicht durch das Einbringen von Referenzelektrolyt aus der pH-Elektrode zu verfälschen, muss diese vor Inbetriebnahme gut mit destilliertem Wasser abgespült werden. Außerdem sollte zum Druckausgleich die obere Öffnung der Elektrode frei gelegt werden. Beim Einbau muss beachtet werden, dass das Messdiaphragma der pH-Elektrode einerseits vollständig in die Flüssigkeit eintaucht, andererseits die Glasmembran aber nicht vom rotierenden Rührstäbchen beschädigt werden kann.

Der Leitfähigkeitssensor benötigt für genaue Messungen wegen seines Streufelds eine Mindesteintauchtiefe von 2 cm und mindestens 1 cm Abstand zur Gefäßwand und den anderen Einbauten (pH-Sensor, Rührstäbchen).

## Kalibrierung

Für genaue Messungen sollte beim ersten Mal und später in größeren Zeitabständen eine Kalibrierung der pH-Elektrode erfolgen:

- Einstellungen laden (Chemie-Box)
- Einstellungen laden (pH-Adapter S und Leitfähigkeits-Adapter S)
- In Einstellungen pHA1 Korrigieren wählen.
- pH-Elektrode mit destilliertem Wasser abspülen, in die Pufferlösung pH 7,00 eintauchen und kurz bewegen.
- Als ersten Sollwert 7,00 eintragen und nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche Offset korrigieren betätigen.
- pH-Elektrode mit destilliertem Wasser abspülen, in die Pufferlösung pH 4,00 eintauchen und kurz bewegen.
- Als zweiten Sollwert 4,00 eintragen und nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche Faktor korrigieren betätigen.
- Die Zellkonstante des Leitfähigkeitssensors zur Chemie-Box ist mit 0,58 bereits in CASSY Lab voreingestellt. Wird ein anderer Leitfähigkeitssensor verwendet, ist dessen Zellkonstante in den Einstellungen CA1 unter Korrigieren als Faktor einzutragen und die Schaltfläche Faktor korrigieren zu betätigen.
- Zur genaueren Bestimmung der Zellkonstante k\u00f6nnen Kalibrierl\u00f6sungen verwendet werden. Dazu werden Becherglas und Leitf\u00e4higkeitssensor zun\u00e4chst mit destilliertem Wasser, dann mit ca. 30-40 ml Kalibrierl\u00f6sung gesp\u00fclt. In weitere 50 ml der Kalibrierl\u00f6sung taucht man wie zur Messung



den Leitfähigkeitssensor (Abstände zu den Becherglaswänden einhalten), trägt in den Einstellungen CA1 unter **Korrigieren** den Sollwert in der zweiten Zeile ein und betätigt nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche **Faktor korrigieren**.

- Sensor-CASSY, Elektroden und Chemie-Box markieren, so dass sie später am gleichen Eingang wieder verwendet werden können (nur dann passt die gespeicherte Kalibrierung).
- Für spätere Verwendungen die kalibrierten Einstellungen mit **F2** unter einem neuen Namen abspeichern.
- Sind andere Volumenabstände als 0,2 ml gewünscht, so kann in den Einstellungen V im Feld Formel die Vorgabe geändert und z.B. "0,5\*n-0,5" für Abstände von 0,5 ml eingegeben werden.

## Versuchsdurchführung

- Kalibrierte Einstellungen verwenden oder laden.
- Die ersten Messwerte mit der Taste **F9** oder der Schaltfläche ermitteln
- 20 ml Natronlauge kontinuierlich langsam zutropfen lassen und in Abständen von 0,2 ml mit **F9** den pH-Wert und die Leitfähigkeit aufnehmen.
- Zum Einsatz von Motorbürette und Lichtschranke für die automatische Titration siehe die entsprechenden Versuchsbeispiele.

#### **Auswertung**

Die Ermittlung des Äquivalenzpunkts aus der Leitfähigkeit erfolgt grafisch. Zunächst betätigt man die rechte Maustaste im Koordinatensystem und wählt **Anpassung durchführen** und **Ausgleichsgerade**. Dann wird einer der beiden Kurvenbereiche markiert, dem die Gerade angepasst werden soll; dies sind die Bereiche rechts und links vom Knick der Leitfähigkeitskurve. Der Schnittpunkt der beiden angepassten Geraden gibt auf der x-Achse das Neutralisationsvolumen für die vorgelegte Essigsäure an. Er kann durch die Tastenkombination **Alt+S** mit einer senkrechten Linie markiert werden.

Für die Ermittlung des Äquivalenzpunkts über die pH-Messung wählt man nach Betätigung der rechten Maustaste im Diagramm weitere Auswertungen und Äquivalenzpunkt bestimmen. Nach Markierung der Kurve werden Äquivalenzpunkt und Halbäquivalenzpunkt automatisch berechnet und angezeigt. Durch den pH-Wert am Halbäquivalenzpunkt ist auch der pKa-Wert der Essigsäure gegeben. Die dazu gehörenden Werte stehen in der Statuszeile und können zur Beschriftung mit der linken Maustaste ins Diagramm gezogen werden.

#### Bemerkungen

Am Äquivalenzpunkt (V = Veq) befinden sich fast nur Natrium- und Acetationen in der Lösung:

$$HAc + Na^+ + OH^- \rightarrow Na^+ + Ac^- + H_2O$$


Die Konzentrationen der H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>- und der OH<sup>-</sup>-lonen sind sehr gering (pH ca. 8). Da die Ionenbeweglichkeit von Hydroxidionen wesentlich höher ist als diejenige der Acetationen, weist die Leitfähigkeitskurve am Äquivalenzpunkt einen deutlichen Knick auf: Vor Neutralisation der Essigsäure werden die Hydroxidionen vollständig mit der Essigsäure umgesetzt, so dass der Anstieg der Leitfähigkeit nur auf die entstehenden Acetat- und Natriumionen zurück zu führen ist (flache Steigung der Leitfähigkeitskurve).

Der kurze Abfall der Leitfähigkeit zu Beginn der Titration korrespondiert mit dem etwas steileren Anstieg des pH-Werts im gleichen Bereich: Aufgrund der für schwache Säuren geltenden Puffergleichung

$$\left[H_3O^+\right] = K_a \frac{\left[HA\right]}{\left[A^-\right]}$$

wird die Konzentration der H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>-Ionen nur durch das Verhältnis [HA]/[A<sup>-</sup>] bestimmt. Dieses nimmt zu Beginn der Titration besonders stark ab, da [A<sup>-</sup>] in der vorgelegten Essigsäure zunächst nahe Null ist und durch die Zugabe von Natronlauge schnell ansteigt. Da die H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>-Ionen eine besonders hohe Ionenbeweglichkeit aufweisen, verringert sich entsprechend auch die Leitfähigkeit.

## Automatische Titration von NH3 mit NaH2PO4 (Motorbürette)

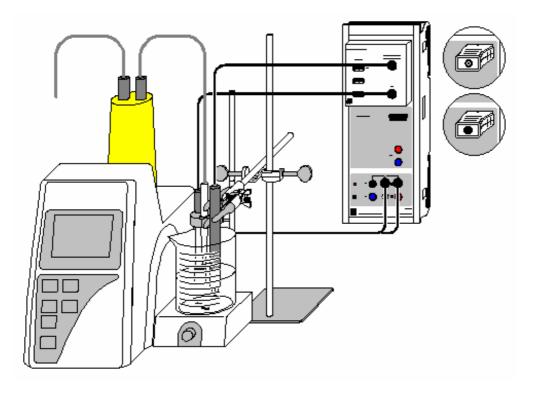

- Beispiel laden (Chemie-Box)
- Beispiel laden (pH-Adapter S und Leitfähigkeits-Adapter S)

## Versuchsbeschreibung

Bei Verwendung einer Motorbürette in Kombination mit CASSY kann eine Titration inklusive Messwertaufnahme voll automatisch durchgeführt werden.

Die Titration einer schwachen Base wie Ammoniak mit einer schwachen Säure wie Natriumdihydrogenphosphat ergibt eine sehr flach verlaufende pH-Kurve. Hier liefert die Messung der Leitfähigkeit leichter auswertbare Daten. Die gleichzeitige Aufnahme beider Kurven mit CASSY ermöglicht einen direkten Vergleich und eine Beurteilung der jeweiligen Genauigkeit der Äquivalenzpunktbestimmung.

## **Benötigte Geräte**

1 PC ab Windows 95/98/NT

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Chemie-Box oder pH/Leitfähigkeits-Adapter S	524 067(2+1)
1	Leitfähigkeitssensor	529 670
1	pH-Elektrode mit BNC-Stecker	667 4172
1	Motorkolbenbürette	665 825
1	Verbindungskabel zur Motorkolbenbürette	665 8251
1	Becherglas, 250 ml, niedrige Form	664 103
2	Messkolben, 100 ml	665 793
1	Vollpipette, 5 ml	665 974
1	Pipettierball	666 003
1	Bunsenstativ, 450 mm	666 502
1	Kreuzmuffe	666 543
1	Kleinklemme	666 551
1	Spatel	666 962
1	Uhrglas, z.B. 80 mm	664 154
1	Pulvertrichter, z.B. 60 mm	602 681
1	Waage (mindestens bis 100 g,	
	Auflösung 0,01 g)	



#### Benötigte Chemikalien

dest. Wasser

 Ammoniaklösung, verdünnt
 z.B. 500 ml: 670 3650

 NaH2PO4 \* 2 H2O,
 z.B. 50 g: 673 6000

 Pufferlösung pH 4,00
 z.B. 250 ml: 674 4640

 Pufferlösung pH 7,00
 z.B. 250 ml: 674 4670

#### Herstellung der Lösungen

Auf einem Uhrglas auf der Waage werden genau 1,56 g Natriumdihydrogenphosphat (0,01 mol) eingewogen, mit destilliertem Wasser über einen Trichter in einen 100 ml-Messkolben gespült und auf 100 ml aufgefüllt. Mit der Messpipette werden 5 ml Ammoniak in den anderen Messkolben gegeben und bis zur Markierung mit destilliertem Wasser aufgefüllt. So ergeben sich jeweils 0,1 molare Lösungen der beiden Stoffe.

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Chemie-Box mit Leitfähigkeitssensor und pH-Elektrode wird in den Eingang A des am PC angeschlossenen Sensor-CASSY eingesteckt.

Die Motorkolbenbürette wird mit der hergestellten NaH2PO4-Lösung gespült und befüllt (Gebrauchsanweisung beachten), und das Becherglas wird mit 10 ml Ammoniaklösung, 100 ml destilliertem Wasser und einem Rührstäbchen auf den Magnetrührer der Motorbürette gestellt. Im Menü "Dosieren" der Bürette wird als Sollvolumen 20 ml und als Dosiergeschwindigkeit 2,0 ml/min eingestellt.

Das Verbindungskabel wird einerseits an die beiden rechten Eingänge des Relais R des Sensor-CASSY, andererseits an den Handtaster-Eingang der Motorbürette angeschlossen.

Um die Leitfähigkeitsmessung nicht durch das Einbringen von Referenzelektrolyt aus der pH-Elektrode zu verfälschen, muss diese vor Inbetriebnahme gut mit destilliertem Wasser abgespült werden. Außerdem sollte zum Druckausgleich die obere Öffnung der Elektrode frei gelegt werden. Bei ihrer Befestigung (am Stativ der Motorbürette) muss beachtet werden, dass einerseits das Messdiaphragma der pH-Elektrode in die Flüssigkeit eintaucht, andererseits die Glasmembran aber nicht vom rotierenden Rührstäbchen beschädigt werden kann.

Der Leitfähigkeitssensor benötigt für genaue Messungen wegen seines Streufelds eine Mindesteintauchtiefe von 2 cm und mindestens 1 cm Abstand zur Gefäßwand und den anderen Einbauten (pH-Sensor, Rührstäbchen). Die Befestigung erfolgt deshalb am besten an einem eigenen Bunsenstativ.

#### Kalibrierung

Für genaue Messungen sollte beim ersten Mal und später in größeren Zeitabständen eine Kalibrierung der pH-Elektrode erfolgen:

- Einstellungen laden (Chemie-Box)
- Einstellungen laden (pH-Adapter S und Leitfähigkeits-Adapter S
- In Einstellungen pHA1 Korrigieren wählen.
- pH-Elektrode mit destilliertem Wasser abspülen, in die Pufferlösung pH 7,00 eintauchen und kurz bewegen.
- Als ersten Sollwert 7,00 eintragen und nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche **Offset korrigieren** betätigen.
- pH-Elektrode mit destilliertem Wasser abspülen, in die Pufferlösung pH 4,00 eintauchen und kurz bewegen.
- Als zweiten Sollwert 4,00 eintragen und nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche Faktor korrigieren betätigen.
- Die Zellkonstante des Leitfähigkeitssensors zur Chemie-Box ist mit 0,58 bereits in CASSY Lab voreingestellt. Wird ein anderer Leitfähigkeitssensor verwendet, ist dessen Zellkonstante in den Einstellungen CA1 unter **Korrigieren** als Faktor einzutragen und die Schaltfläche **Faktor korrigieren** zu betätigen.
- Zur genaueren Bestimmung der Zellkonstante können Kalibrierlösungen verwendet werden. Dazu werden Becherglas und Leitfähigkeitssensor zunächst mit destilliertem Wasser, dann mit ca. 30-40 ml Kalibrierlösung gespült. In weitere 50 ml der Kalibrierlösung taucht man wie zur Messung den Leitfähigkeitssensor (Abstände zu den Becherglaswänden einhalten), trägt in den Einstellungen



CA1 unter **Korrigieren** den Sollwert in der zweiten Zeile ein und betätigt nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche **Faktor korrigieren**.

- Sensor-CASSY, pH-Elektrode und Chemie-Box markieren, so dass sie später am gleichen Eingang wieder verwendet werden können (nur dann passt die gespeicherte Kalibrierung).
- Für spätere Verwendungen die kalibrierten Einstellungen mit F2 unter einem neuen Namen abspeichern.

Ist an der Motorbürette eine andere Dosierung als das Sollvolumen 20 ml und die Geschwindigkeit 2,0 ml/min gewünscht, müssen die Voreinstellungen in CASSY Lab geändert werden. Dies betrifft die Größe n (Tabellenindex) in den Messparametern und den Einstellungen Relais/Spannungsquelle und die Formel in den Einstellungen Volumen V.

#### Versuchsdurchführung

- · Kalibrierte Einstellungen verwenden oder laden.
- Titration durch Betätigen der Taste F9 oder der Schaltfläche starten. Aufnahme der Messwerte und Dosierung des Titriermittels von 0 bis 20 ml erfolgen automatisch.

#### **Auswertung**

NH3 und NaH2PO4 reagieren nach folgender Gleichung:

$$NH_3 + Na^+ + H_2PO_4^- \rightleftharpoons NH_4^+ + Na^+ + HPO_4^{2-}$$

Da Ammoniak nur eine schwache Base ist, befinden sich zu Beginn der Reaktion sehr wenige OH<sup>-</sup>-lonen in Lösung. Aus diesem Grund ist die Leitfähigkeit anfangs sehr gering und erhöht sich im Laufe der Titration durch die Entstehung der Reaktionsprodukte. Nach Erreichen des Äquivalenzpunkts, d.h. vollständiger Umsetzung des Ammoniaks, erhöht sich die Leitfähigkeit nur noch um den Betrag der Natrium- und der Dihydrogenphosphat-Ionen, wodurch die Leitfähigkeitskurve im Äquivalenzpunkt einen deutlichen Knick aufweist.


Zur grafischen Ermittlung des Äquivalenzpunkts aus der Leitfähigkeit betätigt man zunächst die rechte Maustaste im Koordinatensystem und wählt **Anpassung durchführen** und **Ausgleichsgerade**. Dann wird der Kurvenbereich markiert, in dem die Gerade angepasst werden soll; dies sind die beiden Bereiche rechts und links vom Knick der Leitfähigkeitskurve. Der Schnittpunkt der beiden angepassten Geraden gibt auf der x-Achse das Neutralisationsvolumen für den vorgelegten Ammoniak an. Er kann durch die Tastenkombination **Alt+S** mit einer senkrechten Linie markiert werden.

Für die Ermittlung des Äquivalenzpunkts über die pH-Messung wählt man nach Betätigen der rechten Maustaste im Diagramm weitere Auswertungen und Äquivalenzpunkt bestimmen. Nach Markierung der Kurve werden normalerweise Äquivalenzpunkt und Halbäquivalenzpunkt automatisch ausgegeben. Die dazu gehörenden Werte stehen dann in der Statuszeile und können zur Beschriftung mit der linken Maustaste ins Diagramm gezogen werden.

Die pH-Kurve verläuft jedoch im Beispiel so flach, dass eine Äquivalenzpunktbestimmung keine sinnvollen Ergebnisse zeigt. Zuverlässiger ist hier also die Bestimmung des Äquivalenzpunkts über die Leitfähigkeit.



## Automatische Titration (Tropfenzähler)

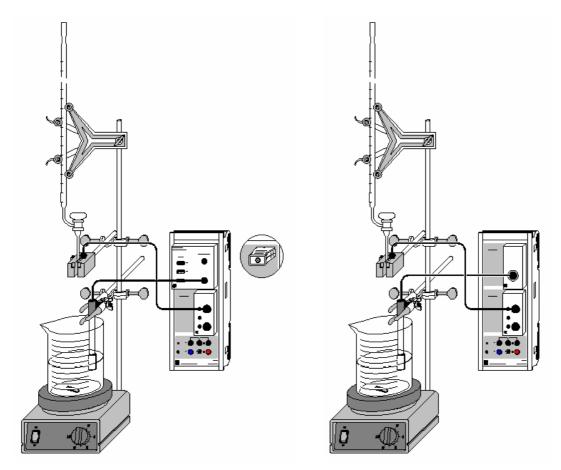



auch für Pocket-CASSY geeignet

- Beispiel laden (Chemie-Box oder pH-Adapter S)
- Beispiel laden (pH-Box)

## Gefahrenhinweis

Säuren und Laugen wirken ätzend. Schutzbrille, -handschuhe und Schutzkleidung anziehen.

#### Versuchsbeschreibung

Eine bedeutende Vereinfachung des Versuchsablaufs einer Titration stellt die Verwendung einer Lichtschranke als Tropfenzähler dar. Aus der Anzahl der Tropfen berechnet CASSY Lab automatisch das Zugabevolumen. Da auch die Messung des pH-Werts und die Auftragung in das pH (V)-Diagramm automatisch erfolgen, ist für die Auswertung nur noch das Ablesen des genauen Gesamtvolumens des zugegebenen Titriermittels notwendig.

Das Vorgehen bei Verwendung eines Tropfenzählers wird hier am Beispiel der Titration von Phosphorsäure mit Kalilauge dargestellt.

Phosphorsäure bildet in wässriger Lösung folgende Gleichgewichte:

1. 
$$H_3PO_4 + H_2O \rightleftharpoons H_2PO_4^- + H_3O^+$$
 (pK<sub>a1</sub> = 2,1)

2. 
$$H_2PO_4^- + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H_3O^+$$
 (pK<sub>a2</sub> = 7,1)

3. 
$$HPO_4^{2-} + H_2O \rightleftharpoons PO_4^{3-} + H_3O^+$$
 (pK<sub>a3</sub> = 12,3)



Da die pKa-Werte um 5 differieren, können die drei Gleichgewichte als voneinander unabhängig betrachtet werden.

Bei der Titration mit Kalilauge lassen sich die ersten beiden Protolysestufen der Phosphorsäure ermitteln. Da KOH allerdings keine wesentlich stärkere Base als das Phosphat-Ion ist, liegt das Gleichgewicht 3 nicht weit genug auf der rechten Seite, um auch den dritten Äquivalenzpunkt bestimmen zu können.

## Benötigte Geräte (mit Chemie-Box oder pH-Adapter S)

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Chemie-Box oder pH-Adapter S	524 067(2)
1	pH-Elektrode mit BNC-Stecker	667 4172
1	Temperaturfühler NiCr-Ni (bei Bedarf)	529 676
1	Timer-Box	524 034
1	Kombi-Lichtschranke	337 462
1	Verbindungskabel, 6-polig	501 16
1	Magnetrührer	666 845
2	Bechergläser, 250 ml, niedrige Form	664 103
1	Stativstab, 450 mm, Gewinde M10	666 523
1	Messpipette, 10 ml	665 997
1	Pipettierball	666 003
1	Bürette, 50 ml	665 847
1	Bürettentrichter	665 816
1	Einfach-Bürettenhalter	666 559
2	Kreuzmuffen	666 543
1	Kleinklemme	666 551
1	PC ab Windows 95/98/NT	

## Benötigte Geräte (alternativ mit pH-Box)

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	pH-Box	524 035
1	pH-Einstabmesskette	667 424
1	Timer-Box	524 034
1	Kombi-Lichtschranke	337 462
1	Verbindungskabel, 6-polig	501 16
1	Magnetrührer	666 845
2	Bechergläser, 250 ml, niedrige Form	664 103
1	Stativstab, 450 mm, Gewinde M10	666 523
1	Messpipette, 10 ml	665 997
1	Pipettierball	666 003
1	Bürette, 50 ml	665 847
1	Bürettentrichter	665 816
1	Einfach-Bürettenhalter	666 559
2	Kreuzmuffen	666 543
1	Kleinklemme	666 551
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Benötigte Chemikalien

Phosphorsäure, 10 %, 100 ml	674 3440
Kalilauge, c = 1 mol/l, 1 l	672 4460
Pufferlösung pH 4,00, 250 ml	674 4640
Pufferlösung pH 7,00, 250 ml	674 4670
dest. Wasser	

## Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Chemie-Box mit der pH-Elektrode wird in den Eingang A des am PC angeschlossenen Sensor-CASSY eingesteckt. Bei wesentlicher Abweichung der Temperatur von 25 °C empfiehlt sich der Einsatz eines Temperaturfühlers an Eingang T1. Die gemessene Temperatur der Lösung wird automatisch zur Kompensation der ermittelten Spannung an der pH-Elektrode verwendet.



Alternativ zur Chemie-Box wird die pH-Box mit der pH-Einstabmesskette in den Eingang A des Sensor-CASSY eingesteckt.

An den Eingang B schließt man die Timer-Box mit der über das 6-polige Kabel mit dem Anschluss E verbundenen Lichtschranke an.

Aus dem vorhandenen Stativmaterial sowie Magnetrührer, Becherglas und Bürette wird eine Titrierapparatur aufgebaut.

In das Becherglas werden knapp 100 ml destilliertes Wasser und mit Hilfe der Pipette 10 ml 10-prozentige Phosphorsäure (c(H3PO4) ca. 1,1 mol/l) vorgelegt; die Bürette wird über den Trichter bis zur Nullmarkierung mit 1-molarer Kalilauge befüllt.

Die Einbauhöhe der pH-Elektrode sollte so eingestellt werden, dass einerseits das Diaphragma vollständig in die Flüssigkeit eintaucht, andererseits die Glasmembran aber nicht vom rotierenden Rührstäbchen beschädigt werden kann.

Mit Hilfe der mitgelieferten Stativstange wird die Kombi-Lichtschranke so unter dem Auslass der Bürette montiert, dass austretende Tropfen durch den Schlitz der Lichtschranke in das Becherglas fallen und ein Signal am Sensor der Lichtschranke auslösen. Der Sensor befindet sich ca. 1 cm hinter der Öffnung der Lichtschranke. Das Auslösen eines Signals wird im Anzeigeinstrument NB1 und durch die rote Leuchtdiode an der Lichtschranke angezeigt. Zur Funktionsprüfung sollte man unmittelbar vor Versuchsbeginn einige Tropfen durch die Lichtschranke in ein leeres Becherglas fallen lassen. Danach stellt man den Zähler in den Einstellungen Ereignisse NB1 wieder auf Null.

#### Kalibrierung

Für genaue Messungen muss beim ersten Mal und später in größeren Zeitabständen eine Kalibrierung der pH-Elektrode erfolgen:

- Einstellungen laden (Chemie-Box oder pH-Adapter S)
- Einstellungen laden (pH-Box)
- In Einstellungen pH-Wert pHA1 Korrigieren wählen.
- pH-Elektrode mit destilliertem Wasser abspülen, in die Pufferlösung pH 7,00 eintauchen und kurz bewegen.
- Als ersten Sollwert 7,00 eintragen und nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche **Offset korrigieren** betätigen.
- pH-Elektrode mit destilliertem Wasser abspülen, in die Pufferlösung pH 4,00 eintauchen und kurz bewegen.
- Als zweiten Sollwert 4,00 eintragen und nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche Faktor korrigieren betätigen.
- Für spätere Verwendungen die kalibrierten Einstellungen mit **F2** unter einem neuen Namen abspeichern.
- Sensor-CASSY, pH-Elektrode und Chemie- bzw. pH-Box markieren, so dass sie später am gleichen Eingang wieder verwendet werden können (nur dann passt die gespeicherte Kalibrierung).

#### Versuchsdurchführung

- Kalibrierte Einstellungen verwenden oder laden.
- Die Messreihe mit der Taste **F9** oder der Schaltfläche starten.
- Den Hahn an der Bürette vorsichtig aufdrehen und die Kalilauge langsam zutropfen lassen.
- Alle fünf Sekunden wird automatisch ein Messwert (Volumen und pH-Wert) aufgenommen. Dafür ist es empfehlenswert, auf eine gleichbleibende Tropfgeschwindigkeit zu achten.
- Nach ungefähr 40 ml KOH-Zugabe wird der Hahn zugedreht, die Messung gestoppt (F9 oder und die Gesamtanzahl der Tropfen (No) und das genaue Volumen an zugegebener KOH (Vo) abgelesen.

#### Auswertung

Zunächst wird das durchschnittliche Volumen eines Tropfens KOH berechnet. Dazu lautet die allgemeine Formel "NB1 \* Vo / No" mit NB1 als Anzahl der Tropfen, Vo als Gesamtzugabevolumen und No als Gesamtanzahl der Tropfen am Ende der Titration. Dafür müssen im Feld Formel der Einstellungen Volumen V für No und Vo an Stelle von "754" und "40" die abgelesenen Werte eingetragen werden.




Die daraus automatisch ermittelte Titrationskurve weist mehrere charakteristische Bereiche auf, die den drei Protolyse-Gleichgewichten der Phosphorsäure zuzuordnen sind.

Die Ermittlung der Äquivalenzpunkte (V = Veq) erfolgt leicht in CASSY Lab: Nach Betätigen der rechten Maustaste im Diagramm und Anwahl von **weitere Auswertungen** und **Äquivalenzpunkt bestimmen** kann man den Kurvenbereich markieren, innerhalb dessen der Äquivalenzpunkt ermittelt werden soll. Nach erfolgter Markierung werden der berechnete Äquivalenzpunkt und der pKa-Wert automatisch angezeigt; die dazu gehörenden Werte stehen links unten in der Statuszeile und können mit der Maus als Text an eine beliebige Stelle im Diagramm übertragen werden.

Weitere Auswertungsmöglichkeiten in CASSY Lab sind im Versuchsbeispiel Titration von Phosphorsäure nachzulesen.

# Gaschromatographie (Trennung von Alkanen aus Feuerzeuggas)

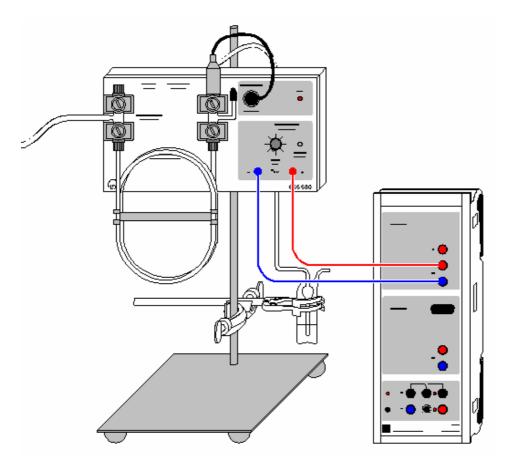



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

## ■ Beispiel laden

#### Versuchsbeschreibung

In diesem Versuch zur Trennung von Alkanen aus Feuerzeuggas wird die vom Detektor gelieferte, am Schreiberausgang des Gaschromatographen anliegende Spannung gegen die Zeit gemessen.

Zur qualitativen Analyse lassen sich die Retentionszeiten der einzelnen Peaks ermitteln und mit denen von Referenzsubstanzen vergleichen.

Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung des verwendeten Gaschromatographen.

## **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Gaschromatograph LD1	665 580
1	Trennsäule mit Dinonylphthalat	665 583
1	Kohlenwasserstoff-Sensor	665 582
1	Luftpumpe	662 286
1	Blasenzähler	309 064 75
1	Dosierspritze, 1 ml	665 957
1	Kanülen, 10 Stück	665 960
1	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501 45

1 PC ab Windows 95/98/NT



## Benötigte Chemikalien

Feuerzeuggas (Probe)

n-Butan, Druckgasdose (Referenz) 660 989 Feinregulierventil 660 980

## Versuchsaufbau (siehe Skizze)

- Gaschromatograph (GC) mit Trennsäule (Dinolylphthalat) und Kohlenwasserstoff-Sensor (Detektor) aufbauen.
- Eingang des GCs mit Luftpumpe verbinden, Ausgang mit Blasenzähler.
- · Luftpumpe einschalten.
- GC mit Steckernetzgerät verbinden: LED am GC leuchtet.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Mit den Nullpunktsreglern am GC die Nulllinie bei ca. UA1=0,05 V einstellen.
- Probemessung mit F9 starten
- Sobald eine stabile Nulllinie aufgezeichnet wird, die Probemessung wieder mit F9 stoppen.
- Mit der Dosierspritze zunächst ohne Kanüle vom Feuerzeug ca. 1 ml Gas mehrmals aufziehen. Dann Kanüle aufsetzen und das Gas bis auf 0,05 ml ausstoßen. Die verbliebenen 0,05 ml Gas in den Einspritzkopf des GCs injizieren.
- Aufzeichnung des Spannungsverlaufs erneut mit **F9** starten und solange fortsetzen, bis alle zu erwartenden Peaks erschienen sind und Messung wieder mit **F9** stoppen. Messreihe abspeichern.
- Zur Identifizierung einzelner Komponenten den Versuch mit einer Referenzsubstanz, z. B. n-Butan, wiederholen. Messreihe ebenfalls abspeichern.

#### Auswertung

Durch Zoomen (Auswertemenü über rechten Mausklick auf Diagramm) kann der entscheidende Kurvenausschnitt bildschirmfüllend dargestellt werden.

Zur Bestimmung der Retentionszeiten kann eine senkrechte Markierungslinie durch den Maximalwert eines Peaks gelegt oder der Peakschwerpunkt berechnet werden. Die Retentionszeit kann als Text in das Diagramm geschrieben werden. Der Vergleich der Retentionszeit des Referenzpeaks (n-Butan) mit denen der Komponenten in der Probe zeigt, dass es sich bei der 4. Substanz um n-Butan handelt.

Alternativ können die Kurven von Probe und Referenzsubstanz überlagert werden. Dazu beide Kurven hintereinander laden und die Abfrage "Soll die neue Messreihe zusätzlich zur vorhandenen Messreihe geladen werden?" bejahen.


Hinweis: Abweichungen der Retentionszeiten können durch Veränderung der Raumtemperatur während der Messungen entstehen.

## **Erweiterung/Variationen**

Wie am Beispiel des n-Butans beschrieben, lassen sich mit den entsprechenden Referenzsubstanzen (Ethan, Propan, i-Butan) auch die anderen Bestandteile des Feuerzeuggases identifizieren.

Durch die Aufnahme von Chromatogrammen der Gase aus verschiedenen Feuerzeugen lässt sich deren unterschiedliche Zusammensetzung nachweisen.

# **Gaschromatographie (Trennung von Alkoholen)**

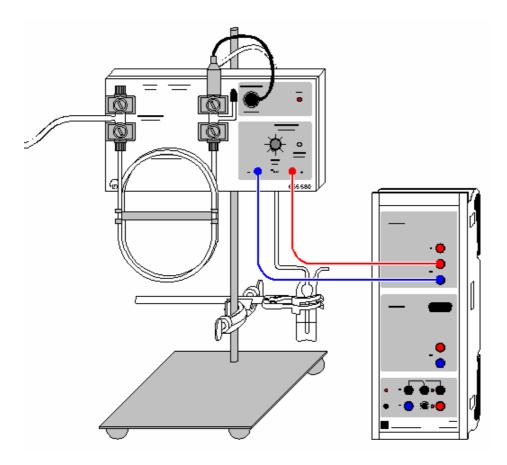



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

#### ■ Beispiel laden

## Versuchsbeschreibung

In diesem Versuch zur Trennung verschiedener Alkohole wird die vom Detektor gelieferte, am Schreiberausgang des Gaschromatographen anliegende Spannung gegen die Zeit gemessen.

Zur qualitativen Analyse lassen sich die Retentionszeiten der einzelnen Peaks ermitteln. Die Bestimmung der Peakflächen durch Integration erlaubt die quantitative Untersuchung der Probe.

Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung des verwendeten Gaschromatographen.

## **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Gaschromatograph LD1	665 580
1	Trennsäule mit Porapak P	665 584
1	Kohlenwasserstoff-Sensor (Detektor)	665 582
1	Luftpumpe	662 286
1	Blasenzähler	309 064 75
1	Mikroliterspritze, 1 μl	665 617
1	Ersatzkanülen, 3 Stück	665 616
1	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501 45
1	PC ab Windows 95/98/NT	

# Benötigte Chemikalien

Methanol, 250 ml	673 2700
Ethanol, abs., 250 ml	671 9700
Propanol-1, 250 ml	674 4310
Propanol-2, 250 ml	674 4400

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

- Probe vorbereiten, z. B. ein Gemisch verschiedener Alkohole wie: Methanol, Ethanol und Propanol.
- Gaschromatograph (GC) mit Trennsäule (Porapak P) und Kohlenwasserstoff-Sensor (Detektor) aufbauen.
- Eingang des GCs mit Luftpumpe verbinden, Ausgang mit Blasenzähler.
- · Luftpumpe einschalten.
- GC mit Steckernetzgerät verbinden: LED am GC leuchtet.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Mit dem Nullpunktsregler am GC die Nulllinie bei ca. UA1=0,05 V einstellen.
- Probemessung mit F9 starten
- Sobald eine stabile Nulllinie aufgezeichnet wird, die Probemessung wieder mit **F9** stoppen.
- Mit der Mikroliterspritze 0,5 μl des Alkohol-Gemisches in den Einspritzkopf des GCs injizieren.
- Aufzeichnung des Spannungsverlaufs erneut mit **F9** starten und solange fortsetzen, bis alle zu erwartenden Peaks erschienen sind und Messung wieder mit **F9** stoppen

#### **Auswertung**

Durch Zoomen (Auswertemenü über rechten Mausklick auf Diagramm) kann der entscheidende Kurvenausschnitt bildschirmfüllend dargestellt werden.

Zur Bestimmung der Retentionszeiten kann eine senkrechte Markierungslinie durch den Maximalwert eines Peaks gelegt oder der Peakschwerpunkt berechnet werden. Die Retentionszeit kann als Text in das Diagramm geschrieben werden.


Zur quantitativen Analyse des Gemisches werden die Peakflächen durch Integration bestimmt. Dann ermittelt man den Flächenanteil eines Peaks bezogen auf die Gesamtfläche aller Peaks. Im Beispiel beträgt die Gesamtfläche aller Peaks 950 Vs. Der Flächenanteil des Ethanols ist somit 206 Vs / 950 Vs = 22 %. Die exakte Konzentrationsbestimmung erfolgt dann durch Kalibrierung mit den Einzelsubstanzen oder nach der Additionsmethode.

#### **Erweiterung/Variationen**

Nach Aufnahme einer Kalibrierreihe für bekannte Ethanolkonzentrationen kann der Ethanolgehalt in verschiedenen alkoholischen Getränken bestimmt werden.

Durch Erwärmen der Säule in einem Wasserbad können auch längerkettige Alkohole getrennt werden.

# **Gaschromatographie (Trennung von Luft)**

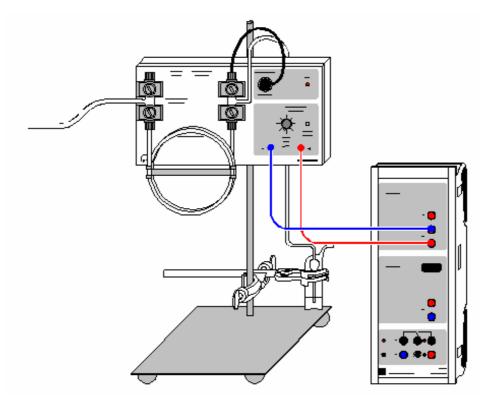



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

#### Versuchsbeschreibung

In diesem Versuch zur Trennung der Gase in Luft wird die vom Wärmeleitfähigkeitsdetektor gelieferte, am Schreiberausgang des Gaschromatographen anliegende Spannung gegen die Zeit gemessen. Als Trägergas dient hier Wasserstoff, der einem Hydridspeicher entnommen wird.

Die Bestimmung der Peakflächen durch Integration erlaubt die quantitative Untersuchung der Probe. Zur qualitativen Analyse lassen sich die Retentionszeiten der einzelnen Peaks ermitteln und mit denen von Referenzsubstanzen vergleichen.

Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung des verwendeten Gaschromatographen.

## **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Gaschromatograph LD1	665 580
1	Trennsäule mit Molekularsieb	665 585
1	Wärmeleitfähigkeitsdetektor	665 581
1	Metallhydridspeicher	661 005
1	Regulierventil	666 4792
1	Blasenzähler	309 06 475
1	Dosierspritze, 5 ml	665 955
1	Kanülen, 10 Stück	665 960
1	Paar Kabel, 50 cm, rot und blau	501 45

1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

- Gaschromatograph (GC) mit Trennsäule (Molekularsieb) und Wärmeleitfähigkeitsdetektor (WLD) aufbauen.
- Eingang des GCs mit Metallhydridspeicher und Regulierventil verbinden, Ausgang mit Blasenzähler.
- Durch Öffnen des Regulierventils Wasserstoff durch den GC strömen lassen.
- GC mit Steckernetzgerät verbinden: LED am GC leuchtet.
- Um ein positives Signal zu erhalten, muss bei den Verbindungskabeln zum CASSY die Polarität vertauscht werden (Die Wärmeleitfähigkeit der zu trennenden Substanzen ist geringer als die des Wasserstoff).

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Mit den Nullpunktsreglern am GC die Nulllinie bei ca. UA1=0,05 V einstellen.
- Probemessung mit **F9** starten
- Sobald eine stabile Nulllinie aufgezeichnet wird, die Probemessung wieder mit F9 stoppen.
- Mit der Dosierspritze 2 ml Luft in den Einspritzkopf des GCs injizieren.
- Aufzeichnung des Spannungsverlaufs erneut mit **F9** starten und solange fortsetzen, bis alle zu erwartenden Peaks erschienen sind und Messung wieder mit **F9** stoppen.

#### Auswertung

Durch Zoomen (Auswertemenü über rechten Mausklick auf Diagramm) kann der entscheidende Kurvenausschnitt bildschirmfüllend dargestellt werden.

Zur quantitativen Analyse des Gemisches werden die Peakflächen durch Integration bestimmt. Dann ermittelt man den Flächenanteil eines Peaks bezogen auf die Gesamtfläche aller Peaks. Im Beispiel beträgt die Gesamtfläche aller Peaks 37,85 Vs. Der Flächenanteil der ersten Komponente (Sauerstoff) ist somit 8,12 Vs / 37,85 Vs = 21 %. Die zweite Substanz (Stickstoff) ist zu 29,73 Vs / 37,85 Vs = 79 % enthalten. Durch eine ähnliche Wärmekapazität beider Gase erübrigt sich die für eine exakte Konzentrationsbestimmung sonst erforderliche Kalibrierung mit den Einzelsubstanzen oder nach der Additionsmethode.


Hinweis: Der Anstieg der Nulllinie (Drift) ab dem zweiten Peak ist durch eine Veränderung der Raumtemperatur während der Messung verursacht worden.

#### Erweiterung

Da mit dieser Anordnung auch die Auftrennung von Kohlenmonoxid und Methan möglich ist, lassen sich auch andere Gasgemische wie z.B. Biogas untersuchen.



# Aufnahme des Spektrums einer Rohchlorophyll-Lösung (mit dem Spektralphotometer 667 3491)

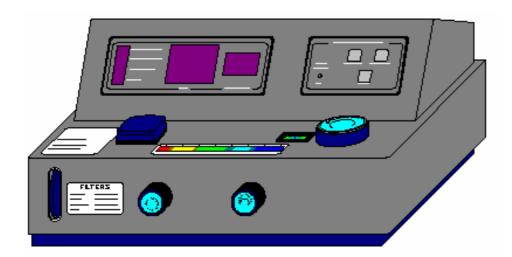

#### ■ Beispiel laden

## Versuchsbeschreibung

Zur Aufnahme des Spektrums wird die Transmission der Chlorophylllösung im Wellenlängenbereich von 360 bis 800 nm aufgenommen. Aus dem Spektrum lassen sich anschließend die Absorptionsmaxima der Blattfarbstoffe (das Wirkungsspektrum der Photosynthese) ermitteln.

## **Benötigte Geräte**

1 Digitales Spektralphotometer 667 3491

#### Zur Herstellung der Rohchlorophylllösung erforderlich:

1	Mörser	667 094
1	Pistill	667 095
1	Erlenmeyer, 100 ml, SB 19	664 241
1	Gummistopfen, SB 19	667 255
1	Trichter	602 670
	Rundfilter, d=110 mm, 100 St.	661 034
1	Seesand, gereinigt, 250 g	674 8200
1	Aceton, 250 ml	670 0400

#### Gefahrenhinweis



Aceton ist leicht entzündlich. Von Zündquellen fernhalten.

#### Versuchsvorbereitung

- Getrocknete Brennnesselblätter (Tee) alternativ frisches Gras oder andere Blätter grob zerkleinern und in den Mörser geben.
- Etwas Seesand und zunächst nur wenig Aceton zugeben, so dass alles zu einer Art Brei zerrieben werden kann.
- Nach 1-2 Minuten Zerreiben zusätzlich ca. 10 bis 20 ml Aceton zugeben und umrühren.
- Die jetzt deutlich grün gefärbte Lösung mit Hilfe des Trichters und eines gefalteten Rundfilters in den Erlenmeyerkolben filtrieren.
  - Falls der Versuch nicht sofort durchgeführt wird, den Erlenmeyerkolben mit der Rohchlorophylllösung verschlossen an einem dunklen Ort aufbewahren.
- Für den Versuch muss ein Teil der Lösung soweit verdünnt werden, dass die Transmission bei 605 nm über 0 % liegt.





- Das Digitale Spektralphotometer mit dem seriellen Kabel an den Computer anschließen und einschalten. Bedienungsanleitung des Gerätes beachten.
- Am Rechner das Programm CASSY Lab starten. Die verwendete serielle Schnittstelle und als angeschlossenes Gerät **Digitales Spektralphotometer (667 3491)** auswählen.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Je eine Rundküvette zu etwa ¾ mit der Rohchlorophylllösung (Probenlösung) und der Referenzlösung (das reine Lösungsmittel, hier: Aceton) füllen.
- Am Spektralphotometer die Anfangswellenlänge von 340 nm einstellen.
   (Zur generellen Bedienung des Gerätes siehe die zugehörige Gebrauchsanweisung.)
- Mit der Referenzküvette den 100 %T-Abgleich durchführen, dann die Probenküvette einsetzen.
- Den angezeigten Messwert und die zugehörige Wellenlänge durch Drücken von **F9** (oder Anklicken des Uhrensymbols) übernehmen. Der Wert wird nun in der Tabelle und in der Grafik dargestellt.
- Die Messwellenlänge um 5 nm erhöhen und Abgleich sowie Messung erneut vornehmen.
- Nach Erreichen der Messwellenlänge von 800 nm die Messung beenden.

## **Anmerkung**

Bei den hier beschriebenen Messbedingungen dauert die Aufnahme der Messwerte etwa 1 Stunde. Die Messdauer kann verkürzt werden, indem nur alle 10 nm gemessen und/oder die Messung bereits bei 730 nm beendet wird.

#### **Auswertung**

Die Darstellung des Spektrums kann sowohl als Transmission T wie auch als Absorption A = 100-T oder als Extinktion  $E = -\log(T/100)$  erfolgen.

Deutlich erkennbar ist die starke Absorption (verringerte Transmission) im Bereich von 405 nm (blaues Licht) und 660 nm (rot-orange). Zur Ermittlung und Markierung lässt sich über das Auswertungsmenü (rechter Mausklick auf Grafik) als Markierung eine senkrechte Linie setzen. Mit Text lässt sich die markierte Wellenlänge an die Linie bzw. Kurve schreiben.

Durch die Absorption in diesen Teilen des sichtbaren Lichtspektrums tritt der übrige Teil bei der Reflexion (Blattoberfläche) oder in der Durchsicht (Lösung) stärker hervor. Dieser Teil um ca. 550 nm entspricht dem grünen Anteil des Lichtes, was der Grund ist, warum eine Chlorophylllösung grün erscheint und Blätter ebenfalls grün sind.

Durch Einstrahlung in den Absorptionsmaxima erhält man auch die höchste Photosyntheseleistung, d. h. der Kurvenverlauf der Absorption bzw. Extinktion stellt das Wirkungsspektrum der Photosynthese dar.


Genauer betrachtet ist dieses Spektrum eine Überlagerung dreier Einzelspektren: dem von Chlorophyll a, Chlorophyll b und  $\beta$ -Carotin. Eine Auftrennung der einzelnen Blattfarbstoffe ist z. B. dünnschichtchromatographisch möglich.

#### Weitere Versuchsmöglichkeiten

- Neben Chlorophyll können auch Spektren von beliebigen anderen farbigen Lösungen untersucht werden.
- Zur schnelleren Durchführung der Messung kann auch eine etwas gröbere Auflösung (z. B. in 10 nm Schritten) und ein anderer Wellenlängenbereich gewählt werden.
- Eine wesentlich schnellere und komfortablere Aufnahme von Spektren ermöglicht das Diodenarray-Photometer (667 347).
- Die Abhängigkeit der Transmission und Extinktion von der Konzentration lässt sich durch Messung einer Konzentrationsreihe von z. B. einer Kupfersulfat-Lösung im Absorptionsmaximum zeigen.
- Für kinetische Untersuchen (z. B. der Entfärbung von Kristallviolett) wird im Absorptionsmaximum gegen die Zeit gemessen. Über die Möglichkeiten der Formeleingabe und entsprechende Darstellungen und Auswertungen können sowohl die Reaktionsordnung als auch die Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion ermittelt werden.



## Reaktion von Marmor mit Salzsäure (Carbonatbestimmung)

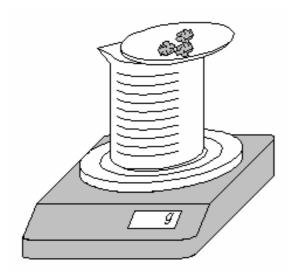

#### ■ Beispiel laden

#### **Gefahrenhinweis**

Salzsäure wirkt ätzend. Schutzbrille aufsetzen.

## Versuchsbeschreibung

Durch die Entwicklung von CO<sub>2</sub> während der Reaktion von Marmor mit Salzsäure kommt es zu einer Massenabnahme, die mit einer Waage registriert wird (es ist kein CASSY erforderlich).

#### **Benötigte Geräte**

1	CASSY Lab Elektronische Waage mit Datenausgang und Anschlusskabel oder	524 200 667 795 729 769
1	Elektronische Waage mit Einbausatz und Schnittstellenkabel	667 7780 667 7791 667 7796
1		664 130
1 1	Uhrglas, $\emptyset$ = 80 mm PC ab Windows 95/98/NT	664 154

#### Benötigte Chemikalien

Marmor, Stücke, 250 g	673 2500
Salzsäure, c = 2 mol/l, 500 ml	
(ca. 6-7%ig)	674 6920

## Versuchsvorbereitung (siehe Skizze)

Es werden vom Programm die von LD Didactic vertriebenen Waagen der Firmen Sartorius, Mettler und Ohaus mit seriellem Datenausgang unterstützt.

Die Waage wird über das Verbindungskabel an eine serielle Schnittstelle des Computers (z. B. COM2) angeschlossen. Da sich die Kabel der verschiedenen Hersteller unterscheiden, ist es erforderlich, das jeweils vom Hersteller vorgesehene Schnittstellenkabel zu benutzen, um das korrekte Funktionieren der Rechnerverbindung sicherzustellen.

Das Becherglas wird mit ca. 100 ml etwa 6%iger Salzsäure gefüllt und auf die Waage gestellt. Auf das Becherglas wird das Uhrglas gesetzt. Die Waage wird durch Drücken der Tara-Taste auf Nullstellung gebracht. Dann werden auf dem Uhrglas etwa 5 g Marmorstücke eingewogen.



## Versuchsdurchführung

■ Einstellungen laden

 Waage als Messgerät in den Allgemeinen Einstellungen (z. B. über F5 erreichbar) der gewünschten seriellen Schnittstelle zuordnen (z. B. COM2).

In Einstellungen Masse m Baudrate und Mode der Waage anpassen:

Einstellungen ab Werk bei Sartorius-Waagen:

Mode: 701 Baudrate: 1200

Einstellungen ab Werk bei Mettler-Waagen:

Mode: 8N1 Baudrate: 9600

 In einem Punkt müssen die werkseitigen Einstellungen der Waage geändert werden. Dazu Gebrauchsanweisung der Waage beachten:

Sartorius: Datenübertragung als "Autoprint ohne Stillstand" statt "Manuell nach Stillstand"

Mettler: kontinuierliche Datenübertragung ("S.Cont")

• Alle gesendeten Massewerte werden angezeigt (Problembehebung).

- Masse der Marmorstücke in Berechnung des Massenanteils eintragen. Dazu in den Einstellungen w den Beispielwert 4,96 durch den aktuell angezeigten Wert ersetzen.
- Messung mit F9 starten.
- Sofort die Reaktion einleiten, indem die Marmorstückchen durch Kippen des Uhrglases in das Becherglas gegeben werden. Das Uhrglas schräggestellt auf dem Becherglas belassen.
- Reaktion bis zur völligen Auflösung des Marmors aufnehmen und verfolgen.
- Messung mit F9 stoppen

## **Auswertung**

Die störenden Gewichtsschwankungen, die durch das "Hineinkippen" des Marmors hervorgerufen wurden, können korrigiert werden, indem die "Ausreißer" in der Tabelle mit der Maus angeklickt und auf den Anfangswert (im Beispiel: 4,96 g) gesetzt werden.

Aus den Kurvenverläufen der Masse m (in g) bzw. des Massenanteil w (in %) ist zunächst eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit zu erkennen, die dann immer mehr (exponentiell) abnimmt, weil die Konzentration der Reaktanden (bzw. die Anzahl der reagierenden Moleküle bzw. Ionen) geringer wird.

Aus dem Massen-Endwert, der sich am besten der Tabelle entnehmen lässt, kann der Anteil des bei der Reaktion entwichenen CO<sub>2</sub> im Marmor (CaCO<sub>3</sub>) ermittelt werden:

$$CaCO_3 + 2 HCI \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$$

Der experimentell bestimmte Anteil des CO2 nach der Beispiel-Messreihe ist


$$mCaO = 2.85 \text{ g}/4.96 \text{ g} = 57.5 \%$$
  $mCO_2 = 100 \% - 57.5 \% = 42.5 \%$ 

Der theoretische Wert beträgt

 $mCO_2 = CO_2/CaCO_3 = 44.0 g/100.0 g = 44.0 %.$ 



## Harnstoffspaltung durch Urease (Reaktion 0. Ordnung)

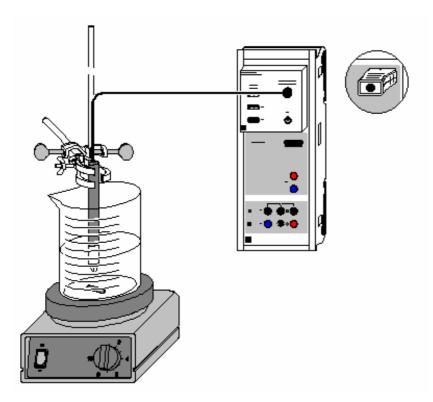



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

#### Beispiel laden

#### Versuchsbeschreibung

Die Betrachtung der enzymatischen Harnstoffspaltung durch Urease erlaubt mehrere Blickwinkel. Zunächst kann diese Reaktion als Beispiel für eine Reaktion nullter Ordnung dienen. Diese Reaktionsordnung zeigt sich im linearen Anstieg der Produktkonzentration.

Des weiteren kann man an ihr die Kinetik der Katalyse betrachten: Zunächst stehen Substrat und Enzym im Gleichgewicht mit einem Enzym-Substrat-Komplex. Dieses Gleichgewicht kann schon mit der diffusionsbestimmten Anlagerung eines Substrats an eine katalytisch wirksame Oberfläche verglichen werden. Der Enzym-Substrat-Komplex wird dann in einem zweiten Schritt schnell zu den Produkten umgesetzt.

Darüber hinaus kann die Reaktion als Einstieg in die Enzymkinetik genutzt werden: Anhand mehrerer Messungen kann die maximale Reaktionsgeschwindigkeit, die Michaeliskonstante und die Enzymkonzentration bestimmt werden.

Da im Verlauf der Hydrolyse von Harnstoff

$$\text{H}_2\text{N-CO-NH}_2 + 2 \text{ H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{Urease}} 2 \text{ NH}_4^+ + \text{CO}_3^{2-}$$

das in mehrere Ionen dissoziierende Ammoniumcarbonat entsteht, kann die Reaktion durch Leitfähigkeitsmessungen verfolgt werden. Die Konzentration der Produkte und die Geschwindigkeit der Reaktion wird aus den ermittelten Daten berechnet.

## Benötigte Geräte

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Chemie-Box oder Leitfähigkeits-Adapter S	524 067(1)
1	Leitfähigkeitssensor	529 670

1	1
١	יים

1	Magnetrührer	666 845
•	3	
1	Stativstab, 450 mm, Gewinde M10	666 523
1	Kreuzmuffe	666 543
1	Becherglas, 100 ml, hohe Form	664 137
1	Becherglas, 150 ml, hohe Form	602 010
2	Wägeschiffchen	602 763
1	Messpipette, 10 ml	665 997
1	Pipettierball	666 003
1	Messkolben, 100 ml	665 793
1	Uhrglas, z.B. 80 mm	664 154
1	Pulvertrichter, z.B. 60 mm	602 681
2	Reagenzgläser aus	664 043
2	Gummistopfen, Ø 1418 mm	667 253
1	Spatel	666 961
1	Waage, Auflösung 0,01 g	
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Benötigte Chemikalien

Ammoniumcarbonat, z.B. 100 g	670 3900
Harnstoff, z.B. 100 g	672 1700
Urease (1 U/mg), z.B. 5 g	675 2810
Kupfer(II)-sulfat-5-hydrat, z.B. 100 g	672 9600
destilliertes Wasser	

#### Hinweis zu den Chemikalien

Bei Raumtemperatur denaturiert Urease innerhalb weniger Stunden. Deshalb darf Urease nur wenige Minuten außerhalb des Kühlschranks stehen.

Ammoniumcarbonat reagiert an der Luft langsam zu Ammoniumbicarbonat. Dadurch wird die Leitfähigkeitsmessung verfälscht. Keine alten Vorräte verwenden.

### Herstellung der Lösungen

0,96 g Ammoniumcarbonat auf dem Uhrglas abwiegen und über den Trichter in den 100-ml-Messkolben spülen. Den Messkolben bis zur Markierung auffüllen und Ammoniumcarbonat vollständig lösen.

In jeweils ein Wägeschiffchen 0,10 g Urease und 0,60 g Harnstoff einwiegen. Die Substanzen in die beiden Reagenzgläser füllen und evtl. im Wägeschiffchen verbleibende Reste mit genau 10 ml destilliertem Wasser mit Hilfe der Pipette in die Reagenzgläser spülen.

Die Reagenzgläser mit den Gummistopfen verschließen und die Substanzen durch Schütteln zur Lösung bringen. Es entstehen 10 ml einer einmolaren Harnstofflösung und 10 ml einer Ureaselösung mit einer Enzymaktivität von 10000 U/I - d.h. mit der angegebenen Aktivität der Urease von 1U/mg können pro Minute und Liter 10 mmol des Substrats umgesetzt werden.

#### Kalibrierung

## ■ Einstellungen laden

Die Zellkonstante des Leitfähigkeitssensors zur Chemie-Box ist mit 0,58 bereits in CASSY Lab voreingestellt.

Wird ein anderer Leitfähigkeitssensor verwendet, ist dessen Zellkonstante in den Einstellungen Leitfähigkeit CA1 unter **Korrigieren** als Faktor einzutragen und die Schaltfläche **Faktor korrigieren** zu betätigen.

Zur genaueren Bestimmung der Zellkonstante können Kalibrierlösungen verwendet werden:

- Dazu das 100-ml-Becherglas und den Leitfähigkeitssensor zunächst mit destilliertem Wasser, dann mit ca. 30-40 ml Kalibrierlösung spülen.
- In weitere 50 ml der Kalibrierlösung taucht man wie zur Messung den Leitfähigkeitssensor (Abstände zu den Becherglaswänden einhalten), trägt in den Einstellungen Leitfähigkeit CA1 unter Korrigieren den Sollwert in der zweiten Zeile ein und betätigt nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche Faktor korrigieren.



## Versuchsvorbereitung (siehe Skizze)

Die Chemie-Box mit dem Leitfähigkeitssensor an den Eingang A des Sensor-CASSY anschließen.

Das 100-ml-Becherglas und den Leitfähigkeitssensor mit ca. 30 ml der Ammoniumcarbonatlösung spülen. Die Spüllösung wegschütten, restliche Ammoniumcarbonatlösung in das Becherglas füllen und die Leitfähigkeit dieser Lösung messen. Dabei darauf achten, dass der Leitfähigkeitssensor mindestens 2 cm tief eintaucht und sein Abstand zu den Gefäßwänden mindestens 1 cm beträgt (siehe Gebrauchsanweisung).

Den Messwert in den Einstellungen κ1 im Feld Formel an Stelle der Vorgabe eintragen. Er wird zur Berechnung der Harnstoffkonzentration benötigt, da angenommen wird, dass nach vollständiger Hydrolyse des Harnstoffs eine 0,1-molare Ammoniumcarbonatlösung vorliegen würde.

Aus Magnetrührer, Stativmaterial, Leitfähigkeitssensor und dem zweiten Becherglas wird eine Apparatur zur Leitfähigkeitsmessung aufgebaut. Dabei ist wieder darauf zu achten, dass der Leitfähigkeitssensor ausreichenden Abstand zu den Gefäßwänden und dem Rührstäbchen aufweist.

Das Becherglas wird mit genau 80 ml destilliertem Wasser befüllt (Messpipette benutzen), die Harnstofflösung hinzugegeben und der Magnetrührer angestellt. Die im Anzeigeinstrument CA1 angegebene Leitfähigkeit sollte bei reinen Chemikalien 0,02 mS/cm nicht überschreiten.

## Versuchsdurchführung

- Kalibrierte Einstellungen verwenden oder laden.
- Messung mit **F9** oder der Schaltfläche start
- Ureaselösung zu der Harnstofflösung ins Becherglas schütten.
- Nach 2 bis 3 Minuten mit dem Spatel einige Kristalle Kupfersulfat zu der Lösung geben. Den Zeitpunkt der Zugabe im Diagramm über die Tastenkombination Alt+S mit einer senkrechten Linie versehen.
- Abwarten, bis die Leitfähigkeitskurve wieder linear verläuft, dann die Messung mit **F9** oder der Schaltfläche beenden.

## **Auswertung**

Zur Auswertung sind mehrere Diagramme vorbereitet:

- 1. Im Diagramm **spezif. Leitfähigkeit** sind die Messwerte der Leitfähigkeit gegen die Zeit aufgetragen. Deutlich wird ein nahezu linearer Anstieg der Leitfähigkeit vor der Zugabe des Kupfersulfats und ein annähernd waagerechter Kurvenabschnitt nach vollständigem Lösen des Kupfersulfats. Dies zeigt die Wirkung des Schwermetalls als Enzymgift.
- 2. Das Diagramm **Harnstoffkonzentration** zeigt den aus der spezifischen Leitfähigkeit berechneten Konzentrationsverlauf des Harnstoffs. Dies geschieht nach folgender Formel:

$$\left[ \text{NH}_2 \text{CONH}_2 \right] = \frac{\kappa_1 - \text{C}_{\text{A1}}}{\kappa_1 - \kappa_0} \cdot 100 \text{ mmol/I}$$

Hier ist  $\kappa_1$  die vor der Versuchsdurchführung gemessene Leitfähigkeit der Ammoniumcarbonatlösung (Leitfähigkeit am Ende der Reaktion), CA1 die zum Zeitpunkt t gemessene Leitfähigkeit,  $\kappa_0$  die Leitfähigkeit der Lösung zu Reaktionsbeginn und 100 mmol/l die Konzentration des Harnstoffs zu Beginn der Reaktion. Zur Berechnung der Harnstoffkonzentration muss in den Einstellungen  $\kappa_0$  im Feld Formel noch der erste Leitfähigkeitswert der Messung an Stelle der Vorgabe eingetragen werden.

Diese Berechnung der Harnstoffkonzentration ist bis zum Zeitpunkt der Kupfersulfat-Zugabe korrekt (Bereich A im Diagramm); danach wird CA1 auch von den anwesenden Kupfer- und Sulfationen beeinflusst (Bereiche B und C). Nach vollständigem Lösen des Kupfersulfats ist jedoch die relative Änderung der Leitfähigkeit (und damit die Steigung der Kurve der Harnstoffkonzentration) wieder nur von der weiteren Harnstoffhydrolyse abhängig (C). Deshalb kann auch die Reaktionsgeschwindigkeit nach der Vergiftung der Urease bestimmt werden.

Die Steigung der resultierenden Geraden in der Auftragung der Harnstoffkonzentration gegen die Zeit gibt den Wert für k2 · [ES] an. Da [ES] im Fließgleichgewicht nahezu konstant ist (siehe theoretischer Hintergrund), ergibt sich für die Reaktionsgeschwindigkeit r annähernd eine Gerade. Zur Berechnung



der Anfangsgeschwindigkeit der Reaktion legt man dem Kurvenbereich bis  $t\approx 60$  s eine Gerade an. Dazu betätigt man im Diagramm die rechte Maustaste, wählt **Anpassung durchführen** und **Ausgleichsgerade** und markiert den angegebenen Kurvenbereich. Die Steigung der Gerade wird als Parameter A links unten in der Statuszeile angegeben und kann mit der linken Maustaste oder mit **Alt+T** in das Diagramm übertragen werden. Ebenso bestimmt man die Steigung des zweiten linearen Kurvenbereichs nach Zugabe des Kupfersulfats. Ein Vergleich der beiden Steigungen ergibt, dass die Reaktion fast vollständig gestoppt ist.

3. Im Diagramm Reaktionsgeschwindigkeit ist die zeitliche Ableitung der Harnstoffkonzentration aufgetragen. Deutlich wird die Konstanz der Reaktionsgeschwindigkeit vor der CuSO4-Zugabe und die nahe 0 liegende Reaktionsgeschwindigkeit danach. Durch Einfügen einer waagerechten Linie bei dem (im Diagramm Harnstoffkonzentration) ermittelten Wert für k2 · [ES] kann der Unterschied verdeutlicht werden. Ein Vergleich mit dem Diagramm Reaktionsgeschwindigkeit des Versuchs Reaktion von Marmor mit Salzsäure (Bestimmung der Reaktionsordnung) zeigt die Unterschiede zwischen einer Reaktion erster Ordnung und dieser Reaktion nullter Ordnung.

## **Theoretischer Hintergrund**

Die Reaktionsgeschwindigkeit r ist als zeitliche Änderung der Konzentration eines der Ausgangsstoffe bzw. eines der Produkte definiert; sie ist also stets auf einen an der Reaktion beteiligten Stoff bezogen. Die Änderung der Konzentration der Edukte geht dabei negativ in die Rechnung ein, die der Produkte positiv. Es gilt also bei der enzymatischen Harnstoffspaltung für die auf die Harnstoffkonzentration bezogene Reaktionsgeschwindigkeit:

$$r_{H_2NCONH_2} = -\frac{d \left[H_2NCONH_2\right]}{dt}$$

Die Reaktion findet unter Katalyse des Enzyms Urease statt. Der Mechanismus kann folgendermaßen beschrieben werden (E: Enzym Urease, S: Substrat Harnstoff, ES: Enzym-Substrat-Komplex, P: Produkte):

E+S
$$\frac{k_1}{k_1}$$
ES $\frac{k_2}{k_1}$ P

Die Reaktionsgeschwindigkeit der Harnstoffspaltung wird durch das Geschwindigkeitsgesetz

$${r_H}_{2NCONH_2} = -\frac{d\left[\!\!\left[\!\!\left.H_2NCONH_2\right]\!\!\right]}{dt} = k_2 \cdot \frac{k_1}{k_1} \cdot \left[\!\!\left[\!\!\left.E\right]\!\!\right] \cdot \left[\!\!\left[\!\!\left.S\right]\!\!\right] = k_2 \cdot \left[\!\!\left[\!\!\left.ES\right]\!\!\right]\right]$$

wieder gegeben. Die Reaktion ist also erster Ordnung bezüglich [ES].

Da das Enzym E als Katalysator wirkt, bleibt seine Gesamtkonzentration im Reaktionsverlauf gleich. Bei ausreichender Substratkonzentration stellt sich ein stationärer Zustand ein, bei dem die Bildungs- und Abbaugeschwindigkeit des Enzym-Substrat-Komplexes gleich groß sind:

$$k_1 \cdot [E] \cdot [S] = (k_1^{'} + k_2) \cdot [ES]$$

Aus diesem Grund ist die Konzentration [ES] während der Reaktion konstant, wobei sich ihr Betrag nach der Größe der Geschwindigkeitskonstanten richtet. Einen solchen Fall nennt man Fließgleichgewicht. Für die Bildung der Reaktionsprodukte P wirkt sich dies in einer konstanten Reaktionsgeschwindigkeit aus, und die Kurve der Harnstoffkonzentration verläuft deshalb linear. So ergibt sich für die Harnstoffspaltung durch Urease insgesamt ein Geschwindigkeitsgesetz nullter Ordnung:

$$r_{H_2NCONH_2} = k_2 \cdot [ES] = k_3$$

Da die Reaktionsgeschwindigkeit in Wirklichkeit von [ES] abhängt und diese Abhängigkeit nur durch die Konstanz von [ES] nicht zu Tage tritt, spricht man auch von einer Reaktion pseudo-nullter Ordnung.

Zur Bestimmung der Geschwindigkeitskonstante einer solchen Reaktion muss lediglich im Konzentrations-Zeit-Diagramm des Harnstoffs die Geradensteigung bestimmt werden.

Dass Urease bei Raumtemperatur nicht lange haltbar ist, zeigt sich auch in der Abnahme der Reaktionsgeschwindigkeit mit steigender Versuchsdauer. Die Linearität der Kurve für die Harnstoffkonzentration ist also nur zu Reaktionsbeginn gegeben.



## Weitere Versuchsmöglichkeiten

Eine Versuchsreihe mit verschiedenen Anfangskonzentrationen des Harnstoffs (z.B. 0,005 mol/l, 0,01 mol/l, 0,025 mol/l, 0,05 mol/l, 0,075 mol/l, 0,1 mol/l, 0,2 mol/l) macht eine genauere Untersuchung der enzymatischen Reaktionskinetik möglich. Dazu trägt man in einem neuen Diagramm die Reaktionsgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Anfangskonzentration des Harnstoffs auf.

Aus der sich ergebenden maximalen Reaktionsgeschwindigkeit r<sub>max</sub> kann die Michaeliskonstante K<sub>m</sub> bestimmt werden. K<sub>m</sub> ist definiert als

$$K_{m} = \frac{k'_{1} + k_{2}}{k_{1}} = \frac{[E] \cdot [S]}{[ES]}$$
 (1)

und hängt mit der Reaktionsgeschwindigkeit zusammen über

$$r = k_2 \cdot ([E] + [ES]) \cdot \frac{[S]}{K_m + [S]}$$
(2)

Geht man davon aus, dass  $r_{max}$  erreicht ist, wenn das Enzym mit Substrat gesättigt ist, so muss bei  $\frac{1}{2}$   $r_{max}$  die Hälfte des Enzyms als Enzym-Substrat-Komplex vorliegen. Dann ist [E] = [ES]; aus (1) folgt damit

$$Km = [S]$$
 bei  $\frac{1}{2} r_{max}$ .

Da darüber hinaus für hohe Substratkonzentrationen gilt:

$$r_{\text{max}} = k_2 \cdot ([E] + [ES]) \tag{3}$$


ist mit der Michaeliskonstante und der maximalen Reaktionsgeschwindigkeit die Reaktionsgeschwindigkeit eines Enzym-Substrat-Gemischs leicht nach (2) und (3) zu berechnen.

Die Michaeliskonstante ist aus der Substratkonzentration bei ½ r<sub>max</sub> zu bestimmen. Genauer ermittelt man K<sub>m</sub> mit einer Auftragung von 1/r gegen 1/[S] nach Lineweaver-Burk. Die Auftragung basiert auf einer Umformung von (2) und (3):


$$\frac{1}{r} = \frac{K_m}{r_{max} \cdot [S]} + \frac{1}{r_{max}}$$

Die Steigung der Gerade ergibt den Term Km/rmax, der Achsenabschnitt ist 1/rmax.

# Hydrolyse von tertiärem Butylchlorid (Bestimmung der Reaktionsordnung)

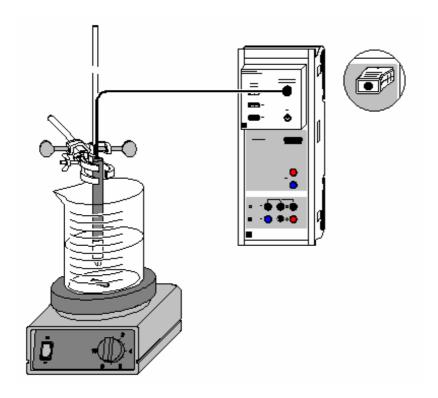

## Alternativ mit Leitfähigkeits-Box:

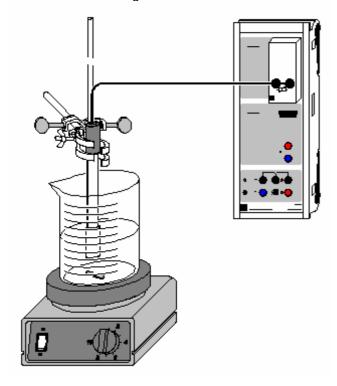



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

- Beispiel laden (Chemie-Box oder Leitfähigkeits-Adapter S)
- Beispiel laden (Leitfähigkeits-Box)



#### Versuchsbeschreibung

Bei der Hydrolyse von tertiärem Butylchlorid (2-Chlor-2-Methylpropan) entsteht tertiäres Butanol und Chlorwasserstoff, der durch Protolyse Oxonium- und Chloridionen bildet, die zu einem starken Leitfähigkeitsanstieg führen:

$$(CH3)3C - CI + 2 H2O \longrightarrow (CH3)3C - OH + H3O^{+} + CI^{-}$$

## Benötigte Geräte (mit Chemie-Box oder Leitfähigkeits-Adapter S)

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Chemie-Box oder Leitfähigkeits-Adapter S	524 067(1)
1	Leitfähigkeitssensor	529 670
1	Magnetrührer	666 845
1	Becherglas, 250 ml, hF	664 113
1	Stativrohr	666 607
1	Doppelmuffe	301 09
1	Kleinklemme	666 551
1	Messzylinder, 100 ml	665 754
1	Messpipette, 1 ml	665 994
1	Pipettierball	666 003
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Benötigte Geräte (alternativ mit Leitfähigkeits-Box)

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Leitfähigkeits-Box	524 037
1	Leitfähigkeits-Messzelle	667 426
1	Magnetrührer	666 845
1	Becherglas, 250 ml, hF	664 113
1	Stativrohr	666 607
1	Doppelmuffe	301 09
1	Kleinklemme	666 551
1	Messzylinder, 100 ml	665 754
1	Messpipette, 1 ml	665 994
1	Pipettierball	666 003
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Benötigte Chemikalien

0,8 ml Lösung von tertiärem Butylchlorid (c=0,1 mol/l) in Aceton

#### Gefahrenhinweis



Aceton ist leicht entzündlich. Von Zündquellen fernhalten.

#### Versuchsvorbereitung (siehe Skizze)

- Magnetrührer mit Stativ aufbauen.
- Im Messzylinder 90 ml dest. Wasser und 10 ml Aceton abmessen und in das Becherglas geben.
- Ein Magnet-Rührstäbchen hinzufügen und das Becherglas auf den Magnetrührer setzen. Die Leitfähigkeits-Messzelle so am Stativ einspannen, das sie bis knapp unter die Luftaustrittsöffnung eintaucht. Magnetrührer einschalten.
- Die Leitfähigkeits-Box auf Eingang A des Sensor-CASSYs stecken, die Leitfähigkeits-Messzelle über die Bananenstecker mit der Leitfähigkeits-Box verbinden.

## Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden (Chemie-Box oder Leitfähigkeits-Adapter S)
- Einstellungen laden (Leitfähigkeits-Box) Hinweis zum angezeigten Leitfähigkeitswert



Der Anfangswert der Leitfähigkeit sollte für den Versuch 10  $\mu$ S/cm nicht überschreiten. Ist dies dennoch der Fall, muss die Messzelle durch Spülen mit dest. Wasser gründlich gereinigt werden. Als Alternative kann über Einstellungen Leitfähigkeit (Aufruf durch rechten Mausklick auf Anzeige) durch **Korrigieren** der Offset so angepasst werden, dass der Anfangswert Null ist.

- Messzelle kalibrieren. Dazu in den Einstellungen Leitfähigkeit (Aufruf durch rechten Mausklick auf Anzeige) Korrigieren wählen, den aufgedruckten Faktor eingeben und Faktor korrigieren wählen.
- Mit der Messpipette 0,8 ml der tertiären Butylchloridlösung (c = 0,1 mol/l) abmessen.
- Im Programm durch Anklicken der Uhr auf der Symbolleiste (oder Drücken von **F9**) die Messwertaufnahme starten.
- Die abgemessene Menge tertiäres Butylchlorid zügig zur Lösung in das Becherglas geben. Den Zeitpunkt der Zugabe durch eine senkrechte Linie (Alt+S) markieren.
- Die Messung nach ca. 8 min durch erneutes Anklicken des Uhrensymbols (oder **F9**) beenden, wenn sich die Leitfähigkeit kaum noch verändert. Wenn nötig kann der Messbereich in den Einstellungen CA1 vergrößert werden.

#### **Auswertung**

Für die Auswertung sind vier Möglichkeiten bereits vorbereitet:

#### Darstellung der Konzentrationsveränderung

Dazu die Darstellung **Konzentration** anklicken. Die Veränderung der Konzentration c an tertiärem Butylchlorid kann nun verfolgt werden. Die Berechnung der Konzentration in mmol/l erfolgt aus der eingesetzten Menge (0,8 ml 0,1-molare Lösung), der aktuellen Leitfähigkeit CA1 und der Endleitfähigkeit (hier: 198,9 µS/cm; dieser Wert kann entsprechend der in der Tabelle abgelesenen Leitfähigkeit geändert werden).

Die Umrechnungsformel (1-CA1/198,9)\*0,8 kann in den Einstellungen c eingesehen und ggf. angepasst werden, ebenso der Anzeigebereich.

## Test auf Reaktion 1. Ordnung

Dazu die Darstellung **Test auf 1. Ordnung** anklicken. Es erfolgt die Darstellung von In(cA/c) gegen t (cA = Anfangskonzentration, c = eingesetzte Menge an tertiärem Butylchlorid). Zur Bestimmung der Geschwindigkeitskonstanten k der Reaktion wird über den linearen Anfangsbereich der Kurve eine **Ausgleichsgerade** (Anpassung nach rechtem Mausklick auf Diagramm durchführen) berechnet und deren Steigung ermittelt. Durch **Markierung setzen** kann die Gerade mit dem Wert für die Steigung (A) beschriftet werden.

#### Test auf Reaktion 2. Ordnung

Dazu die Darstellung **Test auf 2. Ordnung** anklicken. Es erfolgt die Darstellung von 1/c - 1/cA gegen t (cA = Anfangskonzentration, c = eingesetzte Menge an tertiärem Butylchlorid). Die Darstellung zeigt keinen linearen Zusammenhang. Somit liegt hier keine Reaktion 2. Ordnung vor.

#### **Halbwertszeitmethode**

In der Darstellung **Halbwertszeit**: Da eine Reaktion erster Ordnung vorliegt, kann die Geschwindigkeitskonstante auch über die Halbwertszeitmethode ermittelt werden. Dazu jeweils bei 0,4 mmol, 0,2 mmol und 0,1 mmol mit **Alt+W** eine waagerechte Linie einfügen; deren Schnittpunkt mit der Konzentrationskurve und den Startzeitpunkt der Reaktion mit einer senkrechten Linie (**Alt+S**) markieren. Die durchschnittliche Zeitdifferenz zwischen allen senkrechten Linien ergibt die Halbwertszeit t1/2, hier z.B 63 s.


In den Einstellungen k in der Formel **In 2/63** unter dem Bruchstrich die ermittelte Halbwertszeit des Experiments eintragen. Das Ergebnis kann im <u>Anzeigeinstrument k</u> abgelesen werden.

## Weitere Versuchsmöglichkeiten

- Durchführung und Aufnahme der Hydrolyse bei unterschiedlichen Temperaturen. Bei der Wiederholung der Messung werden die Kurven zum Vergleich überlagert. Der Einfluss auf den Reaktionsverlauf und die Reaktionsgeschwindigkeit ist deutlich zu erkennen. Aus den unterschiedlichen Geschwindigkeitskonstanten und den zugehörigen Temperaturen lässt sich die Aktivierungsenergie der Reaktion berechnen.
- Verwendung unterschiedlicher Lösungsmittel zur Untersuchung des Lösungsmitteleinflusses auf Reaktionsordnung und -geschwindigkeit.
- Untersuchung enzymatischer Reaktionen, z. B. der Harnstoffspaltung durch Urease.



## Reaktion von Marmor mit Salzsäure (Bestimmung der Reaktionsordnung)

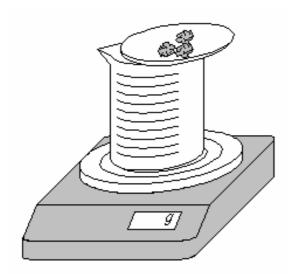

#### ■ Beispiel laden

#### **Sicherheitshinweis**

Salzsäure ist ätzend. Schutzbrille, -handschuhe und Schutzkleidung anziehen.

## Versuchsbeschreibung

Setzt man Marmor (Kalk, CaCO<sub>3</sub>) im Überschuss mit einer definierten Stoffmenge Salzsäure um, so kann aus der Massenbilanz die Reaktionsordnung ermittelt werden. Die Reaktion läuft nach folgender Gleichung ab:

$$\mathsf{CaCO}_3 + 2\mathsf{H}_3\mathsf{O}^+ \xrightarrow{\quad \mathsf{aq.} \quad } \mathsf{Ca}^{2+} + \mathsf{CO}_2 \uparrow + 3\mathsf{H}_2\mathsf{O}$$

Das entweichende Kohlendioxid bewirkt eine kontinuierliche und mit einer Waage messbare Massenabnahme des Reaktionsgemischs, aus der der Konzentrationsverlauf der Salzsäure zu ermitteln ist.

#### **Benötigte Geräte**

1	CASSY Lab	524 200
1	Elektronische Waage mit Datenausgang	667 795
	und Anschlusskabel	729 769
	oder	
1	Elektronische Waage mit	667 7780
	Einbausatz und	667 7791
	Schnittstellenkabel	667 7796
1	Becherglas, niedrige Form, 250 ml	664 130
1	Uhrglas, = 80 mm	664 154
1	Vollpipette, 25 ml	665 976
1	Pipettierball	666 003
1	PC mit Windows ab 95/98/NT	

## Benötigte Chemikalien

Marmor, Stücke, 250 g	673 2500
Salzsäure, c = 2 mol/l, 500 ml	674 6920

### Versuchsvorbereitung (siehe Skizze)

Es werden vom Programm die von LD Didactic vertriebenen Waagen der Firmen Sartorius, Mettler und Ohaus mit seriellem Datenausgang unterstützt.

Die Waage wird über das Verbindungskabel an eine serielle Schnittstelle des Computers (z. B. COM2)



angeschlossen. Da sich die Kabel der verschiedenen Hersteller unterscheiden, ist es erforderlich, das jeweils vom Hersteller vorgesehene Schnittstellenkabel zu benutzen, um das korrekte Funktionieren der Rechnerverbindung sicherzustellen.

Im Becherglas werden mit der Pipette genau 75 ml Salzsäure vorgelegt. Das Uhrglas wird auf das Becherglas gesetzt, die Waage auf 0 gestellt und genau 30 g Marmorstückchen auf dem Uhrglas eingewogen. Dann stellt man die Waage wieder auf 0.

## Versuchsdurchführung

■ Einstellungen laden

- Waage als Messgerät in den Allgemeinen Einstellungen (z. B. über **F5** erreichbar) der gewünschten seriellen Schnittstelle zuordnen (z. B. COM2).
- In Einstellungen Masse m Baudrate und Mode der Waage anpassen:

Einstellungen ab Werk bei Sartorius-Waagen:

Mode: 701 Baudrate: 1200

Einstellungen ab Werk bei Mettler-Waagen:

Mode: 8N1 Baudrate: 9600

 In einem Punkt müssen die werkseitigen Einstellungen der Waage geändert werden. Dazu Gebrauchsanweisung der Waage beachten:

Sartorius: Datenübertragung als "Autoprint ohne Stillstand" statt "Manuell nach Stillstand"

Mettler: kontinuierliche Datenübertragung ("S.Cont")

• Alle gesendeten Massewerte werden angezeigt (Problembehebung).

Messung mit **F9** oder der Schaltfläche starten.

- Die Reaktion einleiten, indem die Marmorstückchen durch Kippen des Uhrglases in das Becherglas gegeben werden. Das Uhrglas auf dem Becherglas belassen.
- Nach fast vollständigem Stillstand der Reaktion (ca. 10 min) die Messwertaufnahme mit F9 oder der Schaltfläche

## **Auswertung**

Die durch Kippen des Uhrglases hervorgerufenen Ausreißer am Anfang der Messung können durch Mausklick auf den entsprechenden Wert und Eintragung von "0" korrigiert werden.

1. Im Diagramm **Standard**: Die Messdaten geben die Masse m des entwichenen Kohlendioxids an (siehe Reaktionsgleichung). Aus diesen ist die entwichene Stoffmenge n(CO<sub>2</sub>) und daraus die Konzentration der verbliebenen Säure [H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>] zu berechnen:

$$n(CO_2) = -\frac{m}{44 \text{ g/mol}}$$

$$\label{eq:H3O+} \left[\!H_3\text{O}^+\right] \!= \frac{2\,\text{mol}\,/\,\text{I}\cdot\text{0,075}\,\,\text{I}-2\cdot\text{n}\,(\text{CO}_2)}{0,075\,\,\text{I}+3\cdot\text{n}\,(\text{CO}_2)\cdot\text{0,018}\,\,\text{I}}$$

In der zweiten Gleichung entspricht der Zähler der Gesamt-Stoffmengenbilanz der Säure und der Nenner der Gesamt-Volumenbilanz.

2. Im Diagramm 1. Ordnung: Zur Prüfung auf eine Reaktion erster Ordnung bezüglich der Salzsäure wird der natürliche Logarithmus der Salzsäurekonzentration gegen die Zeit t aufgetragen. Liegt eine Reaktion erster Ordnung vor, so ergibt diese Auftragung eine Gerade mit der Steigung -k.

Zur Ermittlung der Geschwindigkeitskonstanten k betätigt man im Diagramm die rechte Maustaste, wählt **Anpassung durchführen** und **Ausgleichsgerade** und markiert nun den linearen Kurvenbereich, in dem es sinnvoll ist, eine Gerade anzupassen. Die Steigung der erhaltenen Gerade wird links unten in der Statuszeile ausgegeben und kann mit der Maus in das Diagramm hineingezogen werden. Im vorliegenden Versuchsbeispiel wird eine Geschwindigkeitskonstante von 0,01541/s ermittelt.

Im Versuchsbeispiel ergibt die Auftragung für das Geschwindigkeitsgesetz erster Ordnung nicht über die gesamte Strecke eine Gerade, da nach Reaktion eines Teils der Salzsäure die Diffusion geschwindigkeitsbestimmend wird: Bei abnehmender Konzentration der Säure reagiert diese schneller mit



Marmor, als neue H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>-lonen zur Oberfläche des Marmors transportiert werden können. Deshalb verringert sich die Reaktionskonstante, und eine Abweichung vom Geschwindigkeitsgesetz ist zu beobachten. Bis zu 80 % des Reaktionsumsatzes wird die Reaktion jedoch sehr gut durch das Geschwindigkeitsgesetz erster Ordnung beschrieben.

3. Im Diagramm **2. Ordnung**: Zur Prüfung auf eine Reaktion zweiter Ordnung bezüglich der Salzsäure wird der Ausdruck 1/[H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>] gegen die Zeit t aufgetragen. Läge eine Reaktion zweiter Ordnung vor, ergäbe diese Auftragung eine Gerade mit der Steigung k.

Im Versuchsbeispiel wird die über 10 Sekunden gemittelte H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>-Konzentration zur Berechnung benutzt, um die durch die endliche Auflösung der Waage verursachten Sprünge ab ca. 95 % Reaktionsumsatz etwas zu glätten.

Da sich in dieser Auftragung kein eindeutig linearer Bereich zeigt, kann man davon ausgehen, dass zu keinem Zeitpunkt eine Reaktion zweiter Ordnung vorliegt.

4. Der sich aus der Reaktionsordnung ergebende zeitliche Verlauf der Reaktionsgeschwindigkeit r wird im Diagramm **Reaktionsgeschwindigkeit** veranschaulicht. Da die Auflösung der Messwerte der Waage für beste Ergebnisse in diesem Diagramm um eine Stelle höher sein müsste - was einen Demonstrationsversuch erheblich erschwert - ist an Stelle von r die über 10 Sekunden gemittelte Reaktionsgeschwindigkeit rm aufgetragen.

## **Theoretischer Hintergrund**

Die Reaktionsgeschwindigkeit r ist als zeitliche Änderung der Konzentration eines der Ausgangsstoffe bzw. eines der Produkte definiert; sie ist also stets auf einen an der Reaktion beteiligten Stoff zu beziehen. Die Änderung der Konzentration der Edukte geht dabei negativ in die Rechnung ein, die der Produkte positiv. Für die Reaktion

$$CaCO_3 + 2H_3O^+ \xrightarrow{aq} Ca^{2+} + CO_2 \uparrow + 3H_2O^-$$

ist die Reaktionsgeschwindigkeit r bezogen auf die Konzentration der H<sub>3</sub>O <sup>+</sup>-Ionen also

$$r_{H_3O^+} = -\frac{d\left[H_3O^+\right]}{dt}$$

Sie ist doppelt so groß wie die auf die Calciumionenkonzentration bezogene Reaktionsgeschwindigkeit, da für das Entstehen eines Calciumions zwei H3O<sup>+</sup>-Ionen benötigt werden:

$$r_{Ca^{2+}} = \frac{1}{2}r_{H_3O^+} = \frac{d[Ca^{2+}]}{dt}$$

Zur Feststellung der Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Konzentration der beteiligten Substanzen bestimmt man experimentell, nach welchem Geschwindigkeitsgesetz die Reaktion abläuft. Der Exponent, mit dem die Konzentration der Stoffe im Geschwindigkeitsgesetz erscheint, bezeichnet die Reaktionsordnung bezüglich des betreffenden Stoffes. Die Gesamtordnung der Reaktion wird aus der Summe der Exponenten gebildet. Bei der Reaktion

$$CaCO_3 + 2H_3O^+ \xrightarrow{aq} Ca^{2+} + CO_2 \uparrow + 3H_2O$$

ist die Reaktionsordnung nur für die Ionen in der Lösung leicht bestimmbar. Für eine Reaktion erster Ordnung würde das Geschwindigkeitsgesetz lauten:

$$r_{H_3O^+} = 2 \cdot \frac{d \left[Ca^{2+}\right]}{dt} = -\frac{d \left[H_3O^+\right]}{dt} = k \cdot \left[H_3O^+\right]$$

Die integrierte Form ergibt die Geradengleichung

$$\ln \left[ H_3 O^+ \right] = -k \cdot t + \ln \left[ H_3 O^+ \right]_0$$

mit der Steigung -k und dem Achsenabschnitt ln[H3O<sup>+</sup>]o. [H3O<sup>+</sup>]o ist die Anfangskonzentration der Säure.



Für eine Reaktion zweiter Ordnung bezüglich der H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>-Konzentration würde das Geschwindigkeitsgesetz lauten:

$$r = -\frac{d \Big[H_3 O^+\Big]}{dt} = k \cdot \Big[H_3 O^+\Big]^2$$

In der integrierten Form ergibt sich die Gerade


$$\frac{1}{\left[H_3O^+\right]} = k \cdot t + \frac{1}{\left[H_3O^+\right]_0}$$

mit der Steigung k und dem Achsenabschnitt 1/[H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>]<sub>0</sub>.

Durch Erstellen dieser beiden Geraden lässt sich ermitteln, inwieweit eine Reaktion den Geschwindigkeitsgesetzen erster bzw. zweiter Ordnung entspricht.



# Alkalische Hydrolyse von Essigsäureethylester (Bestimmung der Reaktionsordnung)

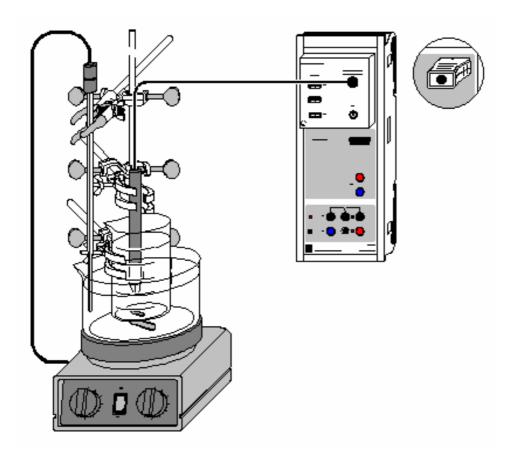





auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

### Sicherheitshinweise

Essigsäureethylester ist leicht entzündlich. Von Zündquellen fernhalten.

Essigsäureethylester reizt die Augen. Bei der Arbeit Schutzbrille tragen, bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Der Dampf des Esters kann Benommenheit auslösen; Dampf nicht einatmen.

## Versuchsbeschreibung

Die alkalische Hydrolyse von Estern läuft in zwei Schritten ab:

$$CH_{3} - C + \overline{|O|} - H \iff \begin{bmatrix} \overline{|O|} \\ CH_{3} - C - OH \\ O \\ CH_{2} CH_{3} \end{bmatrix}$$

$$CH_{3} - C + \overline{|O|} - CH_{2} CH_{3}$$

$$\rightarrow$$
 CH<sub>2</sub> CH<sub>3</sub> OH + CH<sub>3</sub> - C  $\stackrel{?}{\leftarrow}$   $\stackrel{?}{\leftarrow}$   $\stackrel{?}{\sim}$ 



Da im Verlauf der Reaktion an Stelle der Hydroxidionen Acetationen in Lösung gehen, kann der Ablauf der Reaktion durch Leitfähigkeitsmessungen verfolgt werden. Aus der daraus ermittelten Zeitabhängigkeit der Hydroxidionenkonzentration lässt sich die Reaktionsordnung und die Geschwindigkeitskonstante der alkalischen Esterhydrolyse bestimmen. Da die Geschwindigkeitskonstante temperaturabhängig ist, empfiehlt es sich, den Versuch in einem temperierten Wasserbad durchzuführen.

## **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Chemie-Box oder Leitfähigkeits-Adapter S	524 067(1)
1	Leitfähigkeitssensor	529 670
1	Magnetrührer mit Heizplatte	666 839
1	KT4 Kontakt-Stockthermometer	666 8401
1	Rührstäbchen, 50 mm	666 854
1	Rührstäbchen, 15 mm	666 850
1	Stativstange, 500 mm, $\emptyset$ = 10 mm	301 27
3	Kreuzmuffen	666 543
2	Kleinklemmen	666 551
1	Universalklemme	666 555
1	Becherglas 100 ml, hohe Form	664 137
1	Kristallisierschale, 900 ml	664 177
1	Dosierspritze, 2 ml	665 963
1	Kanüle, 40 mm	665 960
1	Vollpipette, 25 ml	665 976
1	Pipettierball	666 003
1	Waage, Auflösung 0,01 g	

#### Benötigte Chemikalien

Essigsäureethylester, z.B. 250 ml	671 9630
Natronlauge, c = 0,1 mol/l, z.B. 500 ml	673 8410
evtl.: Kalibrierlösung, 12,88 mS/cm	667 4640

## Kalibrierung

- Einstellungen laden.
- Die Zellkonstante des Leitfähigkeitssensors zur Chemie-Box ist mit 0,58 bereits in CASSY Lab voreingestellt. Wird ein anderer Leitfähigkeitssensor verwendet, ist dessen Zellkonstante in den Einstellungen Leitfähigkeit CA1 unter Korrigieren als Faktor einzutragen und die Schaltfläche Faktor korrigieren zu betätigen.
- Zur genaueren Bestimmung der Zellkonstante können Kalibrierlösungen verwendet werden. Dazu werden Becherglas und Leitfähigkeitssensor zunächst mit destilliertem Wasser, dann mit ca. 30-40 ml Kalibrierlösung gespült. In weitere 50 ml der Kalibrierlösung taucht man wie zur Messung den Leitfähigkeitssensor (1 cm Abstand zu den Becherglaswänden einhalten), trägt im Korrektur-Fenster den Sollwert in der zweiten Zeile ein und betätigt nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche Faktor korrigieren.
- Die kalibrierten Einstellungen für spätere Verwendung unter einem neuen Namen mit F2 abspeichern. Den verwendeten Sensor, Chemie-Box und Sensor-CASSY markieren, da die Kalibrierung nur für diese Kombination gültig ist.

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Kristallisierschale wird bis knapp unterhalb des Rands mit Leitungswasser gefüllt und mit dem größeren Rührstäbchen auf den Magnetrührer gestellt. Mit Hilfe der Universalklemme wird das Becherglas mit dem anderen Rührstäbchen an der Stativstange in die Kristallisierschale gehängt und so positioniert, dass es sich möglichst tief eintauchend in der Mitte des Wasserbads über dem Rührmagneten befindet. In das Becherglas gibt man mit der Pipette genau 75 ml Natronlauge (0,0075 mol).

An jeweils einer Kleinklemme wird das Kontaktthermometer ins Wasserbad und der Leitfähigkeitssensor in das Becherglas getaucht. Dabei ist darauf zu achten, dass der Leitfähigkeitssensor mindestens 1 cm Abstand von den Glaswänden und dem Rührstäbchen hat. Der Heizregler des Magnetrührers wird maximal auf 80 °C eingestellt, das an den Magnetrührer anzuschließende Kontaktthermometer auf ca. 40 bis 45 °C. Der Magnetrührer wird gerade so kräftig eingestellt, dass sich keine Tromben bilden.



Nun ist das Erreichen einer konstanten Temperatur der Natronlauge abzuwarten. Dies kann am Anzeigeinstrument für die Temperatur  $\vartheta$ A1 (über den entsprechenden Button in der oberen Bildschirmzeile erreichbar) oder noch bequemer durch Starten einer Messung mit **F9** überprüft werden.

Die leere Dosierspritze mit Kanüle wird auf die Waage gelegt und die Waage auf 0 gestellt. Es werden genau 1,32 g Essigsäureethylester (0,015 mol) in die Spritze eingewogen.

## Versuchsdurchführung

- Ist die Temperaturkonstanz durch eine Messung überprüft worden, diese Messreihe mit F9 beenden und mit F4 löschen.
- Neue Messung mit **F9** oder durch Anklicken von starten
- Durch kräftiges Einspritzen des Essigsäureethylesters in die Natronlauge für gute Verteilung sorgen.
   Den Zeitpunkt der Zugabe durch die Tastenkombination Alt+S im Diagramm mit einer senkrechten Linie markieren.
- Je nach Reaktionstemperatur die Messung ca. 8 bis 12 Minuten lang laufen lassen, bis sich ein konstanter Leitfähigkeitswert eingestellt hat.
- Messung mit **F9** oder durch Anklicken von stoppen. Heizplatte abschalten.

#### **Auswertung**

- 1. Im Diagramm **spezif. Leitfähigkeit** sind die Messwerte der spezifischen Leitfähigkeit und der Temperatur gegen die Reaktionsdauer aufgetragen. Zur genauen Bestimmung der Reaktionstemperatur betätigt man im Diagramm die rechte Maustaste, wählt **Mittelwert einzeichnen** und erhält durch Markierung des Kurvenbereichs zwischen Anfangs- und Endtemperatur der Reaktion die Durchschnittstemperatur, bei der das Experiment abgelaufen ist. Der Mittelwert wird automatisch eingezeichnet und kann links unten in der Statuszeile abgelesen werden. Mit **Alt+T** kann man den zugehörigen Zahlenwert ins Diagramm übertragen.
- 2. Das Diagramm **Hydroxidkonzentration** zeigt den aus der spezifischen Leitfähigkeit berechneten Konzentrationsverlauf der Hydroxidionen. Die [OH<sup>-</sup>]-Konzentration wird nach folgender Formel berechnet:

$$\left[OH^{-}\right] = \frac{C_{A1} - \kappa_{1}}{\kappa_{0} - \kappa_{1}} \cdot 0,1 \text{ mol/I}$$

Hier ist CA1 die gemessene Leitfähigkeit,  $\kappa_0$  die Leitfähigkeit vor Zugabe des Esters,  $\kappa_1$  die Leitfähigkeit am Ende der Reaktion und 0,1 mol/l die Konzentration der Natronlauge zu Beginn der Reaktion. Zur korrekten Berechnung der Hydroxidionenkonzentration müssen in den Einstellungen  $\kappa_1$  und  $\kappa_0$  im Feld Formel die jeweiligen Messwerte an Stelle der Vorgaben eingetragen werden.

- 3. Die Darstellungen 1. Ordnung und 2. Ordnung sind zur Ermittlung der Reaktionsordnung vorbereitet: Zur Anpassung einer Geraden an die jeweilige Kurve betätigt man im Diagramm die rechte Maustaste, wählt Anpassung durchführen und Ausgleichsgerade und markiert vom Beginn der Reaktion den Kurvenbereich, in dem die Anpassung einer Gerade sinnvoll ist. Die große Abweichung von einer Geraden bei der Auftragung 1. Ordnung und die relativ genaue Übereinstimmung mit einer Geraden bis zu einem Reaktionsumsatz von ca. 90 % in der Auftragung 2. Ordnung weisen auf eine Reaktion zweiter Ordnung hin. Die Steigung der Gerade in der Auftragung 2. Ordnung gibt die Geschwindigkeitskonstante k der Reaktion an. Sie steht als Parameter A der Geradengleichung A\*x+B in der Statuszeile und kann von dort mit der Maus ins Diagramm gezogen werden.
- 4. Die Darstellungen **Arrhenius / Eyring 1** und **2** sind zur Ermittlung der Aktivierungsparameter vorbereitet. Genaueres dazu ist im Versuch Alkalische Hydrolyse von Essigsäureethylester Bestimmung der Aktivierungsparameter nachzulesen.

#### **Theoretischer Hintergrund**

Die Reaktionsgeschwindigkeit r ist als zeitliche Änderung der Konzentration eines der Ausgangsstoffe bzw. eines der Produkte definiert; sie ist also stets auf einen an der Reaktion beteiligten Stoff zu beziehen. Die Änderung der Konzentration der Edukte geht dabei negativ in die Rechnung ein, die der Produkte positiv. Für die alkalische Esterhydrolyse ist die Reaktionsgeschwindigkeit bezogen auf die Esterkonzentration genauso groß wie die auf die Hydroxidkonzentration bezogene Reaktionsgeschwindigkeit, da die beiden Stoffe im Verhältnis 1:1 reagieren:



$$r_{OH^-} = r_{CH_3COOAc} = -\frac{d[OH^-]}{dt} = -\frac{d[CH_3COOAc]}{dt}$$

Zur Feststellung der Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Konzentration der beteiligten Substanzen bestimmt man experimentell, nach welchem Geschwindigkeitsgesetz die Reaktion abläuft. Der Exponent, mit dem die Konzentration der Stoffe im Geschwindigkeitsgesetz erscheint, bezeichnet die Reaktionsordnung bezüglich des betreffenden Stoffes. Die Gesamtordnung der Reaktion wird aus der Summe der Exponenten gebildet.

Im Versuchsbeispiel wird die Reaktion auf zwei Reaktionsordnungen getestet: Wäre die Reaktion erster Ordnung bezüglich der Hydroxidkonzentration und unabhängig von der Esterkonzentration, ergäbe dies insgesamt ein Geschwindigkeitsgesetz erster Ordnung:

$$r_{OH^{-}} = -\frac{d OH^{-}}{dt} = k \cdot OH^{-}$$

Das gleiche Geschwindigkeitsgesetz ergäbe sich bei einer von der Esterkonzentration in erster Ordnung abhängigen und von der Hydroxidkonzentration unabhängigen Reaktion, da ja gilt:

$$\frac{d \left[OH^{-}\right]}{dt} = \frac{d \left[CH_{3}COOAc\right]}{dt}$$

Zur Überprüfung der Gültigkeit dieses Geschwindigkeitsgesetzes benutzt man dessen integrierte Form:

$$\ln \left[ OH^{-} \right] = -k \cdot t + \ln \left[ OH^{-} \right]_{O}$$

Eine Auftragung von In[OH¯] gegen die Zeit t ergibt bei Vorliegen einer Reaktion erster Ordnung also eine Gerade mit der Steigung -k und dem Achsenabschnitt In[OH¯]o. [OH¯]o bezeichnet die Ausgangskonzentration der Hydroxidionen.

Ist die Reaktion hingegen erster Ordnung bezüglich beider Komponenten, resultiert das Geschwindigkeitsgesetz zweiter Ordnung:

$$-\frac{d \boxed{OH^{-}}}{dt} = -\frac{d \boxed{CH_3COOAc}}{dt} = k \cdot \boxed{OH^{-}} \cdot \boxed{CH_3COOAc}$$

Die integrierte Form des Geschwindigkeitsgesetzes ergibt den Ausdruck:

$$\ln \frac{\left[\text{OH}^{-}\right]_{0} \cdot \left(\left[\text{CH}_{3}\text{COOAc}\right]_{0} - \left(\left[\text{OH}^{-}\right]_{0} - \left[\text{OH}^{-}\right]\right)\right)}{\left[\text{CH}_{3}\text{COOAc}\right]_{0} \cdot \left[\text{OH}^{-}\right]} \cdot \frac{1}{\left[\text{CH}_{3}\text{COOAc}\right]_{0} - \left[\text{OH}^{-}\right]_{0}} = k \cdot t$$

Die Auftragung des Ausdrucks vor dem Gleichheitszeichen gegen t ist im Diagramm **2. Ordnung** bereits eingestellt. Die Steigung der bis zu einem Umsatz von ca. 90 % als Gerade verlaufenden Funktion gibt die Geschwindigkeitskonstante k der Reaktion an.

Sind die Ausgangskonzentrationen beider Stoffe gleich, vereinfacht sich das Geschwindigkeitsgesetz zu

$$-\frac{d \boxed{OH^{-}}}{dt} = -\frac{d \left[CH_3COOAc\right]}{dt} = k \cdot \left[OH^{-}\right]^2$$


Dessen integrierte Form

$$\frac{1}{\boxed{OH^-}} = k \cdot t + \frac{1}{\boxed{OH^-}_0}$$

führt zu einer Auftragung von 1/[OH¯] gegen t, die bei Vorliegen einer Reaktion dieser Ordnung eine Gerade mit der Steigung k und dem Achsenabschnitt 1/[OH¯]₀ ergibt. Da der äquimolare Einsatz von Ester und Natronlauge die Reaktionsdauer jedoch deutlich verlängert, wurde im Versuchsbeispiel die doppelte Menge Ester eingesetzt und die Bestimmung des Geschwindigkeitsgesetzes über die kompliziertere Gleichung in Kauf genommen.



# Alkalische Hydrolyse von Essigsäureethylester (Bestimmung der Aktivierungsparameter)

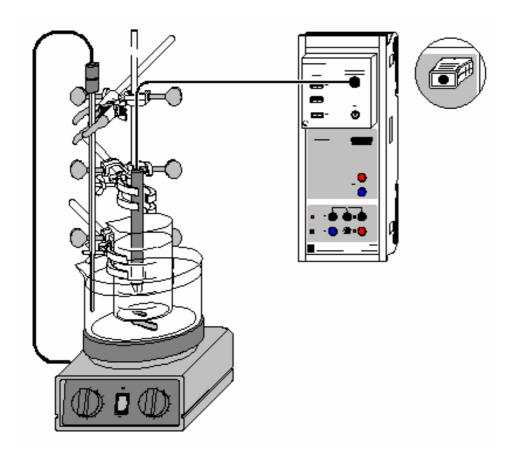





auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

#### Sicherheitshinweise

Essigsäureethylester ist leicht entzündlich. Von Zündquellen fernhalten.

Essigsäureethylester reizt die Augen. Bei der Arbeit Schutzbrille tragen, bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Der Dampf des Esters kann Benommenheit auslösen. Dampf nicht einatmen.

#### Versuchsbeschreibung

Die alkalische Hydrolyse von Estern läuft in zwei Schritten ab:

$$\rightarrow$$
 CH<sub>2</sub> CH<sub>3</sub> OH + CH<sub>3</sub> - C  $\stackrel{?}{\bigcirc}$   $\stackrel{?}{\bigcirc}$   $\stackrel{?}{\bigcirc}$ 



Da im Verlauf der Reaktion an Stelle der Hydroxidionen Acetationen in Lösung gehen, kann der Ablauf der Reaktion durch Leitfähigkeitsmessungen verfolgt werden. Aus der daraus ermittelten Zeitabhängigkeit der Hydroxidionenkonzentration lässt sich die Reaktionsordnung und die Geschwindigkeitskonstante k der alkalischen Esterhydrolyse bestimmen.

Die Temperaturabhängigkeit der Geschwindigkeitskonstante kann ermittelt werden, indem die Esterhydrolyse mehrfach jeweils bei verschiedenen Temperaturen im Wasserbad durchgeführt wird. Aus der Temperaturabhängigkeit von k können die Aktivierungsparameter berechnet werden: die Aktivierungsenergie Ea nach Arrhenius bzw. die freie Aktivierungsenthalpie  $\Delta G^{\#}$  nach Eyring, die sich aus der Aktivierungsenthalpie  $\Delta H^{\#}$  und der Aktivierungsentropie  $\Delta S^{\#}$  zusammensetzt.

# Benötigte Geräte

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Chemie-Box oder Leitfähigkeits-Adapter S	524 067(1)
1	Leitfähigkeitssensor	529 670
1	Magnetrührer mit Heizplatte	666 839
1	KT4 Kontakt-Stockthermometer	666 8401
1	Rührstäbchen, 50 mm	666 854
1	Rührstäbchen, 15 mm	666 850
1	Stativstange, 500 mm, $\emptyset$ = 10 mm	301 27
3	Kreuzmuffen	666 543
2	Kleinklemmen	666 551
1	Universalklemme	666 555
1	Becherglas 100 ml, hohe Form	664 137
1	Kristallisierschale, 900 ml	664 177
1	Dosierspritze, 2 ml	665 963
1	Kanüle, 40 mm	665 960
1	Vollpipette, 25 ml	665 976
1	Pipettierball	666 003
1	Waage, Auflösung 0,01 g	

#### Benötigte Chemikalien

Essigsäureethylester, z.B. 250 ml	671 9630
Natronlauge, c = 0,1 mol/l, z.B. 500 ml	673 8410
evtl.: Kalibrierlösung, 12.88 mS/cm	667 4640

#### Kalibrierung

- Einstellungen laden.
- Die Zellkonstante des Leitfähigkeitssensors zur Chemie-Box ist mit 0,58 bereits in CASSY Lab voreingestellt. Wird ein anderer Leitfähigkeitssensor verwendet, ist dessen Zellkonstante in den Einstellungen Leitfähigkeit CA1 unter Korrigieren als Faktor einzutragen und die Schaltfläche Faktor korrigieren zu betätigen.
- Zur genaueren Bestimmung der Zellkonstante können Kalibrierlösungen verwendet werden. Dazu
  werden Becherglas und Leitfähigkeitssensor zunächst mit destilliertem Wasser, dann mit ca.
  30-40 ml Kalibrierlösung gespült. In weitere 50 ml der Kalibrierlösung taucht man wie zur Messung
  den Leitfähigkeitssensor (1 cm Abstand zu den Becherglaswänden einhalten), trägt unter Korrigieren den Sollwert in der zweiten Zeile ein und betätigt nach Erreichen eines stabilen Messwertes
  die Schaltfläche Faktor korrigieren.
- Die kalibrierten Einstellungen für spätere Verwendung mit F2 unter einem neuen Namen abspeichern. Den verwendeten Sensor, Chemie-Box und Sensor-CASSY markieren, da die Kalibrierung nur für diese Kombination gültig ist.

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Kristallisierschale wird bis knapp unterhalb des Rands mit Leitungswasser gefüllt und mit dem größeren Rührstäbchen auf den Magnetrührer gestellt. Mit Hilfe der Universalklemme wird das Becherglas mit dem anderen Rührstäbchen an der Stativstange in die Kristallisierschale gehängt und so positioniert, dass es sich möglichst tief eintauchend in der Mitte des Wasserbads über dem Rührmagneten befindet.

An jeweils einer Kleinklemme wird das Kontaktthermometer ins Wasserbad und der Leitfähigkeitssensor in das Becherglas getaucht. Dabei ist darauf zu achten, dass der Leitfähigkeitssensor mindestens 1 cm Abstand von den Glaswänden und dem Rührstäbchen hat. Der Heizregler des Magnetrührers wird maximal auf 80 °C eingestellt, das an den Magnetrührer anzuschließende Kontaktthermometer für die erste Messreihe auf ca. 35 °C, für die zweite auf 45 °C und für die dritte auf ca. 55 °C. Bei Bedarf können weitere Messreihen bei z.B. 50 oder 60 °C aufgenommen werden. Der Magnetrührer wird gerade so kräftig eingestellt, dass sich keine Tromben bilden.

#### Versuchsdurchführung

- Mit der Pipette genau 75 ml 0,1 molare Natronlauge (0,0075 mol) in das Becherglas geben.
- Erreichen einer konstanten Temperatur der Natronlauge abwarten. Dies kann am Anzeigeinstrument für die Temperatur ϑA1 (erreichbar über den entsprechenden Button in der oberen Bildschirmzeile) oder noch bequemer durch Starten einer Messung mit **F9** überprüft werden.
- Während dessen die leere Dosierspritze mit Kanüle auf die Waage legen, die Waage auf 0 stellen und genau 1,32 g Essigsäureethylester (0,015 mol) in die Spritze einwiegen.
- Ist die Temperatur durch eine Messung überprüft worden, diese Messreihe nach Erreichen der konstanten Reaktionstemperatur mit **F9** beenden und mit **F4** löschen.
- Neue Messung mit **F9** oder durch Anklicken von starten.
- Durch kräftiges Einspritzen des Essigsäureethylesters in die Natronlauge für gute Verteilung sorgen.
   Den Zeitpunkt der Zugabe durch die Tastenkombination Alt+S im Diagramm mit einer senkrechten Linie markieren.
- Je nach Reaktionstemperatur ca. 7 bis 15 Minuten lang die Messung laufen lassen, bis sich ein konstanter Leitfähigkeitswert eingestellt hat.
- Messung mit **F9** oder durch Anklicken von stoppen und mit **F2** unter Angabe der Reaktionstemperatur speichern.
- Abgespeicherte Messreihe mit F4 für die Aufnahme der nächsten Messreihe löschen.
- Kontaktthermometer auf die neue Reaktionstemperatur einstellen, Reaktionsgemisch in einen Vorratsbehälter geben und das Becherglas spülen
- Den Versuchsablauf bei der nächsten Temperatur wiederholen.
- Mindestens drei Messreihen bei verschiedenen Reaktionstemperaturen aufzeichnen und speichern.

#### Auswertung

- 1. Im Diagramm **spezif. Leitfähigkeit** sind die Messwerte für die spezifische Leitfähigkeit CA1 und die Temperatur  $\vartheta$ A1 gegen die Reaktionsdauer aufgetragen.
- 2. Aus CA1 wird die Konzentration der Hydroxidionen nach folgender Formel berechnet:

$$\left[OH^{-}\right] = \frac{C_{A1} - \kappa_{1}}{\kappa_{0} - \kappa_{1}} \cdot 0.1 \text{ mol/I}$$

In dieser Gleichung ist  $\kappa 0$  die Leitfähigkeit vor Zugabe des Esters,  $\kappa 1$  die Leitfähigkeit am Ende der Reaktion und 0,1 mol/l die Konzentration der Natronlauge zu Beginn der Reaktion. Zur korrekten Berechnung der Hydroxidionenkonzentration müssen für jede Messreihe in den Einstellungen  $\kappa 1$  und  $\kappa 0$  im Feld Formel die jeweiligen Messwerte an Stelle der Vorgaben eingetragen werden. Der daraus berechnete Konzentrationsverlauf der Hydroxidionen ist im Diagramm **Hydroxidkonzentration** abgebildet.

- 3. Dann werden die Messreihen zu einer Datei zusammengefügt, indem zusätzlich zur gerade geöffneten Messung die anderen aufgenommenen Messreihen mit **F3** geladen werden und die Anfrage, ob die neue Messreihe zusätzlich zur vorhandenen Messreihe geladen werden soll, mit **Ja** bestätigt wird.
- 4. Zur genauen Bestimmung der jeweiligen Reaktionstemperatur betätigt man im Diagramm **spezif. Leitfähigkeit** die rechte Maustaste, wählt **Mittelwert einzeichnen** und erhält durch Markierung einer der Temperaturkurven zwischen Anfang und Ende der Reaktion die Durchschnittstemperatur  $\vartheta_m$ , bei der die jeweilige Messung abgelaufen ist. Der Mittelwert wird eingezeichnet und kann links unten in der Statuszeile abgelesen werden. Mit **Alt+T** kann man den zugehörigen Zahlenwert ins Diagramm übertragen.
- 5. Die Geschwindigkeitskonstanten k bei den verschiedenen Temperaturen werden im Diagramm 2. Ordnung ermittelt. Dazu betätigt man im Diagramm die rechte Maustaste, wählt Anpassung durch-



**führen** und **Ausgleichsgerade** und markiert für jede der drei Kurven vom Beginn der Reaktion an den Kurvenbereich, in dem die Anpassung einer Gerade sinnvoll ist. Die Steigung der resultierenden Gerade gibt die Geschwindigkeitskonstante k der Reaktion bei der ermittelten Durchschnittstemperatur  $\vartheta_m$  an. Sie steht als Parameter A der Geradengleichung A\*x+B in der Statuszeile und kann von dort mit der Maus ins Diagramm gezogen oder über die Tastenkombination **Alt+T** dort eingetragen werden.

- 6. In die Tabelle **Arrhenius / Eyring 1** trägt man nun die ermittelten Geschwindigkeitskonstanten und die dazugehörigen absoluten Durchschnittstemperaturen T in K ( $T = \vartheta_m + 273,15$ ) durch Anklicken der entsprechenden Tabellenzelle mit der linken Maustaste und Eingabe der Werte über die Tastatur ein. Aus den Eingaben werden im Diagramm **Arrhenius / Eyring 2** automatisch die Auftragungen nach Arrhenius und Eyring berechnet.
- 7. Zur Ermittlung der Aktivierungsenergie Ea nach Arrhenius legt man im Diagramm **Arrhenius / Eyring 2** den Messpunkten zu In k eine Ausgleichsgerade an, deren resultierende Steigung -Ea/R beträgt. Die an die Messpunkte zu In (k/T) angelegte Ausgleichsgerade hat die Steigung - $\Delta$ H  $^{\#}$ /R und den Achsenabschnitt In (kb/h) + $\Delta$ S  $^{\#}$ /R (siehe Theoretischer Hintergrund). Die Steigungen der Geraden können auch hier als Parameter A, die Achsenabschnitte als Parameter B links unten in der Statuszeile abgelesen und in das Diagramm eingefügt werden.

# **Theoretischer Hintergrund**

Arrhenius klärte den schon länger bekannten exponentiellen Zusammenhang zwischen Temperatur und Reaktionsgeschwindigkeit, indem er die beiden Parameter a und b in der empirischen Formel

$$k = a \cdot e^{-b/T}$$

als Frequenzfaktor A und auf die allgemeine Gaskonstante bezogene Aktivierungsenergie Ea/R identifizierte. Dabei gibt die Aktivierungsenergie Ea die Energie an, die zwei aufeinander treffende Moleküle besitzen müssen, um miteinander reagieren zu können; der Faktor A setzt sich zusammen aus der Zahl der Molekülzusammenstöße pro Sekunde und einem sterischen Faktor, mit dem berücksichtigt wird, dass zusammenstoßende Moleküle auch eine bestimmte gegenseitige Orientierung aufweisen müssen, um miteinander zu reagieren.

Nach Arrhenius lässt sich die Temperaturabhängigkeit der Geschwindigkeitskonstante also durch

$$k = A \cdot e^{-E_a/RT}$$

wiedergeben. Eine Auftragung von In k gegen 1/T ergibt eine Gerade mit der Steigung -Ea/R und dem Achsenabschnitt In A.

Präzisiert wurde Arrhenius' Gleichung durch die "Theorie des Übergangszustands" von Eyring, die eine genauere Definition für die Parameter A und Ea gibt.

Eyring geht davon aus, dass für alle Elementarreaktionen zwischen zwei Stoffen A und B zunächst ein aktivierter Komplex als Übergangszustand erreicht werden muss; dieser steht mit den Ausgangsstoffen im chemischen Gleichgewicht:

$$A + B \rightleftharpoons AB^{\#}$$

$$K^{\#} = \frac{\left[AB^{\#}\right]}{\left[A\right] \cdot \left[B\right]}$$

Eyrings entscheidende Leistung war der Beweis, dass die aktivierten Komplexe jeder chemischen Elementarreaktion mit der gleichen Geschwindigkeitskonstante in die Produkte umgewandelt werden:

$$\frac{\text{d}[C]}{\text{d}t} = \frac{k_b \cdot T}{h} \cdot \left[ AB^{\#} \right]$$

Hier ist C das Produkt der Elementarreaktion, kb die Boltzmann-Konstante, h das Plancksche Wirkungsquantum und T die absolute Temperatur. Die Geschwindigkeit der gesamten Reaktion beträgt demnach

$$\frac{d[C]}{dt} = \frac{k_b \cdot T}{h} \cdot K^{\#} \cdot [A] \cdot [B]$$

mit der Geschwindigkeitskonstante:



$$k = \frac{k_b \cdot T}{h} \cdot K^{\#}$$

Aus der Thermodynamik ist bekannt, dass jede Gleichgewichtskonstante K aus der Differenz der freien Enthalpien der Produkte und Edukte bestimmt werden kann. Es gilt also:

$$\Delta G^{\#} = -RT \cdot ln K^{\#};$$
  $\Delta G^{\#} = \Delta H^{\#} - T\Delta S^{\#}$ 

Setzt man diese beiden Ausdrücke in die Gleichung der Geschwindigkeitskonstanten ein, erhält man die Gleichung von Eyring:

$$k = \frac{k_b \cdot T}{h} \cdot e^{\Delta S^{\#}/R} \cdot e^{-\Delta H^{\#}/RT}$$


 $\Delta S^{\#}$  heißt Aktivierungsentropie,  $\Delta H^{\#}$  ist die Aktivierungsenthalpie. Diese beiden Parameter lassen Rückschlüsse auf den Übergangszustand einer Reaktion zu: Eine negative Aktivierungsentropie wie im Versuchsbeispiel weist im Vergleich zum Ausgangszustand auf einen Übergangszustand höherer Ordnung hin, d.h. es müssen zum Erreichen des aktivierten Komplexes Bindungen ausgebildet werden bzw. die Teilchen in einer bestimmten Position zueinander stehen. Ist  $\Delta S^{\#}$  negativ, wirkt die Entropie bei steigender Temperatur verlangsamend auf die Reaktion. Eine positive Aktivierungsentropie hingegen weist auf den Bruch von Bindungen im aktivierten Komplex oder auf die Erhöhung von Rotationsfreiheitsgraden um eine oder mehrere Bindungen hin. Sie wirkt sich mit steigender Temperatur beschleunigend auf eine Reaktion aus.

Die aus Aktivierungsentropie und Aktivierungsenthalpie resultierende freie Aktivierungsenthalpie  $\Delta G^{\#}$  einer Reaktion ist immer positiv. Ihr temperaturabhängiger Betrag bestimmt die Größe der Geschwindigkeitskonstante und hängt dadurch mit der Reaktionsgeschwindigkeit zusammen. Im Versuchsbeispiel ergibt sich aus den ermittelten Werten für  $\Delta S^{\#}$  und  $\Delta H^{\#}$  bei 298 K (25 °C) eine freie Aktivierungsenthalpie von

$$\Delta G^{\#} = 68200 \text{ J/mol} + 50 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} \cdot 298 \text{ K} = 83,1 \text{ kJ/mol}$$



# Differenzthermoanalyse von Kupfersulfat

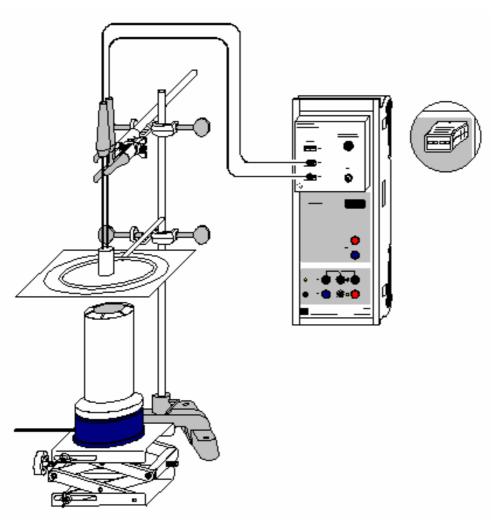



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

# Gefahrenhinweise

Kupfersulfat ist gesundheitsschädlich und umweltgefährlich. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Nicht in die Umwelt gelangen lassen.

Verbrennungsgefahr. Vor Berühren Apparatur auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

#### Versuchsbeschreibung

An Hand der Differenzthermoanalyse (DTA) lassen sich einerseits wichtige Größen der physikalischen Chemie wie Umwandlungswärmen bzw. -enthalpien messen, andererseits eignet sie sich als relativ leicht zugängliche Methode gut zum Einstieg in die chemische Analytik.

Bei der DTA werden in einem regelbaren Ofen zwei Substanzen erhitzt: eine über den gesamten Temperaturverlauf chemisch inerte Referenzsubstanz (z.B. Aluminiumoxid, Al2O3) und die Probensubstanz, die im Temperaturbereich der Messung auf Phasenübergänge und/oder chemische Reaktionen hin untersucht wird. Die Substanzen befinden sich an symmetrischen Stellen im Ofen und sind mit jeweils mit einem Temperaturfühler versehen.

Findet nun in der untersuchten Probe ein endothermer (z.B. Verdampfung) oder exothermer (z.B. Verbrennungsreaktion) Vorgang statt, so entsteht zwischen Referenzsubstanz und Probe eine Tem-



peraturdifferenz  $\Delta T$ . Bei endothermen Vorgängen erwärmt sich die Probensubstanz langsamer, bei exothermen Vorgängen schneller als die Referenzsubstanz. Durch die Auftragung von  $\Delta T$  gegen die Referenztemperatur  $\vartheta$  ergibt sich für jede Probe eine charakteristische DTA-Kurve, aus der Übergangstemperatur und Übergangsenthalpie der Vorgänge bestimmt werden können.

Der leichteren Nachvollziehbarkeit halber wird im vorliegenden Versuchsbeispiel eine offene, das Messprinzip besser veranschaulichende Messanordnung benutzt. Zur genauen Bestimmung von Übergangsenthalpien muss jedoch ein geschlossener Ofen benutzt werden.

Im Beispiel werden die Abspaltungstemperaturen des gebundenen Kristallwassers in Kupfersulfat bis 150 °C ermittelt. Dazu wird die Möglichkeit der direkten Messung einer Differenztemperatur mit der Chemie-Box genutzt, die genauer ist als die rechnerische Differenzbildung aus zwei einzelnen Temperaturen.

#### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Chemie-Box oder NiCr-Ni-Adapter S	524 067(3)
2	Temperaturfühler NiCr-Ni, Typ K, Ø 1,5 mm	529 676
1	Metallblock zur Differenzthermoanalyse	666 202
1	Packung Probegläschen, 20 Stück	666 203
1	Elektrobrenner	666 776
1	Stativfuß, V-förmig	300 02
1	Stativstange, 47 cm	300 42
2	Kreuzmuffen	666 543
1	Kleinklemme	666 551
1	Stativring, Ø 100 mm	666 573
1	Wärmeschutznetz, 160*160 mm	666 685
1	Laborhebestativ	666 583
2	Mörser, 50 ml	608 350
2	Pistille	608 360

#### Benötigte Chemikalien

Aluminiumoxid (Al2O3), z.B. 250 g	670 2900
Kupfer(II)-sulfat-5-hydrat, z.B. 100 g	672 9600

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Chemie-Box mit den an den Eingängen T2 und T3 angeschlossenen Temperaturfühlern wird in den Eingang A des Sensor-CASSY gesteckt.

Aus dem Stativmaterial, Wärmeschutznetz, Elektrobrenner und Laborhebestativ wird eine Vorrichtung zum Erhitzen des Metallblocks zur DTA zusammengebaut. Dieser wird genau über die Heizöffnung des Elektrobrenners auf das Wärmeschutznetz gestellt. Zu Beginn der Messung sollte die Heizöffnung des Brenners ca. 5 cm Abstand vom Wärmeschutznetz haben.

Eine Spatelspitze Kupfersulfat wird in einem Mörser fein zerrieben und damit eines der Probengläschen zu ca. zwei Dritteln befüllt. Ebenso verfährt man mit einem zweiten Probengläschen und einer Spatelspitze Aluminiumoxid.

Der an T2 angeschlossene Temperaturfühler wird möglichst tief in das Gläschen mit Aluminiumoxid, der an T3 angeschlossene Temperaturfühler in das Kupfersulfat hineingedreht.

Beide Temperaturfühler werden gemeinsam unterhalb des Griffs mit einer Kleinklemme so befestigt, dass die Probengläschen auf dem Boden der beiden Löcher des Metallblocks aufliegen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Metallblock mit der gesamten Standfläche Kontakt zum Wärmenetz hat.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Elektrobrenner einschalten.
- Etwa eine Minute danach Messung mit F9 oder der Schaltfläche starten.
- Wenn die Temperaturkurve der Referenzsubstanz abflacht, das Laborhebestativ etwas h\u00f6her drehen, um den Abstand des Brenners zum W\u00e4rmeschutznetz zu verringern.



Messung bei Erreichen von ca. 150°C mit F9 oder der Schaltfläche beenden, Elektrobrenner abschalten.

#### **Auswertung**

- 1. In der Darstellung **Standard** sind die Temperaturwerte und die Temperaturdifferenz  $\Delta T$  gegen die Zeit aufgetragen.
- 2. In der Darstellung **dT(T)** ist die Temperaturdifferenz gegen die Referenztemperatur (Temperatur des Aluminiumoxids) aufgetragen.

Zur Bestimmung der Umwandlungstemperatur legt man in dieser Darstellung zunächst an die linken Flanken der Peaks jeweils eine Wendetangente an. Dies geschieht durch Betätigen der rechten Maustaste im Diagramm, Auswahl der Unterpunkte **Anpassung durchführen** und **Ausgleichsgerade** und anschließende Markierung eines schmalen Kurvenbereichs um den Wendepunkt der linken Flanke des Peaks. Danach wird für jeden Peak die dazu gehörende Basislinie bestimmt. Diese wird ebenfalls als **Ausgleichsgerade** konstruiert, wobei als Kurvenbereich der jeweilige Bereich kurz vor dem Peak zu markieren ist. Im Versuchsbeispiel liegen die Peaks sehr nahe beieinander, so dass die erste Basislinie auch für den zweiten Peak benutzt wird und die Basislinie des dritten Peaks als waagerechte Linie durch das vorherige Minimum konstruiert werden muss. Die sich daraus ergebenden Fehler bleiben jedoch gering ( $\pm$  0,3 °C).

Der Schnittpunkt zwischen Wendetangente jedes Peaks und zugehöriger Basislinie wird in der Differenzthermoanalyse als Temperaturwert für den Phasenübergang bzw. die einsetzende Reaktion angegeben. Da die DTA eine dynamische Analysemethode ist, können diese Temperaturen je nach den Bedingungen etwas von den thermodynamischen Gleichgewichtstemperaturen abweichen.

Zur genauen Bestimmung des Schnittpunkts schaltet man mit **Alt+K** die Koordinatenanzeige an, positioniert den Mauszeiger auf dem Schnittpunkt und kann nun mit **Alt+T** die angegebene Temperatur im Diagramm eintragen. Zusätzlich können die Übergänge mit einer senkrechten Linie (Tastenkombination **Alt+S**) und einem erläuternden Text (**Alt+T**) versehen werden.

Die DTA von Kupfersulfat zeigt bis 150 °C drei Peaks. Der erste (ca. 96 °C) gehört zur Abspaltung der ersten beiden gebundenen Wassermoleküle, der zweite Peak stammt aus der Verdampfung dieser Wassermoleküle und der dritte aus der Abspaltung und Verdampfung zweier weiterer Wassermoleküle:

1. 
$$CuSO_4 \cdot 5H_2O \xrightarrow{96^{\circ}C} CuSO_4 \cdot 3H_2O + 2H_2O(I)$$
  
2.  $2H_2O(I) \xrightarrow{103^{\circ}C} 2H_2O(g)$   
3.  $CuSO_4 \cdot 3H_2O \xrightarrow{118^{\circ}C} CuSO_4 \cdot H_2O + 2H_2O(g)$ 

Das letzte gebundene Wassermolekül wird erst bei 250 °C abgespalten; zugunsten der kürzeren Versuchsdauer wurde auf die Aufnahme dieses Peaks verzichtet.

# Weitere Versuchsmöglichkeiten

Um eine deutlichere Trennung der Peaks zu erreichen, kann die Aufheizrate verlangsamt oder die Substanzmenge deutlich verringert werden. Im Hinblick auf die Praktikabilität des Experiments als Demonstrationsversuch wurde in der Beispielmessung auf diese Möglichkeiten verzichtet.

Eine genaue Wägung vor und nach jedem Peak kann Aufschluss über die Menge des entwichenen Kristallwassers geben. Dazu stoppt man die Aufheizung zuerst bei ca. 100 °C, dann bei ca. 115 °C und bei 150 °C und bestimmt nach Abkühlen der Substanz die Massendifferenz zur Ausgangsmasse.


In der beschriebenen Versuchsanordnung ergeben sich vielfältige weitere Bestimmungsmöglichkeiten. Sie ist z.B. geeignet für:

- die Betrachtung der Phasenübergänge des Schwefels (Übergang zwischen  $\alpha$  und  $\beta$ -Modifikation bei ca. 100 °C, Schmelzpunkt bei 119 °C, Übergang zwischen  $\lambda$  und  $\mu$ -Schmelze ab 159 °C),
- die durch die geringe Substanzmenge relativ gefahrlose Ermittlung der Auslösetemperaturen stark exothermer Reaktionen (z.B. Entzündung von Schwarzpulver),
- die Erstellung von Zustandsdiagrammen von Gemischen (z.B. Zinn und Blei).

Eine genauere Regelung für einen konstanten Temperaturanstieg wird durch die Verwendung eines zum Brenner passenden Leistungsstellgeräts (Katalog-Nr. 667 823) ermöglicht.



# Herstellung einer Kältemischung

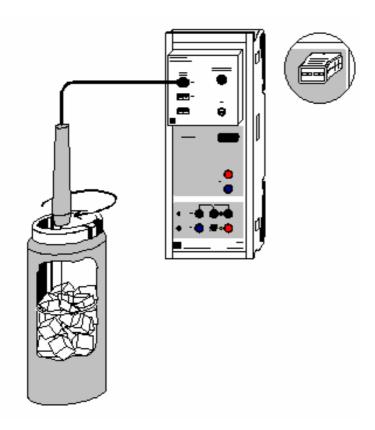



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

# ■ Beispiel laden

### Versuchsbeschreibung

Mischt man Eis mit einem Salz, so löst sich das Salz unter Schmelzen eines Teils des Eises in dem dabei gebildeten Wasser. Die zum Schmelzen und Lösen benötigte Energie wird der Umgebung entzogen, so dass sich die gesamte Mischung abkühlt. Je nach Art des Salzes werden Temperaturen von bis zu -60 °C erreicht. Auch in Wasser lösliche Flüssigkeiten (z.B. Ethanol) können ähnliche Effekte bewirken.

Das Schmelzen von Eis bei Zugabe eines Salzes beruht auf der Gefrierpunktserniedrigung einer Lösung gegenüber dem reinen Lösungsmittel. Dadurch wird das Wasser-Eis-Gleichgewicht zum flüssigen Zustand verschoben, und der Umgebung wird Wärme entzogen, bis sich das Gleichgewicht bei einer tieferen Temperatur wieder neu eingestellt hat.

Im Versuch wird eine einfache Kältemischung aus Kochsalz und Eis in einem Dewar-Gefäß hergestellt. Auch mit dieser kostengünstigen Mischung lassen sich Temperaturen von unter -20 °C erreichen.

# **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Chemie-Box oder NiCr-Ni-Adapter S	524 067(3)
1	Temperaturfühler NiCr-Ni, Typ K	529 676
1	Dewar-Gefäß, 0,5 I	667 320
8	Uhrgläser, $\emptyset$ = 8 cm	664 154

1 Laborwaage

1 PC mit Windows ab 95/98/NT



#### Benötigte Substanzen

Natriumchlorid, z.B. 250 g Eis, ca. 200 g destilliertes Wasser 673 5700

371

#### Versuchsvorbereitung

- Die Chemie-Box mit dem an T1 angeschlossenen Temperaturfühler auf den Eingang A des Sensor-CASSY stecken.
- Auf die Uhrgläser jeweils 10 g Natriumchlorid einwiegen.
- Das Eis möglichst fein zerkleinern, damit es sich gut mit dem Kochsalz mischen lässt.

#### Kalibrierung

Um ausreichende Genauigkeit zu gewährleisten, muss vor der ersten Messung und später in größeren Zeitabständen eine Kalibrierung der Temperaturfühler erfolgen.

- Einstellungen laden
- Temperaturfühler in Eiswasser (Gemisch aus Eis und wenig Wasser) tauchen, mit den Temperaturfühlern umrühren und warten, bis sich in den Anzeigeinstrumenten auf  $\pm$  0,1 °C stabile Messwerte einstellen.
- In den Einstellungen  $\vartheta$ A11 unter **Korrigieren** in der ersten Zeile als Sollwert "0" eintragen und die Schaltfläche **Offset korrigieren** betätigen.
- Einstellungen mit F2 unter einem neuen Namen abspeichern.
- Sensor-CASSY, Chemie-Box und Temperaturfühler kennzeichnen, so dass sie beim nächsten Versuch in derselben Kombination wieder verwendet werden können (nur dann passt die gespeicherte Kalibrierung).

#### Versuchsdurchführung

- Kalibrierte Einstellungen verwenden oder laden.
- Zerkleinertes Eis in das Dewar-Gefäß füllen und wenig destilliertes Wasser zugeben.
- Temperaturfühler in das Eis tauchen und umrühren.
- Ersten Messwert mit **F9** oder der Schaltfläche aufnehmen und in der Tabellenspalte mNaCl als ersten Wert "0" eintragen. Dazu die Tabellenzelle mit der linken Maustaste anklicken und die Zahl über die Tastatur eingeben.

Folgenden Ablauf einhalten, bis das gesamte Kochsalz zum Eis gegeben wurde:

- 10 g Kochsalz in das Dewar-Gefäß geben.
- Mit dem Temperaturfühler sorgfältig umrühren, bis in der gesamten Kältemischung eine einheitliche Temperatur gemessen wird (mit Hilfe des Anzeigeinstruments &A11 überprüfen).
- Messwert mit **F9** oder der Schaltfläche aufnehmen.
- In die zum aufgenommenen Messwert gehörende Tabellenzelle für mNaCI die Gesamtmasse des bis dahin zugegebenen Kochsalzes eintragen.

#### Auswertung

Die Messkurve zeigt die Temperatur in der Kältemischung in Abhängigkeit von der Masse zugegebenen Natriumchlorids. Deutlich wird, dass die Zugabe von 10 g NaCl zu reinem Eis eine wesentlich größere Temperaturabnahme bewirkt als die Zugabe zu einer bereits stark salzhaltigen Kältemischung. Nach Zugabe von 60 g NaCl ist eine Sättigung eingetreten. Weitere Kochsalzzugabe bewirkt keine Abkühlung der Mischung, da die Grenze der Löslichkeit von Kochsalz im vorhandenen Wasser erreicht ist.


Zur Verdeutlichung der Sättigungstemperatur kann mit **Alt+W** durch das Temperaturminimum eine waagerechte Linie gezogen werden. Der Temperaturwert wird in der Statuszeile angezeigt und kann mit der Maus oder über die Tastenkombination **Alt+T** in das Diagramm übertragen werden.

Falls gewünscht, können die Temperaturwerte auch als Balkendiagramm angezeigt werden. Dazu betätigt man im Diagramm die rechte Maustaste und wählt dann **Werteanzeige wählen** und **Balken einblenden**.


Das erstellte Diagramm kann über das Druckersymbol in der oberen Bildschirmleiste ausgedruckt werden.



# Bestimmung der Schmelzenthalpie von Eis

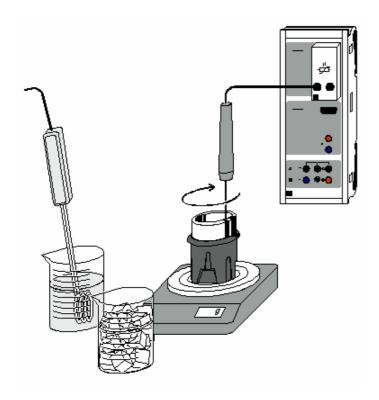

Alternativ mit Temperatursensor S:

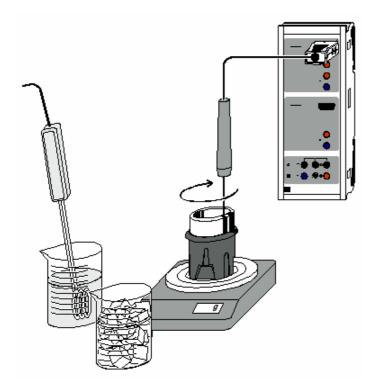



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

- Beispiel laden (Temperatur-Box)Beispiel laden (Temperatursensor S)



#### Versuchsbeschreibung

Bringt man eine bestimmte Menge Eis in das warme Wasser eines Kalorimeters, so lässt sich nach Auflösen des Eises und vollständiger Durchmischung eine Mischungstemperatur  $\vartheta_m$  bestimmen, die von den Massen des Wassers (m1) und des Eises (m2) und von den jeweiligen Temperaturen  $\vartheta_1$  und  $\vartheta_2$  abhängt. Um die Auswertung zu vereinfachen, wird das Eis vor der Messung auf  $\vartheta_2 = 0$  °C gebracht.

Die schnelle Aufnahme der Messwerte mit CASSY Lab erlaubt dabei die Ermittlung einer Temperaturkurve, die zur Berechnung der Schmelzenthalpie von Eis genutzt werden kann. Mit dem gleichen einfachen Aufbau sind auch andere kalorimetrische Messungen möglich, z.B. Mischungsversuche oder die Bestimmung von Wärmekapazitäten.

### Benötigte Geräte (Temperatur-Box)

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Temperatur-Box	524 045
1	Temperaturfühler NTC	666 212
1	Dewar-Gefäß	386 48
1	Sicherheits-Tauchsieder	303 25
1	Becherglas, niedrige Form, 250 ml	664 130
1	Becherglas, niedrige Form, 600 ml	664 132
1	Waage, Messbereich bis 500 g, Auflösung	ı 0,01 g
1	saugfähiges Tuch	

# Benötigte Geräte (Temperatursensor S)

1	Sensor-CASSY	524	010
1	CASSY Lab	524	200
1	Temperatursensor S	524	044
1	Dewar-Gefäß	386	48
1	Sicherheits-Tauchsieder	303	25
1	Becherglas, niedrige Form, 250 ml	664	130
1	Becherglas, niedrige Form, 600 ml	664	132
1	Waage, Messbereich bis 500 g, Auflösung	0,01	g
1	saugfähiges Tuch		

#### Benötigte Substanzen

Eis, ca. 100 g destilliertes Wasser

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Temperatur-Box mit dem angeschlossenen Temperaturfühler wird auf den Eingang A des Sensor-CASSY gesteckt. Alternativ wird dort der Temperatursensor S angeschlossen.

In dem größeren Becherglas wird destilliertes Wasser auf eine Temperatur um 80 °C erhitzt. Das trockene Dewar-Gefäß wird auf die Waage gestellt und deren Anzeige auf 0 ausgeglichen.

#### Kalibrierung

Während das Wasser erhitzt wird, sollte der Temperaturfühler kalibriert werden:

- Einstellungen laden (Temperatur-Box)
- Einstellungen laden (Temperatursensor S)
- Das Eis zerstoßen und in das zweite Becherglas füllen.
- Etwas destilliertes Wasser dazu schütten. Es sollte sich nach kurzer Wartezeit das bei 0 °C liegende Eis-Wasser-Gleichgewicht einstellen.
- Den Temperaturfühler in das Eis-Wasser-Gemisch tauchen und rühren.
- In den Einstellungen Sensoreingang  $\vartheta$ A1 unter **Korrigieren** in der ersten Zeile den Sollwert 0 eintragen und die Schaltfläche **Offset korrigieren** betätigen.



#### Versuchsdurchführung

- Ungefähr 120 g heißes Wasser in das Dewar-Gefäß füllen.
- Wasser aus dem Eis-Wasser-Gemisch wegschütten, Eis auf das Tuch schütten und gut abtrocknen.
- Masse des heißen Wassers ablesen und aufschreiben.
- Temperaturfühler in das Gefäß stellen.
- Messung mit **F9** oder der Schaltfläche starten.
- Nach ca. 30 bis 60 Sekunden Wartezeit das Eis aus dem Tuch in das Dewar-Gefäß schütten. Dabei ständig mit dem Temperaturfühler umrühren.
- Weiterrühren, bis das gesamte Eis aufgelöst ist.
- Nach weiteren 30 bis 60 Sekunden die Messung mit F9 oder der Schaltfläche beenden
- Temperaturfühler aus dem Dewar-Gefäß nehmen, gut abtropfen lassen und Gesamtmasse an der Waage ablesen und aufschreiben.

#### **Auswertung**

Im Diagramm sind die Messwerte für die Temperatur  $\vartheta$  gegen die Zeit t aufgetragen.

- 1. Zur Bestimmung der Kalorimeter- und der Mischungstemperatur legt man zunächst den linearen Kurvenbereichen am Anfang und am Ende der Messung eine Gerade an (dazu jeweils im Diagramm die rechte Maustaste betätigen, **Anpassung durchführen** und **Ausgleichsgerade** wählen und entsprechenden Kurvenbereich markieren).
- 2. Dann erzeugt man mit **Alt+S** eine senkrechte Linie, die man mit der Maus so positioniert, dass die beiden (annähernd dreieckigen) Flächen, die von jeweils einer Ausgleichsgerade, der senkrechten Linie und der Messkurve gebildet werden, gleich groß sind. Der Schnittpunkt der Senkrechten mit der oberen Geraden gibt die Ausgangstemperatur des Kalorimeters  $\vartheta$ 1, der untere Schnittpunkt die Mischungstemperatur  $\vartheta$ m an. Da die Geraden nahezu waagerecht verlaufen, ist nur mit einem relativ kleinen Fehler zu rechnen ( $\pm$  0.1 °C).
- 3. Zur genauen Bestimmung der Koordinaten betätigt man **Alt+K** und bewegt den Mauszeiger genau auf die Schnittpunkte. Die Koordinaten werden in der Statuszeile links unten angezeigt und können mit **Alt+T** als Text ins Diagramm übertragen werden.

Die Berechnung der Schmelzenthalpie ΔHf kann auf folgende Weise hergeleitet werden:

I) Wärmemenge, die das Kalorimeter und das heiße Wasser abgeben:

$$\Delta Q_1 = c_w \cdot (m_1 + m_0) \cdot (\vartheta_1 - \vartheta_m)$$

II) Wärmemenge, die das Eis (ϑ2 = 0 °C) vom Kalorimeter aufnimmt:

$$\Delta Q_2 = m_2 \cdot \Delta H_f + m_2 \cdot c_w \cdot (\vartheta_m - 0)$$

Hier ist  $c_W$  die Wärmekapazität von Wasser,  $m_1$  die Masse des warmen Wassers,  $m_2$  die des Eises und  $m_0$  der Wasserwert des Kalorimeters. Da nahezu kein Wärmeaustausch mit der Umgebung stattfindet, gilt

$$\Delta Q_1 = \Delta Q_2$$

Folglich berechnet sich die Schmelzenthalpie ΔHf

$$\Delta H_f = \left(\frac{m_1 + m_0}{m_2} \cdot (\vartheta_1 - \vartheta_m) - \vartheta_m\right) \cdot c_w$$

Mit dem Wasserwert  $m_0 = 24$  g des verwendeten Dewar-Gefäßes ergibt sich aus den Messwerten des Versuchsbeispiels die Rechnung:

$$\Delta H_{f} = \left(\frac{121 + 24}{75,6} \cdot (73,5 - 21,5 \, ^{\circ}C) - 21,5 \, ^{\circ}C\right) \cdot 4,19 \, \text{J/} \, ^{\circ}C \cdot \text{g} = 327,8 \, \text{J/g}$$

Dies liegt nahe am Literaturwert von 334 J/g.




 $\Delta H_f$  ist wesentlich größer als die Wärmekapazität von 1 g Wasser:

$$\frac{\Delta H_f}{c_w \cdot 1g} = \frac{334}{4{,}19} = 79{,}7$$

Das bedeutet: Mit der Energie, die benötigt wird, um 1 g Eis von 0  $^{\circ}$ C zu schmelzen, kann 1 g Wasser von 0  $^{\circ}$ C auf ca. 80  $^{\circ}$ C erhitzt werden.



# Gasgesetze

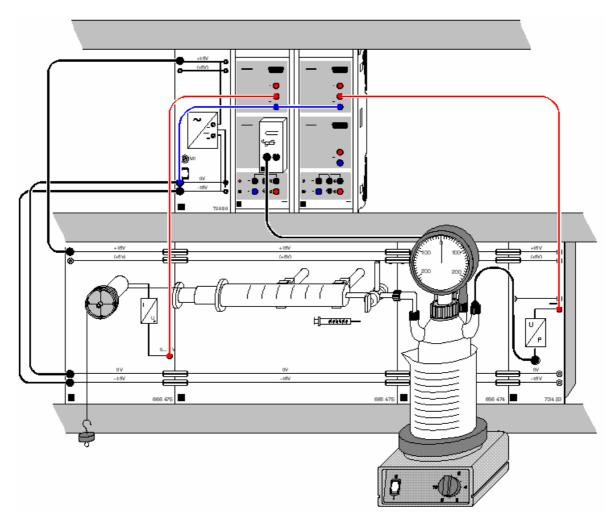



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

- Beispiel für Gesetz von Boyle-Mariotte (isotherm) laden
- Beispiel für Gesetz von Amontons (isochor) laden
- Beispiel für Gesetz von Gay-Lussac (isobar) laden

#### Versuchsbeschreibung

In diesem Versuch werden die 3 Messgrößen Druck p, Temperatur T und Volumen V parallel erfasst. Bei idealem Verhalten des jeweiligen Gases gilt das ideale Gasgesetz

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$
,

wobei n die Stoffmenge in mol und R = 8,315 J/K/mol die allgemeine Gaskonstante ist. Zur experimentellen Bestätigung des Gasgesetzes wird von den drei variablen Parametern (p, V und T) jeweils einer konstant gehalten. Somit kommt man zu drei abgeleiteten Gesetzmäßigkeiten:

Gesetz von Boyle-Mariotte (T = konst., isotherm):  $p \sim 1/V$  Gesetz von Amontons (V = konst., isochor):  $p \sim T$  Gesetz von Gay-Lussac (p = konst., isobar):  $V \sim T$ 

#### **Benötigte Geräte**

2	Sensor-CASSYs	524 010
1	CASSY Lab	524 200



1	Temperatur-Box	524 045
1	Temperaturfühler, NiCr-Ni	666 216
1	CPS-Elektronischer	
	Wegaufnehmer	666 475
1	CPS-P/U-Wandler	734 83
1	Grundeinheit Gasgesetze	666 474
1	Kolbenprober für Gasgesetze	666 473
1	Stabilisiertes Netzgerät ±15 V	726 86
1	Magnetrührer, heizbar	666 847
1	Rührstäbchen	666 854
1	Laborboy	300 76
1	Becherglas, 1000 ml, nF	664 107
1	Schraubkappe GL 18	667 305
1	Satz 10 Silikondichtungen	667 306
1	Satz 10 Verbindungsstecker	501 511
1	Profilrahmen C100, zweizeilig	666 428
3	Kabel, 100 cm, schwarz	500 444
2	Paar Kabel, 100 cm, rot und blau	501 46
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Den elektronischen Wegaufnehmer, den Kolbenprober für die Gasgesetze, die Grundeinheit Gasgesetze und das Netzgerät in die untere Schiene des Profilrahmens einsetzen und die einzelnen Platten mit den Verbindungssteckern aneinanderfügen. An der Grundeinheit werden der Kolbenprober, das Thermoelement und der Drucksensor mit den entsprechenden GL 18 Verschraubungen angebracht. Die GL 45 Verschraubung wird mit dem beiliegenden Schraubverschluss abgedichtet. Das Laststück mit Hilfe der Angelschnur an der Klemme für den Kolbenprober festbinden. Die Klemme auf das Ende des Stempels pressen und die Schnur zwei mal über die Rolle des elektronischen Wegaufnehmers legen. Das Laststück muss bei eingeschobenem Stempel ca. 30 bis 40 cm hoch über der Experimentierfläche schweben. Die Angelschnur entsprechend kürzen.

Die beiden Sensor-CASSYs in die obere Schiene des CPS-Rahmens einsetzen und kaskadieren (direkt aneinander stecken). Die Analogeingänge des Sensor-CASSYs werden folgendermaßen belegt:

- Sensoreingang A1 über Experimentierkabel mit Spannungsausgang des CPS-Elektronischen-Wegaufnehmers verbinden.
- Sensoreingang B1 über Temperatur-Box mit dem NiCr-Ni Temperaturfühler verbinden.
- Sensoreingang A2 über Experimentierkabel mit dem Spannungsausgang des CPS-P/U-Wandlers verbinden.

### Versuchsdurchführung

- a) Gesetz von Boyle-Mariotte (T = konst., p ~ 1/V)
- Einstellungen laden
- Dreiwegehahn öffnen.
- Stempel des Kolbens bis zur 100 ml Marke herausziehen und Umlenkrolle bis kurz vor Linksanschlag drehen.
- Volumen V = 725 ml kontrollieren, ggf. mit Justierschraube des CPS-Elektronischen-Wegaufnehmers einstellen.
- Hahn so schließen, dass nur eine Verbindung vom Kolben zur Flasche besteht, weitere Luft also von außen nicht eindringen kann.
- Erste Messwerte mit F9 aufnehmen.
- Stempel vorsichtig in 10 ml Intervallen hineinpressen und warten, bis sich die vorher gemessene Temperatur (Außentemperatur) wieder eingestellt hat.
- Weitere Messwerte jeweils mit F9 aufnehmen.
- b) Gesetz von Amontons (V = konst., p ~ T)
- Einstellungen laden
- Dreiwegehahn öffnen zur Belüftung der Woolfschen Flasche.
- Hahn so schließen, dass keine Verbindung zur Flasche besteht.
- Heizplatte und Magnetrührer einschalten.
- · Automatische Messung mit F9 starten.



- Bevor das Wasser im Becherglas zu sieden beginnt, Heizplatte abschalten und die Messung mit F9 beenden.
- c) Gesetz von Gay-Lussac (p = konst., V ~ T)
- Einstellungen laden
- Heizplatte und Magnetrührer einschalten.
- Bevor das Wasser im Becherglas zu sieden beginnt, Heizplatte ausschalten.
- Dreiwegehahn öffnen.
- Stempel des Kolbens bis zur 100 ml Marke herausziehen und Umlenkrolle bis kurz vor Linksanschlag drehen.
- Volumen V = 725 ml kontrollieren, ggf. mit Justierschraube des CPS-Elektronischen-Wegaufnehmers einstellen.
- Hahn so schließen, dass nur eine Verbindung vom Kolben zur Flasche besteht, weitere Luft also von außen nicht eindringen kann.
- Erste Messwerte mit F9 aufnehmen.
- Stempel vorsichtig in 5 ml Intervallen hineinpressen und warten, bis sich der vorher gemessene Druck (Außendruck) wieder eingestellt hat.
- Weitere Messwerte jeweils mit F9 aufnehmen.
- Messung beenden, sobald annähernd Außentemperatur erreicht ist.

#### Auswertung

Zur Auswertung der jeweiligen Experimente werden folgende Diagramme benutzt:

- a) Isotherme Versuchsdurchführung (T = konst.): p(V)-Diagramm
- b) Isochore Versuchsdurchführung (V = konst.): p(T)-Diagramm
- c) Isobare Versuchsdurchführung (p = konst.): T(V)-Diagramm

Diese Diagramme sind in der Darstellung **Regression** (mit der Maus anklicken) bereits so skaliert vorbereitet, dass der Koordinaten-Nullpunkt sichtbar ist und im Auswertungsmenü (rechte Maustaste im Diagramm) eine der folgenden Anpassungen gewählt werden kann:

a) Isotherme Versuchsdurchführung (p ~ 1/V): Hyperbel 1/x


b) Isochore Versuchsdurchführung (p  $\sim$  T): Ausgleichs- oder Ursprungsgerade c) Isobare Versuchsdurchführung (T  $\sim$  V): Ausgleichs- oder Ursprungsgerade

# **Anmerkung**

Die Skalierung in der Darstellung **Regression** beginnt jeweils mit dem Nullpunkt und ist auf einen großen Bereich gespreizt. Dadurch können markante Verläufe und Schnittpunkte besser erkannt und erläutert werden.



# Leitfähigkeitsbestimmung verschiedener Lösungen

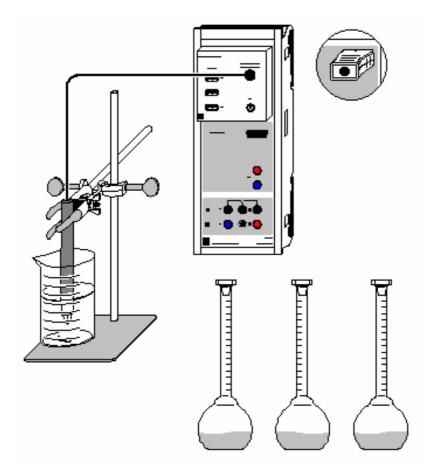



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

#### ■ Beispiel laden

#### Versuchsbeschreibung

Die elektrische Leitfähigkeit wässriger Lösungen hängt von mehreren Parametern ab:

a) Konzentration der Lösung, b) Dissoziationsgrad des Stoffes, c) Beweglichkeit der Ionen und d) Größe der Ladung.

Aus dem Vergleich gemessener Leitfähigkeiten verschiedener Lösungen können auf diese Parameter Rückschlüsse gezogen werden.

Die ermittelten Werte werden von CASSY Lab in gut lesbarer Großanzeige und übersichtlichen Diagrammen dargestellt.

# **Benötigte Geräte**

1 Sensor-CASSY	524 010
1 CASSY Lab	524 200
1 Chemie-Box oder Leitfähigkeits-Adapter S	524 067(1)
1 Leitfähigkeitssensor	529 670
1 Bunsenstativ, 450 mm	666 502
1 Kreuzmuffe	666 543
1 Kleinklemme	666 551
1 Becherglas, 100 ml, hohe Form	664 137
15 Messkolben, 100 ml	665 793



1	Vollpipette, 50 ml	665 977
1	Vollpipette, 10 ml	665 975
2	Pipettierbälle	666 003
1	Spatel	666 962
1	Uhrglas, z.B. 80 mm	664 154
1	Pulvertrichter, z.B. 60 mm	602 681
1	Waage (mindestens bis 100 g,	
	Auflösung 0,01 g)	
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Benötigte Chemikalien

D(+)-Glucose, z.B. 100 g	672 1100
Essigsäure, c = 1 mol/l, z.B. 1000 ml:	671 9590
Magnesiumsulfat-7-hydrat, z.B. 100 g	673 1600
Natriumchlorid, z.B. 250 g	673 5700
Salzsäure, c = 1 mol/l, 500 ml	674 6900
dest. Wasser	
evtl.:	
Kalibrierlösung, 111,8 mS/cm	667 4644
Kalibrierlösung, 12,88 mS/cm	667 4640

# Herstellung der Lösungen

Zur Herstellung der Messlösungen werden Waage, Pipetten, Messkolben, Spatel, Uhrglas und Trichter benötigt. Es werden jeweils drei Lösungen verschiedener Konzentrationen hergestellt. Selbstverständlich können weitere Lösungen anderer Konzentrationen zur Messung hinzugenommen oder Messwerte ausgelassen werden.

## 1) Glucoselösungen (1 mol/l, 0,5 mol/l, 0,1 mol/l)

Auf das auf der Waage liegende Uhrglas werden genau 19,82 g (1 mol/l) bzw. 9,91 g (0,5 mol/l) und 1,98 g (0,1 mol/l) Glucose eingewogen und mit destilliertem Wasser durch den Trichter jeweils in einen 100 ml-Kolben gespült. Uhrglas, Spatel und Trichter werden anschließend gereinigt.

# 2) Essigsäurelösungen (0,5 mol/l, 0,1 mol/l, 0,01 mol/l)

Mit der Pipette werden 50 ml (0,5 mol/l) bzw. 10 ml (0,1 mol/l) 1-molare Essigsäure in jeweils einen 100 ml-Messkolben gegeben und mit destilliertem Wasser bis zum Eichstrich aufgefüllt. Die 0,01-molare Essigsäure wird aus 10 ml 0,1-molarer Lösung in einem neuen Kolben angesetzt.

# 3) Magnesiumsulfatlösungen (0,5 mol/l, 0,1 mol/l, 0,01 mol/l)

Auf das auf der Waage liegende Uhrglas werden genau 12,32 g (0,5 mol/l) bzw. 2,46 g (0,1 mol/l) Magnesiumsulfat eingewogen und mit destilliertem Wasser durch den Trichter jeweils in einen 100 ml-Kolben gespült. Die 0,01-molare Lösung wird mit der gespülten Pipette aus 10 ml 0,1-molarer Magnesiumsulfat-Lösung in einem neuen Kolben angesetzt. Uhrglas, Spatel, Trichter und Pipette werden anschließend gereinigt.

# 4) NaCI-Lösungen (0,5 mol/l, 0,1 mol/l, 0,01 mol/l)

Auf das auf der Waage liegende Uhrglas werden genau 2,92 g (0,5 mol/l) Natriumchlorid eingewogen und mit destilliertem Wasser durch den Trichter jeweils in einen 100 ml-Kolben gespült. Die 0,1-molare Lösung wird mit der Pipette aus 20 ml 0,5-molarer Lösung in einem neuen Messkolben angesetzt, die 0,01-molare Lösung aus 10 ml der 0,1-molaren Lösung.

#### 5) Salzsäurelösung (0,5 mol/l, 0,1 mol/l, 0,01 mol/l)

Mit gereinigten Pipetten werden 50 ml (0,5 mol/l) bzw. 10 ml (0,1 mol/l) 1-molare Salzsäure jeweils in einen 100 ml-Messkolben gegeben und mit destilliertem Wasser bis zum Eichstrich aufgefüllt. Die 0,01-molare Lösung wird aus 10 ml 0,1-molarer HCl in einem neuen Kolben angesetzt.

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Chemie-Box mit dem angeschlossenen Leitfähigkeitssensor wird in den Eingang A des Sensor-CASSY gesteckt. Der gut mit destilliertem Wasser abgespülte Leitfähigkeitssensor wird in der Klemme befestigt und kann mit der Kreuzmuffe am Stativ nach Bedarf in der Höhe verschoben werden.



#### Kalibrierung

#### Einstellungen laden

Die Zellkonstante des Leitfähigkeitssensors zur Chemie-Box ist mit 0,58 bereits in CASSY Lab voreingestellt. Wird ein anderer Leitfähigkeitssensor verwendet, ist dessen Zellkonstante in den Einstellungen Leitfähigkeit CA1 unter **Korrigieren** als Faktor einzutragen und die Schaltfläche **Faktor korrigieren** zu betätigen.

Zur genaueren Bestimmung der Zellkonstante können Kalibrierlösungen verwendet werden. Dazu werden Becherglas und Leitfähigkeitssensor zunächst mit destilliertem Wasser, dann mit ca. 30-40 ml Kalibrierlösung gespült. In weitere 50 ml der Kalibrierlösung taucht man wie zur Messung den Leitfähigkeitssensor (Abstände zu den Becherglaswänden einhalten), trägt im Korrektur-Fenster den Sollwert in der zweiten Zeile ein und betätigt nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche **Faktor korrigieren**.

#### Versuchsdurchführung

Folgenden Ablauf nacheinander für destilliertes Wasser, Glucoselösungen, Essigsäure-, Magnesiumsulfat-, Kochsalz- und Salzsäurelösungen, jeweils beginnend mit der geringst konzentrierten Lösung, einhalten:

- Mit 30-40 ml der Lösung Elektrode und Becherglas gut spülen.
- Weitere ca. 60 ml Lösung in das Becherglas füllen.
- Leitfähigkeitssensor so einstellen, dass er 2 cm tief in die Flüssigkeit eintaucht und von allen Wänden 1 cm Abstand hat.
- Ggf. in den Einstellungen Leitfähigkeit CA1 den Messbereich ändern. Es sollte stets ein möglichst niedriger Messbereich ausgewählt werden.
- Nachdem sich ein stabiler Wert eingependelt hat, Messwert mit der Taste **F9** oder der Schaltfläche
  - aufnehmen.
- Die zum Messwert gehörende Konzentration und den Stoff im Diagramm eintragen. Dazu betätigt man Alt+T, gibt Stoff und Konzentrationswert über die Tastatur ein und positioniert mit der Maus den Text an der gewünschten Stelle im Diagramm.
- Zur einfacheren Auswertung vor Beginn der Leitfähigkeitsmessung mit einem neuen Stoff in den Messparametern **neue Messreihe anhängen** auswählen.
- Vor Messung der Leitfähigkeit mit einem neuen Stoff Becherglas und Leitfähigkeitssensor gut mit destilliertem Wasser spülen.

#### **Auswertung**

Die Messwerte sind über die Großdarstellung des Anzeigeinstruments auch für weiter entfernte Personen gut ablesbar. Die Werte werden automatisch als Balken in die Diagramme eingetragen, so dass ein anschaulicher Vergleich der verschiedenen Leitfähigkeiten möglich wird.

Dazu ist das Diagramm **spezif. Leitfähigkeit** als Gesamtüberblick vorbereitet; zum direkten Vergleich zweier Stoffe stehen die weiteren Darstellungen zur Verfügung. Zur deutlicheren Abtrennung der verschiedenen Substanzen voneinander können im Diagramm mit **Alt+S** senkrechte Linien zwischen den Messreihen eingefügt werden.


Es wird klar, dass die Leitfähigkeit einer Lösung stark von der Konzentration abhängig ist. Außerdem ist aus den Versuchsergebnissen abzulesen, dass starke Elektrolyte, die in hohem Maße dissoziieren, den Strom wesentlich besser leiten, als Stoffe, die nicht oder nur zu einem geringen Anteil dissoziieren. Aus der höheren Leitfähigkeit der Salzsäure gegenüber den Kochsalzlösungen kann auf die größere lonenbeweglichkeit der Oxoniumionen verglichen mit Natriumionen geschlossen werden.

Die konzentrierteren Magnesiumsulfat-Lösungen weisen trotz der höheren Ionenladung keine größere Leitfähigkeit auf als die entsprechenden NaCl-Lösungen, weil die Ionen durch die doppelt so hohe Ladung aufeinander starke elektrostatische Kräfte ausüben. Bei niedrigen Konzentrationen (große Abstände zwischen den Ionen) wie z.B. 0,01 mol/l ist die Leitfähigkeit vergleichsweise höher als bei NaCl.

Die erstellten Diagramme können über das Druckersymbol in der oberen Bildschirmleiste ausgedruckt werden.



# Bestimmung der Grenzleitfähigkeit von Natriumchlorid

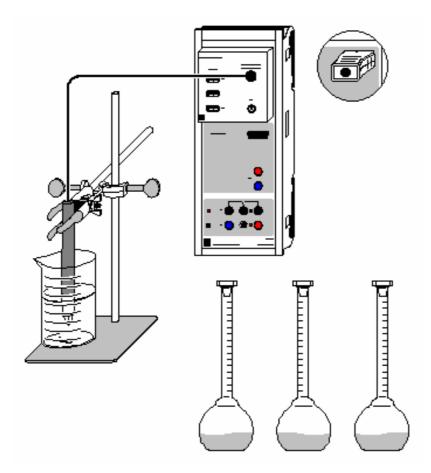



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

#### Beispiel laden

#### Versuchsbeschreibung

Über Leitfähigkeitsmessungen von Lösungen verschiedener Konzentrationen desselben Elektrolyten können einige wichtige Stoffdaten ermittelt werden. An Hand der im Versuch gemessenen spezifischen Leitfähigkeit CA1 von Natriumchlorid-Lösungen ist zuerst deren Äquivalent-Leitfähigkeit  $\Lambda$ eq zu berechnen. Diese ist als die auf die Äquivalent-Konzentration bezogene spezifische Leitfähigkeit definiert:

$$\Lambda_{\text{eq}} = \frac{C_{\text{A1}}}{c_0 \cdot n}$$

Hier bedeutet co die Konzentration der Lösung und n die Anzahl der freigesetzten positiven oder negativen Ladungen. Für NaCl ist n also 1, da es nach der Gleichung

$$NaCl \xrightarrow{H_2O} Na^+ + Cl^-$$

dissoziiert.

Da gelöste Ionen aufeinander elektrostatische Wechselwirkungen ausüben, ist auch die Äquivalent-Leitfähigkeit konzentrationsabhängig. Nur bei unendlicher Verdünnung sind die Wechselwirkungen gleich Null, da die interionischen Abstände unendlich groß werden. Deshalb gibt die Äquivalent-Leitfähigkeit bei unendlicher Verdünnung  $\Lambda_0$  (Grenzleitfähigkeit) die Äquivalent-Leitfähigkeit der vollständig dissoziierten Substanz ohne interionische Wechselwirkungen wieder.  $\Lambda_0$  kann nach Kohlrauschs Quadratwurzelgesetz



$$\Lambda_{\text{eq}} = \Lambda_0 - k \sqrt{c_0}$$

grafisch ermittelt werden.

Der Quotient aus Äquivalent-Leitfähigkeit und Grenzleitfähigkeit  $\Lambda$ eq/ $\Lambda$ o entspricht dem Dissoziationsgrad  $\alpha$  des Natriumchlorids. Dieser ist auch bei einem starken Elektrolyten wie NaCl nur in gering konzentrierten Lösungen nahe 1.

### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Chemie-Box oder Leitfähigkeits-Adapter S	524 067(1)
1	Leitfähigkeitssensor	529 670
1	Bunsenstativ, 450 mm	666 502
1	Kreuzmuffe	666 543
1	Kleinklemme	666 551
1	Becherglas, 100 ml, hohe Form	664 137
1	Messkolben, 250 ml	665 794
6	Messkolben, 100 ml	665 793
1	Vollpipette, 10 ml	665 975
1	Vollpipette, 25 ml	665 976
2	Pipettierbälle	666 003
1	Spatel	666 962
1	Uhrglas, z.B. 80 mm	664 154
1	Pulvertrichter, z.B. 60 mm	602 681
1	Waage (mindestens bis 100 g,	
	Auflösung 0,01 g)	
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Benötigte Chemikalien

Natriumchlorid, z.B. 250 g destilliertes Wasser	673 5700
evtl.:	
Kalibrierlösung, 111,8 mS/cm	667 4644
Kalibrierlösung, 12,88 mS/cm	667 4640

## Herstellung der Lösungen

Zur Herstellung der Messlösungen werden Waage, Pipetten, Messkolben, Spatel, Uhrglas und Trichter benötigt.

Auf das auf der Waage liegende Uhrglas werden genau 29,22 g Natriumchlorid (0,5 mol) eingewogen und mit destilliertem Wasser durch den Trichter in den 250 ml-Kolben gespült. Nach vollständigem Lösen und Auffüllen bis zum Eichstrich wird die erhaltene 2-molare NaCl-Lösung für die Herstellung der anderen Lösungen benutzt. Für jeweils 100 ml Lösung werden benötigt:

fur 1 mol/l:	50 ml
für 0,8 mol/l:	40 ml
für 0,5 mol/l:	25 ml
für 0,2 mol/l:	10 ml
tu o t 1/1	

für 0,1 mol/l: von der Lösung mit c = 1 mol/l: 10 ml für 0,01 mol/l: von der Lösung mit c = 0,1 mol/l: 10 ml

Sind Untersuchungen über den gesamten Konzentrationsverlauf der spezifischen Leitfähigkeit von NaCl beabsichtigt, empfiehlt es sich, zusätzlich einige höher konzentrierte Lösungen herzustellen, z.B. 1,5 mol/l, 3 mol/l, 5 mol/l und 6 mol/l.

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Chemie-Box mit dem angeschlossenen Leitfähigkeitssensor wird in den Eingang A des Sensor-CASSY gesteckt. Der gut mit destilliertem Wasser abgespülte Leitfähigkeitssensor wird in der Klemme befestigt und kann mit der Kreuzmuffe am Stativ nach Bedarf in der Höhe verschoben werden.



#### Kalibrierung

#### ■ Einstellungen laden

Die Zellkonstante des Leitfähigkeitssensors zur Chemie-Box ist mit 0,58 bereits in CASSY Lab voreingestellt. Wird ein anderer Leitfähigkeitssensor verwendet, ist dessen Zellkonstante in den Einstellungen Leitfähigkeit CA1 unter **Korrigieren** als Faktor einzutragen und die Schaltfläche **Faktor korrigieren** zu betätigen.

Zur genaueren Bestimmung der Zellkonstante können Kalibrierlösungen verwendet werden. Dazu werden Becherglas und Leitfähigkeitssensor zunächst mit destilliertem Wasser, dann mit ca. 30-40 ml Kalibrierlösung gespült. In weitere 50 ml der Kalibrierlösung taucht man wie zur Messung den Leitfähigkeitssensor (Abstände zu den Becherglaswänden einhalten), trägt im Korrektur-Fenster den Sollwert in der zweiten Zeile ein und betätigt nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche **Faktor korrigieren**.

Eine solche Korrektur mit Kalibrierlösungen ist auch für den hier verwendeten Leitfähigkeitssensor erforderlich, wenn Messungen konzentrierter NaCl-Lösungen beabsichtigt sind, deren spezifische Leitfähigkeit 100 mS/cm übersteigt. Dies trifft ab Konzentrationen von über 1,5 mol/l zu.

#### Versuchsdurchführung

Mit der geringst konzentrierten Lösung (0,01 mol/l) beginnend in aufsteigender Reihenfolge bis zur 2-molaren Lösung folgenden Ablauf einhalten:

- Mit 30-40 ml der Lösung Elektrode und Becherglas gut spülen.
- Diesen Teil der Lösung in den Abfluss schütten.
- Restliche Lösung in das Becherglas füllen.
- Leitfähigkeitssensor so einstellen, dass er 2 cm tief in die Flüssigkeit eintaucht und von allen Wänden 1 cm Abstand hat.
- Ggf. in den Einstellungen Leitfähigkeit CA1 den Messbereich ändern. Es sollte stets ein möglichst niedriger Messbereich ausgewählt werden.
- Nachdem sich ein stabiler Wert eingependelt hat, Messwert mit der Taste **F9** oder der Schaltfläche
  - aufnehmen.
- Die zum Messwert gehörende Konzentration in der Tabelle eintragen. Dazu klickt man mit der linken Maustaste an die entsprechende Tabellenzelle und gibt den Konzentrationswert über die Tastatur ein.
- Lösung wegschütten.

#### Auswertung

Die ermittelten Werte für CA1 geben die spezifische Leitfähigkeit der Lösung an. Diese ist keine stoffspezifische Größe, sondern konzentrations- und temperaturabhängig. Die in CASSY Lab programmierte Temperaturkompensation für den Sensor bezieht die Daten automatisch auf die Standard-Temperatur von 25 °C.

Zur Auswertung der Daten in CASSY Lab sind 4 Diagramme vorbereitet:

- 1. Im ersten Diagramm ist die spezifische Leitfähigkeit CA1 gegen die Konzentration co aufgetragen.
- 2. Das zweite Diagramm gibt die Konzentrationsabhängigkeit der Äquivalent-Leitfähigkeit Aeq wieder.
- 3. Nach Kohlrauschs Quadratwurzelgesetz ergibt die Auftragung der Äquivalent-Leitfähigkeit gegen die Wurzel aus der molaren Konzentration im Bereich geringer Konzentrationen annähernd eine Gerade mit der Grenzleitfähigkeit als Achsenabschnitt. Dieses Verhalten ist im Diagramm **Kohlrausch-Auftragung** zu betrachten. Die Steigung k ist von der Anzahl der durch die Dissoziation entstehenden Ionen abhängig (bei NaCl also flacher als z.B. bei H2SO4).


Zur Anpassung einer Geraden betätigt man im Diagramm die rechte Maustaste, wählt **Anpassung durchführen** und Ausgleichsgerade und erhält nach Markierung des Kurvenbereichs zwischen 0 und 0,5 mol/l eine Gerade, deren Steigung A und Achsenabschnitt B links unten in der Statuszeile abzulesen sind. Diese Werte können mit der Maus ins Diagramm gezogen oder über **Alt+T** als Text eingefügt werden. Dabei entspricht der Parameter A im Kohlrauschgesetz -k, und B ist der Wert für die Grenzleitfähigkeit  $\Lambda_0$ . Dieser Wert wird zur Berechnung von  $\alpha$  in den Einstellungen  $\Lambda_0$  im Feld Formel eingetragen.

4. Das Diagramm **Dissoziationsgrad** schließlich gibt die berechneten Daten für  $\alpha$  an. Deutlich ist zu sehen, dass auch für starke Elektrolyte der Dissoziationsgrad nur bei sehr geringen Konzentrationen nahezu den Wert 1 erreicht. Diese Abweichung vom idealen Verhalten eines starken Elektrolyten ist durch die Wechselwirkungen der Ionen untereinander (Bildung von Ionen-Assoziaten durch Coulombkräfte, Behinderung der Wanderung der Ionen durch die Lösung) zu erklären.

385



# Bestimmung der Dissoziationskonstanten von Essigsäure

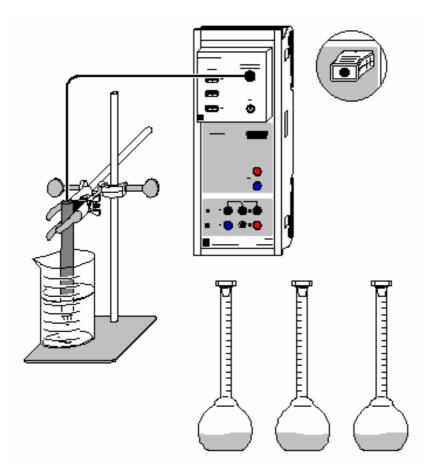



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

Beispiel laden

#### **Gefahrenhinweis**

Essigsäure in hohen Konzentrationen wirkt ätzend. Schutzbrille, -handschuhe und Schutzkleidung anziehen. Den Dampf der konzentrierten Essigsäure nicht einatmen.

Konzentrierte Essigsäure ist entzündlich. Offene Flammen vermeiden, nicht rauchen.

#### Versuchsbeschreibung

Die spezifische Leitfähigkeit von Essigsäure verschiedener Konzentrationen wird gemessen und aus diesen Daten die Äquivalent-Leitfähigkeit  $\Lambda_{eq}$  berechnet. Die ermittelten Werte zeigen, dass für schwache Elektrolyte Kohlrauschs Quadratwurzel-Gesetz zur Bestimmung der Grenzleitfähigkeit nicht gilt. Mit der über die einzelnen Ionen-Grenzleitfähigkeiten ermittelten Grenzleitfähigkeit der Essigsäure kann man über das Ostwaldsche Verdünnungsgesetz den Dissoziationsgrad  $\alpha$  und die Gleichgewichtskonstante KDiss des Dissoziationsgleichgewichts der Essigsäure berechnen.

### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Chemie-Box oder Leitfähigkeits-Adapter S	524 067(1)
1	Leitfähigkeitssensor	529 670
1	Bunsenstativ, 450 mm	666 502
1	Kreuzmuffe	666 543

1	Kleinklemme	666 551
1	Becherglas, 100 ml, hohe Form	664 137
9	Messkolben, 100 ml	665 793
1	Vollpipette, 10 ml	665 975
1	Vollpipette, 50 ml	665 977
2	Pipettierbälle	666 003
1	Sammelbehälter,	
	ca. 1,5 l Fassungsvermögen	
1	PC ab Windows 95/98/NT	

# Benötigte Chemikalien

Essigsäure, 99-100 % (ca. 17,5 mol/l), 500 ml

500 ml 671 9510 Essigsäure, c = 1 mol/l, 1000 ml 671 9590

destilliertes Wasser

# Herstellung der Lösungen

Zur Herstellung der Essigsäure-Lösungen werden Pipetten und Messkolben benötigt.

Mengen reiner Essigsäure für 100 ml Lösung:

- für HAc 50 % (8,75 mol/l): 50 ml
- für HAc 20 % (3,5 mol/l) bzw. 10 % (1,75 mol/l): 20 ml bzw. 10 ml

Zur Herstellung weiterer Lösungen die 1-molare Essigsäure benutzen:

- für HAc, c = 0,5 mol/l: 50 ml
- für HAc, c = 0,1 mol/l: 10 ml

Die jeweiligen Messkolben werden bis zum Eichstrich aufgefüllt. Nun die bereits angesetzten Essigsäure-Lösungen benutzen, um weitere Lösungen herzustellen. Dazu füllt man jeweils 10 ml der 10fach höher konzentrierten HAc-Lösung in einen neuen Kolben, gibt bis zur Markierung destilliertes Wasser hinzu und erhält so Lösungen folgender Konzentrationen:

c = 0.05 mol/l, c = 0.01 mol/l, c = 0.005 mol/l, c = 0.001 mol/l

Es stehen somit elf Essigsäure-Lösungen zur Messung der Leitfähigkeit bei verschiedenen Konzentrationen zur Verfügung. Sind detaillierte Untersuchungen über den gesamten Verlauf der spezifischen Leitfähigkeit beabsichtigt, empfiehlt es sich, im hoch konzentrierten Bereich zusätzliche Lösungen (z.B. 30 %, 40 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 %) anzusetzen.

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Chemie-Box mit dem angeschlossenen Leitfähigkeits-Sensor wird in den Eingang A des Sensor-CASSY gesteckt. Der gut mit destilliertem Wasser abgespülte Leitfähigkeits-Sensor wird so in der Klemme befestigt, dass er durch Lösen und Anziehen der Schraube der Kreuzmuffe am Stativ in senkrechter Richtung bewegt werden kann.

#### Kalibrierung

## ■ Einstellungen laden

Die Zellkonstante des Leitfähigkeitssensors zur Chemie-Box ist mit 0,58 bereits in CASSY Lab voreingestellt. Wird ein anderer Leitfähigkeitssensor verwendet, ist dessen Zellkonstante in den Einstellungen Leitfähigkeit CA1 unter **Korrigieren** als Faktor einzutragen und die Schaltfläche **Faktor korrigieren** zu betätigen.

Zur genaueren Bestimmung der Zellkonstante können Kalibrierlösungen verwendet werden. Dazu werden Becherglas und Leitfähigkeitssensor zunächst mit destilliertem Wasser, dann mit ca. 30-40 ml Kalibrierlösung gespült. In weitere 50 ml der Kalibrierlösung taucht man wie zur Messung den Leitfähigkeitssensor (Abstände zu den Becherglaswänden einhalten), trägt im Korrektur-Fenster den Sollwert in der zweiten Zeile ein und betätigt nach Erreichen eines stabilen Messwertes die Schaltfläche **Faktor korrigieren**.



#### Versuchsdurchführung

Mit der geringst konzentrierten Lösung (0,001 mol/l) beginnend in aufsteigender Reihenfolge bis zur 100-prozentigen Essigsäure folgenden Ablauf einhalten:

- Mit 30-40 ml der Lösung Elektrode und 100 ml-Becherglas gut spülen.
- Diese Lösung in einen Sammelbehälter schütten.
- Restliche Lösung (ca. 60 ml) in das 100 ml-Becherglas füllen.
- Leitfähigkeits-Sensor mit der Klemme so am Stativ fixieren, dass er 2 cm tief in die Flüssigkeit eintaucht und von allen Wänden 1 cm Abstand hat.
- Messwert mit der Taste **F9** oder der Schaltfläche aufnehmen, nachdem sich ein stabiler Wert eingependelt hat.
- Über die Tastatur die zum Messwert gehörende Konzentration nach einem Mausklick an die entsprechende Stelle in der Tabelle eintragen.
- Lösung in den Sammelbehälter schütten.

#### Auswertung

Die ermittelten Werte für CA1 geben die spezifische Leitfähigkeit der Lösung an. Diese ist keine stoffspezifische Größe, sondern konzentrations- und temperaturabhängig. Die in CASSY Lab integrierte Temperaturkompensation bezieht die Daten automatisch auf die Standard-Temperatur von 25 °C.

Zur Auswertung der Daten in CASSY Lab sind mehrere Diagramme vorbereitet:

- 1+2) In den ersten beiden Diagrammen ist die spezifische Leitfähigkeit CA1 gegen die molare Konzentration bzw. gegen den Volumenanteil der Essigsäure aufgetragen.
- 3) Das dritte Diagramm gibt die **Äquivalent-Leitfähigkeit**  $\Lambda$ eq in Abhängigkeit von der Konzentration wieder
- 4) Wäre Essigsäure ein starker Elektrolyt, so ergäbe die Auftragung der Äquivalent-Leitfähigkeit gegen die Wurzel aus der molaren Konzentration eine Gerade (siehe unten: Kohlrauschs Quadratwurzelgesetz). Die starke Abweichung von diesem Verhalten ist im Diagramm **Kohlrausch** zu betrachten.
- 5) Im Diagramm **Dissoziation** sind die aus den Messdaten berechneten Werte für den negativen dekadischen Logarithmus der Dissoziationskonstante pKDiss und den Dissoziationsgrad  $\alpha$  aufgetragen. Ein Grund für die Abnahme von KDiss bei höheren Konzentrationen ist darin zu finden, dass dort die Konzentration des Wassers in der Lösung nicht mehr als konstant betrachtet werden darf; ein weiterer liegt in der Bildung von Ionen-Agglomeraten bei Verringerung der Abstände zwischen den Ionen.
- 6) Im Diagramm **Ostwald** kann überprüft werden, wie gut die gemessenen Werte mit den Literaturwerten übereinstimmen. Dazu wird bis zu Konzentrationen von 1 mol/l der Kehrwert der Äquivalent-Leitfähigkeit (in mol/(S\*cm²)) gegen die spezifische Leitfähigkeit aufgetragen. Aus Achsenabschnitt und Steigung der sich ergebenden Gerade lassen sich KDiss und  $\Lambda_0$  berechnen (siehe die letzte Gleichung im Abschnitt Theoretischer Hintergrund). Da aber bereits geringe Fehler der Messwerte zu großen Fehlern in der Auftragung führen, ist auf diese Berechnung verzichtet worden. Statt dessen werden die Literaturwerte für KDiss und  $\Lambda_0$  benutzt, um die Messwerte zu überprüfen:

Im Menüpunkt freie Anpassung (Tastenkombination **Alt+F**) wird die entsprechende Gerade mit den Parametern A für pKDiss und B für Λο berechnet. Dort trägt man im für die Formel vorgesehenen Feld "1/B + x/(B^2 \* 10^-A)" ein; für pKDiss (Parameter A) gibt man den Literaturwert "4,76" und für Λο (Parameter B) den Wert "390,6" ein und stellt die jeweils zugeordneten Schalter auf **konstant**. Nach Anklicken von **Weiter mit Bereich markieren** wählt man einen beliebigen Bereich der aufgetragenen Messwerte und erhält die berechnete Gerade.

#### **Theoretischer Hintergrund**

Die Äquivalent-Leitfähigkeit  $\Lambda$ eq ist eine stoffspezifische Größe. Sie ist durch den Quotienten von spezifischer Leitfähigkeit CA1 und Äquivalentkonzentration gegeben:

$$\Lambda_{eq} = \frac{C_{A1}}{c_0 \cdot n}$$

Dabei gibt co die molare Konzentration des gelösten Stoffes und n die Anzahl der entstehenden posi-



tiven oder negativen Ladungen wieder. Im Falle von Essigsäure ist also n = 1:

$$HAc + H_2O \rightleftharpoons Ac^- + H_3O^+$$

Zwei verschiedene Kennzahlen beschreiben das Gleichgewicht: der Dissoziationsgrad  $\alpha$  und die Dissoziations-Gleichgewichtskonstante (Säurekonstante) KDiss.

 $\alpha$  ist definiert als

$$\alpha = \frac{\left[Ac^{-}\right]}{c_{0}}$$

mit co als Ausgangskonzentration der Essigsäure und [Ac<sup>-</sup>] als Konzentration der Acetat-Ionen in der Lösung.

KDiss ist identisch mit der Säurekonstante der Essigsäure:

$$\mathsf{K}_{\mathsf{Diss}} = \frac{\left[\!\mathsf{Ac}^-\right]\!\cdot\!\left[\!\mathsf{H}_3\mathsf{O}^+\right]}{\left[\!\mathsf{HAc}\right]}$$

Durch Einsetzen von

$$[Ac^{-}] = [H_3O^{+}] = \alpha \cdot c_0$$

und

$$[HAc] = (1 - \alpha) \cdot c_0$$

in die Gleichung für KDiss lässt sich das "Ostwaldsche Verdünnungsgesetz" herleiten. Es lautet für einwertige Elektrolyte:

$$K_{\text{Diss}} = \frac{\alpha^2 \cdot c_0}{1 - \alpha}$$

Daraus folgt für schwache Elektrolyte mit kleinem KDiss ein Ansteigen von  $\alpha$  bei abnehmender Konzentration co bis zu  $\alpha=1$  für unendliche Verdünnung. Auch schwache Elektrolyte sind bei unendlicher Verdünnung vollständig dissoziiert, da die Rekombination wegen der unendlichen Abstände Kation - Anion nicht mehr stattfindet.

Für die Grenzleitfähigkeit, d.h. die Äquivalent-Leitfähigkeit bei unendlicher Verdünnung  $\Lambda_0$  gilt also  $\alpha=1$ . Da die Äquivalent-Leitfähigkeit proportional zum Anteil dissoziierter Moleküle ist, kann der Dissoziationsgrad auch über

$$\alpha = \frac{\Lambda_{eq}}{\Lambda_0}$$

ermittelt werden.

Für starke Elektrolyte gilt Kohlrauschs "Quadratwurzelgesetz":

$$\Lambda_{\text{eq}} = \Lambda_0 - k \sqrt{c_0}$$

Hieraus kann  $\Lambda_0$  grafisch ermittelt werden. Für schwache Elektrolyte muss  $\Lambda_0$  auf dem Umweg über das "Gesetz der unabhängigen Ionenwanderung" bestimmt werden. Dieses besagt, dass sich entgegengesetzt geladene Ionen bei unendlicher Verdünnung voneinander unabhängig bewegen. Für einwertige Verbindungen lautet es:

$$\Lambda_0 = \lambda_+ + \lambda_-$$

 $\lambda_+$  und  $\lambda_-$  sind dabei die Äquivalentleitfähigkeiten der einzelnen Kationen- bzw. Anionensorten bei unendlicher Verdünnung. Da diese aber nicht einzeln messbar sind, bildet man Summen aus den bekannten Grenzleitfähigkeiten starker Elektrolyte. So wird für Essigsäure die Äquivalent-Leitfähigkeit bei unendlicher Verdünnung folgendermaßen berechnet:



$$\Lambda_0(HAc) = \Lambda_0(HCI) + \Lambda_0(NaAc) - \Lambda_0(NaCI)$$

$$=\lambda(H^+)+\lambda(CI^-)+\lambda(Na^+)+\lambda(Ac^-)-\lambda(Na^+)-\lambda(CI^-)=\lambda(H^+)+\lambda(Ac^-)$$

Mit eingesetzten Literaturwerten erhält man  $\Lambda_0(HAc) = 390,6 \text{ S}^*\text{cm}^2/\text{mol}$ .

Dieser Wert wird im Versuchsbeispiel zur Berechnung von  $\alpha$  verwendet, welches schließlich zur Ermittlung der Dissoziationskonstante KDiss nach dem "Ostwaldschen Verdünnungsgesetz" benötigt wird.

Eine weitere Möglichkeit zur Ermittlung der Grenzleitfähigkeit ergibt sich durch Einsetzen von

$$\alpha = \frac{\Lambda_{\text{eq}}}{\Lambda_0}$$

in das Ostwaldsche Verdünnungsgesetz. Umgeformt ergibt sich die Gleichung


$$\frac{1}{\Lambda_{eq}} = \frac{1}{\Lambda_0} + \frac{\Lambda_{eq} \cdot c_0}{{\mathsf{K}_{Diss}} \cdot {\Lambda_0}^2}$$

Trägt man  $1/\Lambda_{eq}$  gegen  $\Lambda_{eq}^*c_0$  auf, so erhält man eine Gerade mit dem Achsenabschnitt  $1/\Lambda_0$  und der Steigung  $1/(KD_{iss}^*\Lambda_0)$ . Dabei ist für Essigsäure  $\Lambda_{eq}^*c_0 = CA_1$ . Da bereits sehr geringe Meßungenauigkeiten große Fehler ergeben, eignet sich diese Methode jedoch nur für hoch präzise Messungen. Hier wird die Gleichung benutzt, um die Genauigkeit der Messung im schwach konzentrierten Bereich zu überprüfen.





# Auftrennung eines Zweikomponentengemisches in der Rektifikationsapparatur CE2

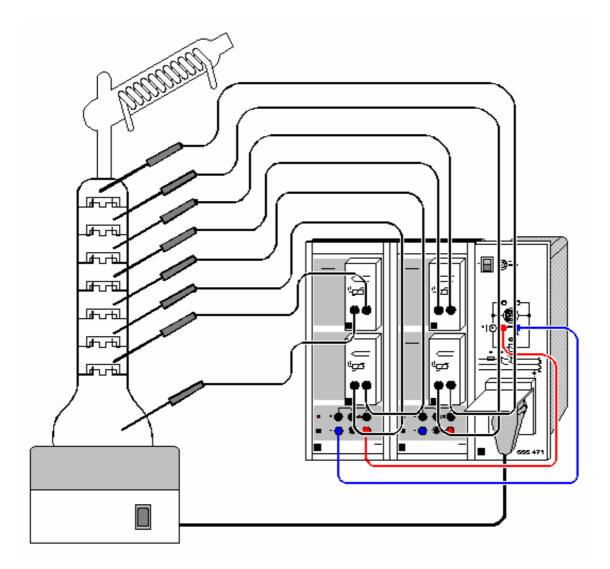

# ■ Beispiel laden

# Versuchsbeschreibung

Die Rektifikationsapparatur gestattet die Trennung organischer Stoffsysteme, z. B. eines Gemisches aus Methanol und Ethanol im Verhältnis 1:1, und die Ermittlung der theoretischen Trennstufen bei totalem Stoffrückfluss.

Bei dem Versuch können 8 Temperaturen gemessen und vom Computer aufgezeichnet werden, gleichzeitig erfolgt eine Steuerung der Heizung.

# **Benötigte Geräte**

_	Sensor-CASSYs CASSY Lab	524 010 524 200
4	Temperatur-Boxen	524 045
8	Temperaturfühler, NiCr-Ni	666 193
1	CPS-Spannungsversorgung,	
	schaltbar	666 471
1	Rektifikationsapparatur CE2	661 311
1	Rahmen CE2	661 301
1	CPS-Netzverteiler	665 497
1	Profilrahmen	666 425



- 1 Paar Kabel, 50 cm, rot und blau 501 45
- 1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Informationen zum Versuchsaufbau der Apparatur (siehe Skizze) finden Sie in der Literatur (668 921) und in der Gebrauchsanweisung zur Rektifikationsanlage. **Die Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung sind unbedingt zu beachten.** 

Beide Sensor-CASSYs in die obere Schiene des CPS-Rahmens einsetzen und kaskadieren.

Auf die **Analogeingänge A1, B1, A2 und B2** werden Temperatur-Boxen aufgesteckt. Die Temperatur-Boxen werden mit jeweils 2 NiCr-Ni Temperaturfühlern verbunden. Die Temperaturfühler belegen in der Rektifikationsapparatur vom Sumpf der Kolonne aufsteigend bis zum Kolonnenkopf folgende Reihenfolge:

ϑA11 (Sumpf); ϑA12; ϑB11; ϑB12; ϑA21; ϑA22; ϑB21; ϑB22 (Kolonnenkopf)

Der **Spannungsausgang S1** wird mit der CPS-Spannungsversorgung verbunden und der Drehknopf am CASSY ungefähr auf Mittelstellung gebracht. Die CPS-Spannungsversorgung dient als Anschluss des Heizpilzes. Dieser sollte so angesteuert werden, dass er bei einer bestimmten Temperatur  $\vartheta$ A11 im Kolonnensumpf und nach einer gewissen Zeit t abschaltet. Diese Parameter können über eine Formeleingabe eingestellt werden. Dazu in den Einstellungen Relais/Spannungsquelle (rechte Maustaste auf S1) das Formeleingabefeld benutzen.

Die voreingestellte Bedingung für Aktivierung lautet **&JA11 < 120 and t > 0 and t < 2:00:00**. Dieses bedeutet, dass solange die Temperatur  $\vartheta$ A11 (&JA11) kleiner als 120 °C ist, mit der Messung begonnen wurde und die Zeit von 2 h noch nicht überschritten wurde, der Heizpilz eingeschaltet bleibt. Die Vorgaben können je nach Applikation korrigiert werden. Es ist darauf zu achten, dass diese Formeleingabe die Sicherheit des Experimentators erhöht.

Der **Relaisausgang R**1 steht noch zur Verfügung. Er kann z. B. für die Vakuumrektifikation CE 4/1 (661 332) eingesetzt werden um dort die Steuerung zu verfeinern.

#### Kalibrierung

Für genaue Messungen sollte das erste Mal und später in größeren Zeitabständen eine Kalibrierung der Temperaturfühler erfolgen:

Einstellungen laden

- In Einstellungen  $\vartheta$ A11 Korrigieren wählen.
- Temperaturfühler ∂A11 in Eiswasser (0 °C) eintauchen.
- Als ersten Sollwert 0 eintragen und Offset korrigieren.
- Temperaturfühler in kochendes Wasser (100 °C) eintauchen.
- Als zweiten Sollwert 100 eintragen und Faktor korrigieren.
- Auch die anderen 7 Temperaturfühler auf diese Weise kalibrieren.
- Für eine spätere Verwendung kalibrierte Einstellungen mit F2 unter einem neuen Namen abspeichern
- Sensor-CASSYs, Temperaturfühler und Temperatur-Boxen so markieren, dass sie später am gleichen Eingang wieder verwendet werden können (nur dann passt die gespeicherte Kalibrierung).

# Versuchsdurchführung

- Kühlwasser anschalten (Kryostat o. a.).
- Spannungsschalter des Heizpilzes einschalten.
- Automatische Messung mit F9 starten (Heizpilz wird automatisch zugeschaltet).
- Temperaturkonstanz abwarten.
- Automatische Messung mit F9 beenden.
- Spannungsschalter des Heizpilzes ausschalten und Heizpilz absenken.
- Nach Abkühlung des Kolonnensumpfes Kühlwasser abschalten.

Probennahme und Auswertung sind in dem Buch: Thermische Trennverfahren Teil 2: Rektifikation (668 921) beschrieben.


#### Versuchsergebnis



Wichtig für den Experimentator ist das Erreichen der Temperaturkonstanz in der gesamten Kolonne. Ist diese erreicht, herrscht in der Apparatur der Gleichgewichtszustand und es können Proben entnommen werden. Beobachtet werden kann, dass auf den einzelnen Böden auf Grund der unterschiedlichen Zusammensetzung der Phasengemische unterschiedliche Temperaturen gemessen werden. Wie im Beispiel ersichtlich wird, nimmt die Temperatur vom unteren Boden zu den darüber befindlichen Böden ab. Da im obersten Boden die Dampfphase gemessen wird, liegt diese Temperatur erwartungsgemäß höher, als im Boden darunter.



# **Absorption von UV-Strahlung**

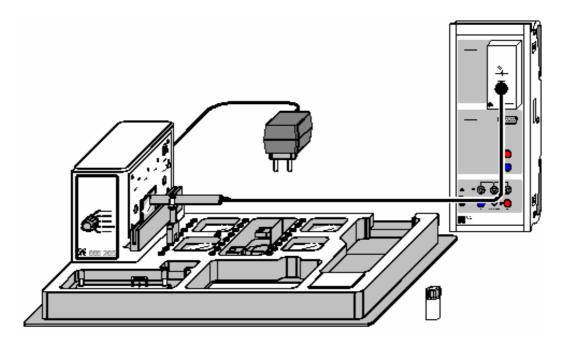



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

- Beispiel laden (UV-A)
- Beispiel laden (UV-B)
- Beispiel laden (UV-C)

#### **Sicherheitshinweis**

Direkten Blick in den UV-Strahl vermeiden.

#### Versuchsbeschreibung

Durch Messung der transmittierten Beleuchtungsstärke wird die Durchlässigkeit verschiedener Materialien für UV-A-, UV-B- und UV-C-Strahlung bestimmt und die Wirksamkeit von Sonnenschutzmittel getestet.

#### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Lux-Box	524 051
1	UV-A-Sensor	666 244
	bzw.	
1	UV-B-Sensor	666 245
	bzw.	
1	UV-C-Sensor	666 246
1	UV-IR-VIS-Experimentierkit	666 265
1	PC mit Windows ab 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Lux-Box mit dem ausgewählten UV-Sensor (A, B oder C) wird ans Sensor-CASSY angeschlossen. Der UV-Sensor wird mit einer Klemme so nahe wie möglich an der entsprechenden Austrittsöffnung des UV-IR-VIS-Experimentierkits angebracht. Die Halteschiene muss allerdings für die einzubringenden Materialproben frei bleiben. Das Experimentierkit wird über das Steckernetzgerät angeschlossen.

Beachten Sie auch die Gebrauchsanweisungen zum UV-IR-VIS-Experimentierkit und zu den Sensoren.



#### Kalibrierung

Vor der ersten Benutzung eines UV-Sensors muss eine Kalibrierung vorgenommen werden.

- Einstellungen laden (UV-A).
- Einstellungen laden (UV-B).
- Einstellungen laden (UV-C).
- In den Einstellungen Beleuchtungsstärke EA1 die Schaltfläche Korrigieren wählen, den auf dem Sensor aufgedruckten Faktor eintragen und Faktor korrigieren betätigen. Die kalibrierten Einstellungen sollten mit F2 unter einem anderen Namen abgespeichert werden, damit die Kalibrierung wieder verwendet werden kann. Diese ist nur für den jeweils korrigierten Sensor gültig.

#### Versuchsdurchführung

- Kalibrierte Einstellungen verwenden oder laden.
- Betreffende UV-Lampe einschalten und ca. 5 Minuten warten, bis sich im Anzeigefenster für die Beleuchtungsstärke EA1 ein stabiler Endwert eingestellt hat. Eventuell muss unter Einstellungen Beleuchtungsstärke EA1 ein anderer Messbereich ausgewählt werden, wenn der voreingestellte Bereich überschritten wird.
- Ersten Messwert (ohne Absorber) mit der Taste F9 oder der Schaltfläche aufnehmen.
- Nacheinander in die Halteschiene zwischen UV-Lampe und Sensor die folgenden Absorber einstecken:
  - Quarzglas,
  - Fensterglas,
  - Plexiglas,
  - PVC,
  - Quarzglas mit einem dünnen Film aus Sonnenschutzfilter (Parsol),
  - eventuell: Quarzglas mit einem dünnen Film aus Speiseöl, Brillenglas und jeweils einen weiteren Messwert aufnehmen.

#### **Auswertung**

Die Werte werden zwei Diagrammen zugeordnet: Im Balkendiagramm **Beleuchtungsstärke** werden die absoluten Messwerte aufgetragen. Über **Alt+T** kann dem jeweiligen Balken als Erläuterung ein Text zugeordnet werden.

Das zweite Diagramm **Transmission** gibt die Durchlässigkeit des verwendeten Materials für die untersuchte Strahlung in Prozent an.


Die spezifische Filterwirksamkeit einiger Materialien für UV-B- und UV-C-Strahlung und ihre Durchlässigkeit für UV-A-Strahlung ist dabei unter dem Gesichtspunkt der Gefährdung des Menschen durch kurzwellige UV-Strahlung besonders beachtenswert:

So ist die Transmission von UV-A-Strahlung, die für die Bräunung der Haut sorgt, bei der mit Sonnenschutzfilter bestrichenen Quarzglasscheibe wesentlich höher, als die Transmission von gefährlicher UV-B- und UV-C-Strahlung. Durch die sich kontinuierlich ausdünnende Ozonschicht erhöhte sich in den vergangenen Jahrzehnten die UV-B-Einstrahlung an der Erdoberfläche. Diese wird als Verursacher von Erbgutschädigungen, Hautkrebs und Blindheit angesehen. Der Wirkstoff Parsol schützt durch die UV-B- und UV-C-Filterwirkung die Haut und lässt die bräunende UV-A-Strahlung zu einem großen Anteil durch.

Da die UV-C-Strahlung noch wesentlich aggressiver wirkt als UV-B-Strahlung, ist die UV-C-Filterwirkung vieler Materialien, so auch der Atmosphäre, ein Grund dafür, dass Leben auf der Erde überhaupt möglich ist.



#### Ozonlochsimulation

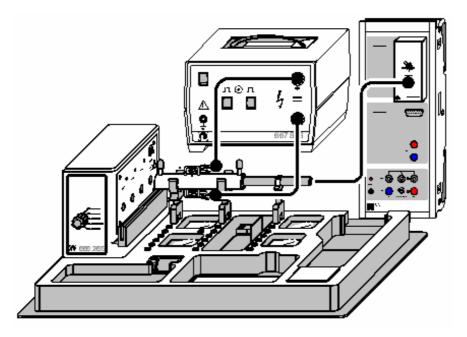



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

Beispiel laden

#### Sicherheitshinweise

Niemals direkt in den UV-C-Strahl blicken.

Nur berührungsungefährliche Hochspannungsnetzgeräte mit Gleichströmen I < 2 mA benutzen.

Die derzeit gültigen Vorschriften für den Umgang mit Chemikalien beachten.

Dichlormethandämpfe nicht einatmen.

#### Versuchsbeschreibung

In einer geschlossenen Küvette wird mittels Hochspannung durch "stille Entladung" Ozon hergestellt. Über die Messung der Beleuchtungsstärke E mit einem UV-C-Sensor wird die Absorption von UV-C-Strahlung durch das in der Küvette gebildete Ozon als Funktion der Zeit ermittelt.

Die Zugabe einer geringen Menge Dichlormethan (CH2Cl2, als Ersatz für FCKW) bewirkt eine deutliche Zunahme der Beleuchtungsstärke (d.h. Abnahme der Absorption), woraus zu schließen ist, dass das in der Küvette befindliche Ozon von Dichlormethan abgebaut wird.

#### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Lux-Box	524 051
1	UV-C-Sensor	666 246
1	UV-IR-VIS-Experimentierkit	666 265
	Gummigebläse	667 241
1	Dosierspritze, 1 ml	665 957
1	Betriebsgerät Funkenstrecke	667 818
1	PC mit Windows ab 95/98/NT	

# Benötigte Chemikalie

Dichlormethan z.B. 250 ml: 671 6600



# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Die Lux-Box mit dem UV-C-Sensor wird an das Sensor-CASSY angeschlossen.

Das UV-IR-VIS-Experimentierkit wird so aufgestellt, dass niemand durch UV-C-Strahlung geblendet werden kann. Die Rundküvette aus dem UV-IR-VIS-Experimentierkit wird mit den zwei Haltern unmittelbar vor der Austrittsöffnung der UV-C-Strahlung eingebaut und die Metallkontakte über zwei Abgreifklemmen und die Experimentierkabel mit dem Betriebsgerät für Funkenstrecke verbunden. Dabei muss wegen des starken elektrischen Feldes darauf geachtet werden, dass die Experimentierkabel weder aufeinander noch zu nahe an Sensor, Sensor-CASSY und deren Verkabelung zu liegen kommen. Der UV-Sensor wird mit einer Halterung direkt vor das Küvettenfenster gesteckt. Über das Steckernetzgerät wird das UV-IR-VIS-Experimentierkit angeschlossen.

Beachten Sie auch die Gebrauchsanweisungen zum UV-IR-VIS-Experimentierkit und zum Betriebsgerät für Funkenstrecke.

# Kalibrierung

Vor Benutzung des UV-C-Sensors muss eine Kalibrierung vorgenommen werden.

- Einstellungen laden.
- In den Einstellungen Beleuchtungsstärke EA1 die Schaltfläche Korrigieren wählen, den auf dem Sensor aufgedruckten Faktor eintragen und Faktor korrigieren betätigen.
- Die kalibrierten Einstellungen mit **F2** unter einem anderen Namen abspeichern, damit die Kalibrierung wieder verwendet werden kann. Diese ist nur für den jeweils korrigierten Sensor gültig.

# Versuchsdurchführung

- Kalibrierte Einstellungen verwenden oder laden.
- Eventuell vorhandene Gasreste mit Hilfe des Gummigebläses aus der Rundküvette entfernen und die Öffnungen der Küvette mit den beiden schwarzen Kappen verschließen.
- UV-C-Lampe einschalten und ca. 5 Minuten warten, bis sich im Anzeigefenster von CASSY Lab für die Beleuchtungsstärke EA1 ein stabiler Endwert eingestellt hat.
- Falls der voreingestellte Messbereich zu klein sein sollte, diesen in den Einstellungen Beleuchtungsstärke EA1 ändern.
- Betriebsgerät für Funkenstrecke einschalten und auf Betriebsart "Dauerfunken" stellen (rote LED leuchtet).
- Unmittelbar danach die Messwertaufnahme mit der Taste F9 oder der Schaltfläche starten.
- Während der gesamten Messung Küvette und Sensor nicht bewegen, da die Messung dadurch verfälscht werden kann.
- Nach 5 bis 10 Minuten das Betriebsgerät für Funkenstrecke ausschalten und an dieser Stelle im Diagramm mit Alt+S eine senkrechte Linie als Markierung setzen.
- Nach ca. 3 bis 5 Minuten das Betriebsgerät wieder einschalten; am Einschaltzeitpunkt eine weitere Markierung mit Alt+S setzen.
- Nach weiteren 3 bis 5 Minuten die verschlossene Flasche mit Dichlormethan kurz schütteln, öffnen und mit der Dosierspritze 1 ml des Dampfes aus dem Gasraum über der Flüssigkeit entnehmen. Flasche wieder verschließen. Dampf nicht einatmen.
- Eine der beiden Verschlusskappen der Rundküvette öffnen, den Spritzeninhalt injizieren und nach Verschließen der Küvette zum Einspritzzeitpunkt eine weitere Markierung mit **Alt+S** setzen.
- Nach weiteren 3 bis 5 Minuten die Messwertaufzeichnung mit **F9** oder beenden und die Hochspannung ausschalten.

### Bemerkungen

Mehrere Reaktionen bestimmen die Ozon-Bildung bzw. den Ozon-Abbau in der Stratosphäre (10 bis 35 km Höhe):

1. 
$$O_2 \xrightarrow{h \cdot v} \dot{O} + \dot{O}$$
  $\lambda < 240 \text{ nm}$ 

2. 
$$O + O_2 + M \rightarrow O_3 + M$$



3. 
$$O_3 \xrightarrow{h \cdot v} O_2 + O$$

$$\lambda < 310 \text{ nm}$$

4. 
$$\dot{O} + O_3 \rightarrow 2O_2$$

Diese Reaktionen halten die Ozon-Konzentration in einem stationären Gleichgewicht.

Wirkt UV-C-Strahlung mit Wellenlängen unter 240 nm auf Sauerstoff ein, so löst dies die Bildung von Ozon aus (Reaktionen 1 und 2), denn die so gebildeten Sauerstoff-Radikale reagieren mit einem weiteren Sauerstoff-Molekül unter Abgabe kinetischer Energie an einen inerten dritten Reaktionspartner M (z.B. ein Stickstoff-Molekül) zu Ozon. Da die im UV-IR-VIS-Experimentierkit verwendete Quecksilberdampflampe UV-C-Strahlung von 254 nm Wellenlänge erzeugt und somit nicht in der Lage ist, Sauerstoffmoleküle zu spalten, wird Reaktion 1 im Versuch durch Hochspannung von 10 kV ausgelöst.

Auch der Abbau von Ozon läuft mit Hilfe von UV-Licht ab: Für die Spaltung (Reaktion 3) genügt jedoch bereits Strahlung unter 310 nm Wellenlänge. Diese UV-Abhängigkeit der Ozon-Bildung und des Ozon-Abbaus bewirkt die vollständige Absorption der UV-C-Strahlung (220-280 nm, Auslösung der Reaktionen 1 und 3) und die partielle Absorption der UV-B-Strahlung (280-320 nm, Auslösung der Reaktion 3) durch die Ozon-Schicht in der Stratosphäre.

Der Abbau von Ozon durch FCKW wird ebenfalls durch UV-C-Strahlung ausgelöst:

5. 
$$R_3CCI \xrightarrow{h \cdot v} R_3 \overset{\cdot}{C} + \overset{\cdot}{CI}$$

6. 
$$\dot{C}I + O_3 \rightarrow O_2 + CIO$$

7. 
$$ClO + O \rightarrow O_2 + Cl$$

Das in der Reaktion 5 durch Absorption von UV-C-Strahlung entstandene Chlor-Radikal wird in ständiger Wiederholung der Reaktionen 6 und 7 immer wieder freigesetzt. Dabei stammt das Sauerstoff-Radikal in Reaktion 7 aus dem natürlichen Ozonabbau (Reaktion 3) bzw. der natürlichen Sauerstoffspaltung (Reaktion 1). Dadurch genügen schon wenige Chlor-Radikale zur Auslösung einer Ozon abbauenden Kettenreaktion.

Das im Versuch verwendete Dichlormethan wird im Gegensatz zu vollständig halogenierten FCKW bereits in der Troposphäre abgebaut und schadet der stratosphärischen Ozonschicht nicht.

# **Auswertung**


Durch das An- und Abschalten der Hochspannung verursachte kurzfristige Ausreißer in der Beleuchtungsstärke können der besseren Übersicht halber durch zwei einzelne Mausklicks auf den entsprechenden Wert in der Tabelle und anschließendes Betätigen der Leertaste entfernt werden.

Zur Auswertung trägt man zunächst im Feld Formel der Einstellungen Absorption A an Stelle der Vorgabe "0,290" den ersten Wert der Messreihe für die Beleuchtungsstärke EA1 ein. Die durch senkrechte Linien voneinander getrennten Abschnitte der Messung können über die Tastenkombination **Alt+T** mit einem erläuternden Text versehen werden.

Nach Einschalten der Hochspannung überwiegen die Reaktionen 1 und 2 (Ozon-Bildung) die Abbaureaktionen 3 und 4. Dies ist am Rückgang der Beleuchtungsstärke bzw. an der immer stärkeren Absorption der UV-C-Strahlung abzulesen (Bereich A in den Diagrammen). Das Abschalten der Hochspannung bewirkt einen Rückgang der Ozon-Konzentration, da nun keine Sauerstoff-Radikale aus Reaktion 1 mehr für die Ozon-Bildung zur Verfügung stehen und die Abbaureaktionen 3 und 4 dadurch überwiegen. Folglich steigt als Indiz für die abnehmende Ozon-Konzentration die Beleuchtungsstärke schnell an und die Absorption der UV-C-Strahlung geht zurück (Bereich B).

Im Bereich **C** nimmt die Beleuchtungsstärke als Folge der neuerlichen Produktion von Ozon durch Hochspannung wieder ab. Die Zugabe einer geringen Menge Dichlormethan bewirkt dann wieder eine Zunahme der Beleuchtungsstärke trotz weiterhin anliegender Hochspannung (Bereich **D** in den Diagrammen). Schon eine sehr geringe Menge CH2Cl2-Dampf bewirkt also eine starke Abnahme der Ozon-Konzentration, wodurch gleichzeitig die UV-C-Absorption nachlässt.

# Treibhauswirkung von CO<sub>2</sub>

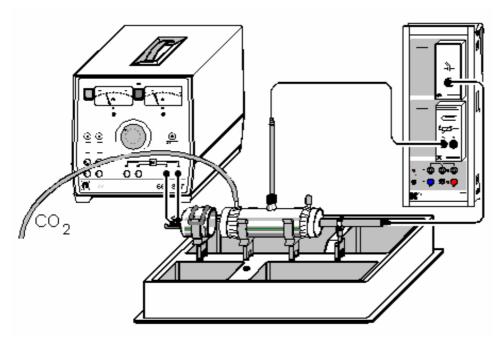



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

# Sicherheitshinweise

Der IR-Strahler wird sehr heiß. Die Glühwendel nicht berühren. Den IR-Strahler mit maximal 6 A betreiben

Gültige Vorschriften im Umgang mit Gasen beachten.

# Versuchsbeschreibung

Die als "Treibhauseffekt" bekannt gewordene Erwärmung der Atmosphäre wird allgemein unter anderem auf die steigende Konzentration an Kohlendioxid in der Luft zurück geführt. Der hier beschriebene Versuch mit dem IR-CO<sub>2</sub>-Experimentierkit zeigt deutlich die Wirkung des CO<sub>2</sub>: Bei erhöhter CO<sub>2</sub>-Konzentration wird gleichzeitig eine Absorption der Infrarot-Strahlung und eine Temperaturerhöhung gemessen.

# **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Lux-Box	524 051
1	IR-CO2-Sensor	666 248
1	Temperatur-Box	524 045
1	Thermoelement NiCr-Ni	666 216
1	IR-CO2-Experimentierkit	666 2651
1	Kleinspannungsstelltrafo D	667 827
1	Silikonschlauch, 5 mm Innendurchmesser	604 431
1	Experimentierkabel, 50 cm, rot	501 25
1	Experimentierkabel, 50 cm, blau	501 26
2	Schnabelklemmen	501 83
1	Gummigebläse	667 241
1	PC mit Windows ab 95/98/NT	



### Benötigte Chemikalien

Kohlendioxid, Druckgasflasche 661 0082 mit Druckminderventil nach DIN 661 017

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Zu beachten sind die Gebrauchsanweisungen für das IR-CO<sub>2</sub>-Experimentierkit, den Kleinspannungsstelltrafo und den IR-CO<sub>2</sub>-Sensor.

Lux-Box mit IR-CO<sub>2</sub>-Sensor an Eingang A, Temperatur-Box mit in T<sub>1</sub> eingestecktem Temperaturfühler an Eingang B des Sensor-CASSY anschließen.

Den IR-Strahler in die Halteklammer auf das Tablett stecken, die mit zwei Kunststofffolien bespannte Messküvette in mindestens 5 mm Abstand zum Strahler in die Halterungen auf das Tablett klemmen und das Thermoelement in die GL14-Verschraubung einsetzen. Dabei sollte die Spitze des Messelements ungefähr in der Raummitte der Küvette positioniert werden.

Der IR-CO2-Sensor wird mit der Halteklammer unmittelbar hinter der Messküvette montiert und der Gleichspannungsausgang des Kleinspannungsstelltrafos (0...20 V) über die Experimentierkabel an die Kontakte des Strahlers angeschlossen.

Einer der Eingänge der Küvette wird über den Schlauch mit der Druckgasflasche verbunden, der andere wird mit der schwarzen Kunststoffkappe verschlossen.

### Kalibrierung

Vor Benutzung des IR-CO2-Sensors muss eine Kalibrierung vorgenommen werden.

- Einstellungen laden.
- In den Einstellungen Beleuchtungsstärke EA1 die Schaltfläche Korrigieren wählen, den auf dem Sensor aufgedruckten Faktor eintragen und die Faktor korrigieren betätigen.
- Die kalibrierten Einstellungen mit **F2** unter einem anderen Namen abspeichern, damit die Kalibrierung wieder verwendet werden kann. Diese ist nur für den jeweils korrigierten Sensor gültig.

# Versuchsdurchführung

- Kalibrierte Einstellungen verwenden oder laden.
- Der Strom wird auf maximal 6 A eingestellt, so dass der Draht nur sehr schwach glüht. Dabei sollte eine Messtemperatur von 80 °C nicht überschritten werden.
- Nach Erreichen annähernder Temperatur- und Beleuchtungsstärkenkonstanz (jeweilige Anzeige-

fenster in CASSY Lab beachten) die Messung mit **F9** oder starten.

- Nach ca. einer Minute wird die schwarze Verschlusskappe abgenommen und etwa eine Minute lang Kohlendioxid durch die Messküvette geleitet. Der Einschaltzeitpunkt wird im Diagramm über die Tastenkombination Alt+S und Positionierung mit der Maus mit einer senkrechten Linie markiert.
- Nach Abschalten des Kohlendioxidstroms markiert man den entsprechenden Zeitpunkt mit einer senkrechten Linie (Alt+S) und verschließt die Küvette wieder mit der schwarzen Kappe.
- Bis zum erneuten Erreichen annähernder Temperaturkonstanz werden noch ca. 3 bis 5 Minuten lang

Messwerte aufgenommen. Dann kann die Messung mit **F9** oder gestoppt und der Kleinspannungsstelltrafo abgeschaltet werden.

# Auswertung

In den beiden Diagrammen werden die Zusammenhänge zwischen Temperatur und Beleuchtungsstärke bzw. Absorption des Kohlendioxids verdeutlicht.

Für die Auswertung des Versuchs sind die stationären Zustände vor und nach der Kohlendioxid-Einleitung interessant.

1. Ein Vergleich der Temperaturen und der Beleuchtungsstärken zeigt einen deutlichen Temperaturanstieg nach Füllung der Küvette mit Kohlendioxid, verbunden mit einem Rückgang der Beleuchtungsstärke.

Zum Vergleich der Ausgangsmesswerte mit den Werten am Ende der Messung trägt man zunächst die jeweiligen Mittelwerte in das Diagramm ein. Dazu betätigt man im Diagramm die rechte Maustaste,



wählt **Mittelwert einzeichnen** und markiert den jeweiligen stationären Kurvenbereich zu Beginn bzw. am Ende der Messreihe. Der von CASSY Lab berechnete Mittelwert wird durch eine waagerechte Linie angezeigt. Durch Verziehen mit der linken Maustaste kann der dazugehörige Wert von der Statuszeile ins Diagramm übertragen werden.

Tipp: Durch Aktivieren der jeweils für die Messwerte gültigen Y-Achsen-Skala über die Diagramm-Schaltflächen **EA1** bzw. **B11** erscheinen die Mittelwerte und die Beschriftungen in der gleichen Farbe wie die betreffende Kurve.

Die genaue Differenz der beiden gebildeten Mittelwerte von Temperatur und Beleuchtungsstärke wird über die Tastenkombination **Alt+D** und anschließendes Anklicken der beiden Mittelwertgeraden in der Statuszeile ausgegeben. Auch dieser Wert kann mit der Maus ins Diagramm verschoben werden.

2. Zur Ermittlung der Absorption ist es notwendig, den ersten berechneten Mittelwert E0 (Ausgangswert) in den Einstellungen Beleuchtungsstärke E0 im Feld Formel einzutragen. Zur Berechnung der Absorption A ist die Formel

$$A = 100 - \left(\frac{E_{A1}}{E_0} \cdot 100\right)$$

voreingestellt. Die Eintragung von Mittelwerten und Differenzen erfolgt wie für das erste Diagramm beschrieben.

Es wird deutlich, dass Kohlendioxid einen beträchtlichen Teil der Infrarotstrahlung absorbiert. Die Temperaturerhöhung in der Küvette kann darauf zurückgeführt werden.




# Versuchsbeispiele Biologie

Die Versuchsbeispiele helfen Ihnen beim Einsatz von CASSY Lab. Die Messdaten oder Einstellungen der Beispiele können direkt in CASSY Lab geladen werden. Klicken Sie einfach auf die —Zeichen in den Beschreibungen. Neue Beispiele sind mit einem roten • gekennzeichnet.

- Puls
- Hautwiderstand
- Elektrokardiogramm
- Elektromyogramm
- Blutdruck
- Reaktionszeit
- Lungenvolumen (Spirometrie)
- Langzeitmessung von Klimadaten



### **Puls**

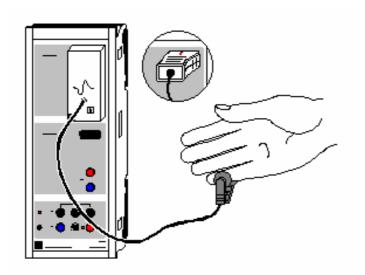



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

#### Sicherheitshinweis

Die ermittelten Werte und Kurven haben keine medizinische Aussagekraft und dienen nicht zur Kontrolle des Gesundheitszustandes des Menschen.

Die Puls-Box darf nur in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung betrieben werden.

# Versuchsbeschreibung

Das pulsierende Blut verändert die optischen Eigenschaften des menschlichen Körpers. Dadurch ermittelt CASSY mit der Puls-Box die Pulsfrequenz. Es wird die Veränderung der Pulsfrequenz aufgenommen (z. B. während körperlicher Anstrengung) oder die Ruhepulsfrequenz zwischen trainierten und untrainierten Probanden verglichen.

# **Benötigte Geräte**

1 Sensor-CASSY 524 010 1 CASSY Lab 524 200 1 Puls-Box oder Puls-Sensor S 524 047(1)

1 PC ab Windows 95/98/NT

# Versuchsvorbereitung (siehe Skizze)

Der Pulsaufnehmer der Puls-Box an Eingang A des Sensor-CASSYs wird an einer stark durchbluteten Stelle des Körpers angebracht, wie z. B. an der Nagelwurzel des kleinen Fingers. Der Sensor soll während der Messung nicht mehr bewegt werden, da es sonst zu Fehlmessungen kommen kann.

# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Stabile Pulswerte im Fenster PA1 abwarten (Box passt sich der Signalstärke an)
- Messung mit F9 starten
- Evtl. Abhängigkeiten der Pulskurve von k\u00f6rperlicher Anstrengung (Kniebeugen) untersuchen
- Messung mit F9 beenden
- Messung kann mit veränderten Faktoren oder anderen Versuchspersonen wiederholt werden. Dazu wieder stabile Pulswerte abwarten und Messung erneut mit F9 starten




# **Auswertung**

Die durchschnittliche Pulsfrequenz kann durch die Bildung des Mittelwertes aus der Messkurve bestimmt werden. Dazu mit rechter Maustaste auf das Diagramm klicken, **Mittelwert einzeichnen** anklicken und den gewünschten Kurvenbereich markieren. Der Wert erscheint in der Statuszeile links unten und kann als Text an eine beliebige Stelle im Diagramm eingetragen werden.



### Hautwiderstand

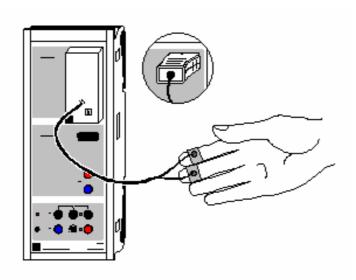



auch für Pocket-CASSY und Mobile-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

#### Sicherheitshinweis

Die ermittelten Werte und Kurven haben keine medizinische Aussagekraft und dienen nicht zur Kontrolle des Gesundheitszustandes des Menschen.

Die Hautwiderstands-Box darf nur in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung betrieben werden.

### Versuchsbeschreibung

Der Hautwiderstand R verändert sich in Abhängigkeit von äußeren Faktoren. Es kann z. B. der Einfluss von autogenem Training oder einem schreckhaften Ereignis untersucht werden. Dargestellt wird immer der Hautleitwert G=1/R (größere Werte entsprechen einem kleineren Widerstand).

### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Hautwiderstands-Box oder Hautwiderstands-Sensor S	524 048(1)

1 PC ab Windows 95/98/NT

# Versuchsvorbereitung (siehe Skizze)

Die Hautwiderstands-Box wird an Eingang A des Sensor-CASSYs aufgesteckt und ihre Elektroden fest an die Unterseite der Fingerkuppen des Zeige- und Mittelfingers des Probanden mit den Klettbändern befestigt. Die Hand sollte hierbei ruhig auf einer Unterlage liegen.

# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Messbereich in den Einstellungen Hautleitwert GA1 oder y-Achse des Diagramms mit der Maus so verschieben, dass der angezeigte Hautleitwert GA1 etwa in der Mitte liegt (notfalls nach rechtem Mausklick auf y-Achse Werte über Tastatur eingeben)
- Messung mit F9 starten
- Evtl. Abhängigkeiten der Hautleitwertkurve von autogenem Training oder einem schreckhaften Ereignis (z. B. durch Klatschen in die Hände) mit anschließender bewusster Beruhigung untersuchen



- Messung mit F9 beenden
- Messung kann mit veränderten Faktoren oder anderen Probanden wiederholt werden. Dazu wieder y-Achse anpassen und Messung erneut mit F9 starten


# **Auswertung**

Im Diagramm ist ersichtlich, wie sich der Hautleitwert unter Einwirkung äußerer Faktoren verändert.

Die durchschnittliche Hautleitwert kann durch die Bildung des Mittelwertes aus der Messkurve bestimmt werden. Dazu mit rechter Maustaste auf das Diagramm klicken, **Mittelwert einzeichnen** anklicken und den gewünschten Kurvenbereich markieren. Der Wert erscheint in der Statuszeile links unten und kann als Text an eine beliebige Stelle im Diagramm eingetragen werden.



# Elektrokardiogramm (EKG)

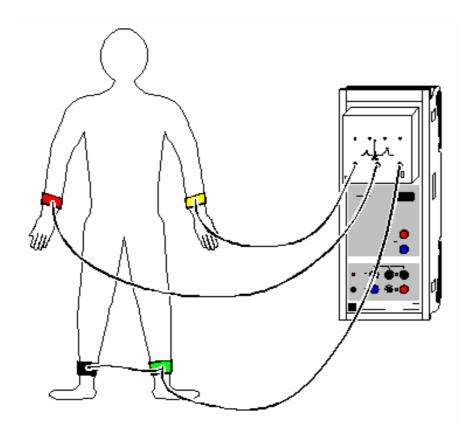



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

# **Sicherheitshinweis**

Die ermittelten Werte und Diagramme haben keine medizinische Aussagekraft und dienen nicht zur Kontrolle des Gesundheitszustandes des Menschen.

Die EKG/EMG-Box darf nur in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung betrieben werden.

### Versuchsbeschreibung

Bei jeder Erregung des Herzmuskels entstehen elektrische Spannungsänderungen, die sich von Herzmuskelzelle zu Herzmuskelzelle ausbreiten. Aufgrund der großen Zahl von Zellen kann man die entstehenden Spannungen durch am Körper angelegte Elektroden abgreifen und nach Verstärkung in Form von Diagrammen sichtbar machen kann. Bei dem Elektrokardiogramm werden die Extremitätenableitung nach Einthoven verwendet (I, II, III).

Die Elektroden messen die Potentialänderungen (Spannungsänderungen) wenn die verschiedenen Kammern des Herzens kontrahieren. Die Herzmuskelzellen sind in Ruhe polarisiert, d. h. es gibt einen sehr kleinen Potentialunterschied zwischen der inneren Seite der Zellmembran und der Äußeren. Die Herzmuskelzellen können ohne einen Einfluss von außen depolarisieren, d. h. spontan. Die Gruppe von Zellen, die als erste depolarisieren stellen den sogenannten "Schrittmacher" (Sinusknoten) dar. Dieser Knoten liegt im rechten Vorhof (Atrium) des Herzens. Die beiden Vorkammern kontrahieren durch eine hohe Geschwindigkeit der Reizleitung zwischen den Zellen fast gleichzeitig.

Die Hauptkammern (Ventrikel) des Herzens sind von den Atrien elektrisch isoliert. Nur an einer Stelle sitzt eine Gruppe von Zellen (Atrioventrikularknoten) die das elektrische Signal der Atriumkontraktion an die Hauptkammern weiterleitet. Durch eine geringfügige Verzögerung der Erregungsübertragung wird sichergestellt, dass die Hauptkammern nicht zusammen mit den Vorkammern kontrahieren und das Blut genug Zeit hat aus den Atrien in die Ventrikel zu fließen.



Der Atrioventrikularknoten überträgt die Depolarisation über spezielle Fasern (His-Bündel) auf die Ventrikel. In der muskulösen Wand der Ventrikel finden sich andere Fasern (Purkinje-Fasern), die für eine sehr schnelle Reizleitung sorgen. So wird sichergestellt, dass sich die Ventrikel gleichzeitig und vollständig kontrahieren.

Die Depolarisation, Kontraktion und anschließende Repolarisation der Herzmuskelzellen ist ein sich stetig wiederholender Prozess der durch die unmittelbare Nachbarschaft von polarisierten und nicht polarisierten Zellen kleine Ströme fließen lässt. Die Änderung der Ströme können von außen gemessen, verstärkt und gegen die Zeit aufgetragen werden. Das EKG ist die grafische Darstellung der gemessenen elektrischen Ströme.

### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	EKG/EMG-Box	524 049
1	Elektrodengel	662 112
1	Desinfektionsspray	662 113
1	DC ob Windows 05/09/NIT	

1 PC ab Windows 95/98/NT

### Versuchsvorbereitung (siehe Skizze)

Der Proband soll sich in einer ruhigen und entspannten Lage befinden, da sonst durch Überlagerung des EKG-Signals mit den elektrischen Potentialen der Skelettmuskulatur die Messung verfälscht wird. Die Elektroden werden zur Verminderung des Hautwiderstandes mit Elektrodengel (662 112) bestrichen und mit den Gummibändern an den entsprechenden Körperstellen befestigt. Anschließend werden die Kabel wie folgt an die Elektroden angeschlossen:

rot rechter Arm gelb linker Arm grün linke Wade schwarz rechte Wade

### Wichtig

Die Elektroden nach jeder Benutzung mit einem Papiertuch o. ä. reinigen, da sich sonst durch Eintrocknen des Gels eine Salzschicht bildet. Anschließend die Elektroden und die entsprechenden Hautstellen aus hygienischen Gründen mit Desinfektionsspray (662 113) behandeln.

### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Messung mit F9 starten
- Es werden gleichzeitig die drei Ableitungen nach Einthoven aufgezeichnet
- Messung mit F9 stoppen

# **Auswertung**

Zur Auswertung sollte der besseren Übersichtlichkeit halber zuerst ein Teil der Darstellung mit der Zoomfunktion vergrößert werden.

Ein typischer Teil eines EKG ist eine flache Linie, die isoelektrische Linie. Abweichungen hiervon beruhen auf der elektrischen Aktivität des Herzmuskels.

Die erste Abweichung von dieser Linie in einem typischen EKG ist ein kleiner Ausschlag nach oben. Die P-Welle dauert ca. 0,05 Sekunden. Zur Auswertung können jeweils eine senkrechte Linie zu Beginn und eine am Ende der P-Welle gesetzt werden. Die Dauer kann durch eine Differenzmessung zwischen beiden Linien ermittelt werden. Die P-Welle basiert auf der Depolarisation und Kontraktion der Vorkammern.

Im Anschluss kehrt das EKG zur isoelektrischen Linie zurück. In dieser Zeit überträgt der Atrioventrikularknoten die Erregung über das His-Bündel und die Purkinje-Fasern auf die Ventrikel. Die Depolarisation des AV-Knotens führt zu einem kleinen Abwärtspuls, der Q-Welle. Direkt danach erfolgt ein schneller Anstieg (R-Welle) mit anschließendem Abfall unter die isoelektrische Linie (S-Welle) und der Rückkehr auf den Ausgangswert. Diese drei Wellen nennt man den QRS-Komplex, der durch die Depolarisation und Kontraktion der Hauptkammern zustande kommt.



Nach einer weiteren Pause repolarisieren die Zellen wieder. Der hierbei auftretende Stromfluss bewirkt eine aufwärts gerichtete Welle, die T-Welle.

Die Sequenz von P über QRS zu T stellt einen Zyklus des Herzens dar. Die Anzahl der Zyklen pro Minute entspricht dem Pulsschlag.


# Weitere Versuchsvorschläge

- Aufzeichnen eines EKGs vor und nach Belastung (z. B. Laufen auf der Stelle)
- Statistik zur Dauer der einzelnen Abschnitte über alle Praktikumsteilnehmer
- Unterschiede zwischen Frauen und Männern

410 CASSY Lab



# **Elektromyogramm (EMG)**

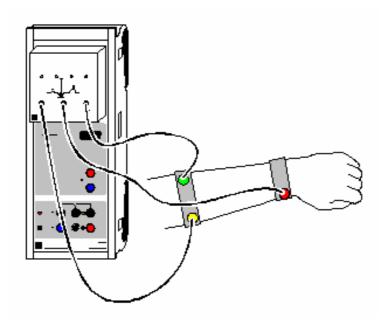



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

### **Sicherheitshinweis**

Die ermittelten Werte und Diagramme haben keine medizinische Aussagekraft und dienen nicht zur Kontrolle des Gesundheitszustandes des Menschen.

Die EKG/EMG-Box darf nur in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung betrieben werden.

# Versuchsbeschreibung

Es werden elektrische Potentiale von aktivierten Muskeln gemessen, indem in der Nähe der Muskeln Oberflächenelektroden angebracht werden.

### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	EKG/EMG-Box	524 049
1	Elektrodengel	662 112
1	Desinfektionssppray	662 113

1 PC ab Windows 95/98/NT

# Versuchsvorbereitung (siehe Skizze)

Zur Aufnahme einer EMG-Kurve der Fingermuskulatur werden die Elektroden am Anfang und am Ende des Muskels auf der Unterseite eines Unterarms befestigt und die Bezugselektrode auf der gegenüberliegenden Seite der Muskelgruppe, hier also auf der Oberseite des Unterarms. Die Elektroden sind wie folgt anzuschließen:


rot	Muskelanfang Unterseite Unterarm
gelb	Muskelende Unterseite Unterarm
grün	Bezugselektrode Oberseite Unterarm



# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Messung mit **F9** starten
- Während der Aufnahme der EMG-Kurve ballt die Versuchsperson die Hand zur Faust und öffnet sie anschließend wieder. Diesen Vorgang mehrfach wiederholen
- Messung mit **F9** stoppen

# **Blutdruck**

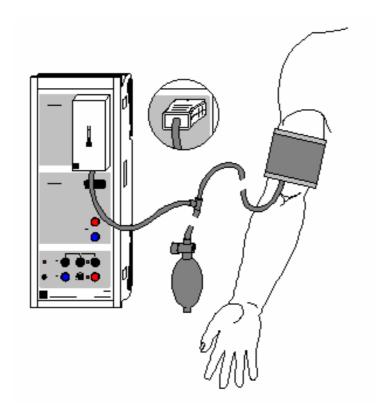



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

# **Sicherheitshinweis**

Die ermittelten Werte und Kurven haben keine medizinische Aussagekraft und dienen nicht zur Kontrolle des Gesundheitszustandes des Menschen.

Die Blutdruck-Box darf nur in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung betrieben werden.

### Versuchsbeschreibung

Der Druck an der Manschette sowie die Druckschwankungen an der Manschette werden mit der Blutdruck-Box gemessen (oszillometrische Blutdruckmessung). Hieraus lassen sich Diastole und Systole ermitteln.


# **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Blutdruck-Box oder Blutdruck-Sensor S	524 050(1)

1 PC ab Windows 95/98/NT

# Versuchsvorbereitung (siehe Skizze)

Die Manschette mit Ventil und Pumpball wird an die Blutdruck-Box auf Eingang A des Sensor-CASSYs angeschlossen. Das Ventil an dem Pumpball sollte etwa halb geöffnet sein (Mitte zwischen den beiden Anschlägen der Ventilschraube). Die mit dem Ventil einstellbare Ablassrate sollte bei 2-3 mm Hg pro Pulsschlag liegen. Höhere Ablassraten verschlechtern die Auswertung, da weniger signifikante Maxima aufgezeichnet werden. Eine Messung mit vollständig geöffnetem Ventil wird diese mögliche Fehlbedienung verdeutlichen.

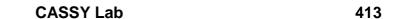



Die Manschette wird über den unbekleideten linken Oberarm gestreift, bis der untere Manschettenrand ca. 2-3 cm oberhalb der Ellenbeuge abschließt. Achten Sie darauf, dass der Manschettenschlauch auf der Innenseite des Oberarmes im Bereich der Arterie (in Richtung der Hand) aus der Manschette austritt. Der Metallbügel darf nicht über der Arterie liegen, da sonst die Blutdruckkurve verfälscht werden kann. Nachdem das freie Manschettenende nach außen über den Arm geschlagen wurde, wird die Manschette mit dem Klettverschluss fixiert. Die Manschette sollte straff um den Oberarm liegen, darf jedoch vor dem Aufpumpen keinen Druck auf die Arterie ausüben. Der Arm sollte während der Messung entspannt und leicht abgewinkelt auf dem Tisch liegen.

# Versuchsdurchführung


- Einstellungen laden
- Evtl. Nullpunkt des angezeigten Drucks korrigieren. Dazu Einstellungen Blutdruck pA1 aufrufen und → 0 ← wählen
- Manschette mit dem Pumpball bis ca. 180 mmHg (je nach vermutetem systolischen Wert) aufpumpen. Der ansteigende Manschettendruck wird angezeigt.
- Messung mit F9 starten
- Während der Messung Arm nicht bewegen. Die Amplitude der Oszillationen nimmt im Laufe der Messung zu (nach Unterschreiten der Systole) und wieder ab (nach Unterschreiten der Diastole).
- Bleibt die Amplitude der Oszillation danach mehrmals konstant, Messung mit F9 stoppen
- Durch Drücken des roten Knopfes am Handventil, Manschette nun vollständig belüften
- Zwischen aufeinanderfolgenden Messungen am gleichen Probanden eine Pause von mindestens 2 Minuten einlegen

### **Auswertung**

Bei suprasystolischen Manschettendrücken bestehen nur kleine Druckschwankungen, die durch Anschlagen des Pulses an den komprimierten Arterienabschnitt verursacht werden. In dem Augenblick, in dem der systolische Druck unterschritten wird und eine kurze systolische Öffnung der Arterie eintritt, nehmen die Oszillationen zu und erreichen ein Maximum beim mittleren arteriellen Blutdruck (entspricht dem arithmetrischen Mitteldruck). Der diastolische Blutdruck entspricht dem Punkt, an dem die Oszillationen aufhöhren abzunehmen, d. h. wenn auch während der gesamten Diastole die Gefäße geöffnet sind. Die verbleibenden Druckschwankungen entstehen durch die auf die Manschette übertragenen Pulsschläge.

Zur Berechnung von Systole und Diastole mit rechter Maustaste auf das Diagramm klicken, in den weiteren Auswertungen **Systole und Diastole bestimmen** anklicken und die gesamte Kurve markieren. Die Werte für Systole und Diastole erscheinen in der Statuszeile links unten und können als Text an eine beliebige Stelle im Diagramm eingetragen werden.

# Reaktionszeit

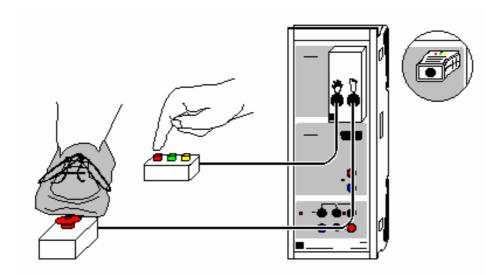



auch für Pocket-CASSY geeignet

Beispiel laden

# Versuchsbeschreibung

Die Reaktionszeit wird mit der Reaktionstest-Box und dem Handtaster und/oder dem Fußtaster bestimmt. Die Leitungsgeschwindigkeit der Nervenimpulse kann dann rechnerisch ermittelt werden.

### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Reaktionstest-Box oder Reaktionstest-Adapter S	524 046(1)
1	Handtaster	662 148
	und/oder	
1	Fußtaster	662 149
	DO 1 M// 1 05/00/NIT	

# 1 PC ab Windows 95/98/NT

### Versuchsvorbereitung (siehe Skizze)

Der Handtaster oder Fußtaster wird an die Reaktionstest-Box auf Eingang A des Sensor-CASSYs angeschlossen. Der Proband soll ruhig und entspannt sein. Zur Bestimmung der Reaktionszeit mit der Hand, soll die Hand des Probanden neben dem Handtaster auf dem Tisch liegen. Zur Bestimmung der Reaktionszeit mit dem Fuß, soll der Fuß neben dem Fußtaster auf Boden stehen.

# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Messreihe mit F9 starten
- Nach einer zufälligen Zeit nach Druck einer beliebigen Taste des Handtasters oder Fußtasters, erscheint der Zeiger in der Farbe rot, grün oder gelb (Fußtaster immer rot). Zur Reaktion muss jetzt möglichst schnell der Taster entsprechend der Zeigerfarbe betätigt werden. Die gemessene Reaktionszeit erscheint im Anzeigeinstrument, der Tabelle und im Diagramm.
- Gewünschte Anzahl von Reaktionszeiten (10 bis 20) auf gleiche Weise aufnehmen
- Messreihe mit F9 beenden
- Weitere Messreihen k\u00f6nnen mit anderen Probanden oder Reaktionen (z. B. mit Hand auf Fu\u00dftaster statt Fu\u00df auf Fu\u00dftaster zur Ermittlung der Nervenleitungsgeschwindigkeit) mit F9 gestartet werden



### **Auswertung**


Die durchschnittliche Reaktionszeit kann durch die Bildung des Mittelwertes aus der Messkurve bestimmt werden. Dazu mit rechter Maustaste auf das Diagramm klicken, **Mittelwert einzeichnen** anklicken und den gewünschten Kurvenbereich markieren. Der Wert erscheint in der Statuszeile links unten und kann als Text an eine beliebige Stelle im Diagramm eingetragen werden.

Zur Ermittlung der Nervenleitungsgeschwindigkeit muss die Längendifferenz der zuleitenden Nervenbahnen bestimmt werden, indem man zunächst von der Wirbelsäule in Höhe des Schultergelenks die Länge bis zur Mitte des Oberarms misst. Danach wird vom selben Ausgangspunkt die Länge bis zur Mitte des Oberschenkels gemessen.

Die mittlere Leitungsgeschwindigkeit v errechnet sich als Quotient aus Längendifferenz (Fuß - Hand) und der Zeitdifferenz (Reaktionszeit Fuß - Reaktionszeit Hand) zu

$$v = (I(FuS) - I(Hand)) / (t(FuS) - t(Hand)).$$

# **Lungenvolumen (Spirometrie)**

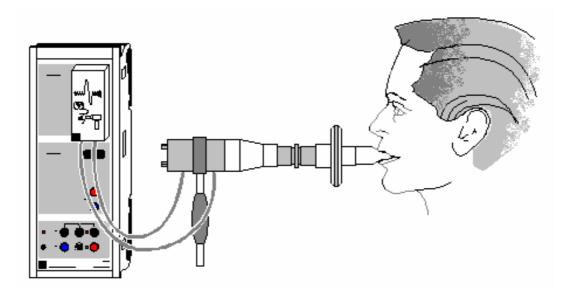



auch für Pocket-CASSY geeignet

■ Beispiel laden

#### Sicherheitshinweis

Spirometer niemals ohne Bakterienfilter verwenden.

Die ermittelten Werte und Kurven haben keine medizinische Aussagekraft und dienen nicht zur Kontrolle des Gesundheitszustandes des Menschen.

Die Spirometer-Box darf nur in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung betrieben werden.

### Versuchsbeschreibung

Das Spirometer wird zur Bestimmung des Atemvolumens eingesetzt. Das Gerät arbeitet nach dem pneumotachographischen Prinzip und misst den Volumenfluss. Das Atemvolumen wird dann von CASSY Lab durch Integration ermittelt.

# **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Spirometer-Box	524 056
	Mundstücke zum Spirometer,	
	30 Stück	662 3812

1 Bakterienfilter zum Spirometer,

30 Stück 662 3813

1 PC ab Windows 95/98/NT

# Versuchsvorbereitung (siehe Skizze)

Die Spirometer-Box wird auf Eingang A des Sensor-CASSYs ca. 10 min vor der Messung aufgesteckt (Aufwärmphase). Verwenden Sie bei jeder neuen Versuchsperson eine neues Mundstück und einen neuen Bakterienfilter und desinfizieren Sie die Siebe regelmäßig mit einem Desinfektionsmittel.





# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Nullpunkt des angezeigten Volumenflusses dVA1 kompensieren. Dazu in Einstellungen Volumenfluss dVA1 → 0 ← wählen und darauf achten, dass während dessen keine Luft durch das Spirometer strömt
- Messung möglichst bald danach mit F9 starten (solange der thermische Fehler im Volumenfluss dVA1 noch vernachlässigbar ist)
- Gleichmäßig 3 bis 4 mal durch das Spirometer ein- und ausatmen. Danach soviel Luft wie möglich durch das Spirometer aus- und wieder einatmen. Danach wieder gleichmäßig weiteratmen
- Messung mit F9 beenden


# **Auswertung**

Das Atemzugvolumen V1 ist die Differenz zwischen Maximum und Minimum bei normaler Atmung. Es lässt sich z. B. durch waagerechte Markierungslinien oder durch eine direkte Differenzmessung ermitteln. Der Wert kann als Text an eine beliebige Stelle im Diagramm eingetragen werden.

Die Vitalkapazität V2 errechnet sich aus der Summe von inspiratorischen und expiratorischen Reservevolumen und Atemzugvolumen. Es kann analog zum Atemzugvolumen aus dem Maximum und Minimum bei maximaler Inspiration bzw. Exspiration ermittelt werden.



# Langzeitmessung von Klimadaten

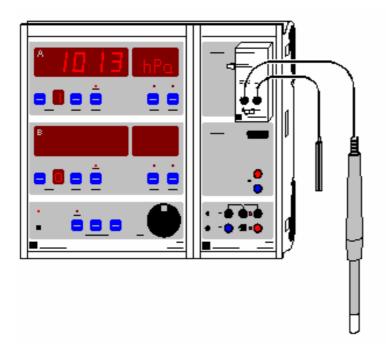

# ■ Beispiel laden

### Versuchsbeschreibung

Es werden über längere Zeit die Klimamesswerte Feuchte rHA1 und Lufttemperatur TA11 (im Feuchtesensor integriert), Luftdruck pA1 (in der Klima-Box integriert) und Beleuchtungsstärke EA1 (Helligkeit) mit CASSY-Display und Sensor-CASSY (also ohne Computer) gemessen. Die Messwerttabelle kann zwischendurch oder am Ende der Messung mit einem Computer und dem Programm CASSY Lab ausgelesen und ausgewertet werden.

# **Benötigte Geräte**

1	CASSY-Display	524 020
1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Klima-Box	524 057
1	Feuchtesensor	529 057
1	Lux-Sensor	666 243

# 1 PC ab Windows 95/98/NT

# Versuchsvorbereitung (siehe Skizze)

Die Geräte werden an einem geschützten Ort aufgestellt, an dem eine Spannungsversorgung vorhanden ist. Alternativ kann auch ein 12 V-Akkumulator ausreichender Kapazität (> 6 Ah) zur Spannungsversorgung benutzt werden.

# Versuchsdurchführung

- Feuchtesensor kalibrieren (nur das erste Mal erforderlich)
  Dazu Sensor-CASSY mit Klima-Box direkt an den PC anschließen, in CASSY Lab die Klima-Box aktivieren, Korrigieren wählen, die vier aufgedruckten Zahlen C1 bis C4 eingeben und mit OK bestätigen. Danach Sensor-CASSY wieder an das CASSY-Display anschließen.
- Einstellung und Start des Datenloggers
   Drückt man die Taste START/STOP, erscheint in der oberen Anzeige "CLR?" (Anhängen neuer Werte möglich) oder "CLR!" (Anhängen neuer Werte nicht möglich) und in der unteren Anzeige die Voreinstellung "NO". Durch Drehen an ADJUST kann man zwischen "NO" und "YES" wechseln und durch einen erneuten Druck auf START/STOP bestätigen. Danach kann man mit ADJUST das



Zeitintervall einstellen, in dem Messwerte gespeichert werden sollen und wieder mit **START/STOP** bestätigen. Dann läuft der Datenlogger (die LED über **START/STOP** leuchtet nun kontinuierlich).

- Ansehen der Messwerte im Datenlogger
  Wählt man SHOW, so kann man sich mit ADJUST alle gespeicherten Messwerte im Display anschauen. Der Datenloggerbetrieb ist dabei vorübergehend ausgeschaltet (die LED über START/STOP blinkt). Durch erneutes Drücken von SHOW wird die Messung fortgesetzt.
- Stromsparmodus des CASSY-Displays aktivieren
  Bei längeren Messzeiten ist es möglich, während der Messung durch Ausschalten der Anzeige des
  CASSY-Displays den Stromsparmodus zu aktivieren. Dazu wählt man auf beiden Anzeigen durch
  die Taste NEXT das CASSY mit der Nummer 0. Die Anzeigen erlöschen und das Sensor-CASSY
  wird abgeschaltet. Für jede neue Messung werden die Geräte für kurze Zeit wieder eingeschaltet.

#### **Auswertung**

CASSY-Display wird an einen Computer mit CASSY Lab angeschlossen und die Daten ausgelesen. Dabei kann das CASSY-Display auch ohne Spannungsversorgung zum Computer transportiert werden (die Messwerte bleiben dabei erhalten). Im Kommentarfeld wird der Start der Messung automatisch eingetragen.

Das Beispiel zeigt eine Messreihe des Klimas von Hannover in der Zeit vom 15.12.2000 bis zum 23.2.2001 bei halbstündigem Messintervall.

Die maximale Anzahl der Messwerte ist abhängig von der Anzahl der gemessenen Größen. Im vorliegenden Beispiel sind insgesamt etwa 5000 Messwertzeilen möglich. Das entspricht einer maximalen Messdauer von etwa 100 Tagen.

#### Hinweis

Zum störungsfreien Betrieb des CASSY-Displays sollte dieses eine Firmware ab Version 1.08 haben. Erforderlichenfalls lässt sich das CASSY-Display von CASSY Lab auf den aktuellen Stand bringen. Dabei werden alle eventuell bereits gespeicherten Messdaten im CASSY-Display gelöscht.




# Versuchsbeispiele Technik

Die Versuchsbeispiele helfen Ihnen beim Einsatz von CASSY Lab. Gegebenenfalls ist die entsprechende Kennzeichnung mit angegeben. Die Messdaten oder Einstellungen der Beispiele können direkt in CASSY Lab geladen werden. Klicken Sie einfach auf die Zeichen in den Beschreibungen. Neue Beispiele sind mit einem roten • gekennzeichnet.

- T 3.2.4 Kfz Zündsysteme
- T 3.2.5 Kfz Gemischaufbereitungssysteme
- T 3.2.7.1 Kfz Bordcomputer mit Radio
- T 3.2.7.5 Kfz Komfortsystem mit CAN-Bus
- T 3.2.7.5 Kfz Untersuchung von CAN-Datenbus-Signalen
- T 7.2.2.1 Puls-Code-Modulation (Quantisierung)
- T 7.4.2 Physikalische Grundlagen der Mikrowellentechnik (Kennlinien des Gunn-Oszillators)
- T 7.4.3 Zweiplattenleitung (TEM- und TE-Moden)
- T 7.4.4 Mikrowellenausbreitung in Hohlleitern (Messung der Stehwelligkeit)
- T 7.6 Antennentechnik
- T 12.5.3 Antriebstechnik

# Kfz - Zündsysteme

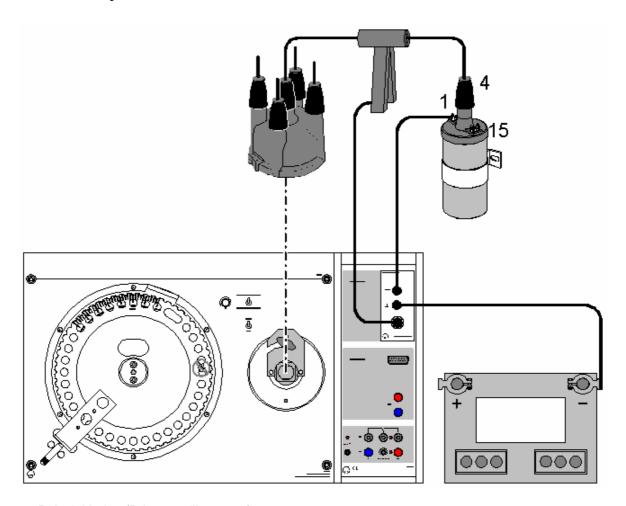

- Beispiel laden (Primäroszillogramm)
- Beispiel laden (Sekundäroszillogramm)
- Beispiel laden (Schließabschnittmessung)

# Sicherheitshinweise

Zündsysteme kommen in Leistungsbereiche, bei denen an der gesamten Zündanlage, d. h. nicht nur an einzelnen Aggregaten wie Zündspule oder Zündverteiler, sondern auch an Kabeln, an Steckverbindern, Anschlüssen von Prüfgeräten etc., gefährliche Spannungen auftreten können, sowohl sekundär- als auch primärseitig.

- Deshalb ist grundsätzlich bei Eingriffen in die Zündanlage die Zündung auszuschalten!
- Bei eingeschalteter Zündung dürfen an der gesamten Zündanlage keine spannungsführenden Teile berührt werden!
- Achten Sie insbesondere auf die Masseverbindungen der einzelnen Trainingsplatten untereinander!

# Versuchsbeschreibung

In diesem Versuch sollen die Zündoszillogramme und die Schließwinkelverstellung mechanischer Verteiler aufgenommen werden.

Die Zündspule hat die Aufgabe, die für den Funkenüberschlag notwendige Zündspannung von 15000 - 30000 Volt zu erzeugen. Im Inneren der Zündspule ist ein Weicheisenkern zusammen mit vielen Windungen von dünnem Draht und wenigen Windungen von dickem Draht vergossen. Das Verhältnis der Windungen zueinander bestimmt die Spannungswandlung.

Durch das Zündschloss ist die Primärspule (Klemme 15) der Zündspule mit dem Pluspol der Batterie verbunden. Beim Schließen des Schalters wird zusätzlich der gemeinsame Wicklungsanschluss von Primär- und Sekundärwicklung (Klemme 1) auf Masse gelegt, der Primärkreis ist geschlossen. In der



nun folgenden Schließzeit baut sich das Magnetfeld auf. Es bricht zusammen, wenn der Schalter öffnet und induziert in der Sekundärwicklung die Hochspannung. Diese erreicht aus Klemme 4 über das Hochspannungskabel und die Hochspannungsverteilung die Zündkerze.

Das Primäroszillogramm stellt den Spannungsverlauf über der Primärwicklung dar. Aus diesem kann insbesondere die Offenzeit und Schließzeit des Unterbrechers ermittelt werden. Aus typischen Veränderungen des Normaloszillogramms können bestimmte Fehler in Zündanlagen erkannt werden.

Das Sekundäroszillogramm einer Zündanlage stellt den Spannungsverlauf an der/den Zündkerze(n) dar. Dabei ist die Zündspannung mit der Zündnadel sowie die Brennspannung von besonderer Bedeutung für die Fehlerdiagnose. Aus typischen Veränderungen des Normaloszillogramms können bestimmte Fehler in Zündanlagen erkannt werden.

Bei der Schließwinkelmessung wird der Winkel, in dem der Unterbrecherkontakt geschlossen ist, elektronisch gemessen und in % angezeigt. Die angezeigten Werte können in Winkelgrade übertragen werden. Die Schließwinkeländerung einer kontaktgesteuerten Zündung darf sich bei einer Drehzahlerhöhung bis ca. 4500 1/min höchstens um 2-3 % ändern. Bei kontaktlosen elektronischen Zündanlagen ist der Schließwinkel nicht einstellbar und u. U. stark drehzahlabhängig.

# **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Auto Box i	524 076
1	Auto-Box Z	524 077
1	Induktiver Impulsgeber	738 986
1	Kapazitiver Messwertgeber	738 987

1 PC ab Windows 95/98/NT

sowie eine der folgenden Ausstattungen:

- T 3.2.4.2 Kontaktgesteuerte Spulenzündanlagen
- T 3.2.4.3 Kontaktlosgesteuerte Spulenzündanlage
- T 3.2.4.4 Elektronische Zündverstellung (Kennfeld)
- T 3.2.4.5 Verteilerlose Spulenzündanlage (DIS)

### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Sie können eine der o. g. Zündanlagen benutzen, einschließlich einer Originalzündanlage in einem PKW. Beachten Sie bitte auch die entsprechende Versuchsliteratur für weitere Versuchsdurchführungen!

Mit der Kapazitiven Zange können im Falle einer verteilergesteuerten Zündanlage alle vier Sekundärimpulse über die Zuleitung zum Zündverteiler erfasst werden. Bei einer DIS-Zündung lässt sich nur ein Sekundärsignal erfassen.

Die Primärseite wird an die Klemme 1 und Masse angeschlossen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Masse möglichst nahe an der Klemme 1 anschließen!

#### **Hinweis**

Wenn die Zylinderzuordnung bei verteilergesteuerten Zündanlagen erkennbar sein soll, benötigen Sie die Triggerzange, angeschlossen an der CASSY Auto Box i (524 076). Schließen Sie diese Zange an das Zündkabel des <u>ersten</u> Zylinders an. Wenn Sie dieses Signal (E) als Triggersignal benutzen, beginnt die Aufzeichnung immer mit Zylinder 1.

#### Versuchsdurchführung

- a) Aufnahme des Primäroszillogramms
- Einstellungen laden
- Messung mit F9 starten
- Wechseln Sie in die Winkeldarstellung, um das Oszillogramm auf den Kurbelwellenwinkel zu beziehen.
- b) Aufnahme des Sekundäroszillogramms
- Einstellungen laden
- · Messung mit F9 starten



 Wechseln Sie in die Winkeldarstellung, um das Oszillogramm auf den Kurbelwellenwinkel zu beziehen.

Beachten Sie bitte, dass die Zündspannungen von Zündkerzen, die im drucklosen Zustand zünden, geringer ist, als im Motor bei ca. 10 bar! Die Durchschlagspannung von Standardzündkerzen liegt in Luft bei nur ca. 3,5 kV. Aus diesem Grund kann auch die Höhe der Zündnadel von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich sein.

- c) Aufnahme des Schließabschnitts
- Einstellungen laden
- Messung mit F9 starten
- Ändern Sie die Drehzahl von 800 auf 5000 1/min

#### Auswertung

In den Beispieldateien sind die Messungen exemplarisch ausgewertet. Dazu Beispieldateien laden und in die Darstellung **Auswertung** wecheln. Der Schließabschnitt wurde für einen Verteiler mit Fliehkraftverstellung gemessen. Bis ca. 4500 1/min ändert sich der Schließabschnitt nicht. Erst oberhalb dieser Drehzahl wird er kleiner.

#### Hinweis


Beachten Sie bitte auch die entsprechende Versuchsliteratur für weitere Versuchsdurchführungen!

# Weitere Beispieldateien

Beispiel laden (Schließabschnittmessung einer kontaktlosen, ruhenden Zündanlage)



# Kfz – Gemischaufbereitungssysteme

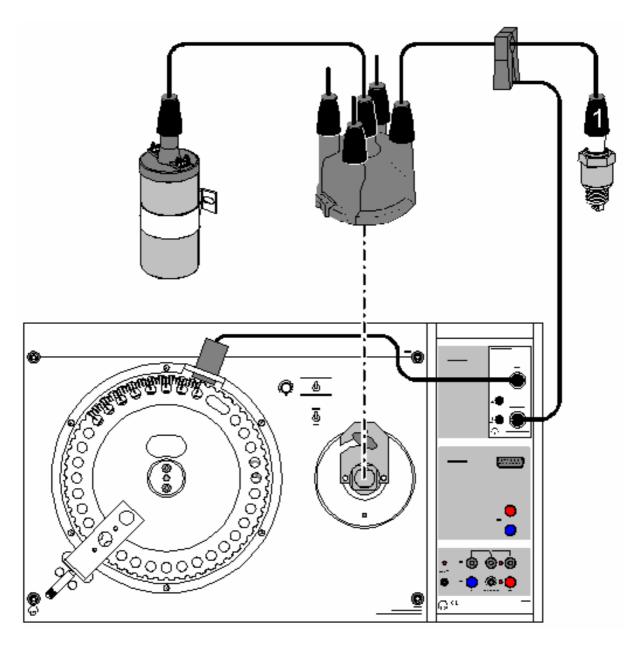

- Beispiel laden (Fliehkraftverstellung)
- Beispiel laden (Unterdruckverstellung, Frühdose)
- Beispiel laden (Unterdruckverstellung, Spätdose)
- Beispiel laden (Einspritzzeit)
- Beispiel laden (Lambdaregelung)
- Beispiel laden (Leerlaufstelleransteuerung)
- Beispiel laden (Klopfverstellung)

# Sicherheitshinweise

Zündsysteme kommen in Leistungsbereiche, bei denen an der gesamten Zündanlage, d. h. nicht nur an einzelnen Aggregaten wie Zündspule oder Zündverteiler, sondern auch an Kabeln, an Steckverbindern, Anschlüssen von Prüfgeräten etc., gefährliche Spannungen auftreten können, sowohl sekundär- als auch primärseitig.

- Deshalb ist grundsätzlich bei Eingriffen in die Zündanlage die Zündung auszuschalten!
- Bei eingeschalteter Zündung dürfen an der gesamten Zündanlage keine spannungsführenden Teile berührt werden!
- Achten Sie insbesondere auf die Masseverbindungen der einzelnen Trainingsplatten untereinander!



### Versuchsbeschreibung

In diesem Beispiel sollen die grundlegenden Möglichkeiten der Signalerfassung von relevanten Größen in Gemischaufbereitungssystemen dargestellt werden. Dazu gehören die Drehzahl, der Zündzeitpunkt, die Einspritzdauer sowie Frequenz und Tastverhältnis von Rechtecksignalen.

425

# **Benötigte Geräte**

2	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Auto-Box i	524 076
1	Induktiver Impulsgeber	738 986
1	Werkstatt-OT-Geber	738 989

1 PC ab Windows 95/98/NT

optional zur Unterdruckverstellung:

1	Drucksensor S, ±2000 hPa	524 064
1	Unterdruckpumpe	738 996

sowie eine der folgenden Ausstattungen:

T 3.2.5.6 LU-Jetronik
T 3.2.5.7 Motronik
T 3.2.5.10 LH-Motronik M 1.5.4 oder 1.5.2

T 3.2.5.11 MONO-Motronik

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Sie können eines der o. g. Systeme benutzen, oder auch eine Gemischaufbereitung in einem PKW.

Mit der Triggerzange wird das Zündsignal von Zylinder 1 erfasst. Der OT-Geber erfasst den oberen Totpunkt des Zylinders. Daraus wird neben der Drehzahl auch der Zündzeitpunkt bestimmt.

An den beiden 4-mm-Buchsen kann ein beliebiges Rechtecksignal angelegt werden. Ausgewertet werden können die Frequenz, das Tastverhältnis und die Ein- bzw. Ausschaltdauer. Wird das Signal eines Einspritzventils angelegt, so wird die Einspritzdauer ti in ms angezeigt.

Zur Messung des Zündwinkels werden die Kurbelwellenmarkierung des OT und das Zündsignal von Zylinder 1 erfasst. Die Zeit zwischen dem Zündimpuls und dem OT-Geberimpuls wird ins Verhältnis gesetzt zu der Zeit, die von dem Schwungrad für eine Umdrehung benötigt wird. Das Resultat wird als Verstellwinkel in °KW angezeigt. Die Markierung für den OT-Geber befindet sich nicht im oberen Totpunkt von Zylinder 1 sondern 20° KW danach! Dieser Winkel wird automatisch berücksichtigt.

### Versuchsdurchführung

#### a) Fliehkraftverstellung

Der Fliehkraftversteller einer rotierenden Verteilung verstellt den Zündzeitpunkt in Abhängigkeit von der Drehzahl des Motors. Mit steigender Drehzahl wird der **Nocken** in die Drehrichtung der Verteilerwelle bewegt, wodurch der Unterbrecherkontakt früher geöffnet wird. Das führt zu einer früheren Zündung. Die Fliehkraftverstellung kann nur bei abgezogenen Unterdruckschläuchen ermittelt werden!

- Einstellungen laden
- Messung mit F9 starten
- Drehzahlbereich von 600 bis 6000 1/min durchlaufen

Die Fliehkraftverstellung bewirkt eine Verstellung des Zündwinkels in Richtung früh, der bis ca. 3000 1/min linear zunimmt. Bei höheren Drehzahlen wird nicht mehr weiter verstellt, da die Fliehkraftverstellung mechanisch begrenzt ist. Falls im weiteren die Unterdruckverstellung untersucht werden soll, können aus dem Diagramm die entsprechenden Fliehkraftanteile ermittelt werden, die von der Unterdruckverstellung subtrahiert werden müssen.

### b) Unterdruckverstellung, Frühdose

Der Unterdruckversteller verstellt den Zündzeitpunkt in Abhängigkeit von der Belastung des Motors. Die Unterdruckdose ist mit dem Ansaugrohr oberhalb der Drosselklappe verbunden und verstellt den Zündzeitpunkt im Teillastbereich durch Verdrehen des **Unterbrecherkontaktes** gegen die Dreh-



richtung der Verteilerwelle. Das führt zu einer früheren Zündung. Man bezeichnet diese Druckdose als "Frühdose"

Der Anteil der Unterdruckverstellung an der Gesamtverstellung kann ermittelt werden, indem zunächst der reine Fliehkraftanteil bestimmt wird und dieser von dem im Unterdruckversuch gemessenen Wert abgezogen wird!

# ■ Einstellungen laden

- Messung mit F9 starten
- Bei 1000 1/min Unterdruck von 0 bis –600 hPa (-600 mbar) erzeugen
- Für 2000 und 4000 1/min wiederholen

Die Verstellung der Frühdose bewirkt eine Frühverstellung im Druckbereich von –200 bis –500 hPa von insgesamt ca. 13 °KW unabhängig von der Drehzahl. Für 1000 und 2000 1/min sind die Verstellbereiche nach Abzug des Fliehkraftanteils identisch!

### c) Unterdruckverstellung, Spätdose

Die Unterdruckdose zur Spätverstellung ist mit dem Ansaugrohr unterhalb der Drosselklappe verbunden, weil dort im Leerlauf und im Schiebebetrieb hoher Unterdruck herrscht. Sie verstellt den Zündzeitpunkt durch Verdrehen des **Unterbrecherkontaktes** in die Drehrichtung der Verteilerwelle. Das führt zu einer späteren Zündung. Man bezeichnet diese Druckdose als "Spätdose"

Die Spätverstellung ist der Frühverstellung untergeordnet.

Der Anteil der Unterdruckverstellung an der Gesamtverstellung kann ermittelt werden, indem zunächst der reine Fliehkraftanteil bestimmt wird und dieser von dem im Unterdruckversuch gemessenen Wert abgezogen wird!

### Einstellungen laden

- Messung mit F9 starten
- Bei 1000 1/min Unterdruck von 0 bis –600 hPa erzeugen
- Für 2000 und 4000 1/min wiederholen

Die Verstellung der Spätdose bewirkt eine Spätverstellung im Druckbereich von –200 bis –400 hPa von insgesamt ca. -8 °KW unabhängig von der Drehzahl. Für 1000 und 2000 1/min sind die Verstellbereiche nach Abzug des Fliehkraftanteils identisch!

### d) Einspritzventil

Die Einspritzventile haben die Aufgabe, je nach Signal vom Steuergerät alle Zylinder (Zentraleinspritzung) oder die Zylinder einzeln (Mehrpunkteinspritzung) mit Benzin zu versorgen. Sie werden dazu meist mit 12 V über die Masseleitung angesteuert. Die Einspritzmenge hängt allein von der Einspritzdauer ab, da der Öffnungsquerschnitt und die Druckdifferenz zwischen Einspritzleitung und Saugrohr konstant gehalten werden. Typisch für Gleichstrom-Magnetventile (Einspritzventile) ist die hohe Induktionsspannung in entgegengesetzter Richtung beim Abschalten.

# ■ Einstellungen laden

- Messung mit F9 starten
- Für betriebswarmen Motor Drehzahl bei 50 % Last von Leerlauf bis ca. 5000 1/min steigern
- Für verschiedene Lastzustände (17 %, 33 %, 67 %, 83 %) wiederholen

Da die Motordrehzahl bei konstantem Luftdurchsatz steigt, sinkt der absolute Druck hinter der Drosselklappe und die Zylinder können pro Hub weniger Gemisch ansaugen. Daher ist auch weniger Kraftstoff erforderlich, was durch die kürzere Einspritzdauer erreicht wird. Nimmt die Motorleistung unter der Voraussetzung konstanter Drehzahl zu, dann ist die Zylinderfüllung größer. Dies bedingt eine größere Kraftstoffmenge und somit längere Einspritzzeiten.

# e) Lambdaregelung

Beträgt der Restsauerstoffgehalt des Abgases 3 % (mageres Gemisch), entsteht aufgrund der Differenz zum Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft eine Spannung von 0,1 V. Beträgt der Restsauerstoffgehalt weniger als 3% (fettes Gemisch), steigt die Sondenspannung im Verhältnis der erhöhten Differenz auf 0,9 V an. Für jede Zylinderbank gibt es somit einen Regelkreis, mit dem die Gemischzusammensetzung gesteuert werden kann. In Abhängigkeit von der Sondenspannung wird die Einspritzdauer verändert.

# ■ Einstellungen laden

- Periodische Lambdaspannungsänderung aktivieren
- Messung mit F9 für betriebswarmen Motor bei 2000 1/min starten

# • Messung für sehr kalten Motor bzw. Volllast wiederholen

Die Lambda-Regelung arbeitet so, dass bei magerem Gemisch die Einspritzdauer steigt, was zu einer Anfettung des Gemischs führt. Bei fettem Gemisch sinkt die Einspritzdauer, die Einspritzmenge nimmt ab, was eine Abmagerung des Gemischs verursacht. Die Regelung arbeitet bei kaltem Motor nicht, da eine Anfettung des Kraftstoff-Luftgemisches erfolgen muss, um Kondensationsverluste an den kalten Bauteilen auszugleichen. Das Gemisch kann nicht mit  $\lambda = 1$  betrieben werden. Bei Volllast wird die Regelung ebenfalls außer Betrieb gesetzt, da der Motor mit fettem Gemisch

#### f) Leerlaufsteller

Der Leerlauf-Füllungsregler hat bei der Benzineinspritzung die Aufgabe, je nach Signal des Steuergeräts einen Bypass-Luftkanal um die Drosselklappe herum mehr oder weniger zu öffnen und damit den Leerlauf zu steuern. Der prozentuale Zeitanteil innerhalb von 100 ms, in dem der Elektromotor einen Stromimpuls zum Öffnen erhält, wird als Tastverhältnis bezeichnet. Es beträgt z. B. 50 %, wenn der Motor vom Steuergerät 50 ms 12 V erhält und dann weitere 50 ms lang 0 V. Durch die Massenträgheit des Ankers sollte in diesem Fall der Bypasskanal zu etwa 50 % geöffnet sein.

# ■ Einstellungen laden

• Messung mit **F9** starten

Für warmen Motor Drehzahl von 850 auf 400 1/min verringern Messung für kalten Motor und zugeschaltete Klimaanlage wiederholen

betrieben werden muss, um die maximale Motorleistung zu erzielen.

Bei einer Verringerung der Drehzahl nimmt das Tastverhältnis zu, da versucht wird, die Drehzahl wieder anzuheben. Bei kaltem Motor wird das Tastverhältnis ebenfalls vergrößert, das die erhöhte Motorreibung überwunden werden muss. Wird die Klimaanlage zugeschaltet, wird ebenfalls der Luftdurchsatz des Leerlaufstellers durch Vergrößern des Tastverhältnisses zu erhöhen, um den Drehzahlabfall durch die gestiegene Belastung auszugleichen.

# g) Klopfsensor

"Klopfen" oder "Klingeln", eine unkontrollierte Form der Verbrennung, kann im Motor zu Schäden führen. Da aber die Klopfgrenzen von vielen sich verändernden Einflussgrößen wie Kraftstoffqualität, Motorzustand und Umweltbedingungen abhängig sind, muss auch mit Zündsystemen mit elektronischer Verstellung ein ausreichender Abstand zur Klopfgrenze eingehalten werden, was aber eine Verschlechterung des Kraftstoffsverbrauchs bedingt. Der bisher unverzichtbare Abstand des Kennfeldes zur Klopfgrenze kann entfallen, wenn während des Betriebes ein Klopfen z. B. bedingt durch mangelhafte Kraftstoffqualität erfasst und der Zündwinkel entsprechend zurückgenommen wird. Durch die Klopfregelung kann der Motor bis in den Grenzbereich betrieben werden, ohne dabei Schaden zu nehmen.

# ■ Einstellungen laden


- Messung mit F9 starten
- Für warmen Motor bei einer Drehzahl von 2500 1/min und fast Volllast den Klopfsensor leicht auf einen Metallblock schlagen

Bei klopfender Verbrennung verschiebt die Regelschaltung den Zündzeitpunkt des klopfenden Zylinders nach "spät". Anschließend wird, nach einem festgelegten Schema, der Zündzeitpunkt langsam wieder an seinen ursprünglichen Wert herangeführt.

### **Hinweis**

Beachten Sie bitte auch die entsprechende Versuchsliteratur für weitere Versuchsdurchführungen!

# Kfz – Bordcomputer mit Radio

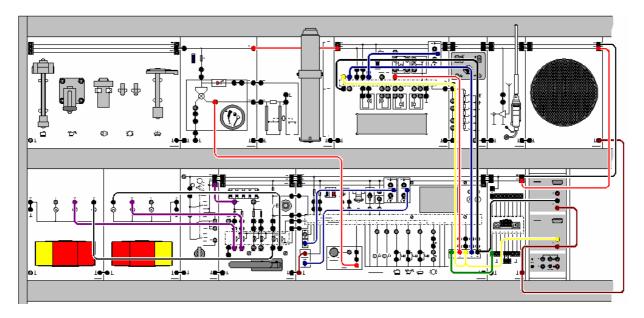

# ■ Beispiel laden

# Versuchsbeschreibung

Bei der vorliegenden Anlage handelt es sich um das Multi Info Display (MID) aus dem Opel Omega B, Modelljahr >1994. Das Info Display ist ein zentrales Informationssystem und enthält folgende Einzelsysteme:

- Zeituhr
- Bordcomputer
- Check-Control
- Radio-Anzeigenteil
- Datum-Anzeigenteil

Das Info Display ist im Instrumentenzusammenbau integriert. Es besitzt eine vierzeilige Anzeige. Je nach Modus oder eingestellter Betriebsart werden die o. a. Informationen angezeigt. Im vorliegenden Experiment soll die Kommunikation zwischen dem Radio und dem Display untersucht werden. Diese beiden Komponenten kommunizieren über den sogenannten "I²C"-Bus miteinander, dessen Bussignale im Folgenden aufgenommen werden sollen.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter: http://www.philipslogic.com/products/collateral/i2c/.

# **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Batterieanschluss	738 03
1	Batterie	738 04
	oder alternativ	
	Netzteil	738 026
1	Zündstartschalter	738 10
1	MID	739 705
1	Autoradio	739 711
1	Kurz-Teleskop-Antenne	739 742
1	Breitband-Lautsprecher	739 731
1	PC ab Windows 95/98/NT	

# Benötigtes Zubehör

1	Satz 51 Sicherheitsexperimentierkabel	738 9821
5	Satz 10 Sicherheitsverbindungsstecker sw	524 034
1	Satz 10 Sicherheitsverbindungsstecker mit Abgriff	500 592



#### Versuchsaufbau

Bauen Sie den Versuch nach Skizze auf. Einige Geräte sind optional und für die Versuchdurchführung nicht erforderlich! Schließen Sie das Sensor-CASSY an eine serielle RS232 oder USB-Schnittstelle des Computers an. Verbinden Sie die Messeingänge wie in der Skizze dargestellt mit dem Versuchsaufbau.

# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Schalten Sie die Anlage zunächst mit dem Batterieanschluss dann mit dem Zündstartschalter ein.
- Schalten Sie das Radio durch Drücken der Lautstärketaste ein.
- Starten Sie die Messung durch Drücken von **F9** oder
- Schalten Sie nun eine Stationstaste am Radio um, um einen Datenfluss zu erzeugen.

### Versuchsauswertung

Aus den Diagrammen können folgende Erkenntnisse gewonnen werden:

- Die Adresse des Displays lautet: 1 0 0 1 0 1 0
- Es erfolgt ein Schreibzugriff vom Display zum Radio (R/W-Bit)


Weitere Versuchvarianten und deren Auswertung finden Sie in der zugehörigen Experimentierliteratur.

### Weitere Messbeispiele

- Darstellung der Datenblöcke zur Ansteuerung des Displays
- Ermittlung der Buspegel



# Kfz - Komfortsystem mit CAN-Bus

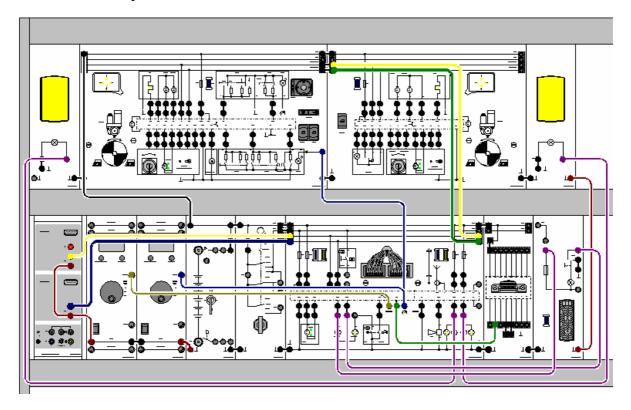

### ■ Beispiel laden

# Versuchsbeschreibung

Das neue Komfortsystem hat beim VW Passat ab dem Modelljahr 1997 eingesetzt und steht beim VW Golf ab dem Modelljahr 1998 zur Verfügung. Die Teilfunktionen des Komfortsystems wie, z. B. Zentralverriegelung, Spiegelverstellung und Diebstahlwarnanlage haben sich nicht grundlegend geändert. Neu ist jedoch der Aufbau und die Organisation des Komfortsystems. Gegenüber den bisherigen Systemen ist es dezentral aufgebaut. Das bedeutet, mehrere Steuergeräte teilen sich die Aufgaben.

Die Steuergeräte des Komfortsystems sind über zwei Leitungen, den CAN-Datenbus miteinander verbunden. Über diese Leitungen findet ein ständiger Datenaustausch zwischen den Steuergeräten statt.

Dabei muss ein Steuergerät:

- eigene Daten bereitstellen,
- diese Daten an andere Steuergeräte senden,
- · von anderen Steuergeräten Daten empfangen,

Das System besteht aus einem Zentral-Steuergerät und zwei Tür-Steuergeräten. Das Zentral-Steuergerät besitzt keine übergeordnete Funktion. Alle Steuergeräte des Komfortsystems sind gleichberechtigt. Neben seinen Funktionen innerhalb des Komfortsystems stellt es die Verbindung zum übrigen Bordnetz und der Diagnoseleitungen dar.

Funktionen des Zentral-Steuergerätes:

- Spiegelverstellung,
- Innenlichtsteuerung,
- Heckdeckel-Fernentriegelung.
- Funk-Fernbedienung,
- Diebstahlwarnanlage

Die Tür-Steuergeräte überwachen und steuern die Funktionen des Komfortsystems, die in den Türen ausgeführt werden.

# Benötigte Geräte

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Batterieanschluss	738 03
1	Batterie	738 04
	oder alternativ	
	Netzteil	738 026
1	Zündstartschalter	738 10
1	Komfortsystem	739 58
1	PC ab Windows 95/98/NT	

### Benötigtes Zubehör

1	Satz 51 Sicherheitsexperimentierkabel	738 9821
5	Satz 10 Sicherheitsverbindungsstecker sw	524 034
1	Satz 10 Sicherheitsverbindungsstecker mit Abgriff	500 592

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Bauen Sie den Versuch nach Skizze auf. Schließen Sie das Sensor-CASSY an eine serielle RS232 oder USB-Schnittstelle des Computers an. Verbinden Sie die Messeingänge wie in der Skizze dargestellt mit dem Versuchsaufbau.

# Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Schalten Sie die Anlage zunächst mit dem Batterieanschluss ein.
- Öffnen Sie nun eine der beiden Türen durch Drehen des entsprechenden Schlüsselschalters in Richtung "OPEN".
- Schalten Sie die Zündung mit dem Zündstartschalter ein.
- Starten Sie die Messung durch Drücken von F9 oder



### Versuchsauswertung

Aus den Diagrammen können folgende Erkenntnisse gewonnen werden:


- Die Signale der Leitungen CANH und CANL sind zueinander invertiert.
- Die Botschaften werden in drei Blöcken mit einer Wiederholzeit von 20 ms gesendet.
- Zwei Botschaften sind gleich lang (ca. 1,34 ms) und eine Botschaft ist kürzer (ca. 1 ms). Diese gehört offensichtlich zu dem Türsteuergerät Beifahrerseite.

Die Darstellung **Differenz** zeigt zusätzlich zu CANH und CANL auch deren Differenz  $\Delta$ CAN=CANH-CANL, die als Formel definiert ist.

Weitere Versuchvarianten und deren Auswertung finden Sie in der zugehörigen Experimentierliteratur 566 1481.



# Kfz – Untersuchung von CAN-Datenbus-Signalen

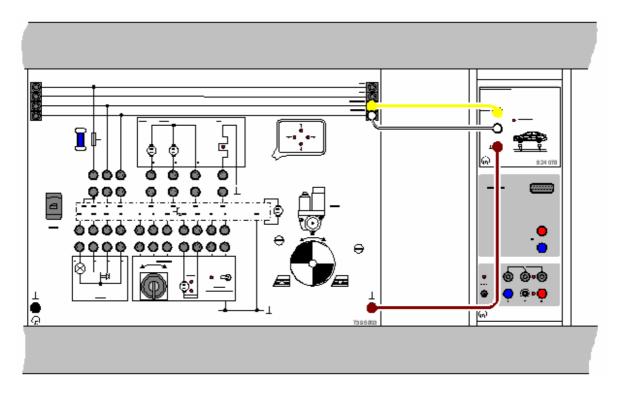

### Beispiel laden

# Versuchsbeschreibung

In diesem Beispiel soll eine CAN-Botschaft grafisch aufgezeichnet und ausgewertet werden. Anhand dieser Aufzeichnung können die einzelnen Bestandteile des Protokolls bestimmt werden. Dazu gehören:

- Start-Bit
- Identifier (inkl: RTR)
- Längencode (DLC)
- Datenblöcke
- Prüfsumme (CRC)
- Bestätigungsfeld (ACK)
- Endefeld (EOF)

# **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	CAN-Bus-Box	524 078

1 PC ab Windows 95/98/NT

Zusätzlich wird eine der folgenden Ausstattungen benötigt:

T 3.2.3.7: Kfz-Beleuchtung mit CAN-Bus T 3.2.7.5: Komfortsystem mit CAN-Bus

T 3.2.12.3: Vernetzte Kfz-Systeme 1 (Beleuchtung) sowie

T 3.2.12.5: Vernetzte Kfz-Systeme 3 (Infotainment)

Alternativ können natürlich auch die CAN-Bus Signale eines Lowspeed-Busses an einem original Fahrzeug untersucht werden.

# Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Schließen Sie die CAN-Bus-Box an beliebiger Stelle an ein Lowspeed-CAN-Bus-System an. Achten Sie bitte auf eine korrekte Masseverbindung.

Für die Werkstattpraxis können Sie auch den CAN-Bus eines vorhandenen Fahrzeugs anschließen, solange es sich um einen Lowspeed-Bus handelt. Verschaffen Sie sich dazu nach den Hersteller-Schaltplänen Zugang zu den beiden Busleitungen; zusätzlich schließen Sie die Masse-Buchse der CAN-Bus-Box an die Karosseriemasse an.

Tipp: Bei modernen Fahrzeugen können die CAN-Bus-Signale u. U. auf der 16-poligen OBD-Buchse liegen!

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Messung mit F9 starten
- Messung stoppt automatisch nach Aufzeichnen der ersten empfangenen Botschaft.
- Messung kann für andere zu übertragende Daten wiederholt werden. Dazu zunächst den entsprechenden Identifier im ID-Filter in den Einstellungen CANA1 (rechte Maustaste auf CANA1) auswählen und wieder mit F9 starten.

#### Auswertung

In der Anzeige werden alle mitgeschnittenen Botschaften zunächst hexadezimal angezeigt. Existieren in dem zu untersuchenden System mehr als zwei zyklisch wiederholende Botschaften, zeigt die Anzeige diese Botschaften nacheinander an. Dargestellt werden von links nach rechts:


- Identifier
- Datenlängencode
- Datenblöcke
- Prüfsumme
- · Zustand der Bestätigung

Die Anzeigen sind jeweils durch ein Leerzeichen voneinander getrennt. In den Einstellungen CANA1 können auch zwei unterschiedliche Binär-Modi gewählt werden:

- Rohdaten, d. h. alle Stuff-Bits sind enthalten
- · Binärdaten, d. h. alle Stuff-Bits sind herausgefiltert



# **Puls-Code-Modulation (Quantisierung)**

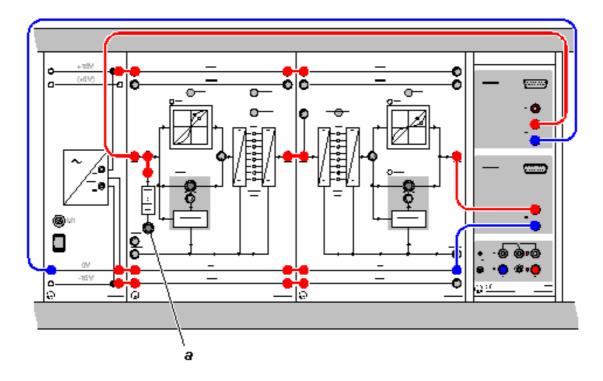

- Beispiel laden (lineare Quantisierungskennlinie, 5 Bit)
- Beispiel laden (lineare Quantisierungskennlinie, 8 Bit)
- Beispiel laden (nichtlineare Quantisierungskennlinie, 5 Bit)
- Beispiel laden (Kompressorkennlinie, 8 Bit)
- Beispiel laden (Expanderkennlinie, 8 Bit)

#### Versuchsbeschreibung

Die Umwandlung eines analogen Signals in ein digitales Signal erfordert 3 Schritte:

- Abtastung
- Quantisierung
- Codierung

Hier soll die Quantisierung experimentell untersucht werden. Durch An-/Abschalten einzelner Bits kann dabei die Auflösung der Quantisierung verringert werden und der Vorgang in eindrucksvoller Weise grafisch dargestellt werden. Zusätzlich werden die Charakteristiken von Expander und Kompressor bei der Kompandierung aufgenommen.

#### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
	CASSY Lab	524 200
1	PCM-Modulator	736 101
1	PCM-Demodulator	736 111
1	Stabilisiertes Netzgerät ±15 V, 3 A	726 86
1	Satz 10 Brückenstecker	501 511
2	Paar Kabel, rot und blau, 100 cm	501 46
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Versuchsaufbau und Verkabelung wie oben dargestellt vorbereiten und Netzgerät einschalten. Bitte beachten Sie besonders:

• Bits vom LSB her abschalten (Taster SELECT und ON / OFF, s. u.).



- Potentiometer a nur langsam drehen.
- Im Bereich kleiner Eingangsspannungen (< -10 V) kann es durch Übersteuerung des A/D-Wandlers zu einem Signalsprung 0 V → -9,5 V kommen. Das ist nicht kritisch, eventuell Messung bei ca. -9,5 V beginnen.
- Theorie und Versuchsdurchführung zu diesem Thema sind ausführlich im Handbuch beschrieben (vgl. T7.2.2.1 Puls-Code-Modulation 564 001, Seite 52).

#### Versuchsdurchführung


- Einstellungen laden
- · Potentiometer a nach ganz links drehen.
- Messung mit **F9** oder starten
- Potentiometer a nach rechts drehen. Damit liegt eine Spannung am Eingang des PCM-Modulators (736 101) an, die langsam von –10 V bis +10 V ansteigt. Diese Eingangsspannung wird als Spannung UA1 angezeigt. Die Ausgangsspannung (nach der Quantisierung) am PCM-Demodulator (736 111) wird als Spannung UB1 dargestellt.
- Nach Aufnahme der Quantisierungskennlinie Messung mit F9 wieder stoppen.

#### Varianten

- Reduktion der Auflösung von 8 auf 5 Bit
  Die 3 geringstwertigen Bits (Least Significant Bits = LSB) des PCM-Modulators durch Drücken von
  SELECT und ON/OFF deaktivieren. Wiederholtes Drücken von SELECT führt auf die Position des
  gewünschten Bits. ON/OFF wechselt zwischen aktiv/inaktiv. Potentiometer a zurück nach links
  (minimale Eingangsspannung: ca. –10 V) drehen und die Aufnahme der Quantisierungskennlinie
  wiederholen. Klar erkennbar sind die aus den 5 Bit resultierenden 32 Stufen mit gleicher Höhe.
- Nichtlineare Quantisierung
  Die MODE Taster von PCM-Modulator und PCM-Demodulator jeweils einmal drücken. Jetzt arbeiten beide Geräte im Modus nichtlineare Quantisierung (angezeigt durch je eine LED in den 13-Segment-Kennlinien). Danach die Kennlinienaufnahme wiederholen.
- Kompressor/Expanderkennlinie
   Zur Aufnahme der Kompressor/Expanderkennlinie wird nur eines der beiden Geräte im nichtlinearen Modus betrieben während das jeweils andere Gerät linear arbeitet.



# Physikalische Grundlagen der Mikrowellentechnik (Kennlinien des Gunn-Oszillators)

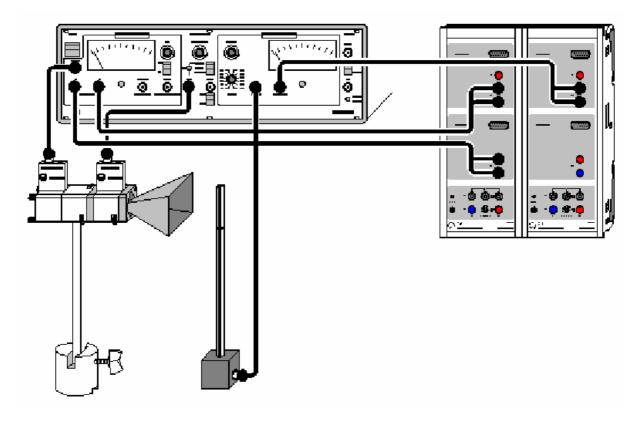

- Beispiel laden (Kennlinien mit zwei Sensor-CASSYs)
- Beispiel laden (Strom-Spannung)
- Beispiel laden (Strom-Spannung-Mikrowellenleistung)

#### Versuchsbeschreibung

Gunn-Oszillatoren bestehen aus einem Hohlraumresonator (= abgeschlossener metallischer Hohlraum) und einem Gunn-Element. Die Strom-Spannungs-Kennlinie IG=f(UG) des Gunn-Elements enthält einen Bereich mit negativer Steigung. Nur in diesem Kennlinienbereich wirkt das Gunn-Element entdämpfend und kann die Verluste im Resonator so ausgleichen, dass eine dauerhafte Oszillation und damit nutzbare Mikrowellenleistung entsteht. In diesem Versuch werden der Gunn-Strom IG und die Mikrowellenleistung PM als Funktion der DC-Spannung UG des Gunn-Elements dargestellt.

#### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Gunn-Oszillator	737 01
1	Gunn-Versorgung mit SWR-Meter	737 021
1	PIN-Modulator	737 05
1	Einwegleitung	737 06
1	Stütze für Hohlleiterkomponenten	737 15
1	Große Hornantenne	737 21
1	E-Feldsonde	737 35
1	Sockel	300 11
3	HF-Kabel, 1 m	501 02
3	Messkabel BNC/4 mm-Stecker	575 24
1	Buch: Physik. Grund. d. Mikrowellentechnik	568 721
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Versuchsaufbau und Verkabelung wie oben dargestellt vorbereiten und Gunn-Versorgung einschalten. Bitte beachten Sie besonders:

- Verbindungen zwischen Versorgungsgerät und Gunn-Oszillator, PIN-Modulator und E-Feldsonde mit HF-Kabeln mit BNC Stecker/Stecker.
- Verbindungen zwischen Versorgungsgerät (AMP OUT bzw. RECORDER X,Y) und Sensor-CASSY mit Messkabeln BNC/4mm-Stecker.
- Versorgungsgerät, MODULATION: auf PIN INT stellen.
- Geeignete Verstärkung am SWR-Meter einstellen (v/dB und ZERO).
- Theorie und Versuchsdurchführung zu diesem Thema sind ausführlich im Handbuch beschrieben (vgl. Seite 11ff).

#### Hinweis

Dargestellt ist ein Versuchsaufbau mit 2 kaskadierten Sensor-CASSYs. Damit werden die Kennlinien IG=f(UG) und PM=f(UG) gleichzeitig aufgenommen. Die zweite Kennlinie stellt die relative Mikrowellenleistung des Gunn-Oszillators als Funktion der DC-Spannung UG des Gunn-Elements dar.

Steht nur ein Sensor-CASSY zur Verfügung, dann wird der Versuch in zwei Schritten durchgeführt.

#### Versuchsdurchführung mit 2 Sensor-CASSYs

- Einstellungen laden
- Potentiometer UG ganz nach links (UG = 0 V).
- Messung mit F9 starten.
- Potentiometer UG nach rechts drehen. Gunn-Spannung, Gunn-Strom und Mikrowellenleistung werden auf eigenen Anzeigeinstrumenten dargestellt.
- Nach Aufnahme der beiden Kennlinien IG=f(UG) und PM=f(UG) Messung mit **F9** wieder stoppen.

#### Versuchsdurchführung mit 1 Sensor-CASSY

- Einstellungen laden
- Potentiometer UG ganz nach links (UG = 0 V).
- Messung mit **F9** starten.
- Potentiometer UG nach rechts drehen. Gunn-Spannung und Gunn-Strom werden auf eigenen Anzeigeinstrumenten dargestellt.
- Nach Aufnahme der Kennlinie IG=f(UG) Messung mit **F9** wieder stoppen.

Die zweite Kennlinie PM=f(UG) wird anschließend mit dem gleichen CASSY und den gleichen Einstellungen gemessen. Daher erscheint die relative Mikrowellenleistung im Gunn-Strom-Anzeigeinstrument. Dazu:

- Verbindung von Sensor-CASSY mit Gunn-Versorgung (RECORDER Y) trennen und auf AMP OUT umstecken.
- Geeignete Verstärkung am SWR-Meter einstellen (v/dB und ZERO).
- Aufnahme der Kennlinie wiederholen.


#### Hinweise

Kennlinien von aktiven Elementen in Mikrowellenversuchen zeigen große Streuungen. Die in den Beispielen dargestellten Kennlinien sind daher nur exemplarisch zu verstehen. Wichtig ist der Zusammenhang zwischen dem fallenden Bereich der Strom-Spannungs-Kennlinie und der Erzeugung von Mikrowellenleistung. Die Absolutwerte oder der Verlauf der Kurven kann je nach verwendetem Gunn-Element deutlich variieren.

Die Messung der Mikrowellenleistung PM erfolgt mit einem unkalibrierten Detektor. Ihr Zahlenwert ist daher unbestimmt.



# **Zweiplattenleitung (TEM- und TE-Moden)**

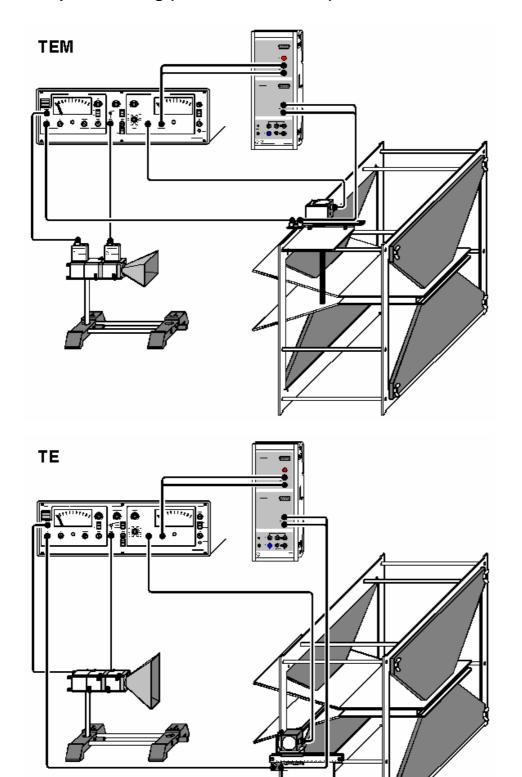

- Beispiel laden (TEM)
  Beispiel laden (TE 22 mm Plattenabstand)
  Beispiel laden (TE 13 mm Plattenabstand, Cut Off)



Durch Drehen der Polarisationsrichtung des anregenden Mikrowellenfeldes (im Versuch unbedingt beachten!) lassen sich auf der Zweiplattenleitung TEM- oder TE-Wellen anregen. TE-Wellen zeigen das Phänomen des Cut Off, d. h. für eine feste Frequenz des anregenden Feldes sind TE-Wellen nur oberhalb eines bestimmten Minimalabstandes der Platten ausbreitungsfähig. Bei Anregung mit variabler Frequenz ist für einen festen Plattenabstand unterhalb der sogenannten Cut Off Frequenz keine Ausbreitung von TE-Wellen möglich. Da Freiraumexperimente mit Mikrowellen nur bei bestimmten, festen Frequenzen erlaubt sind, wird der Versuch hier mit variablem Plattenabstand durchgeführt.

#### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Gunn-Oszillator	737 01
1	Gunn-Versorgung mit SWR-Meter	737 021
1	PIN-Modulator	737 05
1	Einwegleitung	737 06
1	Zweiplattenleitung	737 07
1	Messschlitten für Zweiplattenleitung	737 071
1	Stütze für Hohlleiterkomponenten	737 15
1	Große Hornantenne	737 21
1	E-Feldsonde	737 35
2	HF-Kabel, 1 m	501 02
2	HF-Kabel, 2 m	501 022
2	Messkabel BNC/4 mm-Stecker	575 24
2	Stativfuß MF	301 21
1	Buch: Zweiplattenleitung	568 661
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau TEM oder TE (siehe Skizze TEM oder TE)

Versuchsaufbau und Verkabelung wie oben dargestellt vorbereiten und Gunn-Versorgung einschalten. Bitte beachten Sie besonders:

- Verbindungen vom Versorgungsgerät zu Gunn-Oszillator, PIN-Modulator und Messschlitten für Zweiplattenleitung (Eingang IN 8-24 V) mit HF-Kabeln mit BNC Stecker/Stecker.
- Verbindungen vom Versorgungsgerät (AMP OUT) und dem Messschlitten für Zweiplattenleitung (Ausgang X) zum Sensor-CASSY mit Messkabeln BNC/4mm-Stecker.
- Gunn-Spannung am Versorgungsgerät auf UG = 10 V einstellen.
- Versorgungsgerät, MODULATION: auf PIN INT stellen.
- Messschlitten für Zweiplattenleitung so auf den Streben der Zweiplattenleitung positionieren, dass E-Feldsonde bei Linksanschlag gerade in den parallelen Teil der Zweiplattenleitung ragt.
- E-Feldsonde immer mit mechanischem Kontakt zum Plattenrand führen, das verhindert Positionsschwankungen.
- Zweiplattenleitung nacheinander mit Kurzschlussprofilen 13 mm und 22 mm abschließen.
- Für zusätzliche Hinweise siehe Gebrauchsanweisungen zu 737 07 und 737 071.
- Theorie und Versuchsdurchführung zu diesem Thema sind ausführlich im Handbuch beschrieben (vgl. Seite 27).

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Messschieber des Messschlittens (737 071) nach rechts (x = 75 mm) schieben.
- Zahlenwert der angezeigten Spannung UB1 mit der Maus in Anzeigeinstrument Spannung U75 ziehen (Drag & Drop, rechter Kalibrierpunkt für Positionsmessung).
- Messschieber des Messschlittens (737 071) nach links (x = 25 mm) schieben.
- Zahlenwert der angezeigten Spannung UB1 mit der Maus in Anzeigeinstrument Spannung U25 ziehen (Drag & Drop, linker Kalibrierpunkt für Positionsmessung).
- Messschieber nach links (x = 0 mm) schieben.
- Messung mit F9 starten.
- Messschieber langsam nach rechts bewegen.



- Evtl. Verstärkung v/dB und / oder ZERO nachstellen bis gewünschtes Messsignal vorliegt. Die Einstellungen für die weiteren Versuche unverändert halten!
- Nach Aufnahme des Feldverlaufs Messung mit **F9** wieder stoppen.

#### Auswertung Wellenlänge

Mit der freien Anpassung und der Formel für den Verlauf der elektrischen Feldstärke E

 $A*sqr(cos(360/B*x+D)^2+1/C^2*sin(360/B*x+D)^2)$ 

oder in technischer Notation

$$A \cdot \sqrt{ \left| \cos \left( \frac{2\pi}{\lambda_g} \cdot x + \phi \right) \right|^2 + \frac{1}{SWR^2} \left| \sin \left( \frac{2\pi}{\lambda_g} \cdot x + \phi \right) \right|^2}$$

mit

A: Amplitude der elektrischen Feldstärke

λg: Hohlleiterwellenlänge

SWR: Stehwelligkeit

φ: Phasenverschiebung

lassen sich die Wellenlänge  $\lambda_g$ =B auf der Zweiplattenleitung sowie die Stehwelligkeit SWR=C direkt aus den Messergebnissen berechnen (siehe auch Versuch Messung der Stehwelligkeit).

Die Anfangswerte speziell für die Wellenlänge  $\lambda_g$ =B und Stehwelligkeit SWR=C müssen sinnvoll gewählt sein, weil sonst die freie Anpassung kein Ergebnis oder nicht das beste Ergebnis findet. Durch Doppelklick auf eine angepasste Kurve lässt sich diese wieder verwerfen. Danach kann die Anpassung mit anderen Anfangswerten wiederholt werden.

Für TEM-Moden sollte  $\lambda_g$ =B=32 mm (Freiraumwellenlänge) und für TE-Moden sollte  $\lambda_g$ =B=45 mm (Hohlleiterwellenlänge) und für die Stehwelligkeit sollte SWR=C=10 als Anfangswert angegeben werden.

#### **Auswertung Cut Off**

Ist bei der TE-Anordnung mit 13 mm der Plattenabstand zu klein, dann sind keine TE-Moden mehr anregbar (Cut Off). Mit der freien Anpassung und der Formel

A\*exp(-x/B)+C

lässt sich der exponentielle Feldverlauf annähern. Als Anfangswert für B etwa 10 mm angeben.


#### Hinweis

Die gemessene Spannung UA1 proportional zur Mikrowellenleistung. Unter der Annahme einer quadratischen Kennlinie für den Koax-Detektor kann sie in die elektrische Feldstärke E ∞ sqr UA1 umgerechnet werden. Da die Detektorkennlinie nicht kalibriert ist, ist der Zahlenwert von E willkürlich.





# Mikrowellenleitung in Hohlleitern (Messung der Stehwelligkeit)

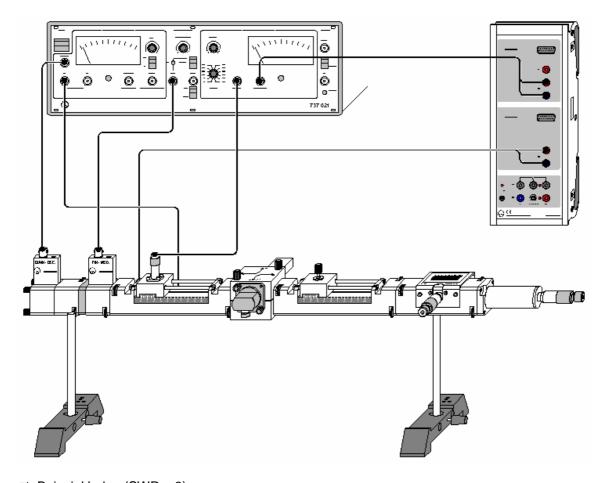

- Beispiel laden (SWR = 3)
- Beispiel laden (SWR = 1.1, angepasst)

#### Versuchsbeschreibung

Die Stehwelligkeit (SWR) ist ein skalares Maß für die Anpassung. In Experimenten mit Mikrowellen bestimmt sie die Leistungsübertragung von der Quelle zur Last und die Höhe der Feldstärke in den Schaltungskomponenten. In den meisten Fällen ist man daher an einem SWR nahe an 1 interessiert. In diesem Versuch wird die Stehwelligkeit verschiedener Hohlleiterabschlüsse verglichen. Als komplexe Mikrowellenlast dient dabei die Reihenschaltung aus einstellbarem Dämpfungsglied (verändert den Betrag der Reflexionen) und einstellbarem Kurzschluss-Schieber (verändert die Phase der Reflexionen). Für den Fall einer mittleren Stehwelligkeit (SWR etwa 3) wird eine Verbesserung der Anpassung mit Hilfe eines Gleitschraubentransformators durchgeführt.

#### **Benötigte Geräte**

1	Sensor-CASSY	524 010
1	CASSY Lab	524 200
1	Gunn-Oszillator	737 01
1	Koax-Detektor	737 03
1	Übergang Hohlleiter / Koax	737 035
1	Gunn-Versorgung mit SWR-Meter	737 021
1	PIN-Modulator	737 05
1	Einwegleitung	737 06
1	Dämpfungsglied, einstellbar	737 09
1	Kurzschluss-Schieber	737 10
1	Messleitung	737 111
1	Gleitschraubentransformator	737 13
1	Hohlleiterabschluss	737 14



1	Kreuzkoppler	737 18
2	Stütze für Hohlleiterkomponenten	737 15
4	HF-Kabel, 1 m	501 02
2	Messkabel BNC/4 mm-Stecker	575 24
2	Stativfuß MF	301 21
1	Buch: Mikrowellenausbreitung in Hohlleitern	568 731
1	PC ab Windows 95/98/NT	

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Versuchsaufbau und Verkabelung wie oben dargestellt vorbereiten und Gunn-Versorgung einschalten. Bitte beachten Sie besonders:

- Verbindungen zwischen Versorgungsgerät und Gunn-Oszillator, PIN-Modulator und Messleitung (INPUT) mit HF-Kabeln mit BNC Stecker/Stecker.
- Verbindungen zwischen Versorgungsgerät (AMP OUT) und der Messleitung (Ausgang X) zum Sensor-CASSY mit Messkabeln BNC/4mm-Stecker.
- Gunn-Spannung am Versorgungsgerät auf UG = 10 V einstellen.
- Versorgungsgerät, MODULATION: auf PIN INT stellen.
- Messleitung INPUT mit Versorgungsgerät RECORDER X verbinden.
- Kreuzkoppler mit Doppelkreuz-Blende montieren. Tor 1 an Messleitung. Tor 2 an Gleitschraubentransformator. Tor 3 an Übergang Hohlleiter / Koax. Tor 4 an Hohlleiterabschluss.
- Einstellschraube des Gleitschraubentransformators weit aus dem Hohlleiter herausdrehen. Position des Schiebers beliebig.
- Theorie und Versuchsdurchführung zu diesem Thema sind ausführlich im Handbuch beschrieben (vgl. Seite 27ff).

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Messschieber der Messleitung (737 111) nach rechts (x = 75 mm) schieben.
- Zahlenwert der angezeigten Spannung UB1 mit der Maus in Anzeigeinstrument Spannung U75 ziehen (Drag & Drop, rechter Kalibrierpunkt für Positionsmessung).
- Messschieber des Messleitung (737 111) nach links (x = 25 mm) schieben.
- Zahlenwert der angezeigten Spannung UB1 mit der Maus in Anzeigeinstrument Spannung U25 ziehen (Drag & Drop, linker Kalibrierpunkt für Positionsmessung).
- Messschieber nach links (x = 10 mm) schieben.
- Dämpfungsglied auf 0 dB stellen.
- Messung mit F9 starten.
- Messschieber langsam nach rechts schieben.
- Evtl. Verstärkung v/dB und / oder ZERO nachstellen, bis gewünschtes Messsignal vorliegt. Die Einstellungen für die weiteren Versuche unverändert halten!
- Nach Aufnahme Feldverlaufs Messung mit F9 wieder stoppen.

#### Auswertung

Mit der freien Anpassung und der Formel für den Verlauf der elektrischen Feldstärke E

A\*sqr(cos(360/B\*x+D)^2+1/C^2\*sin(360/B\*x+D)^2)

oder in technischer Notation

$$A \cdot \sqrt{\left[\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda_g} \cdot x + \varphi\right)\right]^2 + \frac{1}{SWR^2} \left[\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda_g} \cdot x + \varphi\right)\right]^2}$$

mit

A: Amplitude der elektrischen Feldstärke

λg: Hohlleiterwellenlänge

SWR: Stehwelligkeit

φ: Phasenverschiebung

lassen sich die Wellenlänge  $\lambda_g$ =B im Hohlleiter sowie die Stehwelligkeit SWR=C direkt aus den Messergebnissen berechnen.





Die Anfangswerte speziell für die Wellenlänge  $\lambda_g$ =B und für die Stehwelligkeit SWR=C müssen sinnvoll gewählt sein (hier B=45 mm und C=10), weil sonst die freie Anpassung kein Ergebnis oder nicht das beste Ergebnis findet. Durch Doppelklick auf eine angepasste Kurve lässt sich diese wieder verwerfen. Danach kann die Anpassung mit anderen Anfangswerten wiederholt werden.


#### Varianten

- Aufnahme der Stehwelligkeit bei reduzierter Reflexion. Durch Verstellen des Dämpfungsgliedes (a > 0 dB) wird das SWR verringert.
- Verbesserung der Anpassung durch Gleitschraubentransformator.
- Dämpfungsglied auf a=3 dB einstellen. Reflektiert werden jetzt nur noch 25 % der einfallenden Mikrowellenleistung. Der Reflexionsfaktor beträgt r=0,5 und das SWR beträgt 3.
- · Verhältnisse durch neue Messung verifizieren.
- Koax-Detektor an den Übergang Hohlleiter / Koax schrauben. Es wird nur noch das reflektierte Signal gemessen.
- Eindringtiefe und Position der Einstellschraube des Gleitschraubentransformators verändern und damit reflektiertes Signal minimieren.
- Koax-Detektor wieder an die Messleitung schrauben und SWR-Verlauf erneut messen.

#### Hinweis

Die gemessene Spannung UA1 proportional zur Mikrowellenleistung. Unter der Annahme einer quadratischen Kennlinie für den Koax-Detektor kann sie in die elektrische Feldstärke E ∞ sqr UA1 umgerechnet werden. Da die Detektorkennlinie nicht kalibriert ist, ist der Zahlenwert von E willkürlich.

#### **Antennentechnik**

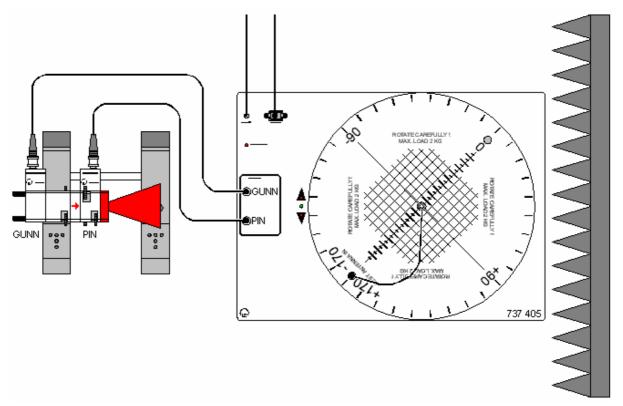

 $\blacksquare$  Beispiel laden (horizontales Richtdiagramm eines  $\lambda/2$ -Dipols)

#### Sicherheitshinweise

Bedingt durch die geringe Leistung des Gunn-Oszillators (ca. 10 mW) ist eine Gefährdung für die Experimentierenden bei Antennenversuchen ausgeschlossen. Im Hinblick auf den Umgang mit stärkeren HF-Quellen sollen aber folgende Regeln beachtet werden:

- Das direkte "Hineinschauen" in die strahlende Sendeantenne ist unbedingt zu vermeiden. Das gilt auch für freie Hohlleiterenden und Hornantennen.
- Bei Veränderungen am Versuchsaufbau, bei denen Hohlleiterkomponenten ausgetauscht werden, ist die Versorgungsspannung des Gunn-Oszillators abzuklemmen.

#### Versuchsbeschreibung

Antennen dienen der Ausstrahlung oder dem Empfang elektromagnetischer Wellen. Sie müssen dazu die leitungsgeführte Welle der Speiseleitung in eine Freiraumwelle umsetzen. Antennen sind daher Übergangsstrukturen, die Leitungen und den freien Raum miteinander verbinden. Von großem Interesse sind die Strahlungseigenschaften einer Antenne, die je nach Einsatzzweck in Rundfunk, Richtfunk oder Radar sehr unterschiedlich sein können. Weit verbreitet sind z. B. Antennen mit starker Richtwirkung.

Es wird die Benutzung des Antennenmessplatzes T 7.6.1 mit dem Antennendrehtisch (737 405) erläutert. Am Beispiel einer  $\lambda/2$ - Dipolantenne wird die Aufnahme von Richtdiagrammen gezeigt. Für die Messungen an allen anderen Testantennen (Ausstattungen T 7.6.2 bis T 7.6.5) wird auf das Versuchshandbuch T 7.6 Antennentechnik (568 701) verwiesen. Zusätzliche Hinweise sind der Gebrauchsanweisung zu 737 405 zu entnehmen.

#### **Benötigte Geräte**

1	Antennendrehtisch	737 405
1	Gunn-Oszillator	737 01
1	Einwegleitung (empfehlenswert)	737 06
1	PIN-Modulator (empfehlenswert)	737 05
1	Große Hornantenne	737 21



2 Stativfüße MF 301 21 1 Satz Noppenabsorber 737 390 1 Satz Dipolantennen 737411

1 PC ab Windows 95/98/NT

#### Versuchsaufbau (siehe Skizze)

Bauen Sie den Versuch nach Skizze auf. Benutzen Sie zum Aufstellen des Senders (Mikrowellen-komponenten) die mitgelieferten Stativstangen mit 345 mm Länge. Zusätzliche Hinweise siehe Gebrauchsanweisung zu 737 405. Die Entfernung ro zwischen der Quellen- und der Testantenne soll i.d.R. die Fernfeldbedingung erfüllen. Für Dipolantennen ist das ab ro > 100 cm meistens erfüllt. Der in den Einstellungen A zu findende Fernfeld-Rechner bestimmt nach Eingabe von DT (größte Quer- oder Längsabmessung der Testantenne) den Mindestabstand ro für den Übergang ins Fernfeld.

Testantenne ( $\lambda$ 2-Dipol) in die Zentralaufnahme für Steckachsen im Antennendrehtisch stecken, sodass die Achse ausgerichtet zu den markierten Referenzlinien auf dem Drehteller verläuft. Verbinden Sie die BNC-Ausgangsbuchse der Testantenne durch ein Koaxkabel mit der BNC-Buchse TEST ANTENNA IN im Drehteller. Stellen Sie die Antenne mit ihrer Hauptstrahlrichtung in die 0° Position. Schalten Sie den Antennendrehtisch durch Anschluss des Steckernetzteils ein. Der Drehtisch fährt in die Startposition -180°.

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Falls noch nicht geschehen, den Antennendrehtisch als angeschlossenes Gerät auswählen. Dazu in den Allgemeinen Einstellungen den Antennendrehtisch auf die gewünschte Serielle Schnittstelle legen. Danach speichert **Neue Vorgaben abspeichern** diese Belegung ab.
- Wenn notwendig in den Einstellungen A die Einstellungen des Antennendrehtischs ändern. Bei Verwendung der Dipolantenne muss dort der Biasstrom eingeschaltet sein. Falls kein PIN-Modulator vorhanden ist muss auf Gunn-Modulation geschaltet werden.
- Messung durch F9 (Stoppuhr) starten. Nach kurzer Pause läuft der Drehtisch in Vorwärtsrichtung an, wobei jetzt die eigentliche Messung des Richtdiagramms stattfindet. Der Drehtisch beginnt unmittelbar nach Erreichen des eingestellten Endwinkels den Rücklauf in die Startposition.
- In den Einstellungen A durch **Pegel normieren** A(ϑ) auf 1 normieren

#### **Auswertung**

Die Beispielmessung zeigt das horizontale Richtdiagramm eines  $\lambda/2$ -Dipols. In den Einstellungen A wurde das Maximum der Messkurve auf 0° ausgerichtet. Die schwarze Kurve zeigt die Messkurve und die rote Kurve das theoretische Richtdiagramm. Die theoretische Kurve wurde durch eine freie Anpassung (siehe unten) berechnet.

#### **Anmerkungen**

- Die Symmetrieachse der Testantenne und der Mittelpunkt des Drehtellers müssen fluchten. Bei Antennen die in die Zentralaufnahme des Drehtellers gesteckt werden, ist das i. A. erfüllt. Es gibt jedoch auch Testantennen, die mit Hilfe von Stativmaterial montiert werden. Die Antenne muss dann sorgfältig über dem Mittelpunkt des Drehtellers ausgerichtet werden, damit beim Drehen keine exzentrischen Bewegungen auftreten (ergibt Asymmetrien der Richtdiagramme).
- Wenn die Hauptkeule der Testantenne im Richtdiagramm bei 0° liegen soll, dann muss die Testantenne mit ihrer Hauptstrahlrichtung auf 0° ausgerichtet werden und in die gleiche Richtung wie die Sendeantenne weisen. Sie "blickt" dann mit ihrer "Rückseite" zur anregenden Quellenantenne hinüber. Der Grund ist verfahrenstechnischer Natur: Die Hauptstrahlrichtung wird so in einem Durchlauf gemessen und nicht in 2 Hälften zerlegt. Umweltbedingte Systemveränderungen stören so die wichtige Region der Hauptkeule weniger.
- Je nach Testantenne kann die Messung mit unterschiedlich hoher Winkelauflösung durchgeführt werden. Grundsätzlich gilt: Komplizierte Antennen mit vielen oder engen Keulen müssen mit hoher Auflösung gemessen werden.
- Sie k\u00f6nnen den Messvorgang gleichzeitig auf den ein / ausblendbaren Messinstrumenten (z. B. f\u00fcr Winkel, Spannung und Pegel) und in der grafischen Darstellung beobachten. In der grafischen Darstellung baut sich das Richtdiagramm schrittweise auf (kartesische Koordinaten oder Polardiagramm mit frei w\u00e4hlbaren Achsen). Die Skalierung kann mit der linken Maustaste verschoben und mit der rechten Maustaste ver\u00e4ndert werden.



 Das eigentliche Antennensignal A vor dem Detektor kann nicht direkt gemessen werden sondern nur der Spannungsabfall U, den der Detektorstrom am Messverstärker erzeugt. Im Allgemeinen ist U nicht proportional zu A, sondern

$$U \propto A^m$$

Der Exponent m beschreibt die Detektorcharakteristik. Wird das Antennensignal A in den Einstellungen A durch **Pegel normieren** A( $\vartheta$ ) auf 1 normiert, dann gilt:

$$A = \left(\frac{U}{U_{\text{max}}}\right)^{\frac{1}{m}}$$

$$a = 20 \cdot \log(A)$$

wobei Umax die maximal gemessene Spannung U ist.

Der Exponent m ist von der Leistung der einfallenden Mikrowellen abhängig. Im Bereich kleiner Leistungen ist m=2. Damit gilt dann:

$$U \propto A^2$$

Die Annahme des Quadratgesetzes für den Detektor gilt erfahrungsgemäss nur bei sehr kleinen Mikrowellenleistungen, bzw. Empfangsspannungen U < 5 mV. Das Antennenmesssystem erlaubt jedoch auch die Eingabe anderer Detektorcharakteristiken. Streng genommen muss die Gültigkeit der Kennlinienauswahl überprüft werden. Das setzt ein einstellbares Dämpfungsglied (737 09) voraus, mit dem das Antennensignal vor dem Detektor definiert abgeschwächt werden kann.

#### Weitere Messbeispiele

Messungen mit PIN-Modulator und Einwegleitung

- $1\lambda/2$ -Dipol
- $\blacksquare$  1 $\lambda$ /2-Dipol (vertikal)
- 2λ/2-Dipol
- 3λ/2-Dipol
- 4λ/2-Dipol
- 8λ/2-Dipol
- Wendelantenne, rechtsdrehend
- Yagiantenne mit 4 Direktoren und 1 Reflektor
- Yagiantenne mit 4 Direktoren und 1 Reflektor (vertikal)
- Yagiantenne mit 1 Direktor und 1 Reflektor
- Yagiantenne mit 1 Direktor
- Yagiantenne mit 1 Reflektor
- Darstellung der elektronischen Strahlschwenkung (Phase Array) an der Hohlleiterschlitzantenne (737 424)

#### Messungen ohne PIN-Modulator, mit direkter Gunn-Modulation

- 1λ/2-Dipol, der kleinere Modulationsgrad bei direkter Modulation führt auf deutlich schwächere Empfangssignals und einen entsprechend verringerten Signal / Rauschabstand
- Wendelantenne, linksdrehend
- Yagiantenne mit 4 Direktoren und 1 Reflektor

#### Formeln in Richtdiagrammen

Messergebnisse können mit ihren theoretischen Richtdiagrammen verglichen werden, falls eine geeignete Formel zugänglich ist oder abgeleitet werden kann. Der Einsatz von Formeln kann unterschiedlich erfolgen:

- Die Formel wird als neue Größe definiert. Dann müssen alle Parameter der Formel selbst eingegeben werden.
- Die Formel wird zur Durchführung einer freien Anpassung eingesetzt. Dabei werden bis zu 4 Parameter der Formel vom Programm automatisch so variiert, dass die beste Übereinstimmung der Messergebnisse mit der Formel erreicht wird. Diese Methode ist für Antennenmessungen sehr elegant und soll nachfolgend kurz erläutert werden.

#### Freie Anpassung für Richtdigramme

Nach erfolgter Messung mit dem Antennendrehtisch benötigt die freie Anpassung folgende Schritte:

- Kartesische Darstellung wählen (dazu mit rechter Maustaste im Diagramm Achsenbelegung ändern und unter der x-Achse die Schaltfläche Polar ausschalten)
- Freie Anpassung wählen (dazu mit rechter Maustaste im Diagramm Anpassung durchführen und Freie Anpassung wählen)
- Formel im Eingabefeld eingeben, aus der Liste auswählen oder über die Zwischenablage kopieren (über Kopieren und Einfügen, z. B. auch die untenstehenden Beispiele), dabei aber nur die reine Formel markieren.
- Startwerte für A, B, C und D eingeben. Dabei möglichst vernünftige Werte abschätzen (siehe untenstehende Beispiele).
- Ergebnis automatisch als neuen Kanal (Parameter) darstellen markieren. Dies erzeugt bei der Auswertung eine neue Spalte in der Tabelle mit den berechneten Werten des theoretischen Richtdiagramms.
- Bereich markieren wählen und gesamte Messkurve mit der linken Maustaste markieren. Danach wird die Anpassung durchgeführt und die beste gefundene Approximation der Formel an die Messwerte dargestellt.
- Polardarstellung wählen (dazu mit rechter Maustaste im Diagramm Achsenbelegung ändern und unter der x-Achse die Schaltfläche Polar wieder einschalten)

#### **Beispiele**

Hinweis: Die in den folgenden Beispielen angegebenen Formeln können einfach mit dem Cursor markiert und in das Eingabefeld kopiert werden.

#### 1 Technische Dipole

$$A* \frac{\cos\left(\frac{\pi*I_{el}}{\lambda_0}\right)*\sin(\vartheta+\vartheta_0)-\cos\left(\frac{\pi*I_{el}}{\lambda_0}\right)}{\cos(\vartheta+\vartheta_0)}$$

Die Formel beschreibt die Abhängigkeit des Richtdiagramms vom Polarwinkel bei einer Dipolantenne mit angenommener sinusförmiger Stromverteilung auf den Antennenleitern. Nicht berücksichtigt werden Verzerrungen durch Stromverdrängung infolge eines geringen Schlankheitsgrades (endliche Dicke der Antennenleiter).

- ϑ Polarwinkel
- ϑo Winkelversatz
- lei elektrische Länge des Dipols (ohne Berücksichtigung der Verkürzung)
- λο Wellenlänge im freien Raum

#### Kopierformel

#### A\*abs((cos(180\*B/32\*sin(x+D))-cos(180\*B/32))/cos(x+D))

- x Polarwinkel ϑ
- 32 Wellenlänge im freien Raum in mm (λ0 = 32 mm für 9,40 GHz).

Das Programm optimiert aus den Messwerten:

- A Amplitudenanpassung
- B elektrische Länge lei
- D Winkelversatz № (Abweichung der Antenne von der Bezugsrichtung)

#### Startwerte für die Parameter A, B und D

Antenne	Α	B/mm	D/Grad
λ/2-Dipol	1	16	0
λ-Dipol	1	32	0
3λ/2-Dipol	1	48	0
2λ-Dipol	1	64	0
4λ-Dipol	1	128	0

#### 2 Yagiantennen

#### 2.1 Yagis mit nur einem parasitären Element

Yagi-R: Dipol und 1 Reflektor

· Yagi-D: Dipol und 1 Direktor

Beide Fälle werden näherungsweise durch das Richtgramm eines Dipols vor einer leitenden Fläche (Reflektor) beschrieben:

$$A*\left|\cos(\vartheta+\vartheta_0)\right|*\left|\cos\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi*a}{\lambda_0}*\cos(\vartheta+\vartheta_0)\right)\right|$$

A Amplitudenanpassung

a Abstand zwischen Dipol und Reflektor

ϑ Polarwinkel

λο Wellenlänge im freien Raum

#### **Kopierformel**

#### A\*abs(cos(x+B))\*abs(cos(C+D\*cos(x+B)))

Der Faktor **A\*cos(x+B)** entspricht dem Richtdiagramm eines Hertzschen Dipols. Dieser ideale Strahler ist im Vergleich zur Wellenlänge so kurz, dass auf ihm die Stromverteilung konstant angenommen werden darf. Der Faktor **abs(cos(C+D\*cos(x+B)))** beschreibt die Wirkung des parasitären Elements (Reflektor oder Direktor).

x Polarwinkel ϑ

#### **Startwerte**

A =1 Amplitudenanpassung

B =0 Winkelversatz ϑo, Abweichung der Antenne von der Bezugsrichtung

C =90 Phase

D =60 Konstruktiv bedingter Faktor, berücksichtigt das Verhältnis a/λο

#### 2.2 Yagis mit mehreren parasitären Elementen

Diese Fälle werden näherungsweise durch das Richtdiagramm eines Einzeldipols und sogenannte Gruppenfaktoren (hier: horizontaler Gruppenfaktor) beschrieben:

$$A*|\cos(\vartheta)|* \frac{\left|\cos\left(n*\left(\frac{\beta_0}{2} + \frac{\pi*a}{\lambda_0} * \cos(\vartheta)\right)\right)\right|}{\cos\left(\frac{\beta_0}{2} + \frac{\pi*a}{\lambda_0} * \cos(\vartheta)\right)}$$

A Amplitudenanpassung

n Anzahl der Yagi Elemente, einschließlich Dipol

Mittlerer Abstand zwischen den parasitären Elementen (Direktoren, Reflektor)

βo Phasenwinkel

∂ Polarwinkel

λο Wellenlänge im freien Raum

#### **Kopierformel**

#### A\*abs(cos(x))\*abs(cos(B\*(C+D\*cos(x)))/cos(C+D\*cos(x)))

#### x Polarwinkel

#### Startwerte

A =0,4 Amplitudenanpassung

B =3 (6) Anzahl der Strahlerelemente einschließlich Dipol n (konstant wählen)

C =-60 (-20) Phasenwinkel β0

D =50 (36) Konstruktiv bedingter Faktor, berücksichtigt das Verhältnis a/λο



#### 3 Schlitzantenne

Das horizontale Richtdiagramm einer Schlitzantenne enthält die Faktoren D\*H\*R:

- D Richtdiagramm des Einzelstrahlers
- H Horizontaler Gruppenfaktor
- R Reflektorfaktor

$$A*\left|\sin(\vartheta+\vartheta_{0})\right|*\left|\frac{\sin\left(\frac{n*\pi*b}{\lambda_{0}}*\cos(\vartheta+\vartheta_{0})\right)}{\sin\left(\frac{\pi*b}{\lambda_{0}}*\cos(\vartheta+\vartheta_{0})\right)}\right|*\left|2*\cos\left\{\frac{\pi}{4}*\left(-1+\sin(\vartheta+\vartheta_{0})\right)\right\}\right|$$

- A Amplitudenanpassung
- n Anzahl der strahlenden Schlitze
- b Schlitzabstand (halbe Hohlleiterwellenlänge λG/2)
- ∂ Polarwinkel
- ϑo Winkelversatz
- λο Wellenlänge im freien Raum

#### Kopierformel


A\*abs(sin(x+B))\*abs((sin(D\*180\*C/32\*cos(x+B))/sin(180\*C/32\*cos(x+B)))\*cos(45\*(-1+sin(x+B))))

x Polarwinkel ϑ

#### Startwerte

- A =1 Amplitudenanpassung
- B =0 Winkelanpassung ϑ0
- C =23 Schlitzabstand b
- D =7 Anzahl der Schlitze n (konstant wählen)

#### **Antriebstechnik**

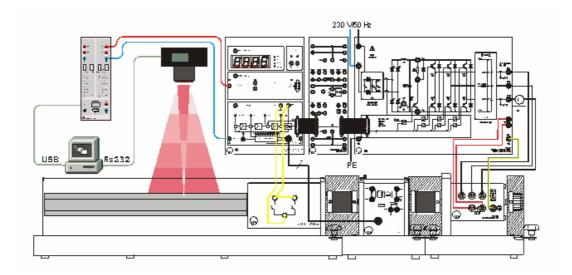

#### ■ Beispiel laden

#### Sicherheitshinweise

Machen Sie sich vor der Inbetriebnahme mit den jeweiligen Geräten und den Bedienungsanleitungen unbedingt vertraut!

Beachten Sie die Verbindung der Endschalter der Lineareinheit mit dem Steuergerät Sinuskommutierung!

#### Versuchsbeschreibung

Servoantriebe werden häufig zu Positionierzwecken eingesetzt. In diesem Versuch treibt ein sinuskommutierter AC-Servo eine Lineareinheit an, die das zu positionierende Werkstück bewegt. Im Rahmen der Positionsregelung mit "direkter Positionierung" registriert die Kamera VideoCom mit einer einzeiligen CCD (Charge-Coupled Device) die Regelgröße "Position". Die Software erfasst diese und berechnet die Stellgröße "Spannung" für den AC-Servo anhand der im PC vorgegebenen Führungsgröße.

Zur Bewegungsaufnahme wird das simulierte Werkstück mit einem Streifen retroreflektierender Folie versehen. Durch die Beleuchtung mit LED-Blitzen werden ihre Reflexe von VideoCom erkannt und den realen Positionen des Körpers zugeordnet. Durch die Wiederholung in regelmäßigen Zeitabständen lässt sich die lineare Bewegung hochauflösend und berührungslos erfassen.

#### **Benötigte Geräte**

1 PC ab Windows 98/2000

1	Profi-CASSY	524 016
- 1		
1	CASSY Lab	524 200
1	VideoCom	337 47
1	Universal-Umrichter 3x230 V	735 297
1	Steuergerät Sinuskommutierung	735 293
1	AC-Servomotor	731 994
1	Resolver	731 094
1	Lineareinheit	731 085
2	Kupplungsabdeckungen	731 081
1	Wellenendabdeckung	731 071
2	Kupplungen 0,1/0,3	731 06
1	Kamerastativ, z. B.	300 59
	diverse Sicherheitsexperimentierkabel	

Zum Netzanschluss des Universal-Umrichters ist eine Einphasenanschlusseinheit (z. B. 726 71) empfehlenswert.



#### Versuchsaufbau

Bauen Sie den Versuch gemäß der Skizze auf. Schließen Sie das Profi-CASSY an eine USB-Schnittstelle und die VideoCom an eine serielle RS232-Schnittstelle des PC an. Kuppeln Sie die Lineareinheit zunächst noch **NICHT** an den Antriebsstrang an! Kuppeln Sie den AC-Servomotor und den Resolver wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben und nehmen Sie die Anlage in Betrieb. Drehen Sie den Schlitten der Lineareinheit manuell etwa in die Mitte. Die Kamera befestigen Sie an einem Stativ etwa 1 m mittig über der Lineareinheit. Schalten Sie das Steuergerät Sinuskommutierung in die Betriebsart "Drehzahlregelung".

#### Versuchsdurchführung

- Einstellungen laden
- Falls noch nicht geschehen, VideoCom als angeschlossenes Gerät auswählen. Dazu in den Allgemeinen Einstellungen VideoCom auf die gewünschte serielle Schnittstelle legen. Danach speichert Neue Vorgaben abspeichern diese Belegung ab.
- Wenn in dem Fenster für die Regelgröße Strecke s kein Wert angezeigt wird, justieren Sie die Kamera so, dass die Position angezeigt wird.
- Stellen Sie für die Führungsgröße w einen Wert von 0,5 m ein.
- Messung durch F9 (Stoppuhr) starten. Der Motor läuft an. Drehen Sie nun die Positioniereinheit manuell soweit, bis der Motor stehen bleibt.
- Nun kuppeln Sie die Positioniereinheit und den Antriebsstrang zusammen und können durch Verändern der Führungsgröße w Positionsvorgaben einstellen, die dann angefahren werden.
- Sie können nun die Reglerparameter Kp und Tn verändern und die Auswirkung auf die Regelung beobachten. Ebenso können Sie am Steuergerät Sinuskommutierung Grenzen für Drehzahl und Strom einstellen (siehe hierzu die Gebrauchsanweisung).



# Stichwortverzeichnis

#### —A—

Ableitung 25

Absorption 258, 261, 269, 270, 394

Abstand 88

Abstandsgesetz 239

Achsen 18

Achsenbelegung 17, 26

Addition 23

Akima 18

Aktivierungsparameter 362

Akustik 140, 142, 157, 159

Allgemein 28

alpha 256

Altersbestimmung 263

Aluminium 269

Americium 256

Amontons 376

Amperedefinition 178

Analogausgang 49, 50

Analogeingang 48

Anhängen 13

Anpassung 20

Antennendrehtisch 66

Antennentechnik 444

Antriebstechnik 450

Äquivalent-Leitfähigkeit 382

Äquivalenzpunkt 21

ASCII 63

Aufladung 194, 196, 198

Ausgang 42

Auswertungen 17

Automatische Aufnahme 13

Automatische Titration 329, 332

### <u>—В—</u>

Balken 18, 26

Bandpass 210

Beta-Spektrum 273

Bewegung 68, 70, 72, 74, 76

Bewegungen 92, 94, 96, 98, 111

Bewegungsgleichung 98, 111

Biologie 402

Blei 269

Blutdruck 412

Bordcomputer 428

Boyle-Mariotte 376

Bunsenbrenner 292

# —C—

CAN-Bus 430, 432 CASSY 24 CASSY Lab 9 CASSY-Display 51, 418 CE2 391 Chemie 291 Chlorophyll 342 CO2 399 Compton-Effekt 248, 275 Coulombsches Gesetz 170

### —*D*–

Darstellung 26

Data Logger 65

Datenlogger 51

Delphi 8

Diastole 21

Differenz 19

Differenzialgleichungen 27

Differenzthermoanalyse 367

Digitalausgang 50

Digitaleingang 50

Digitales Spektralphotometer 65

Diode 220

Dissoziationsgrad 386

Dissoziationskonstante 386

Dreharm 115

Drehimpuls 113

Druck 376

# —Е—

Eichung 19

Eingang 41

Einhüllende 20

Einkanal-Analysator 284

Einstellungen 24, 25, 26, 27, 28, 36, 41, 42, 45, 48,

49, 50

EKG 407

Elektrokardiogramm 407

Elektromyogramm 410

Elementarladung 245

EMG 410

Energie 19, 100, 113

Energie, elektrisch 164

Energie, mechanisch 161

Energie, thermisch 161, 164 Energiekalibrierung 267

Energieverlust 261

Energieverlust in Materie 273

Entfernung 19

Enthalpie 367

Entladung 194, 196, 198

Enzym 346

Erstarrungspunkt 310, 313

Essigsäure 303, 326, 386

Essigsäureethylester 358, 362

Exponentialanpassung 20



Faraday 181, 184 FCKW 396

Festkörper 126, 151, 286

FFT 25, 138, 153, 155

Filter 210, 213, 216

Fliehkraft 115, 117

Flüssigkeit 132, 135



Formel 13, 25, 30, 33 Formfaktor 20 Fourier Transformation 25 Fourier-Transformation 153, 155 Freie Anpassung 20 Freier Fall 107, 109 Freischaltcode 9 Frequenzanalyse 153, 155 Funktionsgenerator 45, 49

### —G—

Gamma-Spektrum 267, 277 Gas 148 Gaschromatographie 336, 338, 340 Gasgesetze 376 Gaußkurve 23 Gaußkurven 21 Gaußverteilung 20 Gay-Lussac 376 Gedämpfter Schwingkreis 200, 202 Gefrierpunktserniedrigung 316, 370 Gekoppelte Pendel 138 Gekoppelte Schwingkreise 204 Gemischaufbereitung 424 Geradenanpassung 20 g-Leiter 107, 109 Glühlampe 219 Glühstrumpf 279 Grenzleitfähigkeit 382, 386 Gunn-Oszillator 436

#### <u> —Н—</u>

Halbwertszeit 254
Handmessgeräte 65
Harmonische Analyse 153, 155
Harnstoffspaltung 346
Haushaltsessig 323
Hautwiderstand 405
Heißluftmotor 167
Helligkeit 229
Histogramm 25
Hochpass 210, 216
Hohlleiter 441
Hydrolyse 351, 358, 362
Hyperbelanpassung 20
Hysterese 288



I2C 428 Impuls 100, 103, 105 Induktion 181, 184 Installation 7 Integral 20, 25 Interpolation 18 IR 399 IRPD 63



Joule- und Wattmeter 58, 60

#### -K-

Kabelkapazitäten 198 Kalibrieren 41 Kalibrierung 19 Kalium-40 271 Kalorik 161, 164 Kalorimetrie 372 Kältemischung 370 Katalyse 346 Kennlinie 219, 220, 223, 225 Kfz 421, 424, 428, 430, 432 Kinetik 346, 351, 354, 358, 362 Klima 418 Kohlrausch 382, 386 Koinzidenz 281 Kommentar 28 Kondensator 194, 196, 198 Konstante 25 Konzentration 323 Koordinaten 17 Kopieren 16, 22 Korrigieren 41 Kraft 170, 173, 176, 178 Kristallwasser 367 Kryoskopie 316

#### —L—

Lebensmittel 295
Leistung 190, 192, 225
Leitfähigkeit 326, 329, 346, 351, 358, 362, 379, 386
Leitung 286
Licht 239
Lichtgeschwindigkeit 241, 243
Lichtschranke 92, 94
Lineale 18
Linien 18
Linienbreite 18
Löschen 14, 16, 22
Luft 135, 144, 146
Luftdruck 258
Lungenvolumen 416

#### -M-

Magnetfeld 173, 176, 184 Manuelle Aufnahme 13 Marinelli-Becher 271 Markierung 19 Marmor 344, 354 Masse 344 mehrwertige Säure 306 Messbedingung 13 Messbereich 36 Messgrößen 36, 37 Messparameter 13, 15 Messreihe 16 Messung 13, 15 Messzeit 13, 15 MetraHit 64 Mikrowellenleitung 441 Mikrowellentechnik 436 Millikan 245 Mischpräparat 265



Mittelwert 19, 25 Mobile-CASSY 55, 56, 57 Modellbildung 27, 109, 123, 126, 129, 132, 135, 196, 202, 208, 213, 216 Modulation 434 Molmassenbestimmung 316 Motorbürette 329 Multigrafik 13



NaH2PO4 329 Natriumchlorid 382 Natronlauge 320, 326 Netzwechselspannung 192 Newton 98, 111 Newtondefinition 96 NH3 329



Ohmsches Gesetz 78, 80, 82 Ostwald 386 Ozon 396



Parabelanpassung 20 Parallelschaltung von Widerständen 82 Parameter 25 PCM 434 Peakintegral 20 Peakschwerpunkt 20 Pendel 119, 121, 123, 126, 129, 132, 135, 138 pH 323, 326, 329 pH-Messung 295, 299 Phosporsäure 306 Photometer 65, 342 Physik 90 PI-Regler 227, 229, 231 pKa-Wert 303 Pocket-CASSY 52, 53, 54 Poissonverteilung 20, 252 Polar 26 Potentiometer 84, 86 Power-CASSY 43, 44, 45 Profi-CASSY 46, 47, 48, 49, 50 Puffer 306 Puls 403 pV-Diagramm 167



Quantisierung 434



Radio 428 Radium 277 Radon 254 Raster 18

Reaktionsordnung 346, 351, 354, 358 Reaktionszeit 414 Regelung 227, 229, 231 Reibung 126, 129, 132, 135 Reibungsarbeit 161 Reibungskraft 161 Reichweite 258 Reihenschaltung von Widerständen 80 Reinigungsmittel 299 Rektifikation 391 Relais 42 Resonanz 206, 208



Röntgenstrahlung 248

Saitenschwingungen 142 Salzsäure 320, 344, 354 Schallgeschwindigkeit 144, 146, 148, 151 Schmelze 313 Schmelzenthalpie 372 Schmelzkurve 310, 313 Schmelzpunkt 310 Schmiermittel 129 Schnittstelle 28 Schriftgröße 16 schwache Base 329 schwache Säure 326, 329 Schwächung 270 Schwebungen 140 Schwingung 119, 123, 126, 129, 132, 135, 138, 200, 202, 204, 206, 208 Schwingungsdauer 121 Schwingungsfrequenz einer Saite 142 Senkrechte Linie 19 Sensorbox 36, 37 Sensor-CASSY 34, 35, 36, 37, 41, 42 Sensoreingang 36, 37, 41 Serielle Geräte 63, 64, 65, 66 Servotechnik 450 sinc 18 Software 8 Solarzelle 225 Sonnenschutz 394 Spaltenbelegung 16, 26 Spannkraft 142 Spannung 231 Spannungsquelle 42 Spannungsstoß 181 Spannungsteiler 84, 86 Speed-Buttons 9 Speichenrad 96 Spektrum 265, 342

starke Säure 320 Stehwelligkeit 441 Stofftrennung 391 Stoß 100, 103, 105, 113 Subtraktion 23 SVN 67 Syntax 30 Systole 21

Spirometrie 416 Sprache 28

starke Base 320, 326





Tabelle 16 Tabellenzeile 16 Technik 420 Technische Daten 35, 44, 47, 53, 56, 60, 62 TEM-Moden 438 TE-Moden 438 Temperatur 227, 292, 310, 376 Temperaturmessgerät 64 Text 19 thermische Trennverfahren 391 Thorium 279 Tiefpass 210, 213 Titration 320, 323, 326, 329, 332 Tochternuklide 263 Tonanalyse 157 Tonsynthese 159 Trafoeisen 288 Transformator 188, 190 Transistor 223 Treibhaus 399 Trennung von Alkanen aus Feuerzeuggas 336 Trennung von Alkoholen 338 Trennung von Luft 340 Trigger 13 Tropfenzähler 332



Umweltradioaktivität 271 Universelles Messinstrument Physik 61, 62 Untergrund 23 Unterkühlen 313 Urease 346 UV 394, 396



VideoCom 63 Volumen 376



Waage 63, 344, 354
Waagerechte Linie 19
Wellenoptik, Beugung am Einzelspalt 233
Wellenoptik, Beugung an Mehrfachspalten 236
Welligkeit 21
Werte 18
Wheatstone Messbrücke 86
Widerstand 286
Winkelabhängigkeit 275
Winkelkorrelation 281



Zählrate (VKA-Box) 23 Zeitintervall 13 Zentrifugalkraft 115, 117 Zerfallskette 263 Zoom 18 Zündung 421 Zweiplattenleitung 438 Zweipunktregler 227 Zwischenablage 16, 22